

Riiviva®

Microdermabrasie

Handleiding

- 3 vacuüm snelheden
- Vervangbare diamanten tips
- Vervangbare cellulitis[®] koppen
- Verwijderbare filters
- Gezicht en lichaam behandeling
- reistasje
- filters en pincet
- te gebruiken draadloos of met snoer
- 2 jaar garantie

Belangrijke waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Wij raden de volgende basis voorzorgsmaatregelen en veiligheidsregels aan, vooral bij gebruik met water of in het bijzijn van kinderen.

Voordat u het apparaat in gebruik neemt, dient u alle instructies te lezen.

- 1 Plaats het apparaat niet in het water of andere vloeibare stoffen.
Het apparaat is niet geschikt voor gebruik in de douche en mag niet in water of vloeistof gedompeld worden.
- 2 Indien de kabel of stekker met water in aanraking gekomen is, dient u het apparaat direct van het snoer te ontkoppelen.
- 3 Plaats het apparaat nooit op een plaats waar het kan vallen in een bad, wastafel of gootsteen.

Om het risico op brandwonden, elektrocutie of verwondingen te voorkomen, lees het volgende:

- 1 Dit apparaat is niet geschikt voor kinderen of mensen met een geestelijke beperking.
- 2 Gebruik dit apparaat alleen op de manier waarop het bedoeld is zoals omschreven in deze handleiding.
- 3 Houdt het snoer altijd uit de buurt van een warmtebron.
- 4 Gebruik het apparaat nooit wanneer u slaapt of in slaap dreigt te vallen.

Gebruik het apparaat nooit nadat het gevallen of beschadigt is of wanneer het snoer of de stekker beschadigt is.

**Als dit het geval is bel direct:
Holland Beauty Company
TEL:076-8871157**



Zorgen voor uw Riiviva

Om uw Riiviva microdermabrasie apparaat in **optimale conditie** te houden en uw garantie te behouden, dient u het volgende regels in acht te nemen.

- Gebruik het apparaat nooit zonder filter.
- Dompel het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik nooit in combinatie met crèmes of andere vloeistoffen.
- Laat de diamant tips nooit vallen of tegen elkaar schuren.
- Probeer het apparaat niet open te maken.
- Laat uw diamanten tips nooit door anderen gebruiken.
- Gebruik nooit accessoires die niet door dezelfde fabrikant zijn gemaakt of worden aanbevolen.

We raden aan de eerste behandelingen aan te vangen met de laagste stand in combinatie met de **fijnste** diamanten tip en de behandelingen in rustig tempo op te bouwen qua intensiteit. Wij raden aan **voorzichtig** met uw huid om te gaan als het gaat om het uitoefenen van druk. Uiteindelijk beheerst u zelf het apparaat en voert u zelf de kracht en druk op. Doe dit altijd met **liefde voor uw huid**.

Wanneer u ernstige huidproblemen heeft en u bent onder behandeling van een arts, raadpleeg altijd eerst uw arts alvorens u een dergelijk apparaat in gebruik wilt nemen.

U mag **geen** gebruik maken van dit apparaat indien u:

- Huidkanker heeft
- Een actief herpes virus heeft
- Een niet stabiel diabetes of auto immuunsysteem heeft
- Verbrand door de zon bent of huiduitslag heeft.
- Open wonden of andere verwondingen heeft.
- Acne of puisten met pusvorming heeft.
- Eczeem of psoriasis of andere soortgelijke klachten heeft.
- Wanneer u bloedverdunners of soortgelijke medicijnen gebruikt zoals medicijnen tegen bloedstolling.
- Wanneer u een plastische chirurgische behandeling heeft gehad raadpleeg dan eerst uw arts.
- Wanneer u last van uw vaatstelsel heeft.
- Tijdens zwangerschap (raadpleeg eerst uw arts)
- Wanneer u middelen tegen hardnekkige acné heeft gebruikt binnen 1 jaar.
- Wanneer u Retina A of Retinol producten of chemische peeling heeft gehad binnen 7 dagen

U dient altijd eerst een test uit te voeren na gelangde kwaliteit van u huid. Probeer eerst een klein stukje en kijk of er een allergische reactie optreed.



Draai de kop om de
diamanten tip te verwijderen

Vervangbare diamanten tip

LED power indicator
(low, medium, high)

Aan/uit knop

Vervangbare filter



Draai om te ontgrendelen

Filter houder

Sleutel gat
(gebruik uw pincet
en draai om te
ontgrendelen)



Microdermabrasie is een effectieve en professionele manier om een gladde, zachte en gezonde huid te krijgen. Tevens een anti veroudering routine. Riiviva biedt de mogelijkheid gedurende dit proces de huid in optimale conditie te houden. De behandelingen kunnen toegepast worden in het gezicht, nek borst, handen, buik, rug, billen, benen en voeten. De huid gaat niet invallen en de behandeling is pijnvrij en vergt niet veel tijd. Om het maximale resultaat te behalen, dient u de behandeling regelmatig te herhalen.

Gebruik

Voor het eerste gebruik dient u het apparaat 24 uur op te laden.

-Gebruik de Riiviva cleanser gel om de huid te reinigen en droog de huid daarna grondig.

-Gebruik de achterkant van uw pincet en draai en verwijder de filterhouder.

Plaats het filter en zorg er voor dat het helemaal recht en evenredig op bodem van de filterhouder is geplaatst. Daarna zet u de filterhouder weer op het apparaat.

-Gebruik het apparaat nooit zonder filter in de filterhouder.

-Druk op de aan/uit knop en begin op de laagste stand.

-Kies vervolgens naar wens voor low, medium of high stand.

-Trek de huid strak met de ene hand en laat de diamant tip zachtjes in de tegenovergestelde richting glijden.

-Houdt de diamant tip plat op het te behandelen gebied om de zuigkracht te verdelen.

-Ga niet vaker dan 2 tot 4 keer over dezelfde plaats, totdat de huid gewend is aan de behandelingen.

-Houdt de diamant tip niet op 1 plaats terwijl het apparaat zuigt.

Prestaties

Power | vacuüm setting control

De vacuüm stand bepaald de druk tussen de diamant tip en de huid.

Houdt de diamant tip plat op de huid om de juiste zuigkracht te behalen.

Gebruik nooit de vacuüm rondom de ogen of genitaliën.

OFF vacuüm is uit
en LED lampje is uit

LOW lage zuigkracht
1 LED lampje aan

MED medium zuigkracht
2 LED lampjes branden

HIGH maximale zuigkracht
3 LED lampjes branden

Opladen

Uw Riiviva is oplaadbaar met de bijgeleverde oplader.

Een volledig opgeladen Riiviva kan 50-60 minuten gebruikt worden of ongeveer 10-14 5 minuten behandelingen.

Opladen duurt ongeveer 8 uur, echter bij ingebruikname voor de eerstekeer, raden wij 24 uur opladen aan.

U kunt de Riviva ook gebruiken terwijl u het snoer in het stopcontact stopt.

Filterhouder en verwijderen van filter



De achterkant van uw pincet is de sleutel om de filterhouder te openen. Steek de pincet in het "sleutelgat" en draai voorzichtig in de richting van de klok om de houder te verwijderen.



Gebruik uw pincet om het oude filter uit te nemen en gebruik wederom het pincet om het nieuwe filter in de filterhouder te plaatsen.



Diamant tips

Riiviva gebruikt alleen hoogwaardig roetsvrijstalen diamant tips welke ontworpen zijn voor diverse variaties aan huidprestaties en delen van het lichaam.

Face – fine | med | coarse
(fijn – medium en hard)

Precisie – fine | med | coarse
(fijn – medium – hard)

Borst – fine | medium | coarse
(fijn – medium – hard)

KP Keratosis Pilaris – medium | coarse
(medium – hard)

SM Straie – coarse | ex coarse
(hard of minder hard)

Acne (Acne littekens) – med | coarse
(medium – hard)



Reiniging tips

Haal eerst de tip van het apparaat, voordat u de tip gaat reinigen met water.



Gebruik een klein borsteltje (oude tandenborstel) en reinig de tip met zeep en warm water. Wij adviseren een desinfecterende of anti-bacteriële zeep.



Droog de tip grondig alvorens u hem weer op het apparaat plaatst.



Voorzorgsmaatregelen (tips)

Wanneer u na een behandeling naar buiten gaat, raden wij een hoge factor zonnebrand of sunblock aan voor de eerste 2 tot 3 dagen.

Om uw huid de optimale verzorging te geven en het maximale uit de behandeling te halen, raden wij de Riiviva skincare MD lijn aan. Indien u deze direct na de behandeling aanbrengt, krijgt u het beste resultaat.

Roodheid na de behandeling is normaal en zal na enige tijd verdwijnen. Wanneer roodheid blijft of uw huid raakt geïrriteerd, raden wij aan de behandeling minder frequent te herhalen en de laagste stand te gebruiken in combinatie met de fijnste diamant tip.

Gebruik geen enkele andere methode of chemische behandeling voor 3 dagen. Onderga geen andere elektrische behandeling of gezichts waxing of peelings voor 3 dagen

Riiviva



Riiviva®

Cellulitis



Riiviva cellulitis

- 3 vacuüm snelheden
- 360 graden cellulitis lift koppen
- Verwijderbare filterhouder
- Vervangbare koppen
- Reistasje
- Filters en pincet
- Te gebruiken met snoer of draadloos
- 2 jaar garantie

Belangrijke waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen.

Wij raden de volgende basis voorzorgsmaatregelen en veiligheidsregels aan, vooral bij gebruik met water of in het bijzijn van kinderen.

Voordat u het apparaat in gebruik neemt, dient u alle instructies te lezen.

1 Plaats het apparaat niet in het water of andere vloeibare stoffen. Het apparaat is niet geschikt voor gebruik in de douche en mag niet in water of vloeistof gedompeld worden.

2 Indien de kabel of stekker met water in aanraking gekomen is, dient U het apparaat direct van het snoer te ontkoppelen.

3 Plaats het apparaat nooit op een plaats waar het kan vallen in een bad, wastafel of gootsteen.

Om het risico op brandwonden, elektrocutie of verwondingen te voorkomen, lees het volgende:

1 Dit apparaat is niet geschikt voor kinderen of mensen met een geestelijke beperking.

2 Gebruik dit apparaat alleen op de manier waarop het bedoeld is zoals omschreven in deze handleiding.

3 Houdt het snoer altijd uit de buurt van een warmtebron.

4 Gebruik het apparaat nooit wanneer u slaapt of in slaap dreigt te vallen.

Gebruik het apparaat nooit nadat het gevallen of beschadigt is of wanneer het snoer of de stekker beschadigt.

Als dit het geval is bel direct:

Holland Beauty Company

TEL: 076-8871157

Zorg voor uw Riiviva

Om uw Riiviva microderma apparaat in optimale conditie te houden en uw garantie te behouden, dient u het volgende regels in acht te nemen.

- Gebruik het apparaat nooit zonder filter.
- Dompel het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik nooit in combinatie met crèmes of andere vloeistoffen.
- Laat uw cellulitis koppen nooit vallen.
- Probeer het apparaat niet open te maken.
- Laat uw diamanten tips nooit door anderen gebruiken.
- Gebruik nooit accessoires die niet door dezelfde fabrikant zijn gemaakt of worden aanbevolen.

We raden aan de eerste behandelingen aan te vangen met de laagste stand in combinatie met de fijnste diamanten tip en de behandelingen in rustig tempo op te bouwen qua intensiteit. Wij raden aan voorzichtig met uw huid om te gaan als het gaat om het uitoefenen van druk. Uiteindelijk beheerst U zelf het apparaat en voert u zelf de kracht en druk op. Doe dit altijd met liefde voor uw huid.

Wanneer u ernstige huidproblemen heeft en u bent onder behandeling van een arts, raadpleeg altijd eerst uw arts alvorens u een dergelijk apparaat in gebruik wilt nemen.

U **mag geen** gebruik maken van dit apparaat indien u:

- Huidkanker heeft
- Een actief herpes virus heeft
- Een niet stabiel diabetes of auto immuunsysteem heeft
- Verbrand door de zon bent of huiduitslag heeft
- Open wonden of andere verwondingen heeft
- Acne of puisten met pusvorming heeft
- Eczeem of psoriasis of andere soortgelijke klachten heeft
- Wanneer u bloedverdunners of soortgelijke medicijnen gebruikt zoals medicijnen tegen bloedstolling.
- Wanneer u een plastische chirurgische behandeling heeft gehad raadpleeg dan eerst uw arts
- Wanneer u last van uw vaatstelsel heeft
- Tijdens zwangerschap (raadpleeg eerst uw arts)
- Wanneer u middelen tegen hardnekkige acne heeft gebruikt binnen 1 jaar
- Wanneer u Retina A of Retinol producten of chemische peeling heeft gehad binnen 7 dagen




verwijderbare cellulitis RVS kop

LED power level indicator
(low - medium - high)

Aan/uit knop

Vervangbaar filter

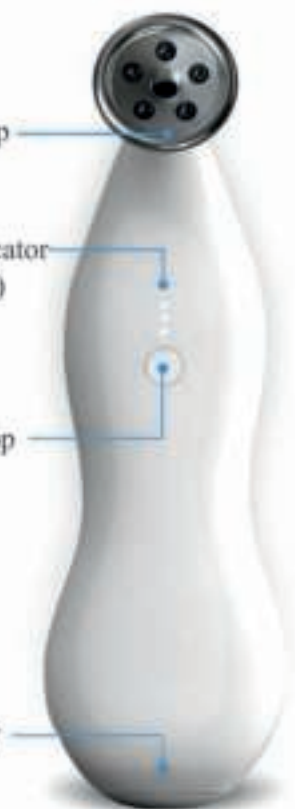

Riiviva cellulitis

Riiviva cellulitis is een mechanisch massage apparaat.

De combinatie van zuigen via mechanische stimulatie is uitgeprobeerd, getest en reeds jarenlang bewezen als de meest effectieve professionele behandeling omde tijdelijke effecten van cellulitis te verminderen, hoewel cellulitis een probleem is waar regelmatig aandacht aan besteed dient te worden.

Riiviva cellulites is een in kosten/baten verhouding effectieve alternatieve manier om uw klachten te behandelen, alsook tijdbesparend.

Wanneer u Riiviva een essentieel deel van uw huidverzorging routine laat zijn, zult u het effect zeker merken en zullen de klachten duidelijk verminderen.



Gebruik

- **Voor het eerste gebruik dient u het apparaat 24 uur op te laden.**
- Gebruik de Riiviva cleanser gel om de huid te reinigen en droog de huid daarna grondig.
- Gebruik de achterkant van uw pincet en draai en verwijder de filterhouder.
- Plaats het filter en zorg er voor dat het helemaal recht en evenredig op bodem van de filterhouder is geplaatst. Daarna zet u de filterhouder weer op het apparaat.
- **Gebruik het apparaat nooit zonder filter in de filterhouder.**
- Druk op de aan/uit knop en begin op de laagste stand.
- Kies vervolgens naar wens voor laag, medium of hoog stand.
- Trek de huid strak met de ene hand en laat de cellulitis kop zachtjes in de tegenovergestelde richting glijden.
- Houdt de cellulitis kop plat op het te behandelen gebied om de zuigkracht te verdelen.
- U kunt verwachten dat de huid iets opgetild wordt terwijl u het probleem gebied behandelt
- Blijf het apparaat niet te lang op dezelfde plaats houden totdat uw huid aan de behandelingen gewend is.

Prestaties

Power | vacuüm setting control

De vacuüm stand bepaald de druk tussen de 360 graden kop en de te liften huid.

Houdt de kop plat op de huid om de juiste zuigkracht te behalen.

Gebruik nooit de vacuüm rondom de ogen of genitaliën.

OFF vacuüm is uit en
LED lampje is uit

LAAG lage zuigkracht
1 LED lampje aan

MED medium zuigkracht
2 LED lampjes branden

HOOG maximale zuigkracht
3 LED lampjes branden

Opladen

Uw Riiviva is oplaadbaar met de bijgeleverde oplader.

Een volledig opgeladen Riiviva kan 50-60 minuten gebruikt worden of ongeveer 10-14 5 minuten behandelingen.

Opladen duurt ongeveer 8 uur, echter bij ingebruikname voor de eerste keer, raden wij 24 uur opladen aan.

U kunt de Rriviva ook gebruiken terwijl u het snoer in het stopcontact stopt.

Cellulitis 360 graden lift RVS koppen

Riiviva cellulitis heeft 3 maten lift
RVS koppen:

KLEIN 1,5 inch (3,8 CM)
(8 ballen) voor nek, armen en borst



Medium 1,75 inch (4,5CM)
(8 ballen) voor buik en taille



GROOT 2.0 inch (5CM)
(7 ballen) voor billen en benen



Filterhouder en verwijderen filter



De achterkant van uw pincet is de sleutel om de filterhouder te openen. Steek de pincet in het "sleutelgat" en draai voorzichtig in de richting van de klok om de houder te verwijderen.



Gebruik uw pincet om het oude filter uit te nemen en gebruik wederom het pincet om het nieuwe filter in de filterhouder te plaatsen.



Zorg voor uw Riiviva

Om uw Riiviva apparaat in een goede conditie te houden, hebben we de volgende tips voor u.

- Gebruik geen hardnekkige schoonmaak-middelen om uw apparaat te reinigen.
- Reinig de diamant tips of cellulitis kop nooit met water terwijl deze nog op het apparaat zit.
- Gebruik een warme vochtige doek om het apparaat en accessoires te reinigen.
- Na het voorzichtig reinigen, maak alles zorgvuldig droog.
- Laat het apparaat niet vallen, het zal kapot gaan.
- Vervang filters na elke behandeling voor optimale werking.
- Als u het apparaat niet gebruikt, bewaar het in de doos of reistasje om schade te voorkomen



Voorzorg tips

Om de huid op de juiste manier te laten herstellen, gebruik de Riiviva skincare MD lijn direct na elke behandeling voor een optimaal resultaat.

Roodheid van de huis is normaal en trekt na enige tijd weg na de behandeling.

Indien roodheid of irritatie aan blijft houden, verminder dan de frequentie van behandelingen en gebruik het apparaat op de laagste stand.

Na een cellulitis behandeling kunt u rode strepen verwachten door de ballen. Deze roodheid zal langzaam verdwijnen en is een teken dat de behandeling effect heeft.

De lift koppen schoonmaken

Haal de lift kop van het apparaat voordat u deze met water reinigt. Gebruik een kleine borstel (oude tandenborstel) en poets voorzichtig over de ballen en de diamanten rand met zeep en warm water.

Wij adviseren een anti bacteriële of desinfecterende zeep.

Voordat u de kop terug op het apparaat plaatst, moet deze grondig gedroogd zijn.

Garantie

U heeft 2 jaar fabrieksgarantie op het apparaat t.a.v. fabricagefouten of andere problemen. Uitzondering hierop zijn: Waterschade
Schade door gebruik zonder filter
Alle defecten of schades door gebruik anders dan in deze handleiding.

Het aanmelden van het Riiviva product kunt u op de website van Holland Beauty Company doen

www.hollandbeautycompany.nl


Als er naar aanleiding van deze gebruiksaanwijzing nog vragen zijn kunt u zich wenden bij:
Holland Beauty company
T: 076-8871157



15



100

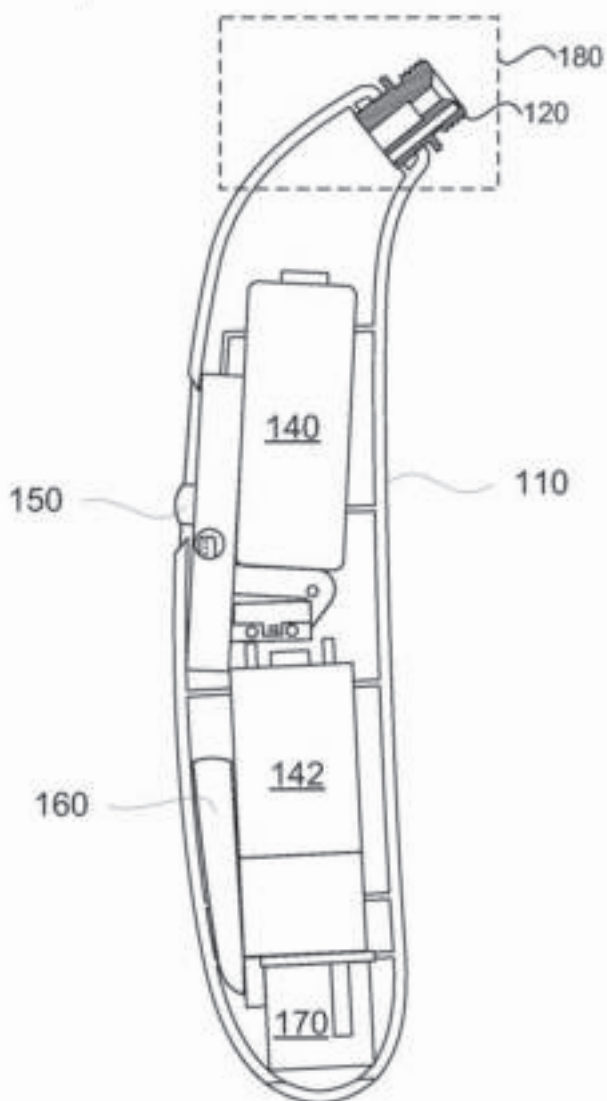

© Riiviva LLC., 2011.
All rights reserved.
Worldwide patents pending.
PO Box 171033
Salt Lake City, UT 84117

Designed and Assembled in USA
www.riiviva.com



www.hollandbeautycompany.nl

Riiviva