


Handleiding Black Head Remover

Quick Start



4 opzetstukken voor elke oplossing

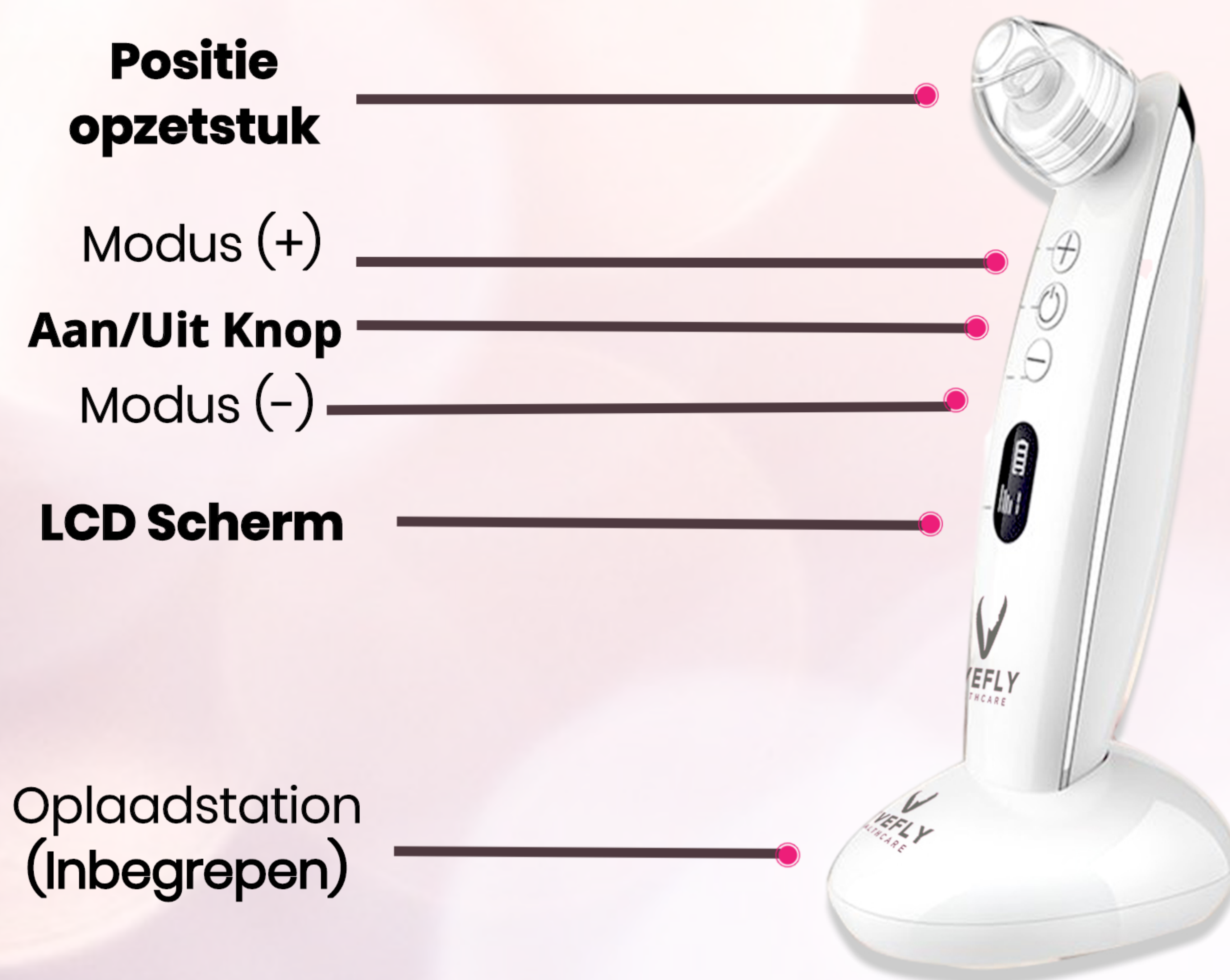

Grote kop met groot gat (zuigkracht)

Blackheads, Vet, Vuil, en make-up resten. Geschikt voor de gevoelige en dunne huid.



Smalle ronde kop (gedoseerde zuigkracht)

Oliën, stof, make-up resten. Geschikt voor de gevoelige huid.



Microkristallen kop (Sterke zuigkracht)

Rode harde bultjes rondom haarzakjes. Verstopte poriën



Ronde cosmetische kop (lichte zuigkracht)

Zorgt voor dagelijkse reiniging van de huid.
Rimpelvorming en plooiing van de huid.

Gebruikertips



Gladde
en
strakke huid



Reinigen
van
poriën



Rimpel
en
lijntjes

6 zuig standen

Oplaadstation
(Inbegrepen)

**LCD
Scherm**

**4 Posities
opzetstuk**

Werk naar het resultaat: Reinigen van poriën

**Kies opzetstuk : Grote kop met groot gat
(zuigkracht)**

Plaats het ronde gat op je mee-eter die moeten worden verwijderd.

Het niveau (1-6) kan worden ingesteld naar eigen wens.

Methode:

Beweeg langzaam in dezelfde richting wanneer je een mee-eten behandelt.

Blijf niet te lang op één positie staan maar herhaal je beweging meerdere keren om roodheid te voorkomen.

Houd deze kop maximaal tussen de 3-5 seconden op een plek om zo littekens of letsel op je huid te voorkomen

Gebruikertips



Gladde
en
strakke huid



Reinigen
van
poriën



Rimpel
en
lijntjes

6 zuig standen

Oplaadstation
(Inbegrepen)

LCD
Scherm

4 Posities
opzetstuk

Werk naar het resultaat: Gladde en strakke huid

Kies opzetstuk : Microkristallen kop (sterke zuigkracht)

Reinig je huid en droog goed af, gebruik eventueel een stomer om je poriën te openen.

Verander naar de microkristallijne kop

Begin vanaf je kin en verplaats het apparaat van beneden naar boven

Op je wang beweegt je het apparaat van links naar rechts

Op je voorhoofd begin je vanuit het midden en werk je naar de zijkant toe

Voor het gebruik op je T-gebied beweeg je het apparaat van beneden naar boven

Houd deze kop maximaal tussen de 3-5 seconden op een plek om zo littekens of letsel op je huid te voorkomen

Gebruikertips



6 zuig standen



**Gladde
en
strakke huid**



**Reinigen
van
poriën**



**Rimpel
en
lijntjes**

Oplaadstation
(Inbegrepen)

**LCD
Scherm**

**4 Posities
opzetstuk**

Werk naar het resultaat: Rimpel en lijntjes

Kies opzetstuk: Ronde cosmetische kop (lichte zuigkracht)

Verander naar de ronde cosmetische kop en gebruik deze voor je ooghoeken, neushoeken, de mondhoek en andere gebieden met fijne lijntjes.

De niveaus (1-6) kunnen naar wens worden gewijzigd.

Methode:

Zuig met het apparaat op de gebieden met de fijne lijntjes, trek het apparaat elke keer voorzichtig, maar snel weg. Het stimuleert de micro-circulatie en kan rimpels verminderen.

Laat het zuigstuk niet voor een langere tijd op hetzelfde gebied staan. Hierdoor zal de huid opzwellen en rode vlekken achterlaten. Als je huid opzwellt, stop dan onmiddellijk met het gebruiken.