

ENVÍABLE



# **ELEKTRISCHE WATERFLOSSER**

Producthandleiding

**Lees deze hele handleiding door voordat je het product gebruikt.**

! LET OP

Lees deze producthandleiding voordat je de waterflosser voor het eerst gebruikt.

---

Als er geen waterstraaltje uit de waterflosser komt, doe dan het volgende:

1. Hou het product ondersteboven voor een paar seconden



2. Zuig de lucht uit het uiteinde als stap 1 niet werkt



Allereerst: bedankt voor het bestellen van de elektrische waterflosser! In deze producthandleiding leggen we je meer uit over het gebruiken van de waterflosser.

Heb je naar aanleiding van deze handleiding nog verdere vragen? Neem dan gerust contact met ons op via [info@ninescommerce.nl](mailto:info@ninescommerce.nl), of onze website: <https://ninescommerce.nl>.

# VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



## GEVAARLIJK

**Waarschuwing: blokkeer het uiteinde van de flosser niet tijdens gebruik**

**Waarschuwing: gebruik de flosser niet langer dan 10 minuten per keer**

1. Zorg dat je deze producthandleiding zorgvuldig doorgelezen hebt voor gebruik, om verkeerd gebruik en schade te voorkomen.
2. Haal het product niet zelfstandig uit elkaar. Het product is namelijk elektrisch en kan in dat geval schok ongelukken veroorzaken.
3. Vul de watertank niet met water dat warmer dan 40 graden Celsius is.
4. Als het product tijdens het opladen in het water valt, haal dan eerst de oplaadkabel uit het stopcontact.
5. Als de oplaadkabel beschadigd is, vervang de power adapter dan voor gebruik
6. Voorkom dat het product in aanraking komt met hoge temperaturen. Leg het product niet in vuur.



## WAARSCHUWING

1. Gebruik het product niet voor andere doeleinden van mondhygiëne.
2. Gebruik het product niet om druk uit te oefenen op je tandvlees op tanden.
3. Voorkom dat het product onder gedompeld wordt in water, om product falen te voorkomen.
4. Gebruik het product niet in een vochtige omgeving met hoge temperaturen.
5. Stop met het gebruiken van de oplaadkabel als deze beschadigd is.



## OPMERKING

1. Gebruik het product niet zonder het kopstuk te installeren.
2. Sommige mondspoelers kunnen bijtende stoffen bevatten. Vul de watertank niet met dergelijke mondspoelers.
3. Als een kind of gebruiker van het product deze niet wil gebruiken, zorg dan dat er iemand aanwezig is om op te letten of hierbij te helpen.
4. Gebruik het product niet als speelgoed. Hou het op afstand van kleine kinderen en baby's.
5. Vraag bij tandvleesziekte, een mond- of kaakoperatie in de afgelopen 2 maanden, of bij andere orale problemen eerst je tandarts om advies, alvorens het product te gebruiken.


## VOORDELEN

- Het apparaat houdt een modus vast als deze langer dan 6 seconden gebruikt wordt, en sluit in deze modus af. De laatst gebruikte modus wordt door het apparaat onthouden.
- Het apparaat blijft uitgeschakeld tijdens het opladen.
- Het apparaat schakelt automatisch uit nadat het voor 3 minuten gebruikt is, ter bescherming.


ENVÍABLE



# EIGENSCHAPPEN

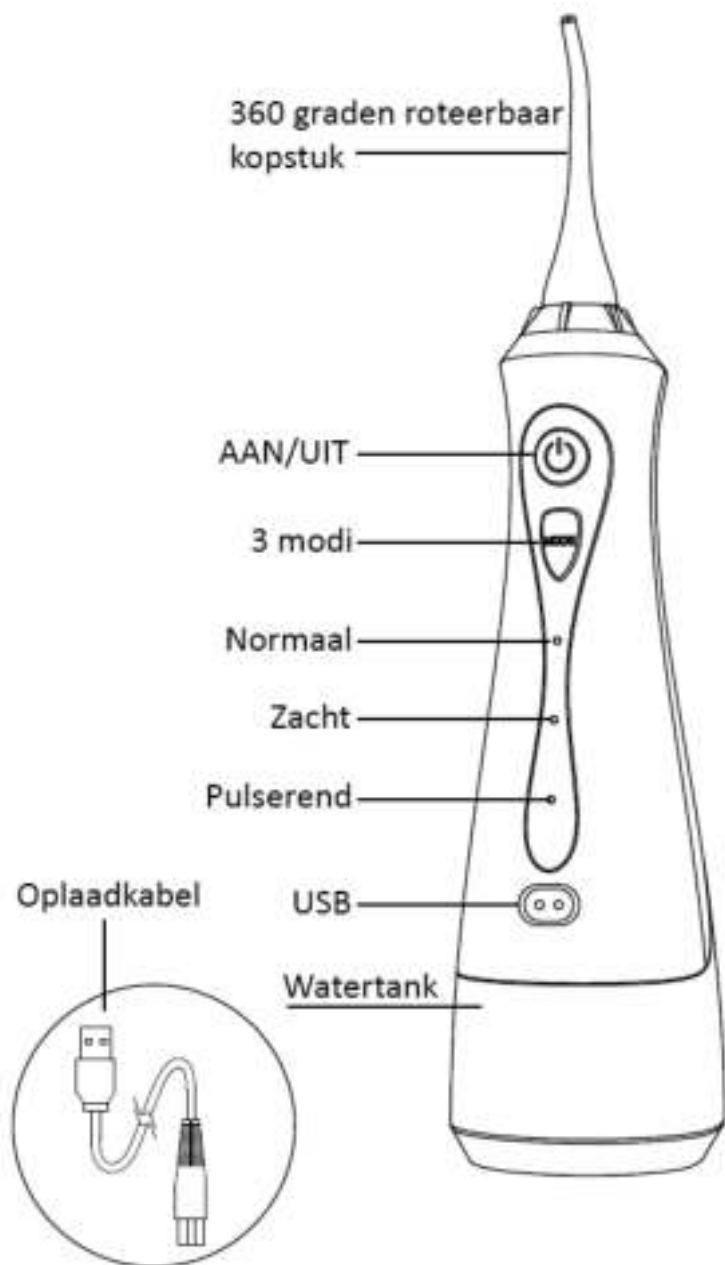


# OPBOUW VAN DE WATERFLOSSER

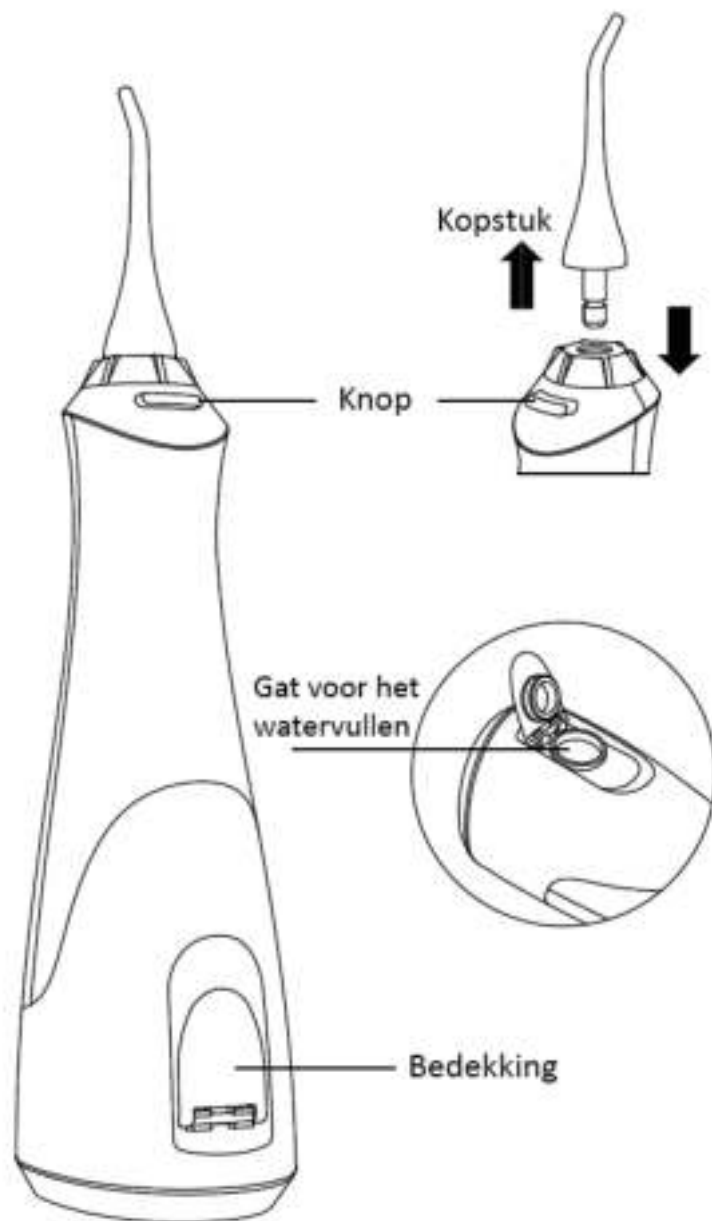

# GEBRUIKSAANWIJZINGEN

## 1. Voeg water toe

Open de klep van de watertank en hou de waterflosser horizontaal, met het vulgatje direct onder de kraan. Zet de kraan open en vul de watertank tot deze vol zit.

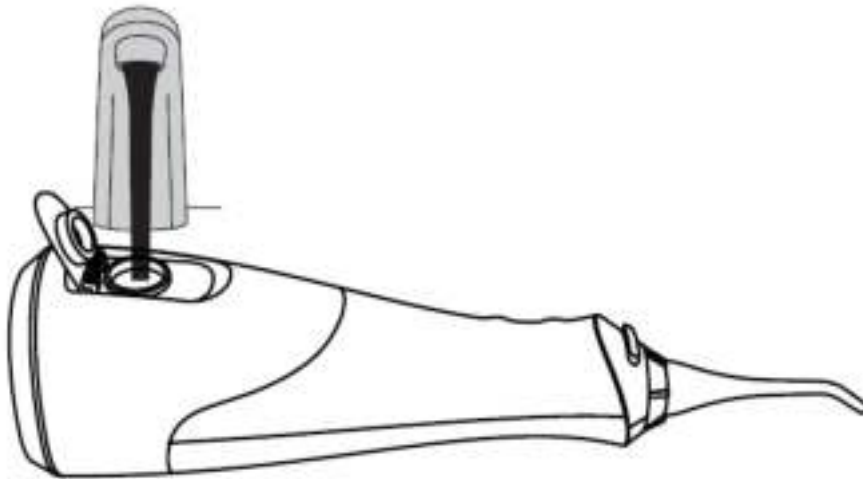


## 2. Maak je tanden schoon

De waterflosser bevat drie modi: normaal, zacht en pulserend. De zachte modus is geschikter bij gevoelig tandvlees en tandvlees dat snel bloedt. De pulserende modus wisselt sterk en zacht af en is handig om lastig te bereiken plekjes mee schoon te maken. Probeer de diverse standen uit en kijk welke het beste bij jouw gebit past.

Plaats om je gebit schoon te maken de top van het kopstuk in je mond en mik op je tanden of tandvlees. Sluit je lippen net genoeg om vrij te kunnen bewegen, maar het spetterende water tegen te houden.



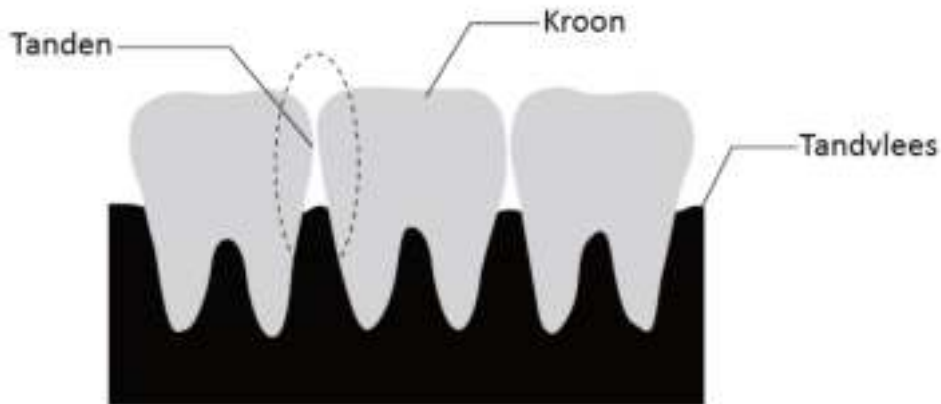

## ONDERHOUD

- Als je het product schoon wilt maken, gebruik dan een droge of vochtige doek om het apparaat en het kopstuk schoon te scrubben.
- Dompel het product niet onder in water.
- Gebruik geen water warmer dan 50 graden Celsius tijdens het schoonmaken.
- Buig, rek of verdraai het kopstuk niet.
- Het is aanbevolen om het kopstuk iedere 6 maanden te vervangen. Als je het product voor langere tijd niet gebruikt, leeg dan de watertank en berg het product op in een donkere en droge plaats.

## VEEL GESTELDE VRAGEN

### **V: Is het normaal dat mijn tandvlees tijdens het gebruik begint te bloeden?**

A: Bloedend tandvlees is het resultaat van micro ontstekingen als gevolg van bacteriële activiteit tussen de tanden. Je gebit consequent iedere ochtend en avond schoonmaken vermindert bloedend tandvlees voor de meeste mensen. Neem contact op met je tandarts als je tandvlees, ondanks regelmatig schoonmaken, blijft bloeden.

### **V: Hoe weet ik dat ik mijn tanden goed aan het schoonmaken ben?**

A: De waterflosser is ontworpen om tandplak tussen de tanden weg te halen en de gezondheid van je tandvlees te verbeteren. Tandplak is met het blote oog niet zichtbaar, dus als symptomen zich over verloop van tijd verminderen, betekent dit dat de werking van de waterflosser effectief is. Denk hierbij aan minder bloedend tandvlees, tandvlees dat meer roze oogt dan rood, en tandvlees dat er minder ontstoken en rood uit ziet dan voorheen. Doorgaans zul je na 2 tot 4 weken goed flossen significant verschil zien. Je kunt na verloop van tijd ook je tandarts vragen of hij of zij verschil met voorheen ziet.

### **V: Kan de waterflosser alles tussen de tanden schoonmaken?**

A: Als onderdeel van een dagelijks mondhygiëne routine is de waterstraal van de waterflosser sterk genoeg om tandplak tussen de tanden weg te spoelen. De meeste voedselresten kunnen door de waterflosser weggespoeld worden. Het product biedt geen garantie op het wegspoelen van grotere en meer plakkende voedselresten.

Dit product is niet geschikt voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking, of met een gebrek aan kennis en ervaring, tenzij zij onder het toezicht staan of handelen naar de instructies van een persoon die verantwoordelijk voor hun veiligheid is.