

# IPL ONTHARINGSAPPARAAT

Voor thuisgebruik

Handleiding



## **Welkom bij de handleiding van het IPL ontharingsapparaat van Errthing!**

**Bedankt voor het kiezen van ons geavanceerde apparaat om ongewenst haar effectief en gemakkelijk te verwijderen. Met behulp van Intense Pulsed Light (IPL) technologie biedt ons apparaat een veilige en langdurige ontharingsoplossing voor het comfort van je eigen huis.**

Met dit IPL ontharingsapparaat kun je genieten van gladde en haarvrije huid zonder gedoe met scheermesjes, pijnlijke harsmethoden of frequente bezoeken aan een schoonheidssalon. Het apparaat maakt gebruik van lichtpulsen om de haarzakjes op een niet-invasieve manier te behandelen, waardoor de groei van nieuw haar wordt verminderd.

Onze handleiding zal je stap voor stap door het gebruik van het apparaat leiden, van de voorbereiding van je huid tot het uitvoeren van effectieve IPL behandelingen. We zullen ook belangrijke veiligheidsinstructies en tips geven om ervoor te zorgen dat je het beste uit je IPL ontharingservaring haalt.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat je begint met het gebruik van het IPL ontharingsapparaat. We raden je aan om de aanbevolen procedures te volgen en eventuele waarschuwingen in acht te nemen om optimale resultaten te behalen en mogelijke risico's te minimaliseren.

We hopen dat je geniet van het gebruik van het Errthing IPL ontharingsapparaat en dat het je helpt om je huid zijdezacht en haarvrij te maken. Mocht je nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice. Veel succes en veel plezier met je ontharingsreis!

### **Veiligheidstips om de huid te beschermen, is het niet geschikt voor de volgende klanten met klachten als:**

1. Je een bekende huidaandoening.
2. Je een huidziekte zoals allergische dermatitis, eczeem, enz.
3. Personen met fotosensibilisatie.
4. Je menstrueert, zwanger bent of borstvoeding geeft.
5. Je verbrand bent door de zon.
6. Zwarte of door de zon verbrande huid (Raadpleeg de volgende specifieke kleurencontrastkaart).
7. Zwarte of donkerbruine moedervlek.
8. Je beschadigde huid, een korstje of genezen wond, kanker of hemangioom.
9. Je ogen en elk kunstmatig esthetisch, prothetisch of plastisch gebied.

# Product Specificaties



## 1. Specificaties

Lampbuis	Xenon kwartsbuis
Lichtbron	Intens gepulseerd licht
Energie frequentie	1.5-3.9J/cm <sup>2</sup>
Focus grootte	3 cm <sup>2</sup>
Golflengte	470nm-1100nm
Levensduur lampbuis	900.000 keer
Adapter	AC100-240V @12V DC3A
Gewicht	210g (machine)
Afmetingen	163x112x78mm
Bedrijfstemperatuurbereik	5-30 °C
Bedrijfsvochtigheidsbereik	Relatieve vochtigheid 30%--60%

# 1. Functie-introductie

1. Huidverjonging.
2. Ontharing, dit product kan gebruikt worden voor: overtollig haar zoals liphaar, okselhaar, lichaamshaar op de ledematen, voorhoofdhaar, enzovoort; Pijnloze ontharing is geschikt voor zwart haar en donkerharige mensen, het is niet geschikt voor wit, grijs of blond haar (Raadpleeg de onderstaande kleurcontrastkaart).

Huidskleur	Bleek	Licht	Medium	Licht donker	Donker	Zeer donker
Haarkleur						
Wit/Grijs	x	x	x	x	x	x
Rood	x	x	x	x	x	x
Blond	x	x	x	x	x	x
Donkerblond	√	√	√	√	√	x
Bruin	√	√	√	√	√	x
Donker bruin	√	√	√	√	√	x
Zwart	√	√	√	√	√	x

Huid- en haarkleurcontrastkoord

## 2 Gebruikers instructies

- 2.1 Gebruik een medisch alcoholdoekje om het glazen venster schoon te maken.
- 2.2 Druk 3 seconden op de "aan/uit-knop", het zal starten en overgaan naar het heldere LCD-scherm en je kunt horen dat het systeem draait.


## Let op :

1. Je zult zien dat het "HR" indicatorlampje brandt nadat het is opgestart.
2. Vervolgens moet je het flitsvenster naar je huid bewegen. Je zult zien dat het "HR" indicatorlampje knippert, omdat er een sensor voor menselijke lichaamsdetectie is ingebouwd in het flitsvenster. De sensor zal de huid detecteren wanneer je dichtbij komt.
3. Het "HR" indicatorlampje moet knipperen, anders zal het apparaat niet werken. Als je merkt dat het "HR" lampje niet knippert, breng het dan dichterbij je huid totdat het wel knippert.



Aan/uit knop

- 2.3 Klik op de aan/uit-knop om het geschikte intensiteitsniveau te selecteren (8 niveaus, weergegeven op het scherm). Het onderstaande diagram toont de intensiteitsniveaus van laag naar hoog. Elke aanpassing kan worden gemaakt in de volgorde die wordt weergegeven door op de aan/uit-knop te klikken.

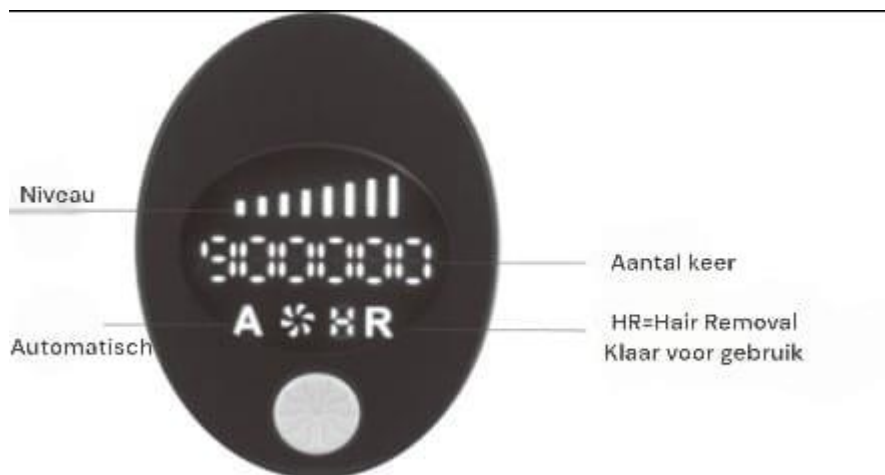

- 2.2 Zodra het intensiteitsniveau is ingesteld, verplaats het flitsvenster naar de huid die het venster volledig bedekt, je ziet het "HR"-licht knipperen en klik vervolgens op de flitskracht-knop.
- 2.3 Als je wilt overschakelen naar de automatische modus, druk dan 2 seconden op de Flits-knop totdat het LCD-scherm "A" toont. Wanneer je de knop loslaat, zal het flitsvenster direct oplichten zodra het de huid raakt. Als je de knop nogmaals indrukt, keert het terug naar de handmatige modus.

Let op :

Voor perfecte resultaten wordt aanbevolen om het proces van haarverwijdering 2-3 keer te herhalen en ervoor te zorgen dat alle lichaamsdelen niet worden herhaald of overgeslagen.

- 2.4 Druk de aan/uit-knop 2 seconden in om het uit te schakelen.
- 2.5 Na gebruik, reinig het venster van de flits met een vochtig doekje met medische alcohol (Na frequent gebruik kunnen er witte vlekken ontstaan aan de binnenkant van de lens, dit heeft geen invloed op het normale gebruik en de levensduur van het instrument).
- 2.6 Gebruik een toner om je huid vochtig te houden na het verwijderen van haar.
- 2.7 Het kost tijd voor het instrument om elektrische energie om te zetten in lichtenergie. Hoe hoger de stand, hoe langzamer het interval van de lichtuitvoer zal zijn. Het interval van de lichtuitvoer is ongeveer 0,8 seconden in de eerste stand en ongeveer 2 seconden in de achtste stand.

## 3. Haarbeheerproces

### Vóór gebruik testen:

- 3.2 Het wordt ten zeerste aangeraden om een huidtest uit te voeren, 2 uur voorafgaand aan elke ontharingsbehandeling, om mogelijke nadelige reacties te controleren.

### Testmethode:

- 3.3 Op een klein stukje huid aan de binnenkant van de bovenarm (de mediale zijde). Van een lage naar een hoge energie-instelling, 1-2 keer op dezelfde plek. Als u na 2 uur roodheid, brandwonden, stekende pijn of andere symptomen ervaart, raadpleeg dan een arts voordat u het opnieuw gebruikt.

### Bedieningsstappen:

- 3.3.1 Reinig het flitsvenster en scheer het haar op uw lichaam weg, verwijder eventuele achtergebleven haartjes.
- 3.3.2 Start het apparaat en kies het meest geschikte intensiteitsniveau voor het ontharen.
- 3.3.3 U kunt een toner gebruiken om uw huid na het ontharen vochtig te houden.
- 3.3.4 Voor suggesties over de bediening van intensiteitsniveaus voor alle huidtypen en verschillende lichaamsdelen, raadpleeg de onderstaande vergelijkingstabel.
- 3.3.5 Het wordt sterk aanbevolen om dezelfde huidzone niet meerdere keren te behandelen. U moet slechts twee opeenvolgende flitsen op dezelfde locatie uitvoeren. De frequentie van de behandeling moet worden verminderd bij gebruik van een hoge energie-instelling.

	<i>Bleek</i>	<i>Licht</i>	<i>Medium</i>	<i>Licht donker</i>	<i>Donker</i>	<i>Zeer donker</i>
<i>Huidskleur</i>						
<i>Lichaamsdeel</i>						
<i>Okseel</i>	6-8 niveau 3-4 keer	6-8 niveau 3-4 keer	5-7 niveau 2-3 keer	4-6 niveau 2-3 keer	1-4 niveau 2-3 keer	N.v.t.
<i>Arm</i>	6-8 niveau 3-4 keer	6-8 niveau 3-4 keer	5-7 niveau 2-3 keer	1-4 niveau 2-3 keer	1-4 niveau 2-3 keer	N.v.t.
<i>Been</i>	6-8 niveau 3-4 keer	6-8 niveau 3-4 keer	5-7 niveau 2-3 keer	1-4 niveau 2-3 keer	1-4 niveau 2-3 keer	N.v.t.
<i>Rond de mond</i>	6-8 niveau 3-4 keer	6-8 niveau 3-4 keer	4-6 niveau 2-3 keer	1-4 niveau 2-3 keer	1-3 niveau 2-3 keer	N.v.t.
<i>Gezicht</i>	6-8 niveau 3-4 keer	6-8 niveau 3-4 keer	4-6 niveau 2-3 keer	1-4 niveau 2-3 keer	1-3 niveau 2-3 keer	N.v.t.

Intensiteitsniveau en tabel voor contrast van huidskleur.

## 4 Notities over de werking van het apparaat

1. Flits niet in de buurt van of direct op de ogen tijdens gebruik.
2. Na gebruik kan er enige roodheid op de huid optreden. U kunt het gebied afkoelen met ijswater of een koude vochtige handdoek.
3. Gebruik niet in combinatie met andere cosmetische producten zoals watergelproducten.
4. Hoe donkerder uw huid, hoe minder duidelijk huidreacties kunnen zijn en de reactie kan vertraagd optreden. In dat geval dient u de wachttijd van 2 uur in acht te nemen voordat u de intensiteit verhoogt.
5. Blijf voor uw huid zorgen door te hydrateren en zonnebrandcrème te gebruiken.
6. Blokkeer de luchtinlaat en de koeluitlaat niet om de koeling van het apparaat niet te beïnvloeden.
7. Haar dat aan het apparaat blijft plakken kan enkele blinde plekken veroorzaken, maar dit heeft geen invloed op de prestaties van het apparaat en het normale gebruik ervan.



8. In de latere levensfase zal de binnenwand van de lamp verschillende gradaties van zwart verschijnen. Dit is een normaal verouderingsproces van de buizen. Maak je geen zorgen en blijf het normaal gebruiken.
9. Dit product is niet waterdicht.
10. Bij eventuele defecten, haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
11. Bewaar het apparaat niet in de buurt van sterke magnetische velden, vochtige, stoffige en warme omgevingen.
12. Voorkom schade en houd het buiten het bereik en zicht van kinderen.
13. Gebruik het niet samen met andere toepassingen die niet zijn toegestaan.
14. Laat andere personen behalve onze geautoriseerde personen dit apparaat niet openen, anders kan er gevaar voor elektrische schokken ontstaan.

**Deze handleiding is alleen ter referentie.**

Dit product is gegarandeerd tegen materiaal- en vakmanschapsfouten gedurende een periode van 1 jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop. Mocht dit product defect raken tijdens de garantieperiode, retourneer het dan naar de winkel waar u het heeft gekocht, samen met uw aankoopbewijs, voor reparatie of vervanging. De garantie vervalt bij onjuist gebruik, wijziging of reparatie door onbevoegde personen. Dit product is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik en het gebruik ervan in een professionele omgeving maakt de garantie ongeldig.

## **GARANTIE**

<b>Aankoopdatum</b>	<b>Datum laatste reparatie</b>	<b>Beschrijving van het probleem</b>

**Dankjewel voor je bestelling.**