

## GEBRUIKERSHANDLEIDING - EMS VOETMASSAGE MAT - DEKKER FUTURE




**Stap 1:** Plaats de mat op de grond en sluit het bedieningsapparaat aan op de 2 contactpunten op de mat.



**Stap 2:** Plaats beide voeten op de mat en duw op de middelste "+" knop. Het toestel staat nu aan. Het design van de mat is zo ontworpen dat je jouw voeten op de getekende voeten op de mat kunt zetten. Dit zorgt voor een betere massage.



**Stap 3:** Het advies luidt om op stand 1 te beginnen, zodat je kunt wennen aan de EMS schokjes. Zodra het cijfer 1 op het scherm verschijnt start het apparaat met het geven van lichte schokjes.

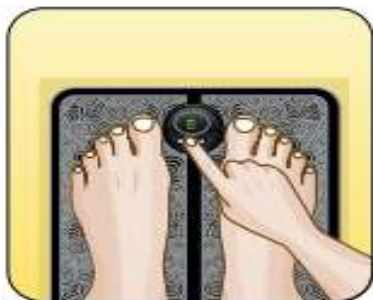

**Stap 4:** Door op de middelste knop "m" te duwen kan de wijze van de schokjes aan worden gepast. Er zijn in totaal 6 verschillende standen waaruit gekozen kan worden.



**Stap 5:** We raden aan te beginnen met een sessie van 5 minuten. De sessie kan geleidelijk worden opgebouwd. Het apparaat zet zichzelf automatisch uit na 12 minuten. Er hoeft dus geen timer in te worden gesteld.



Heb je nog vragen, contacteer ons dan gerust via [info.dekkerfuture@gmail.com](mailto:info.dekkerfuture@gmail.com). We proberen u zo snel mogelijk te helpen.