

PARVALE  
MADE FOR YOU

# LED Gezichtsmasker

Gebruikershandleiding

— ●  
Lees deze  
producthandleiding  
zorgvuldig door  
voordat u het  
product gebruikt  
en bewaar het op  
een geschikte  
plaats.





# Geachte gewaardeerde PARVALE™ LED Gezichtsmasker klanten,

Wij willen onze oprechte dankbaarheid uitbreiden voor het kiezen van ons LED-gezichtsmasker om uw huidverzorgingsroutine te verbeteren. Bij PARVALE™ zijn we toegewijd aan het bieden van innovatieve en effectieve oplossingen voor huidverjonging, en we waarderen het vertrouwen dat u in ons product heeft gesteld.

Uw tevredenheid heeft onze hoogste prioriteit, en we staan klaar om u te ondersteunen op uw reis naar een gezondere huid. Als u vragen heeft, feedback wilt geven of assistentie nodig heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons klantenserviceteam.

**Bedankt voor het kiezen van PARVALE™!**




# INHOUDSOPGAVE

Productoverzicht .....	04
Pakket Bevat .....	05
Introductie .....	06
Gezondheidsvoordelen .....	06
Typen Lichttherapie en Hun Voordelen .....	07
Vorbereidingen Vooraf .....	08
Hoe te Gebruiken? .....	09
Veiligheidsinstructies .....	10
Garantie .....	10




# Productoverzicht

## PARVALE™ LED Gezichtsmasker

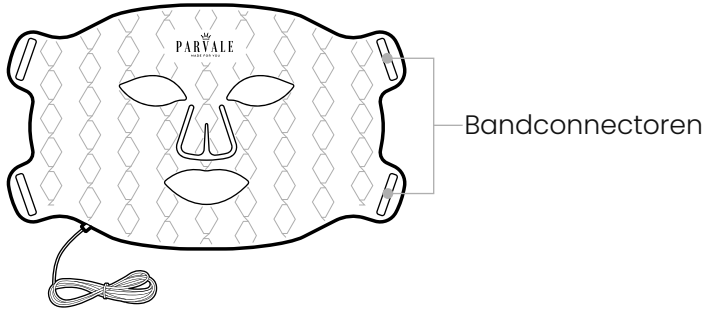


## Afstandsbediening

1. Scherm
2. Aan-Uitknop  
Gebruikt om het LED-masker aan of uit te zetten.
3. E-Knop:  
Stel de intensiteit van de LED-verlichtingselectie in.
4. T+ Knop:  
Verlengt de duur van de behandeling.
5. NIR (Near-Infrared) Knop:  
Bedien de activering of deactivering van de Near-Infrared lampen.
6. M-Knop:  
Bedien het activeren of deactiveren van de modusselectie.
7. T- Knop:  
Verkort de duur van de behandeling.

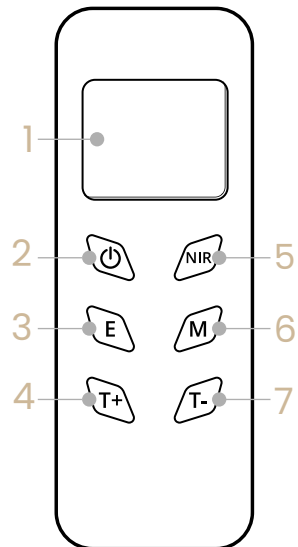





1 x  
PARVALE™ LED  
Gezichtsmasker

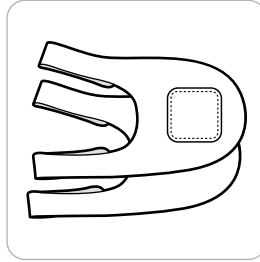


1 x Set  
Bevestigingsriemen

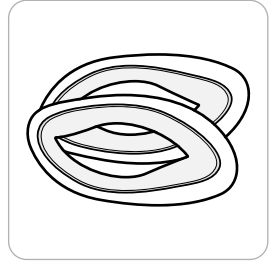


1 x Set  
Oogbeschermers

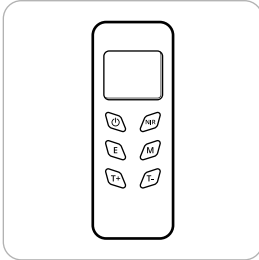

1 x  
Afstandsbediening

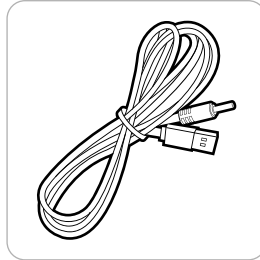

1 x  
USB oplaadkabel

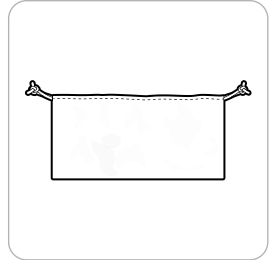

1 x  
Opbergdoos



1 x  
Gebruikershandleidin

## Introductie:

Het PARVALE™ LED Gezichtsmasker is een geavanceerd huidverjongings- en faceliftapparaat dat is ontworpen om de gezondheid en uitstraling van de huid te verbeteren door middel van de kracht van rood, blauw, geel en infrarood lichttherapie. Door gebruik te maken van de voordelen van verschillende golflengten van licht, zoals blauw licht dat varieert tussen 460–465 nm, geel licht tussen 590–610 nm, rood licht rond 618–625 nm, en infraroodtherapie op 850 nm, heeft dit masker tot doel de productie van collageen te stimuleren, fijne lijntjes en rimpels te verminderen, en de algehele huidverjonging te bevorderen. Het apparaat biedt een niet-invasieve en handige manier om verschillende huidverzorgingsproblemen aan te pakken, waaronder verbeterde huidskleur, verbeterde elasticiteit en de mogelijke vermindering van ontstekingen. Het PARVALE™ LED Gezichtsmasker is ontworpen voor gebruiksgemak, met verstelbare riemen voor een comfortabele pasvorm en gebruiksvriendelijke bedieningselementen. Door dit apparaat op te nemen in een regelmatige huidverzorgingsroutine kan bijdragen aan een jeugdiger en stralende teint, waardoor het een waardevolle toevoeging is aan thuisgebruik van huidverzorging.

## Gezondheidsvoordelen:

- Biedt een stralende en egale huid
- Herstelt littekens en oneffenheden
- Vermindert acne en bultjes
- Anti-verouderingseffect (jeugdige gloed)
- Verbeterd uw huid met lichttherapie
- Behandelt acne en helpt bij puistjes
- Vermindert rimpels en fijne lijntjes
- Verbetert de elasticiteit van de huid

# Typen Lichttherapie en Hun Voordelen:

De vier typen therapieën die worden aangeboden door het LED-gezichtsmasker zijn;

## 1. Gele Licht en de Voordelen:

De golflengte van gele lichttherapie varieert tussen 590–610 nm en heeft een oppervlakkige huidpenetratie. Geel licht dringt door in de huid en verandert de cellulaire paden, waardoor het uiterlijk en de textuur van de huid verbeteren. Het staat vooral bekend om celvernieuwing en de ontstekingsremmende voordelen ervan. Het stimuleert ook de lymfestroom, die toxines en afvalstoffen uit de huid verwijdert en veroudering tegengaat. Geel licht vermindert roodheid in de huid en versterkt deze door ontstekingen te verminderen en de productie van collageen en elastine te stimuleren.

## 2. NIR infraroodlicht en de voordelen ervan:

NIR-licht kan dieper in de huid doordringen dan sommige andere golflengten. Deze diepere penetratie wordt verondersteld fibroblasten te stimuleren en de bloedcirculatie en zuurstoftoevoer naar de cellen te verbeteren, wat resulteert in verbeterde huidelasticiteit, vermindering van fijne lijntjes en rimpels en het herstellen van een jeugdige uitstraling.

## 3. Blauw Licht en de Voordelen


De golflengte van blauwlichttherapie varieert tussen 460–465 nm en werkt als een anti-acnemiddel. Blauw licht beïnvloedt de bovenste laag van de huid door acne-veroorzakende bacteriën (genaamd *P. acnes*) te vernietigen. Het vermindert de hoeveelheid olie die door de talgklieren van de huid wordt geproduceerd, wat een oorzaak is van acne, waardoor acne-uitbraken verminderen en de huid nog helderder wordt.

#### 4. Rood Licht en de Voordelen:

De golflengte van roodlichttherapie varieert tussen 618–625 nm. Het is zeer gunstig voor de huid, omdat het werkt als een anti-verouderingsmiddel door fijne lijntjes en rimpels te verminderen, en de textuur en uitstraling van de huid te verbeteren. Roodlichttherapie kan ontstekingen verminderen en de productie van collageen stimuleren. Collageen is een eiwit dat verantwoordelijk is voor een jonger uitziende huid en dat afneemt met de leeftijd. Rood licht stimuleert de productie van collageenproteïnen die het verschijnen van rimpels verminderen en fijne lijntjes verwijderen, waardoor de huid er gladder uitziet. Rood licht stimuleert ook de productie van collageen en elastine.


### Vorbereidingen Vooraf:

1. Laad het masker gedurende 20–30 minuten op voordat u het voor de eerste keer en elke keer dat u het gebruikt. Steek voor het opladen van het masker de pin van de meegeleverde oplaadkabel in de invoerpoort van het masker en de USB-A-pin in een geschikte oplader.

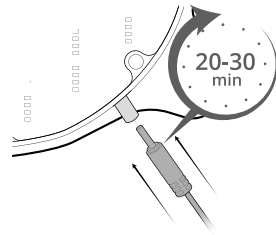

2. Spoel je gezicht af om make-up, zonnebrandcrème of huidverzorgingsproducten te verwijderen en maak het droog om ervoor te zorgen dat het rode licht effectief in je huid kan doordringen.



3. Bevestig de bevestigingsbanden aan het masker en steek vervolgens de kabel van het masker in de invoerpoort van de afstandsbediening.

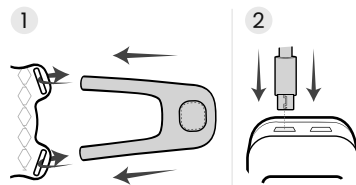




## Hoe te Gebruiken?

1. Pas het LED-gezichtsmasker aan zodat het past op de gewenste behandelingsgebieden, zoals uw voorhoofd, wangen en kin, en bevestig het op uw gezicht met de verstelbare banden.

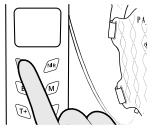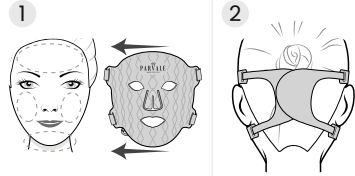


2. Druk op de "Aan/Uit"-knop om het LED-masker in te schakelen.

3. Kies de gewenste lichtinstelling voor de gewenste behandeling.

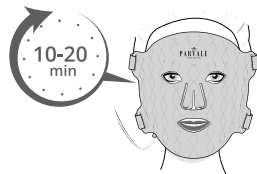

4. Start de behandelingsessie en zet deze voort gedurende ongeveer 10-20 minuten.

5. Nadat de behandelingsessie is voltooid, drukt u op de "Aan/Uit"-knop om het LED-masker uit te schakelen en haalt u de stekker uit de afstandsbediening. Verwijder het masker van uw gezicht.

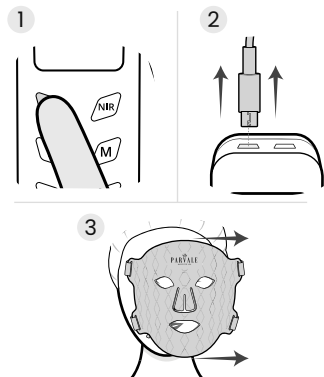

## Veiligheidsinstructies:

- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Bewaar en gebruik het apparaat binnenshuis.
- Gebruik het apparaat niet bij ongeschikte weersomstandigheden.
- Gebruik de meegeleverde oogbescherming voor oogbescherming.
- Gooi het apparaat niet op de grond.
- Houd het apparaat uit de buurt van brandbare apparaten.
- Reinig het apparaat niet met agressieve chemicaliën of reinigingsmiddelen.

## Garantie:

Bij PARVALE™ krijgt u een fabrieksgarantie van 1 jaar en wij garanderen uitstekende service in geval van vragen en/of opmerkingen. We staan klaar om u te helpen uw huid en uw kwaliteit van leven te verbeteren. We bieden ook een retourbeleid van 30 dagen aan



  
**PARVALE**  
MADE FOR YOU