


Gefeliciteerd met jouw nieuwe SANBO Massage Gun

Je bent een stap dichterbij het verbeteren van jouw bewegingsvrijheid, het voorkomen en genezen van pijntjes en een verbeterde versie van jezelf te worden.

Of je nu een topsporter bent die zijn of haar prestaties wil verbeteren, een weekendwarrior die simpelweg wat extra herstel wil na zijn zondagse voetbalwedstrijd of iemand met een kantoorbaan die zijn of haar postuur wil verbeteren.

De SANBO Massage Gun Elite is ontworpen om jou te helpen al deze persoonlijke doelen te behalen.

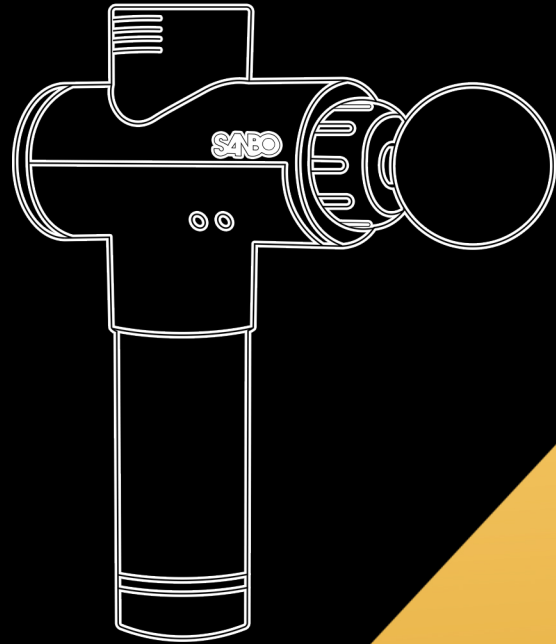

SANBO

QUICK START

Pijnvrij bewegen eenvoudig gemaakt

1

Zet het apparaat aan


Zet de SANBO Massage Gun aan en uit door de knop aan de onderkant op ON te zetten.

Het lampje rondom de accu gaat branden. Zet de massage gun aan door de middelste knop op het scherm van de massage gun in te houden

2


Kies de juiste stand

Schakel tussen 30 verschillende snelheidsstanden door op de + en - knoppen op de achterkant van de SANBO Massage Gun te klikken.

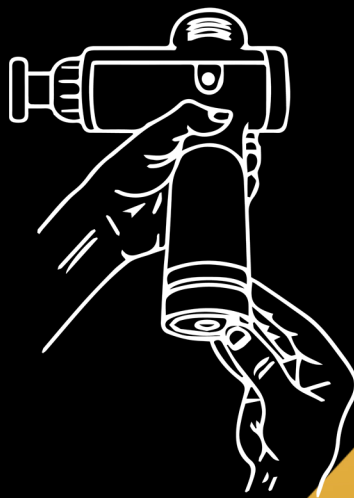

3 Kies het juiste opzetstuk

Kies het juiste opzetstuk voor het type massage. Het opzetstuk "duw" je in de massage gun. Bij het vervangen van opzetstuk mag er hard getrokken worden.

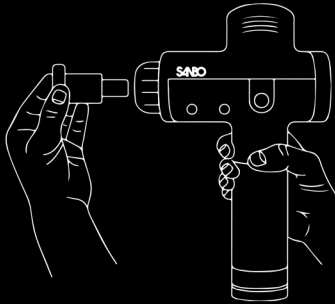

4 Snelheid aanpassen

Kies de gewenste snelheid door de + en - knoppen in te drukken.



5 Opladen

Gebruik alleen de meegeleverde SANBO oplader om garantie te blijven behouden. De Massage Gun heeft op het scherm een indicatie van het batterij %.

Wanneer de oplader geen brandt is de Massage Gun volledig opgeladen.



6 Nazorg

Gebruik een vochtige, schone doek en veeg de Massage Gun en de opzetstukken schoon.

Zorg er voor dat het apparaat uit staat en de oplader niet is aangesloten.



Opzetstukken



Round Ball

Perfect te gebruiken voor grote en kleine spiergroepen.



Air Plug

Geschikt voor alle spiergroepen. Perfect om kennis te maken met massage.



Y - Fork

Geschikt voor de rug, biceps, kuiten achillespees en enkels.



Bullet

Het opzetstuk om “deep tissue” massage mee na te bootsen. Masseer knopen op de meest nauwkeurige manier uit jouw spieren.



Dampener

Geschikt om klopmassage toe te passen. Gebruik dit opzetstuk vooral op de grotere spiergroepen.



Finger

Mimic massage van een echte therapeut met het Finger opzetstuk. Iets minder intensief dan het Bullet opzetstuk.



Flat head

Geschikt voor moeilijk bereikbare plekken. Kan toegepast worden om oppervlakkig maar ook diep te masseren.



Thiead

Geschikt voor de ledenmaten. Perfect te gebruiken door zijn ronding.

Inhoud verpakking

-SANBO Massage Gun Elite- EAN 8719326810669

Bijgevoegde accessoires

- 8x opzetstuk
- 1x EU-adapter
- 1x Opbergkoffer
- 1x Handleiding

Product Eigenschappen

Afmeting	25,2 x 7 x 26,9 CM
Gewicht	700 gr
Kleur	Zwart
Voeding - Vermogen - Voltage	100 - 240V - 50/60Hz - Max 1.5A
Type batterij	Lithium-Ion 2500 mAh
Batterijduur	3 - 4 uur
Snelheid	0 - 4000 RPM
Geluid	30 - 45 dB

Overige eigenschappen

- 30 snelheidsstanden.
- Oververhittings beveiliging.

Opslag

- Bewaar de SANBO Massage Gun op een droge, schone plek. bewaar het apparaat niet in extreem hoge of lage temperaturen.

Weggoeien / recyclen

- Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving door jouw SANBO Massage Gun aan het einde van de levensduur niet weg te gooien bij het normale huisvuil maar deze te recyclen. Dit kan op een door de overheid aangewezen inzamelpunt voor batterijen en accu's. Dit is vooralsnog geheel gratis!

Service en Garantie

- Indien je service of informatie nodig hebt omtrent jouw SANBO product, schroom dan niet en stuur een e-mail naar klantenservice@sanbo.nl of bel met 0800 3336669.

- Er zit standaard 1 jaar fabrieksgarantie op jouw SANBO product. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 1 jaar na de aankoopdatum geldend worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet; bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

Disclaimer

- Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van reden.

SANBO App

De massage gids in jouw broekzak

Krijg begeleiding bij jouw
massage.

Lees over informatie m.b.t.
percussiotherapie en de
verschillende opzetstukken.



SANBO Care

Een team die klaar
zit speciaal
voor jou!



Neem contact op met ons team als er iets onduidelijk is of er vragen zijn over het product.

