



SHOPPLACE

GEBRUIKSAANWIJZING

Ultrasoon Huidverjongingsapparaat met heating



Houd ingedrukt
voor 2 seconden



Lees de instructies en bewaar deze goed

Made in P.R.C
RoHS CE FC

Inhoud

- 1. Introductie
 - .1 Waarchuwingen en veiligheidsinstructies
 - .2 Ontvangen van het product
 - .3 Inhoud verpakking
- 2. Producteigenschappen
- 3. Instructies voor gebruik
- 4. Behandelmethoden
- 5. Gebruiksaanwijzingen
- 6. Opslag -en reiniging
- 7. Service -en garantie

- Bedankt dat je hebt gekozen voor een van onze Shoplace producten. Lees de gebruiksaanwijzing van je Ultrasoon huidverjongingsapparaat met heating aandachtig door en bewaar deze goed. Volg en lees de veiligheidsvoorschriften voor veilig en correct gebruik van het product. Mocht je nog vragen hebben over het product of iets anders, neem dan contact met ons op via : support@shoplace.nl
- De Shoplace Ultrasoon huidverjongingsapparaat met heating kan gebruikt worden voor het verwijderen van mee-eters, puisten, overtollig talg -en huidvetten. Bovendien kan het ook gebruikt worden voor het masseren en verstevigen van de huid. Het apparaat beschikt over 4 Ultrasonie behandelingen met ieder een ander resultaat voor de huid.
- Het gebruik van het apparaat is eenvoudig en kan aangezet worden door de **aan/uit knop voor korte duur in te drukken**. De Ultrasoon Huidverjongingsapparaat gaat automatisch naar de 1e stand.
- De roestvrijstalen spatel brengt hoogfrequente trillingen vrij die zorgen voor verzorging en verbetering van de huid. De heating functie zorgt ervoor dat de gezichtsporiën tijdens gebruik geopend worden, waardoor het resultaat verbeterd. Gebruik het 2 á 3x per week voor je wekelijkse gezichtsverzorging om af te komen van je onzuiverheden. De Shoplace Ultrasoon huidverjongingsapparaat is effectief, pijnloos en simpel in gebruik.

⚠ Lees de onderstaande instructies aandachtig door voordat je gebruik gaat maken van de Ultrasoon huidverjongingsapparaat

- Als dit de eerste keer is dat je de Ultrasoon huidverjongingsapparaat gebruikt, is het belangrijk om de handleiding en instructies aandachtig door te lezen. Let op de consequenties -en de risico's die ontstaan bij misbruik van de Ultrasoon huidverjongingsapparaat. Dit kan leiden tot persoonlijke letsel -en schade aan het apparaat.
- Dit apparaat is niet geschikt voor mensen (inclusief kinderen) met een fysieke -en of mentale beperking.
- Dit apparaat is niet geschikt voor mensen met (oplopende) gehoorschade of Tinnitus (oorsuizen).
- Gebruik de Ultrasoon huidverjongingsapparaat alleen voor de doeleinden beschreven in deze handleiding.
- De Ultrasoon huidverjongingsapparaat is gemaakt voor privé gebruik en niet voor commerciële doeleinden.
- Shoplace is niet verantwoordelijk voor schade -en of breuk veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie aan de Ultrasoon huidverjongingsapparaat.
- De Ultrasoon huidverjongingsapparaat bevat een accu en wordt opgeladen via een USB-kabel. Zorg ervoor dat het apparaat op een donkere -en droge plek opgeladen wordt en houd regelmatig zicht.
- De Ultrasoon huidverjongingsapparaat kan alleen droog/vochtig gebruikt worden. Het is mogelijk om het te gebruiken in combinatie met een olie, serum -en of crème. Zorg ervoor dat het gehele apparaat **NIET** onder stromend water of hierin onderdompelt wordt.

Gebruik en bewaar de Ultrasoon huidverjongingsapparaat buiten het bereik van kinderen.

Gebruik de Ultrasoon huidverjongingsapparaat nooit op de onderstaande delen van het lichaam:

- De tepels
- De oren
- De penis en balzak
- De vagina

Ontvangen van het product


1.2

- Controleer de inhoud van het pakket wanneer je de zending ontvangt. Neem contact op met ons, indien er onderdelen ontbreken. Lijkt het apparaat beschadigd, neem dan contact op met ons en geef een gedetailleerde beschrijving van het probleem. Bewaar het product goed om je klacht te onderbouwen.

Inhoud verpakking

1.3

- 1x Shoplace Ultrasoon huidverjongingsapparaat
- **Accessoires:**
- 1x USB-oplaadkabel
- 1x Shoplace opbergzak
- 1x Handleiding

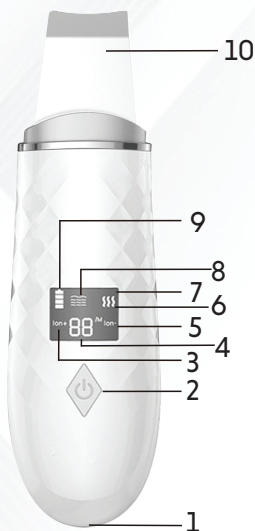

Specificatie lijst:

1. USB-oplaadpunt
2. Aan/uit knop (2 sec)
3. Positieve ionen
4. Gebruiksduur
5. Negatieve ionen
6. EMS Pulse
7. Modus Display
8. Dieptereiniging
9. Batterij status
10. Huidreinigende spatel

Grootte	173 x 54 x 13 mm
Gewicht	115 gram
Materiaal	ABS en roestvrijstalen spatel
Kleur	Grijs met zilver accenten
Batterij	Lithium 600mAh 3.7V
Aantal modus	4
Gebruiksduur	90 minuten
Opladtid	120 minuten
Netspanning	DC 3.0V
Frequentie	24KHz
Vibratie frequentie	28000/min

Aanbevelingen

- Zet de Ultrasoon Huidverjongingsapparaat aan door de aan/uit knop voor korte duur in te drukken.
- Reinig de Ultrasoon huidverjongingsapparaat met een licht vochtig doek na ieder gebruik. Volg de reinigingsinstructies onder sectie 6.
- Druk de Ultrasoon huidverjongingsapparaat niet te hard op de huid om een rood -en of geïrriteerd plek achter te laten.
- Gebruik de Ultrasoon huidverjongingsapparaat wanneer deze volledig is opgeladen voor 60 minuten.
- Gebruik de Ultrasoon huidverjongingsapparaat niet wanneer deze is aangesloten aan de USB-oplaadkabel. Trek dit voor gebruik los.
- Lees voor je eerste behandeling goed deze handleiding door om erachter te komen welke behandeling je kan gaan gebruiken.
- Plaats de Ultrasoon huidverjongingsapparaat op een hoek van 45-graden op de huid om het beste resultaat te krijgen.
- Neem een warme douche -en of ontspan jezelf om goed gebruik te maken van Ultrasoon huidverjongingsapparaat.
- Gebruik de Ultrasoon huidverjongingsapparaat ook in combinatie met olie, serum -en of een crème.
- De Ultrasoon huidverjongingsapparaat geeft hoog frequente trillingen af tijdens gebruik, schrik hier niet van.



- Cleansing / Deep Cleansing Ion +

De Cleansing / Deep Cleansing Ion + stand wordt gebruikt om dode huidcellen, overtollig talg en vuil van de huid te verwijderen.



- Nutrition / Ion -

De Nutrition Ion - stand wordt gebruikt om de absorptievermogen van de huid te vergroten. Hierdoor worden crèmes en serums effectiever opgenomen door de huid.



- EMS-pulse

De EMS-pulse stand wordt gebruikt om de huid te masseren en de onderliggende huidspieren te verstevigen. Ultrasonische trillingen staan bekend om collageen productie in de huid stimuleren, wat een strak, jong, glad en gezond huid tot gevolg heeft. De uitstraling van fijne lijnen en rimpels wordt verminderd.

Gebruiksaanwijzingen

1. Zet de Ultrasoon Huidverjongingsapparaat aan door de aan/uit knop voor korte duur in te drukken. Het apparaat gaat aan in de 1e stand. Hierna is een eenmalige klik nodig om de volgende standen te bereiken.
2. Reinig je gezicht en breng je olie, serum -en of crème aan op de huid.
3. Kies de gewenste stand door eenvoudig op de aan/uit knop te klikken. In de LCD-scherm wordt je huidige behandeltype weergegeven.
4. Zet de spatel in de gewenste positie tegen de huid aan en beweeg en masseer licht over de huid heen. Houd dit vol voor 10 á 15 minuten en herhaal dit meerdere malen per week.
5. Reinig het apparaat na gebruik met een licht vochtig doek en berg het netjes op.

- Berg het apparaat op in de meegeleverde Shoplace opbergzak. Verplaats en berg het hierna op een schone, stofvrije en droge plek.
 - Reinig de Ultrasoon huidverjongingsapparaat na ieder gebruik. Het apparaat dient **NIET** met water schoongemaakt te worden, maar met een licht vochtig doek.
- Stappenplan reinigen:**
1. Zet de Ultrasoon huidverjongingsapparaat uit.
 2. Verwijder eventueel de opbergkap -en of USB-kabel uit het apparaat.
 3. Reinig de Ultrasoon huidverjongingsapparaat met een licht vochtig doek. Wrijf eroverheen en probeer geen gebruiksafdrukken -en of onzuiverheden achter te laten.
 4. Zorg ervoor dat het apparaat **NIET** schoongemaakt wordt met water -en of een andere oplossing.
 5. Reinig de overige gebieden van het apparaat met het licht vochtig doek om het hygiënisch en schoon te houden voor de volgende keer.
 6. Berg het apparaat netjes met de kap in de opbergzak.

✉ *Indien je informatie -en of service nodig hebt, stuur dan een e-mail naar support@shoplace.nl*

Wij verlenen 1 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 1 jaar na de aankoopdatum geldend worden gemaakt.

⚠ We geven geen garantie in de volgende gevallen:

- Beschadiging ontstaan bij vuur, aardbevingen of overstromingen.
- Beschadiging ontstaan bij oncontroleerbare factoren.
- Beschadiging aan het apparaat ontstaan door de klant.
- Beschadiging aan het apparaat door het gebruik van liquide middelen.
- Beschadiging door het gebruik op verboden plekken of sterk afgeraden plekken.
- We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld bij verwondingen aan het lichaam, wanneer de klant de Ultrasoon Huidverjongingsapparaat onjuist gebruikt.