



**Instructies voor gebruik**  
Aandachtig lezen voor gebruik

## Inhoud

01.	Introductie	3
02.	Beoogd gebruik	4
03.	Microcurrent	5
04.	Inhoud	6
05.	Veiligheidsrichtlijnen	7
06.	Voor gebruik	11
07.	Gezichtstechnieken	12
08.	Gebruik Uniwand	18
09.	Verwijdering	21
10.	Probleemoplossing	21
11.	Garantie	22
12.	Technische specificaties	24
13.	Gebruikte symbolen	25

## 01.   **Introductie**

Uniwand brengt de professionele schoonheidsbehandeling bij u thuis. Uniwand is een niet-invasief hulpmiddel voor gezichtsverstevinging dat kan worden gebruikt naast microstroom-apparaten voor gezichtsverstevinging, zoals de Uniglo, om zichtbare tekenen van veroudering te verminderen. Uniwand werkt door elektrische impulsen op laag niveau af te geven via de behandelkop met dubbele bol naar de gezichtsspieren. De Uniwand biedt nauwkeurige en flexibele bediening, zodat gebruikers zich op de specifieke behoeften kunnen richten. Microstroomtherapie moet volledig pijnvrij zijn. De stroom die tijdens de stimulatie wordt afgegeven, is zo klein dat in de meeste gevallen geen gevoel zal worden gevoeld.

## **02. Beoogd gebruik**

Uniwand is een accessoire dat is ontworpen om te worden gebruikt met TensCare-schoonheidsproducten in de thuisomgeving om tekenen van veroudering te verminderen. Het is geschikt voor gebruik door iedereen die het apparaat kan bedienen en de instructies kan begrijpen.

Gebruik het apparaat niet voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor cosmetisch gebruik op het gezicht.

Waarschuwing: Niet geschikt voor gebruik door kinderen zonder toezicht van een volwassene.

Belangrijk: Het apparaat mag alleen worden gebruikt met microstroomprogramma's zoals Uniglo FACE 2. Gebruik alleen Uniwand met microstroomparameters die in deze handleiding worden aanbevolen.

Waarschuwing: Als u Uniwand gebruikt met het Uniglo Face and Body Toning-apparaat, gebruik dan geen FACE 1-programma of een ander programma dan FACE 2.

### 03. Microcurrent

Microstroomstimulatie levert een lage stroom in de cellen van het lichaam. Microcurrent wordt regelmatig gebruikt door schoonheidsprofessionals om hun klanten een niet-invasief en veilig facelift-alternatief te bieden. Door de gezichtsspieren te stimuleren, kunnen regelmatige microstroombehandelingen het uiterlijk van uw huid positief beïnvloeden.

Microstroom kan zowel preventieve als corrigerende effecten hebben. De stimulatie kan helpen de huid strakker te maken en fijne lijntjes en rimpels te verzachten. De stimulatie kan er ook voor zorgen dat spieren en weefsels beter in staat zijn om de lichaamseigen natuurlijke bio-elektrische impulsen te ontvangen; daardoor kan ook een preventief resultaat worden bereikt.

#### Voordelen van microstroom


- Stimuleert de productie van collageen om het weefsel te vullen
- Helpt lijntjes en rimpels strakker en zachter te maken
- Stimuleert slappe spieren
- Vermindert oedeem: wallen onder de ogen worden verminderd, evenals donkere kringen onder de ogen.
- Geeft een jeugdige uitstraling aan de huid
- Verstevt en vermindert open poriën
- Verbeterd de kleuren en textuur van de huid

## 04. Inhoud

1 x Uniwand

1 x Unigel Hyaluronic Conductive Gel

1 x Handleiding

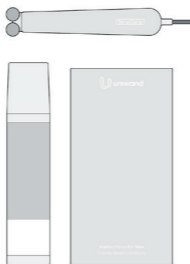

## 05. Veiligheidsrichtlijnen

### Contra-indicaties

- Niet gebruiken als u een pacemaker heeft (of als u een hartritme probleem heeft) of met elektronische apparaten. Het gebruik van dit apparaat met elektronische apparaten kan een verkeerde werking van het apparaat veroorzaken. Stimulatie in de directe nabijheid van een geïmplanteerd apparaat kan van invloed zijn op sommige modellen.
- Niet gebruiken tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap.

### Waarschuwingen

- Uniwand is alleen ontworpen om te worden gebruikt met Microcurrent-programma's. Niet gebruiken met programma's die de in de technische specificatie gespecificeerde parameters overschrijden.
- Niet gebruiken bij het autorijden, het bedienen van machines of soortgelijke handelingen waarbij spiercontrole vereist is. Beschadigde leads of plotselinge veranderingen in contact kunnen korte onwillekeurige spierbewegingen veroorzaken.

- Niet gebruiken als u in het te behandelen gebied: actieve of vermoede kanker heeft of niet-gediagnosticeerde pijn met een voorgeschiedenis van kanker. Stimulatie rechtstreeks door een bevestigde of vermoede maligniteit moet worden vermeden, aangezien dit de groei kan stimuleren en de verspreiding van kankercellen kan bevorderen.
- Niet gebruiken terwijl het tegelijkertijd is aangesloten op hoogfrequente chirurgische apparatuur, aangezien dit kan leiden tot brandwonden op de plaats van de stimulatorelektroden en mogelijke schade aan de stimulator.
- Niet gebruiken als u metalen implantaten in het hoofd- of nekgebied heeft.
- Niet gebruiken als u Botox-injecties in het toepassingsgebied heeft.
- Niet gebruiken gedurende 6-8 weken na collageeninjecties.
- Niet gebruiken gedurende 1 jaar na een behandeling met Retin A of Ro-Accountaine. Dit medicijn dat wordt gebruikt bij de behandeling van acne kan een dunner worden van de huid veroorzaken.
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de Uniwand-kabel plaatst



## Waarschuwingen:

- Uniwand is uitsluitend bedoeld voor gebruik bij één patiënt. Deel uw Uniwand niet. Onjuiste behandeling of kruisinfectie kan optreden.
- Voorzichtigheid is geboden als u een bloedingsstoornis heeft, aangezien stimulatie de bloedstroom naar het gestimuleerde gebied kan verhogen.
- Voorzichtigheid is geboden als u epilepsie vermoedt of gediagnosticeerd heeft, aangezien elektrische stimulatie de aanvalsdrempel kan beïnvloeden.
- Sta het gebruik niet toe door kinderen die de instructies niet kunnen begrijpen of personen met cognitieve handicaps, d.w.z. de ziekte van Alzheimer of dementie.
- Buiten bereik van kinderen houden. Looddraad is een lang snoer - risico op verwuring bij zuigelingen.
- Niet gebruiken op een beschadigde huid.
- Sommige patiënten kunnen huidirritatie of overgevoeligheid ervaren als gevolg van de elektrische stimulatie of het elektrisch geleidende medium (bijv. de Unigel). De irritatie kan meestal worden verminderd door een alternatief geleidend medium te gebruiken. Als de huidirritatie aanhoudt, stop dan onmiddellijk met de behandeling.

- Dompel uw apparaat niet onder in water en plaats het niet in de buurt van extreme hitte.
- Houd het apparaat uit de buurt van zonlicht, omdat langdurige blootstelling het rubber kan aantasten, waardoor het minder elastisch wordt en barst.
- Houd het apparaat uit de buurt van pluisjes en stof, aangezien langdurige blootstelling de aansluitingen kan aantasten of ervoor kan zorgen dat de batterijconnector slecht contact krijgt.
- Er zijn geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Probeer het apparaat niet te openen of aan te passen. Dit kan de veilige

## 06. Voor gebruik

Uniwand is ontworpen om te worden gebruikt met Uniglo's FACE 2-programma.

**Belangrijk:** Neem alle contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen in acht die zijn meegeleverd met het apparaat waarmee u de Uniwand gebruikt.

### Programma Informatie

Het FACE 2-programma van Uniglo is ontworpen om drie behandelingsfasen te bieden.

**Fase 1 – Circulatie:** Dit deel van de behandeling stimuleert de epidermale en dermale bloedcirculatie. Het heeft ook een activerend effect op de lymfecirculatie.

**Fase 2 – Oppervlakkige lift:** Dit deel van het programma tilt de oppervlakkige gezichtsspieren op.

**Fase 3 – Diepe gezichtsversteving:** deze fase geeft een lift aan de diepe gezichtsspieren.

De programmafases worden op het Uniglo-display aangegeven door de centrale balk (afbeelding hieronder)




## **07. Gezichtstechnieken**

Op de volgende pagina's worden microstroom gezichtstechnieken beschreven. Elk gebied van het gezicht heeft verschillende slagen en startposities.

Elke gezichts beweging moet 5 seconden duren om uit te voeren.


De gebruiker moet zich op één gebied van het gezicht tegelijk concentreren.

## Kaak en wangen

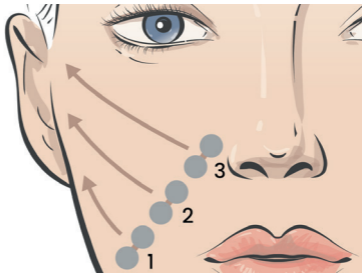


- Positie 1 (kaak) – Plaats de onderste bol op uw kaaklijn. Schuif de toverstaf langzaam naar uw onderoor.
- Positie 2 (onderste wangen) - Plaats de onderste bol onder je jukbeen. Schuif de Uniwand langzaam naar je middenoor.
- Positie 3 (Bovenste Wangen) – Plaats de onderste bol op je jukbeen. Schuif de Uniwand langzaam naar uw bovenoor.
- Herhaal dit voor de andere kant van het gezicht.

## Voorhoofd

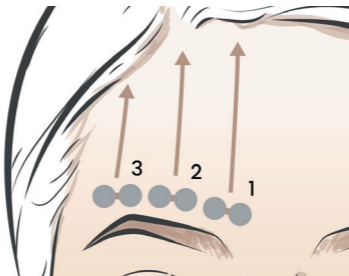


- Plaats de Uniwand op positie 1, boven de dikte van je wenkbrauw. Schuif de Uniwand langzaam naar je haarlijn.
- Herhaal dit voor positie 2 en 3.
- Herhaal dit voor de andere kant van het gezicht.

## Oog

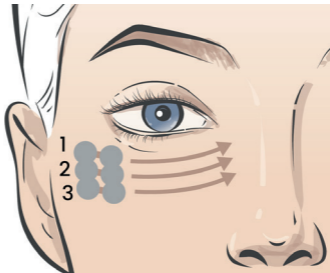

- Plaats de Uniwand op positie 1, met de bollen horizontaal gepositioneerd. Schuif de Uniwand langzaam naar de binnenhoek van je oog, waarbij je dezelfde oriëntatie behoudt.
- Herhaal dit voor positie 2 en 3.
- Herhaal dit voor de andere kant van het gezicht.


## Lip

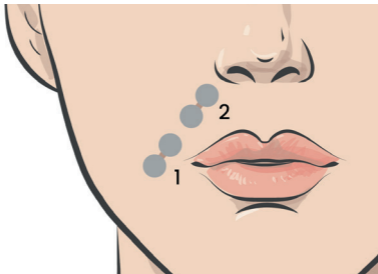

- Plaats de Uniwand boven de bovenlip. Duw de Uniwand omhoog richting uw oor en houd de Uniwand 5 seconden in deze positie.
- Herhaal op positie 2.
- Herhaal dit voor de andere kant van het gezicht.



## Wang Contour

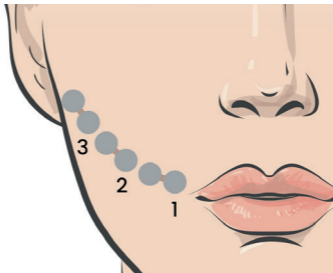

- Plaats de Uniwand onder de wangappeldichtbij de neus. Til de wangcontour op door de Uniwand omhoog te duwen. Houd de Uniwand 5 seconden in deze positie.
- Herhaal op positie 2 (onder de appel van de wang, halverwege tussen neus en oor) en 3 (onder de appel van de wang, bij de haarlijn).
- Herhaal dit voor de andere kant van het gezicht.

## **08. Gebruik Uniwand**

1. Reinig het gebied van het gezicht dat u wilt behandelen.
2. Sluit de Uniwand-kabel aan op een van de kabelaansluitingen op het Uniglo-apparaat.
3. Breng de Unigel Hyaluronic Conductive Gel aan op het gezicht. Gebruik een vergelijkbare hoeveelheid als wanneer u een vochtinbrengende crème op uw gezicht aanbrengt.
4. Schakel het Uniglo-apparaat in.
5. Druk op de programmaknop totdat het FACE 2-programma is geselecteerd. Eenmaal geselecteerd, start de behandelsessie automatisch.
6. Voer de gezichtstechnieken uit voor het geselecteerde gebied van het gezicht, zoals aangegeven in de diagrammen voor gezichtsstreken. Elke gezichtstechniek moet 5 seconden duren om uit te voeren.

Voor elke fase van het Uniglo-programma moet de gebruiker een reeks cycli van gezichtsbewegingen voltooien.

Fase 1 – 2 cyclus

Fase 2 – 3 cyclus

Fase 3 – 2 cyclus

1 stroke = een gezichtsbeweging vanuit één startpositie

1 cyclus = gezichtsbewegingen vanuit elke startpositie (zie diagrammen voor gezichtsbewegingen), voor beide zijden van het gezicht

Voor het voorhoofd zou de gebruiker bijvoorbeeld strokes maken aan de linkerkant van het gezicht op positie 1, 2 en 3. Vervolgens zouden ze de strokes aan de rechterkant van het gezicht uitvoeren, opnieuw op positie 1, 2 en 3. Dit zou een volledige cyclus zijn. Voor fase 1 moet de gebruiker dit proces twee keer voltooien (2 cycli), 3 keer voor fase 2 (3 cycli) en twee keer voor fase 3 (2 cycli).

Opmerking: Elke fase heeft een vooraf ingestelde tijd (zie Uniglo-handleiding) om de benodigde cycli uit te voeren. Er wordt echter verwacht dat u de gezichtscycli voor elke fase binnen de toegewezen tijd voltooit.

7. Als u het aantal cycli voor elke fase vóór het einde van de fasetijd hebt voltooid, ontgrendelt u het apparaat door op een van beide ▼-knoppen te drukken en de faseoverslaan-knop 3 seconden ingedrukt te houden om naar de volgende fase te gaan.

**Let op:** De verwachte behandeltime per gezichtszone is 5 minuten.

8. Zodra alle drie de fasen zijn voltooid, gaat u naar het volgende deel van het gezicht dat u wilt behandelen en voltooit u fase 1, 2 en 3 zoals hierboven beschreven.

**Let op:** Microstroomstimulatie kan oncomfortabel of pijnlijk zijn als er onvoldoende geleidende gel wordt gebruikt. Als u halverwege een sessie pijn begint te voelen, breng dan extra geleidende gel aan op het gebied van het gezicht dat u behandelt.

## **Gebruiksfrequentie**

We raden één behandelingssessie per dag aan, 5 dagen per week, gedurende 12 weken. U kunt al na één sessie positieve effecten opmerken, maar normaal gesproken duurt het ongeveer 6 weken voordat u een verschil merkt.

## **Na je sessie**

Schakel uw Uniglo-apparaat uit door de aan/uitknop aan de zijkant ingedrukt te houden en koppel de Uniwand los.

Was uw gezicht met warm zeepsop om overtollig Unigel te verwijderen.

Het is belangrijk dat de Uniwand na elk gebruik wordt schoongemaakt. Reinig met een alcoholvrij antibacterieel doekje zoals TensCare-doekjes (zie X-WIPES) of met een vochtige doek en een oplossing van milde zeep en water. Eventuele overtollige Unigel moet worden verwijderd. Droog vegeu.

Als u het naast het Uniglo-apparaat gebruikt, bergt u de Uniwand na gebruik op in het Uniglo-opbergzakje.

## 9. Verwijdering

Grondig reinigen en afvoeren volgens de plaatselijke voorschriften.

## 10. Probleemoplossing

Als uw Uniwand niet goed werkt, controleer dan het volgende:

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Pijn tijdens behandeling	Verkeerde programma in gebruik	Uniwand mag alleen worden gebruikt met Microcurrent-programma's. Bij gebruik met Uniglo moet dit FACE 2 zijn.
	Niet genoeg Unigel op het gezicht	Breng gelijkmatig een ruime hoeveelheid Unigel aan op de delen van het gezicht die u stimuleert.
	Irritatie of allergische reactie op de Unigel Hyaluronic Conductive Gel.	Probeer een alternatieve geleidende gel op waterbasis. Beëindig de behandeling en vraag advies aan uw zorgverlener.
Geen gevoel	Microcurrent programma wordt gebruikt.	Het is normaal dat u tijdens het gebruik geen gevoel voelt.

Als de bovenstaande beoordeling uw probleem niet heeft opgelost, of om onverwachte werking of gebeurtenissen te melden, of om feedback te geven, bel dan TensCare of uw lokale leverancier of distributeur (adres op achteromslag) voor advies.

Neem contact op met de TensCare-klantenservice op +44 (0) 1372 723 434. Onze medewerkers zijn opgeleid om u te helpen met de meeste problemen die u mogelijk heeft ondervonden, zonder dat u uw product voor service hoeft op te sturen.

## **11. Garantie**

Uniwand Uniwand heeft een garantie van één jaar vanaf de aankoopdatum. De garantie dekt de Unigel Hyaluronic Conductive Gel niet.

Deze garantie is ongeldig als het product is aangepast of gewijzigd, onderhevig is aan misbruik of gebruik; beschadigd tijdens transport; gebrek aan verantwoorde zorg; is gevallen; als het apparaat in water is ondergedompeld; als er schade is ontstaan door het niet opvolgen van het bijgevoegde schriftelijke instructieboekje; of als productreparaties worden uitgevoerd zonder toestemming van TensCare Ltd. We zullen alle onderdelen die nodig zijn om materiaal of vakmanschap te corrigeren, repareren of naar onze keuze gratis vervangen, of het hele apparaat vervangen en tijdens de garantieperiode aan u retourneren. Anders zullen we een prijsopgave doen voor elke reparatie die zal worden uitgevoerd na aanvaarding van onze offerte. De voordelen

die door deze garantie worden verleend, zijn een aanvulling op alle andere rechten en rechtsmiddelen met betrekking tot het product, die de consument heeft op grond van de Consumer Protection Act 1987. Onze goederen worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten onder de Britse consumentenwetgeving. U heeft recht op reparatie of vervanging van de goederen als de goederen niet van acceptabele kwaliteit zijn.

Mocht reparatie binnen de garantieperiode nodig zijn, stuur dan het apparaat terug met de volgende informatie:

- Naam
- Adres
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Aankoopbewijs
- Naam en adres van de detailhandelaar
- Korte beschrijving van het probleem dat u ondervindt

Stuur het apparaat naar:

**TensCare Ltd**  
Blenheimweg 9,  
Epsom, Surrey  
KT19 9BE, VK

Indien u meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen door te bellen naar +44 (0) 1372 723 434.




## 12. Technische specificaties

Apparaat Specificaties	
Afmetingen	134 x 25 x 25mm
Gewicht	53g
Microstroom	100 - 750 $\mu$ A
Omgevingspecificaties	
In gebruik	Temperatuur bereik: 0-40°C Vochtigheid: 10-93% RH niet-condenserend Druk: 700-1060hPa
Opslag	Temperatuur bereik -25-70°C Vochtigheid: 10-93% RH niet-condenserend Druk: 700-1060hPa



### 13. Gebruikte symbolen

	Dit symbool op het apparaat betekent "Raadpleeg de gebruiksaanwijzing".
	CE Markering
	Fabrikant Symbool
	Partijnummer: geeft de partijcode van de fabrikant aan zodat de partij of partij kan worden geïdentificeerd.
	Catalogusnummer: geeft het catalogusnummer van de fabrikant aan zodat het apparaat kan worden geïdentificeerd.
	Niet weggooien bij het huisvuil.
	Temperatuurbepering: geeft de temperatuurgrenzen aan waaraan het apparaat veilig kan worden blootgesteld.
	Vochtigheidslimiet: geeft de vochtigheidslimieten aan waaraan het apparaat veilig kan worden blootgesteld.
	Atmosferische druk: geeft de atmosferische limieten aan waaraan het apparaat veilig kan worden blootgesteld.

	Een contra-indicatie wordt gebruikt wanneer een hulpmiddel niet mag worden gebruikt omdat het risico van gebruik duidelijk opweegt tegen de te voorziene voordelen en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
	Er wordt een waarschuwing gebruikt wanneer het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
	Let op! wordt gebruikt wanneer het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot licht of matig letsel, of schade aan het apparaat of andere eigendommen.

TensCare streeft ernaar u het best mogelijke product en de best mogelijke service te bieden. We luisteren naar uw suggesties en proberen voortdurend onze producten te verbeteren. We willen ook meer te weten komen over de manier waarop onze producten worden gebruikt en de voordelen die ze bieden. Als u iets heeft dat u met ons wilt delen, neem dan contact met ons op.

[www.tenscare.co.uk](http://www.tenscare.co.uk)

Volg ons:



TensCare Nederland



@Tenscare.NL

Gedistribueerd door:



TensCare Ltd.  
9 Blenheim Rd, Epsom,  
Surrey, KT19 9BE, U.K.  
+44 (0) 1372 723 434

I-UNIWARD  
[NL] Rev 1.0 03/23

TensCare™