

IBORRIA

IPL HAIR REMOVAL



Instructieboekje



Deze handleiding is eigendom van Luxuriq B.V. en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Luxuriq B.V. niet worden gekopieerd, verspreid, aangepast of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor deze oorspronkelijk is bedoeld.

Veiligheid eerst

We streven ernaar om de behoeften van onze klanten voor te blijven door producten en diensten van hoge kwaliteit te leveren op basis van ons bedrijfsbeleid van “Hoge mate van verantwoordelijkheid” en “Absolute geloofwaardigheid”. Dit is om ervoor te zorgen dat het product correct en veilig wordt gebruikt. Om te voorkomen dat gebruikers of andere personen persoonlijk letsel oplopen of materiële schade oplopen, dient u deze in acht te nemen.

Contra-indicaties

- Minderjarigen en kinderen onder de 18 jaar wordt afgeraden het te gebruiken, omdat het apparaat niet getest is op deze personen.
- Niet voor zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of tijdens de menstruatieperiode.
- Niet gebruiken bij huidlittekens en lichtgevoelige huid. Niet gebruiken bij spataderen en vaatverwijding.
- Niet gebruiken als de bestraalde plaats geïnfecteerd is, eenvoudige celuitslag, huidlaesies, hematoom, enz.
- Gebruik het product niet op het bovenste deel van het gezicht. (boven de jukbeenderen), anus, tepel of borsthof.
- Voor mannen: gebruik het product niet op het scrotum;
- Voor vrouwen: gebruik het product niet op de schaamlippen of de vagina,
- Verbrande huid, folliculitis, kwaadaardige tumoren, besmettelijke huidziekten, enz. zijn verboden.
- Lichte beschadigingen (verbrand door de zon), wacht tot de huid hersteld is voor gebruik. Gevoelige delen zoals slijmvliesen mogen niet gebruikt worden.
- Personen die binnen 30 dagen chemische ontharingsmethoden hebben gebruikt, die in korte tijd whitening producten hebben gebruikt of die cosmetica met vitamine A-ingrediënten hebben gebruikt. Gebruik het met voorzichtigheid.
- Personen die in de afgelopen 6 maanden isotretinoïne hebben gebruikt, mogen het apparaat niet gebruiken, omdat dit littekens kan veroorzaken.
- Het kan niet worden gebruikt in dezelfde periode als essentiële olieproducten. Zorg ervoor dat het belichte gebied schoon, droog en vrij van crèmes, glijmiddelen en andere cosmetica op het belichte gebied is; als het huidoppervlak niet glad is, kan dit de ervaring van het gebruik van het product beïnvloeden en kan het product zelfs beschadigd raken.

- Het is ten strengste verboden om dit product te gebruiken voor elk type wond dat nog niet genezen is. Het wordt afgeraden voor patiënten met hirsutisme en andere door hirsutisme veroorzaakte ziekten.
- Als je huid- of haarkleur niet geschikt is, is het verboden om dit product te gebruiken (raadpleeg de huidkleurkaart). (Raadpleeg indien nodig uw arts voor gebruik).

Waarschuwingen

- Ontharing met IPL ontharingsapparaten of intense gepulseerde lichtbronnen kan bij sommige mensen de haargroei doen toenemen. Gebaseerd op de huidige beschikbare gegevens zijn de hoogste risicogroepen voor deze reactie vrouwen van mediterrane, Midden-Oosterse en Zuid-Aziatische afkomst. Behandeld op gezicht en hals. Deze groep moet voorzichtig zijn.
- Houd het product buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik dit product niet in de buurt van een badkuip, douchebak, wastafel of andere voorwerpen die water bevatten.
- Houd het product en de voedingsadapter droog.
- Als het product beschadigd is, raak dan geen interne onderdelen aan om willekeurige elektrische schokken te voorkomen.
- Als je rughaar moet worden verwijderd, heb je misschien een assistent of partner nodig. Dit is onze aanbeveling, omdat we ons zorgen maken dat je misschien riskant kunt zijn als je het alleen doet.
- Als je haar langer is dan 1 mm, eerst scheren. We raden aan om het met een scheermesje te doen. Te lang haar absorbeert warmte op het huidoppervlak, wat roodheid en zwelling van de huid veroorzaakt, en verschroeid haar produceert een geur. Dit zal je ervaring met het product beïnvloeden.
- Als de huid van de bestraalde zone niet droog of schoon is, zal dit het gebruikseffect beïnvloeden en kan dit er ook toe leiden dat het product niet of onverwacht loslaat
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het, om gevaar te voorkomen, vervangen worden door vakmensen van de fabrikant, zijn onderhoudsafdeling of soortgelijke afdelingen.
- Veiligheid voor de ogen: Het apparaat zendt flitsen intens gepulseerd licht uit. Hoewel het apparaat getest is en voldoet aan de internationale normen om ervoor te zorgen dat de output veilig is voor je ogen. Voor je ogen, is directe blootstelling nog steeds potentieel schadelijk voor je ogen. Het apparaat kan alleen flitsen (licht uitzenden) als zowel de huidsensor een geldige huidwaarde detecteren. Echter: als beide huidsensor een geldige huidwaarde detecteren.

- **Echter:**

Kijk **NIET** rechtstreeks in het lichtgevende venster van het apparaat wanneer het apparaat elektrische voeding heeft en ingeschakeld is.

NIET proberen het apparaat naar het oog te richten (licht uit te stralen).

GEEN gebieden rond het oog behandelen (wenkbrauwen of wimpers).

Doe dit product **NIET** in de buurt van de ogen. Een beschermende bril kan inderdaad de normale handelingen van de gebruiker beschermen, maar als u rond de ogen werkt, kan de beschermende bril de energie niet volledig blokkeren tegen geabsorbeerd door de irismelanine in uw ogen op korte afstand.

Probeer het systeem **ALLEEN** te flashen als het licht uitstralende venster van het apparaat in goed contact is met het gebied dat u wilt behandelen.

We raden u aan van het apparaat weg te kijken wanneer u op uw huid spuit. huid. Of We raden u aan om bij elk gebruik een veiligheidsbril te dragen.

gebruikt. Hoewel het licht niet direct van invloed is op de bril, is de hoogfrequente Het hoogfrequente flitslicht kan uw gezichtsvermogen aantasten.

De maximale temperatuur van de behandelkop is 110°F, waardoor de huid niet verbrandt wanneer deze een bepaalde temperatuur bereikt.

Voorzorgsmaatregelen

- Sommige klanten ervaren een lichte roodheid na gebruik, wat normaal is. Dit verdwijnt normaal gesproken binnen 24 uur. Als het niet binnen 24 uur verdwijnt, stop dan met het gebruik van het apparaat en raadpleeg de klantenservice of uw arts.
- Gebruik geen antitranspirant onmiddellijk na het bestralen van de oksel.
- Maak de bestralingspoort regelmatig schoon om brandwonden en storingen tijdens het gebruik te voorkomen.
- Niet gebruiken wanneer de ventilatieopening geblokkeerd is, om rook en brand te voorkomen.
Niet gebruiken op huisdieren om verwondingen te voorkomen.
- Gebruik dit product niet in de buurt van de ogen om oogletsel te voorkomen. Veeg na gebruik het haar en de huidverzorgingsproducten die aan de epilator zijn bevestigd schoon om storingen en huidbeschadiging te voorkomen.
- Gebruik het niet in de buurt van kinderen, het product zal sterk licht uitstralen, wat pijn kan doen aan de ogen.

- Richt de bestralingspoort niet op een zwart voorwerp om schroeien, verkleuring of beschadiging te voorkomen.

- Nadat het product is ingeschakeld, mag het niet onbeheerd worden achtergelaten. Schakel het onmiddellijk na gebruik uit.

Reinig de huid, zorg ervoor dat er geen haarresten zijn, volledig droog en geen vette substanties op het huidoppervlak.

Als het temperatuurverschil in de gebruiksomgeving groter is dan 70°F, schakel het product dan uit en laat het ongeveer 2 uur staan om het opnieuw te gebruiken.

- Vermijd binnen 24 uur na bestraling directe ultraviolette straling op de bestraalde huid. Als de huid op het bestraalde gebied niet droog of schoon is, zal dit het gebruik van gepulseerd licht beïnvloeden. Als de huid op het bestraalde gebied niet droog of schoon is, heeft dit invloed op het gebruik van gepulseerd licht en kan dit er ook toe leiden dat het product niet of onverwacht zichtbaar wordt. Raak de lichtuitgangspoort niet aan na gebruik. Plaats het product niet in de zon en stel het niet langdurig bloot aan ultraviolet licht. Als de ingebouwde ventilator niet werkt na het inschakelen van de stroom (er is geen zoemend geluid hoorbaar), gelieve het apparaat dan niet te gebruiken. (er is geen zoemend geluid hoorbaar), gebruik hem dan niet om rook, brand of andere storingen te voorkomen. Nadat het product is ingeschakeld, mag het niet onbeheerd worden achtergelaten. Schakel het onmiddellijk na gebruik uit. Reinig de huid, zorg ervoor dat er geen haarresten zijn, volledig droog en geen vette substanties op het huidoppervlak. Als het temperatuurverschil in de gebruiksomgeving groter is dan 70°F, schakel het product dan uit en laat het ongeveer 2 uur staan om het opnieuw te gebruiken.

EMC Verklaringen

- IPL ontharingsapparaat (model T4) voldoet aan de EMC-vereisten.
- De gebruiker moet het apparaat installeren en gebruiken in overeenstemming met de EMC-informatie zoals beschreven in bijgevoegd materiaal.
- Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur kan de prestaties van het apparaat beïnvloeden, dus vermijd sterke elektromagnetische interferentie bij gebruik, zoals gebruik het apparaat niet in de buurt van een telefoon, magnetron enzovoort.
- Meer informatie over de handleiding en de verklaring van de fabrikant vindt u aan het einde van het artikel (Bijlage I).

Meer weten over IPL ontharingstechnologie

Hoe werkt IPL?

Het IPL ontharingsapparaat biedt ontharing via de Intense Pulsed Light technologie, ook wel IPL genoemd. In wezen maakt het apparaat gebruik van hoogenergetisch licht om een langdurige haarreductie te bereiken. De geabsorbeerde lichtenergie wordt omgezet in warmte-energie (onder het huidoppervlak), waardoor de haarfollikel wordt uitgeschakeld. Hierdoor komen de haren in een rustfase.

Wat kunt u verwachten?

Onmiddellijk na de behandeling zou je geen significante bijwerkingen van de behandeling moeten zien.

In de eerste paar weken na de eerste behandelingen zult u nog steeds enkele haren zien groeien. Dit zijn waarschijnlijk haren die gemist zijn tijdens de behandeling, d.w.z. dat ze inactief waren en niet in hun groeifase (Anagen) waren tijdens de behandeling, wanneer IPL het meest effectief is.

Na ongeveer 2 weken van het 4-weekse behandelingsprogramma zou je een vermindering van de haargroei moeten zien in haargroei. Het is echter mogelijk dat veel haren in hun groeifase nog niet behandeld zijn. Het is belangrijk om de wekelijkse behandelingen voort te zetten. **Na het 5-6 weken** durende programma zou je een aanzienlijke vermindering van haren in het behandelde gebied moeten zien. Overgebleven haren zouden kleiner en lichter van kleur moeten zijn. Door maandelijkse behandelingen of behandelingen naar behoefte voort te zetten, moet de vermindering van ongewenste haren behouden blijven.

Toepasselijke voorwaarden

Beoogd gebruik: IPL ontharingsapparaat is een vrij verkrijgbaar apparaat bedoeld voor het verwijderen van ongewenst haar zoals maar niet beperkt tot kleine gebieden zoals oksels en gezichtshaar onder de kinlijn en grote gebieden zoals benen. Geschikt voor mensenmassa's: Mensen ouder dan 18 jaar

Lichaamsdelen

Vrouwen: Benen, armen, oksels, bikinilijn en gezicht (onder de jukbeenderen)

WAARSCHUWING: Gebruik het apparaat niet in de buurt van de ogen, langs het voorhoofd, op de lippen of neusgaten. Gebruik het niet in het genitale gebied.

Mannen: Schouders en daaronder (borst, rug, armen, buik, benen)

WAARSCHUWING: Gebruik het apparaat voor mannelijke gebruikers niet in de nek of het genitale gebied. Het apparaat is bedoeld voor gebruik op lichaamshaar onder de nek, inclusief armen, oksels, bikinilijn, buik en benen. (Gebruik op baarden of gezichtshaar bij mannen kan leiden tot ongelijke resultaten).

Huidskleur

Het apparaat is bedoeld voor gebruik op lichte, medium en donkere huidtinten tot en met huidskleur (zie huidtintenkaart).

Haarkleur

Het apparaat is bedoeld voor gebruik op natuurlijk zwart of bruin haar. Het is mogelijk niet zo effectief op wit, grijs, blond of rood haar.

Wij raden aan om te kiezen op basis van de Fitzpatrick Phototyping Scale, die werd ontwikkeld door de dermatoloog Thomas Fitzpatrick van de Harvard Medical School, om de tint van een persoon en zijn tolerantie voor zonlicht te classificeren, en er zijn zes niveaus van huidtinten in de schaal. Het product is geschikt voor huidtinten van Type I tot Type IV. Identificeer je huidskleur en bekijk de volgende figuur en tabel om te zien of het product geschikt is:

Huidtint & lichaamshaartypen grafiek


Huidskleur \ Haarkleur	Wit	Beige	Licht bruin	Bruin	Donker bruin	Zwart of donkerder
 Wit/Grijs	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
 Rood	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
 Licht blond	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
 Donker blond Lichtbruin	✓	✓	✓	✓	⊘	⊘
 Bruin	✓	✓	✓	✓	⊘	⊘
 Donker bruin	✓	✓	✓	✓	⊘	⊘
 Zwart	✓	✓	✓	✓	⊘	⊘
✓ Van toepassing			⊘ Niet van toepassing			

Ken je IPL ontharingsapparaat


Als je niet zeker bent van je huid-/haartype, raadpleeg dan voor gebruik de tabel Huidtint & Lichaamshaartype.

Opmerking: Verschillende huidgevoeligheden en belichtingsinstellingen kunnen leiden tot verschillende gebruikerservaringen. Begin bij vermogensniveau 1 en werk zo nodig naar boven toe.


Apparaat overzicht

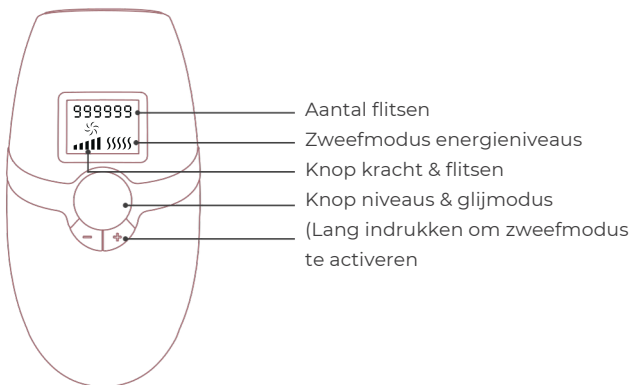


Behandelingsvenster

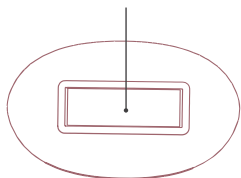

DC-voedingsconnectoren

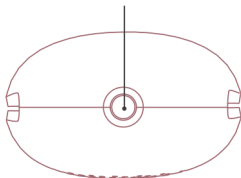

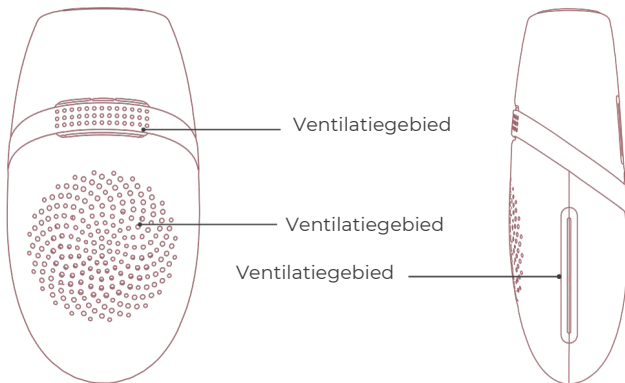

Bril



Scheermes



Stekker

Product Technische specificaties

Model	T4
Type bescherming	BF Type, Class II
Beschermingsniveau	IP22
Afmeting	14.5*7.6*4.5cm
Maximum teller	999,999 times
Vermogen	24W
Ingangsspanning	100-240V
Nominale frequentie	50/60Hz
Lichtgolflengte	510-1200nm
Spotgrootte (venstergrootte van licht)	3.0 cm2
Behandelingsintensiteit	Level 1 to 5
Energieniveau	8-14J
Energie dichtheid	2.66-4.66J/cm2

Bediening van uw IPL ontharingsapparaat

WAARSCHUWING: Volg elke stap in het behandelingsproces en zorg ervoor dat je alle aspecten van elke stap afrondt voordat je verder gaat met de volgende stap.

Stap 1: Het behandelgebied voorbereiden

Verwijder alle zichtbare haren op de huid voordat u het apparaat gebruikt. Reinig de huid grondig om ervoor te zorgen dat de huid volledig droog is en vrij van haarresten en olieachtige substanties (parfum, lotion, vloeibare deodorant, zonnecrème, enz.). Hierdoor kan het licht worden geabsorbeerd door de haartjes onder het huidoppervlak voor een effectieve behandeling. Gebruik geen ontharingscrèmes, omdat chemische stoffen huidreacties kunnen veroorzaken.

Stap 2: Doe een huidgevoeligheidstest

Voor je eerste behandeling op elk nieuw lichaamsgebied, raden we je aan om na te gaan of je huidskleur geschikt is en je huid (op dat gebied) te testen op reacties. Selecteer een klein deel van je huid om een huidgevoeligheidstest uit te voeren aan de hand van de volgende vereisten:

- 1) Kies een gebied in de buurt van het gebied dat je wilt behandelen.
- 2) Zet het apparaat aan. Zorg ervoor dat je niveau 1 of 2 selecteert.
- 3) Plaats het apparaat tegen uw huid en druk op de flash knop om een flash los te laten.
- 4) Schuif het apparaat over de huid naar het volgende te behandelen gebied.
- 5) Verhoog de instelling met één niveau, breng een flash aan en schuif het apparaat naar het volgende gebied. Herhaal dit voor alle niveaus binnen het aanbevolen bereik voor je huidtype.
- 6) Wacht na de huidtest 24 uur en controleer je huid op eventuele reacties. Als je huid reacties vertoont, kies dan de hoogste instelling die niet resulteerde in een huidreactie voor verder gebruik. De huidtest moet worden uitgevoerd op alle plekken die je wilt behandelen.

Hoe te gebruiken


Sluit het netsnoer aan op het IPL-apparaat.
Vervolgens licht het scherm van het apparaat op.



Druk lang op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.



Kies het vermogensniveau dat je wilt gebruiken (je hebt 5 niveaus en je doorloopt ze met de knop Niveaus & Zweefmodus. Het niveau wordt op het scherm aangegeven. (Begin bij de laagste stand en doe de huidgevoeligheidstest)

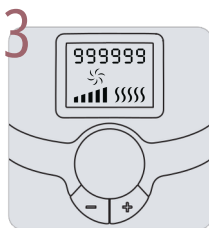

Plaats de voorkant van het apparaat tegen de huid die je probeert te behandelen en druk op de flash knop.

Opmerking: Als je een lage pijntolerantie hebt, raden we je aan om 30-45 minuten van tevoren Numb Master Cream aan te brengen en vlak voor het zappen te verdoven met ijs (en vervolgens te drogen) om het knellende gevoel te verminderen wanneer het apparaat de IPL uitzendt om het haar te doden.



OPMERKING: Behandel dezelfde plek niet meer dan één keer per behandeling. Het apparaat werkt niet als alleen het behandelvenster in contact is met de huid.

Houd na afloop van de behandeling de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.



Opmerking: Om ongelukken te voorkomen, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld nadat het 5 minuten zonder toezicht heeft gewerkt.

Gebruik een droge en schone doek om het apparaat voorzichtig schoon te vegen, doe het dan samen met de accessoires in de doos en berg het op een veilige plek op.



Aantal Power bar-lampjes verlicht	5	4	3	2	1
Max. Energie (J/cm ²)	4.66	4.33	4	3.33	2.66
Max. Energie (J)	14	13	12	10	8

Als u hevige pijn voelt, stop de behandeling dan onmiddellijk en raadpleeg uw arts voordat u het apparaat weer gebruikt.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u denkt dat u hulp nodig hebt. Neem contact met ons op.

Behandelingsmethodes

Afhankelijk van het gebied dat je wilt behandelen kun je kiezen tussen de Glide modus en de Manuele modus:

De automatische modus maakt snelle en efficiënte behandelingen mogelijk en wordt aanbevolen voor grote huidoppervlakken (bijv. benen, armen, borst en rug), terwijl de handmatige modus wordt aanbevolen voor het behandelen van gevoelige of kleine, moeilijk te bereiken gebieden zoals knieën, scheenbenen, enkels, bikinilijn of oksels en gezicht voor vrouwen. Het te behandelen gebied moet haarvrij, schoon en droog zijn.

Glijmodus

- 1 Houd de knop Niveaus & Glijmodus ingedrukt (1-2 seconden lang indrukken) en de op het displayscherm verschijnt het symbool van de automatische modus 
- 2 Plaats het behandelvenster tegen de huid en glijd dan met het apparaat langs de huid tussen flashes. Probeer het apparaat te bewegen met een constante snelheid die een volledige dekking geeft zonder overlapping of gemiste zones.

Handmatige modus

- 1 Plaats het behandelvenster tegen de huid en druk op de flash-knop en laat deze onmiddellijk los. Het apparaat geeft een flash.
- 2 Til het apparaat op en plaats het op de volgende te behandelen plek.
- 3 Wacht tot de statusindicator witte LED's laat zien.
Druk dan op de behandelknop en laat hem los.

Foutcodelijst

Dit is een lijst met foutcodes waarin verschillende veelvoorkomende foutcodes worden uitgelegd wanneer het apparaat actief is

Fout 0: Geeft aan dat de lampbuis lekt en dat de klant contact moet opnemen met de klantenservice.

Fout 1: De condensator geeft geen boost, de klant moet contact opnemen met de klantenservice.

Fout 3: Temperatuurbeveiliging. Wanneer de temperatuur van het apparaat de hoogste waarde overschrijdt, geeft het apparaat een AEC-herinnering. Klanten moeten stoppen met het gebruik van het apparaat en wachten tot de apparaattemperatuur is afgekoeld voordat het apparaat weer normaal gebruikt kan worden.
voordat het apparaat weer normaal gebruikt kan worden.

Behandelingschema voor uw IPL ontharingsapparaat

Kies een geschikt energieniveau

Begin op de laagste stand (niveau 1 of 2) en werk naar boven naarmate de haarzakjes beginnen af te sterven. Na een paar behandelingen zou je moeten merken dat het pijnniveau afneemt (de donkerdere, grovere haarzakjes zouden moeten worden geïnactiveerd, het lichtere/lichtere haar zal minder pijn doen) en kun je het vermogen verhogen.

Gebruik hoge energieniveaus met voorzichtigheid

Het IPL-apparaat heeft een hoge energie-output, wat betekent dat het iets meer pijn kan doen op niveau 3-5, maar het zal effectiever zijn in het verminderen van haargroei. Als je intense pijn of een branderig gevoel hebt, behandel dan op een lager niveau.

Behandelplan

Voor optimale resultaten moet de IPL ontharingsmachine gedurende 8 weken twee keer per week worden gebruikt om ervoor te zorgen dat alle haarzakjes worden behandeld. Na de eerste behandelingsfase (8 wekelijkse behandelingen) raden we aan om de IPL ontharingsmachine gedurende 9-12 weken eenmaal per week te gebruiken en daarna eenmaal per maand om de behandelde resultaten te behouden. Opmerking: Je kunt de energieniveaus aanpassen aan je pijntolerantie en de groei van het haar. We raden af om de voorgestelde behandel frequentie te overschrijden.

Intensiteitsniveau en huidskleurcontrasttabel

Lichaamsdelen	Huidskleur	Wit	Geel	Medium bruin	Licht bruin	Bruin	Donkerbruin / Zwart
Oksel		3-5 level	3-5 level	3-4 level	2-3 level	2-3 level	n.v.t.
Arm		3-5 level	2-4 level	2-4 level	1-3 level	1-3 level	n.v.t.
Been		3-5 level	2-4 level	2-4 level	1-3 level	1-3 level	n.v.t.
Rond de mond		3-4 level	2-3 level	2-3 level	1-3 level	1-3 level	n.v.t.
Gezicht		3-4 level	2-3 level	2-3 level	1-3 level	1-3 level	n.v.t.

Nazorg

- 1 Breng de gel na het ontharen onmiddellijk aan op het ontharingsgedeelte. Het wordt aanbevolen om binnen 6 uur geen water aan te raken.
- 2 Vermijd parfums, deodorants en warme douches gedurende de eerste 24 uur.
- 3 Vermijd blootstelling aan ultraviolette straling binnen 24 uur na het ontharen.
- 3 Smeer gel voordat u naar buiten gaat en doe goed aan de fysieke sunblock. Zonnebaden kan de huid donker maken of zonnebrand aan het huidoppervlak veroorzaken. Het wordt
- 4 aanbevolen om het apparaat in deze periode niet te gebruiken.

Mogelijke bijwerkingen

Bij gebruik van IPL ontharingsapparaten volgens de gebruiksaanwijzing zijn bijwerkingen zeldzaam. Elke esthetische procedure, inclusief het gebruik van apparaten voor thuisgebruik, kan echter tot op zekere hoogte bijwerkingen veroorzaken. Als een van de volgende aandoeningen optreedt en langer dan 24 uur aanhoudt, moet u uw arts of dermatoloog raadplegen.

Bijwerkingen

Mate van bijwerkingen	Bijwerking	Oplossing
Vaak voorkomende huidreacties	Roodheid Prikkelen Tintelingen Warm Gevoeligheid voor de zon	1.Druk een ijspack op het behandelde gebied 2.Onschadelijk en verdwijnt snel.
Zeldzame bijwerkingen	Brandwonden Littekenvorming Pigmentveranderingen Overmatige roodheid/pijn Zwelling	1.Gebruik een lagere lichtintensiteit. 2.Raadpleeg een arts of de klantenservice voor hulp.
Uiterst zeldzame bijwerkingen	Infectie Kneuzing	Stop met het gebruik van het apparaat en raadpleeg een arts of de klantenservice voor hulp.

Roodheid zien Prikkelen, tintelen Warm aanvoelen Gevoeligheid voor de zon

Problemen oplossen

Deze handleiding beschrijft de problemen die zich voordoen bij het gebruik van het product. Als u de volgende informatie niet kunt gebruiken om deze problemen op te lossen, neem dan tijdig contact op met het personeel van de dienst na verkoop.

Problemen	Mogelijke redenen	Oplossing
Het kan niet worden gestart.	De voeding is niet goed aangesloten	Controleer of de voeding correct is aangesloten
De bestraling is niet beschikbaar.	lichaamstemperatuur te hoog is. De kop te dicht bij de huis .	Wacht tot de apparatuur op natuurlijke wijze is afgekoeld, maak de host dicht bij de huid totdat de statusindicator stopt met knipperen.
Het werkklampje brandt niet.	Haren op het verwijderingsgedeelte worden niet geschoren.	Voordat u dit product gebruikt de haren op het te bestraald worden. In geval van huidallergie veroorzaakt door het scheren haren zo kort mogelijk en gebruik het onder een comfortabele instelling.
De pijn is ondraaglijk tijdens het ontharen.	Het product is niet geschikt voor het ontharingsgedeelte.	Gebruik het product niet bij de schaamlippen, vagina, anus, tepel of tepelhof, tepelhof. Gebruik het product niet op het scrotum.
	Te hoog intensiteitsniveau.	Verminder het intensiteitsniveau tot de comfortniveau.
	Het behandelingsvenster is beschadigd.	Repareer of retourneer het product onmiddellijk.
Na het ontharen wordt het ontharingsgebied rood.	Milde roodheid is normaal en onschadelijk voor het menselijk lichaam, en zal verdwijnen snel verdwijnen.	Raadpleeg indien nodig uw arts.
Het effect is slecht.	De gebruikte intensiteit is te laag voor jou.	Gebruik de volgende keer een hoge instelling.
Automatische overtemperatuur	Zelfbescherming procedure voor oververhitting van de apparatuur.	Plaats het product op een eventueleerde plaats om af te koelen.
Er is geur tijdens de bestraling.	Het optische licht filter heeft stof of er zijn resten haren op het oppervlak.	Reinig de lampkap en omgeving en zorg ervoor dat alle haren geschoren zijn en stel hem in op de juiste versnelling.
Product schakelt automatisch uit na een paar minuten.	Om ongelukken te voorkomen schakelt het apparaat automatisch uit nadat het 5 minuten onbeheerd is geweest.	Herstart het apparaat

Inhoud garantie

Inhoud garantie

Volgens ons onderzoek hebben sommige mensen het product teruggestuurd wegens gebrek aan resultaat en hebben ze het waarschijnlijk niet lang genoeg volgehouden. Dat deel is nogal lastig omdat je niets kunt doen om het proces te versnellen vanwege de groeicycli en het feit dat elk haartje alleen effectief gezapt kan worden als het in de juiste fase van de cyclus zit. In feite kan het in de paar dagen na een behandeling zelfs lijken alsof er meer haar is omdat de gezapte haren naar buiten worden geduwd. We hopen dat je genoeg tijd hebt om onze producten te ervaren en de gewenste resultaten te behalen.

- Eén jaar garantie vanaf de aankoopdatum.
- Er is geen garantie in geval van verkeerd gebruik, stress, breuk, verlies of het verlies van sommige onderdelen, of het binnendringen van sommige vloeistoffen aan het product, wat resulteert in het niet gebruiken van het apparaat, het vertragen van itsefficiency of volledig vernietigen.
- Het apparaat kan niet worden vervangen of gerepareerd als wordt ontdekt dat het meerdere keren is gebruikt, in schoonheidssalons, ontharingsklinieken, voor commerciële doeleinden of door meerdere gebruikers.
- Er is geen garantie als het product is opgeladen met een hoog voltage van meer dan 240V.
- Het apparaat kan continu worden gebruikt. Tijdens continu gebruik, als de temperatuur van het apparaat 75 graden bereikt, zal het apparaat stoppen met knippen, maar de ventilator zal blijven werken om het apparaat te koelen.
- Verwijder uw haar met een scheerapparaat voordat u het apparaat gebruikt, anders ontstaan er vuile plekken op de lens.
- Vuil op de lens en zwarte plekken die hierdoor ontstaan vallen niet onder de garantie. Neem contact op met de lokale agent in geval van schade aan het product of vragen.

Opruimen



Gooi het IPL ontharingsapparaat aan het einde van de levensduur NIET weg bij het normale huishoudelijke afval, maar lever het in bij een officieel inzamelpunt voor recycling (neem contact op met de plaatselijke gemeente voor informatie over recycling). Zo helpt u het milieu te beschermen.

