




SHOPLACE

# GEBRUIKSAANWIJZING

Huidverjongsapparaat

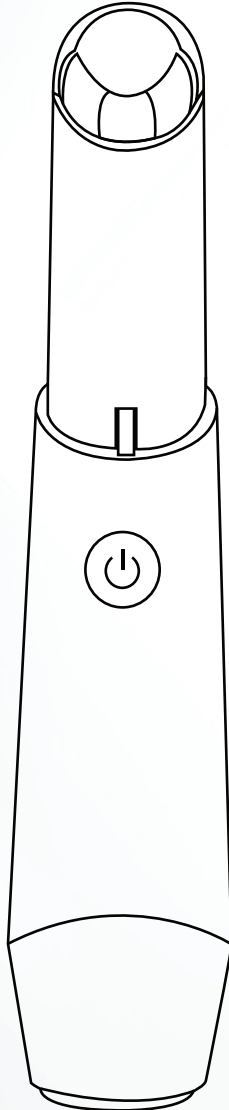

Houd ingedrukt  
voor 2 seconden



Lees de instructies en bewaar deze goed

Made in P.R.C

RoHS CE FC

# Inhoud

- 1. Introductie
  - .1 Waarchuwingen en veiligheidsinstructies
  - .2 Ontvangen van het product
  - .3 Inhoud verpakking
- 2. Producteigenschappen
- 3. Instructies voor gebruik
- 4. Behandelmethoden
- 5. Gebruiksaanwijzingen
- 6. Opslag -en reiniging
- 7. Service -en garantie

- Bedankt dat je gekozen hebt voor een van onze Shoplace producten. Lees de gebruiksaanwijzing van je Huidverjongingsapparaat aandachtig door en bewaar deze goed. Volg en lees de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik van het product. Mocht je nog vragen hebben over het product of iets anders, neem dan contact met ons op via  : support@shoplace.nl
- De Shoplace Huidverjongingsapparaat kan gebruikt worden voor het verminderen van rimpels, donkere cirkels en wallen. Het verminderen van gezichtsvermoeidheid en huidverjonging is bovendien ook mogelijk. Het apparaat beschikt over 2 LED-standen (blauw en rood) met ieder een ander resultaat voor de huid.
- Het gebruik van het apparaat is eenvoudig en kan aangezet worden door de **aan/uit knop voor korte duur in te drukken**. De Huidverjongingsapparaat gaat automatisch naar de 1e stand. Met de intelligente touchfunctie begint het apparaat pas met werken wanneer het in aanraking komt met je gezichtshuid.
- De verwarmende massagekop brengt hoogfrequente trillingen die ervoor zorgen dat de huid op den duur wordt verzorgd en verbeterd. Gebruik het 2 á 3x per week voor je wekelijkse gezichtsverzorging -en verwarmende massage om van te genieten. De Shoplace Huidverjongingsapparaat is effectief, pijnloos en gemakkelijk te gebruiken.

⚠ Lees de onderstaande instructies aandachtig door voordat je gebruik gaat maken van de Huidverjongingsapparaat

- Als dit de eerste keer is dat je de huidverjongingsapparaat gebruikt, is het belangrijk om de handleiding en instructies aandachtig door te lezen. Let op de consequenties -en de risico's die ontstaan bij misbruik van de huidverjongingsapparaat. Dit kan leiden tot persoonlijke letsel -en schade aan het apparaat.
- Dit apparaat is niet geschikt voor mensen (inclusief kinderen) met een fysieke -en of mentale beperking.
- Gebruik de huidverjongingsapparaat alleen voor de doeleinden beschreven in deze handleiding.
- De huidverjongingsapparaat is gemaakt voor privé gebruik en niet voor commerciële doeleinden.
- Shoplace is niet verantwoordelijk voor schade -en of breuk veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie aan het huidverjongingsapparaat.
- De huidverjongingsapparaat bevat een accu en wordt opgeladen via een USB-kabel. Zorg ervoor dat het apparaat op een donkere -en droge plek opgeladen wordt en houd regelmatig zicht.
- De Huidverjongingsapparaat kan alleen droog/vochtig gebruikt worden. Het is mogelijk om het te gebruiken in combinatie met een olie, serum -en of crème. Zorg ervoor dat het gehele apparaat **NIET** onder stromend water of hierin onderdompelt wordt.

- Gebruik en bewaar de huidverjongingsapparaat buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik de huidverjongingsapparaat nooit op de onderstaande delen van het lichaam:
  - De tepels
  - De lippen
  - De oren
  - De penis en balzak
  - De vagina

## Ontvangen van het product


1.2

- Controleer de inhoud van het pakket wanneer je de zending ontvangt. Neem contact op met ons, indien er onderdelen ontbreken. Lijkt het apparaat beschadigd, neem dan contact op met ons en geef een gedetailleerde beschrijving van het probleem. Bewaar het product goed om je klacht te onderbouwen.

## Inhoud verpakking

1.3

- 1x Shoplace Huidverjongingsapparaat
- **Accessoires:**
  - 1x Beschermingskap
  - 1x USB-oplaadkabel
  - 1x Shoplace opbergzak
  - 1x Handleiding

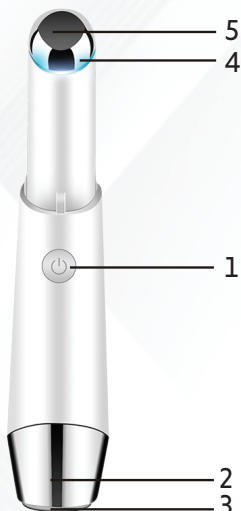

## Specificatie lijst:

- 1: Aan/uit knop (2 sec)
- 2: Intelligente touchfunctie
- 3: USB-oplaadingang
- 4: LED-modus
- 5: Hoogfrequente verwarmde massagekop

Grootte	119 x 23 x 23 mm
Gewicht	63 gram
Materiaal	ABS en Electroplate
Kleur	Wit
Batterij	Lithium 300mAh 3.7V
Aantal LED-standen	2: Rood - Blauw
Gebruiksduur	90 minuten
Oplaadtijd	120 minuten
Invoerspanning	USB Micro DC 5V
Temperatuur	36-42 °C
Vibratie frequentie	12000/min

## Aanbevelingen

- Zet de Huidverjongingsapparaat aan door de aan/uit knop voor korte duur in te drukken.
- Reinig de Huidverjongingsapparaat met een licht vochtig doekje na ieder gebruik. Volg de reinigingsinstructies onder sectie 6.
- Druk de huidverjongingsapparaat niet te hard op de huid om een rood -en of geïrriteerd plek achter te laten.
- Gebruik de huidverjongingsapparaat wanneer deze volledig is opgeladen voor 60 minuten.
- Gebruik de huidverjongingsapparaat niet wanneer deze is aangesloten aan de USB-oplaadkabel. Trek dit voor gebruik los.
- Lees voor je eerste behandeling goed deze handleiding door om erachter te komen welke LED-stand behandeling je kan gaan gebruiken.
- Plaats de huidverjongingsapparaat op een hoek van 45-graden op de huid om het beste resultaat te krijgen.
- Neem een warme douche -en of ontspan jezelf om goed gebruik te maken van het apparaat.
- Gebruik de huidverjongingsapparaat ook in combinatie met olie, serum -en of een crème.
- De huidverjongingsapparaat begint pas met werking wanneer deze dicht op de gezichtshuid wordt geplaatst.

### ● - Rood LED-stand

De rode LED-stand wordt gebruikt voor huidverjonging, het verminderen van donkere cirkels, wallen en rimpels. De bloedcirculatie wordt gestimuleerd om je fit en ontspannen te laten voelen.

### ● - Blauw LED-stand

De blauwe LED-stand wordt gebruikt voor het verstevigen van de huid, huidverjonging en een gladde huid. Het verminderen van gezichtsvermoeidheid zorgt ervoor om weer strak en fit uit te zien.

## Gebruiksaanwijzingen

5

1. Zet de Huidverjongingsapparaat aan door de aan/uit knop voor korte duur in te drukken. Het apparaat gaat aan in de blauwe modus. Hierna is een eenmalige klik nodig om de rode stand te bereiken.
2. Reinig je gezicht en breng je olie, serum -en of crème aan op de huid.
3. Kies de gewenste LED-stand behandeling door de aan/uit knop ingedrukt te houden
4. Masseer de huid door met kleine cirkels over verschillende plaatsen van het gezicht te gaan, houd dit vol voor 5 á 10 minuten. Herhaal dit meerdere malen per week.
5. Houd het apparaat onder een hoek van 45 graden op je huid om het beste resultaat te krijgen.
6. Reinig het apparaat na gebruik en berg het netjes op.



- Berg de huidverjongingsapparaat op in de meegeleverde Shoplace opbergzak. Verplaats en berg het hierna op een schone, stofvrije en droge plek.
- Reinig de huidverjongingsapparaat na ieder gebruik. Het apparaat dient **NIET** met water schoongemaakt te worden, maar met een licht vochtig doek.
- **Stappenplan reinigen:**
  1. Zet de huidverjongingsapparaat uit.
  2. Verwijder eventueel de opbergkap -en of USB-kabel uit het apparaat
  3. Reinig de massagekop met een licht vochtig doek. Wrijf eroverheen en probeer geen gebruiksafdrukken achter te laten.
  4. Zorg ervoor dat het apparaat **NIET** schoongemaakt wordt met water -en of een andere oplossing.
  5. Reinig de overige gebieden van het apparaat met het licht vochtig doek om het hygiënisch en schoon te houden voor de volgende keer.
  6. Berg het apparaat op met de kap in de opbergzak.

✉ *Indien je informatie -en of service nodig hebt, stuur dan een e-mail naar [support@shoplace.nl](mailto:support@shoplace.nl)*

Wij verlenen 1 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 1 jaar na de aankoopdatum geldend worden gemaakt.

⚠ We geven geen garantie in de volgende gevallen:

- Beschadiging ontstaan bij vuur, aardbevingen of overstromingen.
- Beschadiging ontstaan bij oncontroleerbare factoren.
- Beschadiging aan het apparaat ontstaan door de klant.
- Beschadiging aan het apparaat door het gebruik van liquide middelen.
- Beschadiging door het gebruik op verboden plekken of sterk afgeraden plekken.
- We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld bij verwondingen aan het lichaam, wanneer de klant het de huidverjongingsapparaat onjuist gebruikt.