

SIZE : 80*120mm

Draagbare verwarmingspad


Handleiding



LUNASEA

Product parameter

Product naam: Draagbare verwarmingspad
Oplaad voltage :5V
Werkende stroom: 13A.
Nominiaal vermogen: 5,5W.
Uitvoeringsnorm: GB4706.1-2005.

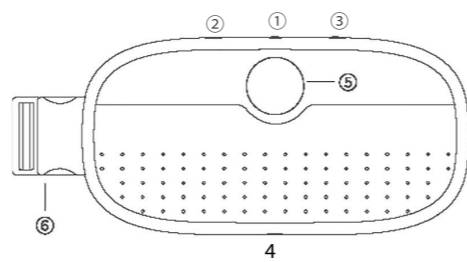

- ① Aan/ uit knop
- ② Warmte standen
- ③ Vibratie
- ④ USB-opladen
- ⑤ Scherm display
- ⑥ Gesp

Gebruiksaanwijzing

- 1-Druk op de aan/uit-knop om op te starten, het scherm toont het batterijsymbool, en klik vervolgens op de schakelaar om de trillingsgrootte aan te passen (een totaal van 3 trillingsversnellingen, het scherm toont 3 bijbehorende versnellingspictogrammen), houd de aan/uit-knop lang ingedrukt om uit te schakelen.
- 2-Via de schakelknop kan de grootte van de trilling worden aangepast. Het scherm toont 1 versnelling. Klik op "upgrade" om te schakelen naar 3 versnellingen, klik nogmaals om over te schakelen naar een versnellingsvrije, circulaire trilling.
- 3-Druk op de vibratieknop om de trillingsversnelling te regelen. Er zijn in totaal 5 versnellingen, het scherm toont de bijbehorende nummers 1, 2, 3, 4, 5.
- 4-Druk op de verwarmingsknop om de verwarmingspositie te regelen. Er zijn in totaal 5 posities, het scherm toont de bijbehorende temperaturen van 35, 40, 45, 50, 55 graden.
- 5-Het batterijniveau wordt weergegeven door de batterij-indicator op het scherm, met 4 balken die overeenkomen met 100% batterijvermogen, 3 balken met 75% vermogen, enzovoort. Bij een laag batterijniveau knippert het batterijlogo op de laatste balk.
- 6-De laatste balk van de batterij knippert wanneer de batterij bijna leeg is, en het batterijsymbool wordt weergegeven wanneer de batterij volledig is opgeladen en altijd helder is.

7-Het product stopt met werken na 20 minuten.

Belangrijke opmerkingen

- 1- Lees de instructies en voorzorgsmaatregelen zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt.
- 2-Zwangere vrouwen, kinderen, patiënten met hartproblemen, abnormale bloeddruk, kwaadaardige tumoren, patiënten met cerebrovasculaire problemen en andere patiënten die medische behandeling ondergaan, mogen dit product niet gebruiken.
- 3-Gevoelige huid of huid die niet gevoelig is voor warmte mag dit product niet gebruiken.
- 4-Gebruik de vibratiefunctie niet tijdens de menstruatie, dit kan leiden tot een verhoogde menstruatievolume. Het wordt aanbevolen om alleen de verwarmingsmodus te gebruiken voor warmtecompressen.
- 5-Stop met het gebruik en raadpleeg uw arts als u zich ongemakkelijk voelt of huidafwijkingen heeft.
- 6-Het is verboden dit product te gebruiken op plaatsen met hoge hitte, ontvlambaarheid, elektromagnetische straling en vochtigheid.
- 7-Het is verboden dit product zonder toestemming te demonteren en te assembleren, om botsingen en waterstoringen te voorkomen.
- 8-Bij het wegwerpen van dit product dient u dit te doen in overeenstemming met de relevante milieubeschermingsvoorschriften van de stad, anders kan dit leiden tot milieuvervuiling.

Onderhoud

- 1- Als de hoofdunit vies is, kan deze worden afgeveegd met natte papieren handdoeken of droge handdoeken en vervolgens worden gedroogd.
- 2-Gebruik geen water of reinigingsvloeistof om schoon te maken.
- 3-Gebruik geen enkel draadgaas, ijzeren borstel, scherpe gereedschappen, enz., En bevatten vluchtige en corrosieve oplosmiddelen voor reiniging.
- 4-Wanneer het product niet in gebruik is, plaats het dan in de

doos op een droge, koele plaats.
5-Bewaar dit product niet op een plaats met hoge temperatuur of in de buurt van open vuur en direct zonlicht, anders kan het vervagen en beschadigd raken.
6-Buiten het bereik van kinderen bewaren.
7-Bewaar niet in direct zonlicht, hoge temperaturen, vochtige plaatsen.
8-Houd het op een droge en geventileerde plaats.
9-Demonteer, repareer of wijzig dit product niet zonder toestemming, dit kan ongevallen veroorzaken.
10-Als het product niet bedoeld is om op korte termijn te worden gebruikt, zorg er dan voor dat het elke 3 maanden volledig wordt opgeladen om te voorkomen dat de batterij leeg raakt en het product niet kan worden gestart.

Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het product gaat niet aan	Het product laad niet goed op.	Laad het product volledig op, kijk of de kabel correct in de usb aansluiting zit
het product kan niet volledig worden opgeladen (het indicatielampje brandt niet na 2 uur opladen)	1. Onvoldoende laadspanning	Vervang oplaadapparaten (zoals adapters, computers of andere Micro-USB-opladers).
Het product schakelt zichzelf uit	1.De ingestelde opwarmtijd is bereikt. (Standaard: 20 minuten) 2.Lage stroomvoorziening.	Start het apparaat opnieuw op Laad de riem volledig op voordat u hem gebruikt.

Milieubeschermingsspecificatie

- 1-Dit product voldoet aan de eisen van de "Beheersmethode voor het beperkte gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten";
- 2-Binnen de periode van milieubescherming zullen consumenten geen problemen hebben met lekkage, neerslag en andere problemen met betrekking tot schadelijke stoffen die de gezondheid van de consument beïnvloeden tijdens het normale gebruik van het product en kunnen ze er gerust op zijn dat ze het veilig kunnen gebruiken;
- 3-De milieubeschermingslevensduur van de producten van het bedrijf is 3 jaar. De "milieubeschermingslevensduur" is alleen geldig wanneer de producten worden gebruikt onder de normale omstandigheden zoals beschreven in deze handleiding.

Garantie

- 1-De massagepad heeft een garantieperiode van 1 jaar.
- 2-Wanneer het product defect raakt als gevolg van waterschade, valt dit niet onder de garantie.
- 3-Wanneer het product defect raakt doordat de klant het apparaat opendraait, valt dit niet onder de garantie.
- 4-Wanneer het product defect raakt door vallen of ander roekeloos gedrag van de klant, valt dit niet onder de garantie.
- 5-U heeft het recht op een nieuw product of gratis reparatie als het product binnen de garantieperiode defect raakt zonder schuld van de klant.