



USER MANUAL

English & Dutch

TWINFLOW DUO

HANDSFREE BREAST PUMP



Table of contents

English manual

Product Description	2
Product Components & Layout	3
Control Panel & LED Indicators	5
Installation	6
Starting Your Pumping Session	8
Battery Status Indicator	12
Recommended Pumping Position	13
Ending a pumping session	14
Cleaning and maintenance	15
Storing breast milk	17
Warranty	18

Nederlandse handleiding

Productbeschrijving	19
Productonderdelen en indeling	20
Configuratiescherm en LED-indicatoren	22
Installatie	23
Beginnen met kolven	25
Batterij status indicator	29
Aanbevolen pompositie	30
Een pompsessie beëindigen	31
Reiniging en onderhoud	32
Moedermelk bewaren	34
Garantie	35

English manual

Product Description

The Sensibaby Twinflow Duo wearable breast pump is designed to support mothers during their breastfeeding journey by providing comfortable and effective milk expression.

The pump is designed to mimic a natural sucking rhythm, helping to stimulate milk flow and support regular milk expression when direct breastfeeding is not possible or convenient.

Regular use of the breast pump can help promote effective milk removal, supporting breast comfort and helping to relieve the feeling of fullness that may occur during lactation. Consistent pumping may also support maintaining milk supply as part of a breastfeeding routine.

Using a wearable breast pump can offer flexibility and convenience, helping mothers continue breastfeeding with confidence while balancing daily activities. This can contribute positively to the breastfeeding experience for both mother and baby.


The Sensibaby Twinflow Duo is intended for personal use only.

It is not intended for clinical use, medical treatment, or use as a medical device in healthcare institutions.

Product Components & Layout

The product consists of the following main components:

1. Flange
2. Pump motor
3. Silicone diaphragm
4. USB charging cable
5. Milk collector
6. Bra adjustment buckles
7. valve

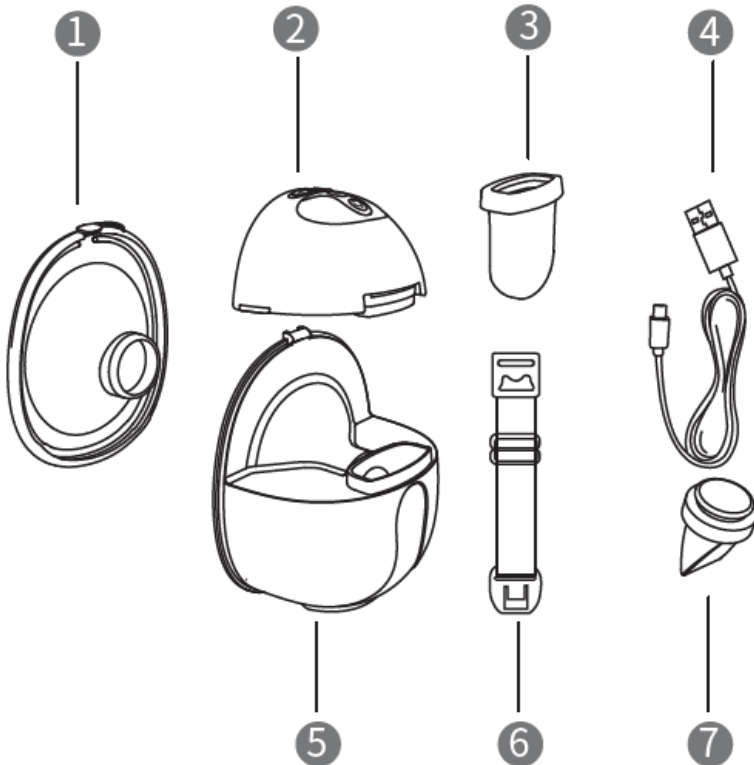

Depending on the configuration, the box contains

- 2x Pump motorunits
- 2x Milk collectors
- 2x Silicone breast shields - 24mm
- 2x Duckbill valves
- 2x Diaphragms
- 2x Bra adjustment buckles
- 1x Nipple ruler
- 2x Nipple inserts - 17mm
- 2x Nipple inserts - 19mm
- 2x Nipple inserts - 21mm
- 10x Milk storage bags
- 2x USB charging cables
- 1x Zipper storage bag
- 1x User manual

Functions & Features

Handsfree & wearable design

Dual pumping (left & right)

Multiple suction levels and modes


Quiet operation

Rechargeable battery

Built-in night light function for use in low-light environments

Control Panel & LED Indicators

1. Power display
2. Expression mode
3. Stimulation mode
4. Massage mode
5. Automatic mode
6. Night light power button
7. Level up button
8. Power button/mode switch button
9. Time/minute
10. Level display/ Time display
11. Pause/ Start button
12. Level down button

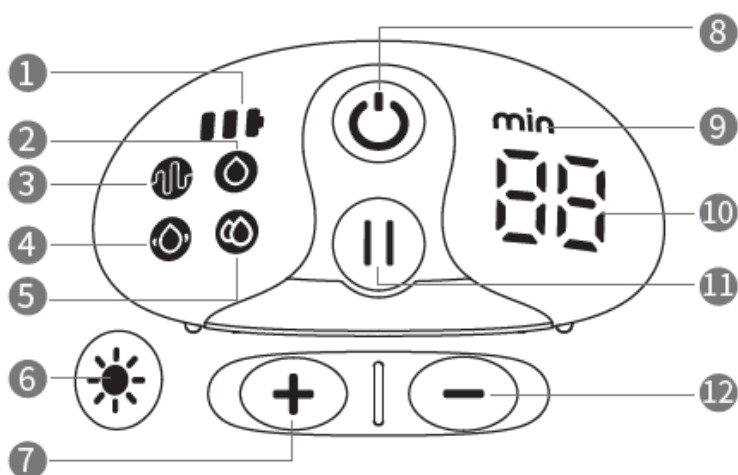

Installation


Follow the steps below to assemble the Sensibaby Twinflow Duo correctly.

Important Notes


- Always clean and dry all pump components before assembly.
- Wash your hands thoroughly before handling cleaned parts.
- Make sure all components are correctly positioned and securely sealed to prevent leakage.
- Remove any milk residue from the rims before reassembling the pump.

Assembly Steps

1. Attach the duckbill valve to the bottom of the milk collector.
Ensure it is fitted in the correct direction and fully secured.

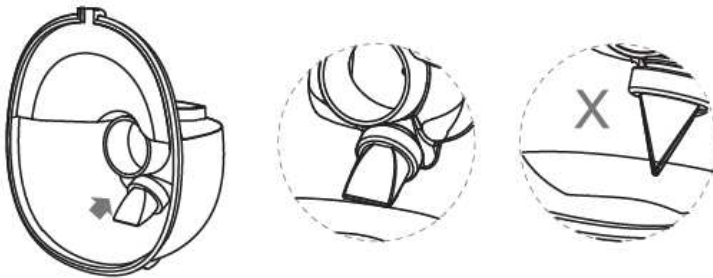


2. Place the silicone diaphragm into the milk collector.
Gently press around the edges with your fingers to ensure it fits tightly and creates an airtight seal.

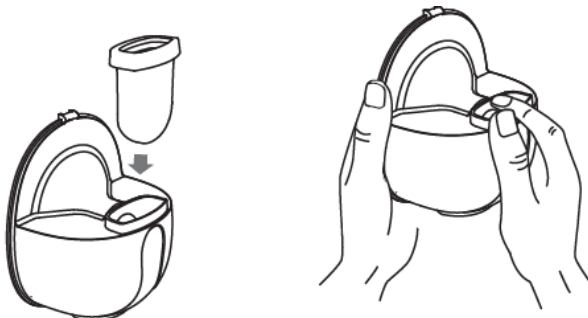


3. Position the breast shield (flange) onto the milk collector.

Align the guide groove on the flange with the corresponding groove on the milk collector, then press evenly around the edges to secure the seal.

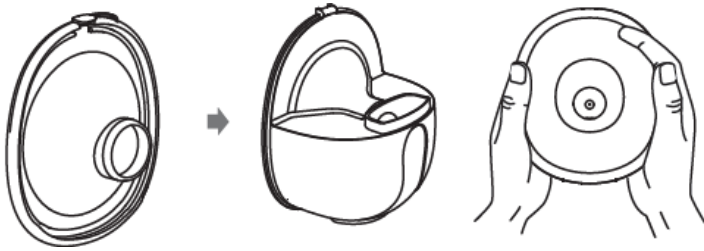


4. Insert the milk outlet plug into the bottom of the flange.

Make sure it is fully aligned and tightly sealed.

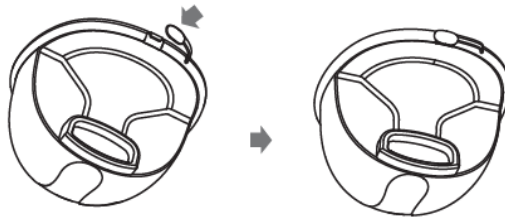

5. Place the motor unit onto the top of the milk collector.

Align the notch on the motor unit with the silicone diaphragm and press down gently until it fits securely and forms a complete seal.

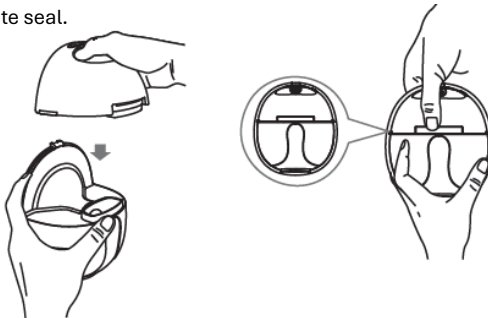

Before use, double-check that all parts are properly assembled and firmly connected.

Starting Your Pumping Session

Before You Begin


- Ensure the pump is fully assembled and clean.
- Sit comfortably and keep the pump upright during use.

1. Positioning

Press the breast shield firmly against your breast, ensuring there are no gaps.

Make sure the nipple is centered in the flange opening.

Always keep the pump upright. Incorrect positioning may result in reduced or no suction.

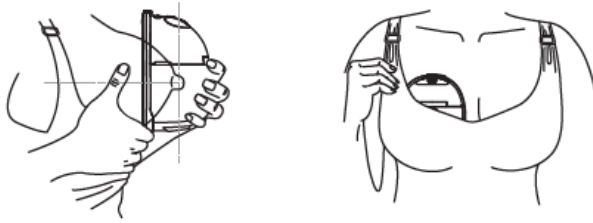

2. Power On / Off

Long press the Power button to turn the pump on.

The display will light up.

Long press the Power button again to turn the pump off.




3. Start/ Pause & Mode Selection

- Short press the Start/Pause button  to start or pause pumping.
- While pumping, short press the On/Off button  to switch between modes.

The pump offers four modes:

- Stimulation Mode  – gentle rhythm to stimulate milk flow.
- Expression Mode  – steady suction for milk expression.
- Massage Mode  – gentle pulses for comfort.
- Automatic Mode  – cycles automatically between patterns.

The active mode is indicated on the display.

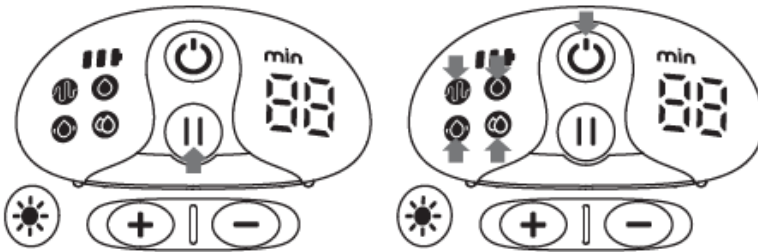


4. Adjusting Suction Levels

Each mode has 9 suction levels.


- Press “+” to increase suction
- Press “-” to decrease suction

Choose the level that feels comfortable for you.

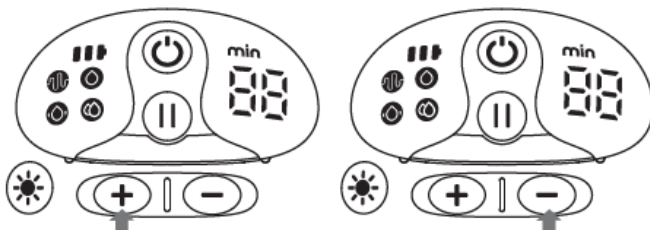

5. Display Information

- When a button is pressed, the screen shows the current suction level.
- If no button is pressed for 2 seconds, the display automatically switches to the timer view, showing pumping time in minutes.

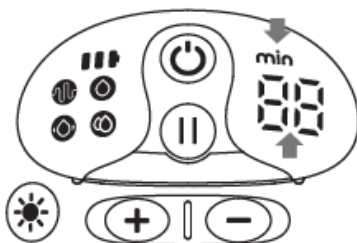

6. Night Light Function

- Long press the Light button to turn the night light on or off.
- Short press the Light button to adjust brightness.
- There are three brightness levels available.

The night light operates independently from the pump and can remain on even when the pump is switched off.



Helpful Tips

1. The pump has a memory function. When turned on again, it will start in the stimulation mode and suction level used during the previous session (automatic mode always starts at level 1).
2. In automatic mode, suction levels are not memorized.
If no buttons are pressed, the suction level will automatically increase up to level 7 at 15-second intervals.
Pressing any button will stop the automatic increase.
3. If the pump is paused and no button is pressed for 5 minutes, it will automatically shut down.
4. For safety and comfort, the pump will automatically stop after 20 minutes of continuous operation.

Battery Status Indicator


The breast pump display shows the battery status using three bars. During use, if only one bar is visible and blinking, this indicates that the battery level is low.

Please recharge the pump promptly.

The pump cannot be used while charging.


When connected to a power source, the display will show the battery status only.

When all three bars are visible and no longer flashing, the battery is fully charged.

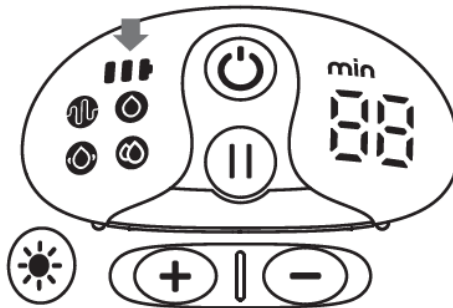

After each pumping session, you may briefly press the Power button to check the battery level.

If the battery is low, recharge the pump using a DC 5V / 1A charger.

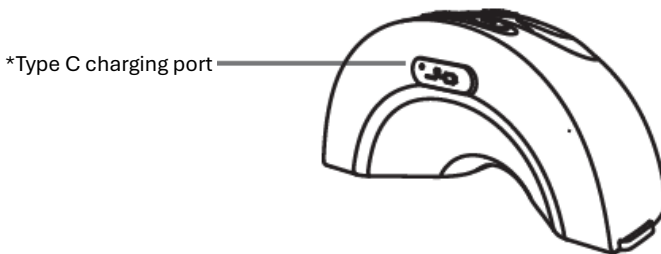

Recommended Pumping Position

Sit comfortably in a chair and relax your shoulders.

Lean slightly forward and use a cushion or pillow for back support if needed.

Make sure your body and the breast pump are aligned in a natural, straight position.

This helps ensure proper suction and a more comfortable pumping experience.



Bra Adjustment Instructions

Correct bra adjustment can improve comfort and help keep the pump securely in place.

- Adjust the length of the bra straps so the pump fits snugly without discomfort.
- Attach one end of the bra adjustment buckle to the inner clasp of your nursing bra.
- Adjust the strap on the other end of the buckle to achieve a secure and comfortable fit.

Proper adjustment helps maintain consistent suction during pumping.



Ending a pumping session

Once you have finished pumping, carefully remove the breast pump from your breast.


1. Press the Power button to switch off the pump.

Gently break the seal between your breast and the flange using a finger, then carefully remove the pump while keeping it upright.




2. Detach the motor unit from the milk collector.

Set the motor unit aside and prepare the milk collector for feeding or storage. Clean all used parts according to the cleaning instructions.

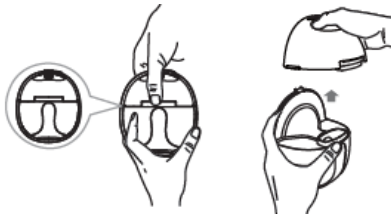

3. Pour the expressed breast milk into a storage bottle.

When opening the milk outlet plug, ensure the pouring slot is properly aligned with the bottle opening to prevent spills.

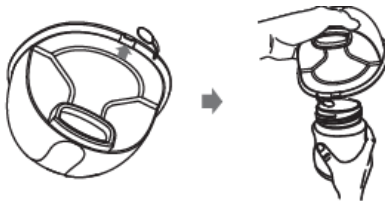

Handle expressed milk with care to maintain hygiene and avoid unnecessary loss.

Cleaning and maintenance

Proper cleaning and maintenance are essential for hygiene, safety, and optimal pump performance.

Pump Motor Unit

After each use:

- Wipe the exterior with a clean, damp cloth.
- If needed, disinfect using 70% ethyl alcohol or isopropyl alcohol.
- Do not immerse the motor unit in water or place it under running water.

Flange, Silicone Diaphragm, Valve & Milk Collector

Before First Use

- Boil all washable parts in water for 5 minutes.
- Allow parts to cool completely and air-dry before assembly.
- Do not microwave any pump components.

After Each Use

- Clean all parts using warm water and mild dishwashing soap or rinse thoroughly with clean water.
- Rinse well to remove any soap residue.
- Allow all parts to air-dry completely before storage or reuse.

Valve Cleaning

- Clean the valve gently in warm water with a few drops of mild cleaning liquid.
- Do not insert objects into the valve, as this may cause damage.
- Handle the valve with care during cleaning and disassembly.
- If the valve is damaged, suction performance may be affected.

Recommended Hand-Washing Method

1. Place pump parts in a clean wash basin used only for infant feeding items.
Do not place parts directly in the sink.
2. Add hot water and mild dish soap to the basin.
3. Clean parts using a brush dedicated solely to infant feeding items.
4. Rinse items thoroughly under running water or by submerging them in fresh water in a separate basin.
5. Allow all parts to air-dry completely on a clean, unused dish towel or paper towel in an area protected from dirt and dust.
Do not rub or pat items dry with a towel.
6. Clean the wash basin and brush after each use.
Rinse well and allow them to air-dry. Wash them by hand at least every few days.

Storing breast milk

1. Only store breast milk that has been collected using a clean and sterilized breast pump.
2. Expressed milk should be transferred into a clean, sterilized milk storage bag or bottle with a secure seal.

Place the milk in the refrigerator or freezer as soon as possible after pumping.

Important Storage Guidelines

1. Do not refreeze breast milk once it has been thawed.
2. Do not mix freshly expressed breast milk with already frozen breast milk.
3. Discard any breast milk that remains after a feeding.
4. Expressed breast milk may be:
 - Refrigerated for up to 48 hours (inside the refrigerator, not in the door), or
 - Frozen for up to 3 months.

Clearly label each bottle or storage bag with the date and time of expression.

Thawing Breast Milk

- For best results, thaw frozen breast milk overnight in the refrigerator.
- If needed more quickly, place the sealed bottle or bag in a bowl of warm water.
- Once thawed, breast milk should be used within 24 hours.
- Do not refreeze thawed breast milk.
-

Warming Breast Milk

1. Stand the baby bottle upright in a bowl of warm water or use a baby bottle or food warmer designed for this purpose.
2. Always check the temperature of the milk before feeding your baby.
3. Do not microwave breast milk, as this may destroy valuable nutrients and antibodies and can cause uneven heating.
4. Uneven heating may result in hot spots that could burn your baby.
5. Do not place milk storage bottles in boiling water, as this may cause the bottle to crack or rupture.

Warranty

Warranty Card

Product Warranty Card No. _____

Product Model _____

Serial Number _____

Username _____

Phone Number _____

Purchase Time _____

Invoice No. _____

Dealer's seal

Nederlandse handleiding

Productbeschrijving

De Sensibaby Twinflow Duo draagbare borstkolf is ontworpen om moeders te ondersteunen tijdens het geven van borstvoeding door comfortabel en effectief kolven mogelijk te maken.

De kolf is ontworpen om een natuurlijk zuigritme na te bootsen, waardoor de melkstroom wordt gestimuleerd en regelmatig kolven wordt ondersteund wanneer direct borstvoeding geven niet mogelijk of handig is.

Regelmatig gebruik van de borstkolf kan helpen om effectief melk af te kolven, het comfort van de borsten te ondersteunen en het gevoel van volheid te verlichten dat tijdens de lactatie kan optreden. Consequent kolven kan ook helpen om de melkproductie op peil te houden als onderdeel van een borstvoedingsroutine.


Het gebruik van een draagbare borstkolf biedt flexibiliteit en gemak, waardoor moeders met vertrouwen borstvoeding blijven geven en tegelijkertijd hun dagelijkse activiteiten kunnen uitvoeren. Dit kan een positieve bijdrage leveren aan de borstvoedingservaring voor zowel moeder als baby.

De Sensibaby Twinflow Duo is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het is niet bedoeld voor klinisch gebruik, medische behandeling of gebruik als medisch hulpmiddel in zorginstellingen.

Productonderdelen en indeling

Het product bestaat uit de volgende hoofdonderdelen:

1. Flens
2. Pompmotor
3. Siliconenmembraan
4. USB-oplaadkabel
5. Melkopvangbakje
6. Beugelverstelgespen
7. Klep

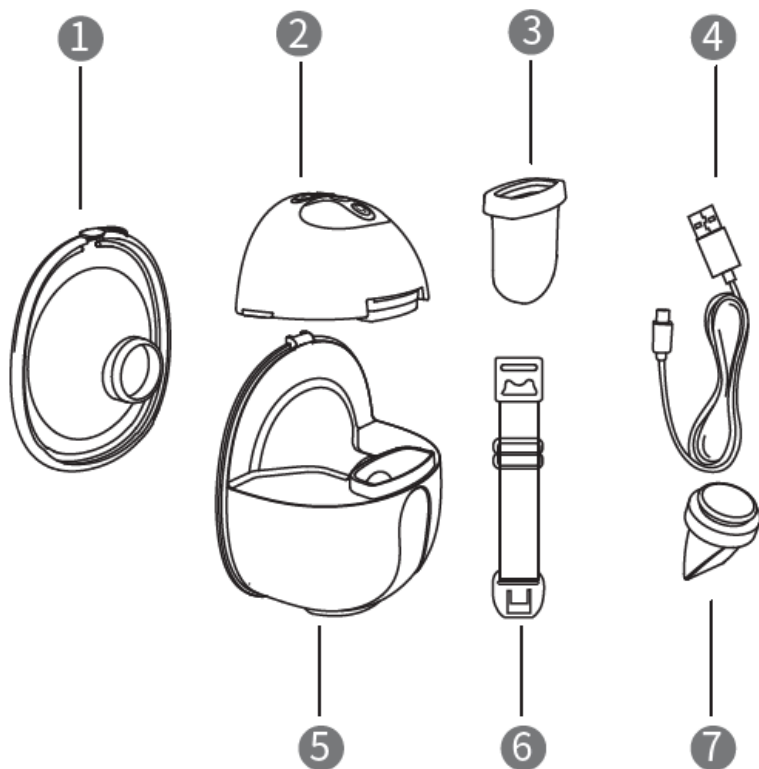

Afhankelijk van de configuratie bevat de doos:


- 2x pompmotoren
- 2x melkopvangbakjes
- 2x siliconen borstschilden - 24 mm
- 2x eendenbekventielen
- 2x membranen
- 2x beha-verstelgespen
- 1x tepelmaat
- 2x tepelinzetstukken - 17 mm
- 2x tepelinzetstukken - 19 mm
- 2x tepelinzetstukken - 21 mm
- 10x melkbewaarzakjes
- 2x USB-oplaadkabels
- 1x opbergtasje met ritssluiting
- 1x gebruikershandleiding

Functies en kenmerken

- Handsfree en draagbaar ontwerp
- Dubbel pompen (links en rechts)
- Meerdere zuigniveaus en modi
- Stille werking
- Oplaadbare batterij
- Ingebouwde nachtlampje functie voor gebruik in omgevingen met weinig licht

Configuratiescherm en LED-indicatoren

1. Stroomdisplay
2. Expressimodus
3. Stimulatiemodus
4. Massagemodus
5. Automatische modus
6. Nachtlucht-aan/uitknop
7. Knop voor hoger niveau
8. Aan/uitknop/modusschakelaar
9. Uur/ minuut
10. Niveau-display/tijddisplay
11. Pauze/startknop
12. Knop voor lager niveau

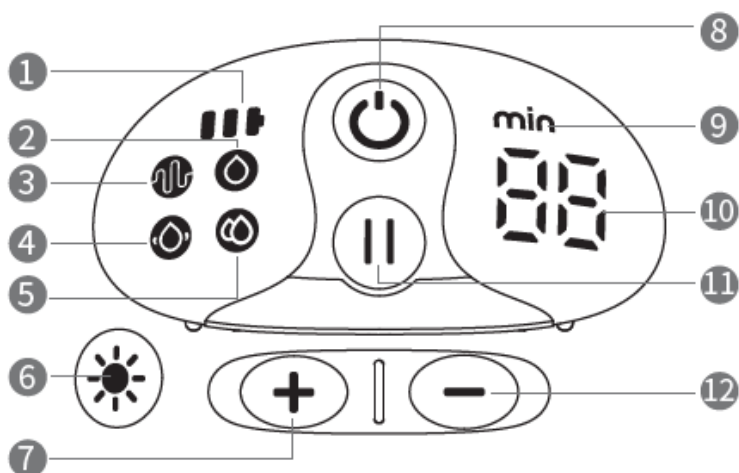

Installatie


Volg de onderstaande stappen om de Sensibaby Twinflow Duo correct in elkaar te zetten.

Belangrijke opmerkingen


- Reinig en droog altijd alle onderdelen van de pomp voordat je deze in elkaar zet.
- Was je handen grondig voordat je gereinigde onderdelen aanraakt.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen correct zijn geplaatst en goed zijn afgedicht om lekkage te voorkomen.
- Verwijder alle melkresten van de randen voordat je de pomp weer in elkaar zet.

Montagestappen

1. Bevestig de eendenbekklep aan de onderkant van de melkverzamelaar. Zorg ervoor dat deze in de juiste richting is geplaatst en volledig is vastgezet.

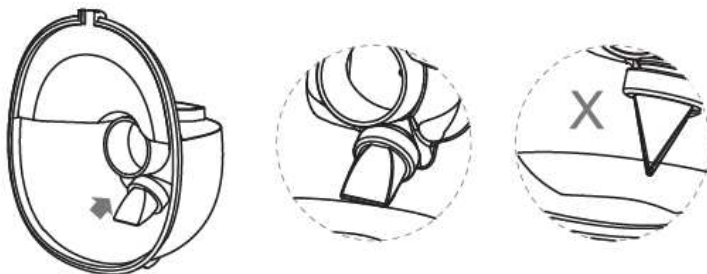


2. Plaats het siliconenmembraan in de melkopvangbak. Druk voorzichtig met je vingers rond de randen om ervoor te zorgen dat het goed aansluit en luchtdicht is.

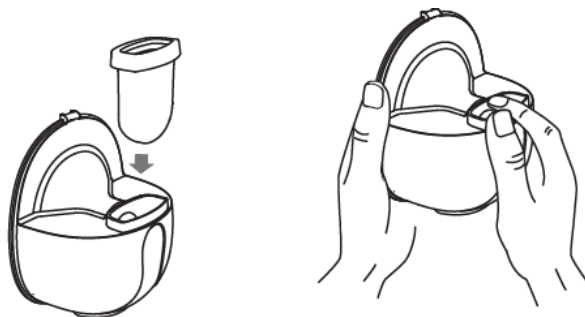


3. Plaats het borstschild (flens) op de melkopvangbak. Lijn de geleidingsgroef op de flens uit met de overeenkomstige groef op de melkopvangbak en druk vervolgens gelijkmatig rond de randen om de afdichting vast te zetten.



4. Plaats de melkuitloopplug in de onderkant van de flens. Zorg ervoor dat deze volledig is uitgelijnd en goed is afgedicht.

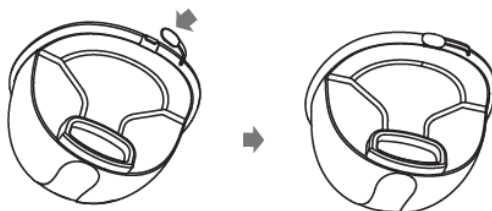

5. Plaats de motorunit boven op de melkopvangbak. Lijn de inkeping op de motorunit uit met het siliconenmembraan en druk voorzichtig aan totdat deze goed vastzit en een volledige afdichting vormt.

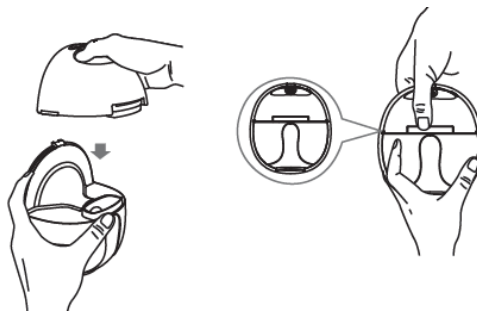

Controleer voor gebruik nogmaals of alle onderdelen correct zijn gemonteerd en stevig zijn bevestigd.


Beginnen met kolven

Voordat je begint

- Zorg ervoor dat de pomp volledig is gemonteerd en schoon is.
- Ga comfortabel zitten en houd de pomp tijdens het gebruik rechtop.

Positionering


- Druk het borstschild stevig tegen je borst en zorg ervoor dat er geen openingen zijn.
- Zorg ervoor dat de tepel in het midden van de opening van de flens zit.
- Houd de pomp altijd rechtop. Een onjuiste positionering kan leiden tot verminderde of geen zuigkracht.

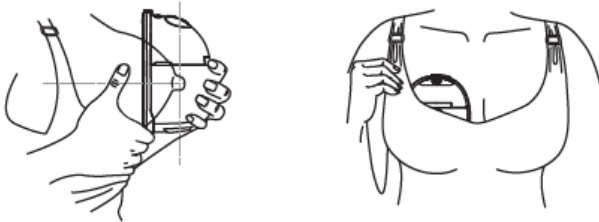

In-/uitschakelen

Druk lang op de aan/uit-knop om de pomp in te schakelen.

Het display licht op. Druk nogmaals lang op de aan/uit-knop om de pomp uit te schakelen.

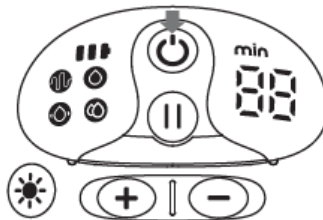


Start/Pauze & Standselectie

- Druk kort op de Start/Pauze-knop  om het kolven te starten of the pauzeren.
- Druk tijdens het kolven kort op de Aan/Uit-knop  om tussen de standen te schakelen.

De pomp heeft vier standen:

- Stimulatiestand  – zacht ritme om de melkstroom te stimuleren.
- Afklokstand  – constante zuigkracht voor het afkolven van melk.
- Massagestand  – zachte pulsen voor comfort.
- Automatische stand  – schakelt automatisch tussen patronen.

De actieve modus wordt op het display weergegeven.

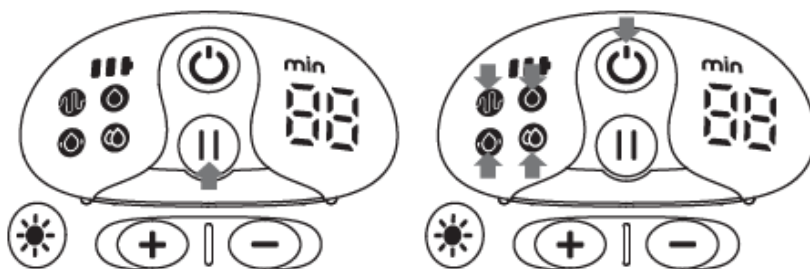


Zuigniveaus aanpassen

Elke stand heeft negen zuigniveaus.


- o Druk op “+” om de zuigkracht te verhogen.
- o Druk op “-” om de zuigkracht te verlagen.

Kies het niveau dat voor jou comfortabel aanvoelt.

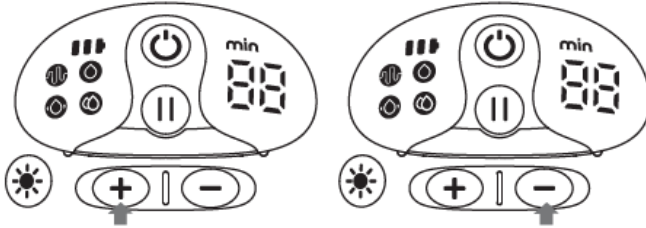

Weergave-informatie


- o Wanneer je op een knop drukt, wordt het huidige zuigniveau op het scherm weergegeven.
- o Als je gedurende 2 seconden geen knop indrukt, schakelt het display automatisch over naar de timerweergave, waarin de pomptijd in minuten wordt weergegeven.

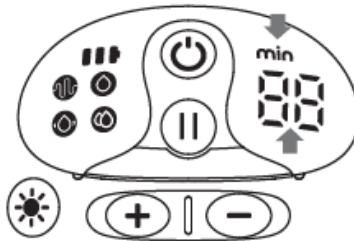

Nachtlichtfunctie

- o Druk lang op de lichtknop om het nachtlicht in of uit te schakelen.
- o Druk kort op de lichtknop om de helderheid aan te passen.
- o Er zijn drie helderheidsniveaus beschikbaar.

Het nachtlicht werkt onafhankelijk van de pomp en kan blijven branden, zelfs wanneer de pomp is uitgeschakeld.

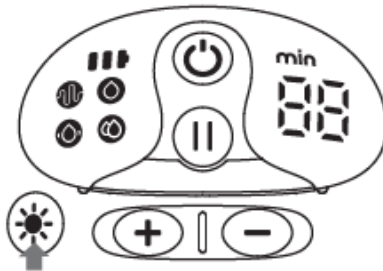

Handige tips

De pomp heeft een geheugenfunctie. Wanneer je hem opnieuw inschakelt, start hij in de stimulatiemodus en met het zuigniveau dat tijdens de vorige sessie werd gebruikt (de automatische modus start altijd op niveau 1).

In de automatische stand worden de zuigniveaus niet opgeslagen.

Als je geen knoppen indrukt, wordt het zuigniveau automatisch om de 15 seconden verhoogd tot niveau 7.

Door op een willekeurige knop te drukken, wordt de automatische verhoging gestopt.

Als de pomp is gepauzeerd en er gedurende 5 minuten geen knop wordt ingedrukt, wordt deze automatisch uitgeschakeld.


Voor de veiligheid en het comfort stopt de pomp automatisch na 20 minuten continu gebruik.

Batterij status indicator

Het display van de borstkolf geeft de batterijstatus weer met behulp van drie balkjes. Als tijdens het gebruik slechts één balkje zichtbaar is en knippert, geeft dit aan dat het batterijniveau laag is.


Laad de kolf dan onmiddellijk op. De kolf kan niet worden gebruikt tijdens het opladen.

Wanneer de kolf is aangesloten op een stroombron, geeft het display alleen de batterijstatus weer. Als alle drie de balkjes zichtbaar zijn en niet meer knipperen, is de batterij volledig opgeladen.

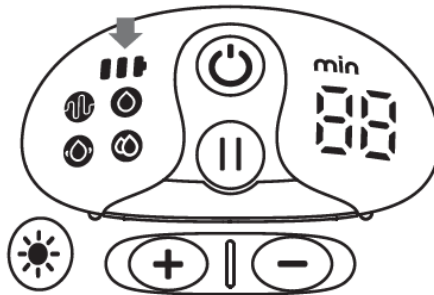

Na elke pompsessie kun je kort op de aan/uit-knop drukken om het batterijniveau te controleren. Als de batterij bijna leeg is, laad je de pomp op met een DC 5V/ 1A-oplader.

*Type C-oplaadpoort

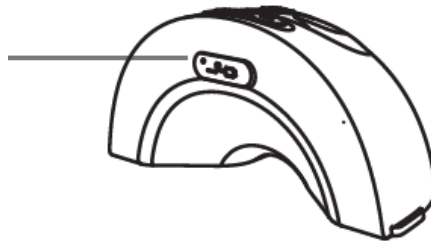

Aanbevolen pompositie

Ga comfortabel in een stoel zitten en ontspan je schouders. Leun iets naar voren en gebruik indien nodig een kussen of kussentje ter ondersteuning van je rug.

Zorg ervoor dat je lichaam en de borstkolf in een natuurlijke, rechte positie staan. Dit zorgt voor een goede zuigkracht en een comfortabelere pompervaring.



Instructies voor het aanpassen van je beha

Door de beha correct aan te passen, kun je het comfort verbeteren en de pomp goed op zijn plaats houden.

- Pas de lengte van de beha-bandjes aan, zodat de pomp goed aansluit zonder ongemak.
- Bevestig het ene uiteinde van de beha-verstelgesp aan de binnenste sluiting van je voedingsbeha.
- Pas het bandje aan het andere uiteinde van de gesp aan voor een stevige en comfortabele pasvorm.

Een juiste afstelling helpt om een constante zuigkracht tijdens het kolven te behouden.




Een pompsessie beëindigen

Wanneer je klaar bent met kolven, verwijder dan de borstkolf voorzichtig van je borst.


1. Druk op de aan/uitknop om de kolf uit te schakelen. Breek voorzichtig met je vinger de afdichting tussen je borst en de flens en verwijder de kolf voorzichtig terwijl je deze rechtop houdt.



2. Maak de motorunit los van de melkverzamelaar. Leg de motorunit opzij en maak de melkverzamelaar klaar voor het voeren of bewaren. Reinig alle gebruikte onderdelen volgens de reinigingsinstructies.

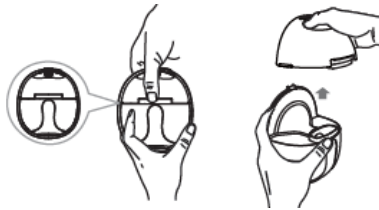

3. Giet de afgekolfdde moedermelk in een bewaarfles. Zorg er bij het openen van de melkuitloopplug voor dat de schenksleuf goed is uitgelijnd met de opening van de fles om morsen te voorkomen.

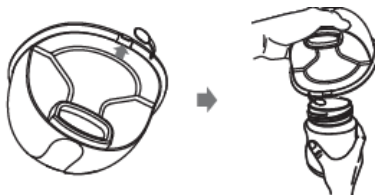

Ga voorzichtig om met afgekolfdde melk om de hygiëne te waarborgen en onnodig verlies te voorkomen.

Reiniging en onderhoud

Een goede reiniging en onderhoud zijn essentieel voor de hygiëne, veiligheid en optimale prestaties van de pomp.

Pompmotor

Na elk gebruik:

- Veeg de buitenkant af met een schone, vochtige doek.
- Desinfecteer indien nodig met 70% ethylalcohol of isopropylalcohol.
- Dompel de motor niet onder in water en houd hem niet onder stromend water.

Flens, siliconenmembraan, klep en melkopvangbak

Voor het eerste gebruik:

- Kook alle afwasbare onderdelen 5 minuten in water.
- Laat de onderdelen volledig afkoelen en aan de lucht drogen voordat je ze in elkaar zet.
- Plaats geen onderdelen van de pomp in de magnetron.

Na elk gebruik:

- Reinig alle onderdelen met warm water en een mild afwasmiddel of spoel ze grondig af met schoon water.
- Spoel goed af om zeepresten te verwijderen.
- Laat alle onderdelen volledig aan de lucht drogen voordat je ze opbergt of opnieuw gebruikt.

Reiniging van de klep

- Reinig de klep voorzichtig in warm water met een paar druppels mild reinigingsmiddel.
- Steek geen voorwerpen in de klep, omdat dit schade kan veroorzaken.
- Ga voorzichtig om met de klep tijdens het reinigen en demonteren.
- Als de klep beschadigd is, kan dit de zuigkracht beïnvloeden.

Aanbevolen methode voor het wassen met de hand

1. Plaats de onderdelen van de pomp in een schone wasbak die uitsluitend wordt gebruikt voor babyvoeding.
2. Plaats de onderdelen niet rechtstreeks in de gootsteen.
3. Voeg heet water en een mild afwasmiddel toe aan de wasbak.
4. Reinig de onderdelen met een borstel die uitsluitend wordt gebruikt voor babyvoeding. Spoel de onderdelen grondig af onder stromend water of door ze onder te dompelen in schoon water in een aparte wasbak.
5. Laat alle onderdelen volledig aan de lucht drogen op een schone, ongebruikte theedoek of papieren handdoek op een plek die beschermd is tegen vuil en stof.
6. Wrijf of dep de onderdelen niet droog met een handdoek.
7. Reinig de wasbak en borstel na elk gebruik.
8. Spoel ze goed af en laat ze aan de lucht drogen. Was ze minstens om de paar dagen met de hand.

Moedermelk bewaren

- Bewaar alleen moedermelk die is afgekolfd met een schone en gesteriliseerde borstkolf.
- Afgekolfd melk moet worden overgebracht naar een schone, gesteriliseerde melkbewaarzak of -fles met een goede afsluiting.
- Plaats de melk zo snel mogelijk na het afkolven in de koelkast of vriezer.

Belangrijke opslagrichtlijnen

1. Vries moedermelk niet opnieuw in nadat deze is ontdooid.
2. Meng vers afgekolfd melk niet met al ingevroren moedermelk.
3. Gooi moedermelk die na het voeden overblijft weg.
4. Afgekolfd melk kan:
 - Tot 48 uur worden gekoeld (in de koelkast, niet in de deur), of
 - Tot 3 maanden worden ingevroren.
5. Vermeld duidelijk op elke fles of opslagzak de datum en het tijdstip van afkolven.

Moedermelk ontdooien

Voor het beste resultaat laat je bevroren moedermelk een nacht in de koelkast ontdooien.

1. Als je de melk sneller nodig hebt, plaats dan de afgesloten fles of zak in een kom met warm water.
2. Eenmaal ontdooid, moet moedermelk binnen 24 uur worden gebruikt.
3. Bevroren moedermelk mag niet opnieuw worden ingevroren.

Moedermelk opwarmen

1. Zet de babyfles rechtop in een kom met warm water of gebruik een babyfles- of voedingsverwarmer die voor dit doel is ontworpen.
2. Controleer altijd de temperatuur van de melk voordat je je baby voedt.
3. Verwarm moedermelk niet in de magnetron, omdat dit waardevolle voedingsstoffen en antistoffen kan vernietigen en ongelijkmatige verwarming kan veroorzaken.
4. Ongelijkmatige verwarming kan leiden tot hete plekken die je baby kunnen verbranden.
5. Plaats melkbewaarflessen niet in kokend water, omdat dit kan leiden tot barsten of scheuren in de fles.

Garantie

Garantiekaart

Productgarantiekaart nr. _____

Productmodel _____

Serienummer _____

Gebruikersnaam _____

Telefoonnummer _____

Aankoopdatum _____

Factuurnummer _____

Stempel van de dealer



Sensitest B.V.

Sensibaby (brand of Sensitest B.V.)

Laan van de Ram 49

7324BW Apeldoorn, The Netherlands

Tel: +015 3642121

E-mail: info@senitest.nl

www.sensitest.nl