


Battery

To maximize battery life, we recommend turning off the Propeaq light glasses 1.0 B when not in use. Extremely cold temperatures can affect the duration of the battery negatively. To maximize battery capacity in cold weather conditions, the glasses should be stored in a warm place (room temperature) or be put in a warm place before use.



- Bat 100% - 70%
- Bat 70% - 30%
- Bat 30% - 5%
- Bat 5% - 0%

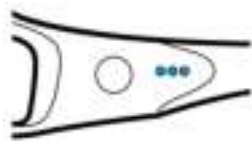

Propeaq light glasses Model 1.0 B

User Manual

Use of the Propeaq app

- Download the Propeaq app from the App Store (iOS) or Google Play (Android)
 - Follow the steps in the app, starting with step 1
- You can download the Propeaq app from the Apple store or the Google Play store.



After downloading, add your personal information according to the app screens to determine your chrono type.

Make sure the information is correct. The app uses this data for calculations in order to generate a personal user schedule.

To use the app, we also refer you to the Propeaq support page: www.propeaq.com/support

Manual operation

The table gives an overview of the use of the Propeaq light glasses 1.0 B.

Function	Action	Result
Turn on the light	Press the on/off button for 1 second	The blue light comes on
Switch off the light	1 x briefly press the on/off button	The blue light goes off, the glasses are turned off
Battery check	Press the on/off button for 2 seconds	The battery indicator lights illuminate for a few seconds (when the device is charged)

After 30 minutes, the light glasses turn off by themselves.

Warning

- Do not use the Propeaq light glasses 1.0 B longer than intended. In most cases, that is 30 minutes.
- Do not use the Propeaq light glasses 1.0 B in traffic or in other conditions that require good visibility.
- The Propeaq light glasses 1.0 B must not be used in a damp or wet environment.

Disclaimer

The information in this document is subject to change without notice and does not represent any obligation on the part of the seller. Not a single one guarantee or account, explicit or implicit, is made regarding quality, accuracy or suitability for a specific purpose of this document. All liability of whatever nature that ensues the use of this product is excluded. Under no circumstances is the manufacturer liable for direct, indirect, special, incidental or consequential damages arising from the use or inability to use this product or documentation, even if advised about the possibility of such damage. The content of this document is copyrighted. All rights are reserved. No part of this manual may be multiplied or transferred, in which way and for which purposes, without explicit written permission. Product names that are in this document are for identification purposes only. All trademarks and product names that appear in this document are the registered property of their respective owners.

Congratulations on your purchase of the Propeaq Light Glasses


This manual will help you using the Propeaq light glasses. You can operate the light glasses manually.

To beat winter blues, wear the glasses for 30 minutes in the morning immediately after getting up with blue lights on. For an energy boost, wear the glasses for 30 minutes during the day, but not after 8 p.m. A detailed instruction to prevent jet lag or to avoid fatigue during nightshift, consult the free Propeaq app.

Contents of the package

The Propeaq light glasses 1.0 B are supplied in a complete package with a USB cable, microfibre case and cleaning cloth, light blue lenses, orange lenses and stylish frame with integrated LED:

On the inside of the frame of the glasses you will find the on/off button, the battery indicator light and the micro-USB port.

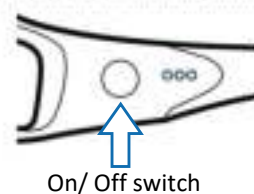

Before use

Before using the Propeaq light glasses 1.0 B, charge the battery first.

- Insert the micro USB cable into the device.
- Connect the other end, the USB, directly to a PC or an adapter and connect it to the power supply.
- Charge the glasses until the battery indicator (next to the on/off button) indicates that the battery is fully charged. If the battery is completely discharged, charging takes approximately 2 hours. Thereafter, the period of use is approx. 2 hours; it may be somewhat shorter at the beginning.

Using the glasses

Use the blue-light glasses if you have been prescribed blue light of the Propeaq light glasses 1.0 B. If you wish, you can also use the light glasses without lenses in the frame.

You use the orange lenses when the blue part of daylight or ambient light needs to be blocked / filtered. The blue light must be switched off when the orange glasses are used.

The lenses are removable and equipped with UV protection.

To change the lenses, push the lens from the outside to the inside on the side off the glasses. See figure 1. Place your thumb on the outside of the lens and push the lens out of the frame. To place a new lens, place the nose side of the lens on the inside of the nose bridge and press the lens into the frame until you hear a click. This requires some force the first few times. The lenses and the frame cannot be damaged by these acts. Hold the frame and your thumbs as indicated on image 2.



Image 1



Image 2



Propeaq lichtbril Model 1.0 B

Gebruikers Handleiding

Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw Propeaq lichtbril


Deze handleiding zal u helpen bij het gebruik van uw Propeaq lichtbril. U kunt de lichtbril handmatig bedienen.

Ter bestrijding van winterblues draag de bril met 30 minuten blauw licht in de ochtend, direct na opstaan. Voor een energie-boost draag de bril 30 minuten gedurende de dag, maar niet na 20.00 u. Een gedetailleerde instructie ter voorkoming van een jetlag of ter bestrijding van vermoeidheid tijdens nachtarbeid, raadpleeg de gratis Propeaq app.

De inhoud van de doos

De Propeaq lichtbril 1.0 B wordt geleverd in een compleet pakket met een USB kabel, een microfiber etui en een poetsdoekje, lichtblauwe glazen, oranje glazen en een stijlvol montuur met geïntegreerde LED's.

Binnenin het montuur vindt u de aan-/uitknop, de batterij-indicator lichtjes en de micro-USB-sleuf.

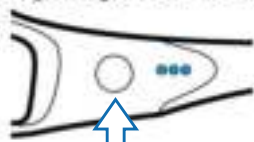

Aan/uit knop

Vóór gebruik

Laad voor gebruik van de Propeaq lichtbril 1.0 B bril eerst de batterij volledig op.

1. Steek de micro-USB in de lichtbril.
2. Verbind het andere uiteinde, de USB, direct met een pc, ofwel een adapter en plaats deze in een wandcontactdoos.
3. Laad de lichtbril bril op tot de batterij-indicator, rechts naast de aan/uitknop, aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen. Bij een volledig lege batterij duurt dit circa 2 uur. Hierna is de gebruiksduur circa 2 uur, in het begin mogelijk iets korter.

De glazen - het gebruik van de glazen

De lichtblauwe glazen gebruikt u wanneer blauw licht van de Propeaq lichtbril 1.0 B is voorgeschreven. Naar wens kunt u de lichtbril ook zonder lichtblauwe glazen in het montuur gebruiken.

De oranje glazen gebruikt u om het blauwe deel van het daglicht of omgevingslicht te blokkeren. Het blauwe licht moet zijn uitgeschakeld wanneer de oranje glazen gebruikt worden.

De glazen zijn eventueel uitneembaar en zijn voorzien van UV-bescherming.

Om de lenzen te wisselen duwt u aan zijkant van buiten naar binnen tegen de lens. Zie afbeelding 1. Plaats uw duim aan de buitenkant van de lens en druk de lens uit het montuur. Voor het plaatsen van een nieuwe lens zet u de neuszijde van de lens aan de binnenkant van de neusbrug en drukt u de lens in het montuur totdat u een klik hoort. Hiervoor is de eerste keren enige kracht nodig. De lenzen en het montuur kunnen niet beschadigen door deze handelingen. Houdt het montuur en uw duimen zoals aangegeven op afbeelding 2.




Afbeelding 1



Afbeelding 2

De batterij

Om de levensduur van de batterij te maximaliseren adviseren we u de Propeaq lichtbril 1.0 B uit te schakelen wanneer u hem niet gebruikt. Extreme koude temperaturen kunnen de levensduur van de batterij negatief beïnvloeden. Om de capaciteit van de batterij in koude omstandigheden te maximaliseren, kunt u de bril op een warme plaats (kamertemperatuur) bewaren dan wel deze voorafgaande aan het gebruik op een warme plaats leggen.

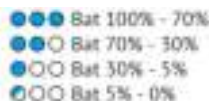

Gebruik van de Propeaq app

1. Download de Propeaq app uit de App Store (iOS) of Google Play (Android)
2. Volg de stappen in de app, beginnend bij stap 1

U kunt de Propeaq app downloaden vanuit de Apple store of de Google Play store.



Voeg na het downloaden uw persoonlijke gegevens toe volgens de schermen van de app om uw chrono type te bepalen.

Zorg ervoor dat de gegevens correct zijn. De app gebruikt uw chrono type voor berekeningen om zodoende een persoonlijk gebruikersschema te genereren.

Voor gebruik van de app verwijzen wij u tevens naar de supportpagina van Propeaq: www.propeaq.com/support

Handmatig gebruik

In het schema ziet u hoe u de Propeaq lichtbril 1.0 B gebruikt.

Functie	Actie	Resultaat
Aanzetten blauw licht	Druk de aan-/uitknop in gedurende 1 seconde	Het blauwe licht gaat aan
Uitzetten blauw licht	Druk 1x kort op de aan-/uitknop	Het blauwe licht gaat uit, bril is uitgeschakeld
Batterij check	Druk de aan-/uitknop in gedurende 2 seconden	De batterij indicator lichtjes gaan enkele seconden aan (indien het product is opgeladen)

Na 30 minuten schakelt de Propeaq lichtbril 1.0 B zichzelf uit

Waarschuwing

- Gebruik de Propeaq lichtbril 1.0 B niet langer dan voorgeschreven. In de meeste gevallen is dit 30 minuten.
- Gebruik de Propeaq lichtbril 1.0 B niet in het verkeer of in andere omstandigheden waarbij goed zicht vereist is.
- Gebruik de Propeaq lichtbril 1.0 B niet in een vochtige of natte omgeving.

Disclaimer

De informatie in dit document is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving en geeft geen enkele verplichting van de kant van de verkoper. Geen enkele garantie of verantwoording, expliciet of impliciet, wordt gedaan ten aanzien van kwaliteit, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van dit document. Alle aansprakelijkheid van welke aard dan ook dat voortvloeit uit het gebruik van dit product is uitgesloten. In geen geval is de fabrikant aansprakelijk voor directe, indirecte, speciale, incidentele schade of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik dan wel het onvermogen om dit product of de documentatie te gebruiken, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. De inhoud van dit document is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn voorbehouden. Geen enkel deel van deze handleiding mag worden vervoelvoudigd of overgedragen, op welke wijze en voor welke doeleinden dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Productnamen die in dit document worden genoemd zijn slechts ter identificatie. Alle handelsmerken en productnamen die in dit document voorkomen zijn gedeponeerde eigendom van hun respectieve eigenaars.