

144
pieces

EUROGLIDER

CE
0120

Vor Gebrauch Anweisungen lesen / Lees de instructies voor gebruik / Lire les instructions avant utilisation

DE

Euroglider Kondome sind aus hochwertigem Naturkautschuklatex, haben eine glatte Oberfläche, und eine natürliche Farbe, Sie haben ein Reservoir und sind mit einem nicht-medizinischem Gleitmittel befeuchtet.
Bei sachgerechter Verwendung in Übereinstimmung mit der Anleitung des Herstellers sind Kondome eine wirksame Form zur Empfängnisverhütung. Allerdings können Kondome keinen 100% igen Schutz vor Schwangerschaft bieten.
Bei richtiger Anwendung, können Latexkondome helfen, das Risiko der Übertragung von HIV-Infektionen (AIDS) zu reduzieren, sowie viele andere sexuell übertragbare Krankheiten, einschließlich Chlamydien-Infektion, Genital-Herpes, Genitalen Warzen, Gonorrhoe, Hepatitis B und Syphilis.
Normale Weite: 53 ± 2 mm.

Zur Beachtung:

- Das Kondom ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie keine Gleitmittel auf Ölbasis, wie z. B. Vaseline, Massageöl, Babyöl, diese können das Kondom beschädigen. So können auch einige Medikamente, die auf Penis oder Vagina angewendet werden das Kondom beschädigen konsultieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie diese Medikamente mit Kondomen zu verwenden.
- Wenn bei Ihnen Irritationen auftreten, besonders Sie die Verwendung der Latexkondome und fragen Sie Ihren Arzt.
- Bitte suchen Sie ärztlichen Rat, mindestens innerhalb von 72 Stunden, sollte ein Kondom beschädigt sein oder während des Gebrauchs reißen.
- Sollte die Folie beschädigt sein, entsorgen Sie bitte das Kondom.
- Kondome kühl und trocken lagern und vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Gebrauchsanweisung:

SCHRITT 1 Überprüfen Sie das Verfallsdatum vor der Benutzung öffne Sie auf der Seite die Folie.
Das Kondom vorsichtig aus der Folie nehmen und achten Sie darauf es nicht durch Fingernägel, Schmuck etc. zu beschädigen.
SCHRITT 2 Setzen Sie das Kondom auf den Penis auf, nachdem dieser vollständig erigiert ist, und achten Sie auf die Abrollrichtung damit das Kondom eng anliegt und sich keine Luft im Reservoir befindet, eine sachrechte Benutzung hilft Ihnen und Ihrem Partner Schwangerschaft und Übertragung von STI zu verhindern.
Ein Kondom, könnte beim unsachgemäßen anlegen beschädigt werden, um dies zu vermeiden stellen Sie sicher das der Rollrand auf der Außenseite platziert ist und rollen das Kondom über den erigierten Penis ab.
SCHRITT 3 Halten Sie das Kondom am Reservoir fest und rollen Sie es über den Penis ab.
SCHRITT 4 Achten Sie darauf das das Kondom nicht abrutscht und überprüfen, Sie den richtigen Sitz
SCHRITT 5 Nach der Ejakulation halten Sie das Kondom fest und ziehen Sie den Penis aus der Vagina während der Penis noch erigiert ist.
Das benutzte Kondom bitte im Müll und nicht in der Toilette entsorgen.

Achtung: Dieses Kondom besteht aus Naturkautschuklatex, die allergische Reaktionen hervorrufen können.

NL

Euroglider condoms zijn gemaakt van hoge kwaliteit natuurlijk rubber latex, glad oppervlak, natuurlijke kleur, inclusief reservoir en voorzien van een niet-mediceinale glijmiddel.
Indien de instructies van de fabrikant worden nageleefd zijn de condoms een effectieve contraceptie methode. Echter biedt geen een contraceptiemethode 100% bescherming. Mits goed gebruikt, helpen condoms het risico te verminderen op overdracht van een HIV infectie (aids) en vele andere seksueel overdraagbare aandoeningen, waaronder chlamydia, herpes, genitale wratten, gonorrhoe, hepatitis B en syfilis.
Nominale breedte: 53 ± 2 mm

Voorzorg en waarschuwingen:

- Gebruik geen condoms slechts 1 keer.
- Gebruik geen glijmiddelen op oliebasis, zoals Vaseline, massageolie, babyolie, welke de condoms kunnen beschadigen. Ook sommige medicijnen die op de penis of vagina worden, aangebracht kunnen condoms aantasten. Vraag uw apotheker of huisarts om advies.
- In geval van irritatie, stop dan het gebruik van het latex condom en vraag advies bij je huisarts.
- zoek medische hulp, tenminste binnen 72 uur, wanneer het condom scheurt of lekt tijdens gebruik.
- Als de folie is beschadigd, gooi de condom weg.
- Bewaar op een koele, droge plaats, buiten invloed van direct zonlicht.

Gebruiksaanwijzing:

STAP 1 Controleer voor gebruik de uiterste gebruiksdatum. Scheur de verpakking aan één zijde open en haal het condom er voorzichtig uit. Condoms kunnen beschadigen door nagels en sieraden.
STAP 2 Breng het condom pas aan wanneer de penis volledig stijf is. Vermijd elk contact tussen de penis en het lichaam van uw partner voordat het condom is aangebracht om zwangerschap en overdracht van SOA's te voorkomen. Lucht in een aangebracht condom, kan een breuk veroorzaken. Vermijd dit door het topje van het condom dicht te knijpen. Controleer of het af te rollen gedeelte aan de buitenkant zit en plaats het condom op de top van de stijve penis.
STAP 3 Blijf het topje vasthouden, gebruik je andere hand om het condom over de gehele lengte af te rollen. Als het condom goed is aangebracht zal het reservoir geen lucht bevatten.
STAP 4 Stop en controleer als het condom afglijdt of als het condom te strak om de penis zit, want dit kan tot breuk leiden van het condom.
STAP 5 Houd het condom na de zaadlating aan de rand vast en trek de penis terug nog voordat deze verslapt. Dit helpt afglijden te voorkomen. Rol na het gebruik het condom in een stukje tissue en gooi het in de vuilnisbak. Spool niet door het toilet.

Waarschuwing: Dit condom is gemaakt van een rubber latex welke allergische reacties van veroorzaken inclusief anafylactische shock.

FR

Les préservatifs Euroglider sont faits de latex caoutchouc naturel de haute qualité, d'une surface lisse, de couleurs naturelles, d'un réservoir terminé avec du lubrifiant non médicamenteux. Lorsqu'ils sont conformément appliqués aux instructions du fabricant, les préservatifs sont utilisés comme une forme de contraception. Cependant, aucune méthode de contraception ne peut assurer une protection à 100%. 5% sont utilisés correctement, alors les préservatifs aideront à réduire le risque de transmission du VIH (SIDA) ainsi que de nombreuses maladies sexuellement transmissibles y compris l'infection aux chlamydia, l'herpès génital, les verrues, la gonorrhée, l'hépatite B et la syphilis.
Largeur nominale: 53 ± 2 mm.

Précautions et mises en garde:

- Le préservatif est à usage unique
- Ne pas utiliser de lubrifiants à base d'huile, tels que de la vaseline, de l'huile pour massage, de l'huile pour bébé qui peuvent endommager le préservatif. Ne pas utiliser certains des médicaments pour le pénis ou pour le vagin sans avis médical.
- Si vous avez des problèmes d'irritations, arrêtez l'utilisation de préservatifs en latex et demandez conseils auprès de votre médecin traitant.
- Appelez une assistance médicale dans les 72 heures si un préservatif fuit ou éclate pendant l'utilisation.
- Si le film individuel est visiblement endommagé, jetez le préservatif.
- Entrez dans un endroit frais et sec à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil.

Mode d'emploi:


ETAPE 1: Vérifiez la date d'expiration avant utilisation. Déchirez le sachet avec précaution sans utiliser les ongles, les dents ou tout ce qui est susceptible d'endommager le préservatif. Assurez-vous de ne pas le déchirer et manipulez-le soigneusement.
ETAPE 2: Mettez le préservatif dès que le pénis est en érection avant tout contact entre votre pénis et votre partenaire. Ne le mettez pas au dernier moment car cela évite la transmission de maladies sexuellement transmissibles, des infections sexuellement transmissibles ainsi que des risques de grossesses. L'air à l'intérieur du préservatif peut causer sa déchirure. Afin d'éviter cela, pincez délicatement le petit réservoir entre deux doigts pour en chasser l'air. Assurez-vous que le rouleau est à l'extérieur et placez le préservatif sur le pénis en érection.
ETAPE 3: Tout en serrant la pointe, utilisez votre autre main pour dérouler doucement le préservatif en pressant doucement l'air vers la base du pénis.
ETAPE 4: Arrêtez et vérifiez si le préservatif glisse ou se serre excessivement sur le pénis car cela peut entraîner une rupture.
ETAPE 5: Immédiatement après l'éjaculation et pendant que le pénis est toujours en érection, tenez le préservatif fermement en place à la base du pénis quand vous retirez, de sorte que le préservatif ne glisse pas. Enveloppez le préservatif utilisé dans un tissu et jetez-le dans une poubelle. Ne le jetez pas dans les toilettes.

Attention : ce préservatif est fait de latex de caoutchouc naturel qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris un choc anaphylactique.



Last updated March 2017

Standard EN ISO 4074:2015
100% Electronically Tested
Nominal Width: 53 ± 2mm

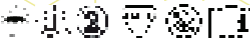

ASHA International
Seinhuiswachter 1-3, 3034 KH
Rotterdam, The Netherlands



C0501-1-V1710