

TIKKENS ALCOHOLTESTER



Model: EK-923

1. Introductie

Bedankt voor uw aankoop! Lees deze handleiding aandachtig alvorens de alcoholtester in gebruik te nemen. Bij vragen kan u ons steeds contacteren per email: info@northwallproducts.com

2. Waarschuwing

Drinken en rijden gaan niet samen. De gemeten waarde is slechts een indicatie en geeft geen bevestiging van de rijvaardigheid. De digitale alcoholtester kan incidenteel een onjuiste en onbetrouwbare waarde weergeven. Testresultaten kunnen nooit als juridisch bewijs worden voorgelegd in het geval van aanvaring met het wet. Politie en handhaving maakt gebruik van een andere, professionele technologie.

Deze Tikkens alcoholtester is enkel ontworpen voor privaat gebruik en **NIET** geschikt voor commercieel gebruik

3. Belangrijk!

Een particuliere alcoholtest is nooit zo accuraat als een alcoholtest met de hoogwaardige apparatuur van de politie. Gebruik de resultaten enkel als richtlijn en kruip nooit met alcohol op achter het stuur. Neem de gebruiksaanwijzing aandachtig door voor gebruik. Lees ook de tips hieronder! Het alcoholgehalte in het bloed kan tot twee uur na consumptie van alcoholische dranken blijven stijgen. Een blijvend negatief

4. Meeteenheden

Selecteer voor Nederland & België: EU (g/L):

EU - g/L: Hoeveel gram alcohol er aanwezig is in een liter bloed.

VS - %BAC: Hoeveel gram alcohol er aanwezig is in 100 ml bloed.

VS - ‰BAC: Hoeveel gram alcohol er aanwezig is in 1000 ml bloed.

CN - mg/100mL: Hoeveel milligram alcohol er aanwezig is in 100 ml bloed.

PL - BrAC: Ademalcoholgehalte (het percentage alcohol in de adem).

JP - mg/L: Hoeveel milligram alcohol er aanwezig is in een liter bloed.

5. Instructies

- Drink or rook niet minstens 20m voor het uitvoeren van de test.
- Voer de test enkel uit bij een temperatuur van 0°C tot 4°C.
- Blaas nooit rook, vloeistoffen of voedselresten in het product.
- Condities die een verhoogde concentratie ketonen in het bloed veroorzaken zoals diabetes of een verlaagde calorie-inname door vasten kunnen voor afwijkende resultaten zorgen.
- Reinig het apparaat nooit met chemische reinigingsmiddelen.
- Houdt de alcoholtester buiten gebruik van kinderen.
- Als de afwijking tussen twee opeenvolgende positieve metingen > 0.05mg/L dient de test opnieuw gedaan te worden.
- **Opgelet! Wacht minsten 3 min. tussen twee metingen**

6. Verpakkingsinhoud

- 1 x Tikkens digitale alcoholtester
- 10 x mondstukjes
- 1 x micro-USB kabel
- 1 x hanleiding
- 1 x draagvastje

7. Specificaties

- Merk: Tikkens
- Materiaal: ABS
- Kleur: Grijs
- Gewicht: 125 g
- Afmetingen: 138 x 58 x 21mm
- Certificaten: CE, RoHS, FCC
- Batterij: 1000 mAh
- Input: 5V, 1A
- Output: 3.7V
- **Let op:** Deze alcoholtester voldoet niet aan de Europese NF X20-702 norm en is enkel geschikt voor persoonlijk gebruik.

8. Testbereik & Nauwkeurigheid:


- 0~0.199%BAC(Deviation±0.01%BAC)
- 0~1.99%BAC(Deviation±0.1%BAC)
- 0~1.99g/L(Deviation±0.1g/L)
- 0~0.995mg/L(Deviation±0.05mg/L)
- 0~199mg/100ML(Deviation±10mg/100mL)
- 0~1.99%Prom(Deviation±0.1%Prom)

9. Bediening - Instelling eenheid

- Druk de power knop (1) gedurende twee sec. in. In de linkerbovenhoek verschijnt het woord "WAIT" waarna een timer aftelt vanaf 15s. Druk in deze 15s. op de linker knop (2) om de gewenste waarde (g/L voor NL & BE) te selecteren.
- Druk na het selecteren van de juiste waarde op de power knop om de waarde vast te zetten.

10. Bediening - Alcohol test

- Druk de power knop (1) gedurende twee sec. in. In de linkerbovenhoek verschijnt het woord "WAIT" waarna een timer aftelt vanaf 15s. Dit is de warmup fase.

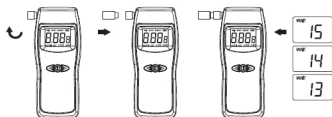

- Na de warmup verschijnt het woord "START". Start binnen de 7sec. met blazen. Blaas zacht en continu gedurende 4-5sec.
- Groen scherm: Waarde lager dan de waarschuingswaarde. Het apparaat zal éénmaal piepen als aanduiding van een negatieve test.
- Geel scherm: Het apparaat kleurt geel bij een waarde tussen waarschuingswaarde en de gevaar waarde. Het apparaat piept tweemaal met één s. interval.
- Rood scherm: Het apparaat kleurt rood bij een waarde hoger dan de gevaar waarde. Het apparaat piept 10 s.

Opgelet! Wacht minsten 3 min. tussen twee metingen

11. Contact

Voor vragen over Tikkens alcoholtester kan u altijd contact opnemen met de Tikkens klantenservice. Wij staan u graag te woord en zullen er alles aan doen om samen tot een oplossing te komen.

Email: info@northwallproducts.com

Wallcorp BV

Heikesveld 48 bus 2

3910 Pelt

België

1. Introduction

Thank you for your purchase! Read this manual attention before using the alcohol tester.

If you have any questions, you can always contact us by email: info@northwallproducts.com

2. Warning

Drinking and driving don't mix. The measured value is only an indication and does not confirm the driving skills. The digital alcohol tester can occasionally be a display incorrect and unreliable value.

Test results can never be used as legal evidence presented in the event of a conflict with the law. Law enforcement uses a different, professional one technology. This Tikkens alcohol tester is only designed for private use and NOT suitable for commercial use

3. Important!

A private alcohol test is never as accurate as a alcohol test with the high-quality equipment of the police. Use the results as a guideline only and never compromise alcohol behind the wheel. Take the manual carefully before use. Also read the tips below!

The blood alcohol level can be up to two hours after consumption of alcoholic beverages continue to rise. A permanently negative

4. Units of Measure

Select for the Netherlands & Belgium: EU (g/L):

EU - g/L: How many grams of alcohol are present in a liter of blood.

US - %BAC: How many grams of alcohol are present in 100 ml blood.

USA - ‰BAC: How many grams of alcohol are present in 1000 ml blood.

CN - mg/100mL: How many milligrams of alcohol are present in 100 ml of blood.

PL - BrAC: Breath alcohol content (the percentage of alcohol in the breath).

JP - mg/L: How many milligrams of alcohol are present in a liter blood.

5. Instructions

- Do not drink or smoke at least 20m before performing the test.
- Only perform the test at a temperature of 0°C to 4°C.
- Never blow smoke, liquids or food residues into the product.
- Conditions that contain an increased concentration of ketones **the blood such as diabetes or reduced calorie intake** ingestion through fasting can cause different results.
- Never clean the device with chemical cleaning agents.
- Keep the alcohol tester out of the reach of children.
- If the deviation between two successive positive measurements $> 0.05\text{mg/L}$, the test must be repeated.
- Attention! Wait at least 3 min. between two measurements

6. Package Contents

- 1 x Tikkens digital alcohol tester
- 10 x mouthpieces
- 1 x micro USB cable
- 1 x manual
- 1 x carrying case

7. Specifications

- Brand: Tikkens
- Material: ABS
- Colour: Grey
- Weight: 125g
- Dimensions: 138 x 58 x 21mm
- Certificates: CE, RoHS, FCC
- Battery: 1000mAh
- Input: 5V, 1A
- Output: 3.7V
- Note: This alcohol tester does not comply with the European NF X20-702 standard and is only suitable for personal use usage.

8. Test Range & Accuracy:


- 0~0.199%BAC(Deviation $\pm 0.01\%$ BAC)
- 0~1.99%BAC(Deviation $\pm 0.1\%$ BAC)
- 0~1.99g/L(Deviation $\pm 0.1\text{g/L}$)
- 0~0.995mg/L(Deviation $\pm 0.05\text{mg/L}$)
- 0~199mg/100ML(Deviation $\pm 10\text{mg}/100\text{mL}$)
- 0~1.99%Prom(Deviation $\pm 0.1\%$ Prom)

9. Operation - Unit setting

- Press the power button (1) for two seconds. In the upper left corner the word "WAIT" will appear followed by a count down timer from 15s. In these 15s. press the left button (2) and select the desired value (g/L for NL & BE).
- After selecting the correct value, press the power button to fix the value.

10. Operation - Alcohol test

- Press the power button (1) for two seconds. In the upper left corner the word "WAIT" will appear followed by a count down timer from 15s. This is the warm-up phase.

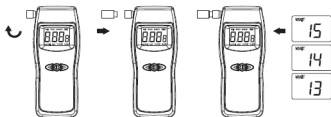

- After the warmup, the word "START" appears. Start blowing within 7 sec. Blow gently and continuously for 4-5 sec.
- Green screen: Value lower than the warning value. The device will beep once indicating a negative test.
- Yellow screen: The device turns yellow at a value between warning value and the danger value. The device beeps twice with a one s. interval.
- Red screen: The device turns red when the value is higher than the hazard value. The device beeps for 10 s.

Attention! Wait at least 3 min. between two measurements

11. Contact

You can always contact us for questions about Tikken's alcohol tester by email. We are happy to assist you and will do everything in our power to find a solution.

Email: info@northwallproducts.com
Wallcorp BV
Heikesveld 48 box 2
3910 Pelt
Belgium

1. Introduction

Merci pour votre achat! Lisez ce manuel attention avant d'utiliser l'éthylotest.

Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter par email: info@northwallproducts.com

2. Avertissement

Boire et conduire ne font pas bon ménage. La valeur mesurée est seulement une indication et ne confirme pas la compétences de conduite. L'éthylotest numérique peut parfois être un afficher une valeur incorrecte et non fiable. Les résultats des tests ne peuvent jamais être utilisés comme preuve légale présentée en cas de conflit avec la loi. Forces de l'ordre et l'application utilise un professionnel différent La technologie. Cet éthylotest Tikkens est uniquement conçu pour un usage privé utiliser et ne convient PAS à un usage commercial

3. Attention !

Un test d'alcoolémie privé n'est jamais aussi précis qu'un test d'alcoolémie avec l'équipement de haute qualité de la police. Utilisez les résultats uniquement à titre indicatif et ne faites jamais de compromis l'alcool au volant. Prenez le manuel soigneusement avant utilisation. Lisez également les conseils ci-dessous! Le taux d'alcoolémie peut atteindre jusqu'à deux heures après la consommation de boissons alcoolisées ne cesse d'augmenter. Une négatif en permanence

4. Unités de mesure

Sélectionnez pour les Pays-Bas et la Belgique : UE (g/L) :

UE - g/L : combien de grammes d'alcool sont présents dans un litre de sang.

US - %BAC : combien de grammes d'alcool sont présents dans 100 ml du sang.

USA - ‰BAC : combien de grammes d'alcool sont présents dans 1000 ml du sang.

CN - mg/100mL : Combien de milligrammes d'alcool sont présents dans 100 ml de sang.

PL - BrAC : Teneur en alcool dans l'haleine (pourcentage d'alcool dans haleine).

JP - mg/L : combien de milligrammes d'alcool sont présents dans un litre du sang.

5. Consignes

- Ne pas boire ni fumer au moins 20m avant d'effectuer la test.
- Effectuez le test uniquement à une température de 0°C à 4°C.
- Ne jamais insuffler de la fumée, des liquides ou des résidus alimentaires dans le produit.
- Conditions qui contiennent une concentration accrue de cétones le sang comme le diabète ou l'apport calorique réduit l'ingestion par le jeûne peut entraîner des résultats différents.
- Ne nettoyez jamais l'appareil avec des produits de nettoyage chimiques.
- Gardez l'éthylotest hors de portée des enfants.
- Si l'écart entre deux valeurs positives successives mesures > 0,05mg/L, le test doit être répété.
- Attention! Attendre au moins 3 min entre deux mesures

6. Contenu de l'emballage

- 1 x éthylotest numérique Tikkens
- 10 x embouchures
- 1 câble micro-USB
- 1 manuel
- 1 étui de transport

7. Spécifications

- Marque : Tikkens
- Matière : ABS
- Couleur : Gris
- Poids : 125g
- Dimensions : 138 x 58 x 21 mm
- Certificats : CE, RoHS, FCC
- Batterie : 1000mAh
- Entrée : 5V, 1A
- Sortie : 3,7 V
- Remarque : cet éthylotest n'est pas conforme à la norme européenne Norme NF X20-702 et ne convient qu'à un usage personnel usage.

8. Gamme de test et précision :


- 0 ~ 0,199 % BAC (écart \pm 0,01 % BAC)
- 0 ~ 1,99 % BAC (écart \pm 0,1 % BAC)
- 0 ~ 1,99 g/L (écart \pm 0,1 g/L)
- 0 ~ 0,995 mg/L (écart \pm 0,05 mg/L)
- 0 ~ 199 mg/100 ml (écart \pm 10 mg/100 ml)
- 0 ~ 1,99 % Prom (écart \pm 0,1 % Prom)

9. Fonctionnement - Réglage de l'unité

- Appuyez sur le bouton d'alimentation (1) pendant deux secondes. Dans la partie supérieure coin gauche, le mot "WAIT" apparaîtra suivi d'un décompte minuterie d'arrêt à partir de 15 s. Dans ces 15s. appuyer sur le bouton gauche (2) et sélectionnez la valeur souhaitée (g/L pour NL & BE).
- Après avoir sélectionné la valeur correcte, appuyez sur le bouton d'alimentation pour fixer la valeur.

10. Fonctionnement - Test d'alcoolémie

- Appuyez sur le bouton d'alimentation (1) pendant deux secondes. Dans la partie supérieure coin gauche, le mot "WAIT" apparaîtra suivi d'un décompte minuterie d'arrêt à partir de 15 s. C'est la phase d'échauffement.

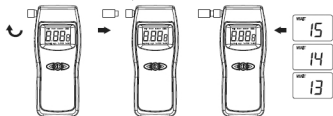

- Après l'échauffement, le mot "START" apparaît. Commencez à souffler dans les 7 secondes. Soufflez doucement et en continu pendant 4 à 5 secondes.
- Écran vert : Valeur inférieure à la valeur d'avertissement. Le dispositif émettra un bip indiquant un test négatif.
- Écran jaune : L'appareil devient jaune à une valeur comprise entre valeur d'avertissement et la valeur de danger. L'appareil émet deux bips avec un s. intervalle.
- Écran rouge : l'appareil devient rouge lorsque la valeur est supérieure que la valeur de danger. L'appareil émet un bip pendant 10 s.

Attention! Attendez au moins 3 minutes entre deux des mesures

11. Contacter

Courriel : info@northwallproducts.com
Wallcorp BV
Heikesveld 48 boîte 2
3910 Peau
Belgique