

Folding white cane for the blind



Folding white cane for the blind

User instructions

Please inspect all parts carefully for cracks/breaks prior to use.

This cane for the blind is designed to support persons who are visually impaired or blind. The white cane with red band is a tool to detect objects in the path of a user and identifying the user as blind or visually impaired person.

To open the folding white cane: remove aluminium cane from packaging, unfold the four sections and connect them inserting one into the other.

To fold the folding white cane: pull each section away from the adjacent section and fold.



- This product should not be used without proper instruction from a healthcare professional
- This product is not designed to support user weight

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Before use, check to make sure that nylon tip is not worn. Replace if necessary.

CARE INSTRUCTIONS

Clean with mild cleanser and water; dry thoroughly.

21.2cm



Opvouwbare blindegeleidestok

Gebruikersinstructies

Controleer voor gebruik alle onderdelen zorgvuldig op scheuren en breuken.

Deze blindegeleidestok is een hulpmiddel voor personen die slechtziend of blind zijn. De witte stok met rode streep zorgt voor tast en herkenning op straat of onderweg.

Uitklappen van de blindegeleidestok: haal de aluminium stok uit de verpakking, klap de vier buizen uit en schuif deze goed in elkaar.

Inklappen van de blindegeleidestok: trek de buizen uit elkaar en klap de stok weer op dezelfde manier in.



- Gebruik dit product uitsluitend na instructies van een zorgprofessional voor een correct gebruik
- Dit product is niet ontworpen om het gebruikersgewicht te dragen

ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

Controleer voor gebruik of de nylon dop niet versleten is. Vervang de dop indien nodig.

REINIGINGSVOORSCHRIFTEN

Reinig met een sopje en droog goed af.

ø12.7mm



Canne pliable pour non-voyants

Instructions pour l'utilisateur

Veillez inspecter soigneusement toutes les pièces pour vérifier qu'elles ne sont pas fissurées ou cassées avant de les utiliser.

Cette canne pour non-voyants est destinée aux personnes malvoyantes ou aveugles pour faciliter leurs déplacements. La canne blanche à bande rouge permet d'explorer l'espace devant soi et de signaler son handicap aux autres.

Pour déplier la canne : sortez la canne en aluminium de la housse, déployez les quatre tubes et serrez-les bien les uns dans les autres.

Pour replier la canne : défaites les tubes et repliez la canne de la même manière.



- Utilisez ce produit uniquement après avoir reçu des instructions d'un professionnel de santé pour un usage correct
- Ce produit n'a pas été conçu pour supporter le poids de l'utilisateur

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Avant toute utilisation, vérifiez que l'embout en nylon n'est pas usé. Remplacez-le si nécessaire.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE


Nettoyer avec un nettoyant doux et de l'eau ; sécher soigneusement.

ø15.5mm

PR



Valentine International Ltd. Taiwan
8th Floor, No. 149, Sec 2, Ta Tung Road
221 Hsichih District, New Taipei City
Taiwan R.O.C

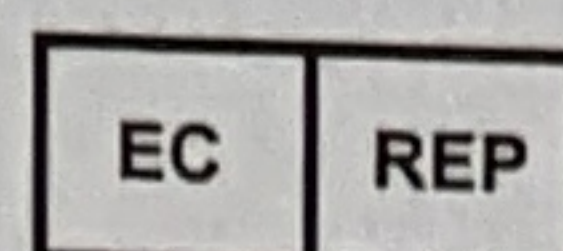

Y. Sung Handelsvertretung
Duesselthaler Str. 24
40211 Duesseldorf Germany



MADE IN
TAIWAN

Distributed by:
Able2 Europe B.V.
Koperslagerij 15
4762 AR Zevenbergen
The Netherlands
www.able2.nl

Aids to daily living