



FOREARM ROLLATOR



VP187F

Montage- und Wartungsanweisungen

Diese Datei kann unter www.aidapt.co.uk angesehen und als PDF heruntergeladen werden. Kunden mit Sehbehinderung können einen kostenlosen PDF-Reader (z. B. adobe.com/reader) verwenden, um den Text zu vergrößern und für eine bessere Lesbarkeit zu vergrößern.

EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Unterarmrollator von Aidapt entschieden haben.

Diese Anweisungen sollten sorgfältig gelesen und dem Benutzer des Produkts zum späteren Nachschlagen überlassen werden.

Bitte stellen Sie sicher, dass dieses Gerät von einer kompetenten Person installiert wird.

VP197F – Unterarmrollator **136 kg (21St) maximale Belastung**

Überschreiten Sie nicht die angegebene Gewichtsgrenze – es besteht Gefahr für Sie.

VERWENDUNGSZWECK

Der Rollator ist für den Einsatz auf ebenen Böden im Innen- und Außenbereich des Hauses geeignet und für Benutzer geeignet, die eine stabile Unterstützung der oberen Gliedmaßen und Hände benötigen. Ein Sitz und eine abnehmbare Tasche sind im Lieferumfang enthalten. Keine Taschen oder Körbe anderer Hersteller verwenden oder kombinieren. Bei normalem Gebrauch können Sie Ihren Rollator einfach zusammenklappen und verstauen, bis Sie ihn benötigen. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Finger nicht in der Nähe des Verriegelungsmechanismus sind, um das Risiko einer Einklemmung beim Schließen unseres Rollators zu verringern.

MERKMALE

- Benutzerfreundlicher Bremshebel mit Sperre
- Einfache Einstellung des Bremskabels
- Weiche Kunststoff-Vollräder
- Schwenkbares Vorderrad
- Klappbarer Verriegelungsmechanismus
- Benutzerfreundliche Höhenverstellung
- Ergonomische Handgriffe zur Reduzierung des Drucks
- Inklusive Tasche
- Unterarmstützen

MONTAGEANLEITUNGEN

1. Nehmen Sie den Gehwagen aus der Verpackung und prüfen Sie das Produkt auf sichtbare Anzeichen von Schäden, bevor Sie es verwenden/installieren. Wenn Sie Schäden feststellen oder einen Fehler vermuten, verwenden Sie es bitte nicht und wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.
2. Heben Sie die Griffe in die aufrechte Position (Abbildungen 2-3).
3. Verriegeln Sie den Rahmen auf beiden Seiten, indem Sie den Klappverriegelungshebel um 180° nach oben bewegen, sodass er nach oben zeigt (Abbildung 4-5).
4. Drehen Sie den Klapphebel, bis er im Kunststoffclip einrastet (Abbildung 6). Beachten Sie, dass der Klapphebel nur dann im Kunststoffclip einrastet, wenn sich der Klapphebel in der richtigen Position befindet.



5. Setzen Sie die Rechteckrohre mit den Armpolstern in den Rahmen ein (Abbildung 7) und auf die gewünschte Höhe einstellen. Arretieren Sie diese mit dem Rändelrad (Abbildung 8).



6. Öffnen Sie die Sitzstangenverriegelung und klappen Sie sie zusammen. Ziehen Sie das Gestell des Gehwagens nach außen, indem Sie beide Seiten des Sitzes nach unten drücken, bis es einrastet.

7. Montieren Sie die Bremse und den Griff. Setzen Sie die Baugruppe in die Armpolsterstange ein (Abbildung 9) und stellen Sie sie auf die gewünschte Tiefe ein. Verriegeln Sie diese, indem Sie die Sechskantschraube durch das Sechskantloch oben an der Stange direkt vor der Armlehne stecken. Legen Sie die gebogene Unterlegscheibe darüber. Der Bolzen an der Unterseite des befestigen und mit dem Rändelrad sichern (Abbildung 19).



8. Zum Einstellen des Abstands zwischen Lösen Sie den Bremsgriff und die Armlehne, entfernen Sie die Schraube vollständig und bringen Sie die Baugruppe in die gewünschte Position. Ersetzen Sie die Schraube wie in Schritt 7 beschrieben.

9. Befestigen Sie die Tasche mit den Klettverschlüssen an der Aufhängevorrichtung und am unteren Teil des Rahmens (Abbildungen 11-13).



10. Um den Gehhilfe zusammenzufalten, nehmen Sie die Tasche ab oder entleeren Sie sie vollständig und ziehen Sie den Gurtgriff am Sitz nach oben. Verwenden Sie die Sitzstangenverriegelung, um den Rollator in der zusammengeklappten Position zu sichern.





VERWENDUNG DER BREMSEN

1. Betätigen Sie immer beide Bremsen gleichzeitig.
2. Um den Gehwagen kurzzeitig abzubremsen oder anzuhalten, betätigen Sie die Bremsen, indem Sie gleichzeitig die Bremshebel ziehen, bis Sie die gewünschte Geschwindigkeit erreicht haben.
3. Um die Feststellbremsen zu arretieren, drücken Sie die Bremshebel nach vorne gleichzeitig, bis sie einrasten.
4. Um die Feststellbremse zu lösen, ziehen Sie die Hebel nach vorne, bis sie gelöst werden.
5. Stellen Sie sicher, dass die Bremskabel vor dem Rollator verlaufen sie sind nicht verdreht



EINSTELLEN DER BREMSEN

1. Wenn die Bremsen locker sind und nachgezogen werden müssen, kann dies der Fall sein Dies wird durch Anpassen **der MUTTER A** und **der SCHRAUBE B** am Bremshebel erreicht, wo das Kabel endet.
2. Abbildung 14 zeigt die Bremse im vollständig gelösten Zustand, wobei **SCHRAUBE B** vollständig an **MUTTER A** festgezogen ist.
3. Um das Bremskabel festzuziehen, lösen Sie **SCHRAUBE B + MUTTER A** und ziehen Sie es dann wieder fest. Ziehen Sie **die MUTTER A** fest. Dadurch wird das Bremskabel gespannt.
4. Dieser Vorgang kann wiederholt und umgekehrt werden, um die erforderliche Spannung im Kabel herzustellen.
5. Überprüfen Sie nach der Einstellung die Feststellbremsen, indem Sie die Bremshebel nach vorne drücken und sicherstellen, dass beide einrasten und das Rad bremsen.
6. Heben Sie bei ausgeschalteten Feststellbremsen die beiden gebremsten Räder vom Boden ab und stellen Sie sicher, dass sie sich beide frei bewegen können. Sollte eines der Räder an der Bremsfläche reiben, wiederholen Sie den Einstellvorgang nach Bedarf.
7. Es ist wichtig, die Bremseinstellungen regelmäßig zu überprüfen Berücksichtigen Sie den Verschleiß durch normalen Gebrauch. Die Bremsen sollten es sein mindestens einmal im Monat und vor einem Benutzerwechsel überprüft werden.
8. **Weitere Einstellung:** Wenn die Bremsen am Griffende des Kabels vollständig eingestellt wurden, kann eine zusätzliche Einstellung am Radende vorgenommen werden: Halten Sie die **MUTTER D** mit einem Schraubenschlüssel oder einer Zange fest und lösen Sie **die SCHRAUBE C** mit einem Inbusschlüssel. Dadurch wird der Griff am Bremskabel gelöst. Ziehen Sie das Bremskabel nach unten, um es zu spannen, und sichern Sie es durch erneutes Anziehen **der SCHRAUBE C**.

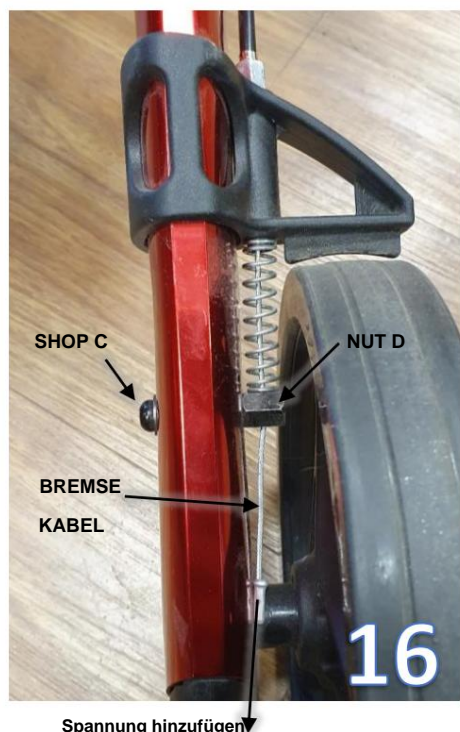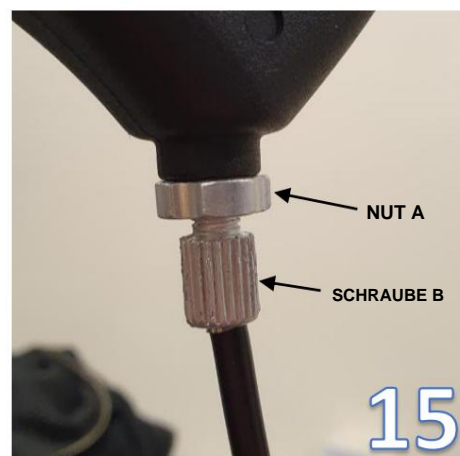

REINIGUNG

Alle Produktkomponenten sind aus hochwertigen Materialien gefertigt. Es ist jedoch sehr wichtig, dass Sie Ihren Rollator nur mit einem nicht scheuernden Reiniger oder einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch reinigen. Vermeiden Sie die Verwendung von Kalkentfernern. Scheuermittel oder Scheuerschwämme können Ihr Produkt ernsthaft und irreparabel beschädigen.

PFLEGE, WARTUNG UND IHRE VERPFLICHTUNG

- Benutzen Sie Ihren Aidapt-Rollator nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich als Gehilfe.
Es ist vorgesehen, dass Ihr Rollator nur auf normalen Gehwegen oder zu Hause verwendet wird. Es sollte nicht auf unebenem Gelände oder auf Oberflächen mit Schlaglöchern verwendet werden. Die Verwendung Ihres Rollators auf diesen Oberflächen kann Ihre Sicherheit ernsthaft gefährden und Ihren Rollator irreparabel beschädigen.
- Halten Sie Ihren Aidapt-Rollator sauber, indem Sie ihn mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel abwischen. Nicht Verwenden Sie auf keinen Fall einen scheuernden oder lösungsmittelhaltigen Reiniger, da dieser den Rollator beschädigt und Ihre Garantie erlischt.
- Wischen Sie alle Oberflächen mit einem trockenen Tuch ab und verwenden Sie für alle Metalle ein wasserdispersierendes Mittel wie WD40 Gelenke.
- Überprüfen Sie, ob alle Räder und der Klappmechanismus ordnungsgemäß funktionieren und sich alle Räder frei bewegen lassen und ohne Behinderung.
Ziehen Sie Ihren Aidapt-Rollator sofort zurück, wenn sich eines der Räder schwer drehen lässt oder wenn Sie einen Schaden oder einen anderen Fehler vermuten.
- Monatliche Kontrollen: Überprüfen Sie, ob die seitlichen Verriegelungshebel richtig befestigt sind (Abbildung 6, Seite 2). Überprüfen den Anpassung an Ihre Bremsen (Abbildungen 14-15, Seite 4).
- Montieren Sie keine Teile oder Zubehörteile an Ihren Aidapt-Rollator, die von einem anderen Unternehmen hergestellt wurden. Machen Dies führt zum Erlöschen Ihrer Garantie und kann Ihre Sicherheit ernsthaft gefährden.
- Wir empfehlen Ihnen, Ihren Rollator täglich einer Sichtkontrolle zu unterziehen. Wir empfehlen Ihnen jedoch Bei regelmäßiger Nutzung sollte Ihr Rollator alle drei Monate oder weniger gewartet werden.
Bitte überprüfen Sie Ihren Rollator regelmäßig auf Anzeichen von Schäden und wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Lieferanten.

TECHNISCHE INFORMATION

Breite:	685mm	Verstellbare Höhe der Armlehnen: 1020–1140 mm (7 Stufen).
Tiefe:	760 mm	Armlehne – Griffabstand: 170 mm 70–190 mm (5 Stufen)
Höhe:	1125 – 1180 mm	Armlehnenlänge:
Nettogewicht: 9,5 kg.		Sitzbreite: 460mm
Maximale Taschenlast: 10 kg		Sitztiefe: 230mm

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen dürfen nicht als Teil einer vertraglichen oder sonstigen Verpflichtung von Aidapt Bathrooms Limited oder seinen Vertretern oder Tochtergesellschaften angesehen werden oder begründen diese. Es wird keine Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Informationen gegeben. Bitte lassen Sie Ihren gesunden Menschenverstand walten und gehen Sie bei der Verwendung dieses Produkts keine unnötigen Risiken ein, da Sie als Benutzer die Verantwortung für die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts übernehmen müssen.

SERVICE-GARANTIE

Aidapt Bathrooms Ltd garantiert für einen Zeitraum von einem Jahr, dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Sollte dieses Produkt unter anderen als den empfohlenen Bedingungen betrieben werden oder Versuche unternommen werden, das Produkt zu warten oder zu modifizieren, erlischt die Garantie. Das von Ihnen gekaufte Produkt kann geringfügig von den Abbildungen abweichen. Diese Garantie gilt zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten und beeinträchtigt diese nicht. Unsere Garantie wird von unseren Händlern verwaltet. Wenn Ihr Produkt beschädigt ankommt, müssen Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie es gekauft haben. Die Kontaktdaten des Händlers finden Sie auf der Rechnung, die mit dem Produkt geliefert wurde, oder in der E-Mail, die Sie bei der Bestellung erhalten haben. Wenden Sie sich nicht an Aidapt Bathrooms Ltd., da nur Ihr Händler einen Ersatz oder eine Rückerstattung veranlassen kann. Sollte Ihr Produkt innerhalb der Garantiezeit ausfallen, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie es gekauft haben.

Wenn Sie Ihr Produkt erhalten haben und technische Hilfe benötigen, rufen Sie bitte unseren Helpdesk unter 01744 745 000 an.
Eine Kopie der Gebrauchsanweisung können Sie von unserer Website herunterladen.