

my  
nails

# Miconail® Patch *forte*

## IT **T** Trattamento Anti-Micosi in cerotti


**MODO D'USO:** 1. Immergere in acqua tiepida l'unghia con la micosi per circa 10 minuti. Asciugare con cura. 2. Rimuovere un dischetto dal suo supporto e applicarlo direttamente sull'unghia. Se il dischetto è più grande dell'unghia micotica, ridurlo della giusta misura di modo da coprire solo la superficie da trattare. Il dischetto può essere facilmente ritagliato. 3. Se necessario usare il cerotto protettivo per fissare e proteggere il dischetto. Per unghie piccole tagliare il cerotto a metà. 4. Dopo aver fissato le prime due alette, ripiegare sotto l'alluce le altre due alette. 5. Richiudere il cerotto piegando le alette sopra l'alluce. 6. Sostituire il dischetto e il cerotto ogni giorno per un trattamento da 1 a 3 settimane e comunque fino a completa rimozione della micosi.

**AVVERTENZE:** Non utilizzare per periodi superiori a quelli indicati. Lunghi trattamenti potrebbero causare fenomeni di sensibilizzazione; in questo caso interrompere il trattamento. Non applicare sulle mucose e sulla cute. Non applicare su lesioni. Non utilizzare se si è allergici a uno dei componenti. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Uso esterno. Non riutilizzare. Conservare in luogo fresco e asciutto.

## ES **T** Tratamiento Antimicótico en parches

**MODO DE EMPLEO:** 1. Sumergir la uña con hongos en agua tibia durante unos 10 minutos. Secar bien. 2. Retirar un disco de la lámina y aplicarlo directamente en la uña. Si el disco es más grande que la uña con hongos, cortarlo a la medida adecuada para cubrir solo la superficie a tratar. El disco se recorta fácilmente. 3. De ser necesario, utilizar el parche protector para sujetar y proteger el disco. Para uñas pequeñas, cortar el parche por la mitad. 4. Una vez fijadas las dos primeras aletas, plegar debajo del dedo gordo las otras dos aletas. 5. Cerrar el parche plegando las aletas por encima del dedo gordo. 6. Cambiar el disco y el parche todos los días durante el tratamiento que dura de 1 a 3 semanas y hasta haber eliminado por completo la micosis.

**ADVERTENCIAS:** No utilizar durante un período más largo al indicado. Los tratamientos largos pueden causar sensibilización; en tal caso interrumpir el tratamiento. No aplicar ni en las mucosas ni en la piel. No aplicar sobre heridas. No utilizar en caso de alergia a alguno de sus componentes. Mantener fuera del alcance de los niños. Uso externo. No reutilizar. Conservar en un lugar fresco y seco.

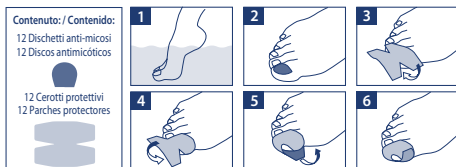

Distribuito da: / Distribuido por: / Distribuí par: / Distributed by:  
Planet Pharma srl Cinesello Balsamo (MI) - Italy [www.planetpharmaitalia.it](http://www.planetpharmaitalia.it)



DO. TOBELL s.r.l. Via dell'artigianato, 32 - 36030 Sarcedo (VI) - Italy

my  
nails

# Miconail® Patch *forte*

## FR Soin Anti-mycose en pansements


**MODE D'EMPLOI :** 1. Plonger dans l'eau tiède l'ongle avec la mycose pendant environ 10 minutes. Sécher soigneusement. 2. Retirer le disque de son support et l'appliquer directement sur l'ongle. Si le disque est plus grand que l'ongle fongique, il doit être réduit à la bonne taille afin de ne couvrir que la surface à traiter. Le disque peut être facilement découpé. 3. Si nécessaire, utiliser le pansement de protection pour fixer et protéger le disque. Pour des petits ongles, découper le pansement à moitié. 4. Après avoir fixé les deux premières ailettes, replier les deux autres ailettes sous le gros orteil. 5. Refermer le pansement en pliant les ailettes sur le gros orteil. 6. Remplacer le disque et le pansement tous les jours pour un soin de 1 à 3 semaines, et toutefois jusqu'à la disparition complète de la mycose.

**AVERTISSEMENTS :** Ne pas utiliser pendant des périodes supérieures à celles indiquées. De longs soins pourraient provoquer des phénomènes de sensibilisation ; dans ce cas, arrêter le soin. Ne pas appliquer sur les muqueuses et sur la peau. Ne pas appliquer sur des lésions. Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants. Tenir hors de portée des enfants. Usage externe. Ne pas réutiliser. Conserver dans un endroit frais et sec.

## EN Patch Treatment for Fungal Nails

**USE:** 1. Soak the fungal nail in warm water for about 10 minutes. Dry thoroughly. 2. Peel off a patch from the backing sheet and apply to the nail. If the patch is larger than the fungal nail, reduce it to the right size to cover only the affected surface. The patch can be cut easily. 3. If necessary, use the protective plaster to fix and protect the patch. For small nails, cut the patch in half. 4. After fixing the first two wings, fold the other two wings under the big toe. 5. Wrap the patch around the nail by folding its wings above the big toe. 6. Replace the patch and plaster every day for 1 to 3 weeks of treatment and in any case until the fungal infection has completely healed.

**WARNINGS:** Do not use for longer than recommended. Long treatments may sensitise the skin; in this case, treatment should be discontinued. Do not apply to mucous membranes or to the skin. Do not apply to lesions. Do not use if you are allergic to any of the components. Keep out of reach of children. For external use. Do not reuse. Store in a cool, dry place.

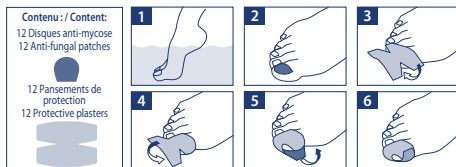

**REF**  
208V24DV



Dispositivo Medico  
Producto Sanitario  
Dispositif Médical  
Medical Device