

beurer

FM 150 Pro



NL Adertrainer
Gebruiksaanwijzing



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

WAARSCHUWING

- Het apparaat is alleen bestemd voor privégebruik, niet voor commercieel gebruik.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, maar alleen als zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of niet goed functioneert. Neem in deze gevallen contact op met de klantenservice.
- Reparaties mogen alleen door de klantenservice of geautoriseerde dealers worden uitgevoerd.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het worden verwijderd. Als het netsnoer niet van het apparaat kan worden losgekoppeld, moet het volledige apparaat worden verwijderd.
- U mag het apparaat in geen geval openen of zelf repareren. Wanneer u dit toch doet, kan een storingsvrije werking niet langer worden gegarandeerd. Wanneer u deze instructie niet in acht neemt, vervalt de garantie.

Geachte klant,

We zijn blij dat u hebt gekozen voor een product uit ons assortiment. Beurer staat voor hoogwaardige en grondig gecontroleerde kwaliteitsproducten op het gebied van warmte, gewicht, bloeddruk, lichaamstemperatuur, pols-slag, zachte therapie, massage, beauty, baby en lucht.

Met vriendelijke groet,
Uw Beurer-team

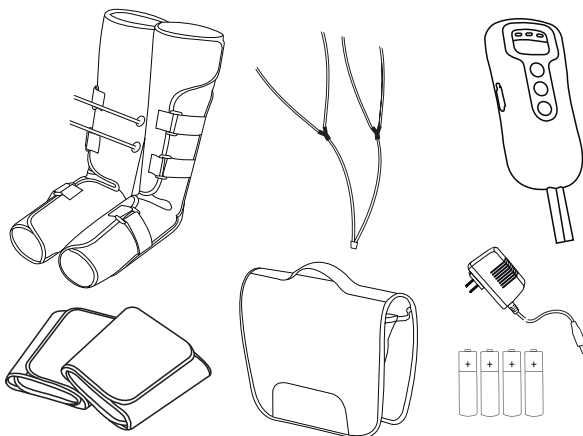
Inhoudsopgave

1. Omvang van de levering	3	8.1 Gebruik starten	8
2. Verklaring van de symbolen	3	8.2 Gebruik beëindigen	10
3. Kennismaking	4	9. Reiniging en onderhoud	11
4. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen	4	9.1 Manchetten reinigen	11
5. Voorgescreven gebruik	7	9.2 Bewaren	11
6. Beschrijving van het apparaat	7	10. Wat te doen bij problemen	11
7. Ingebruikname	7	11. Verwijdering	11
7.1 Ingebruikname met batterijen	8	12. Technische gegevens	11
7.2 Ingebruikname met netvoeding	8	13. Netvoeding	12
8. Gebruik	8	14. Garantie/service	12

1. Omvang van de levering

Controleer of de buitenkant van de verpakking intact is en of alle onderdelen aanwezig zijn. Alvorens de adertrainer te gebruiken, moet worden gecontroleerd of de adertrainer en de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn en moet al het verpakkingsmateriaal worden verwijderd. Wij adviseren u om het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de dealer of met de betreffende servicehotline.



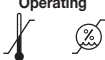
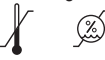

- 1 x beenmanchet rechts
- 1 x beenmanchet links
- 1 x bovenbeenmanchet rechts
- 1 x bovenbeenmanchet links
- 1 x luchtslangen
- 1 x handschakelaar
- 1 x opbergtas
- 1 x AA-batterijen (1,5 V)
- 1 x netvoeding
- 1 x deze gebruiksaanwijzing



2. Verklaring van de symbolen

In deze gebruiksaanwijzing en op het apparaat worden de volgende symbolen gebruikt:

	WAARSCHUWING Waarschuwt voor situaties met verwondingsrisico's of gevaar voor uw gezondheid.		Transportation Toegestane temperatuur en luchtvochtigheid bij transport
	LET OP Geeft aan dat bepaalde handelingen mogelijk schade veroorzaken aan het apparaat of de toebehoren.		Adapter
	Aanwijzing Verwijst naar belangrijke informatie.	IP 21	Beschermd tegen voorwerpen $\geq 12,5$ mm en tegen verticaal neervallende druppels
	Gebruiksaanwijzing in acht nemen		Gelijkstroom
	Fabrikant		Serienummer
			Laagfrequente elektromagnetische straling

	Veiligheidsklasse II
	Toegepast deel type BF
Operating 	Toegestane temperatuur en luchtvochtigheid bij gebruik
Storage 	Toegestane temperatuur en luchtvochtigheid bij opslag
	Verpakking overeenkomstig de milieueisen verwijderen.

	Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis
	Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
EAC	Certificeringssymbool voor producten, die naar de Russische federatie en naar de landen van het GOS worden geëxporteerd.
CE ₀₁₉₇	Met de CE-markering wordt aangetoond dat het apparaat voldoet aan de fundamentele eisen van de richtlijn 93/42/EEC voor medische hulpmiddelen.

3. Kennismaking

U kent het wel: na een lange, vermoeiende dag zijn uw benen zwaar en gezwollen. Dat komt doordat we niet genoeg bewegen of doordat we onze benen gedurende langere tijd eenzijdig belasten (bijvoorbeeld door te lang achter de computer te zitten, langeafstandsvluchten of door lang te staan).

Om de genoemde symptomen preventief tegen te gaan, biedt de adertrainer een revitaliserende compressiemassage. Deze compressiemassage werkt als volgt: bij zwakke of zieke aderen sluiten de aderklappen niet. Het bloed zakt naar beneden. Door de druk van de compressiemassage wordt de werking van de aderklappen weer hersteld. De bloeddorstrooming naar het hart wordt gestimuleerd.

De revitaliserende compressiemassage wordt gegeven via twee beenmanchetten en twee bovenbeenmanchetten met ingebouwde groter en kleiner wordende luchtkussens die de bloedsomloop stimuleren. Dankzij de traploos instelbare massage-/luchtdrukintensiteit kan de adertrainer aan uw persoonlijke wensen worden aangepast. Door het beurtelings oppompen van de manchetten kunnen zwellingen en zware benen worden verminderd. Ook verkrampde voeten, kuiten en bovenbenen worden verlicht. Spataderen, klachten als gevolg van spataderen en bezemrijns kunnen worden voorkomen. Bovendien wordt de veneuze bloedcirculatie verbeterd door de werking van de aderen te herstellen.

De manchetten hebben een aangename pasvorm, doordat ze met de klittenbandsluitingen individueel aan het been kunnen worden aangepast. Door de compacte constructie en de meegeleverde draagtas kan de adertrainer zowel thuis als onderweg worden gebruikt.

Aanwijzing

De adertrainer kan na het reinigen van de manchetten opnieuw worden gebruikt.

4. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen

Het niet opvolgen van de volgende aanwijzingen kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade.

WAARSCHUWING

Houd verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen. Kinderen kunnen hierin stikken.

WAARSCHUWING

Gebruik de adertrainer **niet**

- bij door ziekte veroorzaakte veranderingen aan of wonden op de benen (bijv. broze botten, open wonden enz.),
- tijdens de zwangerschap,
- trwijl u slaapt,

- bij dieren,
- bij activiteiten waarbij een onvoorspelbare reactie gevaar kan veroorzaken,
- na de inname van substanties die het waarnemingsvermogen verminderen (bijv. pijnstillende medicijnen of alcohol),
- langer dan 30 minuten (gevaar voor oververhitting) en laat de adertrainer ten minste 20 minuten afkoelen voordat u deze opnieuw gebruikt,
- op acute patiënten of personen die een medische behandeling ondergaan.

Raadpleeg uw arts wanneer u twijfelt of de adertrainer geschikt is voor u.

Raadpleeg uw arts voordat u de adertrainer gebruikt, vooral:

- als u aan een ernstige ziekte lijdt of een operatie aan uw benen hebt ondergaan,
- als u een pacemaker, implantaten of andere hulpmiddelen hebt,
- als u (mogelijk) trombose hebt,
- als u diabetes hebt,
- bij pijnklachten zonder duidelijke oorzaak,
- als u last hebt van acute ontstekingen,
- als u last hebt van hartprestatiestoornissen met vocht in de benen,
- als u een gevorderde arteriële aandoening hebt,
- bij longoedeem,
- als u een hoge bloeddruk hebt,
- als u kwaadaardige tumoren hebt.



WAARSCHUWING

- Dit product mag niet samen met apparaten gebruikt worden die met een hoge frequentie werken. Dit kan leiden tot brandwonden of materiële schade.
- Biocompatibiliteit. Aan geen van de materialen waarmee de patiënt of gebruiker in aanraking komt zijn onaanvaardbare risico's verbonden. Onze producten zijn gemaakt van veelgebruikte materialen.
- Raak de gelijkspanningsnetadapter niet aan om elektrische schokken te vermijden.
- Leg de handschakelaar tijdens het gebruik naast het lichaam.
- Ga voorzichtig met het product om zodat het niet kan vallen en geen letsel kan veroorzaken.
- Personen op wie het volgende van toepassing is, dienen voor gebruik van dit apparaat een arts te raadplegen: zwangere vrouwen, menstruerende vrouwen, personen met een gevoelige huid, personen met hartaandoeningen, personen met een ongewone bloeddruk, personen met kwaadaardige tumoren, personen met cerebrovasculaire aandoeningen, personen met acute aandoeningen of personen die onder behandeling van een arts zijn.
- Personen met gevoelsstoornissen van de huid of mensen die ongevoelig zijn voor druk, mogen het product niet gebruiken.
- Gebruik dit product niet tijdens het douchen of slapen.
- Patiënten met hersenbloedingen: gebruik het product niet bij patiënten die zich in een instabiele toestand bevinden. Patiënten met secundaire aandoeningen mogen dit product onder toezicht van een arts gebruiken.
- Patiënten met etterende ontstekingen, acute sepsis en continue hyperthermie mogen dit product niet gebruiken.
- Patiënten met acute cardiovasculaire en cerebrovasculaire aandoeningen mogen dit product niet gebruiken.
- Gebruik dit product uitsluitend op de benen en voeten. Patiënten met huidaandoeningen op de benen en voeten mogen dit product niet gebruiken.
- U mag tijdens het gebruik van dit product niet lopen of bewegen, omdat dit tot pijn bij de patiënt kan leiden. Tevens kan het product hierdoor beschadigd raken.
- Gebruik dit product niet bij kinderen of personen met bewustzijnsstoornissen.
- Als het product pijn veroorzaakt bij de gebruiker, dient het gebruik ervan onmiddellijk gestopt en een arts geraadpleegd te worden.
- Gebruik dit apparaat niet met andere medische elektronische apparaten, bijv. pacemakers, kunstmatige hart-longmachines of andere levensondersteunende elektronische apparaten, electrocardiografen en overige medische elektronische apparatuur. Het negeren hiervan kan gevaren met zich meebrengen.
- Haal dit product niet uit elkaar en repareer of wijzig het niet om storingen of elektrische schokken te vermijden.
- Bij noodgevallen dient het product zo geplaatst te worden dat de stekker eenvoudig opzij geschoven kan worden.

LET OP

- Als de klant dit product samen met chirurgische apparaten gebruikt die met een hoge frequentie werken, kan er schade aan het product ontstaan. Als het product in de buurt (1 m) van therapeutische kortegolf- of microgolf-apparatuur wordt gebruikt, werkt het product mogelijk niet betrouwbaar.
- Het aanbrengen van wijzigingen aan dit apparaat zonder toestemming van de fabrikant is verboden.
- Koppel het product na gebruik of als het product niet gebruikt wordt los van het stroomnet.
- Gebruik dit product niet op locaties met hoge temperaturen, ontbrandingsgevaar, elektromagnetische straling en een hoge luchtvochtigheid.

WAARSCHUWING: elektrische schokken

Net als elk elektrisch apparaat moet ook deze adertrainer voorzichtig en bedachtzaam worden gebruikt om elektrische schokken te voorkomen.

Gebruik de adertrainer daarom

- alleen met de meegeleverde netvoeding en de op het typeplaatje aangegeven netspanning,
- nooit als de adertrainer of de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn,
- niet tijdens onweer.

Schakel de adertrainer in geval van een defect of storing onmiddellijk uit en trek de stekker van de adertrainer uit het stopcontact. Trek niet aan het netsnoer of aan het apparaat om de stekker uit het stopcontact te halen. U mag het apparaat niet aan het netsnoer optillen of dragen. Houd de snoeren uit de buurt van warme oppervlakken. Snoeren mogen niet bekneld raken, knikken of verdraaid worden. Prik niet met naalden of scherpe voorwerpen in het apparaat. Open de handschakelaar in geen geval.

Zorg ervoor dat het apparaat, de handschakelaar en het netsnoer niet in aanraking komen met water, damp of andere vloeistoffen.

Gebruik het apparaat daarom alleen in droge binnenruimten (bijv. NOOIT in de badkuip, sauna).

Raak nooit een adertrainer aan die in het water is gevallen. Trek onmiddellijk de netvoeding uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet als de adertrainer of de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn. Stoot niet tegen het apparaat en laat het niet vallen.

WAARSCHUWING: reparatie

Reparaties aan elektrische apparatuur mogen alleen worden uitgevoerd door professionals. Onjuiste reparaties kunnen leiden tot aanzienlijke gevaren voor de gebruiker. Ga voor reparaties naar een servicepunt of een erkend verkooppunt.

WAARSCHUWING: brandgevaar

Oneigenlijk gebruik of het negeren van de instructies in deze gebruiksaanwijzing kan brand veroorzaken!

Gebruik het apparaat daarom

- nooit onder een afdekking, zoals een deken of kussen,
- nooit in de buurt van benzine of andere licht ontvlambare stoffen.

WAARSCHUWING: batterijen

- Als vloeistof uit de batterijcel in aanraking komt met de huid of de ogen, moet u de betreffende plek met water spoelen en een arts raadplegen.
- Gevaar voor inslikken! Kleine kinderen kunnen batterijen inslikken, met verstikking als gevolg. Bewaar batterijen daarom buiten het bereik van kleine kinderen!
- Neem de aanduiding van de polariteit (plus (+) en min (-)) in acht.
- Als er een batterij is gaan lekken, moet u veiligheidshandschoenen aantrekken en het batterijvak met een droge doek reinigen.
- Explosiegevaar! Werp batterijen niet in vuur.
- Haal de batterijen uit het batterijvak als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Vervang altijd alle batterijen tegelijk.
- Gebruik geen oplaadbare batterijen!
- Haal batterijen niet uit elkaar, open ze niet en hak ze niet in kleine stukken.

LET OP: gebruik

Na elk gebruik en voor iedere reiniging moet het apparaat worden uitgeschakeld en vervolgens moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken.

- Zorg ervoor dat de luchtslangen niet geknikt zijn.
- Ga niet met het volle gewicht op de beenmanchetten zitten of staan. Plaats geen voorwerpen op de beenmanchetten of de handschakelaar.
- Bescherm het apparaat tegen hoge temperaturen.

5. Voorgeschreven gebruik

Gebruik de adertrainer uitsluitend op de benen van mensen. De adertrainer is uitsluitend bestemd voor **privé-gebruik**. De adertrainer is **NIET** bestemd voor commercieel gebruik. Gebruik van het apparaat is geen vervanging voor een medische behandeling.

WAARSCHUWING

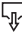

Gebruik het apparaat uitsluitend voor het doel waarvoor het is ontwikkeld en uitsluitend op de in deze gebruiksaanwijzing aangegeven wijze. Elk onjuist gebruik kan gevaarlijk zijn! De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door onjuist of verkeerd gebruik.

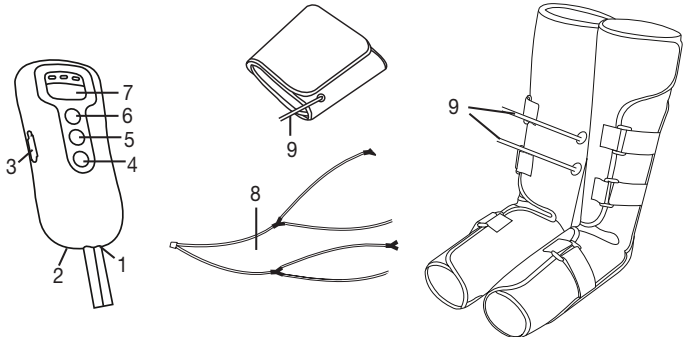
Aanwijzingen voor gebruik

- Ter verbetering van de veneuze bloedcirculatie.
- Ter voorkoming van spataderen en bezemrijs.
- Ter vermindering van zwellingen en zware benen.
- Ter behandeling van spierpijn door sport.
- Ter behandeling van sportblessures, zoals kneuzingen en verstuikingen.
- Ter behandeling van bloedingstoringen.

Plaats van gebruik: in gesloten ruimten

6. Beschrijving van het apparaat

1. Luchtinlaat ("in")
2. Stroomaansluiting
3. Luchtuitlaat 
4. AAN/UIT-toets
5. Luchtuitlaat-toets 
6. Stop-toets*
7. Timer-toets 10/20/30 minuten
8. Luchtslangen
9. Aansluiting voor luchtslangen



(* De stop-toets onderbreekt het oppompen bij onaangename en hoge druk)

7. Ingebruikname

- Verwijder de verpakking.
- Verwijder de grijze bescherming van de klittenbandsluitingen van de been- en bovenbeenmanchetten.
- Controleer het apparaat, de netvoeding en het netsnoer op beschadigingen.
- U kunt de adertrainer naar keuze met batterijen (4 AA-alkalinebatterijen van 1,5 V (type LR06)) of met de meegeleverde netvoeding gebruiken.

Aanwijzing

U kunt het apparaat met de meegeleverde netadapter of op batterijen gebruiken. Vanwege de duurzaamheid adviseren wij u de netadapter te gebruiken.

7.1 Ingebruikname met batterijen

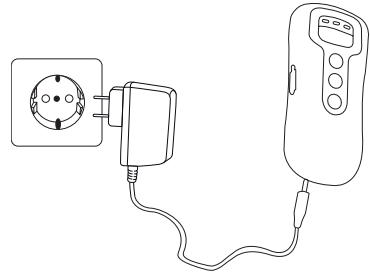
1. Open het batterijvak aan de achterzijde van de handschakelaar.
2. Plaats vier AA-batterijen van 1,5 V (alkaline, type LR06) in het batterijvak. Let goed op dat de batterijen met de juiste polariteit worden geplaatst, zoals aangeduid. Let op de tekening in het batterijvak. Gebruik geen op-laadbare batterijen.
3. Sluit het deksel van het batterijvak aan de achterzijde van de handschakelaar weer tot het hoor- en merkbaar vastklikt.

7.2 Ingebruikname met netvoeding

Aanwijzing

Voordat u het apparaat met de netvoeding gebruikt, moet u ervoor zorgen dat er geen batterijen in de handschakelaar zitten.

1. Sluit de netvoeding zoals weergegeven aan op de hand-schakelaar.
2. Steek het andere uiteinde van de netvoeding in een geschikt stopcontact.
3. De adertrainer is nu klaar voor gebruik.



8. Gebruik

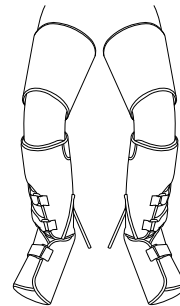
8.1 Gebruik starten

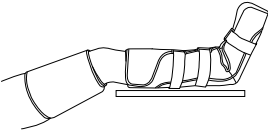
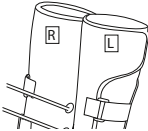
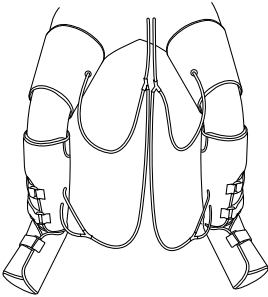
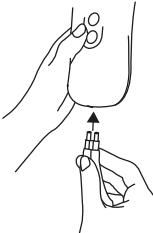
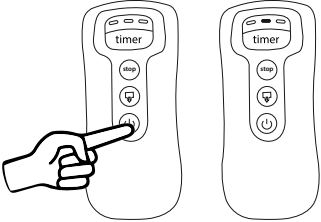

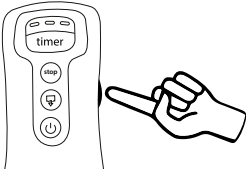
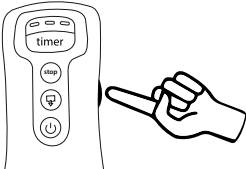
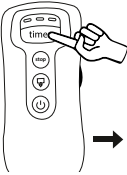
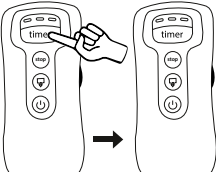
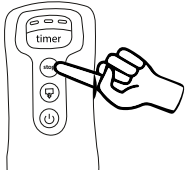
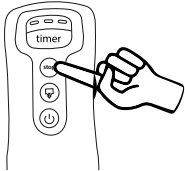
LET OP:

- Open de klittenbandsluiting van de manchetten niet als het apparaat in gebruik is, omdat de werking van het apparaat hierdoor kan worden beïnvloed. Open de klittenbandsluiting van de manchetten alleen als de druk op uw benen tijdens het gebruik onaangenaam aanvoelt. U kunt in dat geval ook op de stop-toets drukken.
- Zorg ervoor dat de luchtslangen tijdens het gebruik niet worden geknikt.
- Zorg ervoor dat de manchetten tijdens het gebruik niet worden bedekt door dekens of andere voorwerpen.

1. Volg de aanwijzingen uit het hoofdstuk "Ingebruikname" op.

2. Breng de been- en bovenbeenmanchetten achtereenvolgens zoals weergegeven strak om het bovenbeen, het onderbeen en de voet aan (bloot been of met nauwsluitende kleding, zoals een panty). De manchetten moeten zo strak worden aangebracht dat er nog twee vingers onder de manchetten passen. Als de manchetten voor uw gevoel te strak zitten, brengt u de manchetten zo aan dat er nog een platte hand onder de manchetten past.



<p>3. Om optimale resultaten te behalen, houdt u uw benen tijdens het gebruik iets gebogen/omhoog, zodat het bloed beter kan circuleren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De been- en de bovenbeenmanchet voor het linkerbeen zijn aan de binnenzijde gemarkeerd met een "L". • De been- en de bovenbeenmanchet voor het rechterbeen zijn aan de binnenzijde gemarkeerd met een "R". 		
<p>4. Sluit de luchtslangen aan op de manchetten. Zorg ervoor dat de luchtslangen goed vastzitten en niet los kunnen komen.</p> <p>Sluit het andere uiteinde van de luchtslang aan op de luchtinlaat ("in") van de handschakelaar.</p>		
<p>5. Druk op de AAN/UIT-toets om de adertrainer in te schakelen. Zodra het apparaat is ingeschakeld, brandt de timer-led voor een gebruiksduur van 20 minuten.</p> <p>6. Houd er rekening mee dat de timer opnieuw begint te lopen als u de timerinstellingen wijzigt.</p> <p>⚠ LET OP</p> <p>Wij adviseren u het apparaat 20 tot 30 minuten te gebruiken. Als u het apparaat langer gebruikt, kunt u last krijgen van gevoelloosheid in de benen en kan het apparaat oververhit raken.</p>		
<p>7. Stel met de luchtdrukregelaar de gewenste intensiteit in. Begin met de laagste stand om langzaam aan de massage te kunnen wennen.</p> <p>Voor een optimaal resultaat moet de ingestelde intensiteit hoog zijn, maar evengoed aangenaam aanvoelen.</p>		
<p>8. Druk op de "Timer"-toets om tussen drie tijdsinstellingen te wisselen – 10 minuten, 20 minuten en 30 minuten. De standaardwaarde is 20 minuten. Als de resterende tijd 5 minuten bedraagt, knippert de weergave van de actuele tijd langzaam; als de resterende tijd 1 minuut bedraagt, knippert de weergave van de actuele tijd snel.</p>		
<p>9. Druk op de "Stop"-toets om de behandeling te onderbreken als de druk bij het gebruik onaangenaam of te hoog is.</p>		

Aanwijzing

De adertrainer start nu achtereenvolgens en afwisselend met het masseren van de benen. De benen worden nooit tegelijkertijd gemasseerd. Dit betreft geen storing van het apparaat.

Het apparaat heeft een automatische uitschakelfunctie, die is ingesteld op een maximale gebruiksduur van 30 minuten.

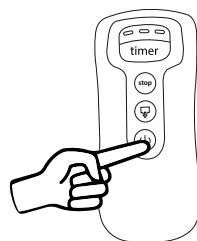
Als de batterijen bijna leeg zijn, gaan de timer-leds van rechts naar links knipperen. Het apparaat wordt na enkele seconden uitgeschakeld en bevindt zich nu gedurende 30 seconden in de stand-bymodus. Gedurende deze tijd branden alle 3 de timer-leds.

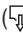
8.2 Gebruik beëindigen

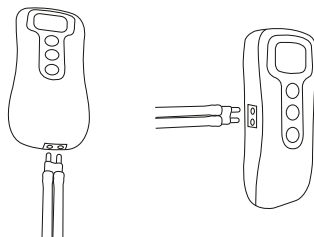
Om het gebruik te beëindigen, moet het apparaat eerst worden uitgeschakeld en vervolgens moet de lucht uit de manchetten worden gelaten.

Ga daarvoor als volgt te werk:

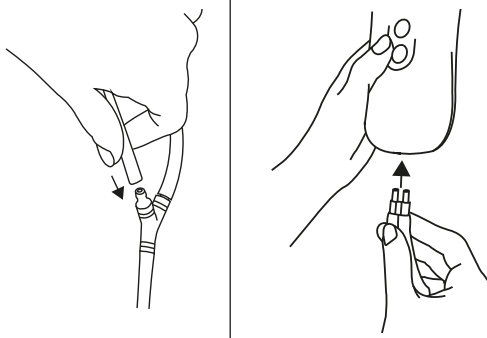
1. Druk op de AAN/UIT-toets op de handschakelaar om de adertrainer uit te schakelen. De timer-led van de ingestelde gebruiksduur gaat uit. Het apparaat bevindt zich nu in een stand-bymodus van 30 seconden. Gedurende deze tijd branden alle 3 de timer-leds.



2. Trek binnen de 30 seconden van de stand-bymodus de luchtslang uit de handschakelaar, steek de luchtslang in de luchtuitlaat () aan de zijkant van de handschakelaar en druk op de luchtuitlaat-toets [5]. Alle 3 de timer-leds knipperen tijdens deze handelingen. Als de procedure is beëindigd, gaan de leds weer uit.



3. Open nu de klittenbandsluitingen en verwijder de manchetten van uw benen. Trek de luchtslangen aan het Y-verbindingstuk uit de beenmanchetten, zodat de korte eindstukken van de slangen zoals weergegeven op de beenmanchetten blijven zitten. Trek de luchtslang ook uit het verbindingstuk dat direct op de bovenbeenmanchetten zit. Als u het apparaat met de netvoeding hebt gebruikt, trekt u de netvoeding uit het stopcontact en uit de handschakelaar.



9. Reiniging en onderhoud

9.1 Manchetten reinigen

- Schakel het apparaat voor elke reiniging uit en verwijder de luchtslangen (behalve de korte eindstukken van de slangen) uit de manchetten en de handschakelaar.
- Reinig de manchetten met een zachte, licht bevochtigde doek. Gebruik voor de reiniging geen chemische reinigings- of schuurmiddelen.
- Gebruik de manchetten pas weer als deze volledig droog zijn.

9.2 Bewaren

- Haal de batterijen uit het handapparaat als u het apparaat langere tijd niet gebruikt. Lekkende batterijen kunnen schade aan het apparaat veroorzaken.
- Zorg ervoor dat de luchtslangen en de manchetten niet scherp worden geknikt.
- Bewaar het apparaat in de originele verpakking op een koele, goed geventileerde plek.

10. Wat te doen bij problemen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De manchetten worden niet opgepompt.	De batterijen zijn leeg.	Vervang de batterijen in de handschakelaar.
	De netvoeding is niet aangesloten.	Steek de netvoeding in een geschikt stopcontact.
	De luchtslangen zijn niet correct aangesloten.	Sluit de luchtslangen opnieuw aan.
Tijdens het gebruik beginnen de timer-leds op het handapparaat te knipperen en het apparaat wordt uitgeschakeld.	De batterijen zijn leeg.	Vervang de batterijen in de handschakelaar.

Als uw probleem hier niet wordt genoemd, neemt u contact op met de klantenservice.

11. Verwijdering

Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.

Deponeer de gebruikte, volledig lege batterijen in de daarvoor specifiek bestemde afvalbakken of bied ze bij het afvalverwerkingsstation of de elektriciteitszaak aan als chemisch afval. Hiertoe bent u wettelijk verplicht.



Deze tekens kunt u aantreffen op batterijen met schadelijke stoffen:

Pb = batterij bevat lood, Cd = batterij bevat cadmium, Hg = batterij bevat kwik.





12. Technische gegevens

Manchetdruk	max. 120 mmHg (bij correct gebruik zoals beschreven in hoofdstuk 8.1)
Manchetgrootte	29-53 cm
Timingduur	10-30 minuten met een afwijking van $\pm 10\%$
Stroomvoorziening bij gebruik met batterijen	6 V DC (4 x 1,5 V \equiv AA-batterijen (alkaline, type LR06))
Toegestane gebruiksomstandigheden	+5 °C tot +40 °C, 15-93% relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend), 700-1060 hPa omgevingsdruk

Toegestane omstandigheden voor bewaring	-25 °C tot +70 °C, 0-93% relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend), 700-1060 hPa omgevingsdruk
Toegestane transportvoorwaarden	-25 °C tot +70 °C, 0-93% relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend), 700-1060 hPa omgevingsdruk
Afmetingen	Beenmanchet: 61 x 67 x 0,5 cm Bovenbeenmanchet: 85 x 23,5 x 0,5 cm Handschakelaar: 17 x 7,7 x 3 cm
Totaalgewicht	Ca. 1700 g (zonder netvoeding)
Veiligheidsklasse	
Classificatie	Type BF 

Het serienummer staat op het apparaat of in het batterijvak.

13. Netvoeding

Stroomvoorziening bij gebruik met de netvoeding	Ingang: 100-240 V~, 50/60 Hz, 200 mA Uitgang: 6 V DC, 500 mA
Polariteit	
Veiligheidsklasse	

Aanwijzingen met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit

- Het apparaat voldoet aan de EU-richtlijn voor medische hulpmiddelen 93/42/EEC, aan de Duitse wet inzake medische hulpmiddelen en aan de Europese norm EN 60601-1-2 (in overeenstemming met CISPR 11, IEC61000-4-2, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-11, IEC61000-4-8) en is onderworpen aan bijzondere veiligheidsmaatregelen op het gebied van elektromagnetische compatibiliteit. Het apparaat is geschikt voor gebruik in alle omgevingen die in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld, waaronder de thuisomgeving.
- Het apparaat is geschikt voor gebruik in alle omgevingen die in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld, waaronder de thuisomgeving.
- Het apparaat kan bij de aanwezigheid van elektromagnetische storingen onder omstandigheden mogelijk slechts beperkt worden gebruikt. Als gevolg daarvan kunnen bijv. foutmeldingen ontstaan of kan het display/apparaat uitvallen.
- Het gebruik van dit apparaat direct naast andere apparaten of met andere apparaten in gestapelde vorm moet worden vermeden, omdat dit een onjuiste werking tot gevolg kan hebben. Als gebruik op de hiervoor beschreven wijze noodzakelijk is, moeten dit apparaat en de andere apparaten in de gaten worden gehouden om er zeker van te zijn dat ze correct werken.
- Het gebruik van andere toebehoren dan de toebehoren die de fabrikant van dit apparaat vastgelegd of beschikbaar gesteld heeft, kan verhoogde elektromagnetische storingen of een verminderde bestandheid tegen storingen tot gevolg hebben, waardoor het apparaat mogelijk niet correct werkt.
- Als deze instructie niet in acht wordt genomen, kan dit de prestatiekenmerken van het apparaat negatief beïnvloeden.

14. Garantie/service

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (hierna "Beurer" genoemd) verleent onder de hierna genoemde voorwaarden en in de hierna beschreven omvang garantie voor dit product.

De hierna genoemde garantievoorwaarden laten de wettelijke garantieverplichtingen van de verkoper uit de koopovereenkomst met de koper onverlet.

De garantie geldt bovendien onverminderd de dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen.

Beurer garandeert de probleemloze werking en de volledigheid van dit product.

De wereldwijde garantieperiode bedraagt 3 jaar vanaf het moment van aankoop van het nieuwe, ongebruikte product door de koper.

Deze garantie geldt alleen voor producten die de koper als consument heeft aangeschaft en die de koper uitsluitend voor persoonlijke doeleinden in het kader van thuisgebruik gebruikt.
Het Duitse recht is van toepassing.

Als dit product tijdens de garantieperiode onvolledig of wat betreft de werking gebrekkig overeenkomstig de volgende bepalingen blijkt te zijn, zal Beurer overeenkomstig deze garantievooraarden een gratis vervangende levering of reparatie verzorgen.

Als de koper een garantieclaim wil indienen, neemt hij eerst contact op met de lokale verkoper: zie de meegeleverde lijst "Service International" met serviceadressen.

De koper krijgt dan nadere informatie over de afwikkeling van de garantieclaim, bijvoorbeeld over waar hij het product naartoe moet sturen of welke documenten nodig zijn.

Er kan alleen aanspraak op garantie worden gemaakt als de koper

- een kopie van de factuur/aankoopbon en
- het originele product

aan Beurer of een geautoriseerde partner van Beurer kan overleggen.

Uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie zijn

- slijtage die veroorzaakt is door normaal gebruik of verbruik van het product;
- met dit product meegeleverde toebehoren die bij correct gebruik slijten of verbruikt worden (bijvoorbeeld batterijen, accu's, manchetten, afdichtingen, elektroden, lampen, opzetstukken en inhalatortoebehoren);
- producten die oneigenlijk en/of anders dan vermeld in de bepalingen van de gebruiksaanwijzing gebruikt, gereinigd, opgeborgen of onderhouden zijn en producten die door de koper of door een niet door Beurer geautoriseerd servicecenter geopend, gerepareerd of omgebouwd zijn;
- schade die tijdens het transport tussen fabrikant en klant en/of tussen servicecenter en klant ontstaat;
- producten die als B-stockartikelen of als gebruikte artikelen gekocht zijn;
- gevolgschade die op een gebrek van dit product berust (voor dit geval kunnen echter aanspraken uit productaansprakelijkheid of uit andere dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen bestaan).

Reparaties of een complete vervanging verlengen in geen geval de garantieperiode.

Distributed by: Beurer GmbH, Söflinger Str. 218, 89077 Ulm, Germany, www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com, www.beurer-healthguide.com

EC REP

Lotus NL B.V.d
Address: Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.
Tel.: +31645171879 (English), +31626669008 (Dutch)



Shenzhen Pango Electronic Co., Ltd.
Address: No.25 1st Industry Zone, Fenghuang
Rd, Xikeng village, Henggang town, Longgang
District, Shenzhen, China

