



Ashford Toilettenrahmen

VR205SP

Gebrauchs- und Wartungshinweise



EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des Toilettenrahmens von Aidapt entschieden haben. Bei richtiger Verwendung ist er so konzipiert, dass er viele Jahre lang zuverlässig und störungsfrei funktioniert.

Hinweis: Dieses Gerät muss von einer kompetenten Person installiert werden.

Gewichtsgrenze: 190 kg (30 st.).

Überschreiten Sie nicht die angegebene Gewichtsgrenze – sonst könnte der Benutzer gefährdet werden.

VOR GEBRAUCH

Entfernen Sie vorsichtig das gesamte Verpackungsmaterial. Vermeiden Sie die Verwendung von Messern oder anderen scharfen Instrumenten, da diese die Oberfläche des Produkts beschädigen können.

Überprüfen Sie das Produkt auf sichtbare Schäden. Wenn Sie Schäden feststellen oder einen Fehler vermuten, wenden Sie sich für Unterstützung an Ihren Lieferanten.

Hinweis: Verwenden Sie Ihr Produkt in diesem Fall bitte nicht, da Ihre Sicherheit gefährdet sein kann.

REINIGUNG

Alle Produktkomponenten sind aus hochwertigen Materialien gefertigt. Es ist jedoch sehr wichtig, dass Sie Ihren Toilettenrahmen nur mit einem nicht scheuernden Reiniger oder einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch reinigen. Vermeiden Sie die Verwendung von Kalkentfernern. Scheuermittel wie AJAX und/oder Scheuerschwämme können Ihr Produkt irreparabel beschädigen.

Überschreiten Sie beim Reinigen der Armlehnen nicht die Temperatur von 50 °C, da sonst der Kunststoff dauerhaft beschädigt werden könnte.

Hinweis: Durch regelmäßiges tägliches Reinigen verringern Sie die Kalkablagerung auf Ihrem Produkt.

Verwenden Sie auf keinen Fall Scheuermittel oder -materialien für die Komponenten. Überprüfen Sie außerdem, ob das von Ihnen verwendete Reinigungsmittel für ABS, Vinyl, Polymerkunststoffe, thermoplastischen Gummi und Polyurethangummi geeignet ist.

MONTAGE

- Schieben Sie die Querstrebe an ihren Platz (Abb. 5) und stellen Sie sicher, dass die Positionierungslöcher ausgerichtet sind richtig (Abb.6)
- Setzen Sie den E-Clip ein und achten Sie darauf, dass er richtig durch das Rohr passt (Abb. 7).
- Stellen Sie sicher, dass der E-Clip richtig installiert ist. Dies ist sehr wichtig. (Siehe Abb.8 und Abb.9)
- Wiederholen Sie dies auf jeder Seite für beide Querstangen. (Abb. 10)



Abb. 5



Abb. 6



Abb. 7



Abb. 8

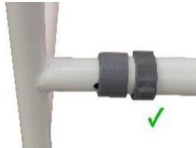


Abb. 9



Abb. 10

EINSTELLUNGEN AN DEN VERLÄNGERUNGSBEINEN

Entfernen Sie den E-Clip vom Verlängerungsbein und ziehen Sie alle vier Beine gleichmäßig auf die gewünschte Höhe aus. Achten Sie dabei darauf, dass Sie das letzte gestanzte Loch des Verlängerungsbeins nicht überschreiten. (siehe Abb. 1)

Sobald Sie die gewünschte Höhe erreicht haben, installieren Sie den E-Clip erneut. Achten Sie dabei darauf, dass er durch das Verlängerungsbein geht und sauber und fest um das Außenbein sitzt (siehe Abb. 2).

Montieren Sie die Verlängerungsbeine niemals uneben oder schräg, da dies die Sicherheit des Benutzers gefährdet.


Die korrekte Beineinstellung ist in Abb. 3 dargestellt, die falsche Installation in Abb. 4.



Abb. 3



Abb. 4

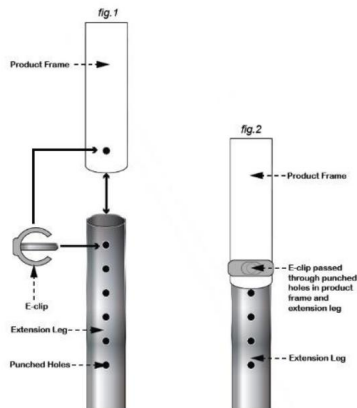

NEUAUSGABE

Wenn Sie dieses Produkt neu auflegen oder eine Neuauflage planen, überprüfen Sie bitte alle Komponenten sorgfältig auf ihre Sicherheit.

Das beinhaltet:

- Fester Sitz aller Muttern/Schrauben/Rollen. •
- Sonstige Einschraub-/Anschaub-/Einsteckkomponenten.

Im Zweifelsfall geben Sie das Produkt bitte nicht aus und verwenden es auch nicht, sondern wenden sich umgehend für Serviceunterstützung an Ihren Lieferanten.

PFLEGE & WARTUNG

Bitte führen Sie in regelmäßigen Abständen oder bei etwaigen

Anliegen.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Bitte gehen Sie bei der Verwendung dieses Produkts mit gesundem Menschenverstand vor und vermeiden Sie unnötige Risiken; für die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts sind Sie als Anwender verantwortlich.

Bitte zögern Sie nicht, die Person zu kontaktieren, die Ihnen dieses Produkt ausgestellt hat, oder den Hersteller (siehe unten), wenn Sie Fragen zur Montage/Verwendung Ihres Produkts haben.

Aidapt Bathrooms Ltd, Lancots Lane, Sutton Oak, St. Helens, WA9 3EX
Telefon: +44 (0) 1744 745 020 • Fax: +44 (0) 1744 745 001 • Web: www.aidapt.com
E-Mail: sales@aidapt.co.uk