

Dr. Original

Protection de douche mi-bras - Duschfolie Arm Halb

Dr. Original

Douchehoes Arm (Half)


Waterbestendige bescherming voor gips & verband



Stap 1: Rek de siliconen opening zodat de arm toegang krijgt.

Étape 1: Étirez l'ouverture en silicone pour que votre bras puisse rentrer dedans


Schritt 1: Dehnen Sie die Silikonöffnung, sodass der Arm hineinpasst

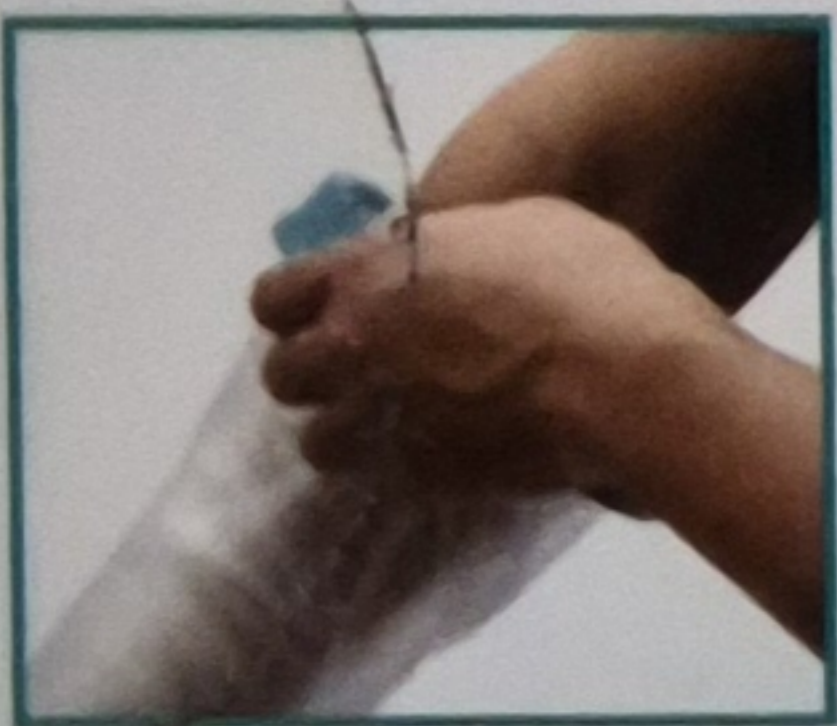

Stap 2: Breng voorzichtig het gips- of verbandgedeelte van de arm in.

Étape 2: Insérez prudemment la partie plâtrée ou bandée du bras.

Schritt 2: Schieben Sie vorsichtig den eingegipsten oder verbundenen Teil des Arms hinein

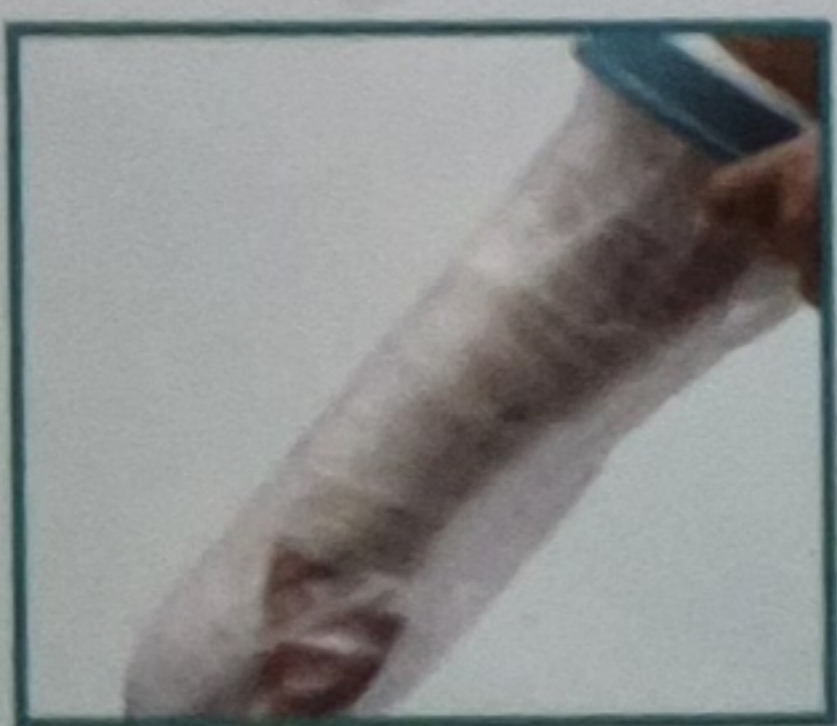

Stap 3: Bedek het gips of verband volledig. Zorg ervoor dat de siliconen opening goed is afgedicht op de huid en zet het siliconen gedeelte recht.

Étape 3: Recouvrez complètement le plâtre ou le bandage. Veillez à ce que l'ouverture en silicone soit bien obturée sur la peau et tenez la partie en silicone droit.

Schritt 3: Bedecken Sie den Gips oder Verband vollständig mit der Folie. Achten Sie darauf, dass die Silikonöffnung gut auf der Haut abgedichtet ist und richten Sie das Silikonteil gerade aus.

Waarschuwing: Vermijd direct contact tussen wond en douchehoes. Wees voorzichtig bij het lopen op natte oppervlakken met de douchehoes om, omdat deze glad kan worden. Houd weg bij vuur. Gezien het mogelijke risico op verstikking, wordt ouderlijk toezicht geadviseerd. Vermijd harde objecten, scherpe dingen of nagels bij het siliconen gedeelte, het kan leiden tot een lek.

Avertissement : Évitez un contact direct entre la blessure et la protection de douche. Soyez prudent lorsque vous marchez sur des surfaces humides avec la protection de douche car elles peuvent être glissantes. Éloignez-vous du feu. En raison du risque d'étouffement, nous recommandons une surveillance parentale. Évitez les objets durs, tranchants ou les ongles dans la partie en silicone, cela peut causer une fuite.

Achtung: Direkten Kontakt zwischen der Wunde und der Duschfolie vermeiden. Vorsicht beim Laufen mit der Folie auf nassen Oberflächen, weil es rutschig sein kann. Von Feuer fernhalten. Angesichts der potenziellen Erstickungsgefahr ist eine elterliche Aufsicht anzuraten. Harte, scharfe Gegenstände oder Nägel sollten nicht mit dem Silikonteil in Berührung kommen, sie können zu einem Leck führen.

FIRSTAR HEALTHCARE Co., Ltd. (Guangzhou)
Add: Rm.901 Building No.2, Headquarters Center
Tian'an High-tech Ecological Park, Panyu
Guangzhou, China

EC REP

MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8
80807 Munich
Germany

Distributeur:
OTC Medical B.V., Linie 13a, 6678PK Oosterhout

CE