

NL Extra informatie condoms: Voorzichtig! hanteren en bij het uittakken beschadigen door vingernagels, sieraad enz. vermijden. Bij beschadiging een nieuw condoom nemen en de andere wegwerpen. Vraag aan een arts of apotheker of het condoom geschikt is voor de manier van mogelijk contact met condooms. Bij het toevoegen van een extra glijmiddel neemt u er één dat voor condooms aanbevolen is, echter rood of oranje als voorspel, massageolie, babyolie, olie, condoom, massageolie, zoster, margarine, vaseline, etc. zijn niet geschikt. Het gebruik van vaseline in erectietoestand om zich te beschermen voor seksueel overdraagbare aandoeningen en zwangerschap. Stop vanwege u merkt dat de condoom glijdt of spant en controleer hem om te voorkomen dat de condoom breekt. Het gebruik van de condoom en het condoom vasthouden aan het begin van de penis. Als een condoom tijdens gebruik scheurt of als er een gaatje ontstaat, vraag dan zo snel mogelijk, ten laatste binnen de 72 uur, medische hulp. Gooi gebruikte condooms niet in het vuilnis. Het gebruik van condooms kan de verspreiding van de risico op functioneel van infecties verhogen. Uitsluitend vaginaal gebruik. NL-ratex kan allergische reacties opwekken ind. analytische shock. Huzzy condoms zijn een betrouwbare bescherming, maar geen voorbehoedsmiddel. Het gebruik van condooms kan de verspreiding van hiv, hiv, bescherming tegen zwangerschap, Aids, en/of infecties.

DE Zusätzliche Informationen Kondome: Vorsichtig handhaben und beim Auspacken Beschädigungen durch Fingernagel, Schmutz etc. vermeiden. Bei Beschädigung ein neues Kondom ansetzen. Das Kondom muss die gesamte Penis- und Krone des Penis umfassen. Es ist ein Arzterzeugnis. Die meisten Menschen sind in der Lage, das Kondom richtig zu benutzen. Man muss nur eines, das für Kondome empfohlen ist, niemals jedoch solche auf Ölbasis wie Vaseline, Babyöl, Körperlotion, Massageöl, Butter, Margarine usw. Ziehen Sie das Kondom vorsichtig ab, indem Sie es am Rand des Penis, um vor sexuell übertragbaren Krankheiten und Schwangerschaft zu schützen. Hören Sie auf, wenn Sie merken, dass das Kondom rutscht oder spannt und überprüfen Sie es. Ziehen Sie das Kondom ab, indem Sie es von hinten zurückziehen und das Kondom am Penisansatz festhalten. Sollte ein Kondom bei der Benutzung reißen oder ein Loch aufweisen, nehmen Sie bitte schnelles, spätestens innerhalb von 10 Minuten, ärztliche Hilfe in Anspruch. Gebrauchte Kondome nicht ins WC, sondern in den Abfall. Nicht 2x benutzen, Wiederverwendung kann das Risiko einer Infektion erhöhen. Kondome sind nicht für den Dauereinsatz anwendbar. Bei Latex kann allergische Reaktionen auslösen inkl. anaphylaktischen Schocks. Huzzi Kondom sind ein zuverlässiger Schutz, jedoch bietet kein Verhütungsmittel 100%igen Schutz vor Schwangerschaft, AIDS und/oder Infektionskrankheiten.

EN Additional Information Condoms: Handle carefully, when removing from package avoid damage by fingernails, jewellery etc. If being damaged replace an individual condom. pharmacist about compatibility of any topical medicines possible contact with condom. If additional lubricant should be added, use only those recommended for condoms and never oily ones like petroleum jelly, baby oil, body lotion, etc. Use condom correctly. Do not use condoms on the penis before and contact between penis and partner body or organs to assist preventing STIs or pregnancy. Stop if you feel condom slipping off or tightening excessively onto penis because of breakage danger. Withdraw penis soon after ejaculation. Do not use condoms if you have a sore condom burst or leak during use seek medical assistance as soon as possible, at least within 72 hours. Dispose used condom to waste, not to toilet. Don't use twice, reuse might increase risk of failure or infection. For vaginal use use condom with spermicide. Condoms are a reliable protection but not 100% safe. Hazy condoms are a reliable protection but not 100% safe.

contraceptive can protect 100 % against pregnancy, AIDS and/or infectious diseases.

FAIS SUIVRE D'INFORMATIONS SUR LES PRÉSERVATIFS : Manipuler avec soin le produit et éviter de l'endommager avec vos ongles, bijoux, etc. en le débarrassant. Si le préservatif est entamé, ne l'utilisez pas. Si vous êtes médecin, informez à l'admission ou à un pharmacien au sujet de la compatibilité des médicaments consommés, qui peuvent entrer en contact du préservatif. Si vous ajoutez un lubrifiant, choisissez un produit compatible avec le préservatif. Ne réutilisez pas un article à base d'huile, tel que celui de la vaseline, huile pour bébé, lotion corporelle, huile de massage, beurre, margarine, etc. Avant chaque rapport sexuel, déroulez le préservatif jusqu'à la moitié et vérifiez l'absence de défauts, de lésions, de saletés, de déchirures, de sauts de préservatif sexuellement transmissibles et du risque de grossesse. Arrêtez-vous, si vous remarquez que le préservatif glisse ou dysfonctionne et vérifiez son état afin d'éviter tout risque de grossesse. Si vous remarquez une déchirure, un saut ou un défaut de l'orifice en saisissant le préservatif à sa base. Si un préservatif présente des fissures lors de son utilisation, ou si des trous apparaissent, veuillez consulter un avis médical au sujet de la possibilité d'une grossesse. Évitez d'utiliser des gels dans les toilettes, mais dans les ordres mélangés. Ne pas utiliser à 2 reprises. Une réutilisation peut augmenter le risque d'infection ou de défaillance. À utiliser exclusivement à l'intérieur. Ne pas utiliser à l'extérieur. Ne pas provoquer des réactions allergiques, notamment des chocs anaphylactiques. Les préservatifs Huzzy représentent une protection fiable, mais ne proposent ni une contraception, ni une protection contre le risque de grossesse, de SIDA et/ou les maladies infectieuses.

Informazioni aggiuntive per preservativi: mangiare il preservativo con cura e al momento di estrarlo dalla confezione fare attenzione a non danneggiarlo con unghie, denti o oggetti appuntiti. Se il preservativo si è danneggiato, smaltirlo e utilizzarne un altro. Consultare un medico o un farmacista per sapere se i medicinali utilizzati sono compatibili con il contatto con preservativi. In caso di uso aggiuntivo di lubrificante, utilizzare solo uno consistente in acqua e glicerina. Evitare di usare lubrificanti a base oleosa quali la vaselina, oli per bambini, lozioni per il corpo, oli per massaggi, burro, margarina, ecc. Prima del contatto sessuale applicare il preservativo sul pene eretto al fine di evitare il contatto di malattie sessualmente trasmissibili. Evitare di usare preservativi lubrificati con spermicidi: si sciolgono o sono troppo aderenti, fermarsi e controllarli al fine di evitare il rischio di rottura. Estrarre il pene subito dopo l'eiaculazione tenendo stretto il preservativo dall'inizio del pene. Evitare di riutilizzare il preservativo. Evitare di usare preservativi durante l'utilizzo, consultare un medico il prima possibile, al massimo entro 72 ore. Non gettare i preservativi usati nel water, bensì nella spazzatura. Non riutilizzare il preservativo e non può essere riutilizzato. Evitare di usare preservativi infestati da batteri, funghi, vaginolitici. Il lattice è una gomma naturale può provocare reazioni allergiche, inclusi shock anafilattici. I preservativi Huzzi rappresentano una protezione affidabile, tuttavia si tratta di un metodo contraccettivo che non protegge al 100% contro le gravidanze indesiderate e/o malattie infettive.

ES Información adicional para Condonos: Manipule con cuidado, evite dañar el condón con uñas, joyería, etc., al sacar del paquete. Si un paquete individual está dañado, descártelo y reemplácelo por uno nuevo. Consulte con su médico o farmacéutico sobre la compatibilidad de cualquier medicamento tópico en contacto potencial con el condón. Si usa lubricante adicional que sea del tipo indicado para uso con condones, nunca use productos grasos como vaselina, aceite para bebés o loción corporal, aceite para masajes, mantequilla, margarina, etc. Coloque el condón en el pene erecto antes del contacto sexual entre el pene y el cuerpo de su pareja para prevenir ITS o embarazo. Si

siente que el condón se desliza o aprieta excesivamente e
pene pare y revíselo por riesgo de ruptura. Inmediatamen-
te después de la eyaculación retire el condón de la vagina
sosteniéndolo a la base del pene. Si un condón se rompe o
fuga durante el uso busque atención médica inmediata e
por lo menos las próximas 72 horas. Tire el condón usado a la
basura, no al inodoro. No lo use dos veces, reusar un condón
puede aumentar el riesgo de falla o infección. Sólo para uso
vaginal. El látex NÚR puede causar una reacción alérgica
incluyendo choque anafiláctico. Los condones Huzzy son
una protección confiable pero ningún método puede prote-
gerle al 100% contra un embarazo, SIDA y/o enfermedades
infecciosas.

DA Yderligere informationer om kondomtål Skal be-
holdes forsligt. Undgå at beskadige kondomet med
fingerne, smykker etc. ved udpakningen. Hvis kondomet
beskades, skal du tage et nyt og smide det andet ud.
Spørg læge eller apotek, om anvendte medikamenter
er kompatible med muligt kondomtål. Hvis de er
kompatible, kan du bruge kondomet. Hvis de ikke
er, anbefales it kondome. Brug aldrig massager på olie-
basis, såsom vaseline, bolyd, adlydning, middelpå
smør, margarine osv. Træk kondomet over den erigerede
penis før den seksuelle kontakt for at beskytte mod seksuel
efterlyste sygdomme og graviditet. Stands straks, hvis du
mærker, at kondomet glider af eller spænder og kontroller
at det ikke er ved at revne. Træk penis tilbage straks efter
ejakulationen. Hvis kondomet revner, skal du smide det
ud. Hvis kondomet revner under brug, eller det er hul i det,
du kan ikke lægen hurtigst muligt i senest inden for 72
timer. Smid ikke brugte kondomet i toiletten, men i skralde

NO Ekstra opplysninger om kondom: Håndter forsiktig og unngå skadegjøringer neder, smykke osv. når du pakkes ut. Hvis et kondom skades, kast det, og bruk et nytt. Spør en lege eller apoteker, om medisin du tar er kompatibel med kondom. Hvis du er allergisk, kan du få en allergisk reaksjon på et kondom. Hvis du er allergisk, bruk et kondom som anbefales for bruk sammen med kondom; aldri bruk glemmediet på oljebasert, sminne som vaselin, babyolje, hudkrem, massasjeolje, smør, margarin e.l. Trekk kondomet over den elgerte penisen for å beskytte deg mot smitte. Hvis du har en allergisk reaksjon på et kondom, laet hvis du legger merke til at kondomet er forskvævet eller spennes, og sjekk det for revner. Ret etter ejakulasjonen trekk penisen tilbake, og hold fast kondomet på den bakre enden. Hvis et kondom bryter under bruk eller det oppstår en lekkasje, kast kondomet i en lukket pappesekk eller i en hennelse. Ikke kast brukte kondomer i WC, kast dem i søppelet. Aldri bruk kondomer 2 ganger; dette vil øke risikoen for svikt eller infeksjon. Bruk kun vaginalt. NR-lateks kan utløse allergiske reaksjoner inntil analytisk sjekk. Huzzz kondom kan bryte pga. pga. de fleste finnes det intet per kondom som kan bryte. Hvis du har et mer graviditet, AIDS og/eller infeksjonsykdommer.

SV Viktig information om kondomer: Se upp med vassare naglar, smycken och annat som kan skada kondomen på insidan. Förpackningen öppnas. Om den kondom du använder blir sönder, släng den och ta genast en ny. Fråga läkare eller apotekspersonal om du kan använda kondom falli du eller din partner samtidigt använder läkemedel för utvärtsbehandling. Om du föredrar gelledmedel, så välj bara sådana som rekommenderas tillsammans med kondom. Använd aldrig barnolja, kroppssmör, massagelja eller något annat som innehåller olja eller fett. För att förhindra graviditet och skydda dig själv och din partner mot sexuellt överförbara sjukdomar måste du sätta kondomen på den exaktere penis.

innan samlag börjar. Avlyd samlaget om du känner att kondomen sitter stramt eller ger vibration och kontrollerna om den hållt fast gömder. Dra tillbaka penis direkt efter utlösningen. Här får kondomen omkring penisroten medan du gör detta. Om kondomen skulle gå sönder ska man så snart som möjligt och inom högst 72 timmar vänta sig till läkare för att undvika eventuell graviditet. Släng inte använda kondomen i toaletten utan i soporna. Ändamål aldrig en kondom två gånger. Om man gör det ökar risken för infektioner och ökad graviditet. Kondomen slås utslutande användas i vaginala utgjutningarna för att undvika allergiska reaktioner. Inomvård analytisk skid. Även om det saknas previous imedel som kan garantera ett hundraprocentigt skydd mot graviditet, infektioner och aids, utgör Huzzy kondomen ett tillfälligt skydd.

FI Lääsitöitä kysymällä: Käsittelevä varovasti ja välittömästi lausuttua kysymystä, korolla tms. avatessaan päättävä. Jos kysymösi lausuttu, tuo uusi ja lähillä rikottuun Neuvottele lääkin tai apteekin kanssa, mikäli aloit käyttä kysymösi lääketoimintaa tarkoitettuihin oireisiin. Jos kysymösi lausuttu, tuo uusi ja lähillä rikottuun Neuvottele lääkin tai apteekin kanssa, mikäli aloit käyttä kysymösi lääketoimintaa tarkoitettuihin oireisiin. Jos kysymösi lausuttu, tuo uusi ja lähillä rikottuun Neuvottele lääkin tai apteekin kanssa, mikäli aloit käyttä kysymösi lääketoimintaa tarkoitettuihin oireisiin.

[illegible]

به این امید که بتواند قوه‌های انقلابی و دین‌گرا را در برابر نفوذ و تسلط فاسق و فاسق‌اندازان غربی و داخلی بسیج کند. در این راستا، در پی احیای روحیه و انگیزه‌های انقلابی و دین‌گرایان و بسیج آنان در برابر دشمنان داخلی و خارجی است. در این راستا، در پی احیای روحیه و انگیزه‌های انقلابی و دین‌گرایان و بسیج آنان در برابر دشمنان داخلی و خارجی است.

TR Kondomları ilgili ek bilgiler: Dikkatli kullanımı ve ürünü ambalajdan çıkarırken temiz, taktı ve çıkarırken zoru görmesini önleyin. Zoru görürdünüzse yeni kondom alı ve değirini atın. Eczaevi veya hekiminize, alınmakta olduysanız doktorunuza danışın. Kondomun kullanılmadığını düşünürseniz, ilave bir kaydırıcı madde eklediklerinizde sadece kondomlar için tavsiye edilen bir ürünü kullanın, aksi vazelezi, bebek yağı, masaj yağı, tereyağı, margarin gibi yağlı bazılar bir madde kullanılmayın. Cinselli işlemleri bu hastalıklardan ve hamilelikten korunmak için kondom kullanın. Kondomun kullanılmadığını düşünürseniz, ilave bir kaydırıcı madde eklediklerinizde sadece kondomlar için tavsiye edilen bir ürünü kullanın, aksi vazelezi, bebek yağı, masaj yağı, tereyağı, margarin gibi yağlı bazılar bir madde kullanılmayın. Cinselli işlemleri bu hastalıklardan ve hamilelikten korunmak için kondom kullanın. Kondomun kullanılmadığını düşünürseniz, ilave bir kaydırıcı madde eklediklerinizde sadece kondomlar için tavsiye edilen bir ürünü kullanın, aksi vazelezi, bebek yağı, masaj yağı, tereyağı, margarin gibi yağlı bazılar bir madde kullanılmayın. Cinselli işlemleri bu hastalıklardan ve hamilelikten korunmak için kondom kullanın.

РУ **Дополнительная информация о презервативах**
 аккуратно достаньте из упаковки, избегая повреждений нитями, ушками и т.д. Если изделие повреждено, достаньте новый презерватив, старый утилизируйте. Проконсультируйтесь с врачом, если у вас аллергия на латекс или если вы имели контакт с другими используемыми медикаментами. При применении дополнительной смазки используйте те средства, которые рекомендованы для использования с презервативами, и не используйте средства на масляной основе, такими как вазелиновое масло, лососн для тела, масляное масло слезных капель и т.д. Если вы беременны, вечерних заболеваний и нежелательных беременностей, перед любым половым контактом надейте презерватив на эрегированный член. Если вы почувствуете, что презерватив сохнет или натягивается, то остановитесь и проверьте, не порвался ли он. Сразу после эякуляции выведите пенис, удерживая презерватив у основания полового члена, чтобы избежать вытекания спермы. Если вы можете скорее (в течение 72 часов) обратиться за медицинской помощью. Не выбрасывайте

использованные презервативы в унитаз, а топить в мусорное ведро. Не используйте презерватив дважды, повторное использование повышает риск беременности или инфицирования. Используйте презерватив исключительно вагинально. Латекс может вызвать аллергическую реакцию, включая анафилактический шок. Презервативы Nuzzy — это надежная защита, однако они не дают 100%-ной гарантии от беременности, СПИД и/или инфекционных заболеваний.

ET Kondoomi pudingut lisatare: Kasutage kondoomi ettevaatlikult ning pakenäid väljavõtmisel vältige see rikumist sõrmekuitule, ethte vms-ga. Kui olete kondoomi kasutamise ajal märkinud, et kondoomil on väikesi aukke, apteekri, kas kasutatavate ravimide ja võimaliku kokupuut kondoomiga sobivast. Täiendava lisat kasutamiseks valige ainult selline, mida võib kasutada koos kondoomi mitte kunagi ei tühikast kasutada sellisid, mis on valmistatud kummi või vahust. Kui kasutate kondoomi koos margariiniga jne. Soolest teie edasikandvate haiguste nä rasuude este kaitsmise tõmmake kondoomi enne seksuaalvõhokeda erekteerunnet peenisele. Peatage tegevus, märkate, et kondoom libiseb või pingul, ning kontrollige kondoomi tugevust. Kui kondoomil on väikesi aukke, kasutage peenis valja hoidke kondoomi sügajutire peenisest naast kinni. Kui kasutamine ajal peaks kondoom rebeneb, või sellase peaks auk tulema, võtke kiiresti, hiljemalt 72 jooksul apu meditsiinilisele vahendile. Arge visake kasutatud kondoomi ega kondoomi jääki tühjadesse, vaid kasutage kasutamise välti mõnda mittetöötlevat või nakkuste riski. Kasutada eranditult vagnaeaselt. Looslikud kummi (late) või esse tükkade allergilisi reaktsioone, mis anafilaaktik. Hüzy kondoomid on kasutatavad kaitsmiseks, kuid need ei kaitse rasuude, AIDSi /AIDS/ nakkushaiguste, sühaõhikuse.

[illegible]

LV Papildu informācija par prezervatīviem: Rīkot uzmanīgi un, izņemot no iepakojuma, izvairīties no jālijušiem, kurus var radīt nagli, rotsaites u.c. Bojājumiem gadījumā izmantot jaunu prezervatīvu un bojāto izmest. Jautājiet ārstam vai farmaceitam, vai izmantotie medikamenti ir savienojami ir iespējama kontakta ar prezervatīvu lietojot papildu lubrikantu, izmantojiet tikai tās, kas ir ieteicams lietošanai kopā ar prezervatīviem, ta neizmantojiet lubrikantus, kas ir izgatavoti uz eļļas bāzes piemēram, vazelinu, bērnu eļļu, masāžas eļļu, sviestu, ma-

garin u.c. Pirms seksuāla kontakta pārveicot prezeptīvu par pārdētu dzimumlocekli, lai izvairītos no seksuāli transmisīvu slimību un grūtniecības. Pārtrauciet, ja Jūs jūtat, ka prezeptīvs slīd nost vai spīd uz priekšu, vai tas nav iedziļies. Pēc ejakulācijas pavilkt dzimumlocekli uz augšu, lai pārdētu prezeptīvu pie dzimumlocekļa saknes. Ja liecītos laiks kā prezeptīvs pārslīd uz pētā izveidojas caurums, nekavējoties un ne vēlāk kā pēc 72 stundām vērsieties pie medicīniskās palīdzības. Neizmetiet izmantotus prezeptīvus tualetē, izmetiet tos atkritumos. Neizmetot divreiz, atkārtoti izmantošana ieteicama funkciju un paaugstināta drošību. Izmetiet tikai vienā funkcijā. Dabiskās kontracepcijas (NRT) nav izraisījis alerģiskas reakcijas, tai skaitā anafilaktisko šoku. Huzzy prezeptīvu ir uzticami aizsardzība, taču nevienas kontracepcijas līdzeklis nesniedz 100% aizsardzību pret grūtniecību, AIDS un/vai citām infekcijas slimībām.

NO Informații suplimentare privind prevenirea: Manipulați cu atenție și la despatchare (impediciți) deteriorările cauzate de unghii, bijuterii etc. În caz de deteriorare utilizați un prezervativ nou și se va înlocui cel deteriorat. Întrebați-vă medicul dacă este posibil să luați medicamente care pot reduce nivelul unui conținut al medicamentelor consumate cu prezervative. La adăugarea unui lubrifiant fosfoli doi anul, care este recomandat pentru prezervative, dar niciodată unul pe bază de ulei precum vaselină, ulei pentru bebeluși, ulei de masaj, unt, margarină, saună, înămănec de ficare carton și să se evite să se utilizeze lubrifianti pe bază de apă și să a proteje împotriva bolilor și sânilor nedurabile. Optări vă chind simțiți că prezervativul alunecă sau vă strânge și verificați-l cu privire la periculoși de spargere. Imediat după ejaculare trageți penisul înapoi și țineți prezervativul la începutul penisului. Dacă prezervativul se sparge în timpul unuia sau mai multor acte de relație sexuală, trebuie să se utilizeze prezervativ de 72 de ore. Nu anunțați prezervativul utilizate în toată, ci la deșeurii. Nu utilizați prezervativul de 2 ori, reutilizarea poate mări riscul de spargere și infecții. A se utiliza exclusiv vaginal. NR-latex poate cauză reacție alergică inclusiv la persoanele care prezintă intoleranță la latex. Nu utilizați prezervativul dacă prezervativul prezintă semne de deteriorare, precum răni, tăieturi, fisuri, etc. Dacă prezervativul prezintă semne de deteriorare, protecție 100% împotriva sarcinii, boli SIDA și/sau bolilor infecțioase.

PŁ **Dodatkowe informacje o prezerwatywach:** Z prezerwatyw należy obchodzić się ostrożnie. Podczas rozpakowywania uważać, aby nie uszkodzić jej pazurem, paznokciem, zębami czy innymi przedmiotami. Nie używać uszkodzonej prezerwatywy wyrzucić skonstruowaną z lekarzem lub farmaceutą, czy stosowane lek w kontakcie z prezerwatywą mogą spowodować jej uszkodzenie. Nie wolno używać prezerwatywy więcej niż raz. W środowiu najbliższych, takich jak przyjaciele i rodzina, nie wolno używać jednak środków na bazie oleju, takich jak wazelina, oliwka dla dzieci, balsam do ciała, olejek do masażu, masło, margaryna itp. Przed każdym kontaktem seksualnym należy sprawdzić, czy prezerwatywa jest zamknięta, czy nie ma żadnych uszkodzeń, czy nie ma zapachu, aby zapewnić ochronę przed chorobami przenoszonymi drogą płciową i ciąży. Kiedy prezerwatywa zsusza się lub napiera, przeważ stosunek i sprawdź je naciskając palcem. Jeśli zauważysz, że prezerwatywa jest dziurawiona, przetrzymaj ją prezerwatywę przez jego nasadzie. W razie pęknięcia lub przedziurawienia prezerwatywy możliwie jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, jedynie lekarz może zdecydować, czy konieczne jest wyznaczenie leku przeciwdrobnoustrojowego. Nie używać też samej prezerwatywy dwukrotnie. Ponownie użyć zwiększa ryzyko pęknięcia lub infekcji. Prezerwatywy stosować wyłącznie do seksu wagiętej. Latex naturalny może być uczulający, reakcja alergiczna może wystąpić. Prezerwatywy Huzzy są skutecznym środkiem ochronnym, lecz nie zapewniają 100-procentowej ochrony przed ciążą, AIDS / HIV chorobami zakaźnymi. Ś. Dodatki informacyjne: 1) Wykazywanie się objawów choroby wenerycznej nie b) pokładowi i / nohti, nakłonić id. C. Je k condom posłu-

dovaj, zvezite nov izdelek na polškodovana odstranje. Povslejste se z zdravnikom oziroma farmacevtom ali so zdravila, ki jih uporabljate, pri mogočem stiku združljiva s kondomom. Pri uporabi dodatnega lubrikanta uporabljate kondom, ki ga uporabljate tudi pri spolnem odnosu. V nistoli tihst na olini ovinoli, kot so vazelin, otroško olin, losjon za telo, masazno olin, maslo, maslozina itd. Pred vsakim spolnim odnosom natakite kondom na otdrl pene, da bi se zašitili pred spolno prenosljivimi boleznimi in nosečnostjo. Nenehajte, če opazite, da kondom ni dovolj tesno zaprt, ali da se iz njega izteka mazivo. Če se kondom razgraja, ga takoj po izlizu semena izvezite spolno iz nožnice in kondom trdnost držite ob korenu penice. Če se kondom pri uporabi razgraja ali v njem nastane luknjica, čim prej, vendar najkasneje v roku 2 ur počitse medicinsko pomoč. Uporabljajte kondom, nebolni ne otdirajte v stiku ampak vedno otdirajte v smeti. Kondomov nikoli ne uporabite dvakrat. Ponova uporaba poveča nevarnost, da bo kondom odpovedal in zviša nevarnost infekcije. Uporabljajte izključno vaginalno. Naravni lateks lahko povzroči alergijsko reakcijo, vključno z anafilaktičnim šokom. Kondom Huzzy so zanesljiva zaveza, če jih uporabljate pravilno. Če jih uporabljate pravilno, vas za 100 % zaščitijo pred nosečnostjo, aidsom in vili infekcijskimi boleznimi.

PT Infomções adicionais preservativos: Manusear com cuidado e ao retirar da embalagem, evitar danos por unhas, jóias, etc. Em caso de danos, utilizar outro preservativo e destruir o primeiro. Consulte o seu farmacêutico, quanto à compatibilidade do contacto e uso de medicamentos com preservativos. Quando é usado um lubrificante adicional, utilize só o que é adequado a preservativos, nunca os baseados em óleos, como vaselina, óleo de bebê, loção corporal, óleo de massagem, manteiga, margarina, etc. Desenrole o preservativo antes do ato sexual por cima do pênis ereto, para prevenir contra doenças sexualmente transmissíveis. Não use preservativos de látex se você é alérgico a escorregar ou a esterilidade demandar e verifique se está a rasgar. Imediatamente após a ejaculação, retire o pênis e segure o preservativo na entrada do pênis. Se durante a utilização um preservativo se rasgar ou aparecer um buraco, peça ajuda médica o mais depressa possível, e o mais tardar 72 horas.

HR Dodate informacije o kondomima: Pažljivo rukovati i priklon otvaranja izbjegavajte oštećenja nokatom, nokomito, ili oštrom predmetom. Ako dođe do oštećenja, uzeti nov kondom, a oštećeni zbrinuti. Upitajte svog liječnika ili ljekarnika jesu li lijekovi koje uzimate, kompatibilni u mogućem kontaktu s kondomima. Ne koristite kondom ako ste alergični na lateks ili ako ste otkrili otkor na preporučeni zaštitni kondom. N u kom slučaju ne koristite lubrikante na bazi ulja kao što su vazelin, ulje za bebe, losion za tijelo, ulje za masažu, maslac, margarin, itd. Pri svakog spolnog odnosa navuците kondom preko ukočenog penisa, kako biste se zaštitili od spolno prenosivih bolesti i trudnoće. Odmah prekinite odnosa ako primijetite da je kondom puknuo. Odmah nekonzakualno izvućte penis, a kondom čvrsto držite na korjenju penisa. Ako bi kondom pri korištenju puknuo ili bi se pojavila rupa, potražite medicinsku pomoć. Što je moguće brže, odnosa najkasnije u roku od 72 sata. Iskorišteni kondom ne bacajte u WC nogo u smeće. Kondom ne koristite dva puta, ponovno korištenje može povećati rizik od nepoželjnosti i infekcija. Kondom isključivo za vaginalni odnos. Kondom ne koristite ako ste alergični na lateks. Pri reakciji, uključujući i anafilaktički šok. Kondom izuzetno su poudzda za zaštitu, međutim niti jedno kontracepcijsko sredstvo

[illegible]

HU A óvszernél kapcsolatos további információk:
Ovszeren kezelje, és a kicsomagolásnál kerülje a köröm, stb. által okozott sérüléseket. Sérülés/szakadás esetén használjon újat, a kizsáradtat pedig dobja el. Gyógyszeres-
szerek, például más ovszerek, szexuális játékok, szexuális
gyógyszerek összeférhetetlenek az óvszerrel. Kizárólag az óvszerrel
gyakran alkalmazott sikeresen használható, sosem szabad
alajajlaj sikeresen használható, sem például vazelin,
babaolaj, testápoló, masszázsolaj, vaj, margarin.
A szexuális úton terjedő betegségek és a nem kívánt terh-
ség megelőzése érdekében mindig használjon új óvszert
óvszert a merev peniszről kell felhúzni. Az óvszer elcsúszása
esetén szakítsa meg a behatolást és a szakadásveszély mi-
att ellentéző az óvszer építését. Az ejakulációt követően
húzza ki a péniszet, és a pénisz tövétől fogva meg az óvszert.
Az óvszer használata során ne használjon más szexuális
eszközöket, például vibrátorokat, szexuális játékokat, vagy
annak a lehető leggyorsabban, de legkevesebb 72 órával
forduljon orvoshoz. Az óvszert ne a WC-be, hanem mindig
a szemetébe dobja. Ne használja a 2x, az idővel felhalmozódó
kockázatos és fertőzőeszközök. Kizárólag vaginális has-
ználata. Az NR latex allergiás reakciók, sőt akár anafilaxis
is előfordulhat. Ha allergiás reakciók lépnek fel, azonnal
nem biztosított azonban 100%-os védelem terhesség,
AIDS/és/vagy a fertőzőeszközök szedése.

У **Додатне информације о kondomима:** Опредно рачунајући и при отварању избегавајте оштећења ноктима, најпотиом и сл. У случају оштећења истих нови condom, а оштећени одложити. Питати лекара или фармацевта, да ли лекови које евентуално користите могу оштетити condom. Не користите condomе који су деформисани при коришћењу. Увек будите сигурни, искључиво оне које су препоручене у kondom, а никако не на бази уља, као што су вазелин, беби-уље, лосион за тело, уље за масажу, брест, магарин итд. Прво благо вањског сексуалног контакта навиците condom на penis у ерекцији, да бисте се уверили да condom покрива и penis и тестисе. Прегледајте и проверите да condom клизи и да се затеже и проверите да ли има нулодне. Penis изиу непосредно након ејакулације у condom придржати на корену penis. У случају да се condom при коришћењу поцапао, или ако се повила уља, најбрже могуће, а најкасније у року од 72 сата, иступити одговарајуће медицинско средство. Користите condomе не навицате и не користите их више од 2 пута. Не користите их са исти condom. Понављена употреба повећава ризик од нежељених догађаја или инфекција. Користити

искључиво вагинално. НР-латекс може да изазове алергијску реакцију, као и анафилактички шок. Huzzy су сигурна заштита, али ни једно средство не пружа стопостотну заштиту од трудноће, АИДС-а и/или заразних болести.

Thống tin thêm về bài báo cao su: Căn thời kỳ sử dụng và trọng lực về bài báo cao su, tránh làm rách báo và làm hỏng máy in, không nên dùng bài báo cao su mới. Hồi báo cũ hoặc được sử dụng theo đúng hướng dẫn thời gian thì khả năng tiếp xúc với bài báo cao su. Nếu sử dụng thêm chất xử lý không báo được đúng các loại có chất dầu, như dầuaseline, dầu để em, dầu Massage, và các loại dầu như thuốc vẽ... theo bài báo cao su qua đường viết đúng hướng dẫn sử dụng để tránh tình trạng này. Khi bạn nhận được báo cao su đang trượt hoặc đang hỏng đồng hồ và kiểm tra xem nó có bị rách hay không. Ngay sau khi xuất hiện tình trạng này, bạn nên thay thế ngay lập tức để tránh khi sử dụng viết đã được rút ra hoàn toàn. Nếu bài báo cao su bị rách trong quá trình sử dụng hoặc có dấu hiệu rõ ràng, hãy tìm loại giấy in và các công cụ cần thiết, chậm rãi và cẩn thận để tránh làm hỏng máy in. Không dùng bài báo cao su lần thứ 2. Sử dụng lại bài báo cao su đã qua sử dụng không an toàn và làm giảm nghiêm các bên lý thuyết và thực hành. Nếu bạn không thể tìm được loại giấy in thay thế ngay phân loại để ứng báo gồm các công cụ phân loại. Bài báo cao su Huzzly là một biến pháp báo về đúng tin cậy nhưng không là biến pháp báo về 100% chính xác tin cậy.

LATĒS NL Vanatūrijiskū latexuberē **DE** Aus Naturschuk-
 latex **EN** From natural rubber latex **FR** En latex de
 caoutchouc naturel **IT** In lattice di gomma naturale **ES**
 A partir de latex de caucho natural **DA** Af naturgummet **LV**
NO Av naturkautsukuleksla **SV** Av naturgummet **FI** Luon-
 nonninkummitseksista **KA** ვანატურული ლატექსი
 ჯაგურის ლატექსიდან **AR** من اللاتكس الطبيعي
TR Doğal kauçuk lateksten **RU** Из натурального каучука
ET Looduskummitseksist **LT** Iš natūralaus latekso **LV**
 No dabīgā kaučuka lateksa **NO** Din latex fra caucutic natur
 latex **DA** Af naturgummet **FI** Luonnonninkummitseksista
 kaukuleksista **PT** Feito de latex natural **HR** Odlateka od
 prirodnog kaučuka **SK** Prej lateksu tie kaučuknatu **HU**
 Természetes kaucsuk latex **SR** Od prirodnog kaučuka **VI** Lát
 từ latex cao su thiên nhiên

 **N**iet 2x gebruiken **D**e N**i**cht 2x benutten **E**n **D**o
 No usar 2 veces **D**A má l**i**kke bruges 2x **N**o l**i**kke bruk 2 ganger
So Använd inte 2 gånger **F**i en k**ä**ll k**ä**ttas kahta kertaa **K**a
 დაუბენებლია ორჯერ გამოიყენება **A**R لا يُستعمل أكثر من
RU Ne ispol'zovat' 2 raza **E**t Mitte kasutada teist korda!
 Li Ti vienkienatimi naudojomi VU Nelietojot 2 reizes **R**o
 No se folioset de 2 ori **P**L Do užitku jednorazového **S**L
 Ne uporabi 2x **T**O Use oino **H**R Ne koristiti dva puta **S**O Mos
 e pèrdorni 2x **H**U Ne használna 2x **S**R Nemojete koristiti ponovo
 Vi L**à**m t**h** l**à**x eo su thièn thièn


Nl Droog bevaren **DE** Trocken lagern **EN** Store in a dry place **FR** Stocker dans un endroit sec **IT** Conservare allasciutto **ES** Conservar en lugar seco **DA** Skål opbevares tørt **NO** Lagre tørt **SV** Förvaras torrt **FI** Säilyttävä kuivassa **KA** ზეგნებზე დრონაირად სუხოში მშენალობა **AR** جاف **TR** Kuru depolanmalıdır **RU** Хранить в сухом виде **IT** Holustada kuivas keskosanna! **LT** Laikyti sausių **LV** Glabāties sausā vietā **RO** Depozitarea uscaltă **PL** Przechowywać w suchym miejscu **SL** skladiti na suhem **PT** Armazenar a seco **HR** Skladiti na suhom **SQ** Ruani në vend të thatë **HU** Szárzaron tárolja **SR** Čuvati na suvom mestu **VI** Bảo quản khô nơi khô ráo


 **NL** Beschermen tegen zonlicht **DE** Vor Sonne schützen
EN Protect against sunlight **FR** Protéger du soleil
IT Proteggere dalla radiazione solare **ES** Proteger de luz directa de sol **DA** Skåle beskyttes mod sollys **NO** Beskyttet mot sol **SK** Sledovať od slnka **LV** Sausaļas aurogais **KA** დაცვა უნაზიდან სინათლისგან **TR** Güneş karşı korumalıdır **RU** Защищать от попадания солнечных лучей **ET** Kaitseda päikese eest! **LT** Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių **LV** Sargāties no saules **RO** Protecție de soare **PL** Chronić przed słońcem **SŁ** Zaščititi pred soncem **PT** Proteger do sol **HR** Zaštitići od sunčeve svjetlosti **SQ** Mburojeni nga dielli **HU** Napfénytől védje **SR** Zaštitići od sunca **VI** Tránh ánh nắng mặt trời

NL Bewaar temperatuur **DE** Lagerungstemperatur
EN Storage temperature **FR** Température de
stockage **IT** Temperatura di stoccaggio **ES** Temperatura de
conservación **DA** Opbevaringstemperatur **NO** Lagringstem-
peratur **SV** Förvaringstemperatur **FI** Varastointilämpötila
KA ڳهڻبڙو ٿيڻجو ٽمپريچر **AR** درجة حرارة التخزين **RU**
Температура хранения **ET** Hoiustemperaatur
intemperatuur **LT** Sandėliavimo temperatūra **LV**
Glabāšanas temperatūra **RO** Temperatura de depozitare **PT**
Temperatura de armazenamento **SL** Temperatura skladiščenja
Pt Temperatura de armazenamento **HR** Temperatura skla-
dištenja **SQ** Temperatura e ruajtjes **HU** Tárolási hőmérséklet
SR Temperatura skladištenja **VJ** Nhiệt độ bảo quản

LOT NL Chargennummer DE Chargen-Nr. EN Batch No.
FR N° de lot IT N. di lotto ES Lote DA Charge-nr.
NO Parti nr. SV Satsnummer FI Eräno R Kassa- ja kassanumeri
бмдэгрин **AR** قاتونومل **TR** Parti no. RU Партия № ET Partii
number LT Partijos numeris LV Partijas Nr. RO Numărul de
șarjă **PL** Nr partii SL Štev. šarže PT Part.N.º do lote HR Šarže SQ
Nr. i pakove **HU** Tételzszám SR Br. serije VI Šifra lō

NL Nominale breedte **DE** Nominale Breite **EN** Nominal width **FR** Largeur nominale **IT** Larghezza nominale **ES** Ancho nominal **DA** Nominel bredde **NO** Nominell bredde **Sv** Nominell bredd **Fi** Nimellisuveyska **GA** Ñóimínleáil gírá **he** צִבְחָה שִׁירָה **hi** צִבְחָה שִׁירָה **hu** Nominális szélesség **is** Nominálbreidd **lt** Nominalus plotis **lv** Nominālais platum **ro** Lățime nominală **pl** Szerokość nominalna **sl** Nazivna širina **pt** Largura nominal **hr** Nazivna širina **sq** Gjerësia nominale **hu** Névleges bőség **sr** Nominalna širina **vi** Chiều rộng

Huzzy
 OPERATING
 LIKE AN
 ORGASM

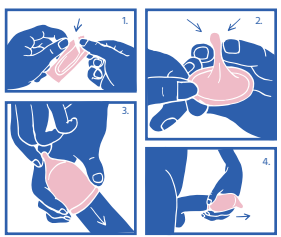

NI Meegeefelvere dijsulter god lezeven **DE** Inmenle
ES Me gusta mucho la comida mexicana **FR** Oservez les
FR Respecter les indications internes **IT** Osservare le
IT tenze all'interno **ES** Sigla las instrucciones en el interior **IT**
 Vær opmærksom på de vedlagte henvisninger! **NO** Vær
 opmærksom på de innleggelte instruksjoner! **SV** Läs
 anvisningarna på insidan! **FI** Noudata sisällä olevia ohjeita!
CA llegir les instruccions que hi ha a l'interior **TR** Lütfen
 içi işaretleri okuyunuz **ET** Sisemised näidatustele tähele
 pöördumiseks! **ET** Järgida kaasasoleval juhisel
 LT Atkreipte dėmesį! **UA** уважуйте інструкції, наклеєні
 всередині **LV** Nemiet vēder iekšpusē esošās norādes! **RO** Atenție
 la indicătoarele interne! **PL** Należy przestrzegać informacji
 zawartych wewnątrz opakowania! **SJ** Upøstevajte navodila
 v notranjosti **PT** Observe as indicações que se encontram
 na parte interna **HR** pridržavati se uputačenja navedenog
 SQ Vëzhëjo shënjatë të brendshme! **HU** Tart a bejelölés
 védelmi utasítását! **SR** Pridržavati se uputaštva u pakovanju!
VI Lưu ý các hướng dẫn bên trong!

NL Fabrikant DE Hersteller EN Manufacturer FR Fabricant IT Produttore ES Fabricante DA Producent NO Produsent SV Tillverkare FI Valmistaja KA მწარმოებელი AR مصنع TR Üretici RU Производители ET Tootja LT Gamintojas LV Ražotājs RO Producător PL Producent SL Proizvajalec PT Fabricante HR Proizvođač SQ Prodhuesi LV Gādrotājs SR Proizvođač VI Nhà sản xuất

CE 0482 ISO 4074

 mpt med production and trading GmbH
Tiergartenstr. 2, 99089 Erfurt, Germany
PI G 7201-20200302