



Gebruiksaanwijzing

M48465 Neerklapbare beugel met poot

Algemene waarschuwing

Zorg ervoor dat deze instructies volledig worden gelezen en uitgevoerd. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot letsel. Bewaar deze instructies op een veilige plaats voor toekomstige referentie.

Maximaal gebruikersgewicht



1.0 Bedoeld gebruik

The Economy Drop Down Rail with Leg is a wall mounted rail which provides a stable support to users when lowering onto and raising from the toilet. It can be pushed back against the wall to enable side transfers on and off the toilet seat or when not in use. It is not designed for use in a shower.

2.0 Veiligheidsmaatregelen

Overschrijd het maximale gebruikersgewicht van het product niet op de 21e plaats, 136 kg.

Probeer niet op het product te klimmen of te zwaaien.

3.0 Uitpakken

Verwijder de verpakking en controleer het product zorgvuldig. Als er onderdelen beschadigd zijn, gebruik deze dan niet en neem onmiddellijk contact op met uw leverancier.

4.0 Voorzorgsmaatregelen bij de installatie

Dit product moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde en competente persoon.


Controleer altijd of het montagevlak en de ondergrond structureel in orde zijn, eventueel zijn er verstevigingsaanpassingen nodig.

Controleer altijd voor de installatie op verborgen elektriciteitskabels en waterleidingen.

Let op: Omdat de montagesubstraat aanzienlijk kan variëren, leveren wij geen bevestigingen. Zorg ervoor dat de gekozen bevestigingen geschikt zijn voor het doel en compatibel zijn met zowel het product als de montagesubstraat. Neem in geval van twijfel contact op met een gekwalificeerd persoon.



Figuur 1 – M48465 Gebruik

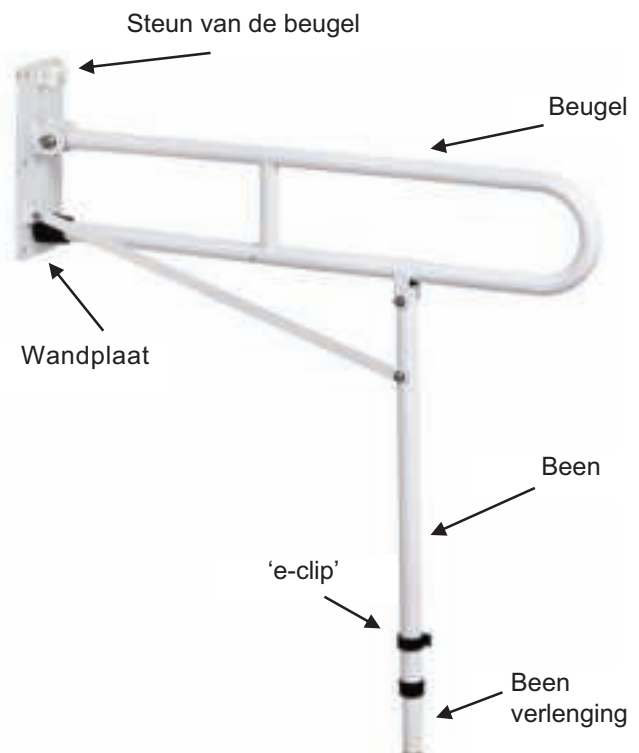

Figuur 2 – Onderdelenlijst

4.1 Instructies

Plaats de rail zodanig dat deze de gebruiker comfortabel ondersteunt en kan worden neergelaten en opgetild zonder andere meubels of bevestigingen te storen.

Strek de poot tot de gewenste hoogte door de 'e-clip' te verwijderen en de binnenbuis in de gewenste positie te schuiven.

Lijn de gaten uit en plaats de 'e-clip' opnieuw.

Plaats de muurplaat plat tegen de muur met het been vierkant en in contact met de vloer.

Markeer de positie van de 6 gaten.

Boor de 6 gaten die geschikt zijn voor de gekozen bevestigingen.

Plaats de wandplaat over de gaten en zet hem vast.

Controleer of de beugel goed vastzit en correct functioneert zonder dat andere meubels of bevestigingen worden gehinderd.

Voer een laatste aanscherping en inspectie van alle bevestigingen voor gebruik uit.

5.0 Schoonmaken

Reinig regelmatig met een algemeen, neutraal reinigingsmiddel en warm water.

Controleer de geschiktheid van de reinigingsmiddelen voor gebruik. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of doeken, omdat deze het oppervlak blijvend kunnen beschadigen en de garantie ongeldig kunnen maken.

Om te desinfecteren, veeg je het af met een verdunde bleekoplossing en spoel je het goed na met vers water.

Droog het product altijd volledig af na het reinigen.

6.0 Onderhoud

Controleer de beugel operates smoothly and is securely held by the retaining bracket when pushed up against the wall.

Controleer of de 'e-clip' correct is aangebracht.

Spuit regelmatig een waterverspreider (bijv. WD40) op de scharnierverbindingen.

Controleer regelmatig of het product stijf en stabiel is en of alle wandbevestigingen goed vastzitten.

Controleer regelmatig op tekenen van slijtage of beschadiging. Vermoedelijke gebreken of beschadigingen moeten onmiddellijk aan de leverancier worden gemeld en het product moet uit gebruik worden genomen.

7.0 Productverwijdering

Het product moet grondig worden gereinigd voordat het wordt weggegooid.

Het product is gemaakt van metaal en plastic en kan worden verwijderd via gemeentelijke huisvuil- en recyclingcentra of via lokale handels-afvalverzamelaars.

8.0 Productgarantie

NRS Healthcare garandeert dit product voor een periode van 12 maanden, vanaf de datum van aankoop, tegen materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie dekt niet; misbruik, verkeerd gebruik, storing of knoeien met enig onderdeel van het product.

Een eventuele garantie van NRS Healthcare heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Hulpmiddelenspecialist

Venkelbaan 22,
2908 KE Capelle aan den IJssel,
The Netherlands.

Tel. 0031 (0)10 242 0913

Email: info@hulpmiddelenspecialist.nl

www.hulpmiddelenspecialist.nl

Hulpmiddelenspecialist is een toonaangevende leverancier van Equipment en Daily Living Aids, om ons volledige assortiment te bekijken, bezoek onze website: www.hulpmiddelenspecialist.nl