



More**Women**



MoreWomen

Handmatige Borstkolf

Dank u
voor uw aankoop van de
Handmatige Borstkolf
van
MoreWomen®



Deze borstkolf is ontworpen om u te helpen op een comfortabele en effectieve manier melk af te kolven. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de borstkolf gebruikt.

Kenmerken:

- Handmatige borstkolf, geen elektriciteit of batterijen nodig.
- Stille werking voor een discrete en comfortabele kolfervaring.
- Zachte siliconen zuignap voor een comfortabele pasvorm.
- Lichtgewicht en compact, ideaal voor op reis of onderweg.
- Eenvoudig te monteren en te reinigen.



Gebruiksaanwijzing:

1. Maak de borstkolf schoon voordat u deze gebruikt. Dit kan worden gedaan door alle onderdelen te wassen met warm water en zeep.
2. Plaats de siliconen zuignap op uw borst en zorg ervoor dat deze goed vastzit.
3. Knijp zachtjes in het handvat van de borstkolf om vacuüm te creëren en de melkstroom op gang te brengen.
4. Herhaal dit proces totdat u de gewenste hoeveelheid melk heeft afgekolfd.
5. Giet de afgekolfde melk in een opslagcontainer of fles en bewaar deze in de koelkast of vriezer.



Onderhoudsinstructies:

- Was alle onderdelen van de borstkolf na elk gebruik met warm water en zeep.
- Droog alle onderdelen grondig af voordat u de borstkolf opbergt.
- Bewaar de borstkolf op een koele, droge plaats.

Waarschuwingen:

- Dit product is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag niet worden gedeeld.
- Gebruik de borstkolf niet als deze beschadigd is.
- Raadpleeg een arts als u pijn of ongemak ervaart tijdens het gebruik van de borstkolf.

We hopen dat u veel plezier zult hebben van uw

Handmatige Borstkolf van MoreWomen®

en dat deze borstkolf u zal helpen bij het afkolven van melk op een comfortabele en effectieve manier. Als u nog vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Producteigenschappen

Moedermelk bevat verschillende antilichamen. Pasgeborenen kunnen immuniteit verkrijgen uit moedermelk. Moedermelk is de beste keuze voor babygroei. Het is alleen soms niet gemakkelijk om je baby direct te voeden. De borstkolf kunt u voorzien van wat gemak. De siliconen zuignap kneedt de borst, zorgt voor een natuurlijk zuigeffect, wat zorgt voor minder pijn tijdens het kolven en het voorkomt een tepelretractie. Het zorgt voor een fijnere en gezondere ervaring voor moeders.


- Innovatief ontwerp doorbreekt de traditionele manier van zuigen.
- Vierkant met Ergonomisch, zoals het zachte zuigen van een baby.
- Dat is vrij van bisfenol A, veilig en gezond.

Kennisgeving gebruiken


1. Volg de richtlijnen van uw arts voor het gebruik.
2. Houd u bij het demonteren of monteren aan de montagevolgorde van elk onderdeel.
3. Plaats dit product buiten het bereik van baby's en kinderen.
4. Door zuigkracht naar eigen controle, is de zuigkracht het meest comfortabel voor u om te kolven.
5. Gebruik geen overmatige moedermelk om borstletsel te voorkomen.
6. Als het gebruik van de borstkolf erge pijn geeft, neem dan direct contact op met medisch personeel.
7. Gebruik dit product alstublieft niet als een open borst instrument. De borstkolf is om te helpen bij het verlichten van pijn bij postpartum-moeders, onder de voorwaarde dat de moeder veel melk heeft en gladde borsten. Enkele moeders binnen vroeg moederschap hebben geen gladde borsten (wat deels aangeboren is bij ingetrokken tepels) of hebben niet voldoende moedermelk. Er wordt voor deze groep aanbevolen professioneel onderzoek te doen van de borsten.

8. Controleer voor gebruik of de bevestigingen correct en strak zijn.
9. Reinig en desinfecteer de onderdelen voor gebruik, was ze onmiddellijk na gebruik en bewaar de accessoires droog.
10. Dit product is alleen bedoeld voor het doel beschreven in deze instructie.
11. Reinig het product voor het eerste gebruik volgens de reinigingsmethode. Dit kan de geur op een effectieve manier verminderen of wegnemen.


Installatieprocedures voor pomponderdelen

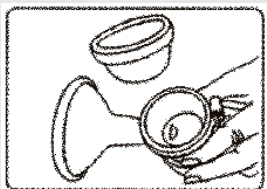


1. Installeer de siliconencilinder in de connector

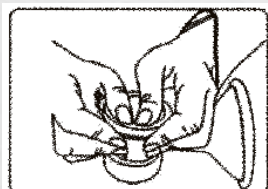


2. Controleer of het verzegeld is

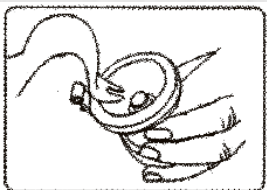


3. Steek de hendel in de trekking en bevestig deze aan de beugel op de connector

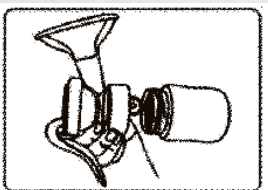

4. Sluit de zuigfles aan op de connector

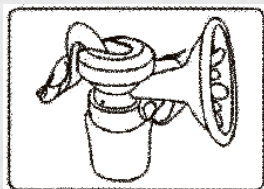


5. Houding gebruiken

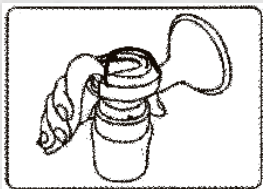

6. Sluit de stofkap

Houd de juiste houding aan

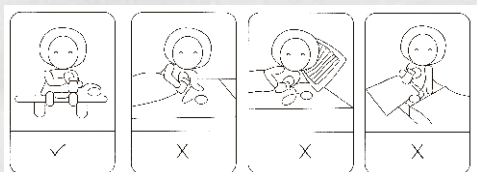

Beschrijving pomponderdelen en componenten



RH188	Nummer	Naam	Materiaal	Hittebestendig	Koude weerstand
	1	hendel	PP	120°C	-20°C
	2	plak gel cilinder	silicagel	80°C	-20°C
	3	ring dragen	PP	120°C	-20°C
	4	verbingsstuk	PP	120°C	-20°C
	5	haalbare waarde	silicagel	80°C	-20°C
	6	Fles van 150 ml	PP	120°C	-20°C

Verwarming van moedermelk

Gebruik bij het ontdooien of verwarmen van de melk warm water, gebruik geen microblog of waterverwarming om verlies van voedingsstoffen te voorkomen. Na het verwarmen kan moedermelk een baby voeden.

Kennisgeving opslag en verwarming van moedermelk

1. Als u moedermelk wilt invriezen, vul dan de fles of zak niet. Vul het tot $3/4$ en laat ruimte over voor ijsvorming. Bewaar geen moedermelk op de zijdeur van de koelkast.
2. Om de voedingsbestanddelen van de moedermelk te behouden, wordt de nacht voor het gebruik de melk uit de vriezer gehaald. En ontdooit in warm water (37 graden) om de fles of zak op te warmen.
3. Schud de fles of zak voorzichtig, zodat het afgescheiden vet gelijkmatig in de melk kan worden gemengd.

4. Plaats geen bevroren moedermelk in de magnetron of kokend water om geen voedingsstoffen te verliezen, maar ook om de baby te beschermen tegen verbrandingen.
5. Het ontdooien van de mo kan niet opnieuw worden ingevroren, gelieve geen verse moedermelk met ontdooide moedermelk met elkaar te vermengen.

Manier van handelen

1. Houd een comfortabele zithouding aan en ontspan.
2. De op de pomp gemonteerde hoornkap is centraal uitgelijnd en dicht bij de borsttepel.
3. Houd het handvat vast met de meest comfortabele kracht om de melk op te zuigen.
4. Gebruik de relevante onderdelen na demontage en reiniging voor het volgende gebruik.

Probleemoplossen

1. Bepaal of de borst op de hoornhoes is bevestigd.
2. Controleer of het 3D-massagekussen, de eendenbekklep, de cilinder en de handgreep van de cilinderstang op hun plaats zitten.

Opslag van moedermelk

Nadat de moedermelk is opgenomen, wordt de bewaardeksel goed afgesloten en moet het onmiddellijk in de koelkast of vriezer worden geplaatst. De nieuw opgevangen moedermelk mag niet buiten de koelkast worden bewaard. In de koelkast kan het 3-5 dagen bewaard worden en in de vriezer ongeveer 2 weken.

Reinigings- en desinfectiemethoden

1. Alle onderdelen kunnen worden gedesinfecteerd, desinfectie stelde het gebruik van een professionele ontsmetter voor.
2. Siliconen onderdelen, gebruik dan de zachte zee oppervlakte reiniging. Ruwe reiniging is eenvoudig schade of krassen veroorzaken.
3. Als er geen professionele sterilisator is, plaats deze dan de gedesinfecteerde delen in gekookt water gedurende 5 minuten, vermijd dat het product de bodem van de pot, met schade tot gevolg naar de onderdelen.



- ✓ **CE Certificaat:** De CE-markering (een acroniem voor het Franse "Conformite Europeenne") bevestigt dat een product voldoet aan de EU-eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu, die de veiligheid vande consument garanderen
- ✓ **FDA-certificering** verwijst naar de conformiteit van een product met de voorschriften van de Amerikaanse Food and Drug Administration. Het geeft aan dat het product veilig, effectief en geschikt is voor gebruik in de beoogde toepassing.
- ✓ **SGS-certificering** is een wereldwijd erkende norm voor productkwaliteit en -veiligheid. Het is een certificering door een derde partij die aangeeft dat een product is getest en geverifieerd om te voldoen aan specifieke criteria voor kwaliteit, veiligheid en prestaties.

We zijn hier om te helpen!

Bent u tevreden over het product, de levering en het contact met ons? Super! Dat horen we graag. Help ons door een review te schrijven en maak kans op leuke prijzen. Via de QR-code hieronder kunt u snel een review achterlaten. Als u niet tevreden bent of ergens problemen mee ervaart, neem dan contact met ons op zodat wij u gericht kunnen helpen. Ook kunt u ons assortiment bekijken, mogelijk vindt u meer leuke producten! Nogmaals bedankt voor uw vertrouwen in MATTI B.V., wij hopen u nog vaker van dienst te mogen zijn!

 **klantenservice@mattiwebshop.nl**

 **085-060 7725**



ONS ASSORTIMENT



REVIEW