




ROLLATOR | FORTIS

GEBRUIKERSHANDLEIDING

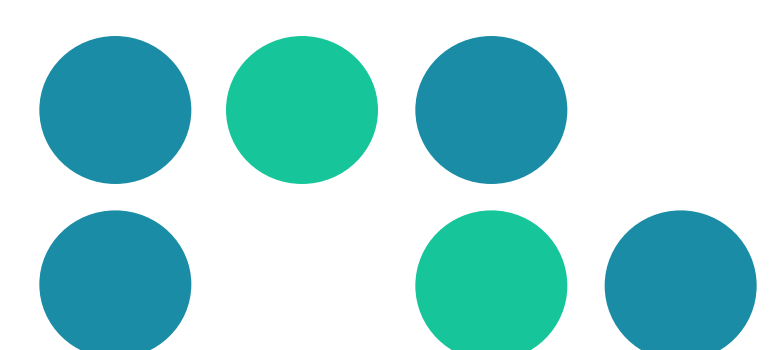

Over de FORTIS-rollator

De FORTIS-rollator is lichtgewicht en gemaakt van sterk aluminium. Hij heeft een zitje, een boodschappentas en veilige parkeerremmen. De handvatten zijn in 6 hoogtes verstelbaar. Het frame is eenvoudig opvouwbaar voor transport en opslag. Ideaal voor dagelijks gebruik door ouderen met minder kracht of mobiliteit.

Gebruik

De rollator is een loophulpmiddel met zitje en boodschappentas, geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Hij is bedoeld voor binnen- en buitengebruik, tot een maximaal gebruikersgewicht (zie specificaties).

De gebruiker moet voldoende kracht, zicht en denkvermogen hebben om de rollator veilig te gebruiken. Twijfelt u? Raadpleeg uw arts of dealer.

Lees voor gebruik altijd de veiligheidsinstructies om letsel en schade te voorkomen.

Veiligheidsinformatie

De rollator ondersteunt een veilige en natuurlijke loopbeweging. U loopt met het gewicht tussen de handgrepen en de rollator vóór u.

Lees deze handleiding zorgvuldig door vóór gebruik.


Getest volgens EN ISO 11199-2:2021.

De Unique Device Identifier (UDI) is vermeld op het productlabel en/of de verpakking.

Veilig gebruik van de rollator

1. Zet de parkeerrem altijd aan wanneer de rollator stilstaat.
2. Controleer vóór elk gebruik of alle wielen goed vastzitten.
3. Test of de remmen goed werken.
4. Controleer of de hoogteverstelling goed vastklikt.
5. Klap de rollator altijd volledig uit voor gebruik.
6. Let goed op uw omgeving tijdens het lopen.
7. Steek geen handen in het vouwmechanisme, dit kan verwondingen veroorzaken.
8. Gebruik de rollator niet als rolstoel; het is een loophulpmiddel.
9. Ga nooit zitten zonder eerst de parkeerrem te gebruiken. Dit voorkomt wegglijden.
10. Laat u niet vallen op de zitting. Ga rustig en gecontroleerd zitten. Vraag hulp als dat nodig is.
11. Hang geen zware voorwerpen aan de handgrepen. Dit beïnvloedt de rem en stabiliteit.

Volgt u deze veiligheidsregels, dan gebruikt u de rollator veilig en betrouwbaar.

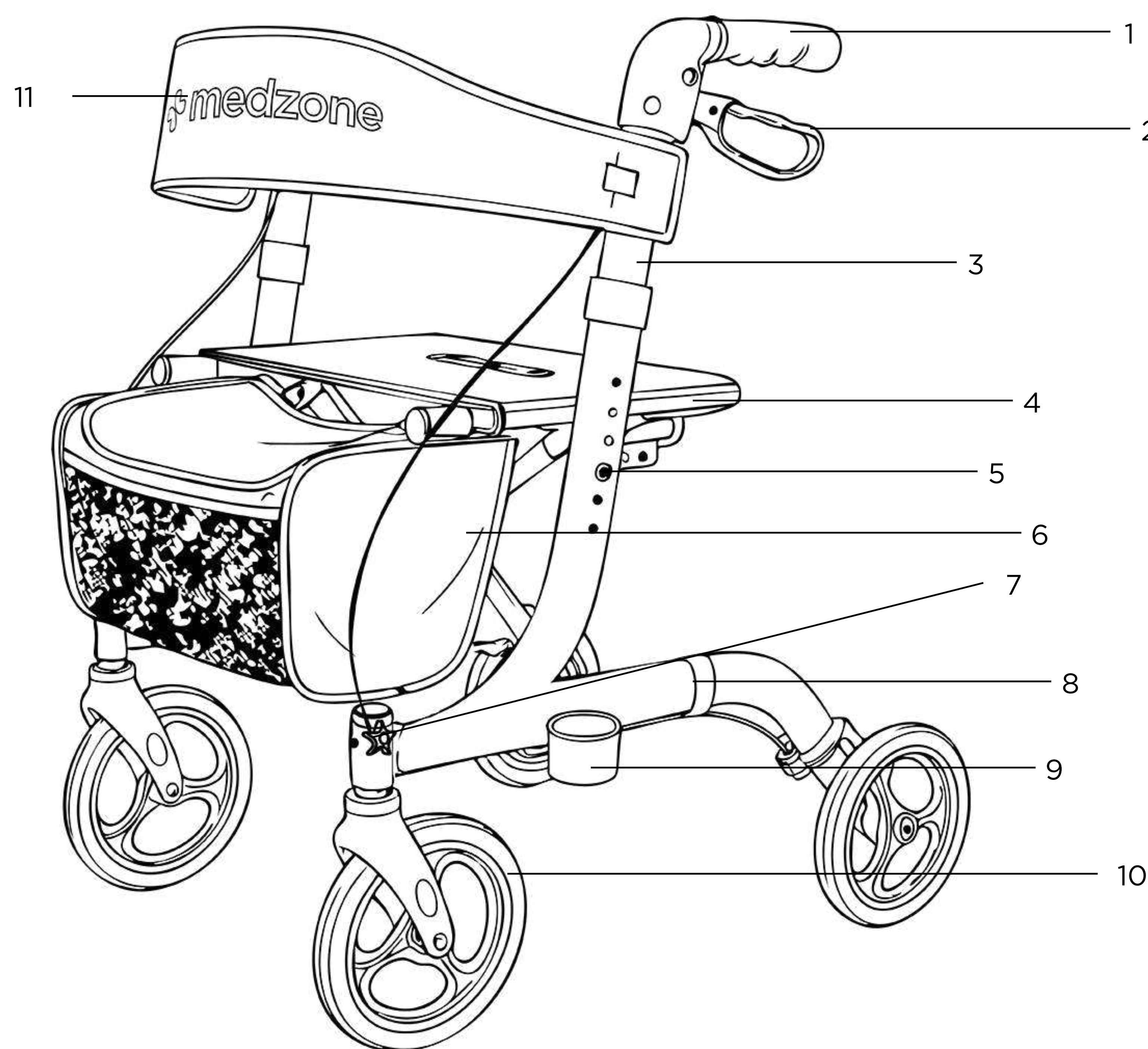

Onderdelen van de rollator

- 1. Handgreep
- 2. Remhendel
- 3. Verstelbare leuning
- 4. Zitting
- 5. Drukknop voor hoogteverstelling
- 6. Boodschappentas
- 7. Knopschroef voor installatie van het voorwiel
- 8. Drukknop voor installatie van het achterwiel
- 9. Stokhouder
- 10. Wielen (diameter: 20 cm)
- 11. Rugleuning

Let op:
Uw rollator bestaat uit meerdere onderdelen. Maak uzelf eerst vertrouwd met deze onderdelen voordat u de instructies volgt. Wij behouden ons het recht voor om het ontwerp en de specificaties aan te passen.


Technische specificaties

Breedte tussen de handgrepen		53 cm
Totale breedte		61.5 cm
Totale diepte		70 cm
Zitvlak		46 x 25 cm
Zithoogte		55 cm
Verstelbare hoogte van de handgreep		82 - 95 cm
Max. gebruikersgewicht*		136 KG
Gewicht rollator		7 KG


**De aluminium rollator is bedoeld voor gebruikers met verminderde mobiliteit en heeft een maximale gebruikersbelasting van 136 kg.*

Montage-instructies


1. Verwijder het verpakkingsmateriaal.

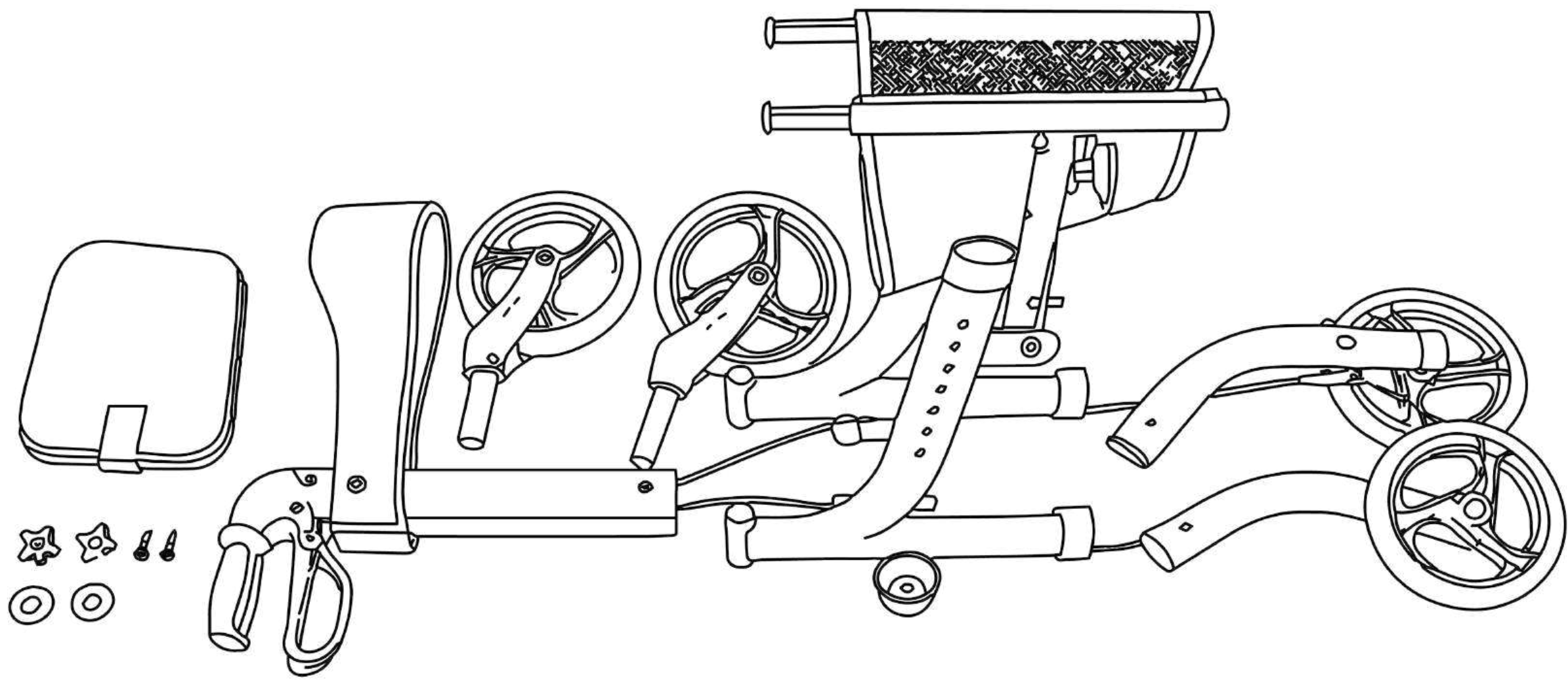


2. Zet het frame rechtop en duw beide zijden naar beneden tot je een klik hoort.

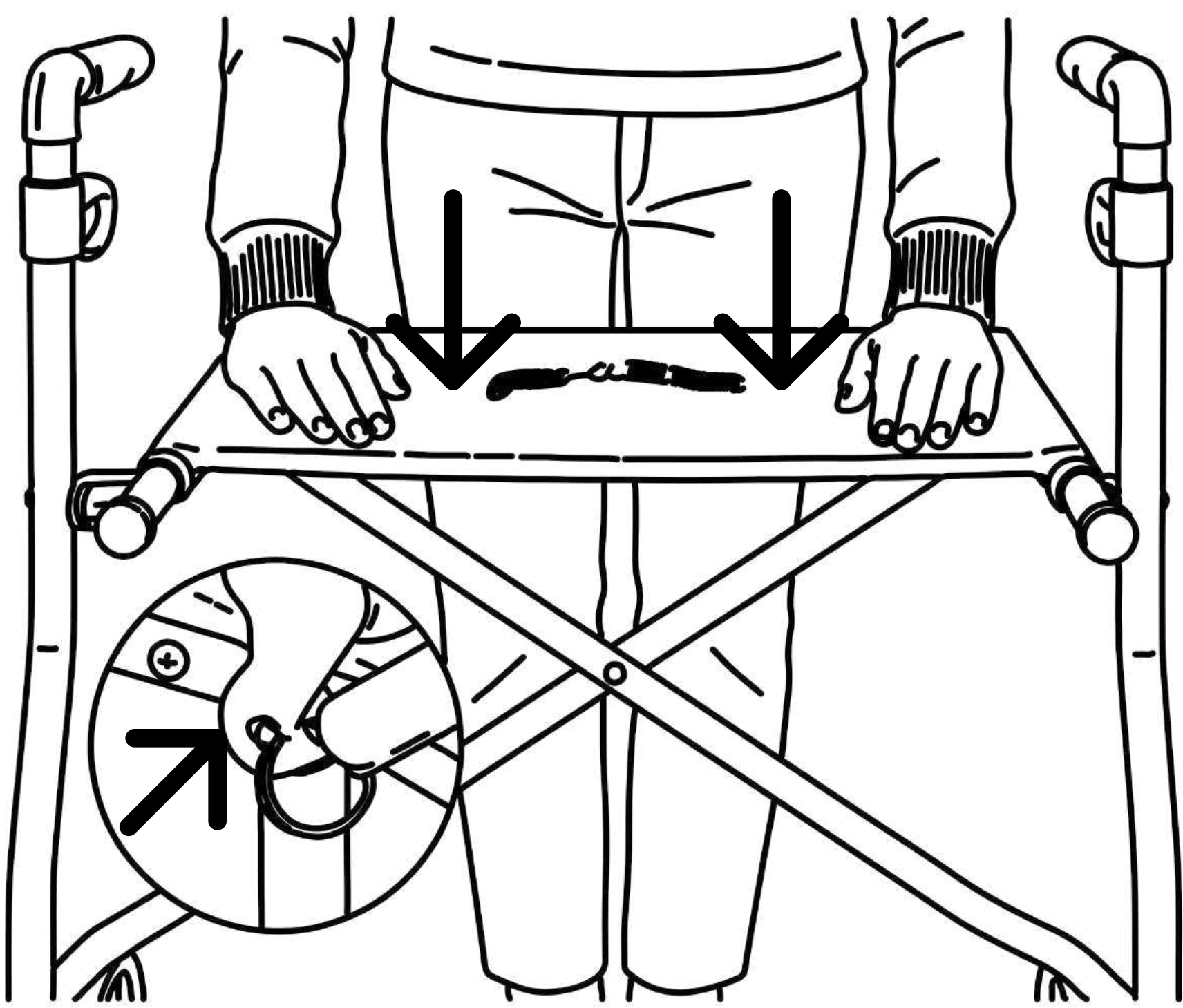

3. Monteer de voorwielen. Plaats de bout door het zeskantige gat, voeg de ring toe en draai de knop stevig vast.

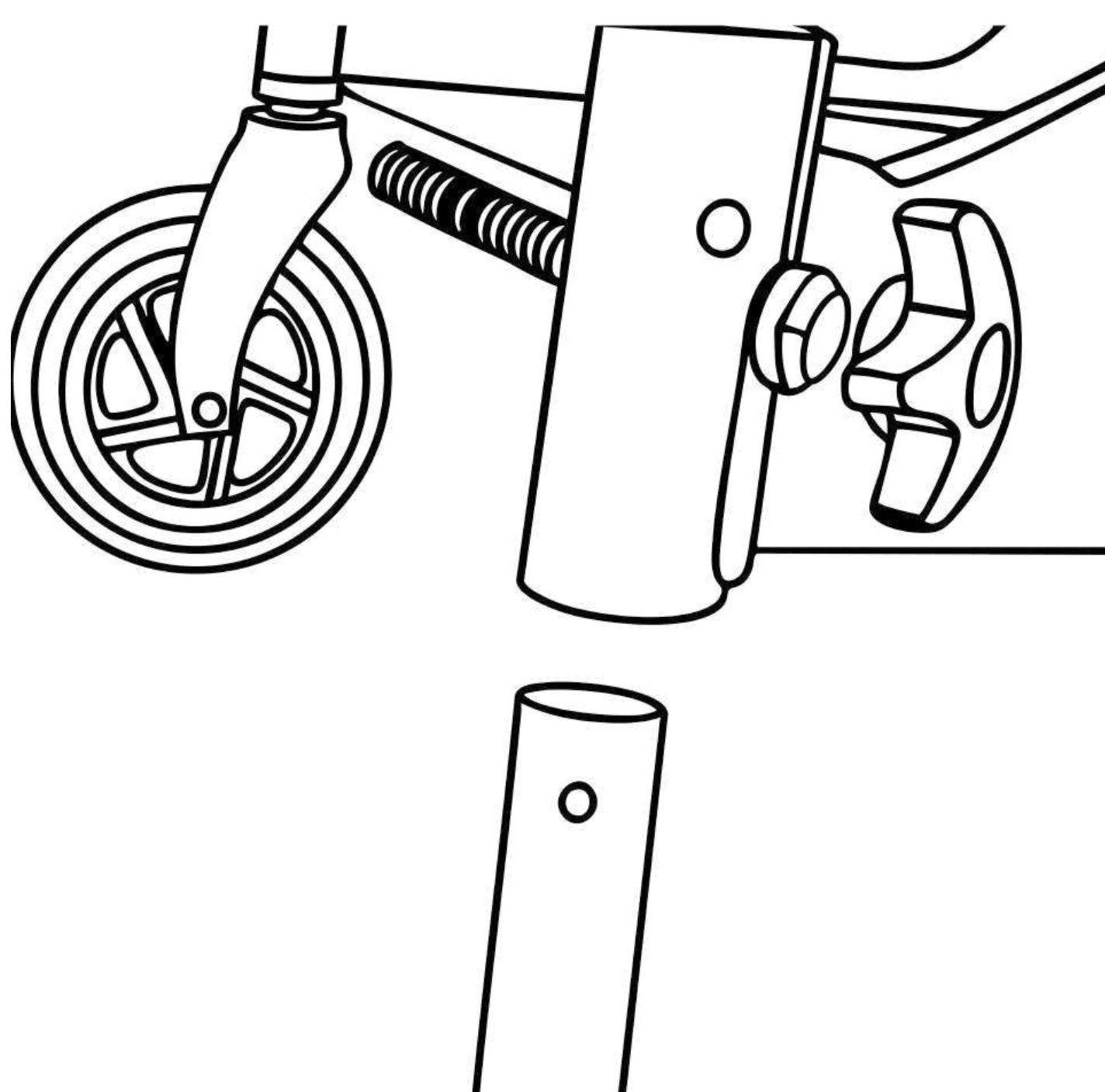


4. Bevestig de achterpoten. Schuif de achterbuis op zijn plaats en klik de vergrendelingsknop vast.

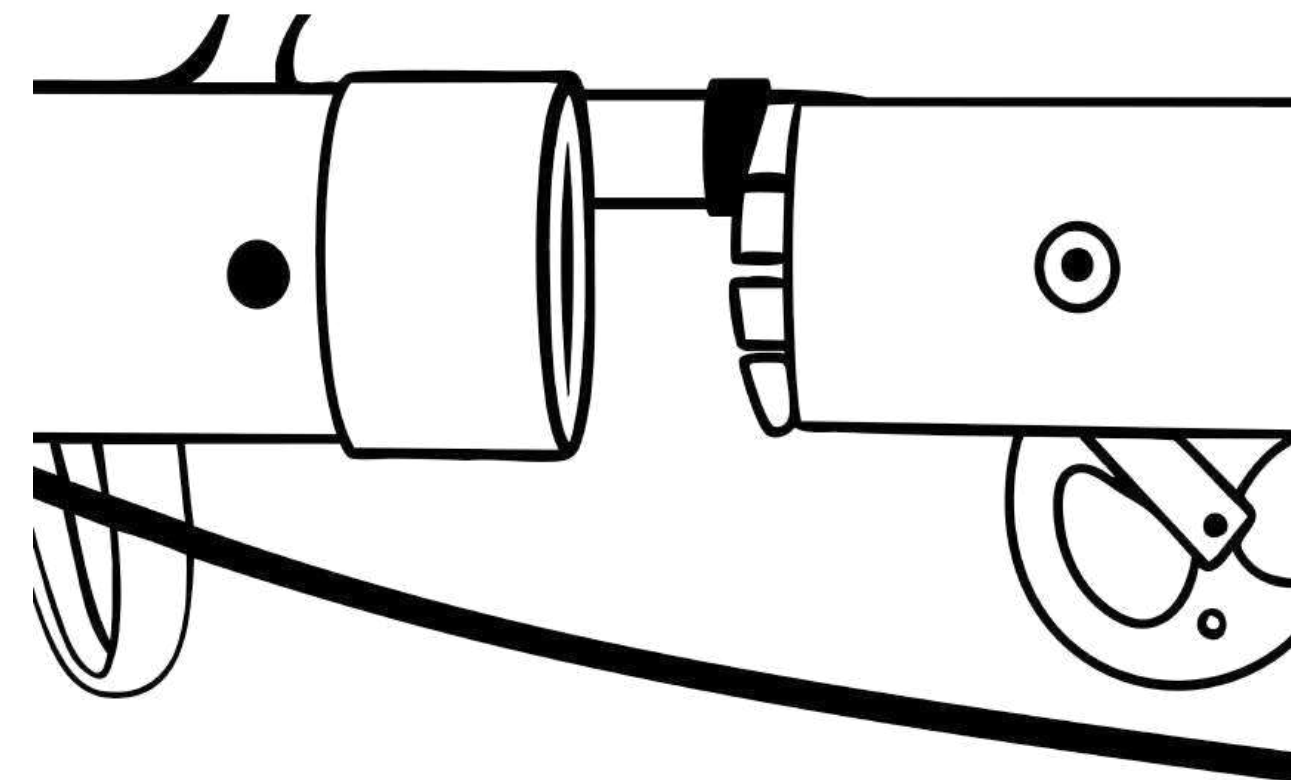

Hoogte handgrepen verstellen


1. Druk het knopje (5) op het frame naar binnen.
2. Schuif de handgreep omhoog of omlaag naar de gewenste hoogte.
3. Laat de knop los zodat deze weer vastklikt.
4. Herhaal dit aan de andere kant.

Let op: zorg dat beide handgrepen op gelijke hoogte staan en stevig vastzitten vóór gebruik.

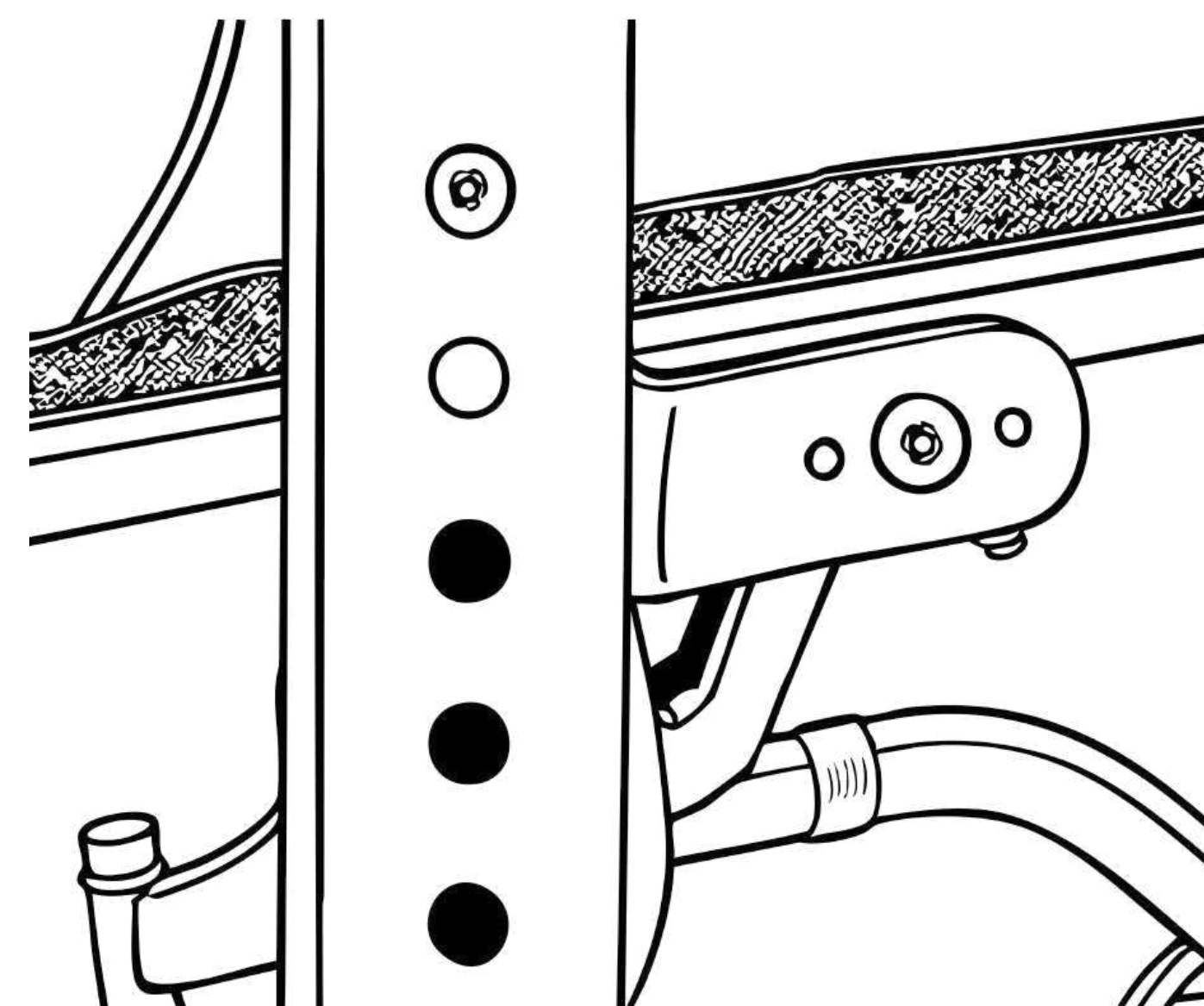


Remmen afstellen


- Draai de stelschroef met de klok mee om de remspanning te verhogen.
- Houd de stelschroef vast en draai de borgmoer aan om te vergrendelen.

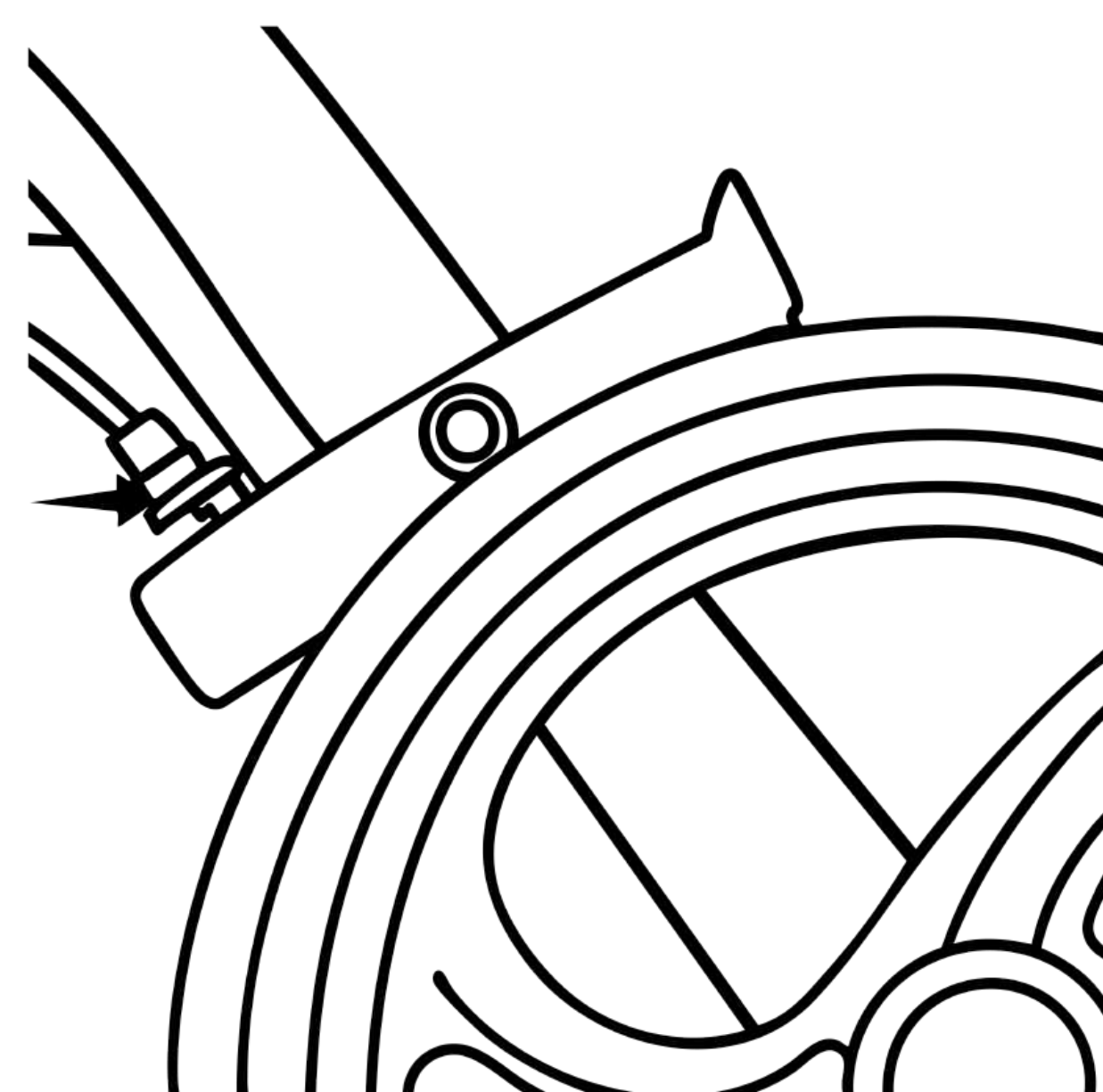


Rollator ingeklapt

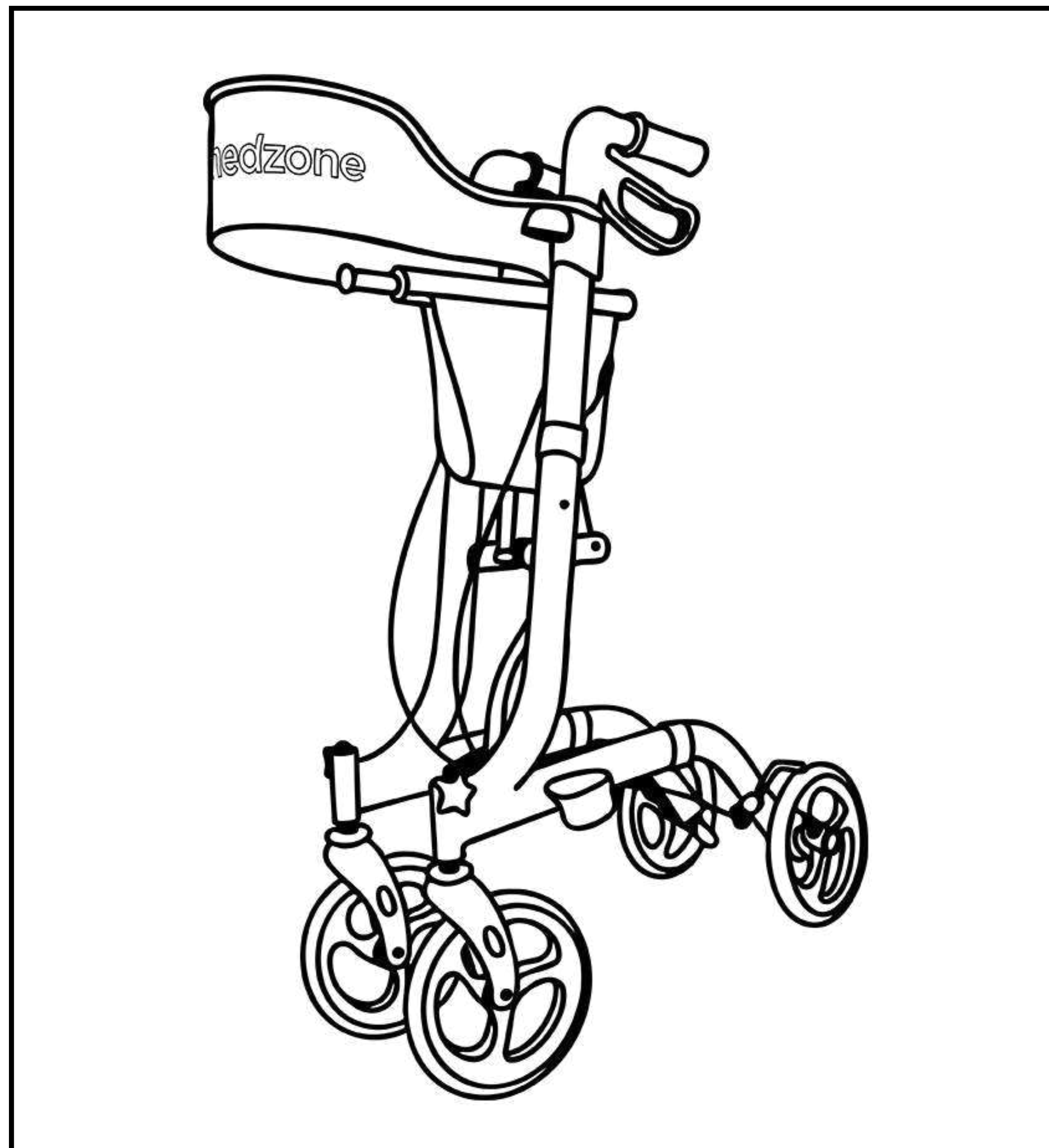


Boodschappentas ophangen

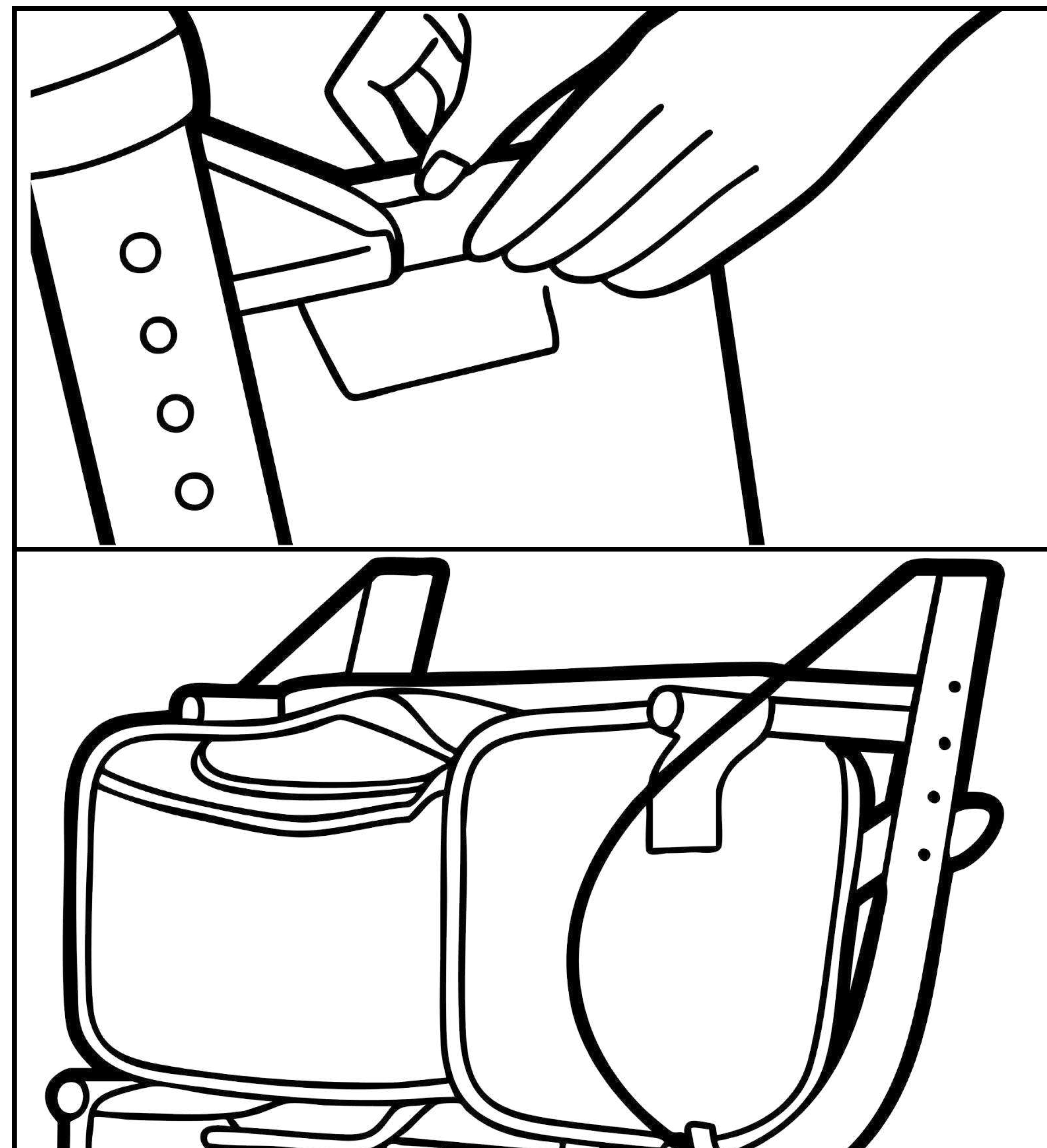

Parkeerrem

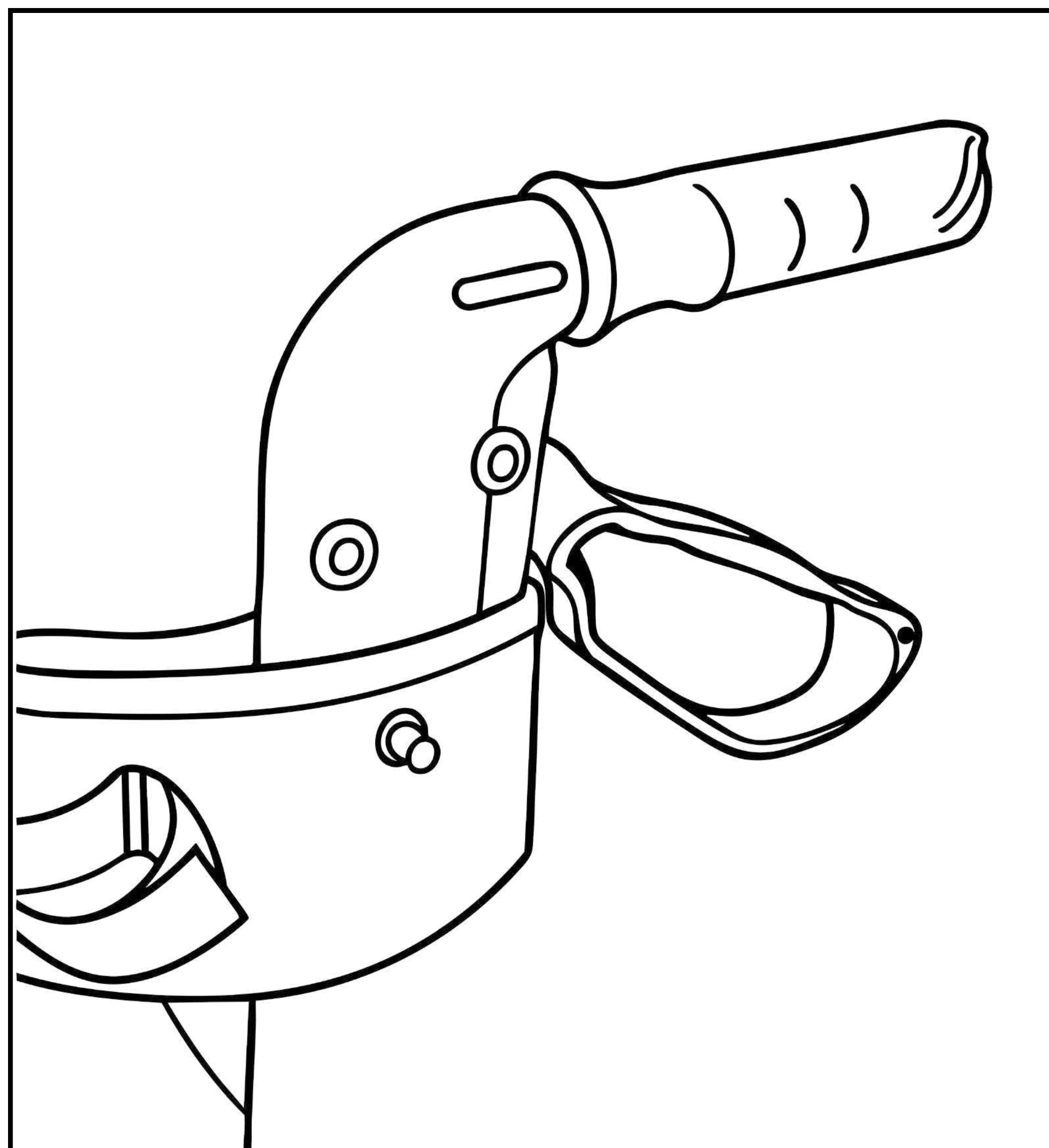

Voorwiel juist geïnstalleerd

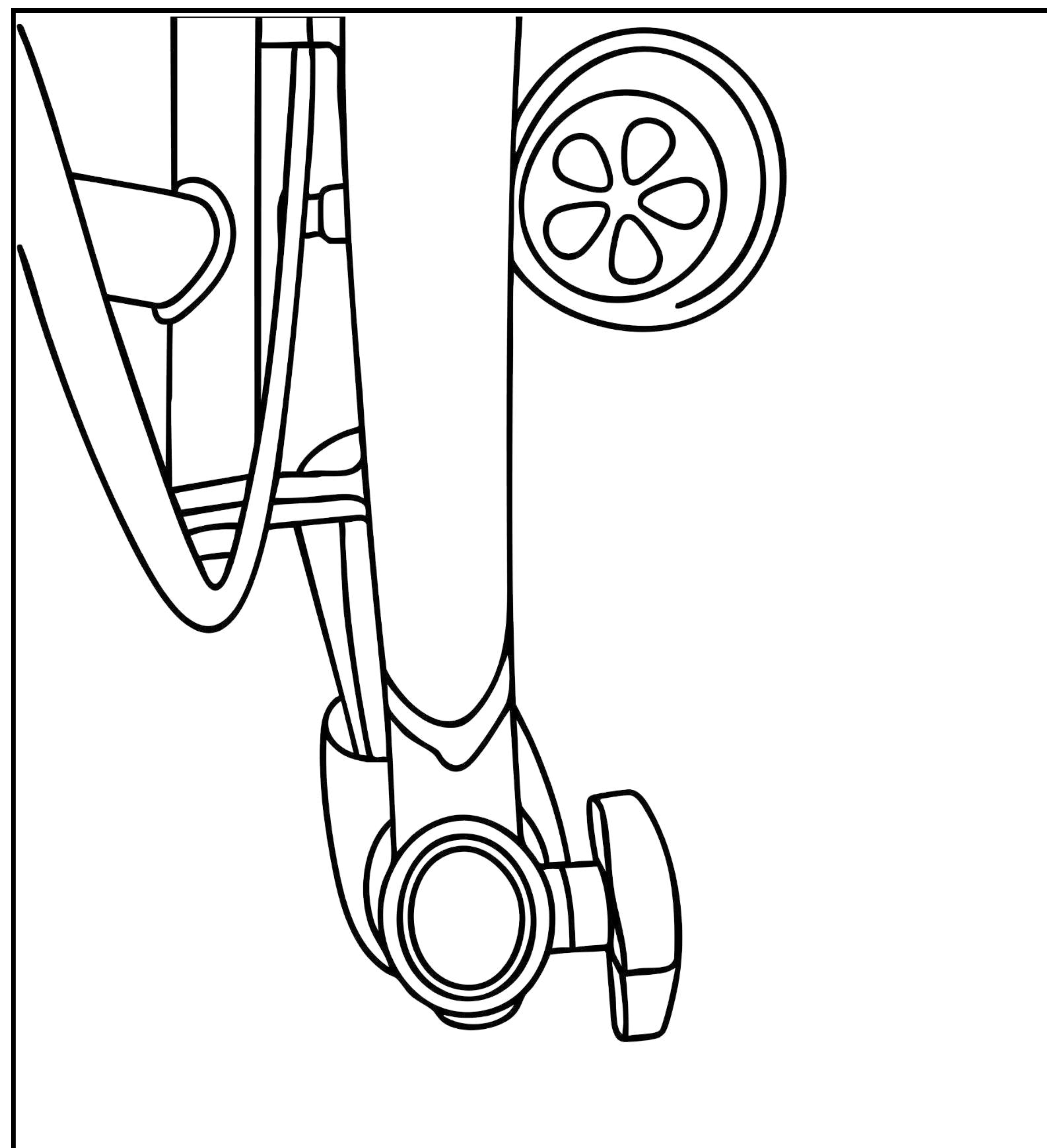

Onderhoud

Na verloop van tijd kunnen onderdelen slijten, vooral de remkabels en wielen. Laat uw rollator regelmatig controleren en onderhoud uitvoeren door een erkende dealer.

Onderhoudsschema:

- **Wekelijks:**
 - Controleer op storingen
 - Controleer of wielen en zwenkwielen goed vastzitten
- **Maandelijks:**
 - Controleer handgrepen op slijtage
 - Controleer of het frame stabiel is
 - Controleer remmen en remhendels
 - Controleer voor- en achterwielen
 - Controleer banden op slijtage of scheurtjes
- **Jaarlijks:**

Laat uw rollator jaarlijks nakijken door een erkende dealer voor inspectie, smering en afstelling.
- **Onderdelen die onderhoud nodig hebben:**
 - Wielen
 - Handgrepen
 - Remmen
 - Remhendels
 - Lagers
 - Knoppen

Schoonmaak

Reinig de rollator met een vochtige doek en mild schoonmaakmiddel.

- Gebruik géén agressieve reinigers, schuurmiddelen of hogedrukreinigers, deze kunnen de coating beschadigen.
- Droog de handgrepen en zitting goed af na schoonmaak.


Waarschuwing

1. Maximaal gebruikersgewicht: 136 kg
2. Niet gebruiken als zitproduct om geduwd te worden.
3. Zorg ervoor dat beide handvatten op gelijke hoogte staan.
4. Pas de hoogte aan in overleg met een specialist.
5. Houd altijd veilige afstand tussen voeten en wielen.
6. Losse onderdelen kunnen schade veroorzaken of letsel geven.
7. Vervang beschadigde zwenkwielen alleen met originele onderdelen.
8. Klap de rollator altijd volledig open vóór gebruik.
9. Houd vingers weg van het schaarmechanisme bij het openen of sluiten.





ROLLATOR | FORTIS USER MANUAL

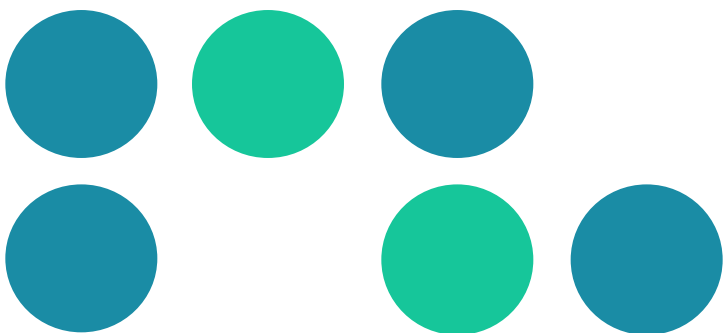

About the FORTIS Rollator

The FORTIS rollator is lightweight and made of sturdy aluminum. It features a seat, a shopping bag, and reliable parking brakes. The shock absorption ensures a comfortable ride. The frame is easy to fold for transport and storage. Ideal for daily use by elderly users with reduced strength or mobility.

Use

The rollator is a walking aid with a seat and shopping bag, suitable for people with limited mobility. It is designed for both indoor and outdoor use, up to a maximum user weight (see specifications).

The user must have sufficient strength, vision, and cognitive ability to use the rollator safely. If in doubt, consult your doctor or dealer.

Always read the safety instructions carefully to prevent injury and damage.

Safety Information

The rollator supports a safe and natural walking pattern. You walk with your weight positioned between the hand grips and the rollator in front of you.

Read this manual carefully before use.


Tested according to EN ISO 11199-2:2021.

The Unique Device Identifier (UDI) is stated on the product label and/or packaging.

Safe Use of the Rollator

1. Always engage the parking brakes when the rollator is stationary.
2. Check before use that all wheels rotate freely.
3. Ensure the brakes are functioning properly.
4. Check that the height adjustment is securely locked.
5. Always fold out the rollator completely before use.
6. Pay close attention to your surroundings while walking.
7. Do not place hands in the folding mechanism; this may cause injury.
8. Use the rollator only as intended; it is not a toy.
9. Never sit down without first applying the parking brakes. This prevents rolling away.
10. Do not let yourself fall onto the seat. Sit down calmly and in a controlled manner. Ask for help if needed.
11. Do not hang heavy objects on the hand grips. This affects braking and stability.

By following these safety rules, you will use the rollator safely and reliably.

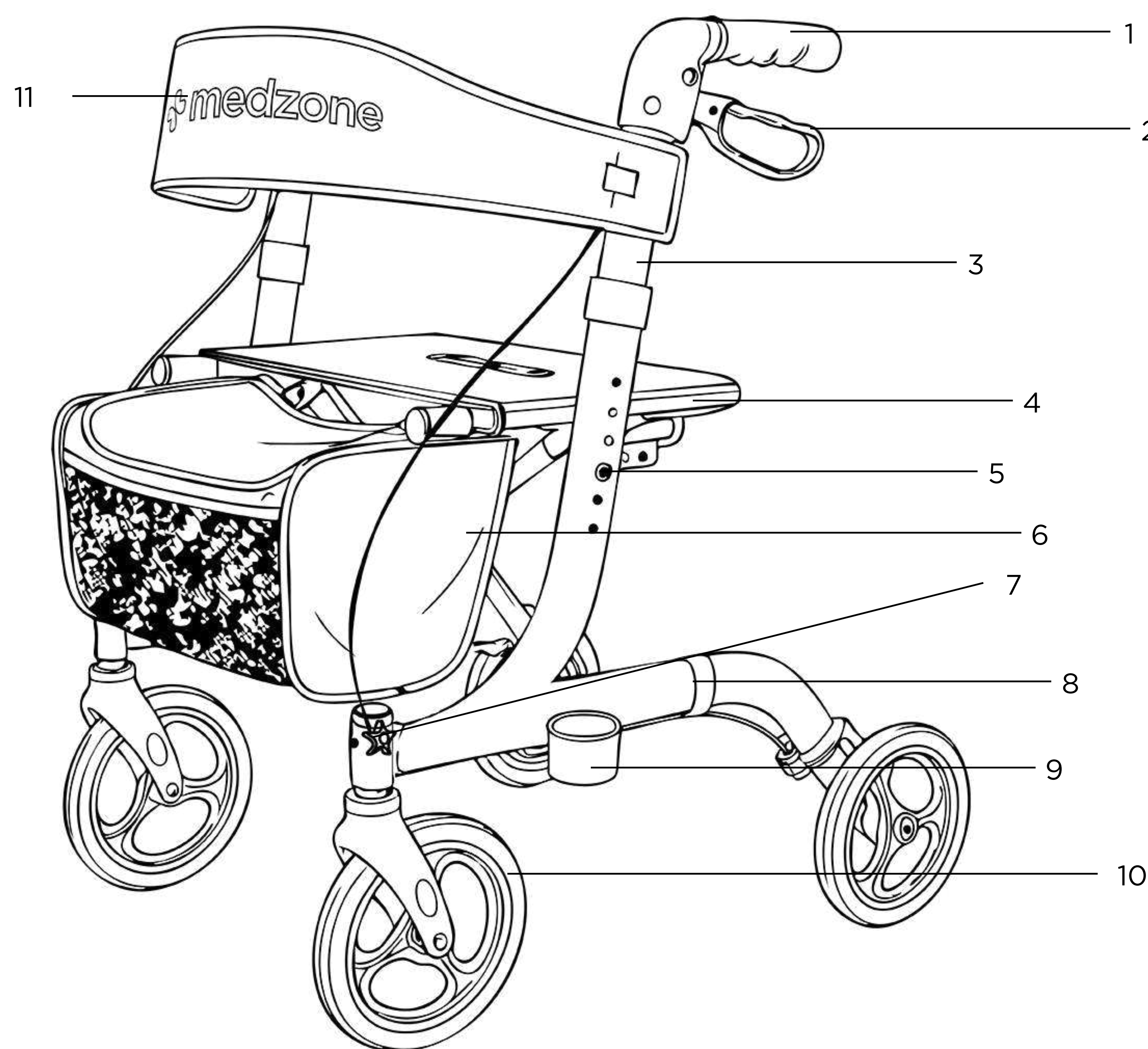

Rollator Components

- 1. Hand grip
- 2. Brake lever
- 3. Adjustable backrest
- 4. Seat
- 5. Push button for height adjustment
- 6. Storage bag
- 7. Mounting knob for front wheel installation
- 8. Mounting knob for rear wheel installation
- 9. Push handle
- 10. Wheels (diameter: 20 cm)
- 11. Frame

Disclaimer:

Your rollator consists of several components. Despite the care taken in the design and development of the product, we reserve the right to modify the design and specifications.


Technische specificaties

Width between hand grips		53 cm
Total width		61.5 cm
Total depth		70 cm
Seat width		46 x 25 cm
Seat height		55 cm
Adjustable handle height		82 - 95 cm
Maximum user weight*		136 KG
Product weight		7 KG


**The aluminum frame is designed to support the maximum user weight of 136 kg.*

Assembly Instructions


1. Remove all packaging materials.

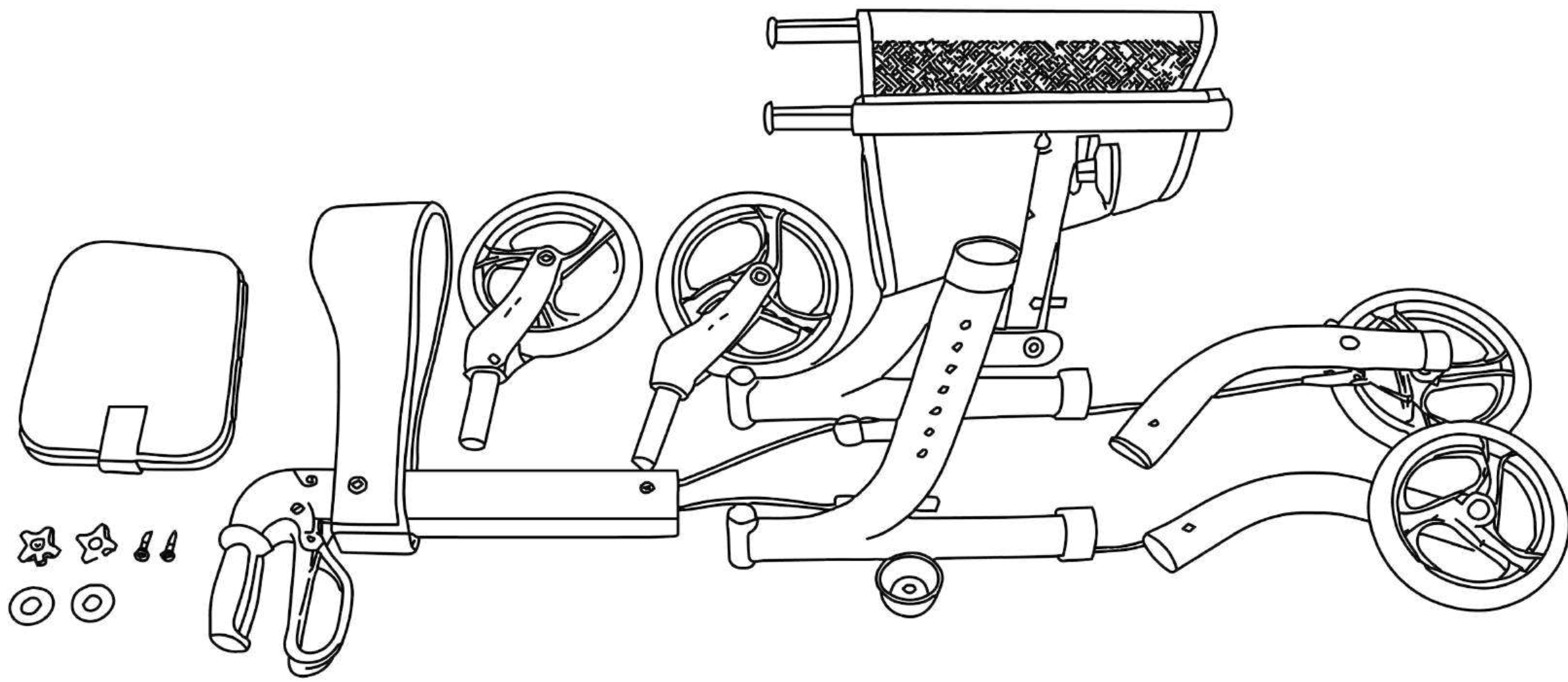


2. Place the frame upright and push both sides downward until you hear a click.

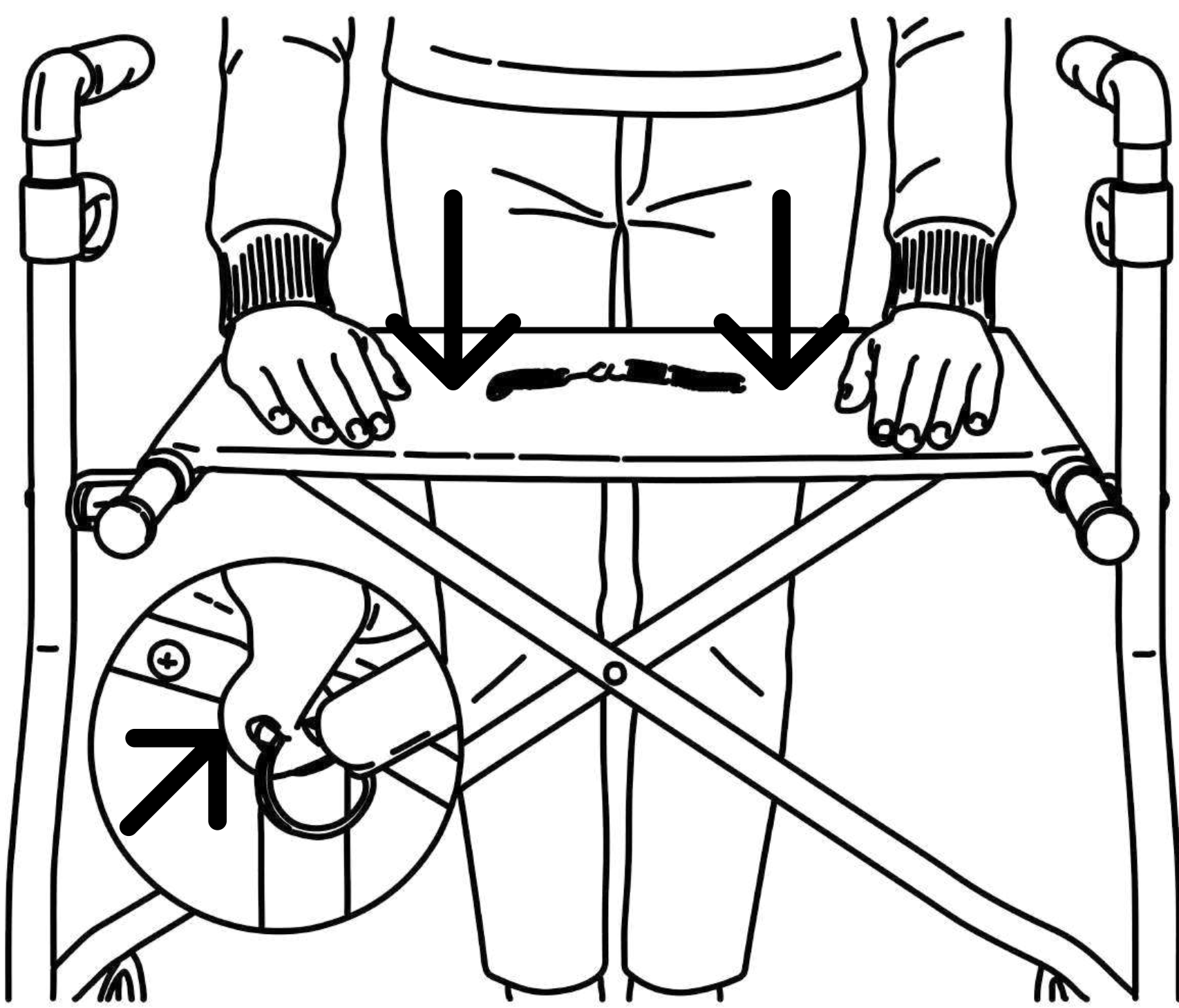

3. Install the front wheels. Insert the bolt through the hexagonal hole, add the washer, and tighten the knob securely.

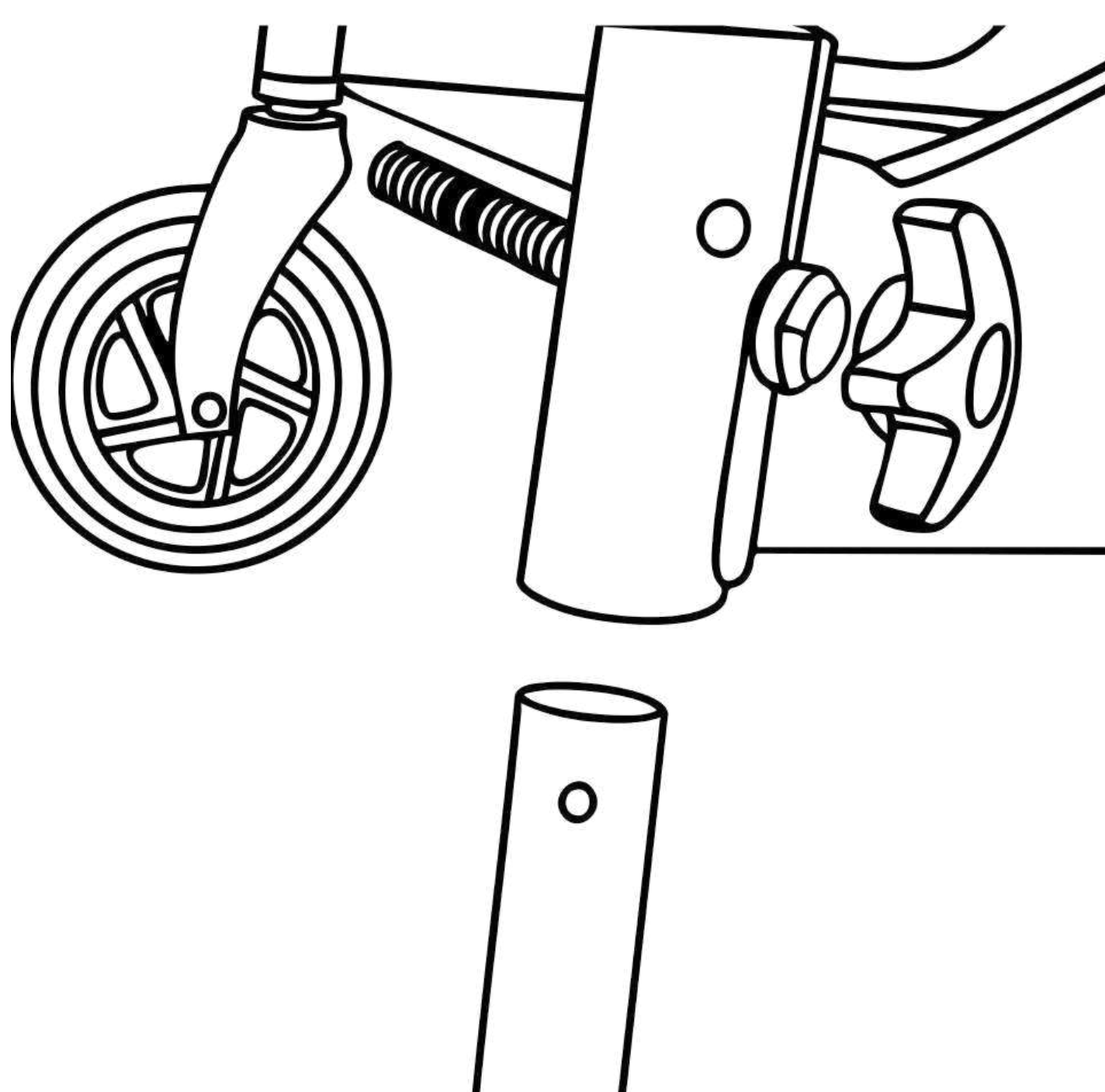


4. Attach the rear wheels. Slide the rear tube into position and press until the locking button clicks into place.

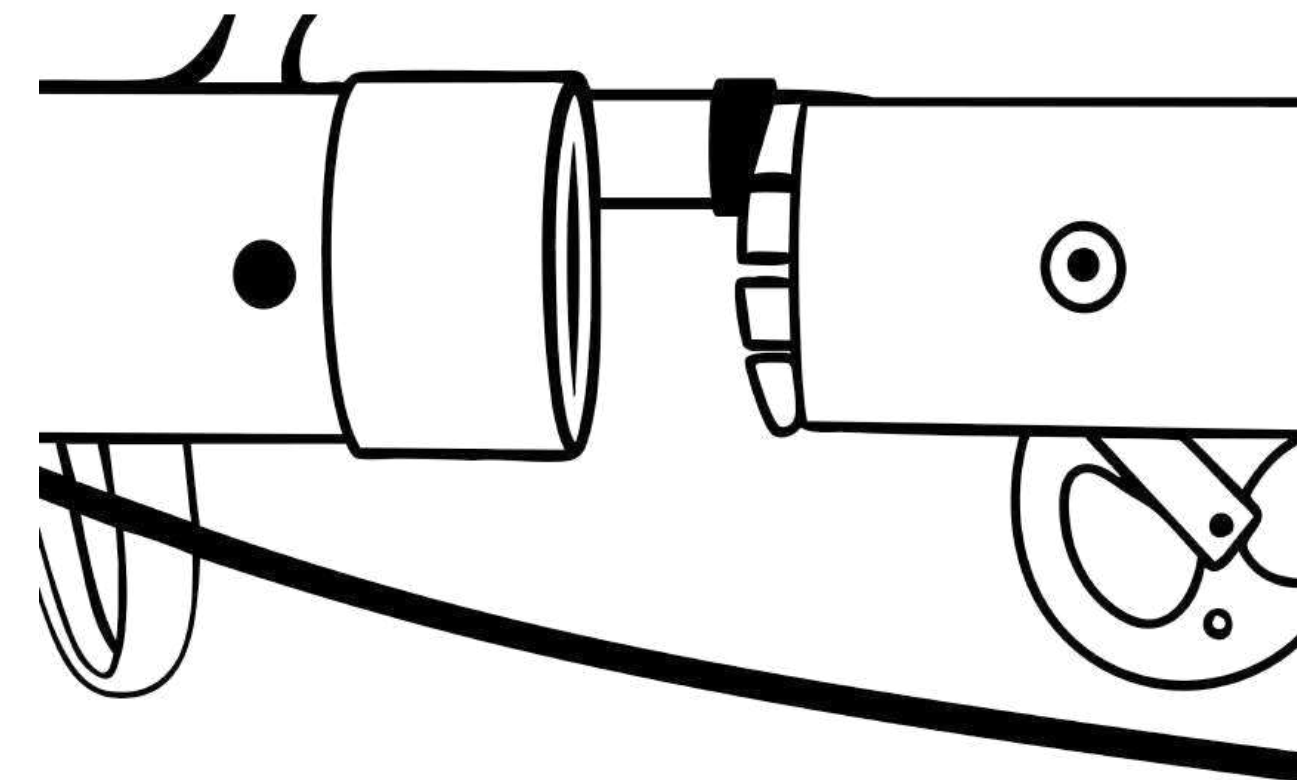

Adjusting the Handle Height


1. Press the button (5) on the frame inward.
2. Slide the handle grips up or down to the desired height.
3. Release the button so it locks back into place.
4. Repeat this process on the other side.

Note: Ensure both handle grips are set to the same height and are securely locked before use.

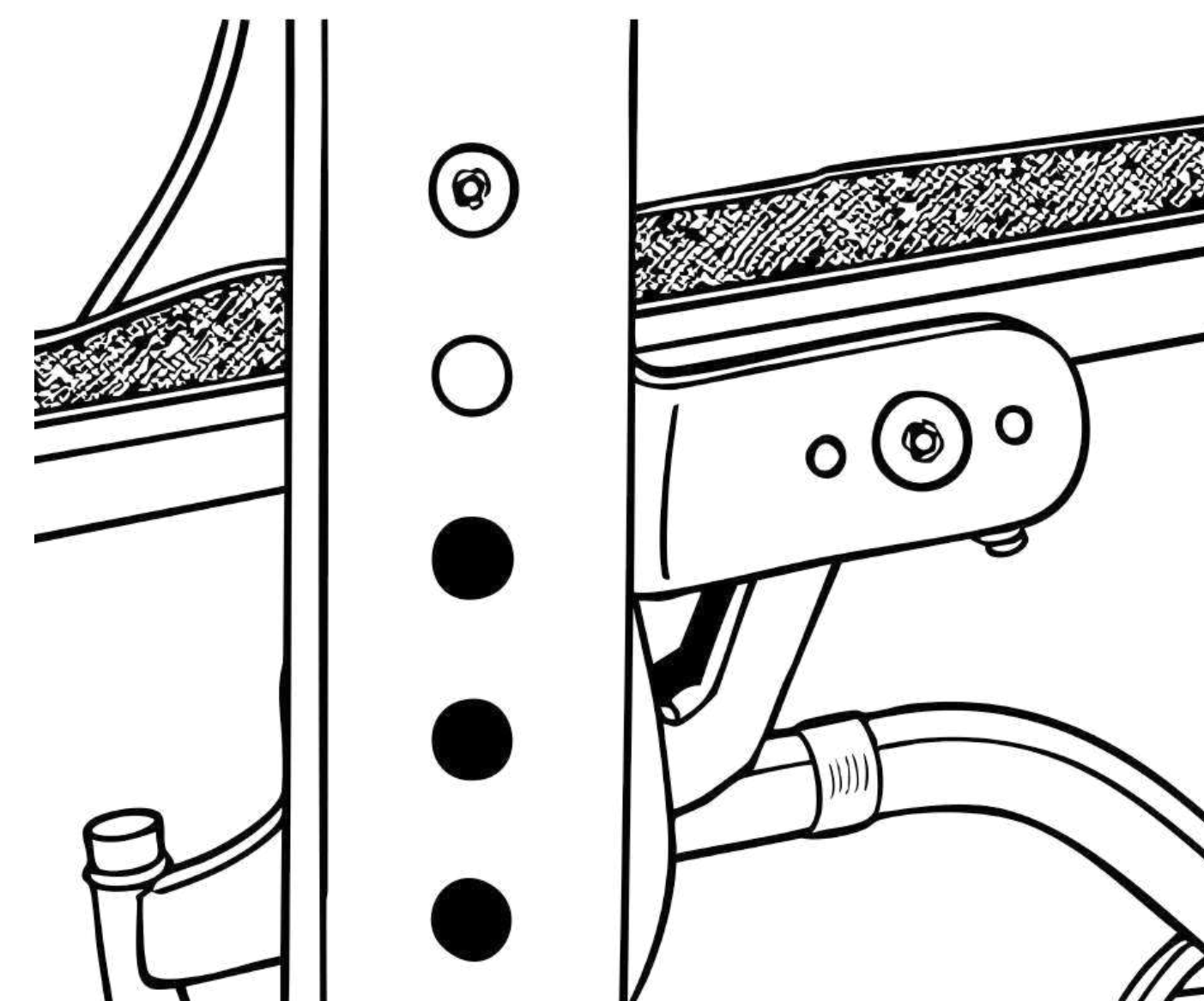


Adjusting the Brakes


- Turn the adjustment screw clockwise to increase brake tension.
- Hold the adjustment screw and tighten the lock nut to secure the setting.

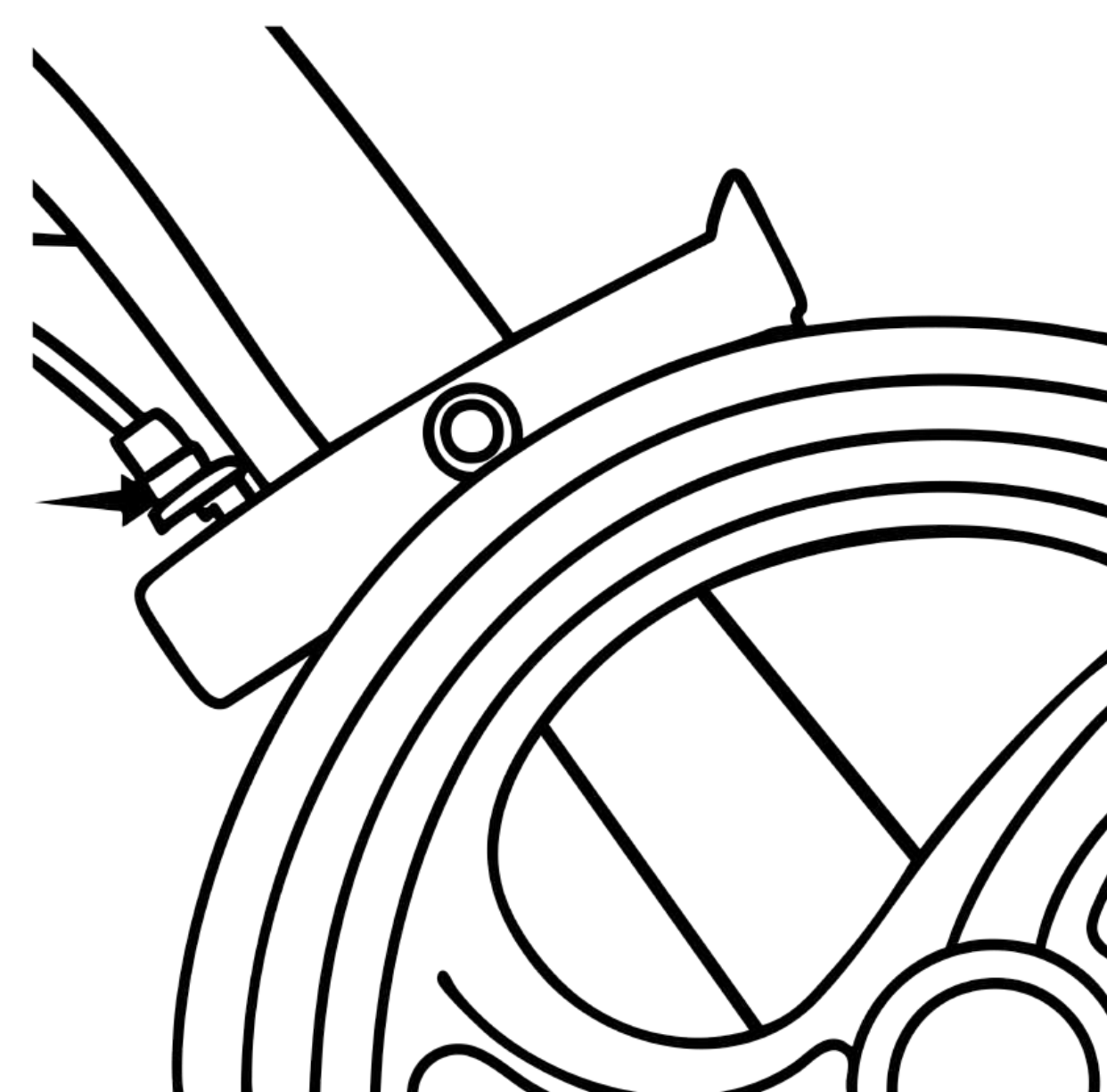


Rollator folded

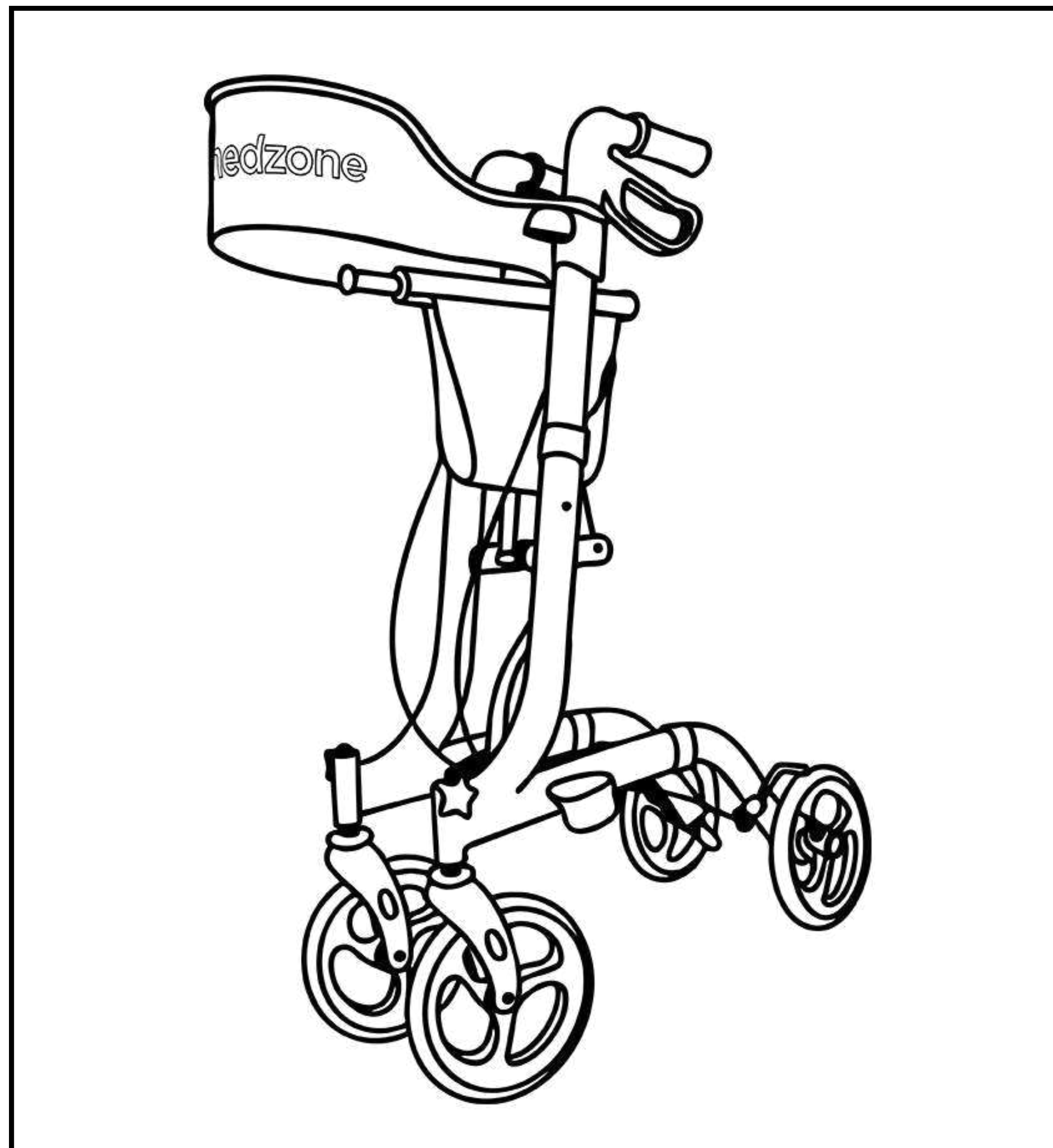


Attaching the shopping bag

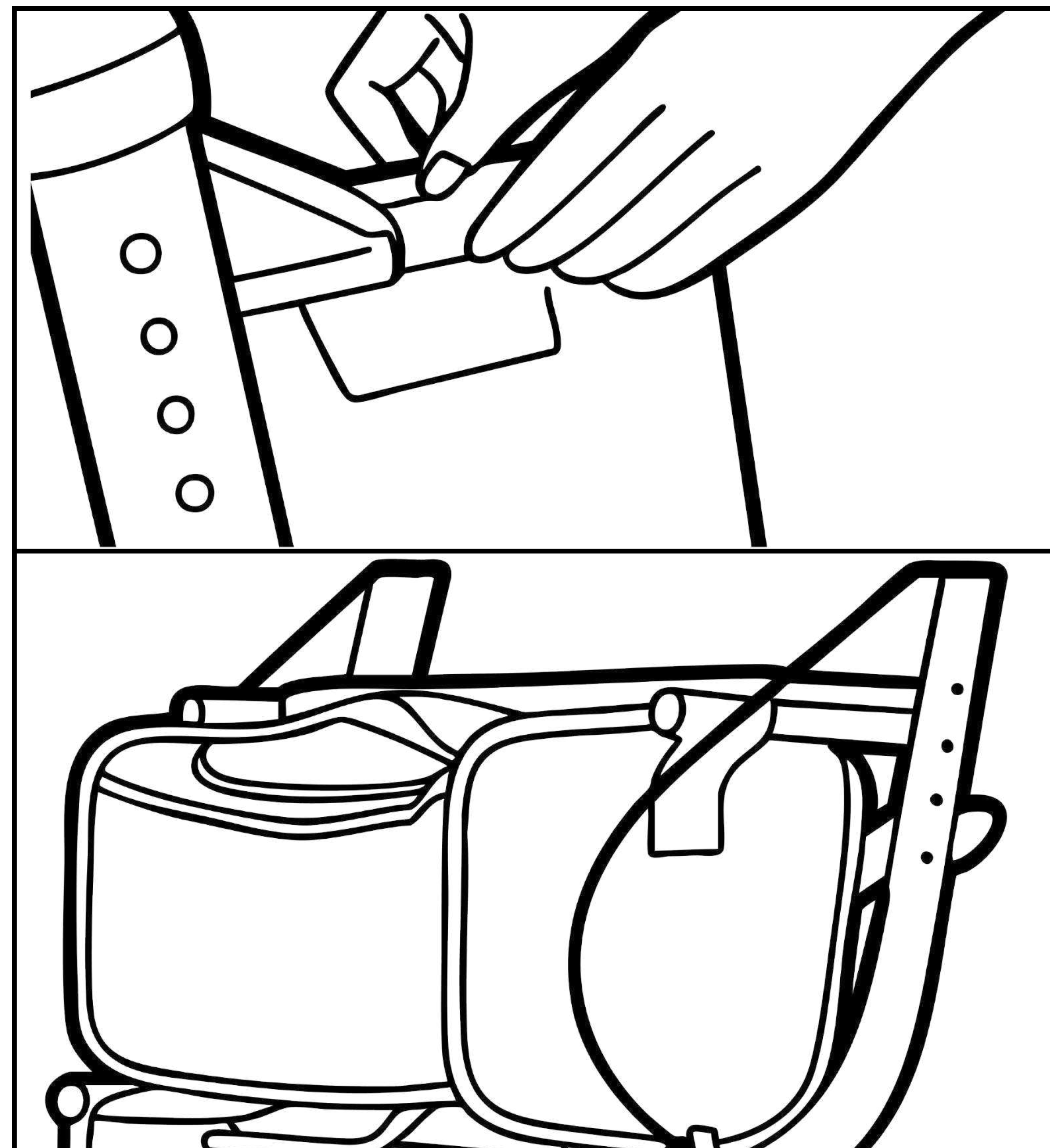

Parking brake

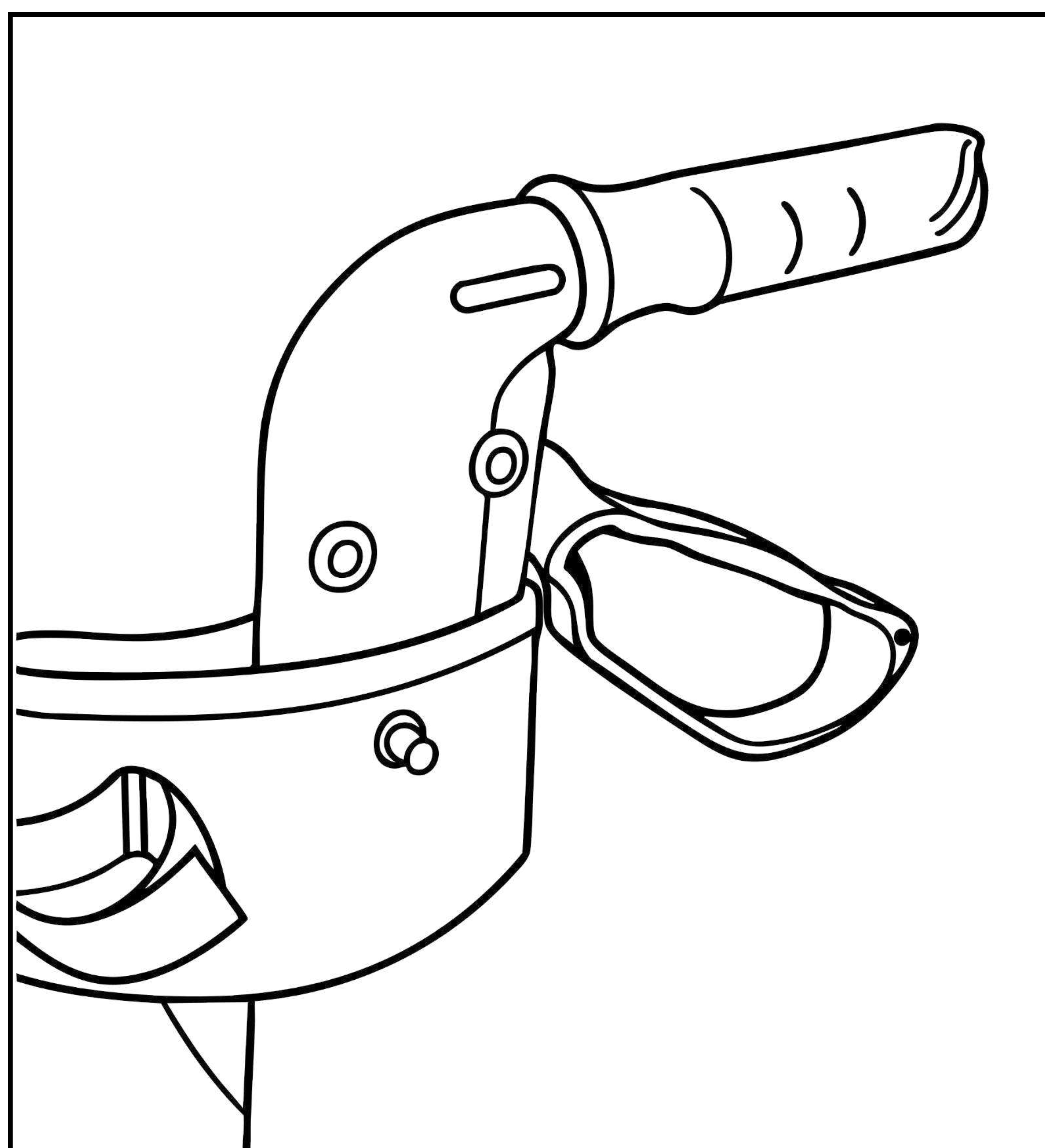

Front wheel correctly installed

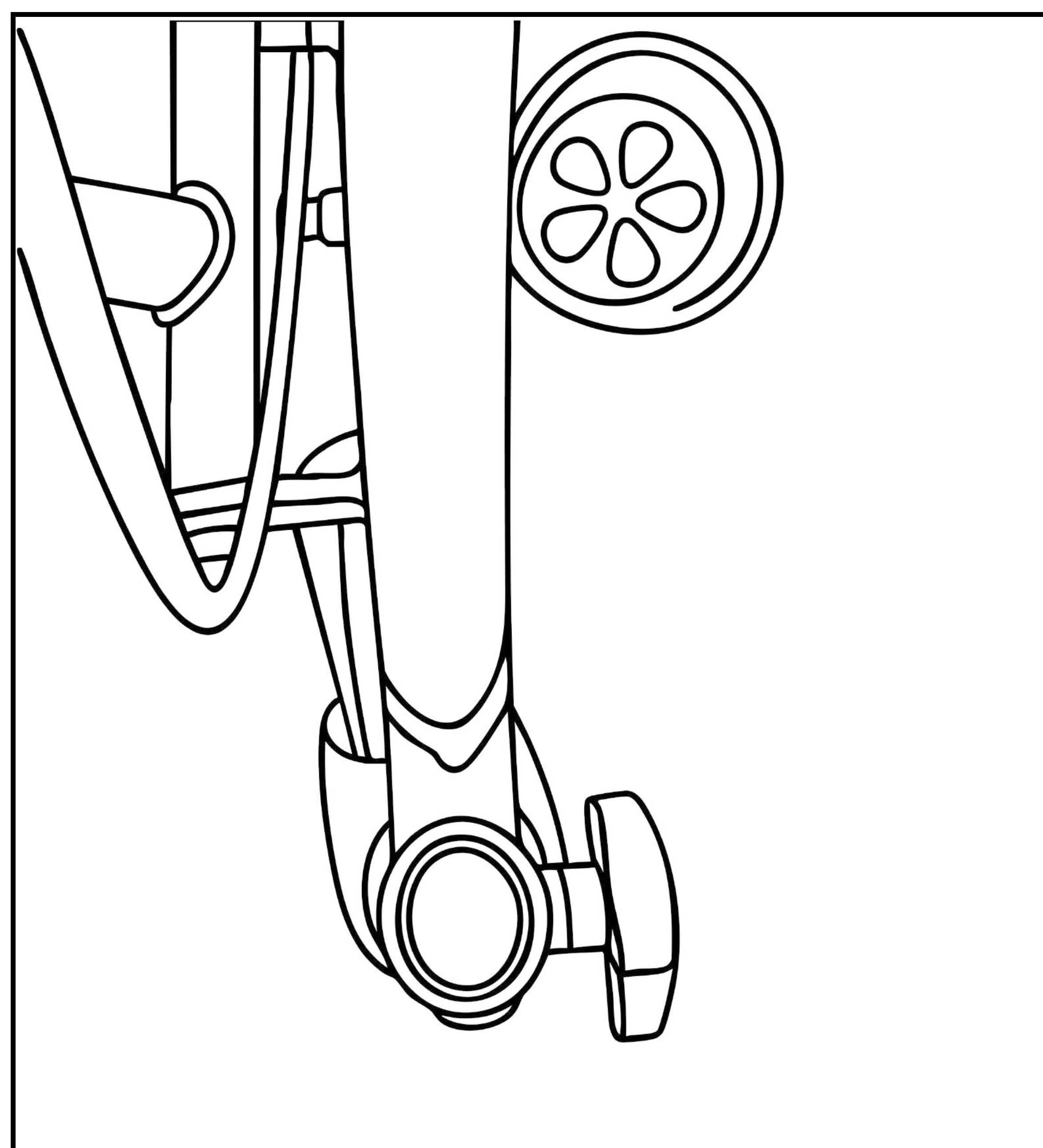

Maintenance

Over time, parts may wear out, especially the brake cables and wheels. Have your rollator checked and serviced regularly by an authorized dealer.

Maintenance Schedule:

- **Weekly:**
 - Check for malfunctions
 - Check that wheels and swivel wheels are securely fastened
- **Monthly:**
 - Check hand grips for wear
 - Check that the frame is stable
 - Check brakes and brake levers
 - Check front and rear wheels
 - Check tires for wear or cracks
- **Annually:**

Have the rollator inspected annually by an authorized dealer for inspection, lubrication, and adjustment.

- **Parts Requiring Maintenance:**

- Wheels
- Hand grips
- Brakes
- Brake levers
- Bearings
- Knobs

Cleaning

Clean the rollator with a damp cloth and mild detergent.

- Do not use aggressive cleaners, abrasive agents, or high-pressure cleaners, as these may damage the coating.
- Dry the hand grips and seat thoroughly after cleaning.

Warning

1. Maximum user weight: 136 kg
2. Do not use as a seat while being pushed.
3. Ensure both hand grips are set to the same height.
4. Adjust the height only in consultation with a specialist.
5. Always keep a safe distance between feet and wheels.
6. Loose parts may cause damage or injury.
7. Replace damaged swivel wheels only with original parts.
8. Always fully unfold the rollator before use.
9. Keep fingers away from the folding mechanism when opening or closing.



ROLLATOR | FORTIS GEBRAUCHSANLEITUNG



Über den FORTIS-Rollator

Der FORTIS-Rollator ist leicht und aus robustem Aluminium gefertigt. Er verfügt über einen Sitz, eine Einkaufstasche und sichere Parkbremsen. Die Handgriffe sind höhenverstellbar. Der Rahmen lässt sich einfach zusammenklappen und ist dadurch leicht zu transportieren und zu verstauen. Ideal für den täglichen Gebrauch durch ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Kraft oder Mobilität.

Gebrauch

Der Rollator ist eine Gehhilfe mit Sitz und Einkaufstasche, geeignet für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Er ist für den Innen- und Außenbereich bestimmt (maximales Benutzergewicht siehe Spezifikationen).

Der Benutzer muss über ausreichende Kraft, Sehvermögen und geistige Fähigkeiten verfügen, um den Rollator sicher zu benutzen. Im Zweifelsfall: wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Händler.

Lesen Sie vor der Benutzung stets die Sicherheitshinweise, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.

Sicherheitsinformationen

Der Rollator unterstützt eine sichere und natürliche Gehbewegung. Sie gehen mit dem Körpergewicht zwischen den Handgriffen, während sich der Rollator vor Ihnen befindet.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung sorgfältig durch.

Getestet gemäß EN ISO 11199-2:2021.


Die Unique Device Identification (UDI) ist auf dem Produktetikett und/oder der Verpackung angegeben.

Sichere Verwendung des Rollators

1. Ziehen Sie immer die Parkbremse an, wenn der Rollator stillsteht.
2. Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob alle Räder korrekt befestigt sind.
3. Prüfen Sie, ob die Bremsen ordnungsgemäß funktionieren.
4. Kontrollieren Sie, ob die Höhenverstellung korrekt eingestellt ist.
5. Klappen Sie den Rollator vollständig aus, bevor Sie ihn benutzen.
6. Achten Sie während des Gehens auf Ihre Umgebung.
7. Halten Sie Ihre Hände vom Klappmechanismus fern – es besteht Verletzungsgefahr.
8. Verwenden Sie den Rollator nicht als Rollstuhl; er ist eine Gehhilfe.
9. Setzen Sie sich niemals hin, ohne vorher die Parkbremse zu betätigen.
10. Setzen Sie sich kontrolliert und langsam hin. Lassen Sie sich ggf. dabei unterstützen.
11. Hängen Sie keine Gegenstände an die Handgriffe. Dies beeinträchtigt Bremswirkung und Stabilität.

Wenn Sie diese Sicherheitsregeln befolgen, nutzen Sie den Rollator sicher und zuverlässig.

BEDIENUNGSANLEITUNG - DE

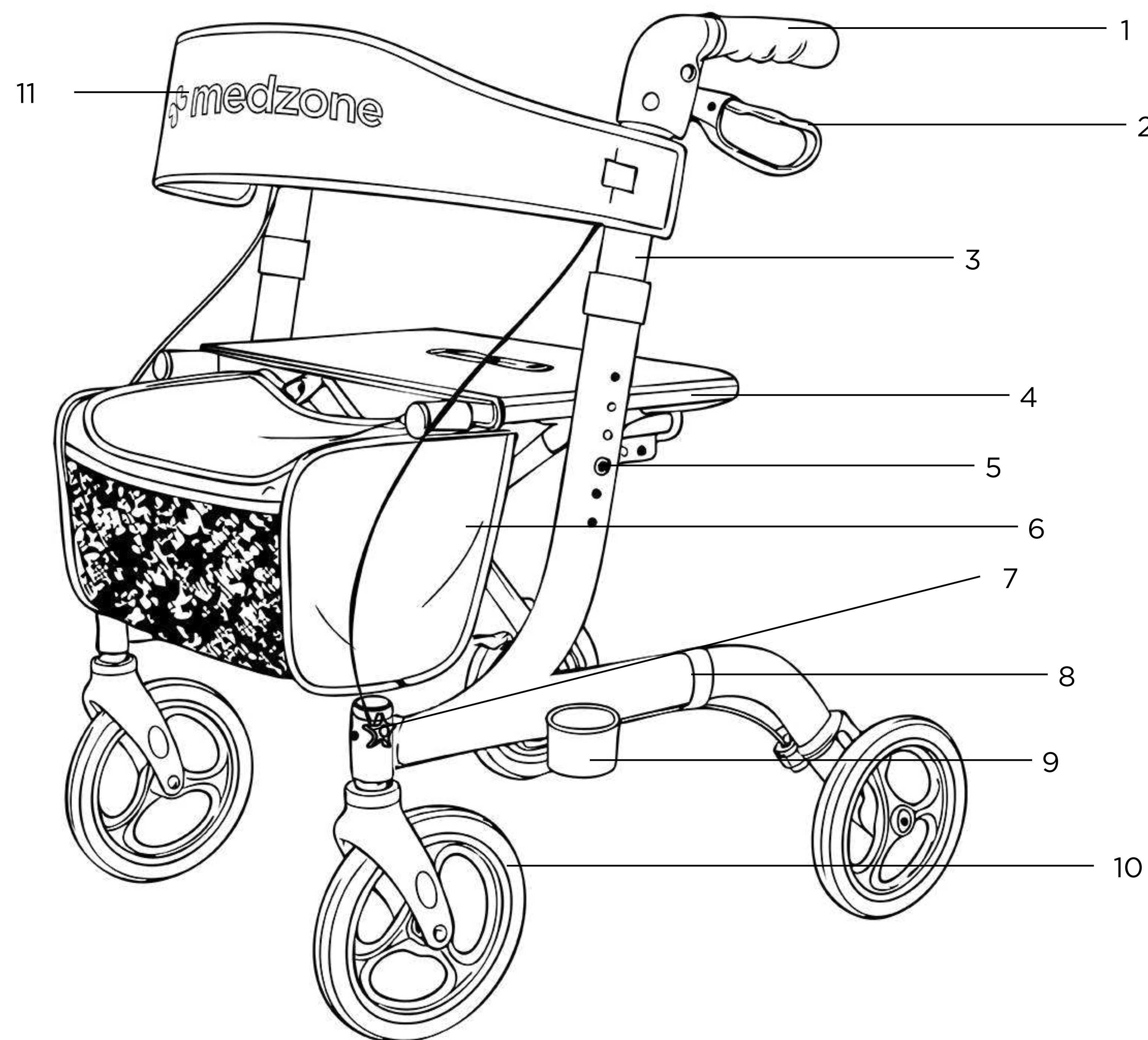

Teile des Rollators

1. Handgriff
2. Bremshebel
3. Verstellbare Rückenlehne
4. Sitzfläche
5. Druckknopf zur Höhenverstellung
6. Einkaufstasche
7. Druckknopf zur Montage des Vorderrads
8. Druckknopf zur Montage des Hinterrads
9. Stockhalter
10. Räder (Durchmesser: 20 cm)
11. Rückenlehne

Hinweis:

Ihr Rollator besteht aus mehreren Einzelteilen. Bitte machen Sie sich vor der Benutzung mit diesen Teilen vertraut und befolgen Sie die Anweisungen. Wir behalten uns das Recht vor, Design und Spezifikationen zu ändern.


Technische Spezifikationen

Breite zwischen den Handgriffen		53 cm
Gesamtbreite		61.5 cm
Gesamttiefe		70 cm
Sitzfläche		46 x 25 cm
Sitzhöhe		55 cm
Verstellbare Höhe der Handgriffe		82 - 95 cm
Max. Benutzergewicht*		136 KG
Gewicht des Rollators		7 KG


**Der Aluminium-Rollator ist für Benutzer mit eingeschränkter Mobilität vorgesehen und hat eine maximale Benutzerbelastung von 136 kg.*

Montageanleitung


1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.

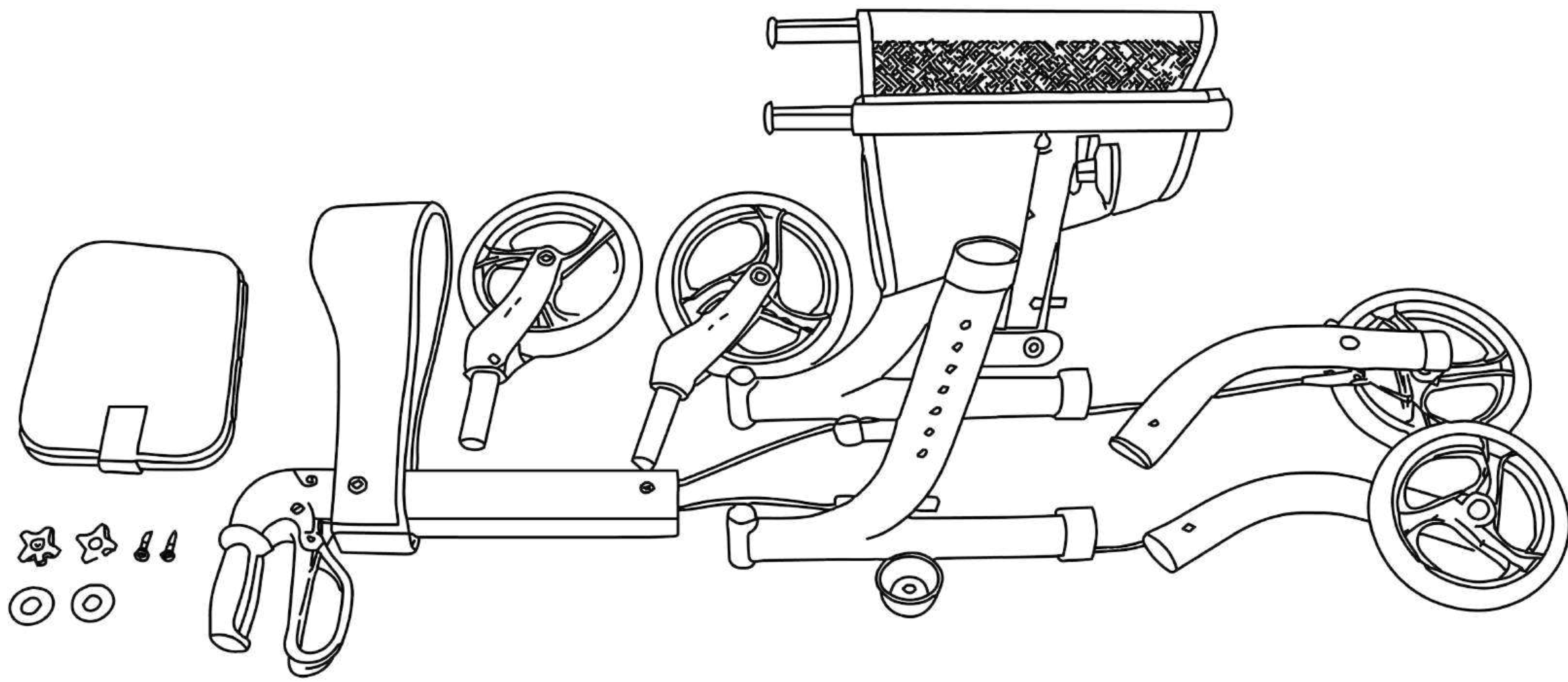


2. Stellen Sie den Rahmen aufrecht und drücken Sie beide Seiten nach unten, bis Sie ein Klickgeräusch hören.

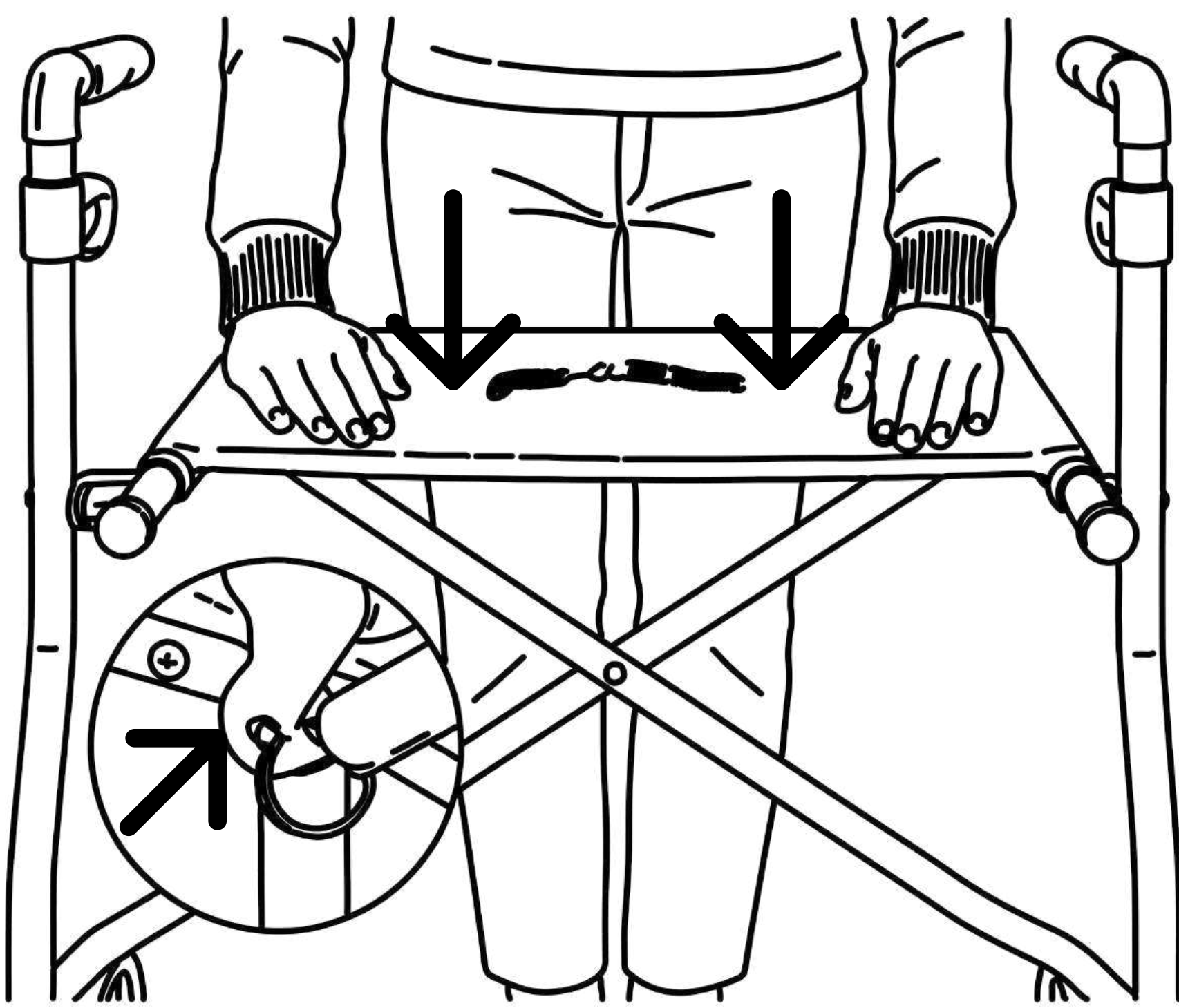

3. Montieren Sie die Vorderräder. Führen Sie die Schraube durch das Sechskantloch, setzen Sie die Unterlegscheibe ein und drehen Sie den Knopf fest.

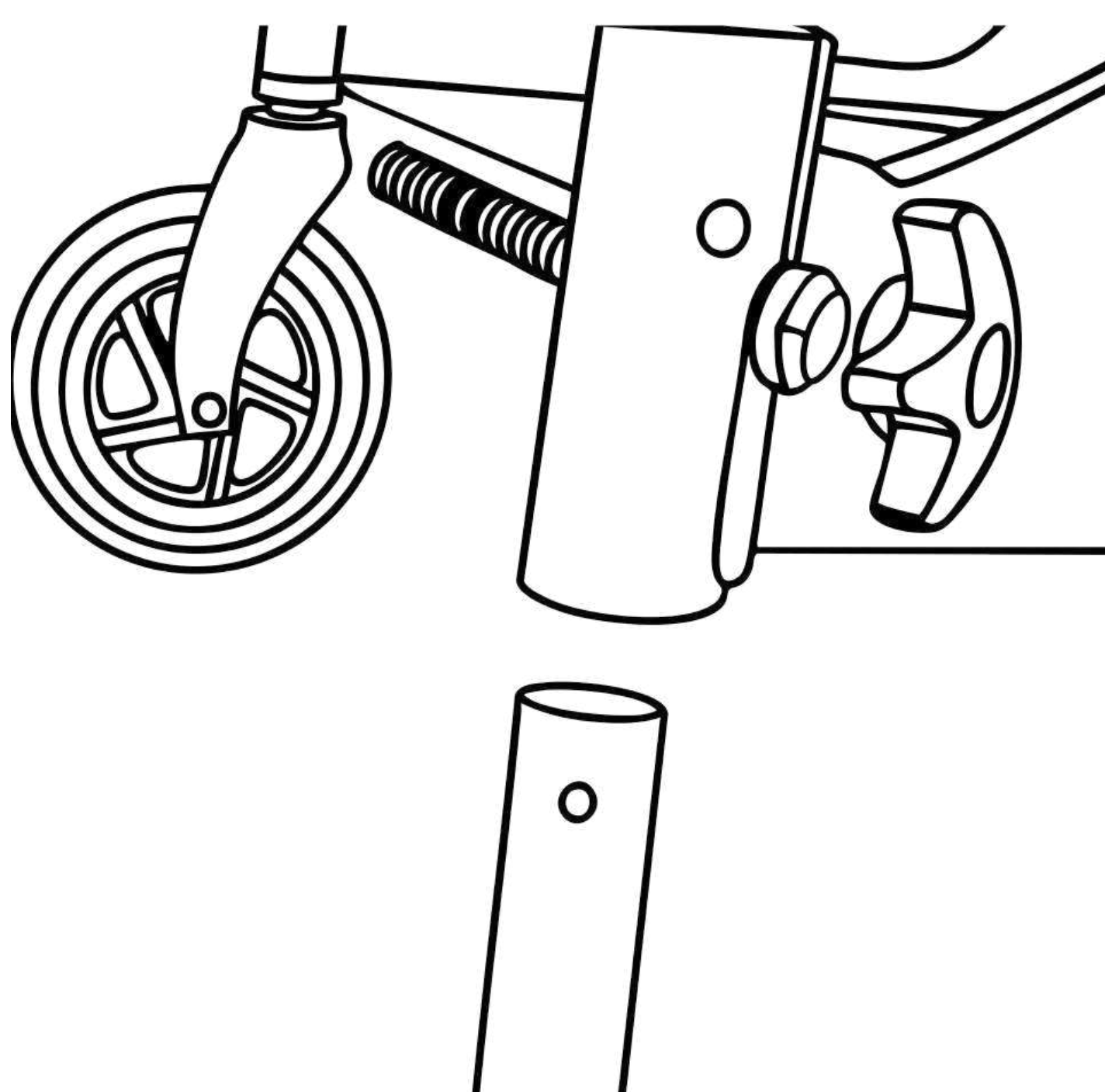


4. Befestigen Sie die Hinterbeine. Schieben Sie das Hinterrohr in die vorgesehene Position und lassen Sie den Verriegelungsknopf einrasten.

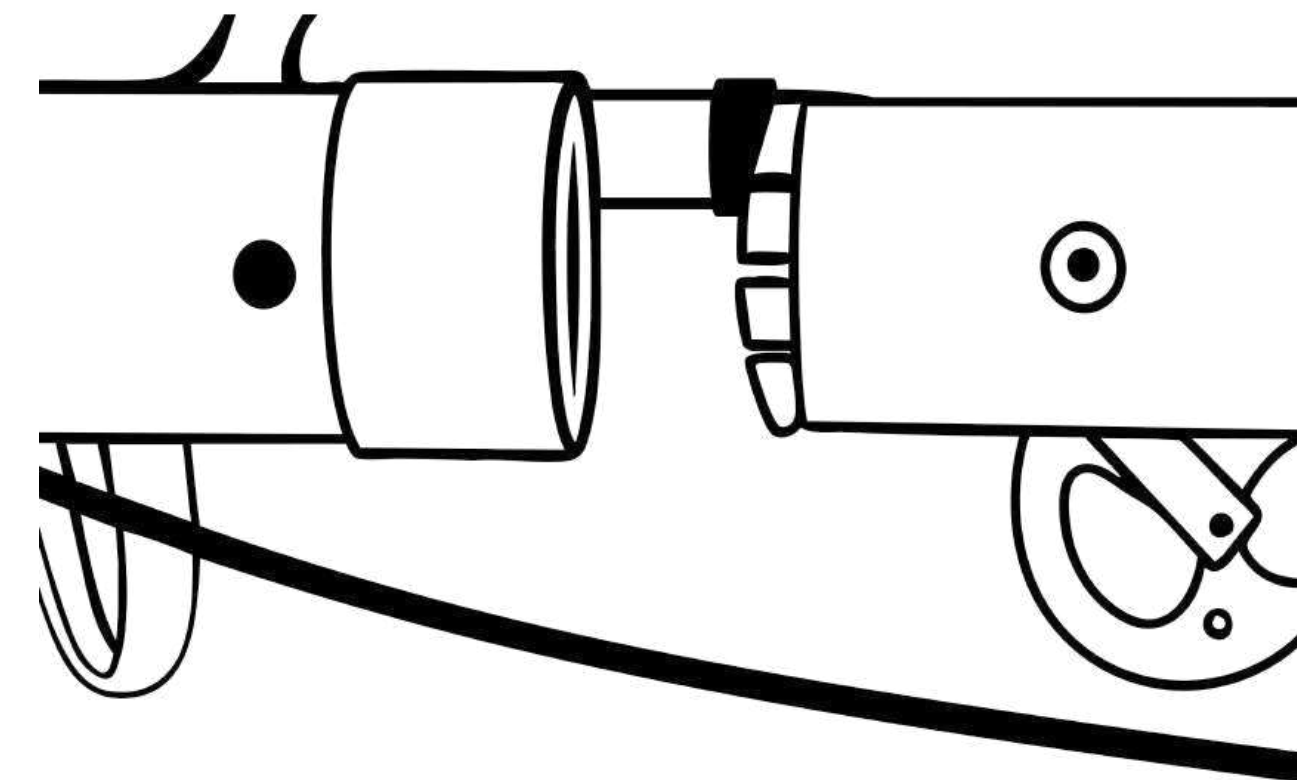

Höhe der Handgriffe einstellen


1. Drücken Sie den Knopf (5) am Rahmen nach innen.
2. Schieben Sie den Handgriff nach oben oder unten auf die gewünschte Höhe.
3. Lassen Sie den Knopf los, sodass er wieder einrastet.
4. Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen Seite.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass beide Handgriffe vor der Benutzung auf gleicher Höhe eingestellt und sicher fixiert sind.

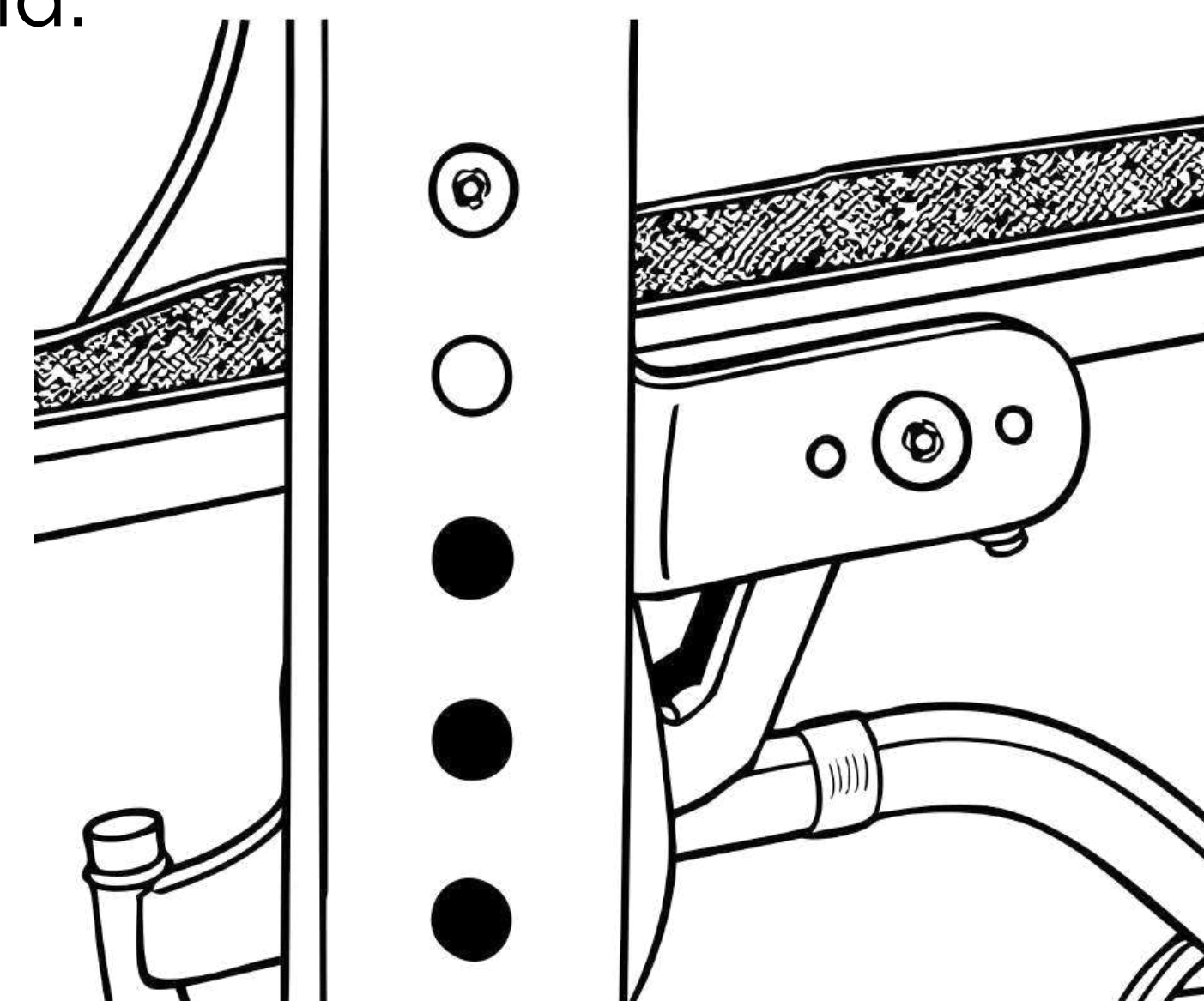


Bremsen einstellen


- Drehen Sie die Einstellschraube im Uhrzeigersinn, um die Bremsenspannung zu erhöhen.
- Halten Sie die Einstellschraube fest und drehen Sie die Kontermutter an, um die Einstellung zu sichern.

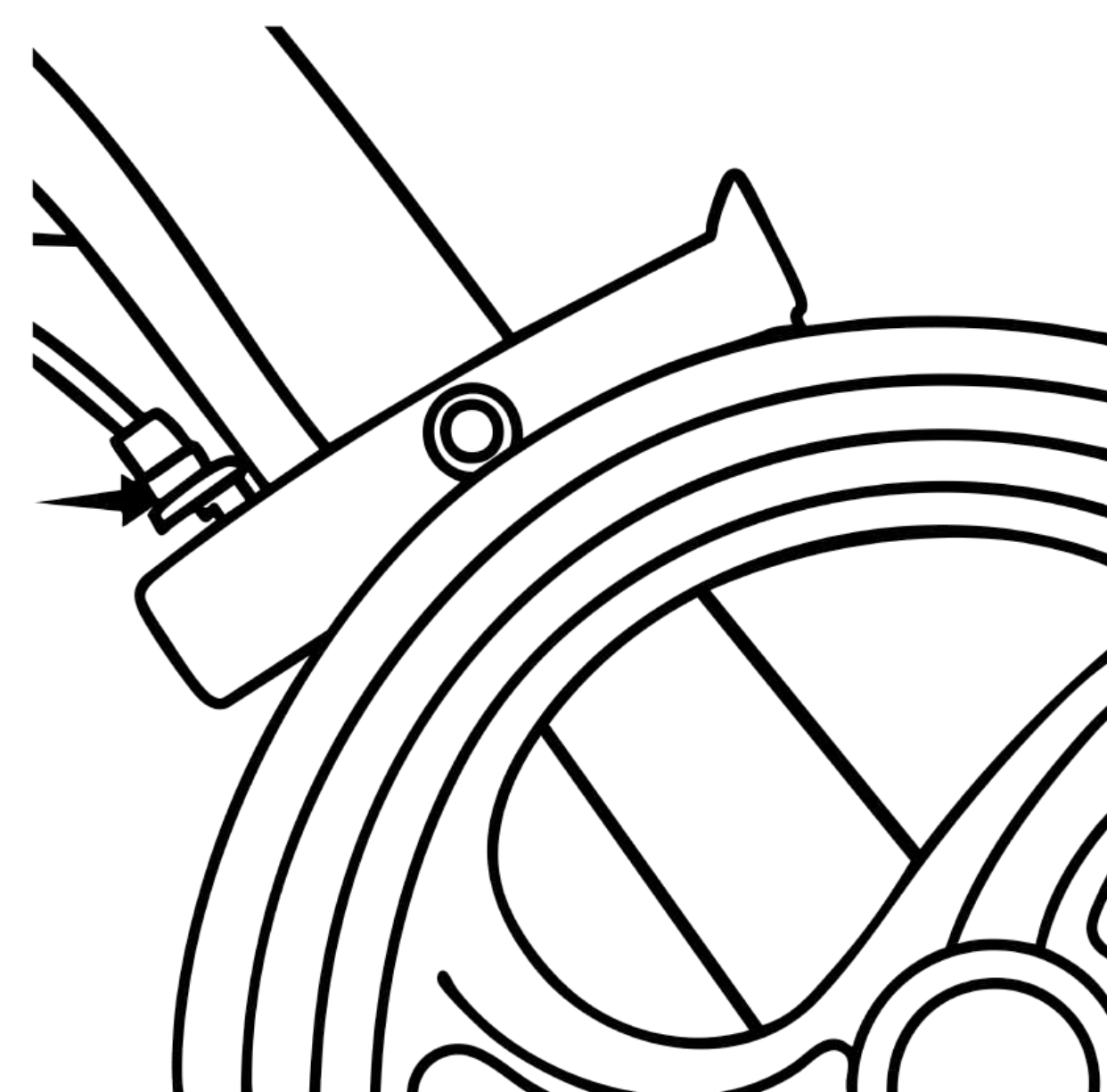


Rollator zusammengeklappt

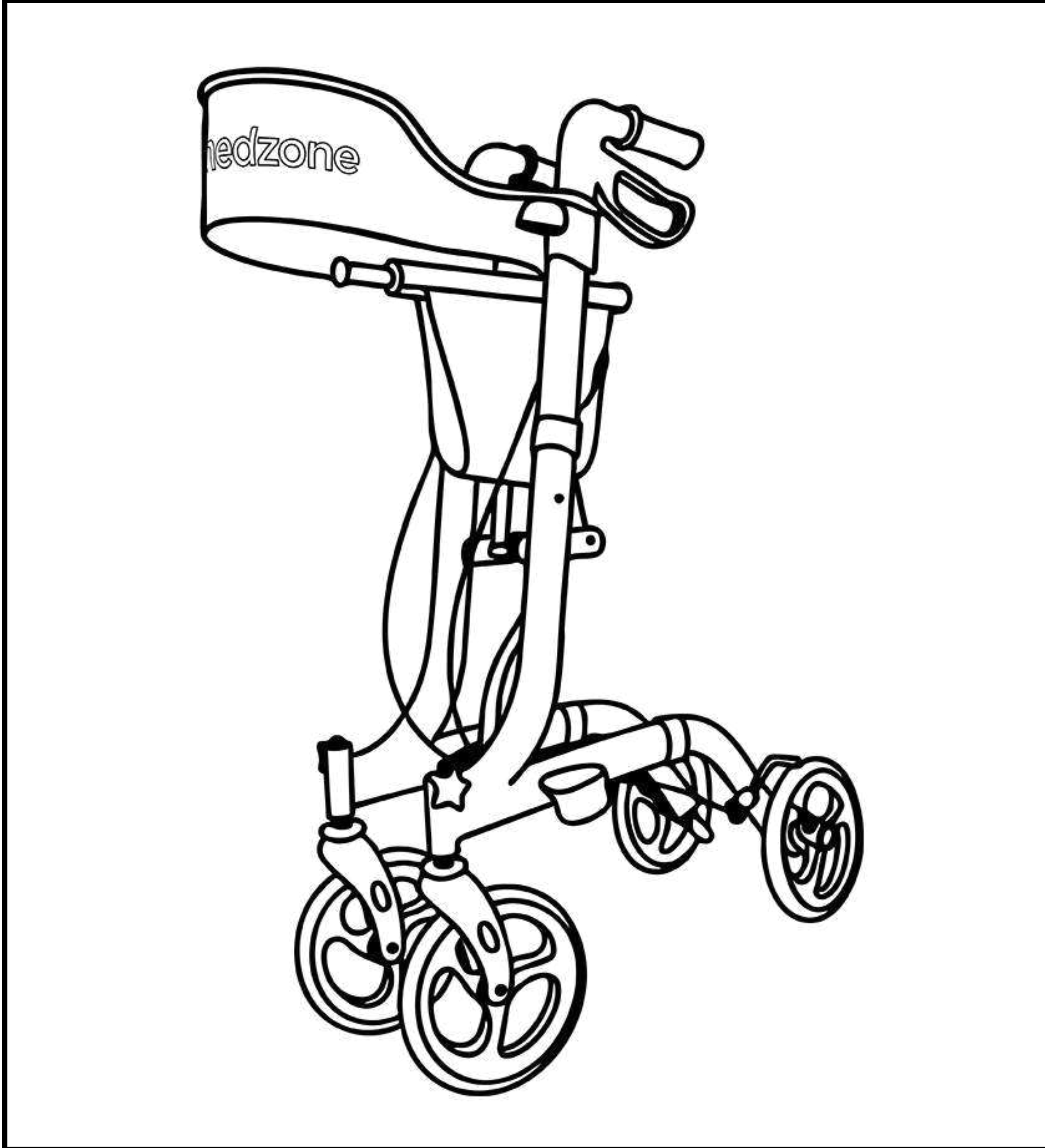


Einkaufstasche aufhängen

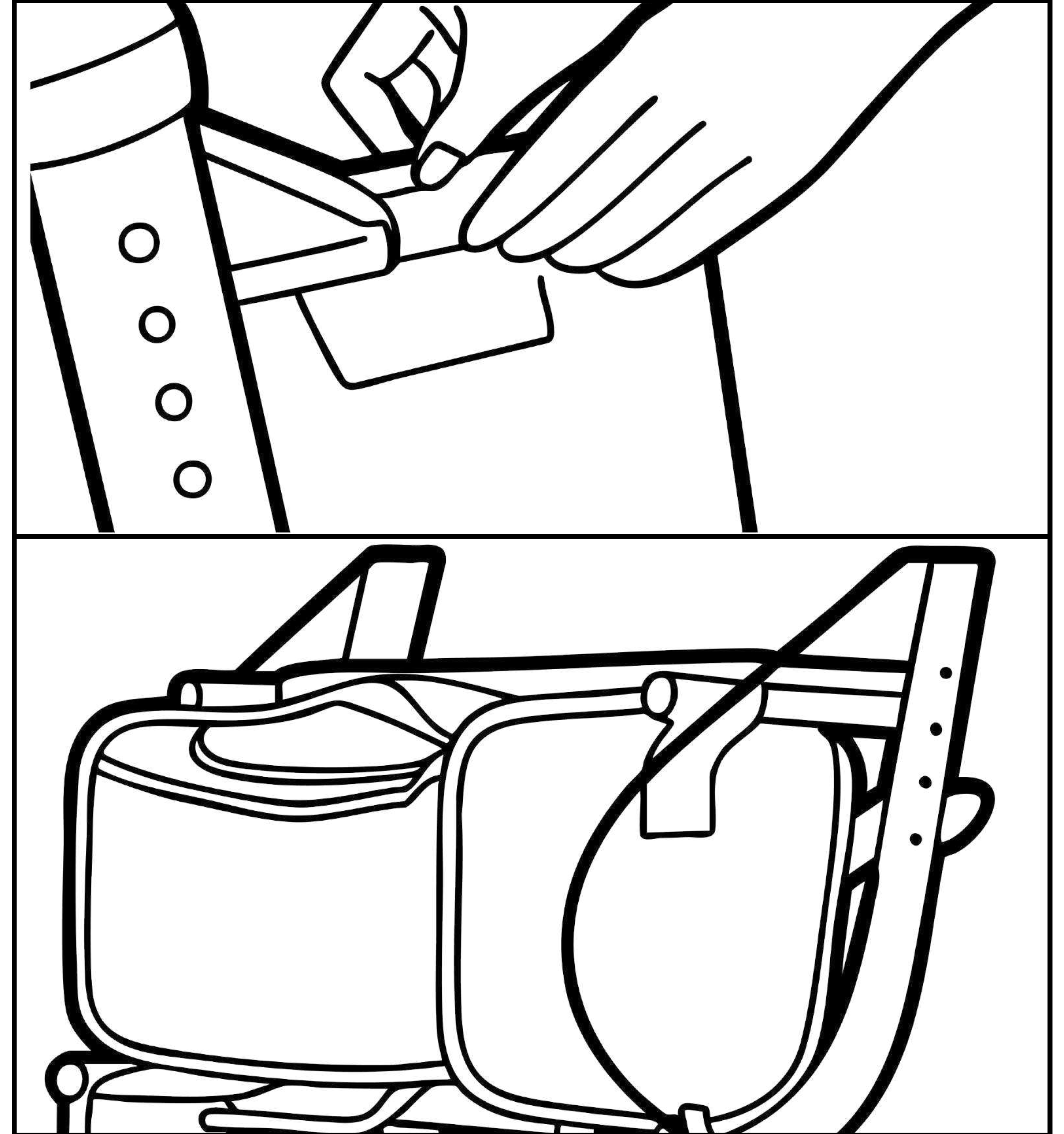

Parkbremse

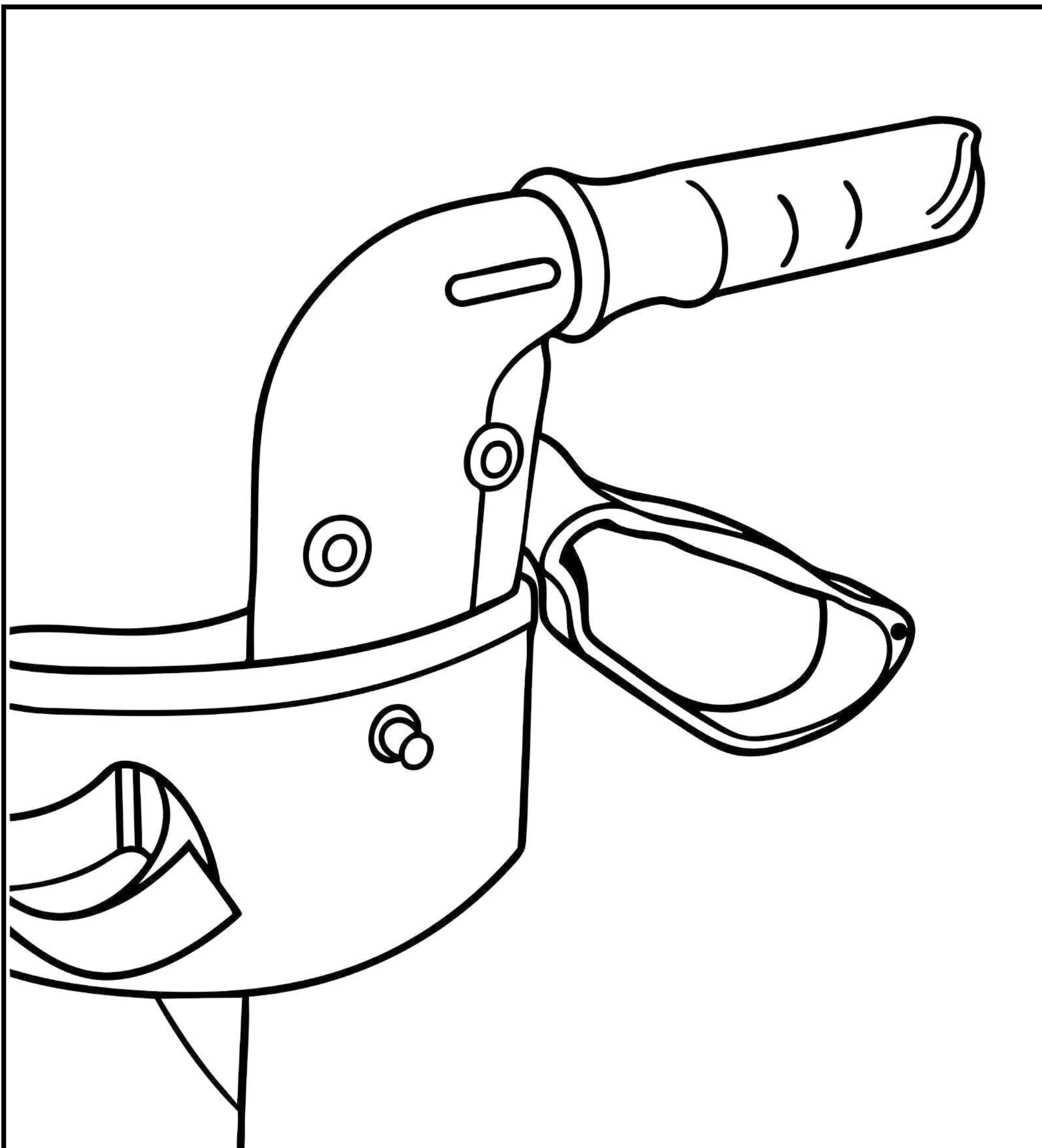

Vorderrad korrekt montiert

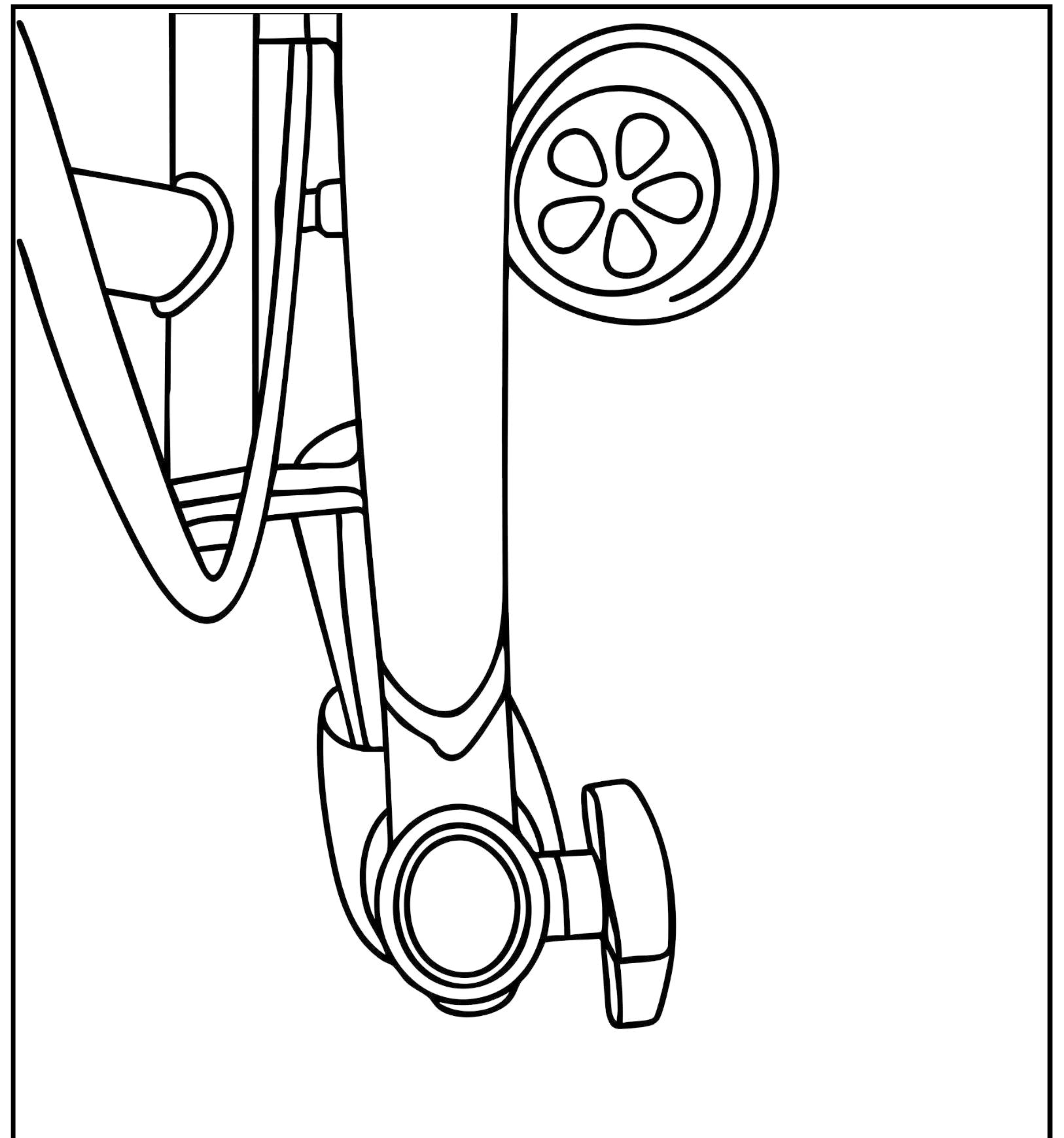

Wartung

Mit der Zeit können Teile verschleifen, insbesondere Bremskabel und Räder. Lassen Sie Ihren Rollator regelmäßig überprüfen und warten, vorzugsweise durch einen autorisierten Fachhändler.

Wartungsplan:

- **Wöchentlich:**
 - Prüfen Sie den Rollator auf Störungen.
 - Kontrollieren Sie, ob Räder und Schwenkräder fest und korrekt montiert sind.
- **Monatlich:**
 - Prüfen Sie die Handgriffe auf Abnutzung.
 - Kontrollieren Sie, ob der Rahmen stabil ist.
 - Prüfen Sie Bremsen und Bremshebel.
 - Kontrollieren Sie Vorder- und Hinterräder.
 - Prüfen Sie die Reifen auf Abnutzung oder Risse.

- **Jährlich:**

Lassen Sie den Rollator einmal jährlich von einem autorisierten Händler überprüfen, einschließlich Inspektion, Schmierung und Einstellung.

- **Teile, die gewartet werden müssen**

- Räder
- Handgriffe
- Bremsen
- Bremshebel
- Lager
- Knöpfe

Reinigung

Reinigen Sie den Rollator mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Hochdruckreiniger, da diese die Beschichtung beschädigen können.
- Trocknen Sie die Handgriffe und die Sitzfläche nach der Reinigung gründlich ab.

Warnhinweise

1. Maximales Benutzergewicht: 136 kg.
2. Nicht als Sitzprodukt verwenden, um geschoben zu werden.
3. Stellen Sie sicher, dass beide Handgriffe auf gleicher Höhe eingestellt sind.
4. Nehmen Sie Höhenverstellungen nur in Absprache mit einem Fachmann vor.
5. Halten Sie stets sicheren Abstand zwischen Füßen und Rädern.
6. Lose oder beschädigte Teile können Verletzungen verursachen.
7. Ersetzen Sie beschädigte Schwenkräder ausschließlich durch Originalteile.
8. Klappen Sie den Rollator vor der Benutzung vollständig auf.
9. Halten Sie die Finger beim Öffnen oder Schließen vom Scharniermechanismus fern.



ROLLATOR | FORTIS

MANUEL D'UTILISATION



À propos du rollator FORTIS

Le rollator FORTIS est léger et fabriqué en aluminium robuste. Il est équipé d'un siège, d'un sac de courses et de freins de stationnement sécurisés. Les poignées sont réglables en hauteur. Le châssis est facilement pliable pour le transport et le rangement.

Idéal pour une utilisation quotidienne par des personnes âgées ou à mobilité réduite.

Utilisation

Le rollator est une aide à la marche avec siège et sac de courses, destinée aux personnes à mobilité réduite. Il est conçu pour une utilisation intérieure et extérieure (poids maximal de l'utilisateur : voir spécifications).

L'utilisateur doit disposer d'une force physique, d'une vision et de capacités mentales suffisantes pour utiliser le rollator en toute sécurité. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre revendeur.

Veuillez toujours lire les consignes de sécurité avant utilisation afin d'éviter les blessures et les dommages.

Informations de sécurité

Le rollator favorise une marche sûre et naturelle. Vous marchez avec le poids du corps réparti entre les poignées, le rollator se trouvant devant vous.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant la première utilisation.

Testé conformément à la norme EN ISO 11199-2:2021.


L'identifiant unique du dispositif (UDI) est indiqué sur l'étiquette du produit et/ou sur l'emballage.

Utilisation sûre du rollator



1. Serrez toujours le frein de stationnement lorsque le rollator est à l'arrêt.
2. Vérifiez avant chaque utilisation que toutes les roues sont correctement fixées.
3. Assurez-vous que les freins fonctionnent correctement.
4. Vérifiez que le réglage en hauteur est correctement ajusté.
5. Dépliez complètement le rollator avant utilisation.
6. Faites attention à votre environnement pendant la marche.
7. Tenez vos mains éloignées du mécanisme de pliage afin d'éviter les blessures.
8. N'utilisez pas le rollator comme fauteuil roulant ; il s'agit d'une aide à la marche.
9. Ne vous asseyez jamais sans avoir d'abord serré le frein de stationnement.
10. Asseyez-vous lentement et de manière contrôlée. Demandez de l'aide si nécessaire.
11. N'accrochez pas d'objets lourds aux poignées. Cela affecte le freinage et la stabilité.

En respectant ces consignes de sécurité, vous utiliserez le rollator de manière sûre et fiable.

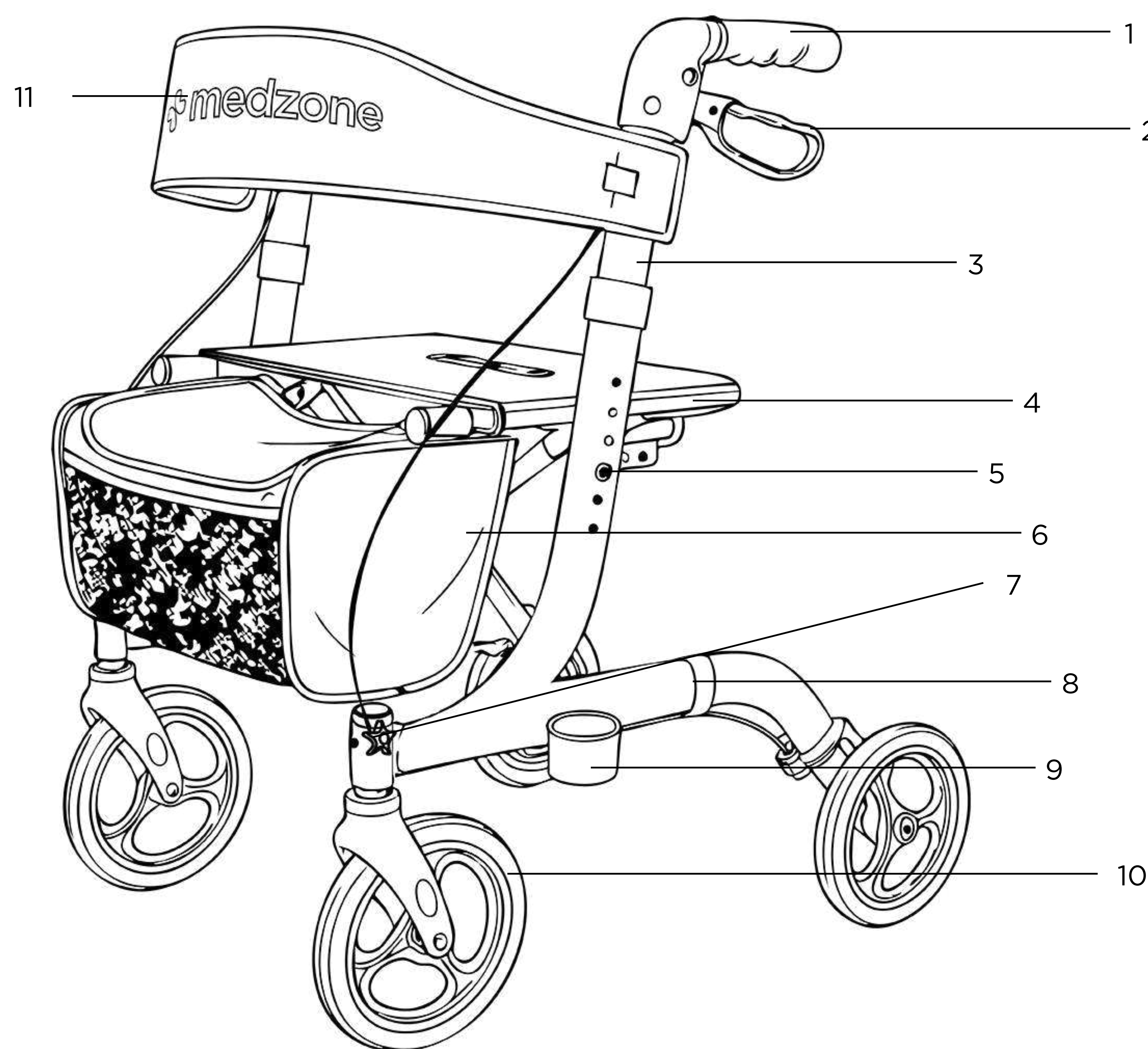

Éléments du rollator

- 1. Poignée
- 2. Levier de frein
- 3. Dossier réglable
- 4. Siège
- 5. Bouton-poussoir de réglage en hauteur
- 6. Sac de courses
- 7. Bouton-poussoir pour l'installation de la roue avant
- 8. Bouton-poussoir pour l'installation de la roue arrière
- 9. Porte-canne
- 10. Roues (diamètre : 20 cm)
- 11. Dossier

Attention :

Votre rollator est composé de plusieurs éléments. Veuillez vous familiariser avec ces composants et suivre les instructions avant utilisation. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications.


Spécifications techniques

Largeur entre les poignées		53 cm
Largeur totale		61.5 cm
Profondeur totale		70 cm
Surface d'assise		46 x 25 cm
Hauteur d'assise		55 cm
Hauteur réglable des poignées		82 - 95 cm
Poids maximal de l'utilisateur*		136 KG
Poids du rollator		7 KG


**Le rollator en aluminium est destiné aux utilisateurs à mobilité réduite et supporte une charge maximale de 136 kg.*

Instructions de montage


1. Retirez tous les matériaux d'emballage.

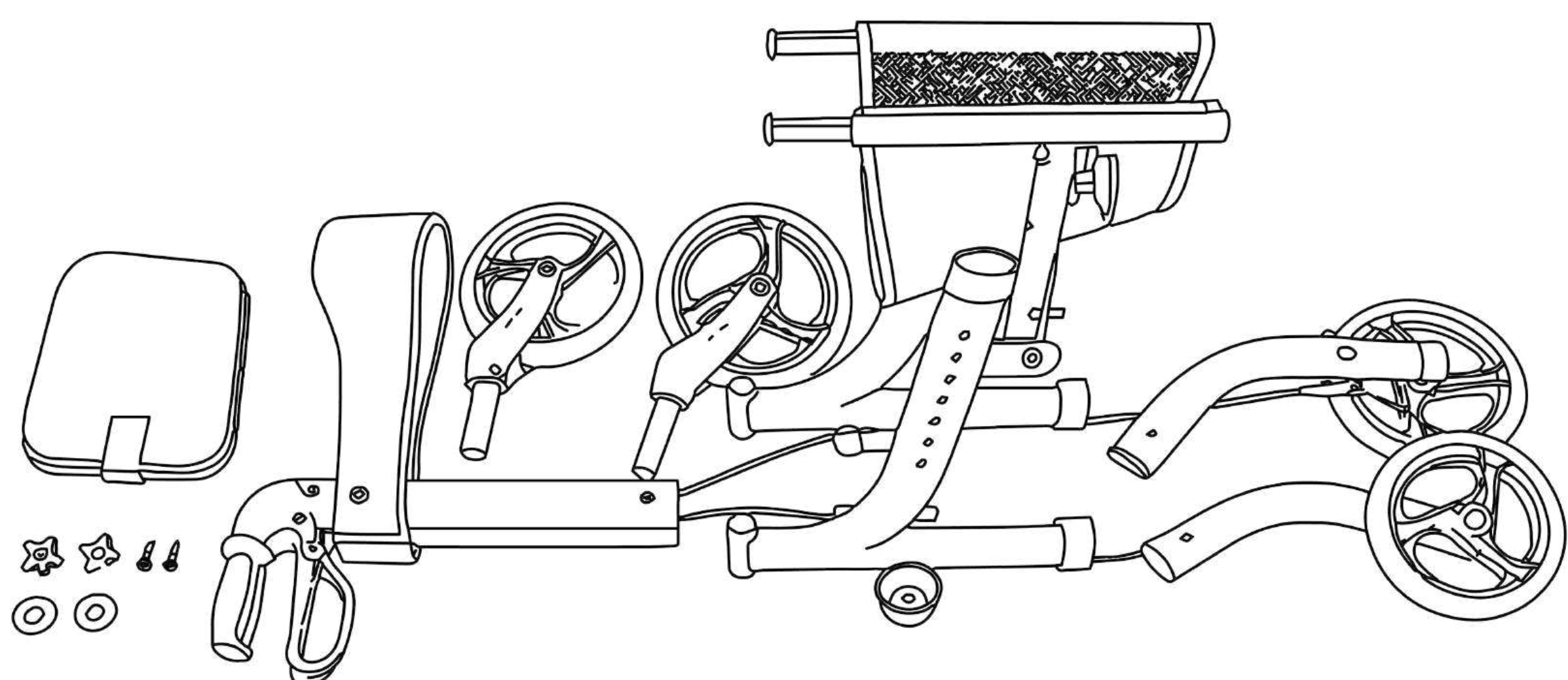


2. Placez le châssis en position verticale et poussez les deux côtés vers le bas jusqu'à entendre un clic.

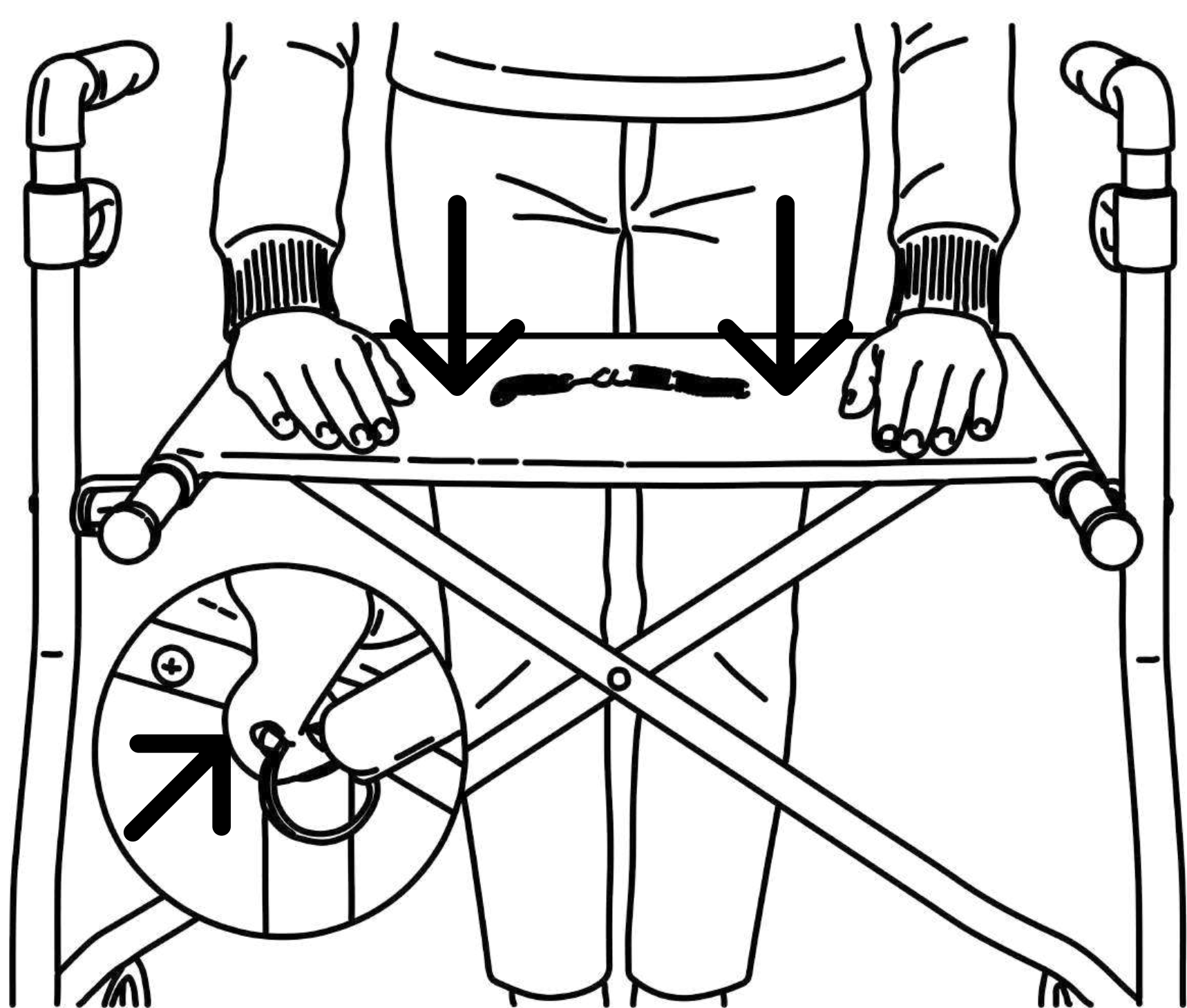

3. Montez les roues avant. Insérez le boulon dans l'orifice hexagonal, ajoutez la rondelle et serrez fermement le bouton.

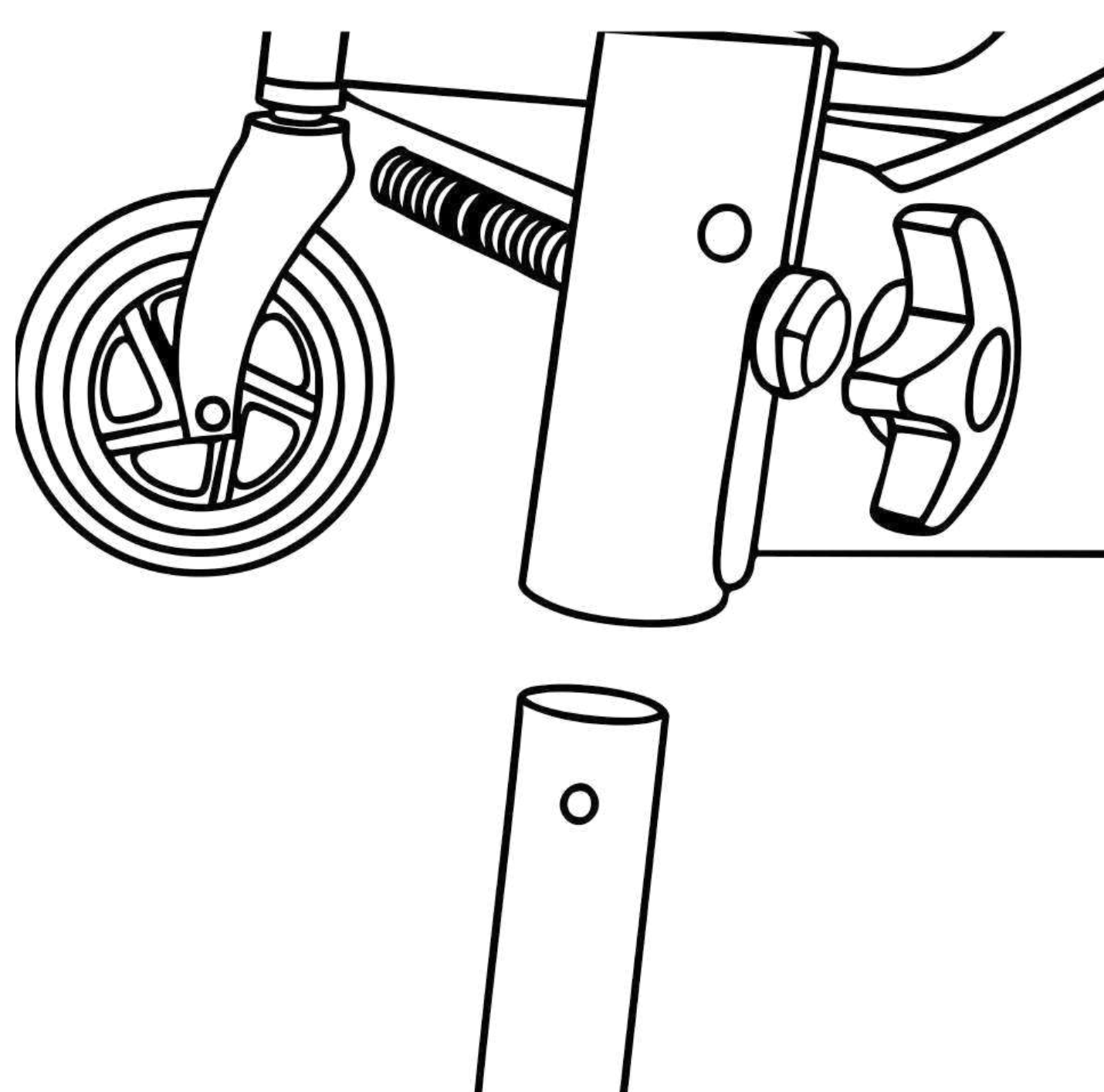


4. Fixez les pieds arrière. Insérez le tube arrière à sa position et enclenchez le bouton de verrouillage.

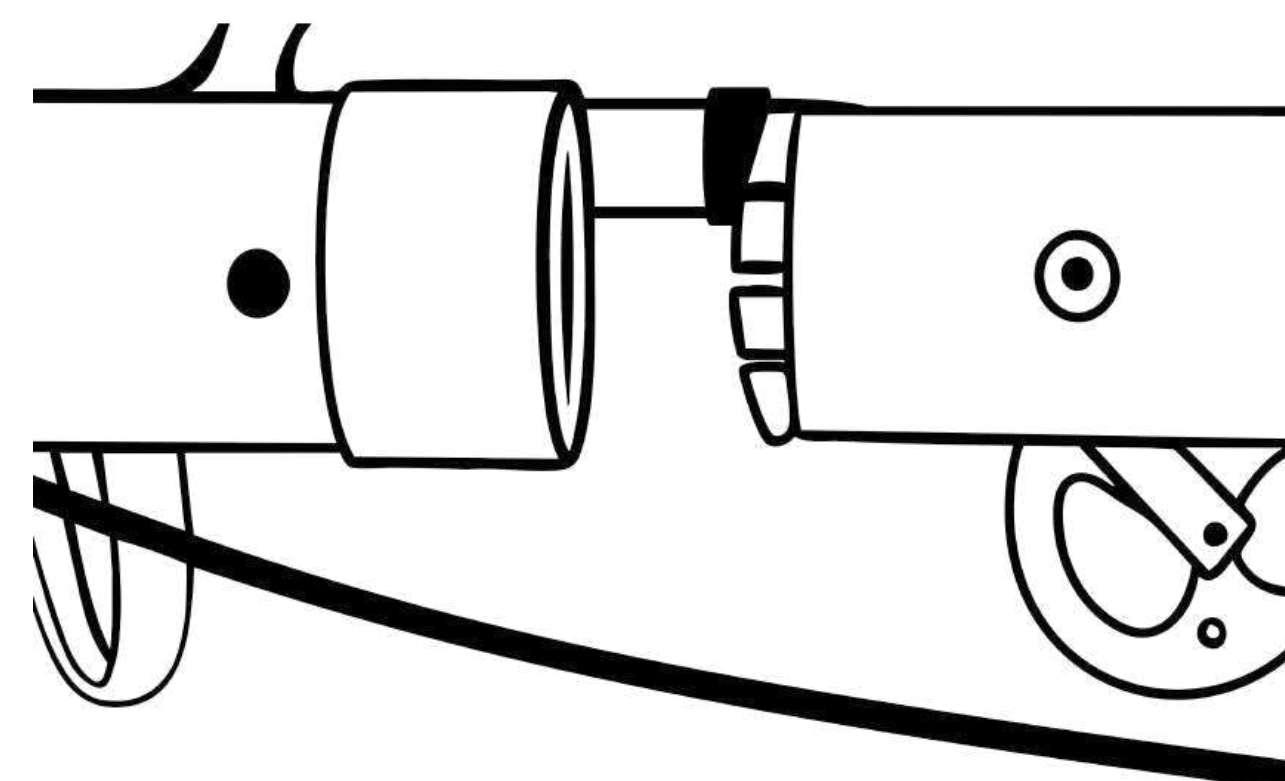

Réglage de la hauteur des poignées


1. Appuyez sur le bouton (5) du châssis vers l'intérieur.
2. Faites coulisser la poignée vers le haut ou vers le bas jusqu'à la hauteur souhaitée.
3. Relâchez le bouton afin qu'il se verrouille de nouveau.
4. Répétez l'opération de l'autre côté.

Attention: Assurez-vous que les deux poignées sont réglées à la même hauteur et correctement verrouillées avant utilisation.

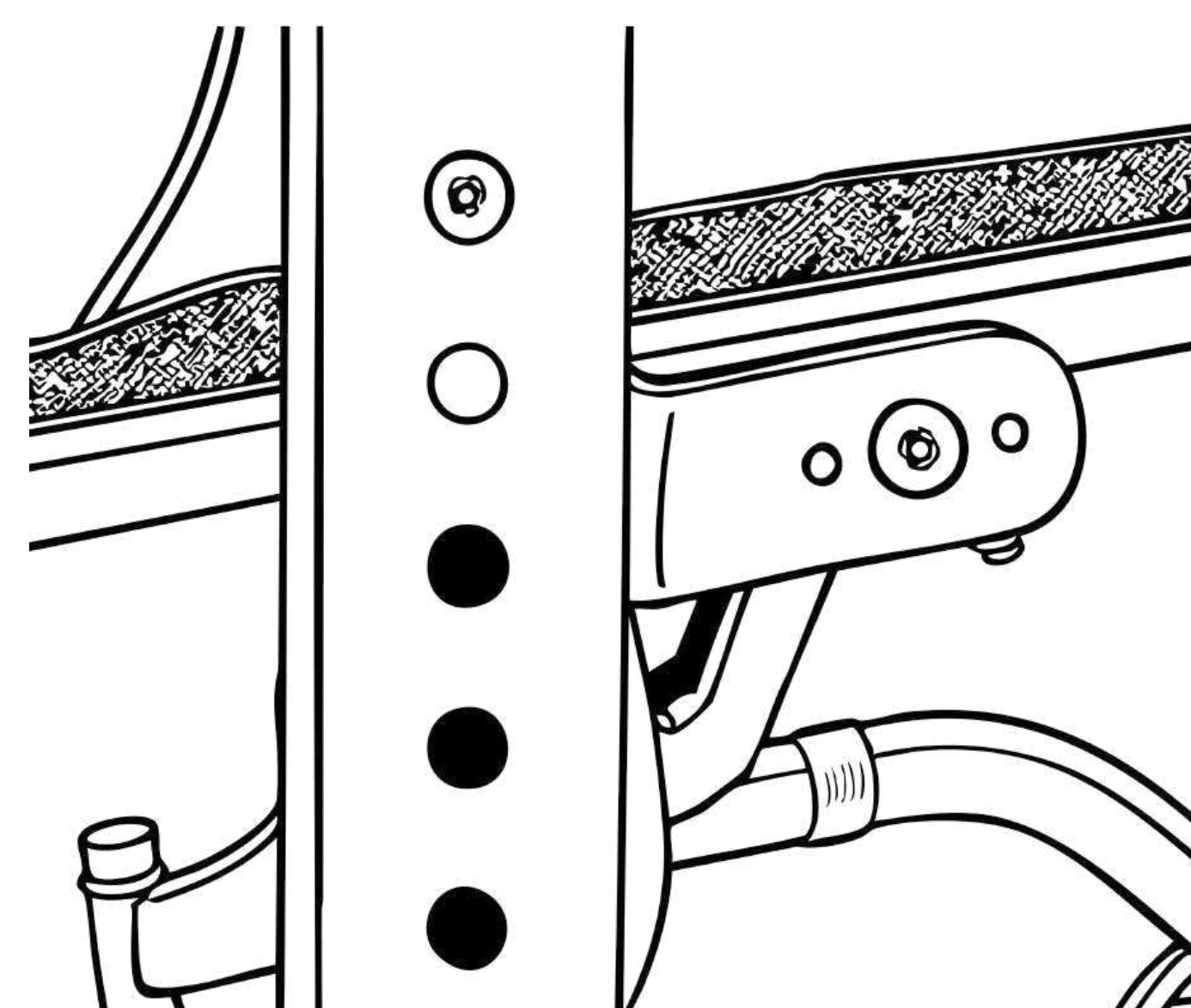


Réglage des freins


- Tournez la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'augmenter la tension du frein.
- Maintenez la vis de réglage et serrez l'écrou de blocage pour fixer le réglage.

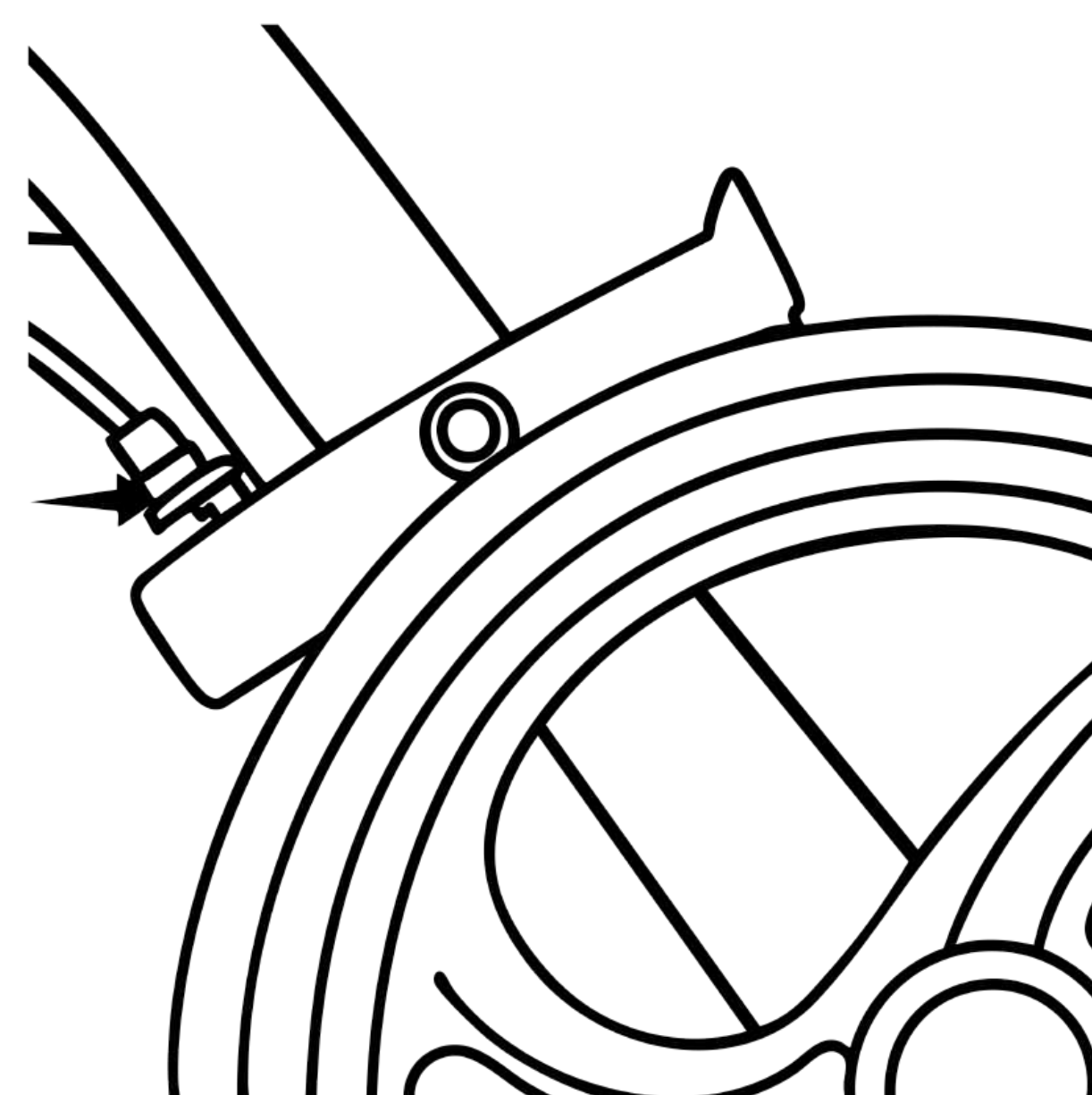


Rollator plié

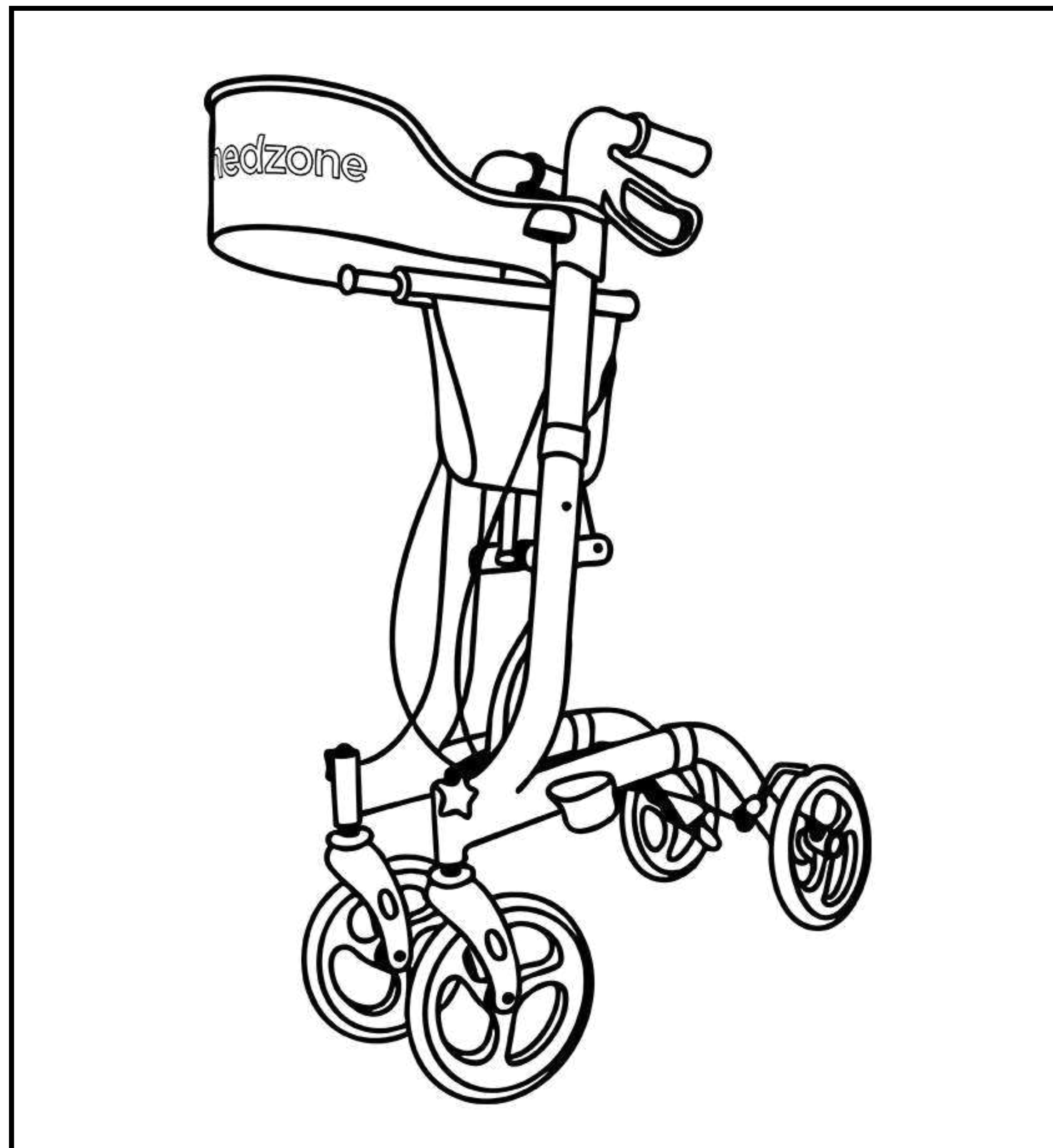


Accrocher le sac de courses

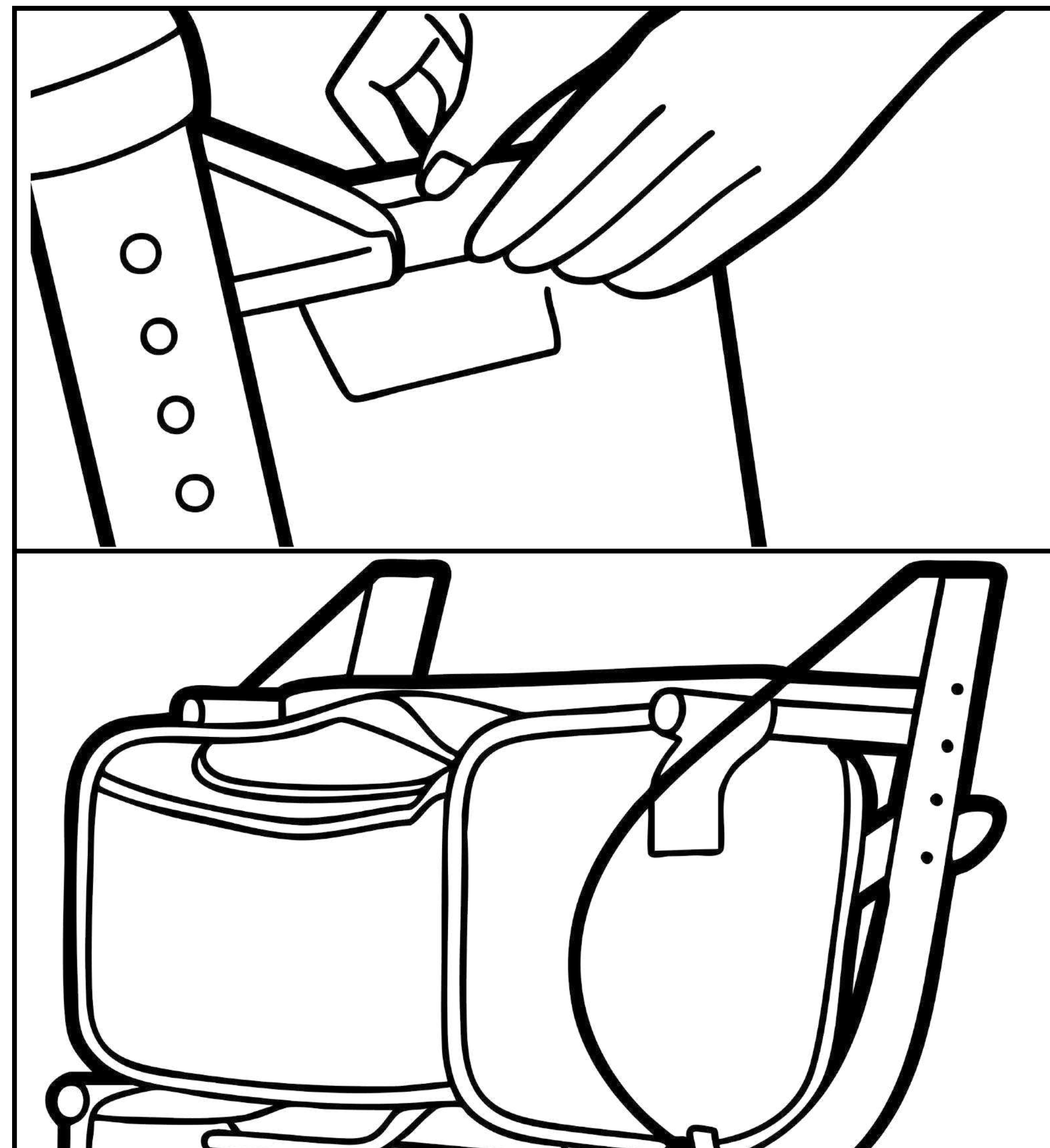

Frein de stationnement

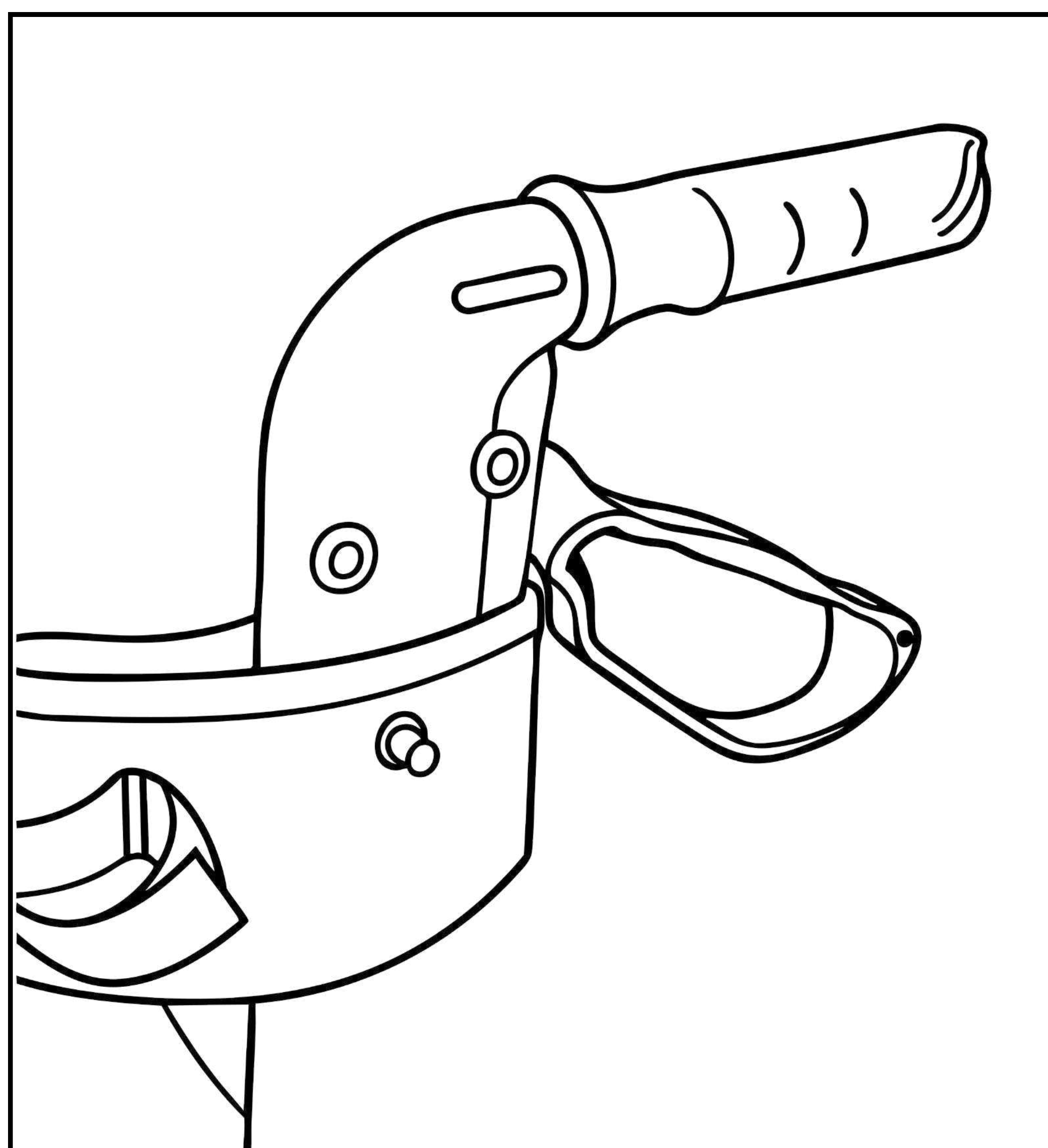

Roue avant correctement installée

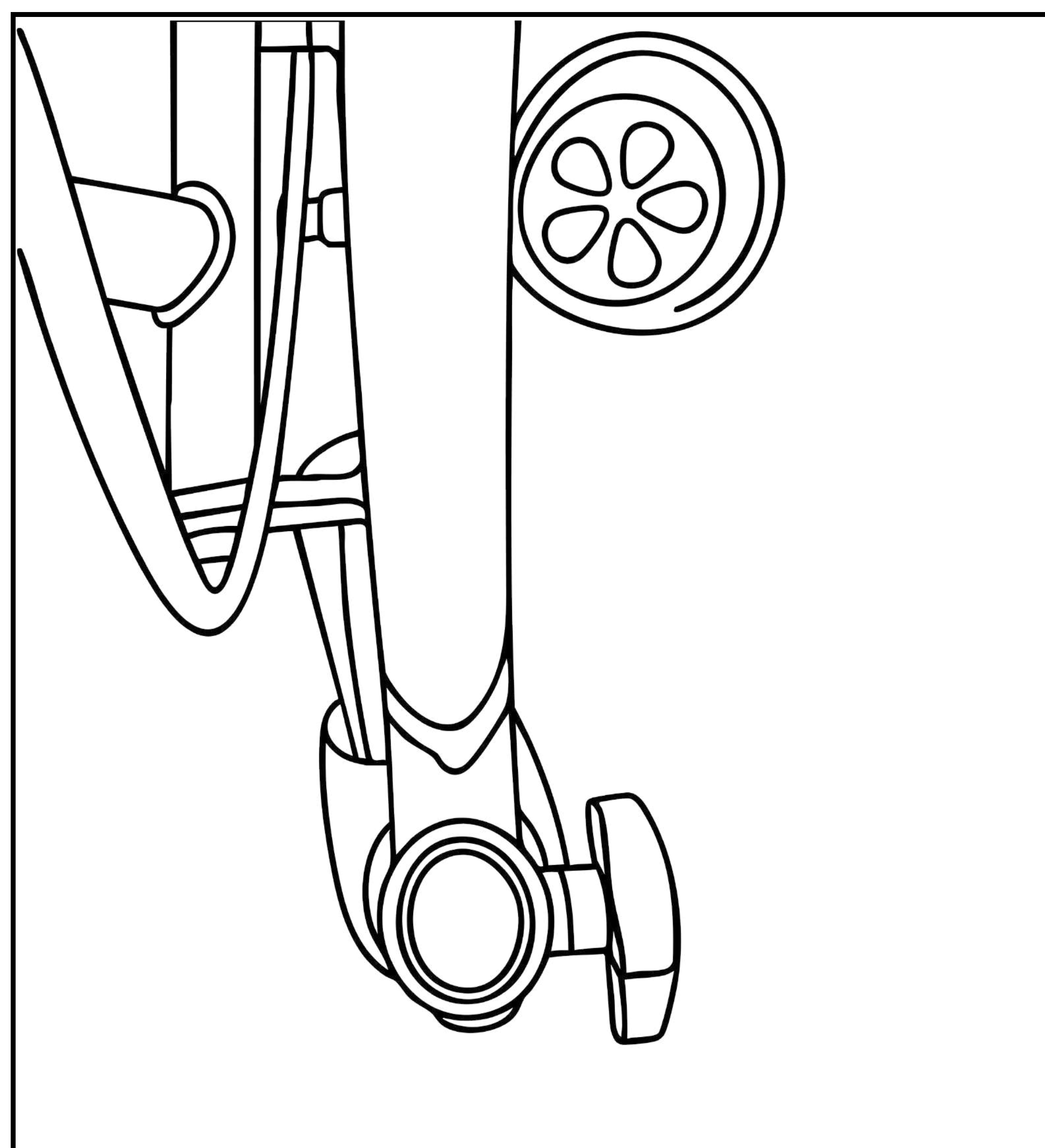

Entretien

Avec le temps, certaines pièces peuvent s'user, notamment les câbles de frein et les roues. Faites contrôler et entretenir régulièrement votre rollator par un revendeur agréé.

Programme d'entretien

- **Hebdomadaire:**
 - Vérifiez le rollator pour détecter toute anomalie.
 - Contrôlez que les roues et roues pivotantes sont correctement fixées.
- **Mensuel:**
 - Vérifiez l'usure des poignées.
 - Contrôlez la stabilité du châssis.
 - Vérifiez les freins et les leviers de frein.
 - Contrôlez les roues avant et arrière.
 - Vérifiez les pneus pour détecter toute usure ou fissure.
- **Annuel:**

Faites contrôler le rollator une fois par an par un revendeur agréé pour inspection, lubrification et réglage.
- **Pièces nécessitant un entretien**
 - Roues
 - Poignées
 - Freins
 - Leviers de frein
 - Roulements
 - Boutons

Nettoyage

Nettoyez le rollator avec un chiffon humide et un détergent doux.


- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de produits abrasifs ni de nettoyeurs haute pression, car ils peuvent endommager le revêtement.
- Séchez soigneusement les poignées et le siège après le nettoyage.

Avertissements


1. Poids maximal de l'utilisateur : 136 kg.
2. Ne pas utiliser comme siège pour être poussé.
3. Assurez-vous que les deux poignées sont réglées à la même hauteur.
4. Effectuez les réglages de hauteur uniquement en concertation avec un spécialiste.
5. Maintenez une distance de sécurité entre les pieds et les roues.
6. Des pièces desserrées peuvent provoquer des dommages ou des blessures.
7. Remplacez les roues pivotantes endommagées uniquement par des pièces d'origine.
8. Dépliez complètement le rollator avant utilisation.
9. Tenez les doigts éloignés du mécanisme de charnière lors de l'ouverture ou de la fermeture.



Online handleiding
Online manual
Online-Handbuch
Manuel en ligne

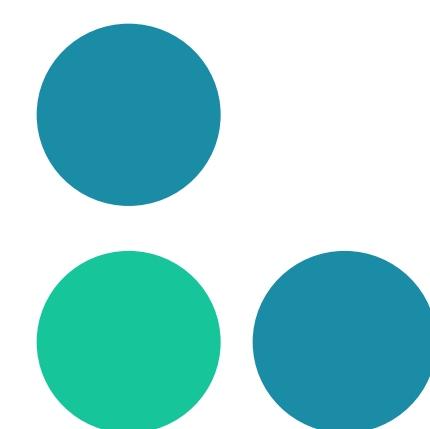

Garantieregistratie
Warranty registration
Garantieregistrierung
Enregistrement de garantie

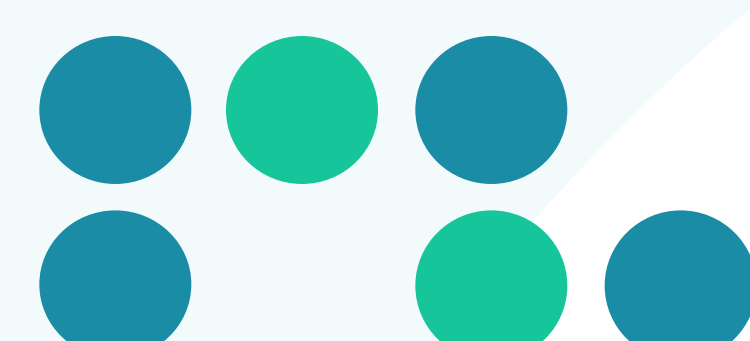



medzone



FOSHAN HCT MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD, No.501 of 19
Building, Daxing Liandong, U Valley No.4, Xiangshun Road,
Danzao Town,Nanhai,Foshan,Guangdong, China



SUNGO EUROPE B.V.,
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,2909VA Capelle aan
den IJssel, The Netherlands



Onebird B.V., Kazernestraat 17, 5928 NL, Venlo,
The Netherlands, info@onebird.nl

