

KFT-22M

InfraredScan7



Multi-function
Infrared
Ear Thermometer



36.8 Normal



37.5 Slight Fever



39.6 Fever



patented product(s),
counterfeiting
not allowed

- Four functions in one - ear, forehead, room and clock
- No extra probe covers required
- Three colour backlight (colour screen indicator) and sound alarm beeps indicating fever.
- °C/°F switchable
- 0.0-100.0°C (32.0-212.0°F) wide measuring range
- Auto power off



KFT-22M

InfraredScan7



Ear Temperature (Recommended for core body temperature measurement and fever monitoring). Remove the probe cover. Press "SCAN" to turn on. Ensure the icon shows Place the probe in the ear canal ensuring a good fit. Press "SCAN" once and wait for the long beep (approx. 1-2 seconds).



Température de l'oreille (Recommandé pour la mesure de la température du corps et la surveillance de fièvre). Retirer le couvercle du capteur. Appuyez sur "SCAN" pour activer. Assurez-vous que l'icône s'affiche Placez la sonde dans le conduit auditif en assurant un bon ajustement. Appuyez une fois sur "SCAN" et attendez le long bip (environ 1-2 secondes).



Temperatura del Oído (Recomendado en mediciones generales de la temperatura corporal y control de la fiebre). Retire la cubierta de la sonda. Presione "SCAN" para encender el aparato. Asegúrese de que aparece el símbolo correcto Coloque la sonda en el canal auditivo.


asegurándose de que encaja bien. Presione "SCAN" una vez más y espere a que suene un pitido largo (aproximadamente 1-2 segundos).



Ohrentemperatur (Empfohlen für Kern-Körper-Temperatur-Messung und Überwachung von Fieber). Entfernen Sie die Schutzhaile. Drücken Sie die Taste "SCAN", um zu aktivieren. Das Symbol zeigt zu gewährleisten Platzieren Sie die Sonde in den Gehörgang sicherzustellen, dass es passt. Drücken Sie die Taste "Scanner" einmal und warten Sie den langen Signator (ca. 1-2 Sekunden).



Temperatura all'orecchio (Raccomandata per la misurazione della temperatura basale corporea e per il controllo della febbre). Rimuovere la copertura della sonda. Per accendere premere "SCAN". Assicurarsi che compaia l'icona Posizionare la sonda nel canale auricolare assicurandosi di posizionarla correttamente. Premere una volta "SCAN" e aspettare il segnale acustico prolungato (circa 1-2 secondi).

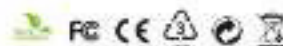

For 1 year warranty & for ebook
in Français, Deutsch, Italiano,
Español, 繁體中文

COLOUR SCREEN INDICATOR

Less than 37.4°C (99.3°F), the display screen turns GREEN

Between 37.5°C and 37.9°C (99.5°F~100.2°F), the screen turns ORANGE

Greater than 38.0°C (100.4°F), the display screen turns RED

