


Voor het gebruik, volg de voorafgaande instructies.
 1. Gebruik geen alcohol of andere desinfectanten.
 2. Hou de pincet tussen duim en middelvinger zo druk met de wijsvinger de achterkant van de tong in (witte 'kap') de tong gaat nu open.
 3. Plaats de gripper voorzichtig over de teek en laat de gripper sluiten door uw wijsvinger.
 4. Trek de gripper voorzichtig naar links en een kleine slag naar rechts.
 5. Draai de vastgeklemde teek zo een kleine slag naar links en een kleine slag naar rechts.
 6. Trek de teek langzaam in een enkele beweging omhoog, totdat de teek loslaat.
 7. Daarna trek u de teek langzaam in een enkele beweging omhoog, totdat de teek loslaat.
 8. Desinfecteer de beetplek na afloop.

Let op bij de verwijdering van de teek: wanneer teek ontdekt is, waar de teek zit en wanneer de teek verwijderd is. Krijgt u binnen 2 weken rode vlekken of andere klachten, neem dan contact op met uw huisarts.



For simple, safe and fast removal of ticks from humans and animals
 Instructions:
 1. Do not use alcohol or other disinfectants
 2. Hold the tick tweezers between your thumb and middle finger and press the back of the pliers with your index finger (white 'cap') the pliers will now open
 3. Carefully place the gripper over the tick and allow the gripper to close by slowly removing your index finger from the back
 4. Now turn the clamped tick a small turn to the left and a small turn to the right, this will partially release the tick.
 5. Then slowly pull the tick upwards in a single movement until the tick releases
 6. Disinfect the bite site afterwards

When removing the tick, note: when tick is discovered, where the tick was present and when the tick was removed. If you get red circles or other complaints within 2 weeks, please contact your doctor.

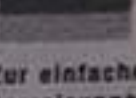

Zur einfachen, sicheren und schnellen Entfernung von Zecken bei Mensch und Tier
 Anweisungen:
 1. Verwenden Sie keinen Alkohol oder andere Desinfektionsmittel
 2. Halten Sie die Zeckenpinzette zwischen Daumen und Mittelfinger und drücken Sie mit dem Zeigefinger auf die Rückseite der Zange (weiße 'Kappe') die Zange öffnet sich jetzt
 3. Legen Sie den Greifer vorsichtig über die Zecke und lassen Sie den Greifer schließen, indem Sie Ihren Zeigefinger langsam von der Rückseite entfernen
 4. Drehen Sie nun das festgeklemmte Häkchen eine kleine Drehung nach links und eine kleine Drehung nach rechts, dadurch wird das Häkchen teilweise gelöst.
 5. Ziehen Sie dann das Häkchen in einer einzigen Bewegung langsam nach oben, bis sich das Häkchen löst
 6. Die Bissstelle anschließend desinfizieren

Beachten Sie beim Entfernen der Zecke: wenn eine Zecke entdeckt wird, wo die Zecke vorhanden war und wann die Zecke entfernt wurde. Wenn Sie innerhalb von 2 Wochen rote Kreise oder andere Beschwerden bemerken, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.



Pour une élimination simple, sûre et rapide des tiques sur les humains et les animaux
 Manuel d'utilisation:
 1. Ne pas utiliser d'alcool ou d'autres désinfectants
 2. Tenez la pince à tiques entre votre pouce et votre majeur et appuyez sur l'arrière de la pince avec votre index ('bouchon' blanc) la pince va maintenant s'ouvrir
 3. Placez délicatement la pince sur la tique et laissez la pince se fermer en retirant lentement votre index de l'arrière
 4. Tournez maintenant la tique serrée d'un petit tour vers la gauche et d'un petit tour vers la droite, cela libérera partiellement la tique.
 5. Tirez ensuite lentement la tique vers le haut en un seul mouvement jusqu'à ce que la tique se libère
 6. Désinfectez ensuite le site de la morsure

Lors de la suppression de la coque, notez : lorsque la coque est découverte, où la tique était présente et quand la tique a été retirée. Si vous avez des cercles rouges ou d'autres problèmes dans les 2 semaines, veuillez contacter votre médecin.



8 720195 179275 8
 J.C.J.C. IMPORTS
 P.O. BOX 2007, 1871 EA ALKMAAR
 THE NETHERLANDS
 MADE IN PRC