



MOPEDIA®

ITA

AAN DE MUUR GEMONTEERDE DOUCHEZITJES

HANDLEIDING

1. CODICI	PAGINA 3
2. INLEIDING.....	PAGINA 3
3. BEOOGD GEBRUIK.....	PAGINA 3
4. EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING	PAGINA 3
5. ALGEMENE WAARSCHUWINGEN	PAGINA 4
6. GEBRUIKTE SYMBOLEN.....	PAGINA 4
7. ALGEMENE BESCHRIJVING	PAGINA 4
7.1 RS918.....	pag. 4
7.2 RS919.....	pag. 4
8. MONTAGE.....	PAGINA 4
9. VÓÓR ELK GEBRUIK	PAGINA 4
10. WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIK	PAGINA 5
11. MODE D'USO.....	PAGINA 5
11.1 RS919.....	pag. 5
12. REINIGING EN DESINFECTIE	PAGINA .5
12.1 Politie.....	pag. 5
12.2 Desinfectie.....	bladzijde 5
13. VOORWAARDEN VOOR VERWIJDERING	PAGINA 5
14. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	PAGINA 6
15. GARANTIE.....	PAGINA 6
16. REPARATIES.....	PAGINA 6
16.1 Reparatie onder garantie.....	bladzijde 6
16.2 Reparatie van een product dat niet onder de garantie valt	blz. 6
16.3 Niet-defecte producten	bladzijde 7
17. RICAMBI	PAGINA 7
18. VRIJSTELLINGSCLAUSULEN.....	PAGINA .7

 Klasse I medisch hulpmiddel

VERORDENING (EU) 2017/745 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 5 april 2017 met betrekking tot medische hulpmiddelen

1. RS918

RS919- Douchezitje voor wandmontage
CODES Douchezitje voor wandmontage met poten

2. INLEIDING

Bedankt dat u voor een douchezitje uit de MOPEDIA by Moretti-lijn hebt gekozen. Moretti douchezitjes zijn ontworpen en vervaardigd om aan al uw wensen voor praktisch, correct en veilig gebruik te voldoen. Deze handleiding bevat kleine suggesties voor het juiste gebruik van het door u gekozen apparaat en waardevol advies voor uw veiligheid. Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig door te lezen voordat u de stoel gebruikt. Neem bij twijfel contact op met uw detailhandelaar, die u correct kan helpen en adviseren.

Opmerking Controleer alle onderdelen van het product op transportschade. In geval van schade het product niet gebruiken en contact opnemen met de verkoper voor verdere instructies.

3. BEOOGD GEBRUIK

De douchehulpmiddelen uit de MOPEDIA by Moretti-lijn zijn ontworpen om het zitten van gehandicapten of mensen met mobiliteitsproblemen te vergemakkelijken tijdens schoonmaakwerkzaamheden in de badkamer.

AANDACHT!

- Het gebruik van het volgende apparaat voor andere dan de gedefinieerde doeleinden is verboden in de volgende handleiding.
- Moretti SpA wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik van het apparaat of uit ander gebruik dan aangegeven in deze handleiding.
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan het apparaat en de volgende handleiding aan te brengen om de eigenschappen ervan te verbeteren.

4. EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

MORETTI SpA verklaart onder haar exclusieve verantwoordelijkheid dat de producten die door MORETTI SpA zelf zijn vervaardigd en op de markt gebracht en die deel uitmaken van de familie WANDMOUNTED DOUCHEZETELS voldoen aan de toepasselijke bepalingen van Verordening 2017/745 betreffende MEDISCHE HULPMIDDELEN van 5 april 2017.

Hiermee garandeert en verklaart MORETTI SpA onder eigen verantwoordelijkheid het volgende:

1. De betreffende apparaten voldoen aan de algemene veiligheids- en prestatie-eisen zoals vereist door Bijlage I van Verordening 2017/745 zoals voorgeschreven door Bijlage IV van bovengenoemde verordening.
2. De betreffende apparaten ZIJN GEEN MEETINSTRUMENTEN.
3. De betreffende hulpmiddelen ZIJN NIET BESTEMD VOOR KLINISCH ONDERZOEKEN.
4. De betreffende hulpmiddelen worden in een NIET-STERIELE verpakking op de markt gebracht.
5. De betreffende apparaten moeten worden beschouwd als behorend tot klasse I in overeenstemming met het bovenstaande vastgesteld bij bijlage VIII van bovengenoemde verordening.
6. MORETTI SpA onderhoudt en stelt gedurende ten minste tien jaar vanaf de productiedatum van de laatste batch de technische documentatie beschikbaar aan de bevoegde autoriteiten waaruit blijkt dat wordt voldaan aan Verordening 2017/745.

Opmerking: De volledige productcodes, de registratiecode van de fabrikant (SRN), de basis-UDI-DI-code en eventuele verwijzingen naar gebruikte normen worden vermeld in de EU-conformiteitsverklaring die MORETTI SPA uitgeeft en via haar kanalen beschikbaar stelt.

5. ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

- Raadpleeg voor het juiste gebruik van het apparaat zorgvuldig de volgende handleiding. • Houd het verpakte product, net als de verpakking, uit de buurt van warmtebronnen
het is gemaakt van karton.
- De levensduur van het apparaat wordt bepaald door de slijtage van niet-repareerbare en/of vervangbare onderdelen. • Let altijd goed op de aanwezigheid van bewegende delen die dit zouden kunnen doen.
beknelling van ledematen en persoonlijk letsel veroorzaken
- Let altijd op de aanwezigheid van kinderen.
- De gebruiker en/of patiënt moet elk ernstig incident dat zich voordoet melden
betreffende het hulpmiddel aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt gevestigd is.

6. GEBRUIKTE SYMBOLEN



Productcode



Unieke identificatie van het apparaat



CE-markering



Fabrikant



Productiepartij



Lees de handleiding voor instructies



Medisch apparaat



Voorwaarden voor verwijdering

7. ALGEMENE BESCHRIJVING

7.1 RS918

Douchezitje voor wandmontage. Gelakt stalen frame en HDPE-zitting. Opvouwbare en opvouwbare stoel.

7.2RS919

Douchezitje voor wandmontage met antislippoten en -punten. Gelakt aluminium frame en HDPE-zitting. Opvouwbare en opvouwbare stoel. In hoogte verstelbaar.

8. MONTAGE

De stalen bevestigingsplaat is voorzien van gaten voor bevestiging aan de muur. Installatie door bevoegd personeel wordt aanbevolen. De stoel moet worden bevestigd aan een muur die het gewicht van de eindgebruiker kan dragen.

9. VOOR ELK GEBRUIK •

- Controleer altijd de slijtage van de onderdelen om gebruik te garanderen.
van het apparaat in totale veiligheid voor mensen en dingen.
- Controleer de juiste montage van het apparaat.

10. WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIK

De fabrikant en de distributeur wijzen elke verantwoordelijkheid af voor gevolgen die voortvloeien uit: oneigenlijk gebruik van het product.

- Help de patiënt met loopproblemen altijd om op de stoel te gaan zitten.
- Niet gebruiken bij patiënten die het maximale gewicht overschrijden dat op het productetiket staat geplaatst op de structuur van de steun.
- Vermijd plotselinge bewegingen tijdens het positioneren.
- Wees voorzichtig met natte, vochtige of gladde vloeren, deze kunnen het lastig maken positionering van de patiënt.
- Bewaar het product niet buitenshuis. Controleer regelmatig de stabiliteit van het product en de juiste bevestiging van de schroeven en de staat van de rubberen beschermingen. • Indien u twijfels heeft over het gebruik, de afstelling of het onderhoud van het product, neem dan contact op met uw dealer.



AANDACHT!

Overschrijd om geen enkele reden de maximaal toegestane capaciteit!

11. HOE 11.1 RS919

TE GEBRUIKEN

Hoogte aanpassing

Verwijder de clip en schuif de interne loop tot de gewenste hoogte is bereikt; plaats de clip om de poot op de gekozen hoogte te stoppen.



AANDACHT!

Bepaal de hoogte van de poten voordat u de plaat aan de muur bevestigt.

12. REINIGING EN DESINFECTIE 12.1

Reiniging

Gebruik voor het reinigen van het product uitsluitend een in water gedrenkte doek en droog deze af met een schone, droge doek of met warm water en neutrale zeep. Gebruik geen schurende middelen, zuren, alcohol, schoonmaakmiddelen op chloorbasis, desinfectiemiddelen en aceton, omdat deze stoffen slijtage van de kunststof onderdelen en roest van de metalen oppervlakken veroorzaken.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van materialen die het oppervlak van het product kunnen aantasten of door chemische bijtende stoffen die tijdens het reinigen worden gebruikt.

12.2 Desinfectie

Ontsmet het product indien nodig met een milde desinfecterende reiniger.

13. VOORWAARDEN VOOR VERWIJDERING



Wanneer u het apparaat weggooit, mag u nooit de normale gemeentelijke afvalverwerkingssystemen gebruiken. In plaats daarvan wordt aanbevolen om het apparaat af te voeren via de gemeentelijke recyclingcentra voor de geplande recycling van de gebruikte materialen.

14. TECHNISCHE KENMERKEN

RS918

DIMENSIES:



ZITTEN:

51X31XH8CM

AFMETINGEN BEVESTIGINGSPLAAT: 33 X 15 X 0,4 CM



MAXIMALE CAPACITEIT:

100 kg

RS919

DIMENSIES:



ZITTEN:

51X30X8CM

BEVESTIGINGSPLAAT AFMETINGEN 33 X 15 X 0,6 CM



MAXIMALE CAPACITEIT:

100 kg

15. GARANTIE

Alle Moretti-producten hebben een garantie tegen materiaal- en fabricagefouten voor een periode van 2 (twee) jaar vanaf de verkoopdatum van het product, behoudens eventuele hieronder gespecificeerde uitsluitingen en beperkingen. Deze garantie is niet geldig in geval van verkeerd gebruik, misbruik of wijziging van het product en het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzingen. Het juiste beoogde gebruik van het product wordt aangegeven in de gebruikershandleiding.

Moretti is niet verantwoordelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade, persoonlijk letsel of iets anders veroorzaakt door of verband houdend met de installatie en/of het gebruik van de apparatuur dat niet nauwgezet voldoet aan de instructies gegeven in de installatie-, montage- en gebruikshandleidingen.

Moretti garandeert Moretti-producten niet tegen schade of defecten in de volgende omstandigheden: natuurrampen, ongeoorloofde onderhouds- of reparatiewerkzaamheden, schade als gevolg van problemen met de stroomvoorziening (indien van toepassing), gebruik van onderdelen of componenten die niet door Moretti zijn geleverd, het niet naleven van de richtlijnen en instructies voor gebruik, ongeoorloofde wijzigingen, transportschade (anders dan de originele verzending van Moretti) of het niet uitvoeren van onderhoud zoals aangegeven in de handleiding.

Slijtbare onderdelen vallen niet onder deze garantie als de schade is veroorzaakt door normaal gebruik van het product.

16. REPARATIES

16.1 Reparatie onder garantie

In het geval dat een Moretti-product tijdens de garantieperiode materiaal- of fabricagefouten vertoont, zal Moretti samen met de klant beoordelen of het productdefect onder de garantie valt.

Moretti kan, naar eigen goeddunken, het artikel onder garantie vervangen of repareren bij een gespecificeerde Moretti-dealer of op zijn hoofdkantoor. Arbeidskosten in verband met de reparatie van het product kunnen door Moretti worden betaald als wordt vastgesteld dat de reparatie binnen de reikwijdte van de garantie valt. Een reparatie of vervanging betekent niet dat de garantie wordt verlengd of verlengd.

16.2 Reparatie van een product dat niet onder de garantie valt

Een product dat niet onder de garantie valt, kan alleen voor reparatie worden geretourneerd na voorafgaande toestemming van de klantenservice van Moretti. Arbeids- en verzendkosten in verband met een reparatie die niet onder de garantie valt, zijn volledig voor rekening van de klant of wederverkoper. Voor reparaties aan producten die niet onder de garantie vallen, geldt een garantie van 6 (zes) maanden, gerekend vanaf de dag dat het gerepareerde product is ontvangen.

16.3 Niet-defecte producten De

klant wordt op de hoogte gesteld indien Moretti, na onderzoek en testen van een geretourneerd product, tot de conclusie komt dat het product niet defect is. Het product wordt teruggestuurd naar de klant en de verzendkosten als gevolg van het retourneren zijn voor zijn rekening.

17. RESERVEONDERDELEN

Voor reserveonderdelen en accessoires verwijzen wij u uitsluitend naar de algemene catalogus van Moretti. Originele Moretti-reserveonderdelen hebben een garantie van 6 (zes) maanden vanaf de dag waarop het reserveonderdeel is ontvangen.

18. VRIJSTELLINGSCLAUSULEN

Behalve zoals uitdrukkelijk gespecificeerd in deze garantie en binnen de grenzen van de wet, geeft Moretti geen andere verklaringen, garanties of voorwaarden, expliciet of impliciet, inclusief enige verklaringen, garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk en niet-interferentie. Moretti garandeert niet dat het gebruik van het Moretti-product ononderbroken of foutloos zal zijn. De duur van eventuele impliciete garanties die door de wet kunnen worden opgelegd, is beperkt tot de garantieperiode, binnen de grenzen van de wet. Sommige staten of landen staan geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie of de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade met betrekking tot consumentenproducten. In dergelijke staten of landen zijn sommige uitsluitingen of beperkingen van deze garantie mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



GARANTIE CERTIFICAAT

Product _____

Gekocht op datum _____

Dealer _____

Via _____ Plaats _____

Verkocht aan _____

Via _____ Plaats _____



Via Brussel, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel

www.morettispa.com e-mail: info@morettispa.com

GEMAAKT IN PRC




MOPEDIA®

EN

DOUCHEBANKEN MUUR

HANDLEIDING

1. CODES	PAGINA 3
2. INLEIDING	PAGINA 3
3. BEOOGD GEBRUIK	PAGINA 3
4. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING	PAG.3
5. ALGEMENE WAARSCHUWINGEN	PAGINA 4
6. SYMBOLEN	PAGINA 4
7. ALGEMENE BESCHRIJVING.....	PAGINA 4
7.1 RS918.....	4 7.2
RS919.....	4 8.
MONTEREN.....	PAGINA 4
9. VÓÓR GEBRUIK	PAGINA 4
10. WAARSCHUWINGEN BIJ GEBRUIK.....	PAG.5
11. HOE TE GEBRUIKEN.....	PAG.5
11.1 RS919.....	blz. 5 12. REINIGING EN
DESINFECTIE	PAGINA 5
12.1 Reiniging.....	blz. 5 12.2
Desinfectie	blz. 5 13. VOORWAARDEN VOOR
VERWIJDERING	PAGINA 5
14. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.....	PAGINA 6
15. GARANTIE	PAGINA 6
16. REPARATIE.....	PAGINA 6
16.1 Reparatie onder garantie	P. 6 16.2 Reparaties die niet
onder de garantie vallen.....	p. 6 16.3 Niet-defect apparaat.....
P. 6 17. RESERVEONDERDELEN.....	BLADZIJDE
18. VRIJGESTELDE CLAUSULES.....	PAG.7

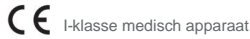

VERORDENING (EU) 2017/745 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen

1. CODES

RS918	Douchebank aan de muur
RS919	Wanddouchebank met poten

2. INLEIDING Hartelijk

dank voor uw aankoop van de MOPEDIA-badproducten van Moretti SpA-productreeks. Deze gebruikershandleiding biedt enkele suggesties voor het juiste gebruik van het door u gekozen product en geeft waardevol advies voor uw veiligheid. Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw verkoper voor advies en hulp. Bij twijfel raden wij u aan contact op te nemen met de dealer, die u goed kan helpen en adviseren.

Opmerking Controleer of een onderdeel transportschade heeft en test het voordat u het gebruikt. In geval van schade mag u het apparaat niet gebruiken. Neem contact op met uw dealer voor verdere instructies.

3. BEOOGD GEBRUIK

De wanddouchebank van Moretti is bedoeld voor het uitschakelen van patiëntenhulp bij badoperaties.

WAARSCHUWING!



- Gebruik het product niet voor een doel dat niet in deze handleiding wordt vermeld.
- Moretti SpA wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele gevolgen die voortkomen uit een onjuist gebruik van dit product en uit ongeoorloofde wijzigingen aan het frame van het product.
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om de informatie in dit document zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

4. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Moretti SpA verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat het product gemaakt en verhandeld door Moretti SpA en behorend tot de groep WALL SHOWER BENCHES voldoet aan de bepalingen van de verordening 2017/745 betreffende MEDISCHE APPARATEN van 5 april 2017.

Voor dit doel garandeert en verklaart Moretti SpA onder eigen verantwoordelijkheid het volgende:

1. De apparaten voldoen aan de eisen van algemene veiligheid en prestatie die door de bijlage I van verordening 2017/745 zoals vastgelegd in bijlage IV van bovengenoemde verordening.
2. De apparaten ZIJN GEEN MEETINSTRUMENTEN.
3. De apparaten ZIJN NIET GEMAAKT VOOR KLINISCHE TESTS.
4. De apparaten zijn verpakt in een NIET-STERIELE DOOS.
5. De apparaten behoren tot klasse I in overeenstemming met de bepalingen van bijlage VIII van het bovenstaande genoemde regeling
6. Moretti SpA verstrekt aan de bevoegde autoriteiten de technische documentatie om de conformiteit met de verordening 2017/745 te bewijzen, gedurende ten minste 10 jaar vanaf de laatste partijproductie.

Let op: Volledige productcodes, de fabrikantregistratiecode (SRN), de UDI-DI-code en eventuele verwijzingen naar gebruikte regelgeving zijn opgenomen in de EU-conformiteitsverklaring die Moretti SpA vrijgeeft en via haar kanalen beschikbaar stelt.

5. ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

- Gebruik dit product of eventuele beschikbare optionele apparatuur NIET zonder eerst deze handleiding volledig te hebben gelezen en begrepen. Als u de waarschuwingen, waarschuwingen of instructies niet kunt begrijpen, neem dan contact op met een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, dealer of technisch personeel voordat u probeert deze apparatuur te gebruiken, anders kan letsel of schade optreden.
- Houd de verpakte douchebank uit de buurt van warmtebronnen.
- De gebruikslimiet van het product wordt bepaald door de slijtage van de onderdelen. • Houd handen en vingers ALTIJD uit de buurt van bewegende delen om letsel te voorkomen.
- Laat kinderen NIET op de badstoel spelen of deze bedienen.
- De gebruiker en/of de patiënt moeten elk ernstig ongeval dat zich heeft voorgedaan in verband met het apparaat, melden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de staat waartoe de gebruiker en/of patiënt behoort.

6. SYMBOLEN



Productcode



Unieke apparaatidentificatie



CE-markering



Fabrikant



Batchpartij



Lees de handleiding



Medisch apparaat



Voorwaarden voor verwijdering

7. ALGEMENE BESCHRIJVING

7.1 RS918

Douchebank aan de muur. Gelakt stalen frame en opklapbare HDPE-stoel om ruimte te besparen.

7.2RS919

Wanddouchebank met poten en antislippunten. Gelakt aluminium frame en opklapbare HDPE-stoel om ruimte te besparen.

8. MONTEREN

De montageplaat is voorzien van montagegaten om aan de muur te bevestigen. Het moet worden gemonteerd door een bevoegd persoon en worden bevestigd aan een muur die in staat is de verticale belasting en hefboomwerking van de gebruiker te dragen.

9. VOOR GEBRUIK •

Controleer of het frame beschadigd is om een veilig gebruik voor mensen en dingen te garanderen.

- Controleer de juiste montage van het apparaat.

10. WAARSCHUWINGEN BIJ GEBRUIK

De fabrikant en distributeur zijn niet verantwoordelijk voor enige aansprakelijkheid voor de gevolgen van oneigenlijk gebruik van het product.

- Help de patiënt met loopproblemen altijd om op de stoel te gaan zitten.
- Niet gebruiken bij patiënten die het maximale gewicht overschrijden dat staat vermeld op het etiket op het productframe.
- Vermijd plotselinge bewegingen tijdens het positioneren.
- Wees voorzichtig op natte vloeren, op natte of gladde oppervlakken; dit kan de patiënt lastig maken positionering.
- Bewaar het product niet buiten. Controleer regelmatig de stabiliteit van het product en de juiste bevestigingsschroeven en de status van het beschermingsrubber.
- Neem bij twijfel over het gebruik, de afstelling of het onderhoud van het product contact op met uw dealer.



WAARSCHUWING!

Overschrijd om geen enkele reden het maximale draagvermogen!

11. HOE TE GEBRUIKEN

11.1 RS919

Hoogte aanpassing

Verwijder de clip, schuif de poot naar de gewenste positie en druk de clip stevig terug in het gat.



WAARSCHUWING!

Stel de poot- en railhoogte in voordat u de montageplaat aan de muur bevestigt.

12. REINIGING EN DESINFECTIE 12.1 Reiniging

Gebruik voor het reinigen van het hulpmiddel en de structuur een oplossing van alcohol en neutrale zeep (in gelijke delen) gemengd met water. Gebruik bij het reinigen geen schurende stoffen, zuren, alcohol, chloorhoudende schoonmaakmiddelen, desinfectiemiddelen en aceton, omdat deze stoffen slijtage aan de kunststofoppervlakken en roest aan metalen oppervlakken veroorzaken.

Het productiebedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van materialen die het productoppervlak kunnen beschadigen of corrosieve chemicaliën tijdens het reinigen.

12.2 Desinfectie

Als u het product moet desinfecteren, gebruik dan een gangbaar desinfecterend neutraal reinigingsmiddel.

13. VOORWAARDEN VOOR



VERWIJDERING Bij verwijdering mag u de inzetcontainer voor gemeentelijk afval niet gebruiken. Wij raden aan om de badstoel op de daarvoor bestemde afvalplaatsen af te voeren voor recycling.

14. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

RS918

DIMENSIES:

 L: 51 CM P: 40 CM H: 20 CM

ZETEL:

51X31XH8CM

AFMETINGEN MONTAGEPLAAT:

33X15X0,4CM


MAX LAADGEWICHT:

100 kg

RS919

DIMENSIES:

 L: 51 CM P: 43 CM H: 45 tot 60 CM

ZETEL:

51X30X8CM

AFMETINGEN MONTAGEPLAAT:

33X15X0,6CM


MAX LAADGEWICHT:

100 kg

15. GARANTIE

Voor Moretti-producten geldt een garantie tegen materiaal- of fabricagefouten voor een periode van (twee) 2 jaar vanaf de aankoopdatum, met inachtneming van de hieronder gespecificeerde beperkingen en uitsluitingen. De garantie is niet van toepassing in geval van schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, misbruik of wijziging van het product, en de garantie is niet geldig als de gebruiksinstructies niet strikt worden gevolgd. Het juiste beoogde gebruik van het apparaat wordt in deze handleiding gespecificeerd.

Moretti is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van persoonlijk letsel of anderszins veroorzaakt door of in verband met verkeerde installatie of oneigenlijk gebruik.

Moretti Moretti garandeert de producten niet tegen schade of defecten in de volgende omstandigheden: natuurrampen, niet-geautoriseerd onderhoud of reparatie, schade als gevolg van problemen met de stroomvoorziening (waar aanwezig) gebruik van reserveonderdelen die niet door Moretti zijn geleverd, oneigenlijk gebruik, niet-geautoriseerde wijzigingen transportschade (anders dan originele verzending door Moretti), of in geval van onvoldoende onderhoud zoals aangegeven in de handleiding. De garantie dekt geen onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage tijdens het juiste gebruik van het apparaat.

16. REPARATIE

16.1 Reparatie onder garantie

In het geval dat een product van Moretti tijdens de garantieperiode materiaal- of fabricagefouten vertoont, zal Moretti met de klant bevestigen of het defect onder de garantie valt.

Moretti kan het artikel onder garantie naar eigen goeddunken repareren of vervangen bij een Moretti-dealer of op een Moretti-locatie. De arbeidskosten voor de reparatie kunnen aan Moretti in rekening worden gebracht als de reparatie onder de garantie valt. Reparatie of vervanging betekent niet dat de garantie wordt verlengd of verlengd

16.2 Reparatie valt niet onder de garantie

Een product dat niet onder de garantie valt, kan alleen worden geretourneerd voor reparatie na voorafgaande toestemming van de Moretti-klantenservice. De arbeids- en verzendkosten voor een reparatie die niet onder de garantie valt, zijn volledig voor rekening van de klant of dealer. Voor reparaties van producten die niet onder de garantie vallen, geldt een garantie van zes (6) maanden vanaf de datum waarop u het gerepareerde product ontvangt.

16.3 Niet-defect apparaat

De klant wordt op de hoogte gesteld indien Moretti, na het geretourneerde product te hebben onderzocht en getest, beweert dat het product niet defect is. In dit geval wordt het goed teruggestuurd naar de klant, alle verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

17. RESERVEONDERDELEN

De originele Moretti-reserveonderdelen hebben een garantie van 6 (zes) maanden vanaf de datum van ontvangst. Raadpleeg voor reserveonderdelen en accessoires alleen de algemene catalogus van Moretti.

18. VRIJGESTELDE CLAUSULES

Tenzij uitdrukkelijk gespecificeerd in deze garantie en binnen de grenzen van de wet, biedt Moretti geen enkele verklaring, garantie of voorwaarde, expliciet of impliciet, inclusief enige verklaring, garantie of voorwaarde van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk en interferentie. Moretti garandeert niet dat het gebruik van het product Moretti ononderbroken of foutloos zal zijn. De duur van eventuele impliciete garanties die door de wet kunnen worden opgelegd, is beperkt tot de garantieperiode, binnen de grenzen van de wet. Sommige staten staan geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie, noch op de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade in verband met producten voor consumenten. In dergelijke staten of landen zijn bepaalde disclaimers en beperkingen van deze garantie mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**GARANTIE CERTIFICAAT**

Product _____

Gekocht op (datum) _____

Detailhandelaar _____

Adres _____ **Plaats** _____

Verkocht aan _____

Adres _____ **Plaats** _____



Via Brussel, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel

www.morettispa.com e-mail: info@morettispa.com

GEMAAKT IN PRC



MOPEDIA®

SPA

MUUR DOUCHE STOELN

HANDMATIG

1. CODES.....	PAGINA 3 2.
INLEIDING.....	Pagina 3 3
DOEL.....	pagina 3 4. EU-VERKLARING
VAN OVEREENSTEMMING.....	PAGINA 3
5. ALGEMENE WAARSCHUWINGEN	PAGINA 4
6. SYMBOLEN.....	PAGINA 4 7. ALGEMENE
BESCHRIJVING.....	PAGINA 4
7.1 RS918.....	4 7.2
RS919.....	4 8.
Bewerken.....	pag.4 9. ANTES DE CADA
USO	PAGINA 4
10. WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIK	PAGINA 5
11. GEBRUIKSWIJZE	PAGINA 5
11.1 RS919.....	P. 5 12. REINIGING
EN DESINFECTIE	PAGINA 5
12.1 Reiniging.....	P. 5 12.2
Desinfectie	P. 5 13.
VOORWAARDEN VOOR VERWIJDERING	PAGINA 5 14. TECHNISCHE
EIGENSCHAPPEN.....	PAGINA 6 15.
GARANTIE.....	PAGINA.6
16. REPARATIES.....	PAGINA 6
16.1 Reparatie onder garantie	P. 6 16.2 Reparatie van een
product dat niet onder de garantie valt.....	pag. 6 16.3 Niet-defecte
producten	P. 7 17.
RESERVEONDERDELEN.....	PAGINA.7
18. EXONERATIEVE CLAUSULES	BLADZIJDE

CE Klasse I medisch hulpmiddel

VERORDENING (EU) 2017/745 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 5 april 2017 over medische hulpmiddelen

1. CODES

RS918 Wandgemonteerd douchezitje **RS919**

Wandgemonteerd douchezitje met poten

2. INLEIDING

Bedankt dat u hebt gekozen voor een douchezitje uit de MOPEDIA-lijn van Moretti. Moretti douchezitjes zijn ontworpen en vervaardigd om aan al uw behoeften te voldoen, met praktisch, correct en veilig gebruik. Deze gebruiksaanwijzing bevat enkele suggesties waarmee u de door u gekozen apparatuur correct kunt gebruiken, evenals waardevolle tips voor uw veiligheid. Het wordt aanbevolen dat u de gehele handleiding aandachtig doorleest voordat u de stoel gebruikt.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de distributeur, die u met hulp en advies kan voorzien.

Opmerking Controleer of geen van de onderdelen van het product beschadigd is tijdens het transport. In geval van schade het product niet gebruiken en contact opnemen met de wederverkoper voor verdere instructies.

3. DOEL

De door Moretti vervaardigde MOPEDIA-lijn douchehulpmiddelen zijn ontworpen om het zitten van gehandicapten of mensen met motorische problemen tijdens hygiënewerkzaamheden te vergemakkelijken.

AANDACHT!



- Het is verboden het product te gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in deze handleiding.
- Moretti SpA wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade die voortvloeit uit onjuist gebruik van het product of gebruik anders dan aangegeven in deze handleiding.
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan het product en hieraan aan te brengen handleiding zonder voorafgaande kennisgeving, voor verbeteringsdoeleinden.

4. EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

MORETTI SpA verklaart onder haar exclusieve verantwoordelijkheid dat de producten die door MORETTI SpA zelf zijn vervaardigd en op de markt zijn gebracht en die deel uitmaken van de familie van WALL DOUCHE-ZETELS, in overeenstemming zijn met de bepalingen van verordening 2017/745 betreffende SANITAIR PRODUCTEN van 5 april 2017. 2017.

Hiertoe garandeert en verklaart MORETTI SpA onder haar exclusieve verantwoordelijkheid de volgende punten:

1. De producten in kwestie voldoen aan de algemene veiligheids- en prestatie-eisen vastgelegd in bijlage I en bijlage IV van verordening 2017/745.
2. De betreffende producten ZIJN GEEN MEETINSTRUMENTEN.
3. De betreffende producten ZIJN NIET BESTEMD VOOR KLINISCH ONDERZOEK.
4. De betreffende producten worden in NIET-STERIELE presentatie op de markt gebracht.
5. De betreffende producten moeten worden beschouwd als klasse I overeenkomstig de bepalingen van Bijlage VIII bij dezelfde verordening.
6. MORETTI SpA onderhoudt en stelt de bevoegde autoriteiten gedurende 10 jaar vanaf de productiedatum van de laatste batch de technische documentatie ter beschikking die de naleving van verordening 2017/745 verifieert.

Opmerking: De volledige productcodes, de registratiecode van de fabrikant (SRN), de basis-UDI-DI-code en eventuele verwijzingen naar gebruikte normen staan in de EU-conformiteitsverklaring die MORETTI SPA uitgeeft en via haar eigen kanalen beschikbaar stelt.

5. ALGEMENE WAARSCHUWINGEN • Lees

deze handleiding aandachtig door voor een correct gebruik van het product. • Houd het verpakte product, sinds de verpakking, uit de buurt van warmtebronnen

Het is karton.

- De levensduur van het product is afhankelijk van de slijtage van niet-repareerbare of vervangbare onderdelen. • Let altijd goed op de aanwezigheid van bewegende delen die de machine kunnen bekneld raken
handen en persoonlijk letsel veroorzaken.
- Let vooral op als er kinderen aanwezig zijn.
- De gebruiker of patiënt moet elk ernstig incident dat zich voordoet in verband met het product melden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar hij of zij zich bevindt.

6. SYMBOLEN



Productcode



Unieke productidentificatie



CE-gemarkeerd



Fabrikant



Productie batch



Lees de handleiding



Medisch apparaat



Voorwaarden voor verwijdering

7. ALGEMENE BESCHRIJVING

7.1 RS918

Douchezijte voor wandmontage. Gelakt stalen frame en HDPE-zitting. Opklapbare en opklapbare stoel.

7.2 RS919

Wandzijte met antislippoten en steunen voor douche. Gelakt aluminium frame en HDPE-zitting. Opklapbare en opklapbare stoel. Verstelbare hoogte.

8. Montage

De stalen bevestigingsplaat is voorzien van gaten voor bevestiging aan de muur. De installatie moet worden uitgevoerd door bevoegd personeel. De stoel moet worden bevestigd aan een muur die geschikt is om het gewicht van de eindgebruiker te dragen.

9. VOOR ELK GEBRUIK •

Controleer altijd de slijtage van de onderdelen om een veilig gebruik van het product te garanderen, zonder gevaar voor mensen en eigendommen.

- Controleer de correcte montage van het product.

10. WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIK

De fabrikant en de distributeur zijn vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid in geval van gevolgen die voortkomen uit oneigenlijk gebruik van het product.

- Help de patiënt met bewegingsproblemen om op de stoel te gaan zitten.
- Gebruik het product niet bij patiënten die het maximale gewicht overschrijden dat staat aangegeven op het etiket dat op het product is aangebracht.
- Vermijd plotselinge bewegingen tijdens de installatie.
- Let op op nat, vochtig of glad wegdek: dit kan het positioneren bemoeilijken van de patiënt.
- Laat het product niet buiten staan. Controleer periodiek de stabiliteit van het product, de juiste bevestiging van de schroeven en de staat van de rubberen beschermingen. • Neem bij twijfel over gebruik, regeling of onderhoud contact op met de wederverkoper.



AANDACHT!

Overschrijd om welke reden dan ook de maximaal toegestane capaciteit niet.

11. GEBRUIKSWIJZE

11.1 RS919

Hoogte aanpassing

Verwijder de clip en verplaats de binnenband naar de gewenste hoogte; Steek de clip in het gat om de poot op de gewenste hoogte te bevestigen.



AANDACHT!

Bepaal de hoogte van de poten voordat u de plaat aan de muur bevestigt.

12. REINIGING EN DESINFECTIE 12.1

Reiniging

Gebruik voor het reinigen van het product alleen een doek die in water is gedrenkt en droog deze af met een schone, droge doek of met warm water en neutrale zeep. Gebruik geen schurende stoffen, zuren, alcohol, reinigingsmiddelen op chloorbasis, desinfectiemiddelen of aceton, aangezien deze stoffen slijtage van de kunststof onderdelen en oxidatie van de metalen oppervlakken veroorzaken.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van materialen die het oppervlak van het product kunnen aantasten of door bijtende chemicaliën die tijdens het reinigen worden gebruikt.

12.2 Desinfectie

Ontsmet het product indien nodig met een delicaat desinfecterend reinigingsmiddel.

13. VOORWAARDEN VOOR VERWIJDERING



Gooi het product niet weg samen met vast huishoudelijk afval. Om het product af te voeren, dient u het af te leveren op een gemeentelijk ecologisch eiland, waar de materialen vervolgens kunnen worden gerecycled.

6

14. TECHNISCHE KENMERKEN

RS918

AFMETINGEN:

 L: 51 CM
  P: 40 CM
  H: 20 CM

ZETEL:

51X31XH8CM

AFMETINGEN BEVESTIGINGSPLAAT: 33 X 15 X 0,4 CM



MAXIMALE CAPACITEIT:

100 kg

RS919

AFMETINGEN:

 L: 51 CM
  P: 43 CM
  H: 45 tot 60 CM

ZETEL:

51X30X8CM

AFMETINGEN BEVESTIGINGSPLAAT 33 X 15 X 0,6 CM



MAXIMALE CAPACITEIT:

100 kg

15. GARANTIE

Op alle Moretti-producten zit een garantie van 2 jaar vanaf de verkoopdatum tegen fabricage- of materiaalfouten, onverminderd eventuele hieronder gespecificeerde uitsluitingen en beperkingen. De garantie geldt niet bij schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik, misbruik, wijzigingen en het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing.

Het juiste doel van het product wordt aangegeven in de gebruiksaanwijzing.

Moretti is niet verantwoordelijk voor schade, persoonlijk letsel of andere gevolgen als gevolg van installatiefouten en gebruik van het product dat niet in overeenstemming is met de instructies in de installatie-, montage- en gebruikshandleidingen.

Moretti garandeert Moretti-producten niet voor schade of defecten onder de volgende omstandigheden: calamiteiten, ongeautoriseerde onderhouds- of reparatiewerkzaamheden, schade veroorzaakt door elektrische stroom (indien aanwezig), gebruik van onderdelen die niet door Moretti zijn geleverd, het niet naleven van de gebruiksinstructies, ongeoorloofde wijzigingen, schade tijdens transport (anders dan de originele Moretti-verzending), gebrek aan onderhoud aangegeven in de handleiding.

Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage vallen niet onder de garantie als de schade is veroorzaakt door normaal gebruik van het product.

16. REPARATIES

16.1 Reparatie onder garantie

Indien een Moretti-product tijdens de garantieperiode materiaal- of fabricagefouten vertoont, zal Moretti samen met de klant beoordelen of het productdefect onder de garantie valt.

Moretti kan naar eigen goeddunken het artikel onder garantie vervangen of repareren op het adres van een gespecificeerde Moretti-wederverkoper of op zijn eigen hoofdkantoor. Arbeidskosten voor de reparatie van het product kunnen door Moretti worden gedragen als wordt vastgesteld dat de reparatie onder de garantie valt. Een reparatie of vervanging betekent niet dat de garantie wordt verlengd of verlengd.

16.2 Reparatie van een product dat niet onder de garantie valt

Een product dat niet onder de garantie valt, mag alleen voor reparatie worden geretourneerd met voorafgaande toestemming van de klantenservice van Moretti. Arbeids- en verzendkosten in verband met een reparatie die niet onder de garantie valt, zijn volledig de verantwoordelijkheid van de klant of wederverkoper. Voor reparaties aan producten die niet onder de garantie vallen, geldt een garantie van 6 (zes) maanden vanaf de datum van levering van het gerepareerde product.

16.3 Niet-defecte producten

Na evaluatie en testen van een geretourneerd product zal Moretti de klant op de hoogte stellen als het product niet defect blijkt te zijn. Het product wordt teruggestuurd naar de klant en deze is verantwoordelijk voor de retourkosten.

17. RESERVEONDERDELEN

Raadpleeg uitsluitend de algemene catalogus van Moretti om reserveonderdelen en accessoires te verkrijgen.

Voor originele reserveonderdelen van Moretti geldt een garantie van 6 (zes) maanden vanaf de datum van levering van het reserveonderdeel.

18. EXONERATIEVE CLAUSULES

Buiten de specificaties van deze garantie en binnen de grenzen van de wet, geeft Moretti geen enkele andere verklaring, garantie of voorwaarde, expliciet of impliciet, met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor bepaalde doeleinden, niet-inbreuk en niet-inmenging.

Moretti garandeert niet dat het gebruik van het Moretti-product vrij zal zijn van onderbrekingen of fouten. De duur van eventuele impliciete garanties die door de wet kunnen worden opgelegd, is beperkt tot de garantieperiode in overeenstemming met de grenzen van de wet. Sommige staten of landen staan geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie of de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade met betrekking tot consumentenproducten. In dergelijke staten en landen zijn sommige uitsluitingen of beperkingen van deze garantie mogelijk niet op u van toepassing.

Deze garantie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



GARANTIECERTIFICAAT

Product _____

Aankoopdatum _____

Distributeur _____

Straat _____ **Plaats** _____

Verkocht aan _____

Straat _____ **Plaats** _____



Via Brussel, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel

www.morettispa.com e-mail: info@morettispa.com

GEMAAKT IN PRC

MORETTI SPA

Via Brussel, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Faxen. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com