




En USER GUIDE

!!! Please refer to our website: www.geemarc.com for an up to date user guide, as there may be important updates and changes you need to be aware of !!!

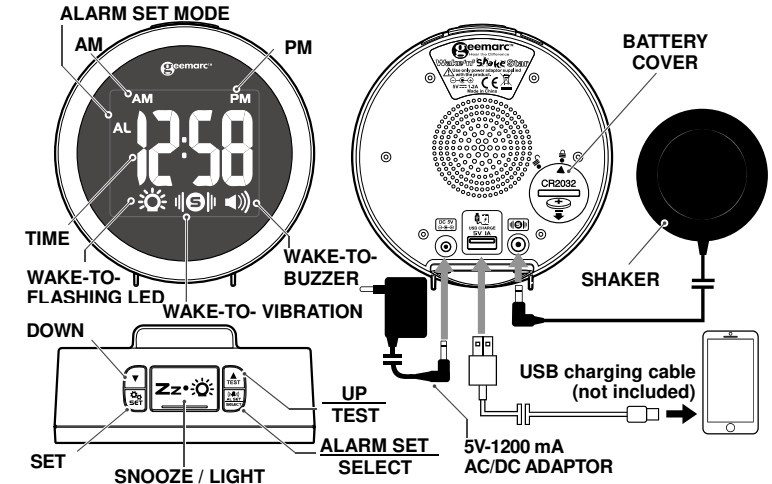

BACKUP BATTERY INSTALLATION

Your clock requires one CR2032 lithium battery (not included) to provide backup power to the clock in the event of a temporary power interruption. Place your unit face down on a flat surface.

- Use coins and turn counterclockwise to open the battery door located on the back of the unit.
- Insert one new CR2032 lithium battery into the battery compartment with the "+" side facing up as indicated.
- Place the battery door on the battery compartment, use coins and turn clockwise to lock the battery door.

It is not necessary to insert a back-up battery for the clock to function; however, fitting the backup battery will keep the time and alarm settings in the event of a power cut or the DC adaptor being unplugged.

If mains power is interrupted or the adaptor is unplugged, the LED clock display will go off and the alarm will not function.

Please replace the battery every year to ensure that your device is not damaged.

INSTALLATION

Plug the AC/DC adaptor to an AC household outlet, and then plug the DC jack to the back of the unit. Your clock is ready to work for you.

TO SET TIME AND THE SNOOZE DURATION

- Press **SET** once, the hour digits "00" flash. Press **▲** or **▼** to set the time in hours (hold to advance rapidly).
- Press **SET** again, the minute digits "00" flash. Press **▲** or **▼** to set the time in minutes. (hold to advance rapidly).
- Press **SET** again, the display shows "24Hr" and flashes. Press **▲** or **▼** to select "12Hr" or "24Hr" time format. If "12Hr" is selected, the **AM** will appear on the upper left to indicate the morning time and **PM** will appear on the upper right to indicate the afternoon.
- Press **SET** again, the display shows "05" and flashes. Press **▲** or **▼** to select your snooze time from 5 to 60 minutes.
- Press **SET** again or if no key pressed for approx. 10 seconds to exit the setting mode.

TO SET THE ALARM

- Press and hold **AL SET / SELECT**, **AL** appear and the alarm's hour digits flash. Press **▲** or **▼** to set the alarm in hours. (Hold **▲** or **▼** to advance rapidly).
- Press **AL SET / SELECT** once again, the minute digits flash. Press **▲** or **▼** to set the alarm in minutes. (Hold **▲** or **▼** to advance rapidly).
- Press **AL SET / SELECT** again, LED displays "HI" (vibration at HI level), press **▲** or **▼** to select "LO" (vibration at Lo level)
- Press **AL SET / SELECT** once again, LED displays "F-1 (ex. 800 Hz)" and flash, press **▲** or **▼** to select the alarm tone (frequency) :

- F-1 (low tone, 800 Hz), F-2 (mid tone, 1 KHz), F-3 (high tone, 1.5 KHz)
- Press **AL SET / SELECT** again, LED displays "L1" (for the Low ringer level), press **▲** or **▼** to select "L3" (for the high ringer level)
 - Press **AL SET / SELECT** once again or no button around 10 seconds to exit the alarm setting mode.

TO TURN ON/OFF AND SELECT THE ALARM MODE

- At normal time display mode, press **AL SET / SELECT** one at a time to activate the alarm(s) and turn on corresponding alarm indicator(s) on the lower part of the display:

	: only shaker activated
	: both sound and shaker alarm activated
	: both strobe light and shaker alarm activated
	: strobe light, sound and shaker alarm activated

- Press **AL SET/SELECT** once more to turn off all the alarms, all , and alarm indicators are turned off.

Note: To use the shaker alarm, please plug in the shaker plug to the back of the clock. If user doesn't want to use the shaker alarm, unplug the shaker plug from the clock.

TO STOP AND RESET THE ALARM TO COME ON THE NEXT DAY

When alarm is sounding, the corresponding alarm indicator flashes. Press **AL SET / SELECT** once to stop the alarm and reset it to come on the following day. After that, the corresponding alarm indicator stays on the display.

TO USE SNOOZE (default snooze duration is 5 minutes)

When alarm is sounding, presses **Zz •** once, the alarm will stop temporarily and the corresponding alarm indicator keep flashing. The alarm will come on again after the set snooze duration is over.

TO USE THE HI-MED-LO DIMMER (LED TIME DIGITS)

There is a 3-level brightness control for the LED clock display. Press **Zz •** to adjust the brightness (**HI / MED / LO**) of the LED display. This can only be done when the unit is not alarming. At the start, the brightness is setting on Hi position.

TO USE THE RING OF LED LIGHT

Press and hold **Zz •** button to turn on the ring of LED light, the brightness level of LED ring (Hi-Med-Lo) corresponds to the time display brightness (Hi-Med-Lo). When the LED ring lights up, press **Zz •** button one at a time to adjust time display brightness and LED ring brightness accordingly. Press and hold **Zz •** button to turn off the ring of LED light. (doesn't forget to readjust LCD dimmer after).

CHARGE YOUR MOBILE PHONE WITH USB PORT

Connect the charging cable of your mobile phone to the USB port at the back of the clock and then connect the other end to the micro USB charging socket on your mobile phone. The clock will charge the mobile phone automatically.

Note:

1. Make sure the cable supplied with your mobile phone is used for charging.
2. Make sure the adaptor supplied with this clock (5V 1.2A) is used to power it.
3. It is not possible to charge an iPad® or notepad from the USB socket on this clock.
4. No USB charging provided during the alarms are sounding / active.

TEST MODE

Press and hold **▲ / TEST** button, strobe light flashing, shaker vibrating and buzzer sounding.

TROUBLE SHOOTING

If your clock displays incorrect time or does not function correctly, which may be caused by electro-static discharge or other interference. Takes heavy current when electric timer on heater switches on/off (poor mains filtering). The mains adaptor for the clock should only be plugged into a mains wall socket-not a mains extension that is shared with electric heater (or other high wattage equipment).

CARE OF YOUR PRODUCT

1. Place your clock on a stable surface, away from sources of direct sunlight or excessive heat or moisture.
2. Protect your furniture when placing your unit on a natural wood and lacquered finish by using a cloth or protective material between the unit and the furniture.
3. Clean your unit with a soft cloth moistened only with mild soap and water. Stronger agents such as benzene, thinners or similar materials can damage the surface of the unit. Make sure the unit is unplugged before cleaning.
4. Remove the back-up battery if the clock is not going to be used for a month or longer to prevent possible corrosion. Should the battery compartment become corroded or dirty, clean the compartment thoroughly and replace the battery.

SPECIFICATIONS

Alarm duration	: 1 hour	
Snooze duration Adjustable	: 5 to 60 minutes	
Default settings	Time format	24 hour
	Time	0:00
	Alarm	6:00
	Alarm and shaker level	Hi
	Alarm sound frequency	F-1
Audible alarm	Alarm sound level	L1 (low)
	Snooze duration	05 (5 minutes)
Audible alarm	: up to 95 dB at 1m	

GUARANTEE

From the moment your Geemarc product is purchased, Geemarc guarantee it for the period of two years. During this time, all repairs or replacements (at our discretion) are free of charge. Should you experience a problem then contact our help line or visit our website at www.geemarc.com.

The guarantee does not cover accidents, negligence or breakages to any parts. The product must not be tampered with or taken apart by anyone who is not an authorized Geemarc representative.

The Geemarc guarantee in no way limits your legal rights.

IMPORTANT: YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR GUARANTEE AND MUST BE RETAINED AND PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY CLAIM.

Please note: The guarantee applies to the United Kingdom only.

DECLARATIONS:

CE Directives: Geemarc Telecom SA hereby declares that this product is in compliance with the CE Directive requirements.

The CE declaration of conformity may be consulted at www.geemarc.com

Electrical connection: The apparatus does not incorporate an integral power on/off switch. To switch off the apparatus, disconnect the power adaptor.

When installing the apparatus, ensure that the mains power socket is readily accessible

Recycling Directives: The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) has been put in place for the products at the end of their useful life are recycled in the best way. When this product is finished with, please do not put it in your domestic waste bin. Please use one of the following disposal options:

- Remove the batteries and deposit them in an appropriate WEEE skip.
- Deposit the product in an appropriate WEEE skip.
- Or, hand the old product to the retailer. If you purchase a new one, they should accept it.


Thus if you respect these instructions you ensure human health and environmental protection.

For product support and help visit our website at www.geemarc.com telephone 01707 387602 or fax 01707 832529

Fr

MANUEL D'UTILISATION

!!! Veuillez consulter notre site Web :www.geemarc.com car il peut y avoir des mises à jour importantes et changement dont vous devez être conscient !!!

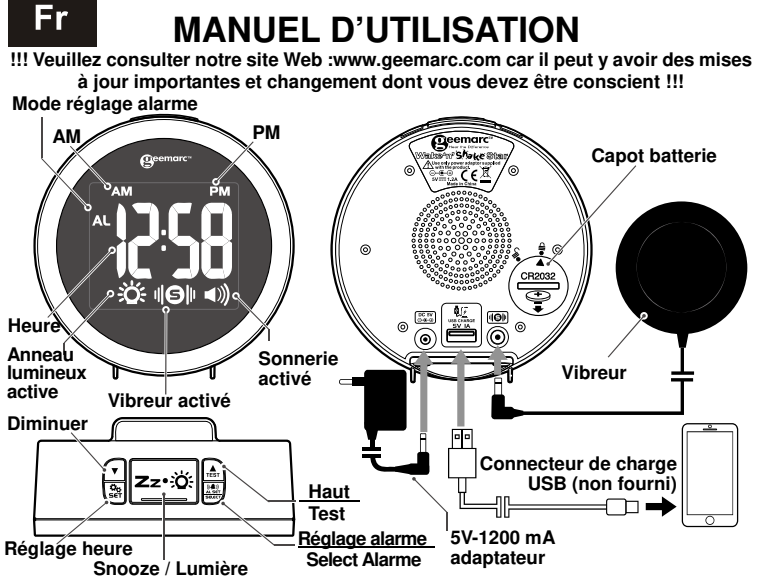

INSTALLATION DE LA BATTERIE DE SECOURS

Une batterie au lithium CR2032 est requise (non incluse) pour fournir une alimentation électrique de secours à votre réveil en cas de panne d'électricité temporaire. Placez votre réveil face vers le bas sur une surface plane.

1. Utilisez une pièce et tournez la dans le sens antihoraire pour ouvrir le compartiment batterie placé à l'arrière de votre réveil.
2. Insérez la batterie au lithium CR2032 dans le compartiment, avec le signe '+' vers le haut comme indiqué.
3. Remettez le couvercle de batterie en utilisant votre pièce.

Il n'est pas nécessaire d'insérer une batterie de secours pour faire fonctionner le réveil; par contre en cas de coupure de courant ou du débranchement de l'adaptateur secteur, la batterie de secours permettra de conserver les réglages de l'heure et de l'alarme.

En cas de coupure d'électricité ou si l'adaptateur est débranché, le réveil s'éteindra et l'alarme ne fonctionnera pas.

Veillez remplacer la batterie tous les ans pour garantir le bon fonctionnement de votre appareil.

INSTALLATION

Branchez l'adaptateur CA/CC dans une prise domestique CA 230V, puis branchez la fiche CC à l'arrière de l'appareil. Votre réveil est prêt à fonctionner.

REGLAGE HEURE ET DURÉE DU RAPPEL D'ALARME

1. Appuyez une fois sur la touche **SET**, les chiffres de l'heure '0' se mettent à clignoter. Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour régler l'heure (maintenir la touche enfoncée pour avancer rapidement).
2. Ré appuyez sur **SET**, les chiffres des minutes '00' se mettent à clignoter. Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour régler les minutes. (Maintenir la touche enfoncée pour avancer rapidement).
3. Ré appuyez sur **SET**, l'écran indique "24 H" et clignote. Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner le format sur "12 H" ou "24 H". Le voyant lumineux **PM** apparaît en haut à droite pour indiquer l'heure de l'après-midi et **AM** en haut à gauche pour le matin.
4. Ré appuyez sur **SET**, l'écran indique "05" et clignote. Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner la durée du rappel d'alarme, entre 5 et 60 minutes.
5. Ré appuyez sur **SET** ou patientez environ 10 secondes sans appuyez sur une touche pour quitter le mode de réglage.

RÉGLAGE DE L'ALARME

1. Maintenez enfoncée la touche **AL SET / SELECT**, le symbol **AL** apparaît et les chiffres de l'heure se mettent à clignoter. Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour régler l'heure de l'alarme. (Maintenir la touche enfoncée pour avancer rapidement).
2. Ré appuyez sur la touche **AL SET / SELECT**, les chiffres des minutes commencent à clignoter. Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour régler les minutes de l'alarme (maintenir la touche enfoncée pour avancer rapidement).
3. Ré appuyez sur la touche **AL SET / SELECT**, 'HI' s'affiche (haut niveau de vibration), appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner 'LO' (niveau faible de vibrations).
4. Ré appuyez sur la touché **AL SET /SELECT**, 'F-1(par ex. 800 Hz)' s'affiche et commence à clignoter, appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner la tonalité de l'alarme (fréquence) : **F-1 (haute tonalité, 800 Hz), F-2 (tonalité moyenne, 1 KHz), F-3 (basse tonalité, 1.5 KHz)**
5. Ré appuyez sur la touche **AL SET / SELECT**, 'L1' s'affiche (niveau faible de sonnerie), appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner 'L3' (niveau fort de sonnerie).
6. Ré appuyez sur la touche **AL SET / SELECT** ou patientez environ 10 secondes sans presser de touche pour quitter le mode de réglage de l'alarme.

ACTIVATION / ARRÊT ET SÉLECTION DU MODE D'ALARME

1. En mode d'affichage normal de l'heure, appuyez sur la touche **AL** pour activer le type d'alarme en activant l'indicateur d'alarme correspondant place en bas de l'écran:

	: seul le vibreur est actif.
	: la sonnerie d'alarme et le vibreur sont actives.

	: le flash stroboscopique et le vibreur sont actives.
	: le flash stroboscopique, la sonnerie d'alarme et le vibreur sont actives.

2. Ré appuyez sur la touche **AL SET / SELECT** pour désactiver toutes les alarmes, tous les indicateurs d'alarme , et sont éteints.

Remarque: Pour utiliser le vibreur en alarme, veuillez brancher sa fiche au dos du réveil. Si vous ne souhaitez pas utiliser le vibreur, déconnectez sa fiche du réveil.

REGLAGE DE L'ALARME ET ARRÊT JUSQU'AU JOUR SUIVANT

Lorsque l'alarme retenti, l'indicateur d'alarme correspondant clignote. Appuyez une fois sur la touché **AL SET / SELECT** et l'alarme se déclenchera le jour suivant. Une fois l'opération terminée, l'indicateur d'alarme correspondant reste affiché à l'écran.

REGLAGE DE LA FONCTION DE RAPPEL D'ALARME (la durée par défaut est de 5 minutes)

Lorsque l'alarme retenti, appuyez une fois sur **Zz •** l'alarme s'arrêtera temporairement et l'indicateur d'alarme correspondant continuera à clignoter. L'alarme se redéclenchera une fois que la durée de rappel d'alarme aura été dépassée.

REGLAGE LUMINEUX DE L'AFFICHEUR DE L'HEURE

Il existe une fonction de réglage à 3 niveaux de la luminosité de l'écran LED du réveil. Appuyez sur **Zz •** pour régler la luminosité (**ÉLEVÉE / MOYENNE / BASSE**) de l'écran LED. Cette opération peut être effectuée uniquement lorsque l'alarme ne s'est pas déclenchée. Au début, la luminosité est réglée sur un niveau élevé.

REGLAGE DE L'ANNEAU LUMINEUX EN MODE LAMPE

Appuyez et maintenir la touche **Zz •** pour allumer l'anneau lumineux, la puissance lumineuse est sur 3 niveaux (Fort, moyen et faible) ainsi que l'heure d'affichage en même temps.

Lorsque l'anneau s'allume, appuyez sur la touche **Zz •** une fois à la fois pour ajuster la puissance lumineuses de l'anneau et de l'affichage de l'heure.

Appuyez et maintenir la touche **Zz •** pour éteindre l'anneau lumineux.

Régler de nouveau votre réglage lumineux de l'affichage de l'heure comme il se modifie en même temps que celui de l'anneau).

CHARGER VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE SUR LE PORT USB

Branchez le câble de charge de votre téléphone portable dans le port USB placé au dos du réveil, puis connectez la seconde extrémité dans la prise micro USB de votre téléphone portable. Le réveil chargera automatiquement votre téléphone.

Remarque:

1. Assurez-vous que le câble fourni avec votre téléphone portable est utilisé pour le chargement.
2. Vérifiez que l'adaptateur fourni avec ce réveil (5V 1,2A) correspond pour alimenter en électricité votre appareil.
3. Il n'est pas possible de charger un iPad® ou un ordinateur bloc-notes depuis la prise USB de ce réveil.
4. La charge par le connecteur USB est désactivée pendant l'alarme.

MODE DE TEST

Appuyez et maintenir le bouton **▲ / TEST**, le flash stroboscopique, le vibreur et la sonnerie sont actives.

DÉPANNAGE

Si l'heure est incorrecte ou le réveil ne fonctionne pas correctement, cela peut être dû à des décharges électrostatiques ou des interférences sur le secteur. Pour éviter les fluctuations de tension pouvant provenir d'autres équipements, l'adaptateur secteur du réveil doit être branché uniquement dans une prise secteur murale et non sur une rallonge partagée avec un radiateur électrique (ou d'autres appareils très puissants).

SPÉCIFICATIONS

Durée de l'alarme	: 1 heure	
Durée du rappel d'alarme	: Réglable en 5 et 60 minutes	
Réglages par défaut	Format de l'heure	24 heures
	Heure	0:00
	Alarme	6:00
	Niveau de l'alarme et du vibreur	Élevé
Alarme audible	Fréquence d'émission du son de l'alarme	F-1
	Durée du rappel d'alarme	05 (5 minutes)
Alarme audible	: jusqu'à 95 dB à 1m	

GARANTIE

Votre produit Geemarc est garanti pendant 2 ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web: www.geemarc.com. La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

IMPORTANT: VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ETRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.

Veillez noter: la garantie est applicable en France uniquement.

DÉCLARATION:

Geemarc Telecom SA déclare par la présente que son produit est conforme aux directives Européennes.

La déclaration de conformité peut être consultée sur www.geemarc.com

Branchement électrique: Pour déconnecter l'appareil, coupez l'alimentation au niveau de la prise secteur ou débranchez l'adaptateur secteur.

Lors de l'installation de l'appareil, veillez à ce que la prise secteur soit facilement accessible.

DIRECTIVE DE RECYCLAGE

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible. Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques. Veuillez utiliser une des options suivantes:

- Retirez les piles et jetez-le dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.
- Ou rapportez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien devrait être accepté.

Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique et à la protection de l'environnement.



