

Gebruiksaanwijzing

Douche-toiletstoel

Hydra



Gebruiksaanwijzing

Douche-toiletstoel Hydra

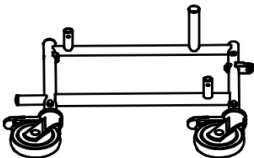
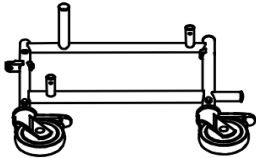
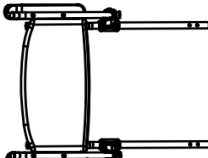
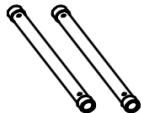
Nederlands

Inhoudsopgave

2	Inhoudsopgave
3	Leveringsomvang
4	Algemene informatie
4	<i>Lees en bewaar</i>
4	<i>Verklaring van symbolen</i>
5	Veiligheid
5	<i>Beoogd gebruik</i>
5	<i>Veiligheidsinstructies</i>
6	De douche-toiletstoel monteren
8	Reiniging en onderhoud
9	Technische gegevens
9	Garantie
10	Verwijdering

Douche-t

Leveringsomvang

①	Linkerframe	1 x	②	Rechterframe	1 x	③	Rugsteun	1 x			
											
④	Linkervoetsteun	1 x	⑤	Rechtervoetsteun	1 x	⑥	Zitting	1 x	⑦	Deksel	1 x
											
⑧	Emmer met deksel	1 x	⑨	Bevestigingsclips	4 x	⑩	Draaischroeven	2 x	⑪	Buizen	2 x
											

De douche-toiletstoel wordt geleverd in een kartonnen doos. Bewaar de kartonnen doos indien mogelijk, omdat deze later kan worden gebruikt voor opslag. Controleer na ontvangst direct of het product compleet en intact is.

toiletstoel

Algemene informatie

Lees en bewaar



Deze gebruiksaanwijzing hoort bij de douche-toiletstoel Hydra van Parvum. Het bevat belangrijke informatie over montage en gebruik. Lees de instructies zorgvuldig door, vooral de veiligheidsinstructies, voordat u de toiletstoel gebruikt. Het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing kan ernstig letsel of schade aan de toiletstoel tot gevolg hebben. De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de normen en voorschriften die gelden in de Europese Unie. Neem in het buitenland ook de landspecifieke richtlijnen en wetten in acht. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik. Geef je de toiletstoel door aan derden, vergeet dan niet deze gebruiksaanwijzing mee te geven.

Verklaring van symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden gebruikt in deze gebruiksaanwijzing, op de douche-toiletstoel of op de verpakking. Neem deze goed door.



Waarschuwing!

Dit signaalsymbool/woord duidt op een gevaar met een middelhoog risico dat de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben als het gevaar niet wordt vermeden.



Voorzichtig!

Dit signaalsymbool/woord duidt op een gevaar met een laag risiconiveau dat, als het niet vermeden wordt, kan leiden tot een lichte of matige verwonding.

Opmerking!

Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke schade aan eigendommen.

Hyd

Veiligheid

Beoogd gebruik

De douche-toiletstoel is uitsluitend ontworpen als zitmogelijkheid of hoogstens als sta-op-hulp. De douche-toiletstoel is ontworpen voor een maximale belasting van 120 kg. Hij is bedoeld voor privégebruik en niet geschikt voor commercieel gebruik. De douche-toiletstoel is geen kinderspeelgoed, geen medisch product en niet geschikt voor therapeutische doeleinden. Gebruik de douche-toiletstoel alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik wordt beschouwd als onjuist en kan leiden tot schade aan eigendommen of zelfs persoonlijk letsel. De fabrikant of dealer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist of oneigenlijk gebruik.



Waarschuwing!

Verstikkingsgevaar!

Als kinderen met de verpakkingsfolie of kleine onderdelen spelen, kunnen ze erin verstrikt raken, de folie over hun hoofd doen of de kleine onderdelen inslikken en erin stikken. Houd de verpakkingsfolie en kleine onderdelen uit de buurt van kinderen.



Voorzichtig!

Risico op letsel!

Verkeerd gebruik van de douche-toiletstoel kan leiden tot letsel.

- Ga nooit op de douche-toiletstoel staan.
- Gebruik de douche-toiletstoel alleen als douche- of toiletstoel, toiletverhoger, of sta-op-hulp.
- Zorg ervoor dat de douche-toiletstoel altijd op alle vier de poten staat.
- Houd er rekening mee dat er een risico op uitglijden bestaat bij het gebruik in mogelijk natte omgevingen zoals de badkamer of het toilet.

Opmerking!

Risico op beschadiging!

Verkeerd gebruik van de douche-toiletstoel kan schade aan de douche-toiletstoel veroorzaken.

- Gebruik de douche-toiletstoel niet als schroefverbindingen zijn losgekomen of als de metalen of kunststof onderdelen vervormingen, scheuren of andere beschadigingen vertonen.
- Verander niets aan de constructie van de douche-toiletstoel.
- Bevestig geen extra elementen aan de douche-toiletstoel.

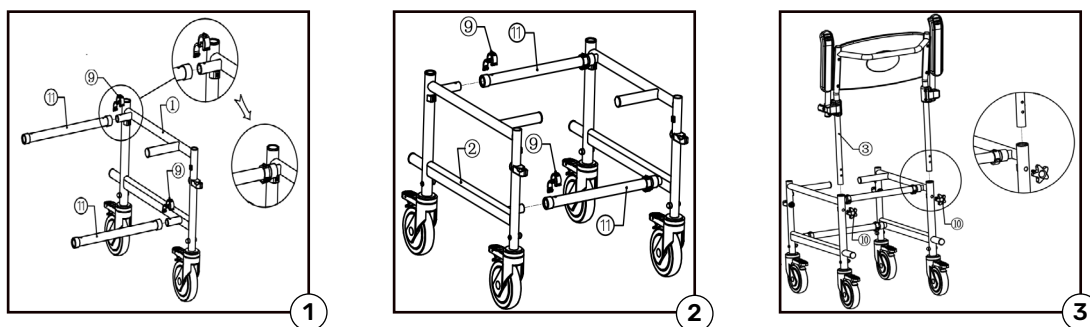
Opmerking!

Risico op beschadiging!


Als je de verpakking achteloos opent met een scherp mes of andere puntige voorwerpen, kun je de douche-toiletstoel beschadigen. Wees dus voorzichtig bij het openen van de verpakking.

1. Haal de douche-toiletstoel uit de verpakking en verwijder het verpakkingsmateriaal.
2. Controleer of de levering compleet is (zie leveringsomvang).
3. Controleer of er schade is aan de douche-toiletstoel. Als dit het geval is, gebruik het product dan niet. Neem zo snel mogelijk contact op met de dealer.

De douche-toiletstoel monteren



Douche-t

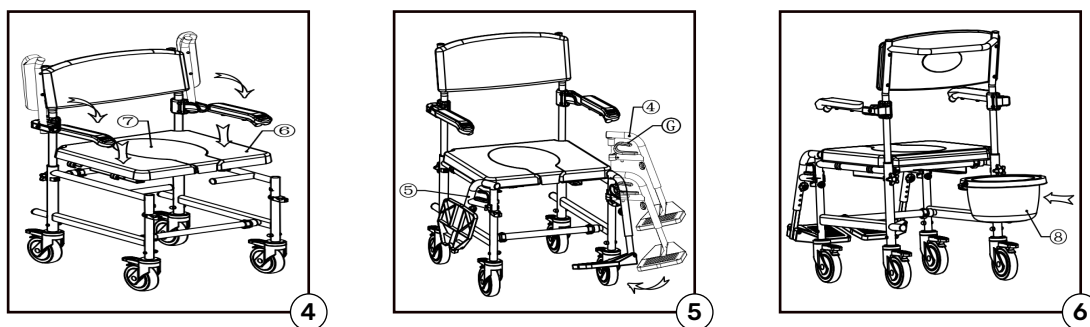

Stappen bij figuur 1

- 1.1 Voor deze stap heb je onderdeel 1 (1 x), 11 (2 x) & 9 (2 x) nodig.
- 1.2 Voeg onderdeel 11 samen met onderdeel 1, zoals geïllustreerd.
Tijdens het samenvoegen is het belangrijk om de gaten uit te lijnen.
- 1.3 Steek onderdeel 9 in de uitgelijnde gaten en klik dit vast.

Stappen bij figuur 2

- 2.1 Voor deze stap heb je onderdeel 2 (1 x) & 9 (2 x) nodig.
- 2.2 Voeg onderdeel 2 samen met onderdeel 11, zoals geïllustreerd.
Tijdens het samenvoegen is het belangrijk om de gaten uit te lijnen.
- 2.3 Steek onderdeel 9 in de uitgelijnde gaten en klik dit vast.

Stappen bij figuur 3

- 3.1 Voor deze stap heb je onderdeel 3 (1 x) & 10 (2 x) nodig.
- 3.2 Voeg onderdeel 3 samen met het eindresultaat van stap 2.
Tijdens het samenvoegen is het belangrijk om de gaten uit te lijnen.
- 3.3 Steek onderdeel 10 in de uitgelijnde gaten en draai dit vast.

Stappen bij figuur 4

- 4.1 Voor deze stap heb je onderdeel 6 (1 x) & 7 (1 x) nodig.
- 4.2 Lijn de open kant van onderdeel 6 uit met de voorkant van de stoel.
- 4.3 Druk onderdeel 6 vast in het eindresultaat van stap 3.
- 4.4 Plaats onderdeel 7 in het midden van onderdeel 6.
- 4.5 Duw de armsteunen naar onder, zoals geïllustreerd.

Stappen bij figuur 5

- 5.1 Voor deze stap heb je onderdeel 4 (1 x) en 5 (1 x) nodig.
- 5.2 Plaats onderdelen 4 en 5 zoals geïllustreerd.

Stappen bij figuur 6

- 6.1 Voor deze stap heb je onderdeel 8 (1 x) nodig.
- 6.2 Schuif onderdeel 8 onder de zitting, zoals geïllustreerd.

Reiniging en onderhoud

Opmerking!

Risico op beschadiging!

Onjuiste reiniging van de douche-toiletstoel kan schade aan het oppervlak veroorzaken.

- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, borstels met metalen of nylon haren of scherpe of metalen schoonmaakvoorwerpen zoals messen, harde spatels en dergelijke. Droog de douche-toiletstoel na gebruik en reiniging met een zachte droge doek.
- Droog de douche-toiletstoel na gebruik en reiniging af met een zachte droge doek.
- Controleer regelmatig of alle schroeven en verbindingen goed vastzitten en draai ze indien nodig vaster aan.

Technische gegevens

Model	Hydra
Artikelnummer	200800500
Gewicht	Circa 11,0 kg
Gebruikersgewicht	Tot 120 kg
Hoogteverstelling	Nee
Breedte zitting	46 cm
Materialen	Aluminium, Kunststof
Afmetingen (L x B x H)	85 x 55 x 95 cm

Garantie

Op de douche-toiletstoel Hydra wordt 12 maanden garantie verleend vanaf de aankoopdatum.

Slijtageonderdelen worden over het algemeen tijdens de garantietermijn niet gedekt, tenzij aangetoond kan worden dat de schade op de slijtageonderdelen een gevolg is van fabricage- of materiaalfout.

Uitsluiting van garantie

- Rubberen dopjes
- Wielen

Reiniging en onderhoud



Gooi de verpakking weg volgens het type. Doe karton en karton bij het oud papier en plasticfolie bij het daarvoor bestemde recyclebare afval.

De douche-toiletstoel weggooien

Gooi de douche-toiletstoel weg volgens de voorschriften en wetten die in uw land van kracht zijn.