

Zookie

Portable Electric Breast Pump



Instruction manual







Content

Product structure	04
Cleaning and disinfection	05
Operation cautions	05
Assemble	06
Start pumping	08
Charge	10
Instructions For Pouring Breast Milk	12
Storing Your Breast Milk	14



Inhoud

Productstructuur	16
Reiniging en desinfectie	17
Gebruikswaarschuwingen	17
Montage	18
Starten met kolven	20
Opladen	22
Instructies voor het gieten van moedermelk	24
Bewaren van moedermelk	26




Inhalt

Produktstruktur	28
Reinigung und Desinfektion	29
Hinweise zur Bedienung	29
Montage	30
Abpumpen starten	32
Aufladen	34
Anleitung zum Ausgießen der Muttermilch	36
Aufbewahrung der Muttermilch	38




Product structure

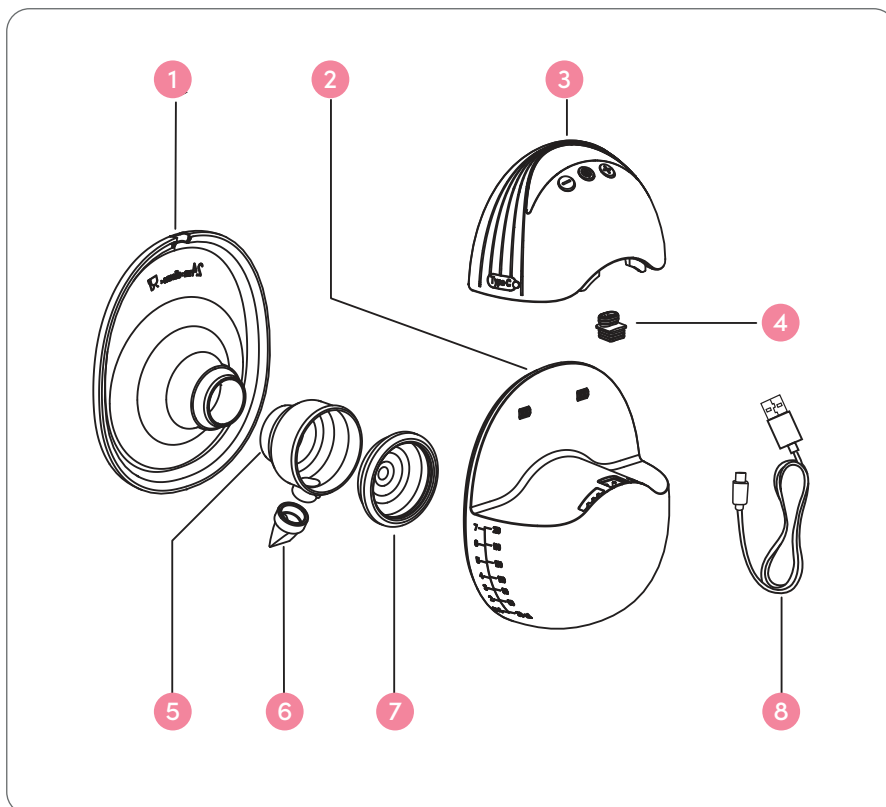

Parts list

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1 Siliconen shield | 5 T-junction |
| 2 Milk Collector | 6 Duckbill Valve |
| 3 Host | 7 Airbag |
| 4 Siliconen Plug | 8 Type-c Charging cable |

Control Panel

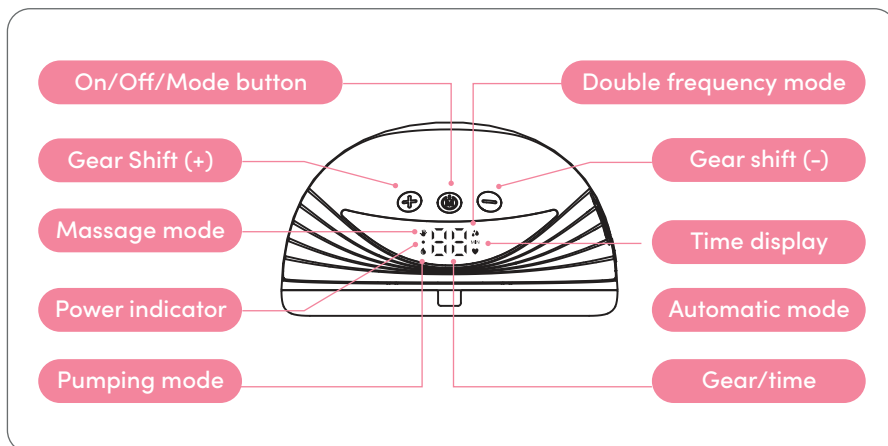

Note: This product has a built-in lithium battery. If the battery indicator flashes, we recommend that you use a certified 5V=1A power supply to charge the main unit as quickly as possible.

Cleaning And Disinfection


1. Disassemble, wash and disinfect the parts that come into contact with breast milk (milk collector, silicone shield) before each use.
2. The duckbill valve should not be disassembled and washed separately to avoid loss and affecting normal use of the breast pump.
3. Disassemble and clean the parts that come into contact with breast and milk immediately after using to avoid breast milk residue and bacterial proliferation.
4. It is recommended to use drinking water for cleaning.

Operation Cautions


1. Never wash or disinfect the console, as the breast milk will not enter this component. You can wipe this part clean with a soft cloth.
2. Clean the silicone shield carefully, if it is damaged, your breast pump will not work properly.
3. Clean the milk collector. Do not rub it, do not insert anything. Failure to do so may cause damage. It is recommended to use drinking water for cleaning.
4. The duckbill valve does not need to be disassembled and cleaned separately to avoid loss and affect the normal use of the breast pump.

Assemble


1. Assemble the duckbill valve and airbag in place as shown in the figure, ensure that the duckbill valve is installed in the correct direction, and load the T-junction into the milk collector as shown in the figure. (Make sure the orientation is correct).

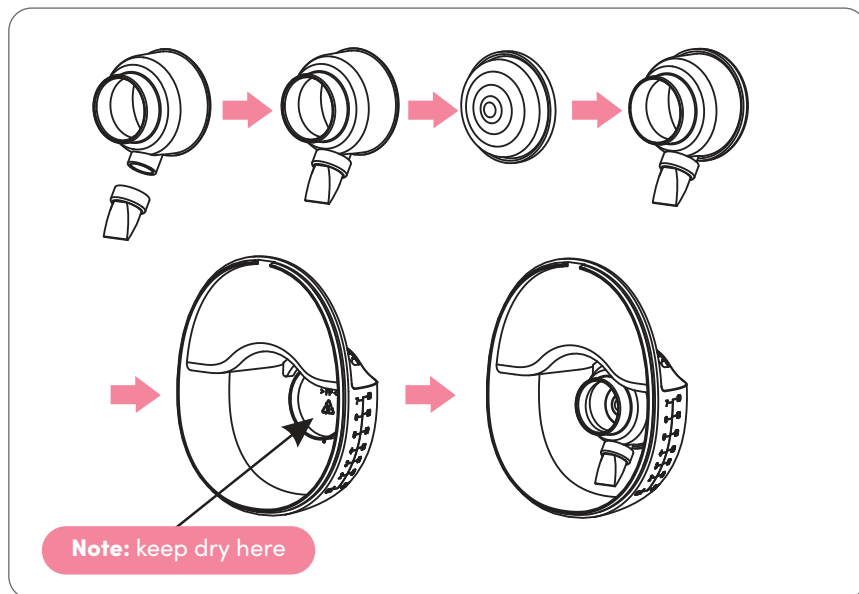


2. To install a silicone shroud on a milk collector, make sure the diversion groove on the silicone shield is aligned with the return groove on the milk collector and press the edges with both hands to ensure the seal is in place.

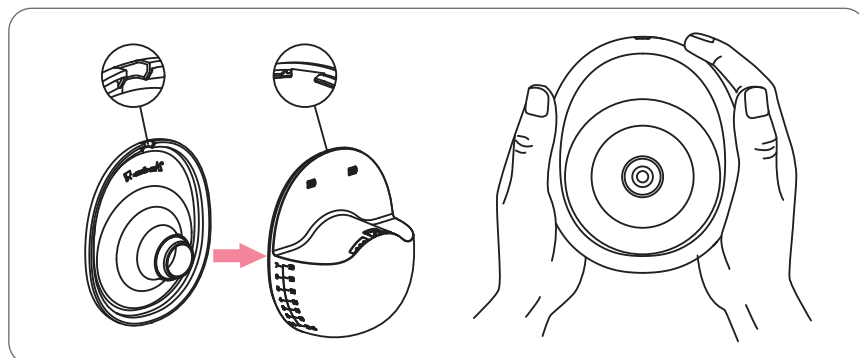

3. Insert the silicon plug into the milk collector and press by hand to make the surface flush and ensure a perfect seal.

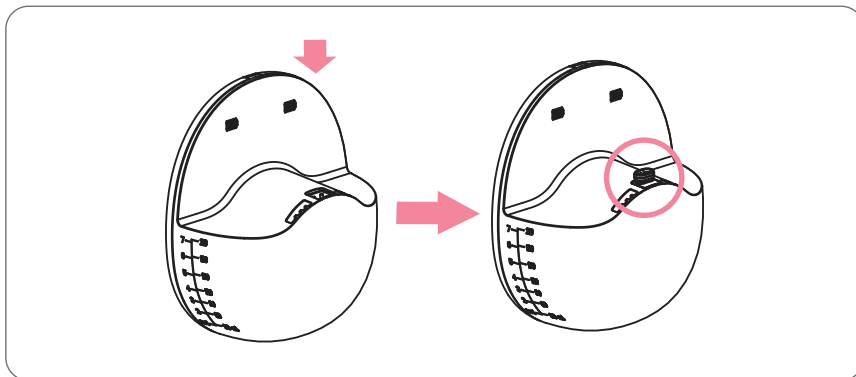


4. Mount the host on the milk collector, align the groove under the host with the milk collector, and fit the milk collector downwards to ensure a complete seal.

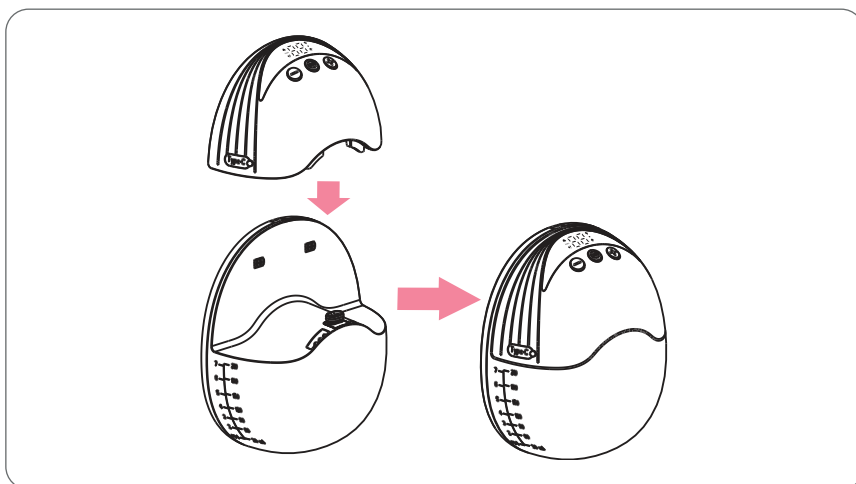


Notice: Power adapters are a common standard accessory on the market. This product is not provided; if necessary, it can be purchased separately. Power adapter specification: 5V==1A.

Start Pumping


1. Press the silicone shield firmly against the breast and make sure your nipple is centered. Stay upright and be careful not to twist the position of the product and chest, otherwise the breast pump will have no suction.

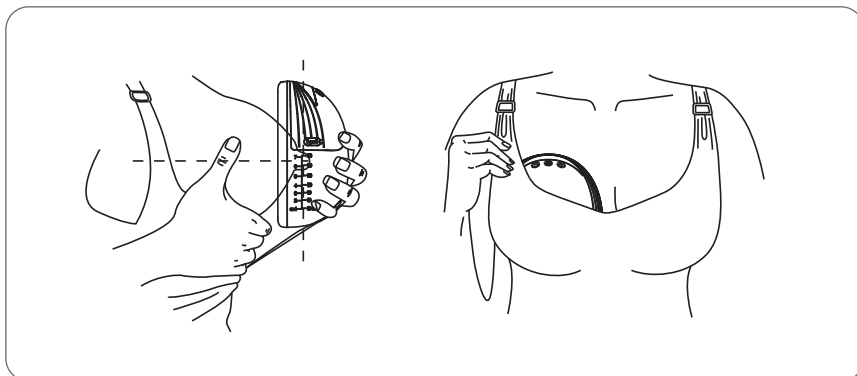


2. Long press  2S to turn on; in the power-on state, long press 2S to shut down. The breast pump will shut down automatically after 20 minutes of operation and the screen will stay off after 30s of operation. Any button can wake it up.
3. You can short press the  button to select the massage mode . This mode is faster than the breast pumping mode and has smaller suction power. During postpartum breastfeeding, the breasts are prone to swelling, pain, lumps and other breast discomfort. Using this mode can alleviate breast problems.

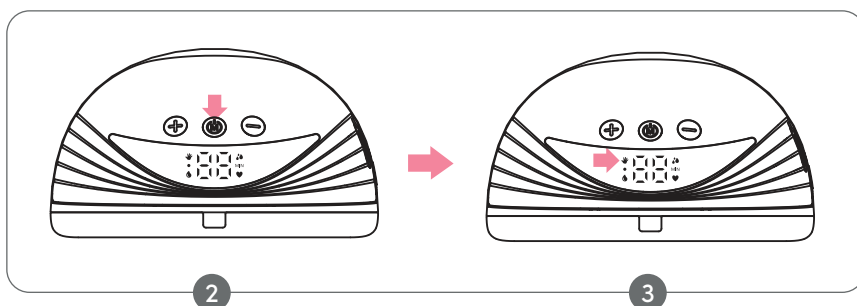


4. Short press the (M) button to select the pumping mode 🍼. This mode is slower than the massage mode, has stronger suction, and truly simulates the baby's sucking, more realistically stimulating the mother's smooth milk production.
5. You can short press the (M) key to select the double frequency mode 🍼. This mode is nine long and one short. In the early postpartum period, the milk ducts are not easy to open. You can stimulate the breasts and promote breast milk secretion by changing the mode.

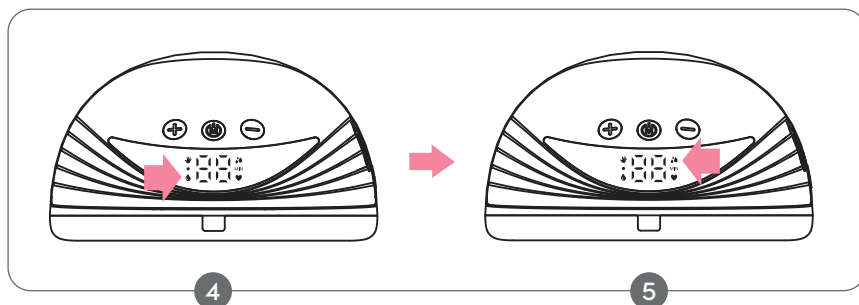


6. Short press the (M) key to select automatic mode ❤️. This mode is between the massage mode and the breast pumping mode. The suction is stable. The automatic mode will increase one gear every 15 seconds and finally stay at the 9th gear. During the upshift process, press the plus and minus keys to exit the upshift.
7. Gear/timing display: the default boot is 1 gear, and the display is "1"; A total of 12 gears. After the selected gear works for 5S without operation, it is transferred to the positive timing mode. The "MIN" timing mode light is on, and the timing is measured in "minutes".

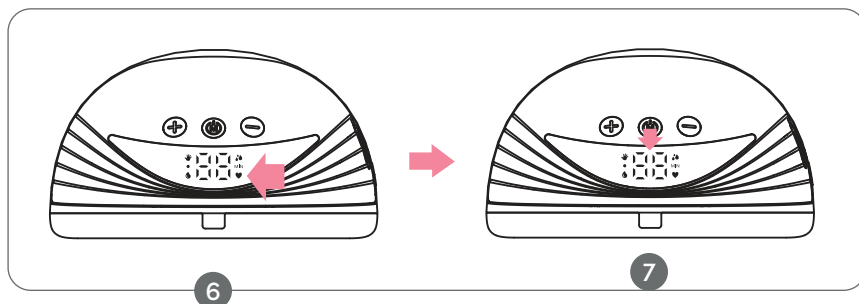

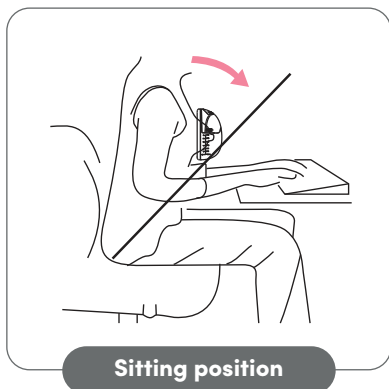

Relax and sit in a comfortable chair with a slight lean forward (support your back with cushions). This allows the top of the silicone shield breast pump to tilt slightly upwards, which facilitates the flow of breast milk into the collector and reduces residual milk in the silicone shield.

8. After sucking, press the power button to turn off the breast pump, lean forward slightly, and carefully remove the breast pump from the breast. If there is a small amount of breast milk left over the silicone shield, gently pour the remaining breast milk from the silicone shield by tilting the breast pump.

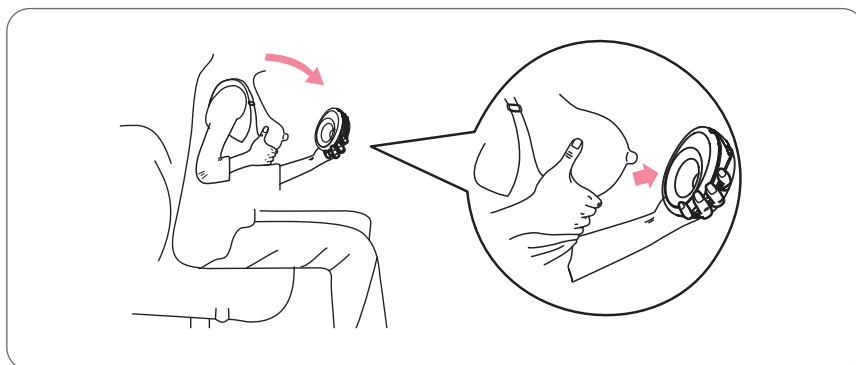


Charge

Battery indicator

1. The blue light flashes (when the voltage is 3.2V), indicating that it is urgent to charge; when the power is too low, the machine automatically shuts down (when the battery voltage is 3V).
2. It turns blue when it's charging and green when it's fully charged.
3. When the battery is charged, the machine will turn on with green light.




Open the USB cover to connect the USB, and connect the adapter at the other end to charge the motor.

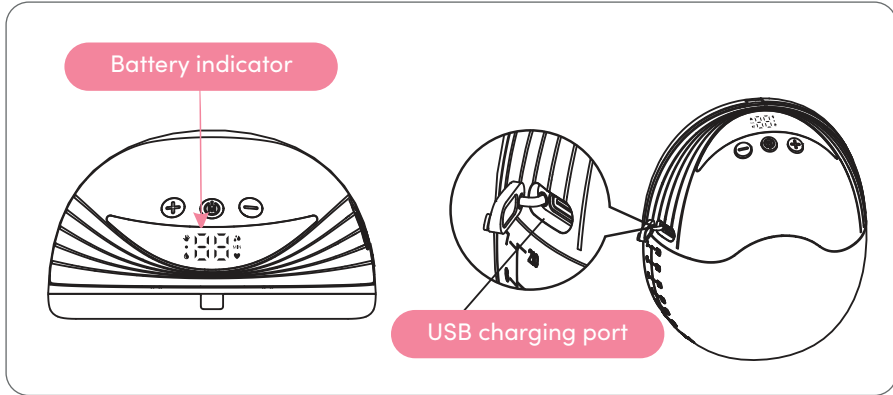**Notice:**

1. The device does not work when charging.
2. This product has a memory function; when you turn on again, the machine will automatically enter the working mode and suction level you used last time.
3. Automatic shutdown after working for 20 minutes after each start-up.
4. Continuous working hours vary depending on the battery or working conditions.
5. Charging time may vary depending on remaining power, temperature, or charging conditions.
6. USB power adapter is a common standard accessory in the market. This product is not available and can be purchased separately if required. Power adapter specification: 5V=1A.

Instructions For Pouring Breast Milk

After pumping, remove the breast pump from the breast to hold the breast pump upright, and pour the milk collector into the bottle, making sure the grooved part of the milk collector is aligned with the mouth of the bottle to prevent milk from spilling.

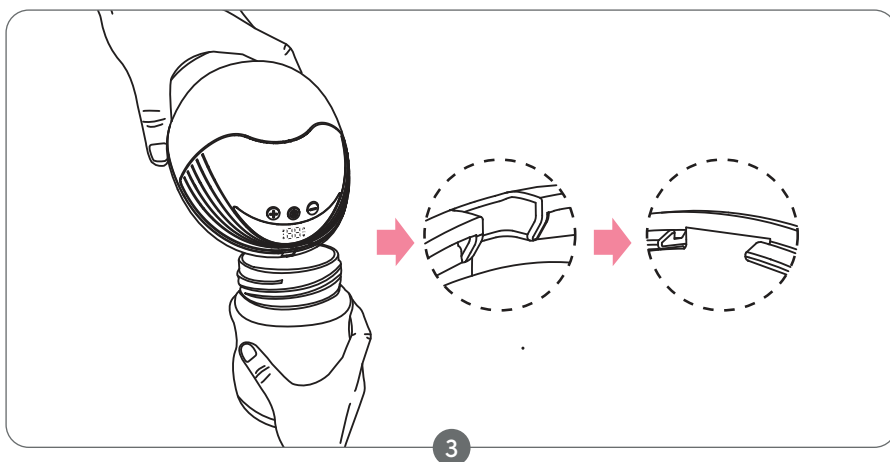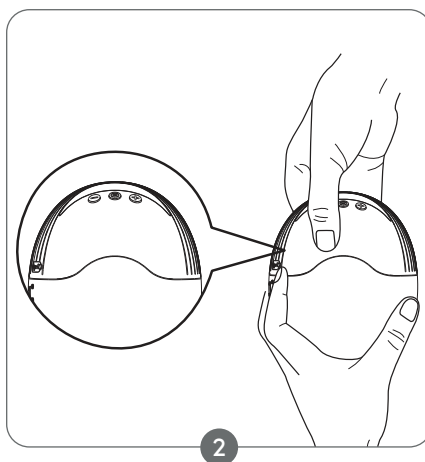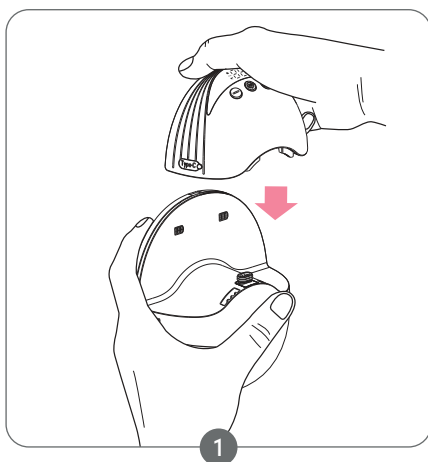

Product parameters

Specifications

Product name	Wearable Electric Breast Pump
Product model	MY-375
Charging voltage	DC 5V == 1A
Charging current	730 mA
Battery type	Polymer battery
Battery capacity	1200 mAh
Rated voltage	3.7V
Rated current	1A Max
Working hours	>1.5H
Noise limit	40 mmHg ~ 300 mmHg
Extraction intensity limit	≤55 dB
Working environment	10–30°C, RH 15%–93%, 700–1060 hPa
Storage & transportation environment	-25–50°C, RH 15%–93%, 700–1061 hPa

Storing Your Breast Milk

Caution

1. Do not freeze breast milk repeatedly.
2. Do not mix fresh breast milk with frozen breast milk.
1. Be sure to discard the remaining breast milk after feeding.

Note: Only store breast milk collected from a sterilized breast pump.

Storing your breast milk

Expressed milk can be placed in a clean and sterilized storage bag or a bottle with a seal. Immediately refrigerate or freeze.

Caution

Expressed milk can be refrigerated for up to 48 hours (inside the refrigerator) or in the freezer for up to three months, with the bottle or storage bag clearly labelled with the date and time of expression. The first expressed milk should be consumed first.

Thawing of breast milk


Keep frozen breast milk in the freezer of your refrigerator overnight to defrost it. In case of emergency you can thaw breast milk in a bowl of hot water. After thawing, breast milk should be consumed within 24 hours. To heat breast milk, heat a bottle upright in a bowl of hot water or use a bottle and food warmer to heat it safely and quickly. Safe and fast heating of breast milk with a bottle and food warmer.

Warning

1. Remember!! Always check the temperature of your breast milk before feeding your baby.
2. Do not microwave breast milk as this may destroy important nutrients and antibodies.
3. In addition, uneven heating may cause the liquid to overheat locally, which may cause burns.
4. Do not heat the milk storage bottle by immersing it in boiling water to prevent it from cracking.




Productstructuur

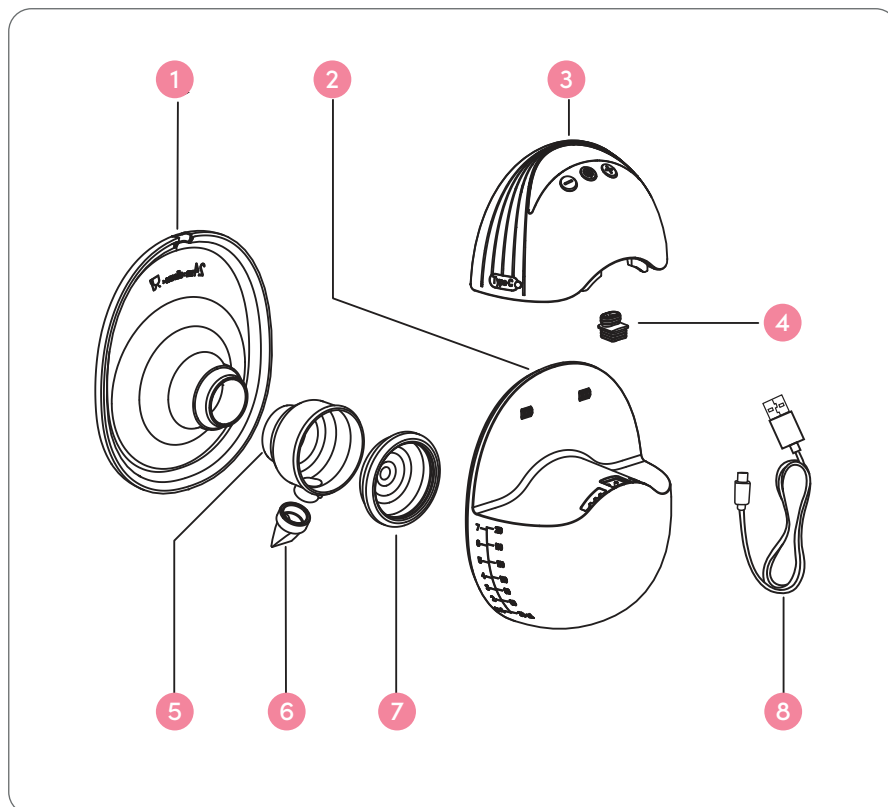

Onderdelenlijst

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| ① Siliconen borstschild | ⑤ T-verbinding |
| ② Melkcollector | ⑥ Eendenbekventiel |
| ③ Hoofdunit | ⑦ Airbag |
| ④ Siliconen plug | ⑧ Type-C oplaadkabel |

Bedieningspaneel

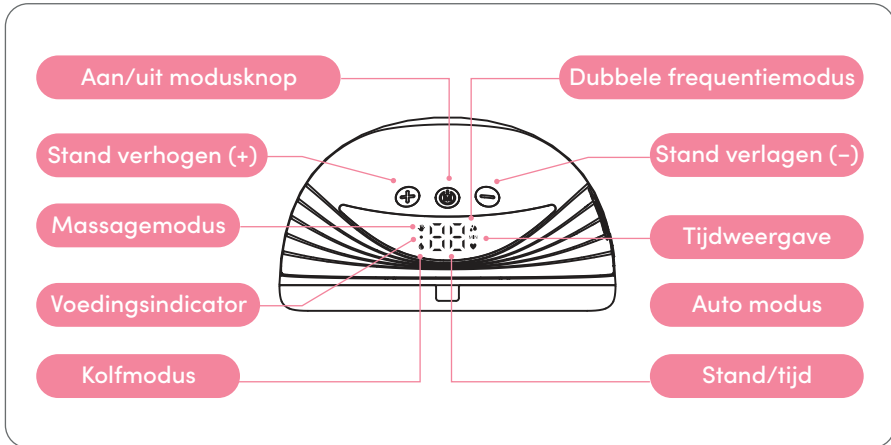

Let op: Dit product heeft een ingebouwde lithiumbatterij. Als de batterij-indicator knippert, raden wij aan de hoofdunit zo snel mogelijk op te laden met een gecertificeerde 5V 1A adapter.

Reiniging en desinfectie


1. Demonteer, was en desinfecteer vóór elk gebruik alle onderdelen die in contact komen met moedermelk, zoals de melkcollector en het siliconen borstschild.
2. Het eendenbekventiel mag niet afzonderlijk worden gedemonteerd of gereinigd om verlies en storingen te voorkomen.
3. Reinig alle onderdelen die in contact zijn geweest met borst en melk direct na gebruik om melkresten en bacteriegroei te voorkomen.
4. Gebruik bij voorkeur drinkwater voor het reinigen.

Gebruikswaarschuwingen


1. Was of desinfecteer de hoofdunit nooit. Moedermelk komt hier niet in terecht. Reinig dit onderdeel met een zachte doek.
2. Reinig het siliconen borstschild zorgvuldig. Bij beschadiging werkt de borstkolf niet correct.
3. Reinig de melkcollector voorzichtig. Niet schrobben en niets inbrengen. Dit kan schade veroorzaken.
4. Het eendenbekventiel hoeft niet afzonderlijk te worden gereinigd om verlies en storingen te voorkomen.

Montage


1. Monteer het eendenbekventiel en de airbag zoals afgebeeld. Zorg dat het ventiel correct is geplaatst. Plaats daarna de T-verbinding in de melkcollector met de juiste oriëntatie.

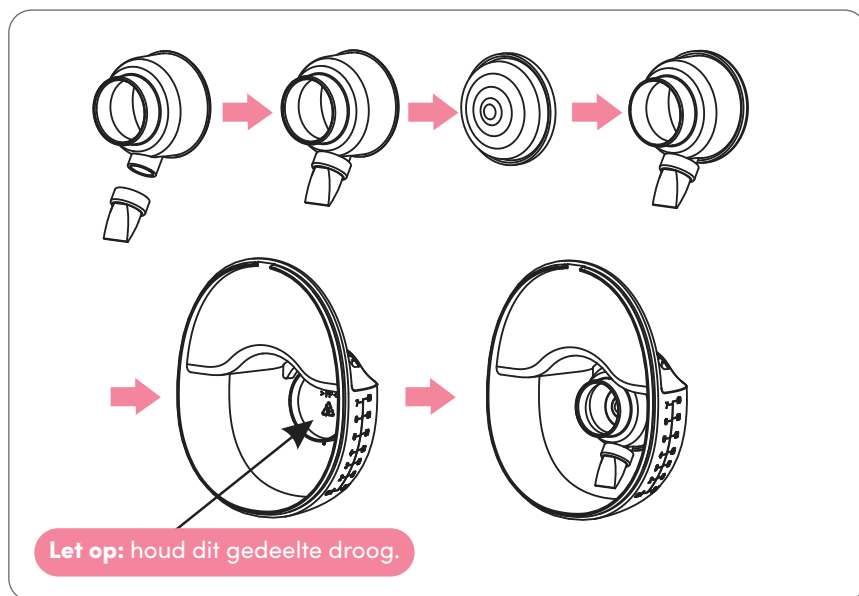


2. Plaats het siliconen borstschild op de melkcollector. Zorg dat de geleidingsgroef van het schild uitlijnt met de retourgroef van de collector en druk de randen stevig aan.

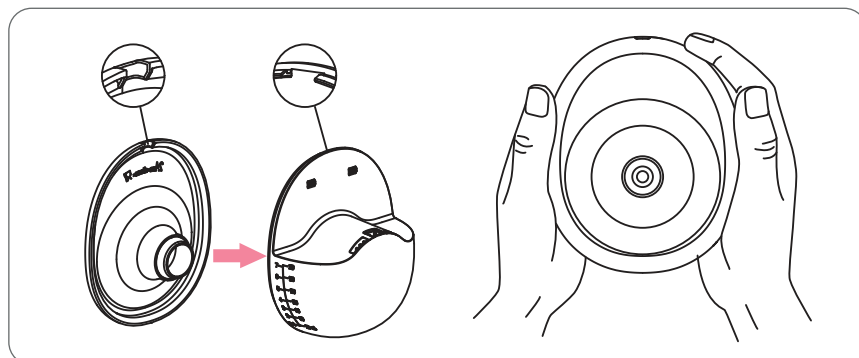

3. Plaats de siliconen plug in de melkcollector en druk deze gelijkmatig aan voor een perfecte afdichting.

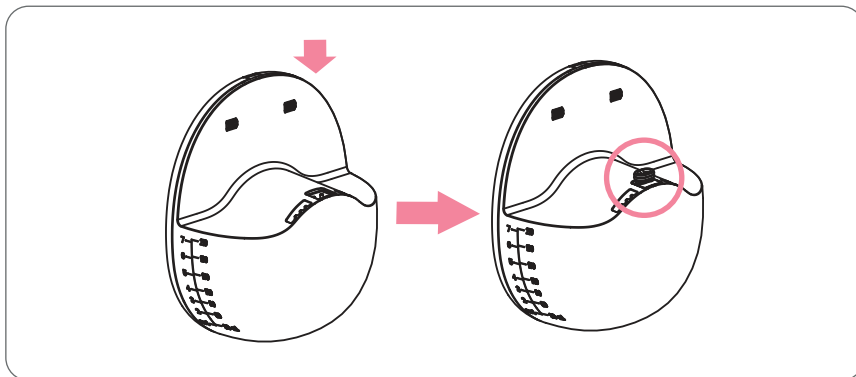


4. Bevestig de hoofdunit op de melkcollector door de groeven uit te lijnen en naar beneden te drukken tot alles goed afsluit.

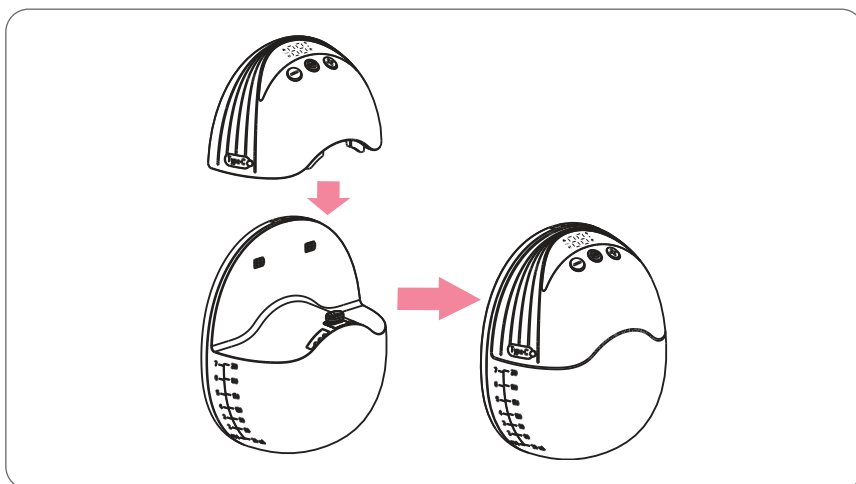


Let op: De voedingsadapter wordt niet meegeleverd. Indien nodig kan deze apart worden aangeschaft. Specificatie: 5V 1A.

Starten met kolven


1. Druk het siliconen borstschild stevig tegen de borst en zorg dat je tepel gecentreerd is. Blijf rechtop zitten en voorkom verdraaien, anders ontstaat er geen zuigkracht.

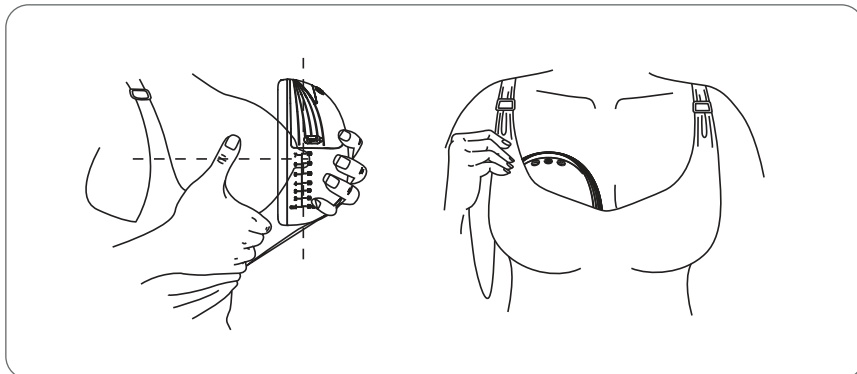


2. Houd de  2 seconden ingedrukt om in te schakelen. Houd opnieuw 2 seconden ingedrukt om uit te schakelen. Het apparaat schakelt automatisch uit na 20 minuten. Het scherm gaat na 30 seconden uit en kan met elke knop worden geactiveerd.
3. Druk kort op de  knop om de massagemodus  te selecteren. Deze modus is sneller en heeft een mildere zuigkracht. Ideaal bij gezwollen of gevoelige borsten na de bevalling.

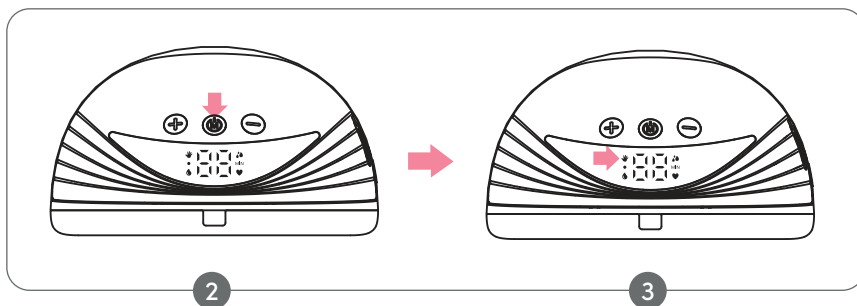


4. Druk kort op de (M) knop om de kolfmodus  te selecteren. Deze modus is langzamer en krachtiger en bootst het zuigen van de baby realistisch na.
5. Druk kort op de (M) knop om de dubbele frequentiemodus  te kiezen. Deze wisselt tussen lange en korte zuigcycli en helpt bij het openen van melkkanalen in de beginperiode.

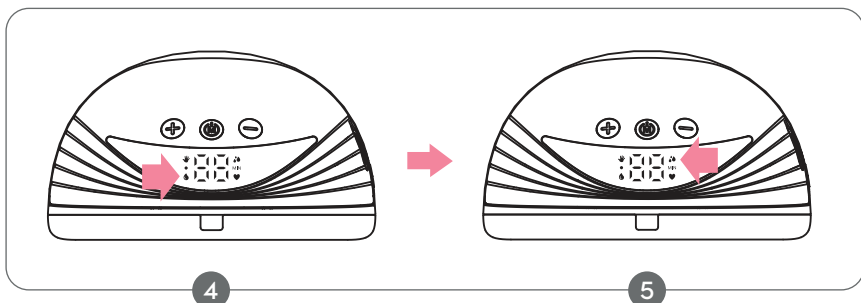


6. Druk kort op de (M) knop om de automatische modus  te selecteren. De zuigkracht verhoogt automatisch elke 15 seconden tot stand 9. Tijdens het verhogen kun je dit stoppen met + of -.
7. Stand en tijdweergave: De standaardstart is stand 1. Er zijn 12 standen. Na 5 seconden zonder bediening schakelt het display over naar tijdweergave in minuten.

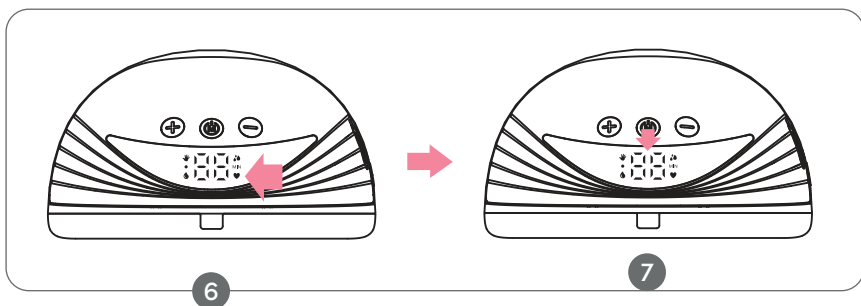

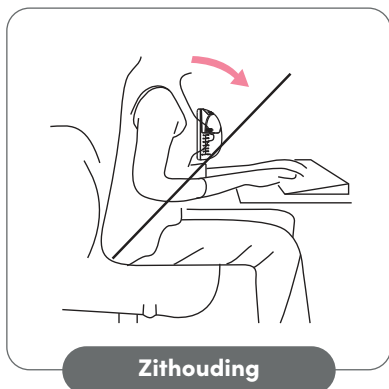

Ontspan en zit comfortabel met een lichte vooroverbuiging, ondersteund door kussens. Hierdoor kan de melk beter in de collector stromen en blijft er minder melk achter.

8. Na het kolven: Druk op de aan/uitknop om uit te schakelen. Leun licht voorover en verwijder de borstkolf voorzichtig. Kantel het apparaat om eventuele resterende melk uit het borstschild te gieten.

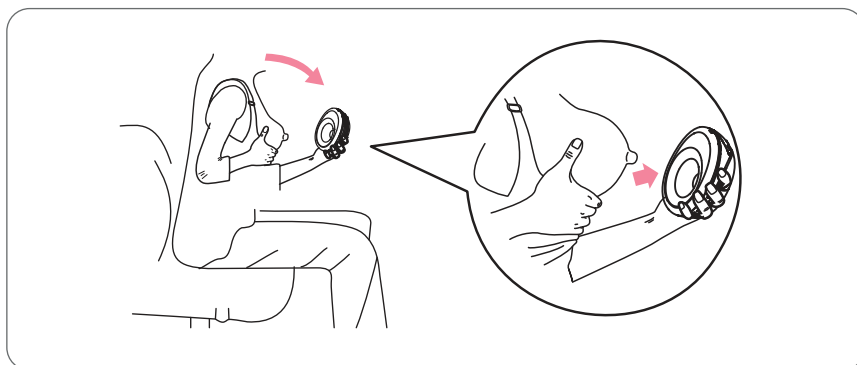


Opladen

Batterij-indicator

1. Het blauwe lampje knippert (bij een spanning van 3,2V): dit betekent dat je dringend moet opladen. Als de batterij te leeg is, schakelt het apparaat automatisch uit (bij een batterijspanning van 3,0V).
2. Tijdens het opladen brandt het lampje blauw en wanneer de batterij volledig is opgeladen brandt het groen.
3. Als de batterij is opgeladen, kan het apparaat worden ingeschakeld en brandt het lampje groen.

Open het USB-afdekkapje om de USB-kabel aan te sluiten. Sluit de adapter aan op het andere uiteinde om de motorunit op te laden.



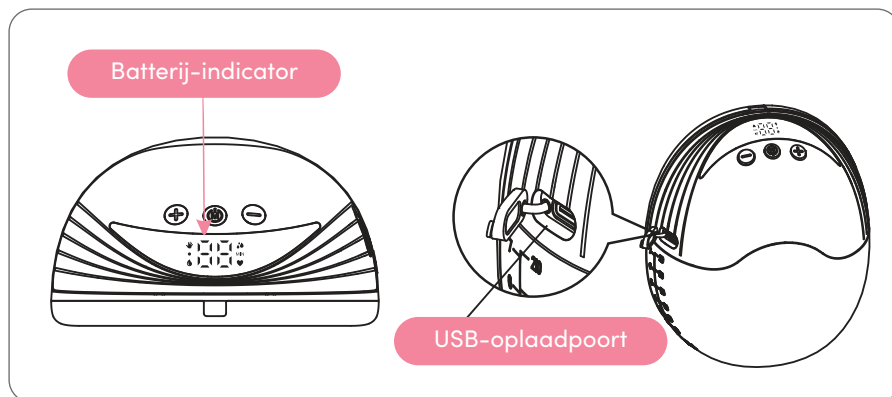


Let op:

1. Het apparaat werkt niet terwijl het wordt opgeladen.
2. Dit product heeft een geheugenfunctie. Als je het opnieuw inschakelt, start het automatisch in de werkmodus en zuigstand die je de vorige keer gebruikte.
3. Na elke start schakelt het apparaat automatisch uit na 20 minuten werken.
4. De maximale gebruiksduur kan verschillen afhankelijk van de batterijstatus en de omstandigheden tijdens gebruik.
5. De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van de resterende batterij, de temperatuur en de oplaadomstandigheden.
6. Een USB-voedingsadapter is een standaardaccessoire dat algemeen verkrijgbaar is. Deze wordt niet meegeleverd en kan indien nodig apart worden aangeschaft. Specificatie adapter: 5V 1A.

Instructies voor het gieten van moedermelk

Na het kolven haal je de borstkolf van de borst, houd je het apparaat rechtop en giet je de melkcollector leeg in een fles. Zorg dat het deel met de groef van de melkcollector goed is uitgelijnd met de opening van de fles, zodat de melk niet morst.

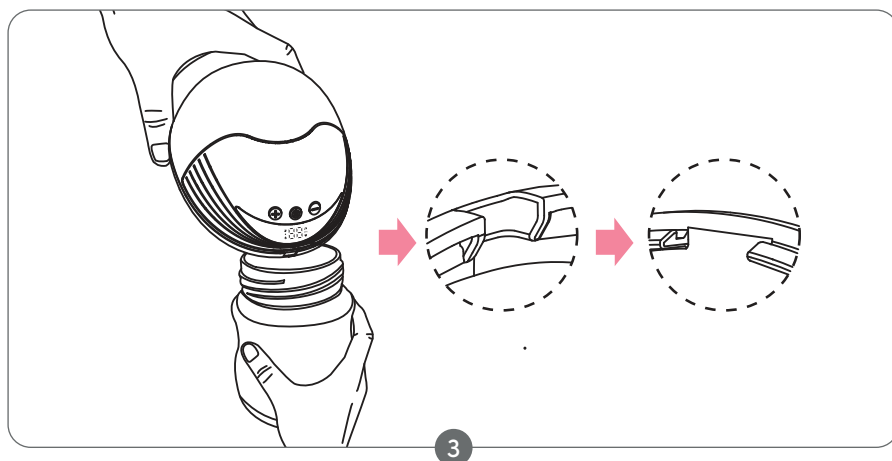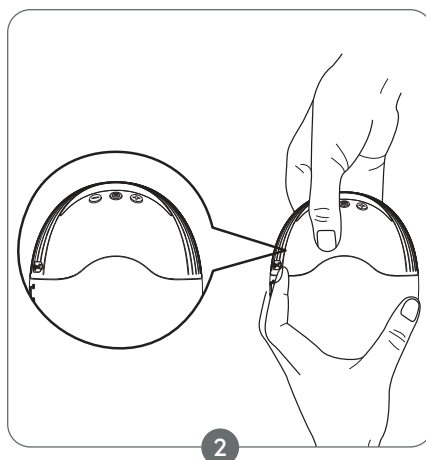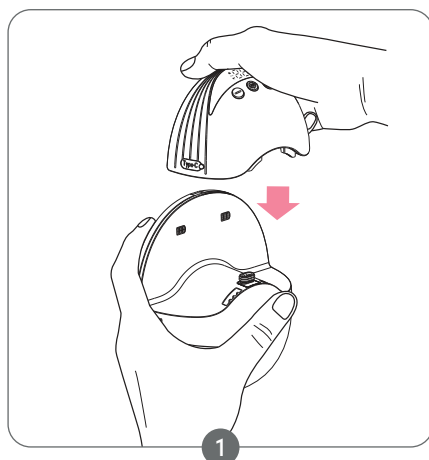

Specificaties

25

Specificaties	
Productnaam	Draagbare elektrische borstkolf
Model	MY-375
Oplaadspanning	DC 5V 1A
Oplaadstroom	730 mA
Batterijtype	Polymeerbatterij
Batterijcapaciteit	1200 mAh
Nominale spanning	3,7 V
Nominale stroom	Max. 1 A
Gebruiksduur	> 1,5 uur
Zuigdruk	40–300 mmHg
Geluidsniveau	≤ 55 dB
Werktemperatuur	10–30 °C
Opslagtemperatuur	–25–50 °C

Bewaren van moedermelk

Let op

1. Vries moedermelk niet herhaaldelijk in.
2. Meng geen verse afgekolfdde melk met ingevroren moedermelk.
3. Gooi moedermelk die na het voeden overblijft altijd weg.

Opmerking: Bewaar alleen moedermelk die is afgekolfd met een gesteriliseerde borstkolf.

Moedermelk bewaren

Afgekolfdde melk kan in een schone en gesteriliseerde bewaarzak of in een fles met goede afsluiting. Zet het direct in de koelkast of vries het meteen in.

Let op

Afgekolfdde melk kan maximaal 48 uur in de koelkast bewaard worden (in de koelkast zelf) of maximaal drie maanden in de vriezer. Label de fles of bewaarzak duidelijk met datum en tijd van afkolven. Gebruik de melk die het eerst is afgekolfd als eerste.

Ontdooien van moedermelk


Laat ingevroren moedermelk een nacht in het vriesvak van de koelkast ontdooien. Als het dringend is, kun je moedermelk ontdooien in een kom met warm water. Na het ontdooien moet moedermelk binnen 24 uur worden gebruikt.

Om moedermelk te verwarmen: verwarm de fles rechtop in een kom met warm water, of gebruik een flessenwarmer/voedselverwarmer om veilig en snel te verwarmen.

Waarschuwing

1. Onthoud: controleer altijd de temperatuur van de moedermelk voordat je je baby voedt.
2. Verwarm moedermelk niet in de magnetron, omdat dit belangrijke voedingsstoffen en antistoffen kan beschadigen.
3. Bovendien kan ongelijkmatige verwarming plaatselijke oververhitting veroorzaken, wat brandwonden kan geven.
4. Verwarm de melkfles niet door deze in kokend water onder te dompelen, om barsten te voorkomen.


Produktstruktur

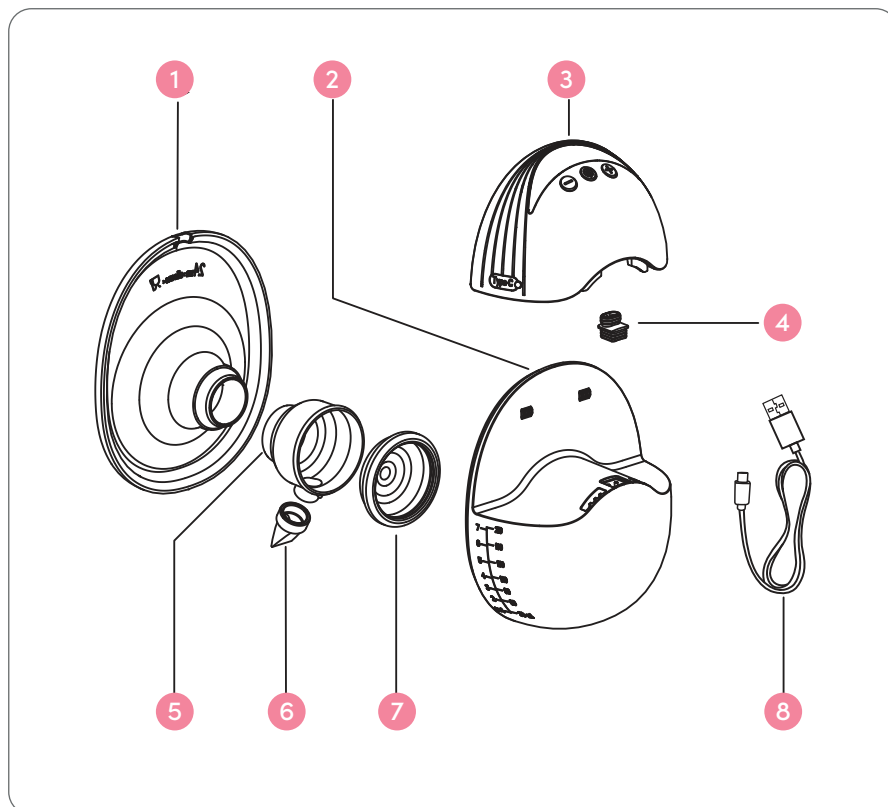

Onderdelenlijst

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| ① Silikonbrustschild | ⑤ T-Verbinding |
| ② Milchbehälter | ⑥ Entenschnabelventil |
| ③ Haupteinheit | ⑦ Airbag |
| ④ Silikonstopfen | ⑧ Typ-C-Ladekabel |

Bedienfeld

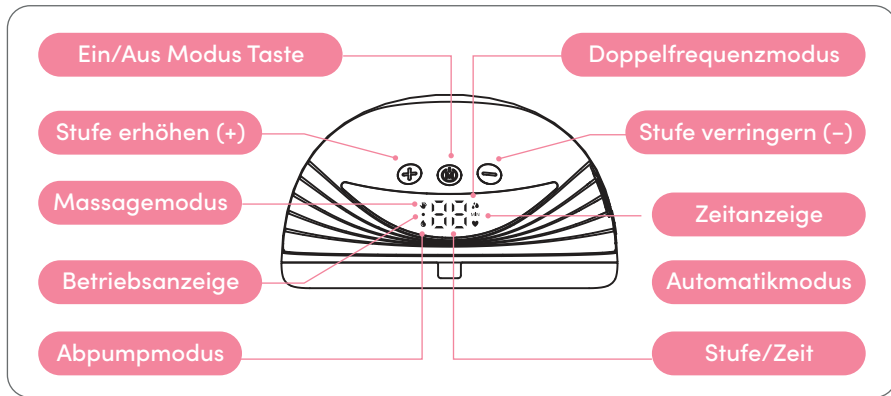

Hinweis: Dieses Produkt verfügt über einen eingebauten Lithiumakku. Wenn die Batterieanzeige blinkt, empfehlen wir, die Haupteinheit so schnell wie möglich mit einem zertifizierten 5V 1A Netzteil aufzuladen.

Reinigung und Desinfektion


1. Zerlege, wasche und desinfiziere vor jeder Anwendung alle Teile, die mit Muttermilch in Kontakt kommen, wie Milchbehälter und Silikonbrustschild.
2. Das Entenschnabelventil darf nicht separat zerlegt und gereinigt werden, um Verlust und eine Beeinträchtigung der normalen Funktion der Milchpumpe zu vermeiden.
3. Zerlege und reinige alle Teile, die mit Brust und Milch in Kontakt gekommen sind, unmittelbar nach der Verwendung, um Milchreste und Bakterienwachstum zu verhindern.
4. Für die Reinigung wird die Verwendung von Trinkwasser empfohlen.

Hinweise zur Bedienung


1. Die Haupteinheit darf niemals gewaschen oder desinfiziert werden, da keine Muttermilch in dieses Bauteil gelangt. Reinige sie mit einem weichen Tuch.
2. Reinige den Silikonbrustschild sorgfältig. Ist er beschädigt, funktioniert die Milchpumpe nicht ordnungsgemäß.
3. Reinige den Milchbehälter vorsichtig. Nicht reiben und nichts hineinstecken. Andernfalls kann es zu Beschädigungen kommen. Für die Reinigung wird Trinkwasser empfohlen.
4. Das Entenschnabelventil muss nicht separat zerlegt und gereinigt werden, um Verlust und Funktionsstörungen zu vermeiden.

Montage


1. Montiere das Entenschnabelventil und den Airbag wie in der Abbildung gezeigt. Achte darauf, dass das Ventil korrekt ausgerichtet ist. Setze anschließend die T-Verbindung wie dargestellt in den Milchbehälter ein. Stelle sicher, dass die Ausrichtung korrekt ist.

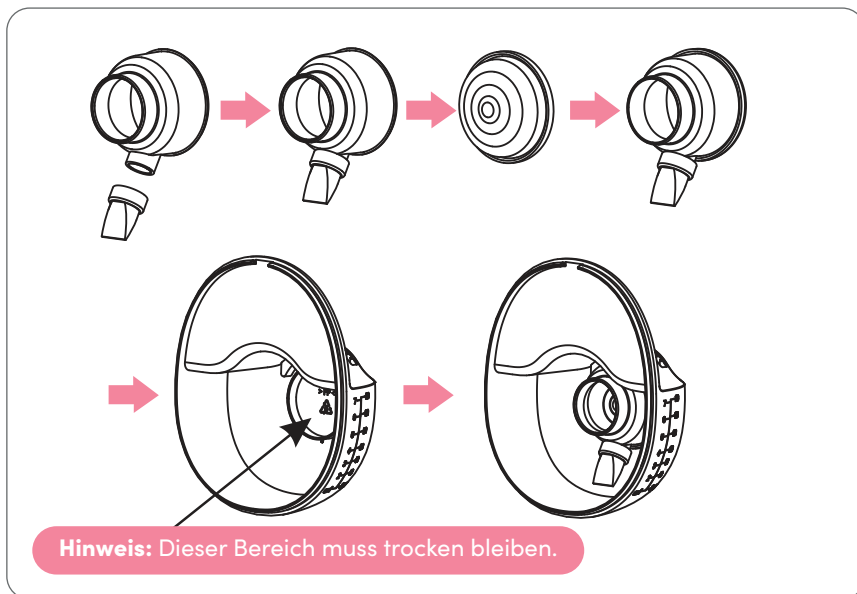


2. Um den Silikonbrustschild am Milchbehälter zu befestigen, richte die Führungskerbe des Brustschilds an der Rücklauferbe des Milchbehälters aus und drücke die Ränder mit beiden Händen fest an, um eine dichte Abdichtung zu gewährleisten.

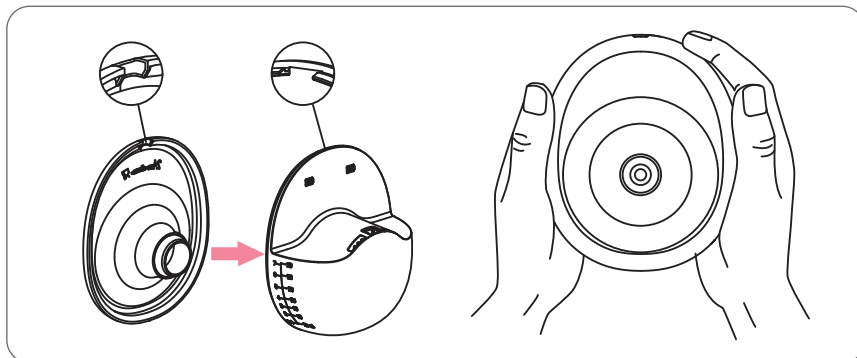

3. Setze den Silikonstopfen in den Milchbehälter ein und drücke ihn von Hand, bis die Oberfläche bündig abschließt und eine perfekte Abdichtung entsteht.

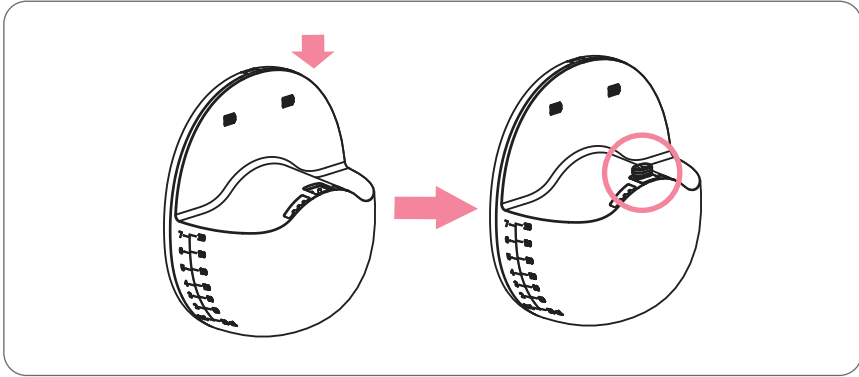


4. Befestige die Haupteinheit am Milchbehälter, richte die Nut an der Unterseite der Haupteinheit mit dem Milchbehälter aus und drücke sie nach unten, um eine vollständige Abdichtung sicherzustellen.

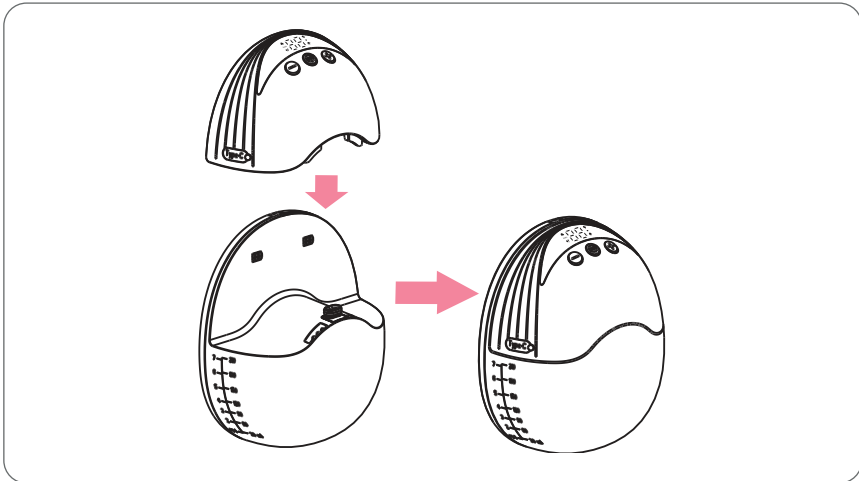


Hinweis: Netzteile sind handelsübliche Standardzubehörteile und nicht im Lieferumfang enthalten. Falls erforderlich, können sie separat erworben werden. Netzteil-Spezifikation: 5V 1A.

Abpumpen starten


1. Drücke den Silikonbrustschild fest an die Brust und stelle sicher, dass die Brustwarze zentriert ist. Bleibe aufrecht sitzen und achte darauf, die Position des Geräts und der Brust nicht zu verdrehen, da sonst keine Saugkraft entsteht.

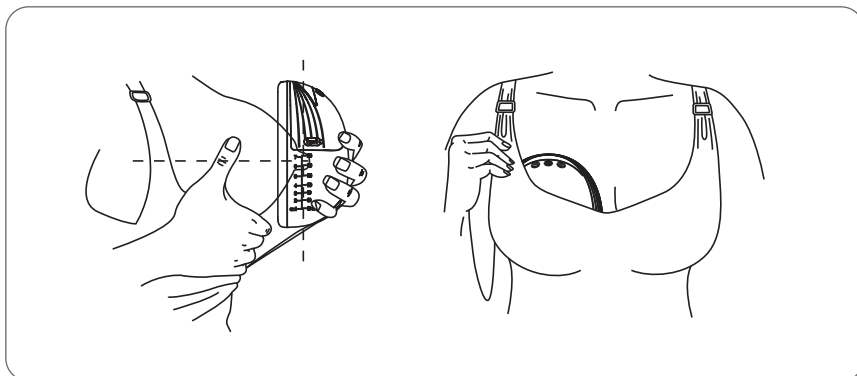


2. Drücke die  2 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten. Im eingeschalteten Zustand kannst du durch erneutes Drücken für 2 Sekunden das Gerät ausschalten. Die Milchpumpe schaltet sich nach 20 Minuten Betrieb automatisch ab. Das Display schaltet sich nach 30 Sekunden aus und kann durch Drücken einer beliebigen Taste wieder aktiviert werden.
3. Durch kurzes Drücken der Taste kannst du den Massagemodus  auswählen. Dieser Modus ist schneller als der Abpumpmodus und hat eine geringere Saugkraft. Nach der Geburt sind die Brüste anfällig für Schwellungen, Schmerzen oder Verhärtungen. Dieser Modus kann helfen, diese Beschwerden zu lindern.

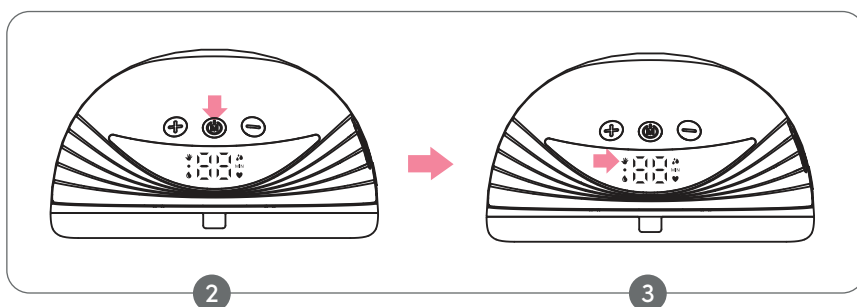


4. Durch kurzes Drücken der Taste kannst du den Abpumpmodus  auswählen. Dieser Modus ist langsamer als der Massagemodus, hat eine stärkere Saugkraft und simuliert realistischer das Saugen des Babys, um den Milchfluss effektiv anzuregen.
5. Durch kurzes Drücken der Taste kannst du den Doppelfrequenzmodus  auswählen. Dieser Modus besteht aus neun langen und einem kurzen Saugzyklus. In der frühen Stillzeit lassen sich die Milchgänge oft schwer öffnen. Durch den Wechsel der Saugmuster kann die Milchproduktion gefördert werden.

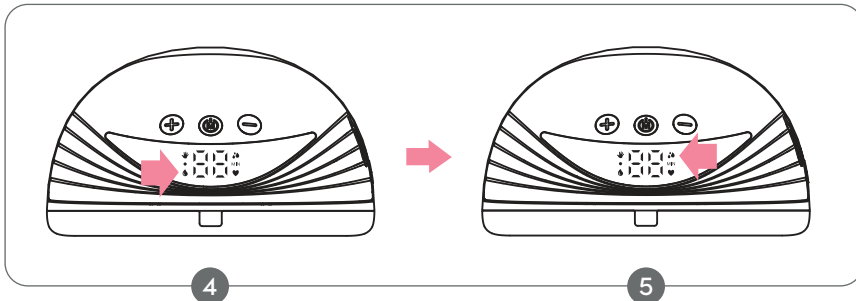

6. Durch kurzes Drücken der Taste kannst du den Automatikmodus  auswählen. Dieser Modus liegt zwischen Massage und Abpumpen. Die Saugkraft ist stabil. Der Automatikmodus erhöht die Saugstufe alle 15 Sekunden automatisch und bleibt schließlich auf Stufe 9 stehen. Während der Erhöhung kannst du mit den Plus oder Minus Tasten den Vorgang abbrechen.
7. Anzeige von Stufe und Zeit: Die Standardstartstufe ist Stufe 1 und die Anzeige zeigt „1“. Insgesamt stehen 12 Stufen zur Verfügung. Nach 5 Sekunden ohne Bedienung wechselt das Display in den positiven Zeitmessmodus. Die Anzeige „MIN“ leuchtet und die Zeit wird in Minuten gemessen.

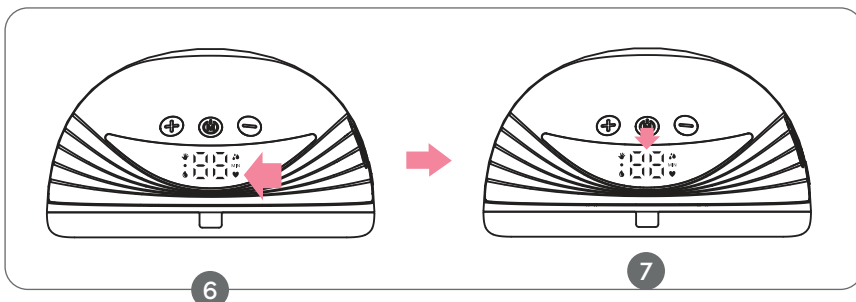


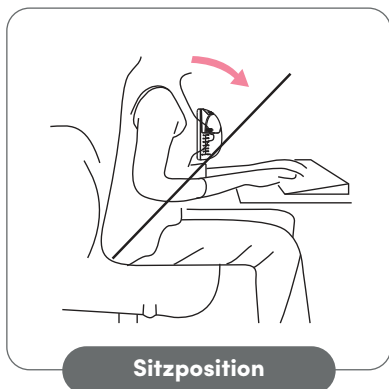

Sitzposition

Entspanne dich und setze dich bequem auf einen Stuhl mit leichter Vorneigung, wobei dein Rücken mit Kissen gestützt wird. Dadurch neigt sich der obere Teil der Silikonbrustpumpe leicht nach oben, was den Fluss der Muttermilch in den Milchbehälter erleichtert und Milchreste im Brustschild reduziert.

8. Nach dem Abpumpen: Drücke die Ein/Aus Taste, um die Milchpumpe auszuschalten. Beuge dich leicht nach vorne und entferne die Milchpumpe vorsichtig von der Brust. Falls sich noch eine kleine Menge Muttermilch im Silikonbrustschild befindet, kippe die Milchpumpe leicht, um die restliche Milch auszugießen.

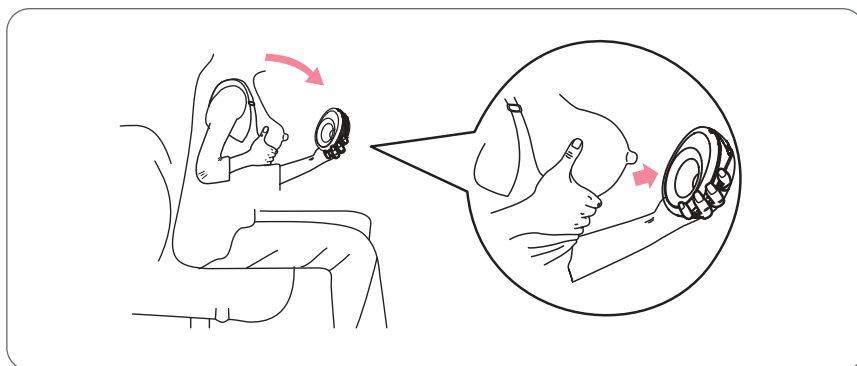


Aufladen

Batterieanzeige

1. Das blaue Licht blinkt (bei einer Spannung von 3,2V) und zeigt an, dass dringend geladen werden muss. Ist der Akkustand zu niedrig, schaltet sich das Gerät automatisch ab (bei einer Batteriespannung von 3,0V).
2. Während des Ladevorgangs leuchtet das Licht blau und bei vollständig geladenem Akku leuchtet es grün.
3. Wenn der Akku geladen ist, lässt sich das Gerät einschalten und die Anzeige leuchtet grün.




Öffne die USB-Abdeckung, schließe das USB-Kabel an und verbinde das andere Ende mit einem Netzteil, um die Motoreinheit aufzuladen.

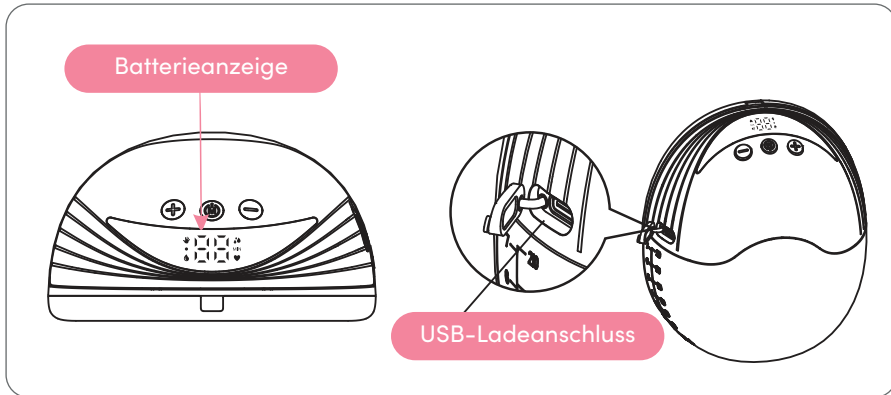
Hinweis:

1. Das Gerät funktioniert nicht während des Ladevorgangs.
2. Dieses Produkt verfügt über eine Speicherfunktion. Beim erneuten Einschalten startet es automatisch im zuletzt verwendeten Modus und mit der zuletzt verwendeten Saugstufe.
3. Nach jedem Start schaltet sich das Gerät nach 20 Minuten Betrieb automatisch ab.
4. Die durchgehende Betriebszeit variiert je nach Akkustand und Betriebsbedingungen.
5. Die Ladezeit kann je nach verbleibender Akkuleistung, Temperatur oder Ladebedingungen variieren.
6. Ein USB-Netzteil ist ein handelsübliches Standardzubehör. Es ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann bei Bedarf separat erworben werden. Netzteil-Spezifikation: 5V 1A.

Anleitung zum Ausgießen der Muttermilch

Nach dem Abpumpen entfernst du die Milchpumpe von der Brust, hältst sie aufrecht und gießt den Inhalt des Milchbehälters in eine Flasche. Achte darauf, dass der gerillte Teil des Milchbehälters mit der Flaschenöffnung ausgerichtet ist, um ein Verschütten der Milch zu vermeiden.

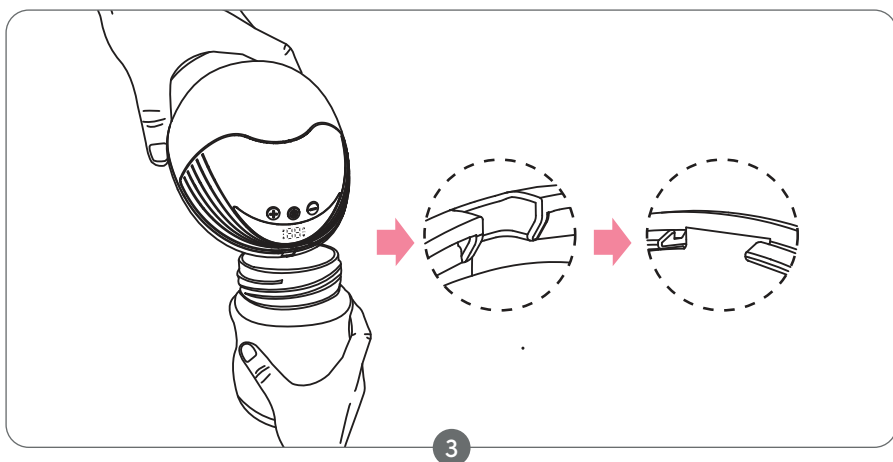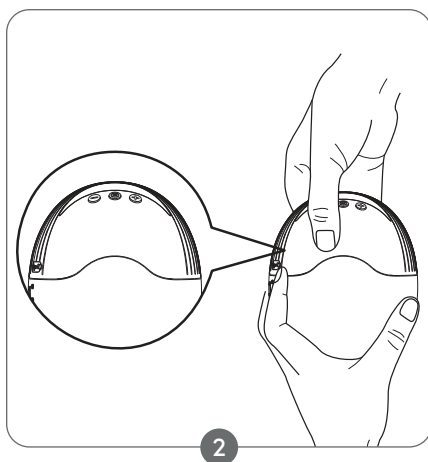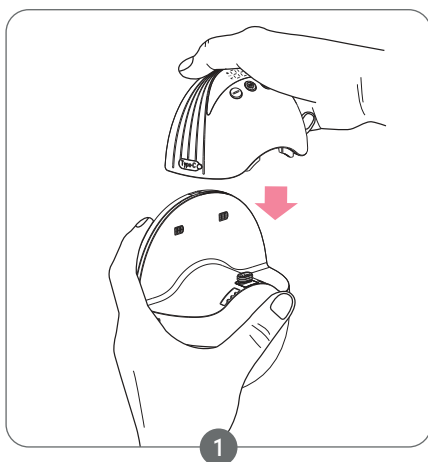

Produktparameter

37

Produktparameter	
Produktname	Tragbare elektrische Milchpumpe
Modell	MY-375
Ladespannung	DC 5V 1A
Ladestrom	730 mA
Batterietyp	Polymerakku
Batteriekapazität	1200 mAh
Nennspannung	3,7 V
Nennstrom	Max. 1 A
Betriebsdauer	> 1,5 Stunden
Saugdruck	40 mmHg – 300 mmHg
Geräuschpegel	≤ 55 dB
Arbeitsumgebung	10–30 °C, RH 15–93 %, 700–1060 hPa
Lagerung & Transport	–25–50 °C, RH 15–93 %, 700–1061 hPa

Aufbewahrung der Muttermilch

Vorsicht

1. Muttermilch nicht mehrfach einfrieren.
2. Frische Muttermilch nicht mit gefrorener Muttermilch mischen.
3. Nach dem Füttern verbleibende Muttermilch unbedingt entsorgen.

Hinweis: Bewahre nur Muttermilch auf, die mit einer sterilisierten Milchpumpe abgepumpt wurde.

Muttermilch aufbewahren

Abgepumpte Milch kann in einem sauberen, sterilisierten Aufbewahrungsbeutel oder in einer gut verschlossenen Flasche gelagert werden. Anschließend sofort kühlen oder einfrieren.

Vorsicht

Abgepumpte Milch kann bis zu 48 Stunden im Kühlschrank oder bis zu drei Monate im Gefrierfach aufbewahrt werden. Flasche oder Beutel müssen deutlich mit Datum und Uhrzeit des Abpumpens gekennzeichnet sein. Die zuerst abgepumpte Milch sollte zuerst verwendet werden.

Auftauen der Muttermilch

Gefrorene Muttermilch über Nacht im Gefrierfach des Kühlschranks auftauen lassen. In dringenden Fällen kann Muttermilch in einer Schüssel mit warmem Wasser aufgetaut werden. Nach dem Auftauen innerhalb von 24 Stunden verbrauchen. Zum Erwärmen die Flasche aufrecht in eine Schüssel mit warmem Wasser stellen oder einen Flaschenwärmer verwenden, um die Muttermilch sicher und schnell zu erwärmen.

Warnung

1. Immer die Temperatur der Muttermilch vor dem Füttern überprüfen.
2. Muttermilch nicht in der Mikrowelle erwärmen, da wichtige Nährstoffe und Antikörper zerstört werden können.
3. Ungleichmäßiges Erwärmen kann zu lokaler Überhitzung führen und Verbrennungen verursachen.
4. Die Milchflasche nicht in kochendes Wasser eintauchen, um ein Platzen zu vermeiden.

Zookie

Zookie
Boomakkerweg 8
6741DX Lunteren

