



Broadstairs toiletframe

VR202 (vrijstaand)

VR203 (Vaste versie op de vloer)



Bevestigings- en onderhoudsinstructies

Dit bestand kan als PDF worden bekeken en gedownload op www.aidapt.co.uk. Klanten met een visuele beperking kunnen een gratis PDF Reader (zoals adobe.com/reader) gebruiken om in te zoomen en de tekstgrootte te vergroten voor een betere leesbaarheid.

INVOERING

Bedankt dat u hebt besloten om het Broadstairs toiletframe van Aidapt te kopen. Het Broadstairs toiletframe is vervaardigd uit de beste materialen en componenten die beschikbaar zijn en is bij correct gebruik ontworpen om vele jaren betrouwbare, probleemloze service te bieden.

Let op: Overleg altijd met de voorschrijver/fysiotherapeut als u twijfelt of dit product geschikt is voor uw gebruik.

Let op. Deze apparatuur moet door een bevoegd persoon worden geïnstalleerd.

Gewichtslimiet van 190 kg (30 st).

Overschrijd de aangegeven gewichtslimiet niet; dit kan de gebruiker in gevaar brengen.

VOOR GEBRUIK •

Verwijder voorzichtig al het verpakkingsmateriaal. Vermijd het gebruik van messen of andere scherpe instrumenten, aangezien dit het oppervlak van het product kan beschadigen.

- Controleer het product op zichtbare schade. Als u schade ziet of een defect vermoedt, gebruik uw product dan niet aangezien dit uw veiligheid in gevaar kan brengen, maar neem contact op met uw leverancier voor ondersteuning.

SCHOONMAAK

Alle productcomponenten zijn vervaardigd uit hoogwaardige materialen. Het is echter heel belangrijk dat u uw toiletframe alleen schoonmaakt met een niet-schurend schoonmaakmiddel of een mild reinigingsmiddel met een zachte doek en vermijd het gebruik van kalkverwijderaars.

Gebruik in geen geval schurende schoonmaakmiddelen of materialen op de onderdelen. Controleer ook of de reiniger die u gaat gebruiken geschikt is voor ABS, Vinyl, Polymeerkunststoffen en Thermoplastische rubbers en Polyurethaanrubber.

Let op. Regelmatig dagelijks schoonmaken vermindert de vorming van kalkaanslag op uw product.

Gemorst carrosseriedelen moeten worden schoongemaakt zodra ze zich voordoen (met bijzondere aandacht voor het gebied waar de framebreedte groter is), omdat dit roest of corrosie voorkomt die het frame zou kunnen beschadigen/verzwakken.

Onze apparatuur kan worden gereinigd en/of gedesinfecteerd volgens de MHRA-richtlijnen voor decontaminatie MHRA DB 2003 (06). Dit product is geschikt voor reiniging met vochtige hitte of autoclaveren. Bij gebruik van vochtige warmte kan de apparatuur minimaal één minuut op 81°C worden gehouden om desinfectie te bewerkstelligen.


AANPASSINGEN AAN DE HOOGTE VAN DE VERLENGPOTEN

- Verwijder de 'E'-clip van de verlengpoot en strek alle vier de poten gelijkmatig uit tot de gewenste hoogte, waarbij u ervoor zorgt dat u het laatste geponste gat van de verlengpoot niet overschrijdt. (Zie afb. 1)
- Zodra u de gewenste hoogte heeft bereikt; plaats de 'E'-clip terug en zorg ervoor dat deze door de verlengpoot is gegaan en netjes en strak rond de buitenpoot past. (Zie afb. 2).
- Installeer de verlengpoten nooit ongelijkmatig of schuin, dit brengt de veiligheid van de gebruiker in gevaar.

AANPASSINGEN AAN BREEDTE VERLENGSTANGEN •

Verwijder de 'E' clip van de verlengstang en verleng het frame tot de gewenste breedte (zie afb. 1)

- Zodra u de gewenste breedte heeft bereikt, installeert u de 'E'-clip opnieuw en zorgt u ervoor dat deze door de beugel is gegaan verlengstuk en past netjes en strak om het buitenbeen. (Zie afb. 2).
- Zorg ervoor dat de e-clip zowel door de externe buis als door het interne verlengstuk is gegaan (zie afb. 3) Niet gebruiken als de e-clip alleen door het interne verlengstuk gaat (zie afb. 4)

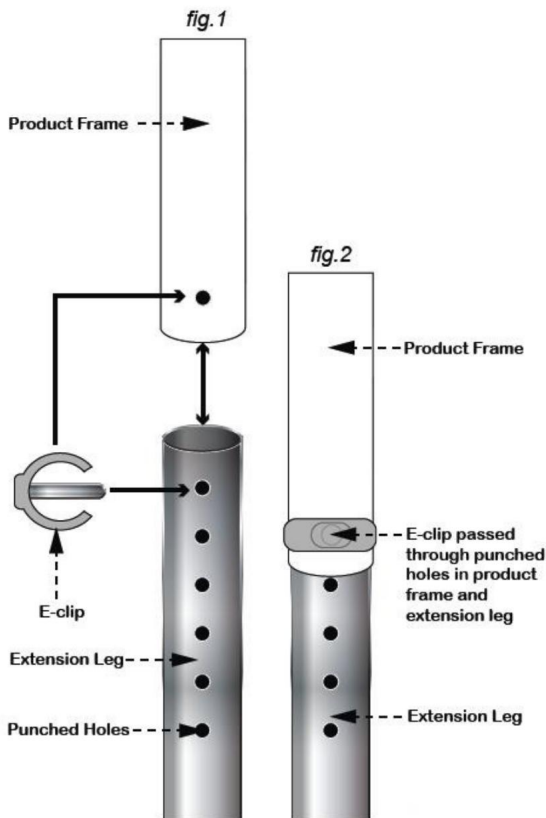

MONTAGE VAN DE VLOERBEVESTIGINGSKIT

(OPTIONEEL EXTRA GELEVERD BIJ BESTELLING VR203)

Verwijder de 'E'-clips van de verlengpoten en verwijder de verlengpoten volledig van het frame.

Plaats de meegeleverde vloerbevestigingspoten. Selecteer de gewenste hoogte-instelling en plaats de 'E'-clips om de poten op hun plaats te bevestigen. Plaats het frame op de gewenste plek rond het toilet en gebruik geschikte schroeven (niet meegeleverd) om de bevestigingsplaten aan de vloer te bevestigen.

HERUITGAVE

Als u dit product opnieuw uitgeeft of op het punt staat dit product opnieuw uit te geven, controleer dan zorgvuldig alle onderdelen op hun veiligheid.

Dit houdt onder

meer in: • Een goede hoogteverstelling

- Vastheid van alle moeren/bouten/zwenkwielen
- Overige inschroef-/bout-/insteekcomponenten.
- Controleer ook alle bekleding op stevigheid, spleten etc.
- Breedte- en beenverlengingen

Bij twijfel dient u het product niet uit te geven of te gebruiken, maar dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw leverancier voor serviceondersteuning.

VERZORGING EN ONDERHOUD

Voer regelmatig een veiligheidscontrole van het product uit als u zich zorgen maakt. Let vooral op de breedte en de beenverlengingen.

BELANGRIJKE INFORMATIE

De informatie in dit instructieboekje mag niet worden opgevat als onderdeel van of als vaststelling van enige contractuele of andere verbintenis door Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd of haar agenten of haar dochterondernemingen en er wordt geen garantie of verklaring gegeven met betrekking tot de informatie. .

Gebruik uw gezond verstand en neem geen onnodige risico's bij het gebruik van dit product; als gebruiker moet u de aansprakelijkheid aanvaarden voor de veiligheid bij het gebruik van het product.

Aarzel niet om contact op te nemen met de persoon die dit product aan u heeft uitgegeven of met de fabrikant (hieronder beschreven) als u vragen heeft over de montage/het gebruik van uw product.

**Aidapt Bathrooms Ltd, Lancots Lane, Sutton Oak, St Helens, WA9 3EX Telefoon: +44 (0) 1744 745
020 • Fax: +44 (0) 1744 745 001 • Web: www.aidapt.com E-mail: sales@aidapt.co.uk**