

Voor het verwijderen van teken bij mens en dier

- Bebruikwijzing
1. Breuk één account of ander, uitsteekende middel
 2. Houd de teek vast met de grijper sluiten door uw vingers
 3. Plaats de grijper voorzigtig op de teek
 4. Draai de grijper voorzigtig om
 5. Zie de afbeelding voor de juiste manier van gebruik
 6. Desinfecteer de teek met alcohol



For simple, safe and fast removal of ticks from humans and animals

Instructions

1. Do not use alcohol or other disinfectants
2. Hold the tick tweezers between your thumb and middle finger and press the back of the pliers with your index finger over the tick and allow the gripper to close by slowly
3. Carefully place the gripper from the back removing your index finger in a small turn to the left and a small turn to the right
4. Now turn the clamped tick upwards this will partially release the tick
5. Then slowly pull the tick upwards
6. Disinfect the bite site afterwards

When removing the tick, note: when tick is discovered, where the tick was present and when the tick was removed, if you get red circles or other complaints within 2 weeks, please contact your doctor.



Zur einfachen, sicheren und schnellen Entfernung von Zecken bei Mensch und Tier

Anweisungen

1. Verwenden Sie keinen Alkohol oder andere Desinfektionsmittel
2. Halten Sie die Zeckenpinzette zwischen Daumen und Mittelfinger und drücken Sie mit dem Zeigefinger auf die Rückseite der Zange (weiße 'Kappe') die Zange öffnet sich leicht
3. Legen Sie den Greifer vorsichtig über die Zecke und lassen Sie den Greifer schließen, indem Sie Ihren Zeigefinger langsam von der Rückseite entfernen
4. Drehen Sie nun das festgeklemmte Häkchen eine kleine Drehung nach links und eine kleine Drehung nach rechts, dadurch wird das Häkchen teilweise gelöst
5. Ziehen Sie dann das Häkchen in einer einzigen Bewegung langsam nach oben bis sich das Häkchen löst
6. Die Bissstelle anschließend desinfizieren

Beachten Sie beim Entfernen der Zecke: wenn eine Zecke entdeckt wird, wo die Zecke vorhanden war und wann die Zecke entfernt wurde. Wenn Sie innerhalb von 2 Wochen rote Kreise oder andere Beschwerden bemerken, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.




Pour une élimination simple, sûre et rapide des tiques sur les humains et les animaux

Manuel d'utilisation:

1. Ne pas utiliser d'alcool ou d'autres désinfectants
2. Tenez la pince à tiques entre votre pouce et votre majeur et appuyez sur l'arrière de la pince avec votre index ('bouchon' blanc) la pince va maintenant s'ouvrir
3. Placez délicatement la pince sur la tique et laissez la pince se fermer en retirant lentement votre index de l'arrière
4. Tournez maintenant la tique serrée d'un petit tour vers la gauche et d'un petit tour vers la droite, cela libérera partiellement la tique
5. Tirez ensuite lentement la tique vers le haut en un seul mouvement jusqu'à ce que la tique se libère
6. Désinfectez ensuite le site de la morsure

Lors de la suppression de la coche, notez : lorsque la coche est découverte, où la tique était présente et quand la tique a été retirée. Si vous avez des cercles rouges ou d'autres problèmes dans les 2 semaines, veuillez contacter votre médecin.

ITEM NR. 013578

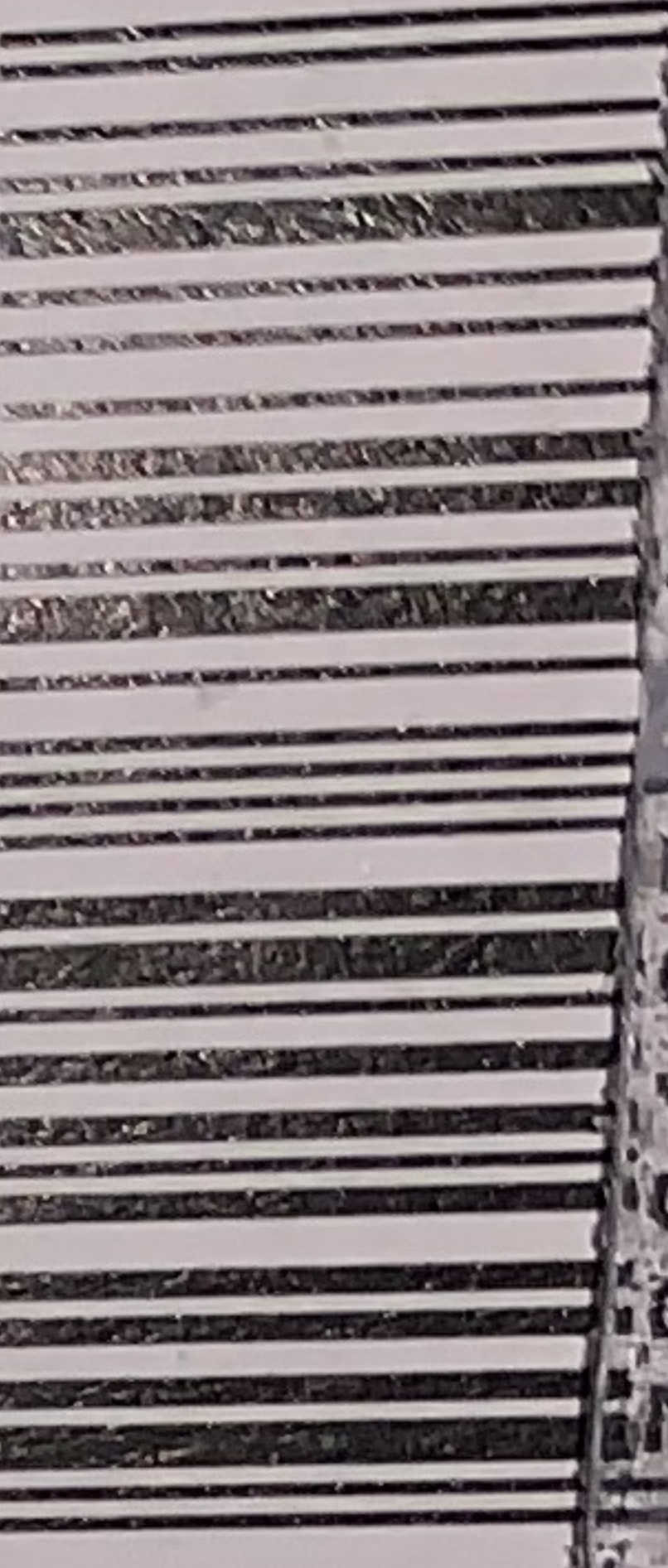

8 1720195179275 8

J.C.J.C. IMPORTS
 P.O. BOX 2007, 1811 EA ALKMAAR
 THE NETHERLANDS
 MADE IN PRC