


## INSTRUCTIONS FOR USE

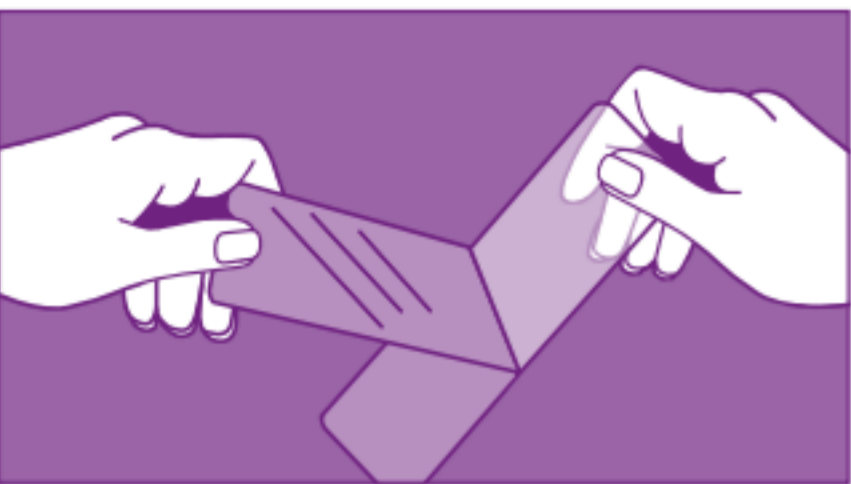

CN	
<b>名称</b> <p><b>BAPSCARCARE S</b> 硅胶贴片</p>	
<b>产品描述</b> <p><b>BAPSCARCARE S</b> 硅胶贴片是治疗疤痕（肥厚疤痕和疤痕疙瘩）和预防术后或意外创伤后形成病理性疤痕的一种成熟技术。 <b>BAPSCARCARE S</b> 是一种自粘、厚而透明并可清洗的硅胶贴片，并可以长期使用。</p>	
<b>成分</b> <p>-聚氨酯薄膜 -医用级硅胶</p>	
<b>特性</b> <p>-<b>BAPSCARCARE S</b> 硅胶贴片可使疤痕更加平滑、更柔软、更薄，并有助于减轻症状（皮肤持续发红、结疤、瘙痒、关节活动受限、不适和美容投诉）。 -硅胶贴片在皮肤顶部提供半封闭（覆盖）皮肤膜，可增加皮肤（表皮）的水合作用。更强的水合作用确保受损疤痕皮肤更快恢复，并减少功能问题（投诉）。</p>	
<b>适应症/急救区域</b> <p><b>BAPSCARCARE S</b> 硅胶贴片适用于：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-新旧伤疤</li> <li>-所有皮肤类型</li> <li>-所有年龄</li> <li>-异常疤痕（肥大性疤痕和疤痕疙瘩）的治疗和预防</li> <li>-烧伤疤痕的治疗</li> <li>-手术疤痕的治疗</li> <li>-用于衣服下方和压迫疗法</li> <li>-治疗由疤痕引起的持续性功能性不适（皮肤持续发红、结疤、瘙痒、关节活动受限、不适和美容投诉）</li></ul>	
<b>使用说明</b> <p>-为了获得最佳效果，最好在伤口闭合后（在移除缝线和所有结痂清除后）立即开始使用<b>BAPSCARCARE S</b> 硅胶疗法。建议将<b>BAPSCARCARE S</b> 硅胶疗法增加到每天最长23小时。这种逐步积累的目的是让皮肤逐渐习惯硅胶。</p> <p>-为了获得最佳效果，最适合将硅胶贴片每日使用最少12小时，最长23小时。</p> <p>-如有必要，<b>BAPSCARCARE S</b> 硅胶贴片可以切割成正确的尺寸。</p> <p>-确保疤痕周围2 cm的面积被硅胶贴片覆盖。除去疤痕周围的毛发可增加硅胶贴片的粘附性和耐久性。</p> <p>-在疤痕周围粘附硅胶贴片之前，彻底清洁并干燥皮肤。</p> <p>-取下硅胶贴片护膜的第一部分，在疤痕开始处小心粘帖自粘硅胶贴片。</p> <p>-取下护膜的第二部分，将硅胶贴片的下一部分粘帖在疤痕上。根据硅胶贴片的大小，必须重复上述操作，直到整个硅胶贴片都已覆盖。如有必要，硅胶贴片可用胶布绷带或伸展绷带固定。</p> <p>-除去硅胶贴片后，可用保湿霜涂抹皮肤。</p>	

**副作用**

- 在极少数情况下，皮肤可能对硅胶治疗反应过敏（皮肤过敏）。在这种情况下，停止治疗，直到皮肤恢复正常。
- 皮肤缓和后再次开始治疗，让皮肤逐步适应硅胶敷料（每天延长一小时）。
- 如果皮肤问题持续存在，请咨询医师/医生。
- 如果发生与辅助器物有关的严重事件，则必须将事件报告给生产商和用户所在地的主管部门（成员国）。

**存储**

- 在包装上注明了使用有效期。
- BAPSCARCARE S** 硅胶贴片可以在未开封的袋子中存放5年。
- 存放于室温或至少不高于25°的温度下。

**维护**

- 有必要正确（每日）清洁**BAPSCARCARE S** 硅胶贴片。这对于保持良好的附着力很重要。

**TR**

**İsim**

**BAPSCARCARE S** silikon bant

**Ürün tanımı**

**BAPSCARCARE S** (hipertrofik ve keloid) nedbe dokularının tedavisinde ve cerrahi işlem veya kaza sonrasında anormal nedbe dokusu gelişiminin önlenmesinde kanıtlanmış bir teknolojidir. Bu tıbbi silikon bantlar kenselâjından yapışır, kalırdır.

**Bileşim**

- Polüüren film
- Tıbbi kalitede silikon

**Özellikleri**

**BAPSCARCARE S** silikon bantlar nedbe dokularını daha dizi, daha az belirgin ve daha ince hale getirir ve yakınmalar (devam eden kızamıklık, nedbe dokularında gerginlik, kaşıntı, eklem hareketlerinde sınırlılık, rahatsızlık ve kozmetik yakınmalar) azaltır.
-Bu silikon bant cildin üzerinde yeni örtücü (kapakcı) bir tabaka oluşturur ve bu sayede cildin (epidemisinin) nem oluşmasına arınır. Artan nem hasar görmüş olan nedbe dokusunun daha çabuk iyileşmesini sağlar ve işlevsel yakınmalar (işkâyetler) azaltır.

**Endikasyonları / kullanım alanları**

**BAPSCARCARE S** silikon bantların aşağıdaki durumlarda kullanılması uygundur:

- hem tiki hem de yeni nedbe dokularında, tüm cilt tiplerinde,
- her yaşta,
- Anormal nedbe dokularının (hipertrofik ve keloid) tedavisinde ve önlenmesinde,
- Yanığa bağlı nedbe dokularının tedavisinde,
- Cerrahi nedbe dokularının tedavisinde,
- Kıyafet altı kullanımda ve kompresyon tedavisinde, Nedbe dokularının neden olduğu uzun süreli işlevsel yakınmaların tedavisinde (devam eden kızamıklık, nedbe dokularında gerginlik, kaşıntı, eklem hareketlerinde sınırlılık, rahatsızlık ve kozmetik yakınmalar).

**Kullanım şekli**

**BAPSCARCARE S** silikon tedavisinde en iyi sonucu elde edebilmek için silikon bantı tesheh yararının kapanmasından hemen sonra kullanmaya başlayın (dâkişlerin alınmasından ve varsa kabukların kalkmasından sonra).

**BAPSCARCARE S** silikon tedavisini günü den en fazla 23 saate kadar kademeli olarak artırarak uygulamanız önerilir. Bu kademeli artırma, cildin silikonlara yayvaş almasını sağlar.
-En iyi sonucu alabilmek için silikon bantlar terchen her gün günde en az 12 saat en fazla 23 saat kullanılmalıdır.
-**BAPSCARCARE S** silikon bantlar gerektiren istenilen boyutlarda kesilebilir.
-Nedbe dokunun çevrisinin 2 cm kadar silikon bantla kapatılması olmasına dikkat edin.
-Silikon bandın yapışma gücünü ve dayanıklılıđını artırmak için uygulamaya öncesinde nedbe dokusunun etrafındaki tüylerin alınması önerilir.
-Silikon bandı kullanımdan önce nedbe dokusunu ve dokunun etrafındaki cildi iyice temizleyip kurulayın.
-Silikon bandının koruyucu folyosunu ilk kısmını çıkartın ve silikon bandın bir sonraki kısmını nedbe dokusunun üzerine yapıştırın. Yukarıdaki işlem silikon bandının boyutuna bağlı olarak silikon bandın tamamı uygulanana tekrarlanmalıdır.
-Silikon bantı gereksibe sabit veya elastik bir bandajla sabitleyebilir.
-Cilt, silikon bant çıkarıldıktan sonra nemlendirmeli bir krem ile tedavi edilebilir.

**Bakım**

**BAPSCARCARE S** silikon bantların (her gün) iyice temizlenmesi gerekmektedir. Bu, bandın yapışkanlık

**TW**

**品名**

**巴普 S 疤痕護理矽膠貼片**

**描述**

經臨床證明，巴普 S 疤痕護理矽膠貼片用於治療（肥厚性疤痕和蟹足腫）和預防手術或意外後出現的異常疤痕。
醫療級矽膠貼片是自黏性、厚實、可清洗、透明狀且適合長時間使用。

**成份**

-聚聚基甲酸乙酯薄膜
-醫用級矽膠

**特性**

-巴普 S 疤痕護理矽膠貼片讓疤痕變得更平整、更柔軟、更輕薄，並且減少不適症狀（持續發紅、疤痕結痂、疤痕拉長、瘙癢、關節活動受限、不適感和妨礙美觀）。
矽膠貼片會在皮膚表面形成一層半閉合（覆蓋層）保護膜，增加皮膚（表皮層）保溼度。保溼作用能加速受損疤痕組織的恢復，並減少不適症狀。

**使用說明**

- 為了獲得最佳效果，傷口閉合後（如縫合後和結痂脫皮脫落後），應立即使用巴普 S 疤痕護理貼片治療。
- 巴普 S 疤痕護理矽膠膠治療，建議一天最長累積不超過23小時。延長使用時間是為了使皮膚漸漸適應矽膠。
- 建議貼片每日貼貼至少12小時，最長23小時，以達到最佳效果。
- 如有必要，將巴普 S 疤痕護理矽膠貼片裁剪成適合的尺寸。
- 剪裁尺寸大於疤痕邊緣大約2公分。
- 為了確保矽膠貼片的黏性和持久性，建議去除疤痕周圍的毛髮後再使用。
- 如果有何任何產品嚴重問題，請回報給製造商以及（會員國）有關當局。

**副作用**

- 在極少數情況下，皮膚可能對矽膠治療有過敏反應（如皮膚瘙癢）。這種情況下立即停止治療，待皮膚恢復後再開始治療。
- 再次開始治療，讓皮膚逐漸適應巴普 S 疤痕護理矽膠貼片（漸進式每日增加一小時）。
- 如果皮膚問題持續存在，請諮詢醫師。
- 如果有何任何產品嚴重問題，請回報給製造商以及（會員國）有關當局。

**保養**

- 為維持矽膠的黏性，請確實清洗巴普 S 疤痕護理矽膠貼片（每日）。
- 這對保持貼片的黏性很重要。
- 使用幾滴中性肥皂/乳液載抹矽膠貼片。
- 盡可能使用肥皂和溫水清除灰塵。
- 在溫水下徹底沖洗矽膠貼片。
- 接觸到肥皂和水後，造成黏性不佳。
- 待矽膠貼片放置乾燥清潔的檯面風乾後再使用，黏著面朝上。
- 待貼片乾燥時，黏性逐漸恢復。
- 僅在完全乾燥的情況下使用矽膠貼片。
- 由於磨損導致黏度降低，可以修剪矽膠貼片的邊緣。

**巴普 S 疤痕護理矽膠貼片應該使用多久？**

- 疤痕恢復正常至少需要3-6個月。
- 只要疤痕隆起、泛紅或其他症狀，請使用巴普 S 疤痕護理矽膠貼片。
- 治療時間請諮詢治療師或醫師。

**適應症/應用範圍**

巴普 S 疤痕護理矽膠貼片適用於：

- 新舊疤痕
- 所有膚質
- 所有年齡層
- 治療和預防異常疤痕（肥厚性疤痕和蟹足腫）
- 燒傷疤痕的治療。
- 手術疤痕的治療。
- 在衣物下方便使用及用於加壓治療
- 治療疤痕造成的持續性不適（持續發紅、疤痕拉長、疤痕瘙癢、關節活動受限、不適感和妨礙美觀）。

**特別注意和預防措施**

- 遠離孩童可接觸範圍。
- 巴普 S 疤痕護理矽膠貼片限外部使用。
- 巴普 S 疤痕護理矽膠貼片只能用在舊傷口處（如皮掉落後）；請勿在未癒合傷口上使用。
- 請勿將巴普 S 疤痕護理矽膠貼片在曬曬太陽下或熱源附近乾燥。
- 運動或是游泳時，請暫時除去巴普 S 疤痕護理矽膠貼片。汗水或與水接觸可能造成巴普 S 疤痕護理矽膠貼片脫落。
- 任何成分過敏，請勿使用。
- 收到產品後外包装破損時，請勿使用。

**特別注意和預防措施**

- 遠離孩童可接觸範圍。
- 巴普 S 疤痕護理矽膠貼片限外部使用。
- 巴普 S 疤痕護理矽膠貼片只能用在舊傷口處（如皮掉落後）；請勿在未癒合傷口上使用。
- 請勿將巴普 S 疤痕護理矽膠貼片在曬曬太陽下或熱源附近乾燥。
- 運動或是游泳時，請暫時除去巴普 S 疤痕護理矽膠貼片。汗水或與水接觸可能造成巴普 S 疤痕護理矽膠貼片脫落。
- 任何成分過敏，請勿使用。
- 收到產品後外包装破損時，請勿使用。

**副作用**

- 在極少數情況下，皮膚可能對矽膠治療有過敏反應（如皮膚瘙癢）。這種情況下立即停止治療，待皮膚恢復後再開始治療。
- 再次開始治療，讓皮膚逐漸適應巴普 S 疤痕護理矽膠貼片（漸進式每日增加一小時）。
- 如果皮膚問題持續存在，請諮詢醫師。
- 如果有何任何產品嚴重問題，請回報給製造商以及（會員國）有關當局。

**存储**

- 包裝上註明最終使用期限。
- 巴普 S 疤痕護理矽膠貼片可以在未密封的包裝袋中保存5年。
- 常溫或是在不高於25° C 的温度下保存。

**使用說明最近修訂日期**
2021年1月

**本使用說明最近修訂日期**
2021年1月

**AR**

تم بإزالة الأوساخ قدر الإمكان بالصابون والماء الفاتر.
-اشطف ضمادة السيليكون جيداً تحت الماء الجاري الفاتر.
-بعد ملامسة الماء والصابون تختفي قوة اللصق.
-اترك ضمادة السيليكون تجف على سطح جاف وتطهير، مع رفع الجانب اللاصق إلى الأعلى.
-تعود قوة اللصق عريضياً أثناء التطهير.
-لا تستعمل ضمادة السيليكون إلا عندما تجف تماماً.
-يمكن قص خراف ضمادات السيليكون إذا نقصت قوة اللاصق بسبب التآكل.

**ما هي مدة استعمال ضمادة السيليكون بايسكاركير إس (BAPSCARCARE S)؟**
-ستغرق التئمة ما لا يقل عن 6-3 أشهر قبل أن تعود إلى طبيعتها.
-تم باستعمال ضمادة السيليكون بايسكاركير إس (BAPSCARCARE S) حتى تزوال التئمة أو تحمز أو تظهر أعراض.
-استشر المعالج/الطبيب عن مدة العلاج.

**مدة الاستعمال**
-تحتوي كل علية من بايسكاركير إس (BAPSCARCARE S) على ضمادة سيليكون واحدة أو أكثر.
-عند استعمالها وصيانتها بشكل صحيح وفقاً لتعليمات الاستعمال، تقدم كل علية محتوى كافياً للعلاج من 4 إلى 8 أسابيع.
-لذلك، قد تكون هناك حاجة إلى طب متعددة للعلاج على المدى الطويل.

**مدة الاستعمال**
-تحتوي كل علية من بايسكاركير إس (BAPSCARCARE S) على ضمادة سيليكون واحدة أو أكثر.
-عند استعمالها وصيانتها بشكل صحيح وفقاً لتعليمات الاستعمال، تقدم كل علية محتوى كافياً للعلاج من 4 إلى 8 أسابيع.
-لذلك، قد تكون هناك حاجة إلى طب متعددة للعلاج على المدى الطويل.

**الإهتمام الخاص والإحتياطات**

تحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
-ضمادات السيليكون بايسكاركير إس (BAPSCARCARE S) هي صالحة فقط للاستعمال الخارجي.
-استعمل ضمادات السيليكون بايسكاركير إس (BAPSCARCARE S) فقط على الجلد الخلق (بعد اختفاء القشرة) وليس على الجروح المفتوحة أبداً.
-لا تلم أبداً بتخفيف ضمادة السيليكون بايسكاركير إس (BAPSCARCARE S) في الشمس أو بالقرب من مصدر الحرارة.
-تم بإزالة ضمادة السيليكون بايسكاركير إس (BAPSCARCARE S) مؤقتاً أثناء ممارسة الرياضة veya yüzerken geçici olarak çıkartın.
**BAPSCARCARE S** silikon bantlar terleme veya suyla temas nedeniyle çıkarak düşebilir.
-İleştirm maddelerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa kullanmayınız.
-Ürünü aldığınızda paket hasarlıysa kullanmayınız.

**Yan etkiler**

-Cilt nadiren silikon tedavisinde karşı aşırı duyarlı reaksiyon (cilt tahrişli) gösterebilir. Böyle bir durumda olitkeki hassasiyet geçene kadar tedaviyi geçici olarak bırakın.
-Ciltteki hassasiyet geçtiğinde tedaviye tekrar başlayın ve cildinizi BAPSCARCARE S silikon bantla (her gün) saat saat daha uzun kullanarak yayvaş oluşturun.
-Cilt sorunlarının devam etmesi halinde hekiminize/ doktora başvurun.
-Yardımcı maddeyle ilgili ciddi durumlann meydana gelmesi halinde bunlar (üretici firmaya ve kullanıcının ikamet ettiği (üye devletini) yetkili makamlara bildirin/meditri.

**الاتان الجانبية**

-في حالات نادرة، قد يصاب الجلد بطفح الحساسية (تبيح الجلد) مع علاج [السيليكون]. توقف عن العلاج حتى يتساقط الجلد هاتناً.
-أبداً العلاج مرة أخرى واترك الجلد يتعود ببطء على ضمادة السيليكون (كل يوم ساعة واحدة أطول).
-إذا استمرت مشاكل الجلد، استشر المعالج/الطبيب.
-إذا كانت هناك حوادث خطيرة تتعلق بالجهاز، فيجب إبلاغ الشركة المصنعة والسلطات المختصة (في الدولة العضو) حيث يوجد المنتج.

**الحفظ**

-يشار إلى تاريخ انتهاء الصلاحية على التئمة والتغليف.
-يمكن تخزين ضمادة السيليكون بايسكاركير إس (BAPSCARCARE S) في أكياس مغلقة مدة 5 سنوات.
-تختلف في درجة حرارة بين 5 و 25 درجة مئوية.

**تاريخ آخر مراجعة لدليل الاستعمال**
يناير/كانون الثاني 2021

**JP**

**製品名**

**BAPSCARCARE S**シリコングエアシート

**製品概要**

**BAPSCARCARE S**シリコングエアシートは、傷あと（肥厚性瘢痕とケロイド）の手当て、怪我や手術後の異常な傷あとと形成を予防するための治療済み処方薬です。
この医療用シリコングエアシートは厚手で水洗い可能な透明な粘着グエアシートで、繰り返し長期間ご使用いただけます。

**成分**

-シリウレタンフィルム
-医療用シリコングジェル

**特徴**

**BAPSCARCARE S**シリコングエアシートは傷あとをより平らで柔らかく薄くする効果があり、継続的な赤みも、傷あとの引きつり、かゆみ、関節の動きにくさ、不快感、目に見える前駆症状などを和らげる効果があります。
**BAPSCARCARE S**シリコングエアシートは肌を覆う非薬性の保護膜を形成し、皮膚（表皮）を高い湿度状態に保ちます。優れた保湿効果により、ダメージを受けた傷あとをより早く回復させ症状を緩和させます。

**用途/適用範囲**

**BAPSCARCARE S**シリコングエアシートの以下の場合に適しています。
-古い傷あとから新しい傷あとまで
-全皮膚タイプ
-全年齢
-異常な傷あと（肥厚性瘢痕とケロイド）の手当てと予防
-火傷による傷あとの手当て
-外科手術後の傷あとの手当て
-衣服の下や湿布療法として
-傷あとが原因の持続的な症状（継続的な赤み、傷あとの引きつり、かゆみ、関節の動きにくさ、不快感、目に見える傷あと）の手当て

**BAPSCARCARE Sシリコングエアシートの使用方法**

**BAPSCARCARE S**シリコング療法の効果을最大化するために、できるだけ傷口が閉じた直後からすぐに使用を開始していただくことをお勧めします。汗や水のある場合はそれを拭き取ってください。
**BAPSCARCARE S**シリコング療法は一日に最長23時間まで使用時間を延ばしていただくことをお勧めします。シリコンに皮膚を徐々に慣らすために、傷あと周辺の皮膚をしっかりと洗浄し乾燥させてください。
粘着部分を傷あととの密かに慎重に貼付してください。そして残った剥離紙をはがし、傷あとシート全体を貼り付けます。シリコングシートの大きさに応じて以上の工程をシート全体が張り付けられるまで繰り返し行ってください。
シリコングエアシートは必要に応じて固定用包帯または伸縮包帯で固定することができます。
シリコングエアシートをはがした後は、保湿クリーム等で皮膚を保護することを勧めます。

**BAPSCARCARE Sシリコングエアシートはどのくらい使用し続けてもよいですか？**

-傷あとが治るまでには少なくとも3〜6ヶ月間がかかります。
-傷あとの盛り上がり、赤み、症状がある間は**BAPSCARCARE S**シリコングエアシートの使用を続けてください。
-この療法の適用期間については治療担当者または医師にご相談ください。

**使用期限**

**BAPSCARCARE S**の各パッケージには一枚または複数枚のシリコングエアシートが入っています。
-取扱説明書に正しいご使用を継続された場合は、**BAPSCARCARE S**シリコングエアシート1パッケージでおよそ4〜8週間分の手当てができます。
-治療が長引く場合は、複数パッケージが必要になる場合があります。

**留意点と安全上の注意**

-粘着性の手の届かない場所に保管してください。
-**BAPSCARCARE S**シリコングエアシートは外用薬です。
-**BAPSCARCARE S**シリコングエアシートは傷口が閉じた後（かさぶたの取れた後）のみを使用し、開いた傷口には絶対に使用しないでください。
シリコングエアシートは決して直射日光の下または熱源の近くで乾燥させないでください。
-スプレーや水泳をする際は、**BAPSCARCARE S**シリコングエアシートを一度しっかりと取り外していただき、汗や水との接触によりシリコングエアシートが剥がれる場合があります。
-患部が過敏になっている場合は使用しないでください。
-購入時に製品のパッケージが破損している場合は、使用しないでください。

**副作用**

-シリコング療法に対して皮膚が過敏な反応（皮膚炎等）を起こすことが稀にあります。その場合は皮膚の状態が安定するまで手当てを中止してください。
-炎症が治まったら、皮膚を徐々に**BAPSCARCARE S**シリコングエアシートに慣れさせつつ手当てを再開してください。貼付時間は毎日1時間ずつ延長してください。
-皮膚の問題が長引く場合は、治療担当者または医師にご相談ください。
-本製品が原因で重篤な副作用が発生した場合には、製薬元とお客様が居住する地域の医薬品監督局に必ずご報告ください。

**保管**

-使用期限はパッケージに記載されています。
**BAPSCARCARE S**シリコングエアシートは未開封状態で5年間使用可能です。
-室温、または25°C以上にならない場所で保管してください。

**本取扱説明書の最新改訂日**
2021年1月

**本取扱説明書の最新改訂日**
2021年1月

# BAPSCARCARE


## silicone therapy for scars

# S

# Scar treatment Thick silicone sheets

# Washable

## Self-adhesive transparent medical silicone sheets

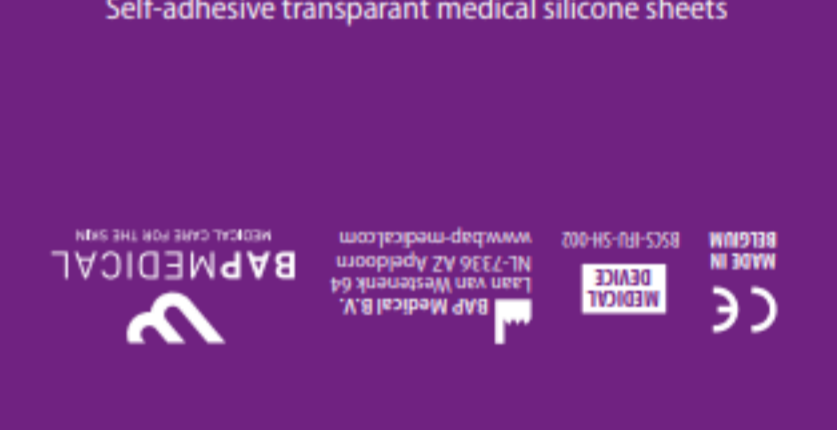

**WWW.BAPSCARCARE.COM**

**BAPSCARCARE S**シリコングエアシートはどのくらい使用し続けてもよいですか？

- 傷あとが治るまでには少なくとも3〜6ヶ月間がかかります。
- 傷あとの盛り上がり、赤み、症状がある間は**BAPSCARCARE S**シリコングエアシートの使用を続けてください。
- この療法の適用期間については治療担当者または医師にご相談ください。

**使用期限**

- BAPSCARCARE S**の各パッケージには一枚または複数枚のシリコングエアシートが入っています。
- 取扱説明書に正しいご使用を継続された場合は、**BAPSCARCARE S**シリコングエアシート1パッケージでおよそ4〜8週間分の手当てができます。
- 治療が長引く場合は、複数パッケージが必要になる場合があります。

**留意点と安全上の注意**

- 粘着性の手の届かない場所に保管してください。
- BAPSCARCARE S**シリコングエアシートは外用薬です。
- BAPSCARCARE S**シリコングエアシートは傷口が閉じた後（かさぶたの取れた後）のみを使用し、開いた傷口には絶対に使用しないでください。
- シリコングエアシートは決して直射日光の下または熱源の近くで乾燥させないでください。
- スプレーや水泳をする際は、**BAPSCARCARE S**シリコングエアシートを一度しっかりと取り外していただき、汗や水との接触によりシリコングエアシートが剥がれる場合があります。
- 患部が過敏になっている場合は使用しないでください。
- 購入時に製品のパッケージが破損している場合は、使用しないでください。

**副作用**

- シリコング療法に対して皮膚が過敏な反応（皮膚炎等）を起こすことが稀にあります。その場合は皮膚の状態が安定するまで手当てを中止してください。
- 炎症が治まったら、皮膚を徐々に**BAPSCARCARE S**シリコングエアシートに慣れさせつつ手当てを再開してください。貼付時間は毎日1時間ずつ延長してください。
- 皮膚の問題が長引く場合は、治療担当者または医師にご相談ください。
- 本製品が原因で重篤な副作用が発生した場合には、製薬元とお客様が居住する地域の医薬品監督局に必ずご報告ください。

**保管**

- 使用期限はパッケージに記載されています。
- BAPSCARCARE S**シリコングエアシートは未開封状態で5年間使用可能です。
- 室温、または25°C以上にならない場所で保管してください。

**本取扱説明書の最新改訂日**
2021年1月

**BAPSCARCARE**