

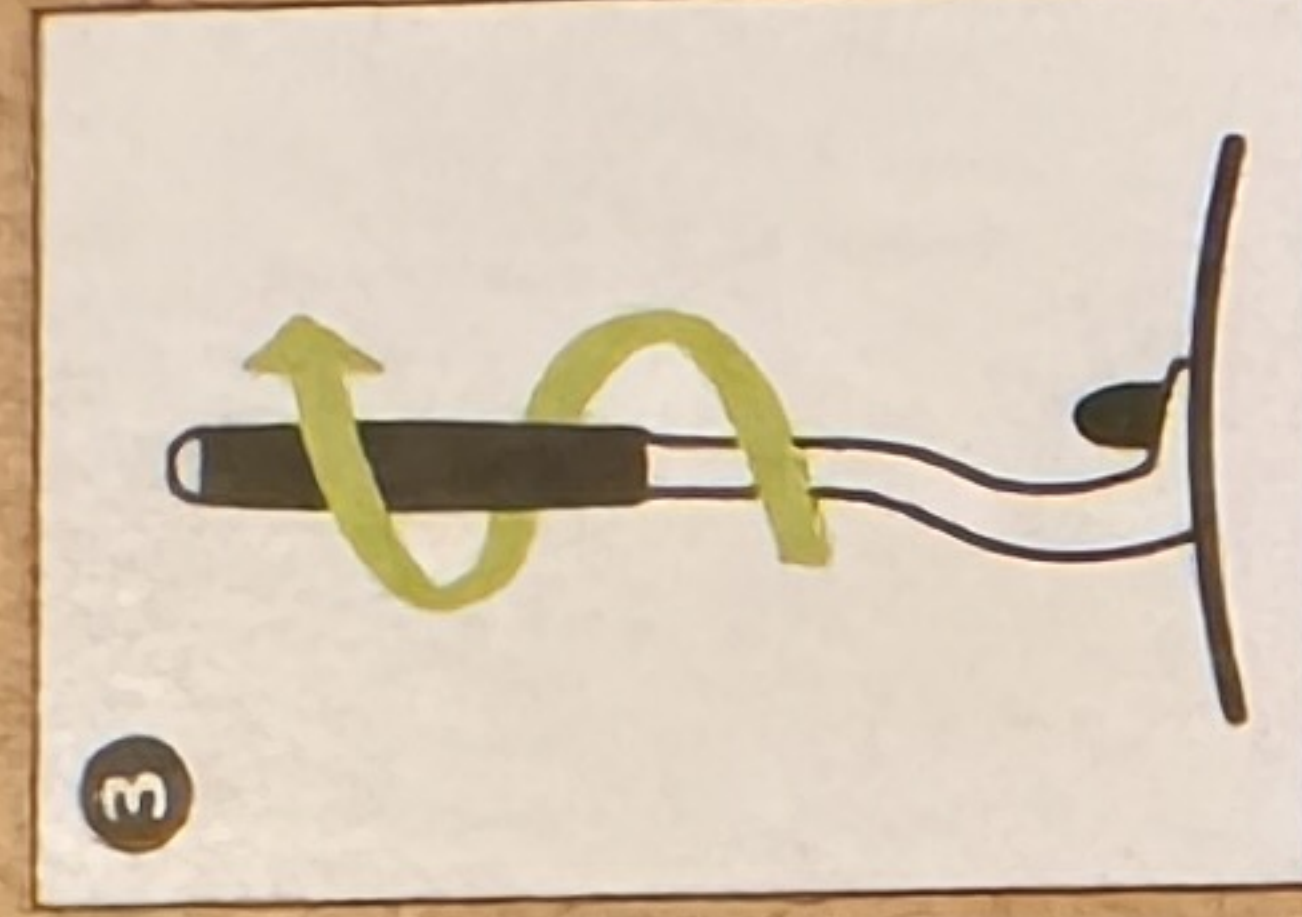


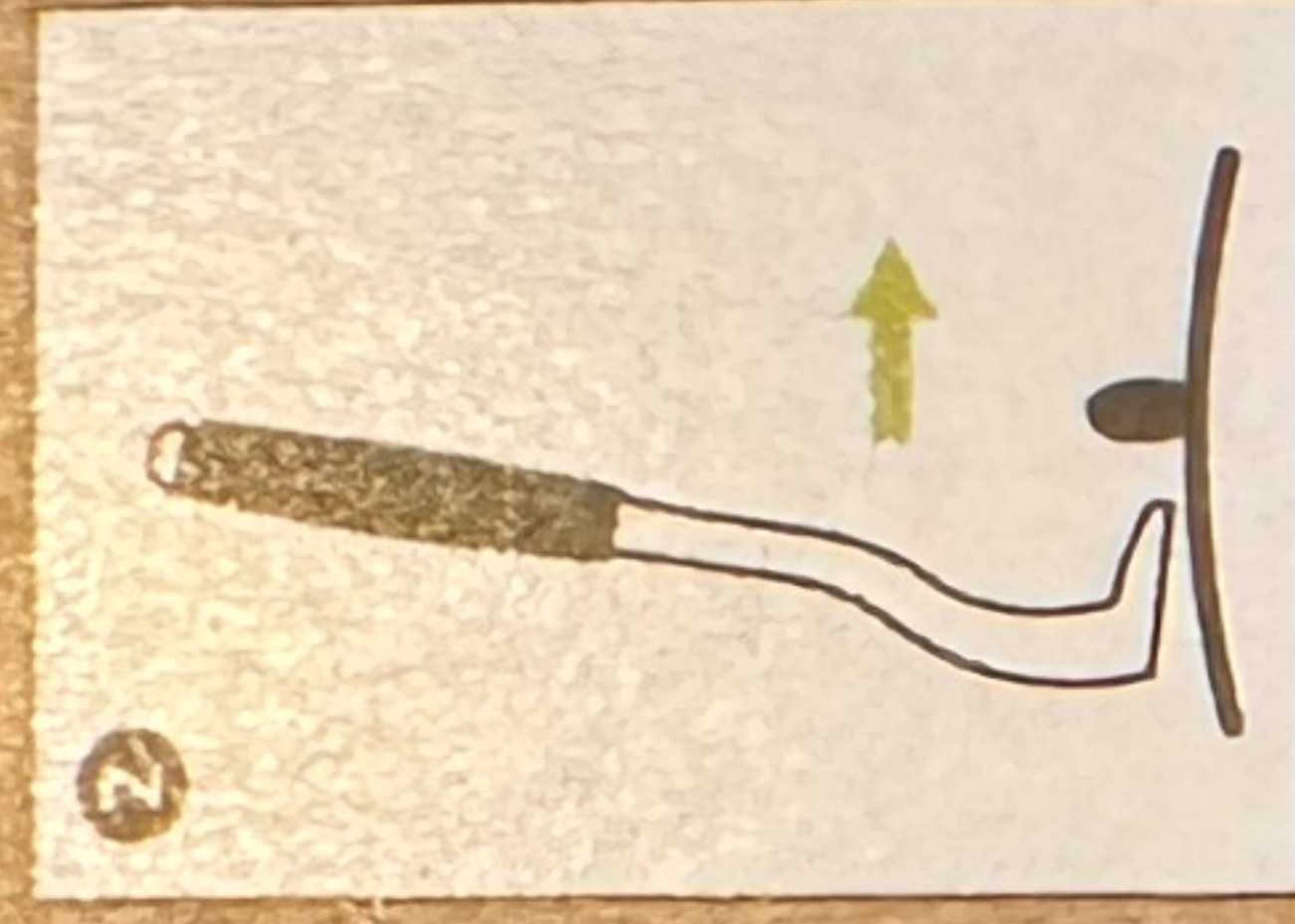

Tick Twister®

by O.TOM®

www.tick-twister.com

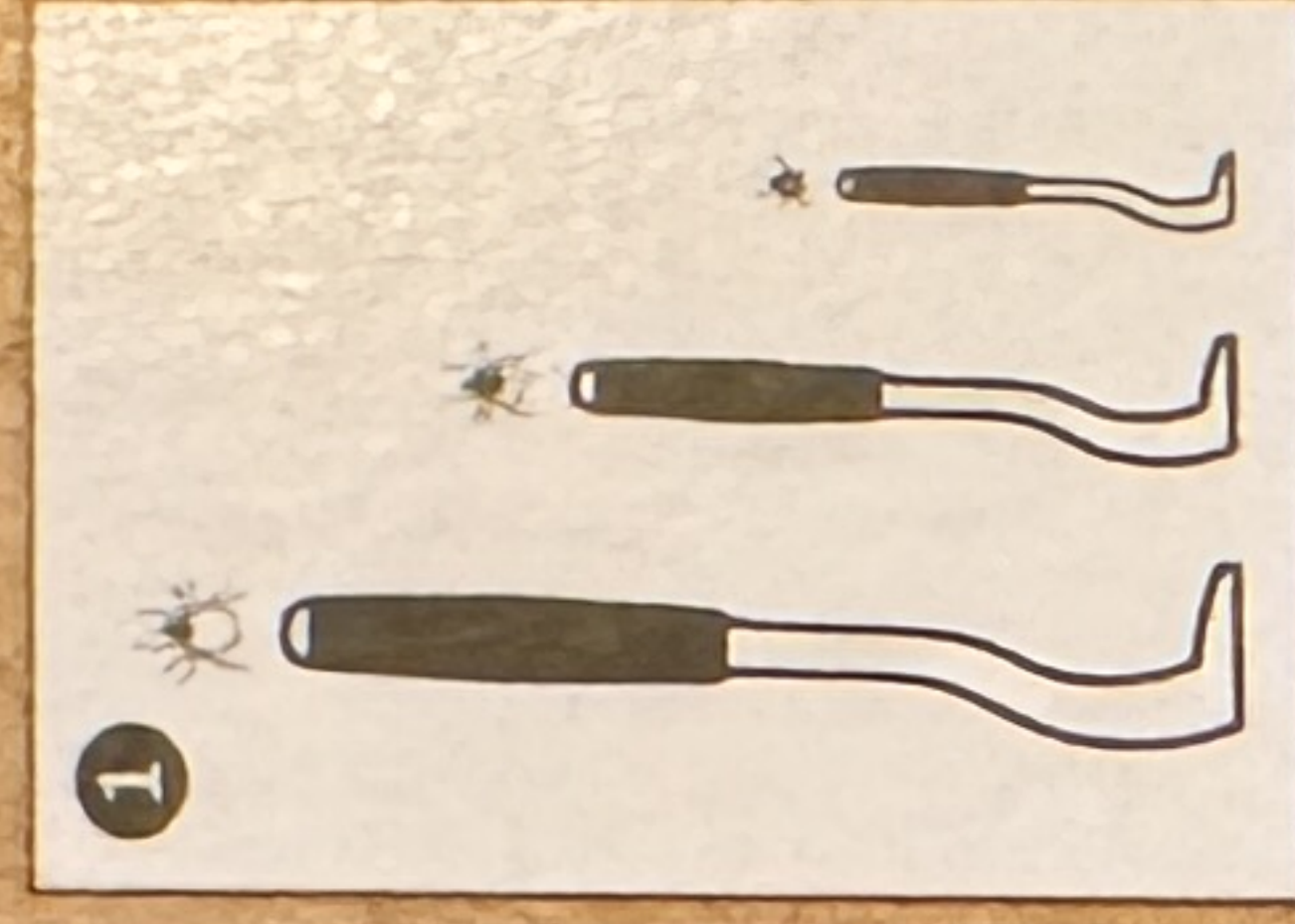

F Tick Twister® permet de retirer toutes les tailles de tiques (même les très petites) rapidement et sans douleur. La tique n'est pas comprimée, ce qui réduit le risque de contamination. **Mode d'emploi** : 1. Choisir le tire-tiques le plus adapté à la taille de la tique. 2. Glisser le tire-tiques sur le côté de la tique et **TOURNER** jusqu'à ce que la tique se détache. 3. Désinfecter la zone de piqûre après le retrait.

GB Tick Twister® removes all sizes of ticks (even very small ones) quickly and painlessly. The tick is not compressed, which reduces the risk of contamination. **Instructions for use** : 1. Choose the most suitable tick remover according to the size of the tick. 2. Slide the tick remover from the side of the tick and **TWIST IT** until the tick comes off. 3. Disinfect the bite area after removal.

D Tick Twister® entfernt Zecken jeder Größe (auch sehr kleine) schnell und schmerzlos. Die Zecke wird nicht zusammengedrückt, was das Infektionsrisiko reduziert. **Anwendungshinweise** : 1. Wählen Sie den am besten geeigneten Zeckenentferner entsprechend der Größe der Zecke. 2. Schieben Sie den Zeckenentferner von der Seite der Zecke und **DREHEN SIE** ihn, bis die Zecke abfällt. 3. Desinfizieren Sie die Bissstelle nach der Entfernung.

NL Tick Twister® verwijderd teken van alle maten (zelfs zeer kleine) snel en pijnloos. De teek wordt niet samengedrukt, wat het risico op besmetting vermindert. **Gebruiksaanwijzing** : 1. Kies de meest geschikte tekenverwijderaar op basis van de grootte van de teek. 2. Schuif de tekenverwijderaar vanaf de zijkant van de teek en **DRAAI HEM** totdat de teek loskomt. 3. Desinfecteer het bijtgebied na verwijdering.

! FR - Si vous ne parvenez pas à retirer la tique dans son intégralité ou si des symptômes inhabituels se manifestent après la piqûre, consultez votre médecin. Ne pas laisser à la portée des enfants de moins de 14 ans.

GB - If you are unable to remove the entire tick or if unusual symptoms occur, consult your doctor. Keep out of the reach of children under 14 years.

D - Wenn es Ihnen nicht gelingt, alle Zecken zu entfernen und ungewöhnliche Symptome auftreten, sofort ein Arzt konsultiert. Für Kinder unter 14 Jahren bitte außerhalb der Reichweite aufbewahren.

NL - Als het niet lukt om de volledige teek te verwijderen of als er ongewone symptomen optreden, raadpleeg dan uw arts. Buiten het bereik van kinderen onder de 14 jaar houden.

i FR - Lire et conserver la notice d'utilisation. Dispositif médical réutilisable. Dispositif destiné exclusivement au retrait des tiques. Usage externe uniquement.

GB - Read and keep the instructions. Reusable medical device intended exclusively for tick removal. External use only.

D - Lesen und bewahren Sie bitte die Anweisungen auf und benutzen Sie wiederverwendbares medizinisches Gerät ausschließlich zur Zeckenentfernung und nur zur äußerlichen Anwendung.

NL - Lees en bewaar de instructies. Herbruikbaar medisch hulpmiddel uitsluitend bedoeld voor het verwijderen van teken. Alleen voor uitwendig gebruik.

H3D - ZA Sous la Combe
01590 LAVANCIA - FRANCE
Tel +33(0)4 74 75 86 72
info@h3dfrance.com

MD REF CLIPBOXETUI3C

LOT 24-001

01/2024



Année de marquage : 2023
Produits conformes
au Règlement 2017/745

