

Shiepz®

Tegen Snurken

MONDBEUGEL

Gebruik


Shiepz Tegen Snurken Mondbeugel is aanbevolen in de volgende gevallen:

- Snurken
- Apneu bij sporadisch gebruik (vb. op reis) met verplichte toelating van een arts.


Weringsprincipe

Shiepz Tegen Snurken Mondbeugel brengt de onderkaak enkele milimeter voorwaarts om de achterkant van de tong weg te houden zodat de lucht terug vrij door de luchtpijp kan stromen. Door dit principe vermindert het snurken en wordt de slaap bevorderd.


Kaak zonder gebruik Tegen Snurken Mondbeugel

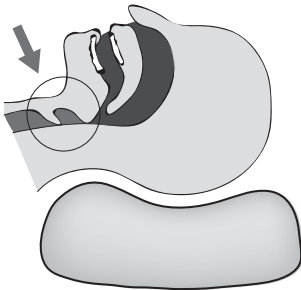

Kaak met gebruik Shiepz Tegen Snurken Mondbeugel

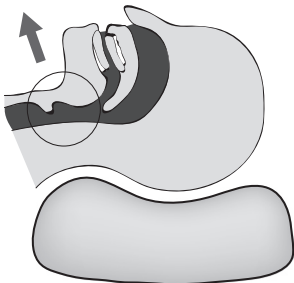

Snurkbeugel op maat afstellen

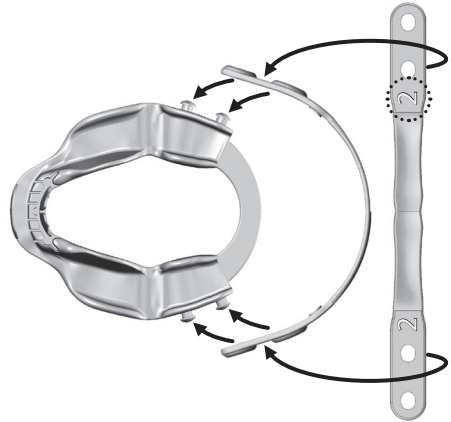


- Maak de beugel gemakkelijk op maat door de meegeleverde bandjes.
- 4 soepele bandjes genummerd met 1, 2, 4 en 6
- Deze nummers geven de afstand aan in mm die de onderkaak voorwaarts wordt gebracht ten opzichte van zijn normale positie zonder beugel.
- Band nummer 1 is de zwakste en band nummer 6 de sterkste.
- Probeer eerst band nummer 2. Verander, indien nodig, het bandje volgens volgende criteria. Indien de tractie op de kaak te sterk is, of de Anti Snurk Beugel niet comfortabel zit of niet blijft zitten, gebruik een lager nummer (bv. 2 i.p.v. 4).
- Indien het snurken niet voldoende vermindert, gebruik een hoger nummer. (bv. 4 i.p.v. 2)

Snurkbeugel in de mond plaatsten


Stap 1

Klap de onderkant en bovenkant van het mondstukje naar elkaar toe.

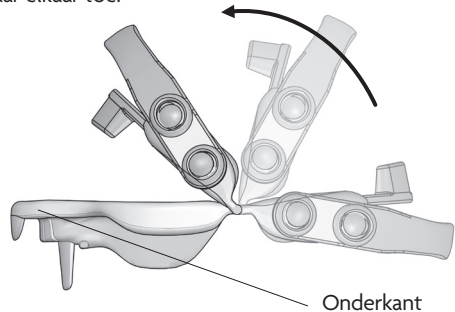

Stap 2

Plaats de beugel in de mond met het bandje bovenaan bevestigd. U kan de geleiders onderaan wegsnijden of inkorten indien ze zouden storen.

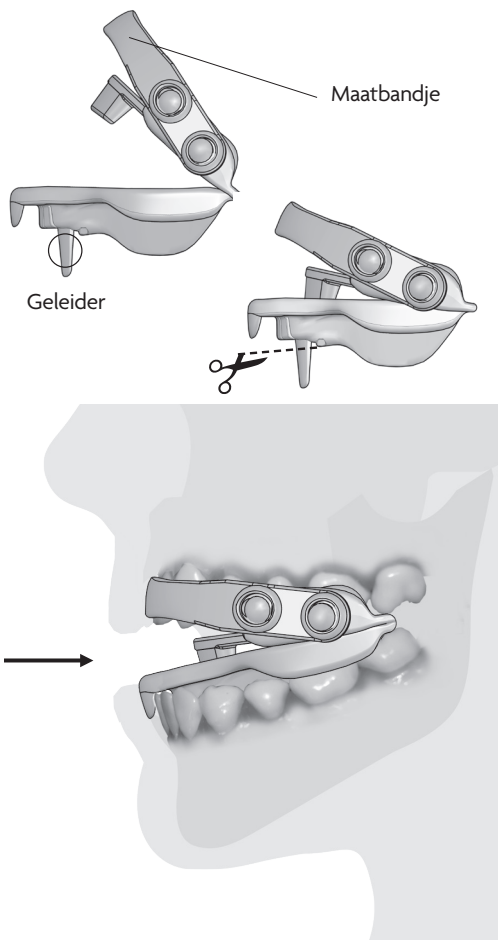

De Shiepz beugel tegen snurken is conform medische- en voedingsnormen, maar kan een bijsmaak hebben de eerste nachten. Hanteer de onderhoudsinstructies goed waardoor eventuele bijsmaak snel minder zal worden.

Shiepz Tegen Snurken Mondbeugel niet gebruiken bij:

- Gebruik van een uitneembare mondprothese dan wel kunstgebit.
 - Pijn in het onderkaakgewricht, onstabiele tanden of minder dan 10 tanden op onder- of bovenkaak.
- Shiepz Tegen Snurken Mondbeugel is een intrabucaal (in de mond) medisch hulpmiddel. Verzorg uw tanden dagelijks en controleer deze regelmatig.

Buiten bereik van kinderen houden.

Mogelijke ongewenste bijwerkingen:

- Gevoelige tanden: verdwijnt normaal gezien na enkele dagen bij regelmatig gebruik
- Gevoeligheid of pijn in het oor: verdwijnt normaal gezien na enkele dagen bij regelmatig gebruik.
- Grotere speekselvorming: vermindert na enkele dagen van regelmatig gebruik
- Droge mond. Het hulpmiddel opent licht de mond. Dit effect verdwijnt na enkele nachten.
- Eventuele braakreflex, komt zelden voor en verdwijnt snel

Indien storende bijwerkingen aanhouden, stop het gebruik. Indien de symptomen aanhouden, vraag medische hulp.

Controle van de tanden, veiligheidsinstructies en belangrijke aanwijzingen. Indien er twijfel is over de gezondheid van uw gebit, raadpleeg uw tandarts.

Bij slaperigheid overdag lijdt u misschien aan slaapapneu. Indien gewenst kan een volledig diagnose opgemaakt worden bij een medisch specialist.

Controleer dagelijks uw tanden en uw kaak en stop onmiddellijk het gebruik van het hulpmiddel in de volgende gevallen:

- Indien de onderkaak niet terug op de normale positie komt bij het wegnemen van de Shiepz Tegen Snurken Mondbeugel.
- Indien u merkt dat uw tanden verschuiven of bewegen
- Indien u tekenen van allergie, irritatie, ongevoeligheid, tintelingen of roodheid vertoont.

In geval van een ernstig incident, contacteer de producent of distributeur

Fabrikant



Oscimed SA

Fritz-Courvoisier 105, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Zwitserland

Distributeur Nederland

EC REP Cooper Consumer Health NL B.V.
Verrijn Stuartweg 60, 1112 AX Diemen, Nederland
www.shiepz.nl

Onderhoud en levensduur

Na het ontwaken de beugel uitnemen, afspoelen en regelmatig borstelen met een tandenborstel. Gebruik geen gewone tandpasta bij het reinigen van de beugel, maar bijvoorbeeld Ecosym Gel dat speciaals is ontwikkeld voor het reinigen van o.a. beugels.

Spoel de beugel 's avonds voor gebruik weer af met water.

Controleer regelmatig de staat van de beugel. Vervang de beugel in geval van scheuren en breuken of bij een aanzienlijke verslechtering van het materiaal. Bescherm de beugel tegen het licht.



Product: Shiepz Tegen Snurken Mondbeugel Leaflet	Versie: 2	Kleuren:  Black
Formaat verpakking: 160 x 210 mm	Datum: 19-06-2025	
Klant: Cooper Consumer Health Nederland	Bijzonderheden: 25.192	NOT FINAL