



Clean Bum Menstrual Cup Sterilizer



Handleiding User Manual Manuel d'instructions

Clean Bum
Akatrade VOF 2518 TN 193, the Netherlands
www.cleanbum.eu www.cleanbum.nl





Handleiding

Dank je voor het vertrouwen in de Clean Bum menstruatiecup sterilisator. Lees de handleiding met instructies voor gebruik.

Veiligheidsvoorschriften:

- Zorg ervoor dat je de deksel sluit wanneer je de sterilisator gebruikt, om brandwonden door kokend water en stoom te voorkomen. Hou kinderen ten alle tijden uit de buurt van het product.
- Om brandwonden te voorkomen, raak de stoomopeningen niet aan tijdens het gebruik.
- Plaats niet-hittebestendige artikelen niet in de sterilisator om schade aan de artikelen te voorkomen.
- Wanneer je het product reinigt, schakel dan de stroom uit.
- Haal na gebruik van de sterilisator de stekker uit het stopcontact en bewaar de Clean Bum sterilisator op een droge plaats.

Product specificaties:


Naam van het product: Clean Bum menstruatiecup sterilisator, model Clean Cup green (MCS2E).

Ingangsvoltage: 220V

Vermogen: 80 W

Waterlijn sterilisatietijd: 8 ~ 10 minuten

Statusindicator actief: licht.

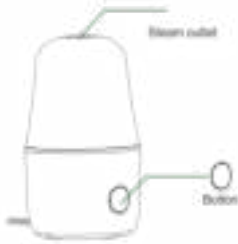

Eigenschappen:

- Dit product is speciaal ontworpen voor menstruatiecups van siliconen, rubber of TPE.
- Grote watercapaciteit, langdurige desinfectie op hoge temperatuur, smelten en reinigen van alle soorten vuil, waardoor bacteriën tot 99,5% effectief worden gedood.
- Milieuvriendelijk vervaardigd uit Polypropyleen, bestand tegen hoge temperaturen, corrosiebestendig, dubbel geïsoleerd ontwerp om brandwonden te voorkomen.
- Ingebouwde zekering. De verwarmingsplaat is gecoat met Teflon, wat extreem duurzaam is.
- Bediening met één knop, ontworpen tegen droge verbranding, warmtebehoud.
- Stijlvol en mooi uiterlijk, handig voor op reis. Een musthave voor vrouwen.

Gebruik:




1

Vul het kleine rondje met water.



2

Plaats de menstruatiecup in de Clean Bum en sluit de bovenklep.

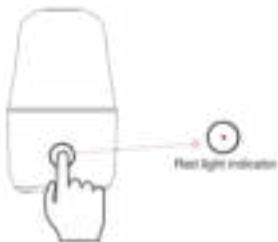

3

Steek de stekker van de Clean Bum in het stopcontact. Druk op de aan/uit-knop. Het indicatielampje gaat branden om aan te geven dat de machine begint te werken.



4

De sterilisatietijd is ongeveer 8 minuten. Vanwege de anti-droogkookfunctie zal de stroom automatisch worden uitgeschakeld wanneer het water is verdampt.

5



Laat de Clean Bum sterilisator afkoelen en gebruik vervolgens de menstruatiecup.

6



Belangrijk: verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer de desinfectie is voltooid.

Tips

- De sterilisator dient niet ter vervanging van de basisreiniging van je cup. Was en reinig je cup altijd na gebruik.
- De menstruatiecup kan in de sterilisator worden geplaatst en op een droge plaats worden bewaard.

Service

Neem voor problemen met de productkwaliteit veroorzaakt door niet-menselijke factoren binnen een jaar na datum van aankoop contact op met de verkoper. Zorg voor een beschrijving en, indien mogelijk, een afbeelding van de situatie.

Geen garantie bij

1. Onjuist gebruik en door de mens veroorzaakte schade.
2. Het niet kunnen tonen van een aankoopbewijs.

Schoonmaken en ontkalken

Net als bij een waterkoker kan er na verloop van tijd wat kalkaanslag achterblijven. Bij het koken of verwarmen van kraanwater ontstaat er kalkaanslag. Dit is niet gevaarlijk voor de gezondheid.

Vul de Clean Bum met een mengsel van water en azijn
Zet de sterilisator aan en laat het geheel koken voor 8 minuten. Herhaal indien nodig. Herhaal het proces met kraanwater. Maak de sterilisator droog.

Heb je vragen? Neem contact op via info@cleanbum.nl



User Manual

Thank you for purchasing the Clean Bum menstrual cup sterilizer. Please read the instruction manual for further reference before using the machine for the first time.

Safety precautions:

- To avoid burns on the body caused by boiling water and steam, make sure to close the lid when using the sterilizer, children should stay away from the product.
- Do not approach the steam vents when it is functioning to avoid burns.
- Please don't place the non heat-resistant items in the menstrual cup sterilizer to prevent damage to the items.
- When cleaning the product, please cut off the power, wipe with a clean soft cloth or alcohol, and avoid using organic solvents such as gasoline.
- Non-professionals do not disassemble or repair the product, in case of causing damage to the product.
- After using the sterilizer, unplug the power cord and store it in a dry place.

Product specifications:


Product Name: Clean Bum Menstrual Cup Sterilizer, model Clean Cup green (MCS2E)

Input: 220V

Rated power: 80W

Water line sterilization time: 8~10 minutes

Power indicator working status: light.

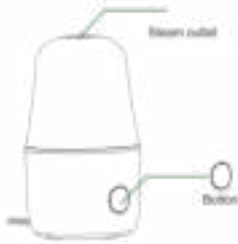

Features:

- This product is specially designed for menstrual cups made of silicone, rubber or TPE.
- Large water capacity, long-term high-temperature disinfection, melting and cleaning all kinds of dirt, effectively killing bacteria up to 99.5%.
- Environmentally friendly material Polypropylene (PP), high temperature resistant, corrosion resistant, double insulated design to avoid burns.
- Built-in fuse to guarantee electric safety. Heating sheet is coated with Teflon, which is durable.
- One-button operation, antiburn material.
- Stylish and beautiful appearance, convenient for travel. Musthave for woman.

How to use:




1

Fill up the small circle with water until the top.



2

Put the menstrual cup into the disinfection chamber and close the top cover.

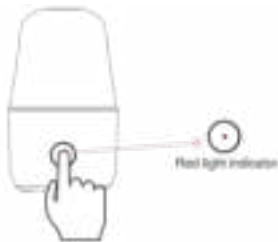

3

Plug the power cord of the Clean Bum into the outlet. Press the power button, the indicator light lights up, indicating that the machine start working.



4

The sterilization time will be about 8~10 minutes. There is anti-dry function, the power will be automatically cut off when the water is dried.



5

Let it cool before take out and use the menstrual cup.

6



Important: please unplug the power cord when the disinfection is finished.

Tips

- Before disinfecting the menstrual cup, wash the menstrual cup and clean the sterilizer.
- The menstrual cup can be placed in the sterilizer and stored in a dry place.

Service

For product quality problems caused by non-human factors within one year from the date of purchase, please contact the dealer for complete machine replacement. Please provide a description or picture when the quality issues involved.

Non-warranty

- Incorrect use and human-induced damage.
- Cannot provide proof of purchase.

Decalcifying

After a while, limescale can be build up in the sterilizer. This is not dangerous to human health.

- Fill the Clean Bum with a mixture of water and vinegar.
- Turn on the sterilizer and let it boil for 8 minutes. Repeat if necessary.
- Repeat the process with clean water.
- Dry the sterilizer.

Questions? Contact us through info@cleanbum.nl



Manuel d'instructions

Merci d'avoir acheté le Clean Bum stérilisateur de coupe menstruelle. Veuillez lire le manuel d'instructions pour plus de références avant d'utiliser la machine pour la première fois.

Précautions d'emploi:

- Pour éviter les brûlures sur le corps causées par l'eau bouillante et la vapeur, assurez-vous de fermer le couvercle lors de l'utilisation du stérilisateur. Les enfants doivent rester à l'écart du produit.
- Ne vous approchez pas des événements de vapeur lorsqu'ils fonctionnent pour éviter les brûlures.
- Ne pas placer pas les articles non résistants à la chaleur dans le stérilisateur pour éviter de les endommager.
- Lorsque vous nettoyez le produit, coupez l'alimentation, essuyez-le avec un chiffon doux et propre ou de l'alcool, et évitez d'utiliser des solvants organiques tels que l'essence.
- Les non-professionnels ne doivent pas démonter ou réparer le produit, au risque de l'endommager.
- Après avoir utilisé le stérilisateur, débranchez le cordon d'alimentation et rangez-le dans un endroit sec.

Spécifications du produit:


Nom du produit: Clean Bum Stérilisateur de Coupe Menstruelle, Clean Cup green (MCS2E)

Entrée: 220 V

Puissance nominale : 80W

Temps de stérilisation de la conduite d'eau : 8 à 10 minutes

Voyant d'alimentation: rouge.

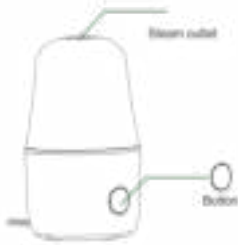

Caractéristiques du produit:

- Ce produit est spécialement conçu pour la désinfection des coupes menstruelles et est compatible avec tous les types et tailles de coupes menstruelles du marché.
- Grande capacité d'eau, désinfection à haute température à long terme, fusion et nettoyage de toutes sortes de saletés, tuant efficacement les bactéries jusqu'à 99,5 %.
- Matériau PP respectueux de l'environnement, résistant aux hautes températures et à la corrosion, conception à double isolation pour éviter les brûlures.
- Fusible intégré pour garantir la sécurité électrique. La feuille chauffante est recouverte de téflon, à la fois durable et esthétique.
- Fonctionnement à un bouton, conception anti-brûlure, conservation de la chaleur.
- Apparence élégance et pratique pour les voyages.

Comment utiliser:




1

Remplissez le petit cercle avec de l'eau jusqu' en haut.



2

Placez la coupe menstruelle dans la chambre de désinfection et fermez le couvercle supérieur.

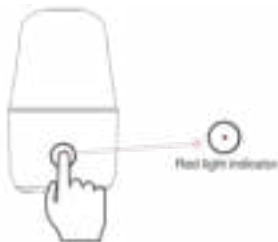

3

Branchez le cordon d'alimentation dans la prise. Appuyez sur le bouton d'alimentation, le voyant s'allume, indiquant que la machine commence à fonctionner.



4

Utilisez le repère de niveau d'eau recommandé, le temps de stérilisation sera d'environ 8 à 10 minutes. Il existe une fonction anti-séchage, l'alimentation sera automatiquement.

5



Laissez-le refroidir avant de sortir et d'utiliser la coupe menstruelle.

6



Veuillez débrancher le cordon d'alimentation lorsque la désinfection est terminée.

Remarques

- Avant de désinfecter la coupe menstruelle, nettoyez la coupe menstruelle et le stérilisateur.
- La coupe menstruelle peut être placée dans le stérilisateur et conservée dans un endroit sec.

Service

Pour les problèmes de qualité du produit causés par des facteurs non humains dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, veuillez contacter le revendeur pour un remplacement complet de la machine. Veuillez fournir une description ou une image lorsque les problèmes de qualité sont impliqués.

Non-garantie

- Utilisation par inadvertance, fonctionnement incorrect et dommages causés par l'homme.
- Impossibilité de fournir une preuve d'achat.

Détartrage:

- Remplir le stérilisateur Clean Bum d'un mélange d'eau et de vinaigre, de sorte que toute la chaux se trouve sous le mélange.
- Allumez le Clean Bum et laissez-le bouillir pendant 8 minutes. Si nécessaire, répétez les étapes.
- Répétez le processus avec de l'eau propre.