



**VULPES GOODS**

BABYCARE

MANUAL

<b>ENGLISH</b>	<b>3</b>
The Device	4
User guide	7
Characteristics and Application	8
Product Parameters	11
<b>DEUTSCH</b>	<b>12</b>
Das Gerät	13
Benutzerhandbuc	16
Eigenschaften und Anwendung	17
Produkt parameter	20
<b>NEDERLANDS</b>	<b>21</b>
Het apparaat	22
Gebruiksaanwijzing	25
Kenmerk en toepassing	26
Product Parameters	29
<b>FRANCAIS</b>	<b>30</b>
Le dispositif	31
Manuel de l'utilisateur	34
Caractéristiques et applications	35
Paramètres du produit	38



**VULPES GOODS**

BABYCARE

**ENGLISH**

# THE DEVICE

Suction head  
Collection cup

Led Screen  
On/Off button  
Gear button  
Light button  
Music button



Suction heads



Tweezers



charging cable

## **Suction head**

You can use the 3 different attachments for different blockages. For example, deep mucus, shallow mucus and hard pieces.

## **Collection cup**

The collection tray collects all residues. Clean the collection tray on time. The nasal cleaner will not work without a collection tray.

## **Led screen**

Use the LED screen to read the mode and battery status.

## **On/Off button**

Press once to turn the electric nasal aspirator on, then press again to turn it off.

## **Gear button**

Pressing the button selects one of the five available suction levels. Each click increases the suction power. After suction level 5, the suction level goes back to 1.

## **Light button**

Press the light button once to turn on the light and illuminate the nasal cavity. Press again to turn it off.

## **Music button**

If you press the music button, 3 different songs can be played. Each time you press the button, the song changes. After the third song, it will go back to mute.

## **Tweezers**

Tweezers for extra cleaning of your product.

## **Charging cable**

Use the charging cable to charge the product when needed. Only use the right adapter when charging.

## **USER GUIDE**

Before using the nasal cleaner for the first time, it is important to make sure the cleaner is fully charged for optimal performance.

1. Place the collection cup on the nasal cleaner and choose the appropriate attachment
2. Press the power button to activate the nasal cleaner and choose the desired suction strength.
3. For an optimal experience, you can use the music button and choose from 3 different children's songs.
4. For an even better experience, you can also use the light button. This is also possible while using the music button.
5. After using the nasal cleaner, clean the used attachments and collection cup with lukewarm water.

## **CHARACTERISTICS AND APPLICATION**

- Do not expose this product to high temperature, high humidity or direct sunlight for a long time.
- Prevent the occurrence of intense pressure collisions or accidental drops of this product.
- This product is only suitable for absorbing nasal secretions. Do not use it for improper use, such as absorbing water or skin.
- When the suction is significantly reduced or the motor sound is significantly reduced, please charge it in time.
- When using this product, make sure the user does not hold their breath or swallow saliva. Keep the mouth open to avoid pressure differences in the ear.
- In Case of any pain or discomfort during use. Stop immediately, and seek medical attention!





- Avoid inserting the suction head into the nasal cavity with excessive pressure.
- Clean the suction head before each use and keep it clean.
- Adults must adhere to the operating instructions when using it, and it is prohibited for children to operate it independently. Ensure the product is stored in a location inaccessible to children.
- Not possible to put your own music on the product.
- Do not put product in dishwasher and do not submerge in water or liquid.

- Some weak slime can flow back (If you are able to clear the suction port of the main engine using a cotton swab).



- Utilize this product in the correct posture/method to prevent liquid from being drawn into the main device.

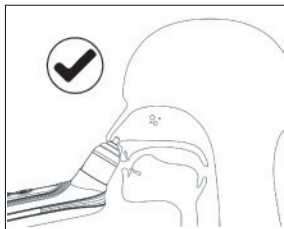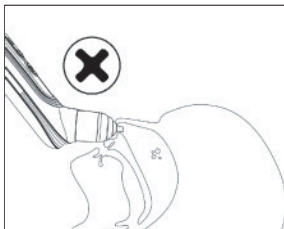

## **PRODUCT PARAMETERS**

Productname:	Electric nasal aspirator PRO
Model:	VG-UB-007
Battery:	450MA
Rated input voltage:	5V
Rated input power:	5W-1A



**VULPES GOODS**

BABYCARE

**DEUTSCH**

# DAS GERÄT

Anlage

Sammelbecher

Led-Schirm

Einschalttaste

Schaltknopf

Licht-Taste

Taste Musik



Anhänge



Pinzette



Ladekabel

## **Anlage**

Sie können die 3 verschiedenen Aufsätze für unterschiedliche Verstopfungen verwenden. Zum Beispiel für tiefen Schleim, flachen Schleim und harte Stücke.

## **Sammelbecher**

Die Auffangschale fängt alle Rückstände auf. Reinigen Sie die Auffangschale rechtzeitig. Der Nasenreiniger funktioniert nicht ohne Auffangschale.

## **Led-Schirm**

Auf der Led-Schirm können Sie die Saugstärke und den Batteriestatus ablesen.

## **Einschalttaste**

Drücken Sie einmal, um den elektrischen Nasenreiniger einzuschalten und drücken Sie erneut, um ihn auszuschalten.

## **Schaltknopf**

Durch Drücken der Taste wird eine der fünf verfügbaren Saugstufen ausgewählt. Jeder Klick erhöht die Saugleistung.

## **Licht-Taste**

Drücken Sie die Lichttaste einmal, um das Licht einzuschalten. Drücken Sie erneut, um es auszuschalten.

## **Taste Musik**

Durch Drücken der Musiktaste können 3 verschiedene Titel abgespielt werden. Jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken, wechselt der Titel. Nach dem dritten Lied wird der Ton wieder stummgeschaltet.

## **Pinzette**

Verwenden Sie die Pinzette, um Ihr Produkt besonders sauber zu machen.

## **Ladekabel**

Verwenden Sie das Ladekabel, um das Produkt bei Bedarf aufzuladen. Verwenden Sie zum Aufladen nur den richtigen Adapter.

# BENUTZERHANDBUC

Bevor Sie den Nasenreiniger zum ersten Mal benutzen, sollten Sie sicherstellen, dass er vollständig aufgeladen ist, um eine optimale Leistung zu erzielen.

1. Setzen Sie den Auffangbehälter auf den Nasenreiniger und wählen Sie den richtigen Aufsatz.
2. Drücken Sie die Einschalttaste, um den Nasensauger zu aktivieren, und wählen Sie die gewünschte Saugstärke.
3. Für ein optimales Erlebnis können Sie die Musiktaste verwenden und aus 3 verschiedenen Kinderliedern wählen.
4. Für ein noch besseres Erlebnis können Sie auch die Lichttaste verwenden. Dies ist auch bei Verwendung der Musiktaste möglich.
5. Reinigen Sie nach der Verwendung des Nasenreinigers die verwendeten Aufsätze und den Auffangbehälter mit lauwarmem Wasser.



## **EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNG**



- Setzen Sie das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Vermeiden Sie Zusammenstöße mit hohem Druck oder versehentliches Fallenlassen dieses Produkts.
- Dieses Produkt ist nur für die Absorption von Nasensekreten geeignet. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke, z. B. zum Aufsaugen von Wasser oder Haut.
- Wenn die Saugleistung stark nachlässt oder das Motorgeräusch stark abnimmt, laden Sie es rechtzeitig auf.
- Achten Sie bei der Verwendung dieses Produkts darauf, dass der Benutzer nicht den Atem anhält oder Speichel schluckt. Halten Sie den Mund offen, um Druckunterschiede im Ohr zu vermeiden.

- Bei Schmerzen während der Anwendung. Sofort aufhören und einen Arzt aufsuchen!
- Führen Sie den Saugkopf nicht mit zu viel Druck in die Nasenhöhle ein.
- Reinigen Sie den Saugkopf vor jedem Gebrauch und halten Sie ihn sauber.
- Erwachsene müssen bei der Benutzung des Produkts die Gebrauchsanweisung beachten, und Kindern ist es untersagt, das Produkt selbstständig zu bedienen. Stellen Sie sicher, dass das Produkt an einem für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahrt wird.
- Es ist nicht möglich, Ihre eigene Musik auf das Produkt zu legen.
- Geben Sie das Produkt nicht in die Spülmaschine und tauchen Sie es nicht in Wasser oder Flüssigkeiten.

Etwas schwacher Schleim kann zurückfließen (wenn Sie den Kopfmotoraufsatz mit einem Wattestäbchen reinigen können)



Benutzen Sie dieses Produkt in der richtigen Haltung/Methode, um zu verhindern, dass Flüssigkeit in die Kopfeinheit gesaugt wird.

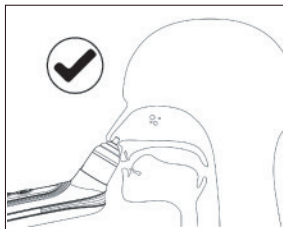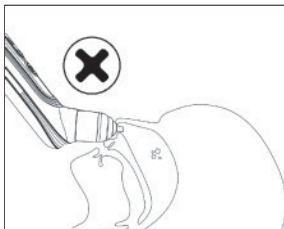

## PRODUKT PARAMETER

Produktname:	Elektrischer Neureiniger PRO
Modell:	VG-UB-007
Batterie:	450mAh
Nenneingangsspannung:	5V
Nenneingangsleistung	5W-1A



**VULPES GOODS**

BABYCARE

**NEDERLANDS**

# HET APPARAAT

Opzetstuk  
Opvang cup

Led Scherm  
Aan/uit-knop  
Versnellingsknop  
Lichtknop  
Muzieknop



Opzetstukken



Pincet



Oplaadkabel

## **Opzetstuk**

Je kunt de 3 verschillende opzetstukken gebruiken voor verschillende verstoppingen. Bijvoorbeeld diep slijm, ondiep slijm en harde stukjes.

## **Opvang cup**

De opvangbak vangt alle resten op. Reinig de opvangbak op tijd. De neusreiniger werkt niet zonder opvangbak.

## **Led scherm**

Gebruik het LED-scherm om de zuigsterkte en batterijstatus af te lezen.

## **Aan/uit-knop**

Druk één keer om de elektrische neusreiniger aan te zetten en druk nogmaals om hem uit te zetten.

## **Versnellingsknop**

Door op de knop te drukken selecteer je een van de vijf beschikbare zuigniveaus. Elke klik verhoogt de zuigkracht.

## **Lichtknop**

Druk één keer op de lichtknop om het licht aan te zetten. Druk nogmaals om het uit te schakelen.

## **Muziekknop**

Als je op de muziekknop drukt, kunnen er 3 verschillende nummers worden afgespeeld. Elke keer dat je op de knop drukt, verandert het nummer. Na het derde nummer wordt het geluid weer gedempt.

## **Pincet**

Gebruik de pincet om je product extra schoon te maken.

## **Oplaadkabel**

Gebruik de oplaadkabel om het product op te laden wanneer dat nodig is. Gebruik alleen de juiste adapter bij het opladen.



# GEBRUIKAANWIJZING

Voor het eerste gebruik van de neusreiniger is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de reiniger volledig is opgeladen voor optimale prestaties.

1. Plaats de opvangcup op de neusreiniger en kies het juiste opzetstuk.
2. Druk op de aanknop om de neusreiniger te activeren en kies de gewenste zuigkrachtsterkte.
3. Voor een optimale ervaring kun je gebruikmaken van de muzieknop en kiezen uit 3 verschillende kinderliedjes.
4. Voor een nog betere ervaring kun je ook de lichtknop gebruiken. Dit is ook mogelijk tijdens het gebruik van de muzieknop.
5. Na het gebruik van de neusreiniger dien je de gebruikte opzetstukken en opvangcup schoon te maken met lauw water.

## **KENMERKEN EN TOEPASSING**



- Stel dit product niet langdurig bloot aan hoge temperaturen, hoge vochtigheid of direct zonlicht.
- Voorkom botsingen onder hoge druk of het per ongeluk laten vallen van dit product.
- Dit product is **alleen** geschikt voor het absorberen van neussecreties. Gebruik het niet voor ander gebruik, zoals het absorberen van water of huid.
- Als de zuigkracht sterk verminderd is of het motorgeluid sterk verminderd is, laad het dan op tijd op.
- Let er bij het gebruik van dit product op dat de gebruiker zijn adem niet inhoudt en geen speeksel inslikt. Houd de mond open om drukverschillen in het oor te voorkomen.
- Bij pijn of ongemak tijdens gebruik. Stop onmiddellijk en zoek medische hulp!

- Steek de afzuigkop niet met te veel druk in de neusholte.
- Reinig de zuigkop voor elk gebruik en houd hem schoon.
- Volwassenen moeten zich houden aan de handleiding wanneer ze het product gebruiken en het is verboden voor kinderen om het product zelfstandig te bedienen. Zorg ervoor dat het product wordt opgeborgen op een plaats die ontoegankelijk is voor kinderen.
- Het is niet mogelijk om je eigen muziek op het product te zetten.
- Plaats het product niet in de vaatwasser en dompel het niet onder in water of vloeistof.

Er kan wat zwak slijm terugstromen (als je het opzetstuk van de hoofdmotor kunt schoonmaken met een wattenstaafje)



Gebruik dit product in de juiste houding/methode om te voorkomen dat er vloeistof in het hoofdapparaat wordt gezogen.

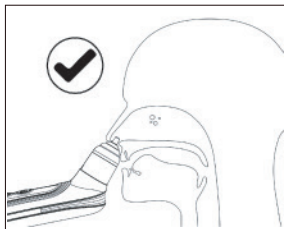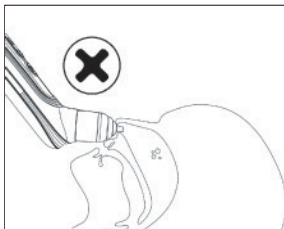

## PRODUCT PARAMETERS

Productnaam:	Elektrische Neusreiniger PRO
Model:	VG-UB-007
Batterij:	450mAh
Nominale ingangsspanning:	5V
Nominaal ingangsvermogen	5W-1A



**VULPES GOODS**

BABYCARE

**FRANCAIS**

## Le dispositif

Pièce jointe

Gobelet de collecte

Écran LED

Bouton d'alimentation

Bouton de vitesse

Bouton d'éclairage

Bouton Musique



Pièces jointes



Pince à épiler



Câble de chargement

## **Pièce jointe**

Vous pouvez utiliser les 3 différents accessoires pour différents types de blocages. Par exemple, les mucosités profondes, les mucosités peu profondes et les morceaux durs.

## **Gobelet de collecte**

Le bac de collecte recueille tous les résidus. Nettoyez le plateau de collecte à temps. L'appareil de nettoyage nasal ne fonctionne pas sans bac de récupération.

## **Écran LED**

L'affichage LED permet de connaître la puissance d'aspiration et l'état de la batterie.

## **Bouton d'alimentation**

Appuyez une fois pour mettre en marche le nettoyeur nasal électrique et appuyez à nouveau pour l'éteindre.

## **Bouton de vitesse**

Une pression sur le bouton permet de sélectionner l'un des cinq niveaux d'aspiration disponibles. Chaque clic augmente la puissance d'aspiration.



## **Bouton d'éclairage**

Appuyez une fois sur le bouton d'éclairage pour allumer la lumière. Appuyez à nouveau pour l'éteindre.

## **Bouton Musique**

Une pression sur la touche musique permet de jouer 3 chansons différentes. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la chanson change. Après la troisième chanson, le son est à nouveau coupé.

## **Pince à épiler**

Utilisez la pince à épiler pour rendre votre produit encore plus propre.

## **Câble de chargement**

Utilisez le câble de chargement pour recharger le produit en cas de besoin. N'utilisez que l'adaptateur approprié lors de la rechargement.

# MANUEL DE L'UTILISATEUR

Avant d'utiliser le nettoyeur nasal pour la première fois, il est important de s'assurer que le nettoyeur est complètement chargé.

1. Placez la coupelle de prélèvement sur l'appareil de nettoyage nasal et choisissez l'embout approprié.
2. Appuyez sur le bouton de mise en marche pour activer le nettoyeur nasal et choisissez la force d'aspiration souhaitée.
3. Pour une expérience optimale, vous pouvez utiliser le bouton de musique et choisir parmi 3 chansons pour enfants.
4. Pour une expérience encore meilleure, vous pouvez également utiliser le bouton d'éclairage. Cela est également possible en utilisant la touche musique.
5. Après avoir utilisé le nettoyeur nasal, nettoyez les embouts usagés et le gobelet collecteur à l'eau tiède.

## **CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS**



- Ne pas exposer ce produit à des températures élevées, à une forte humidité ou à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- Évitez les collisions à haute pression ou la chute accidentelle de ce produit.
- Ce produit convient uniquement à l'absorption des sécrétions nasales. Ne l'utilisez pas pour d'autres usages, tels que l'absorption d'eau ou de peau.
- Si la puissance d'aspiration est fortement réduite ou si le bruit du moteur est fortement réduit, rechargez-le à temps.
- Lors de l'utilisation de ce produit, veillez à ce que l'utilisateur ne retienne pas sa respiration et n'avale pas de salive. Gardez la bouche ouverte pour éviter les différences de pression dans l'oreille.

- En cas de douleur ou d'inconfort pendant l'utilisation. Arrêtez immédiatement et consultez un médecin !
- N'insérez pas la tête d'aspiration dans la cavité nasale en exerçant une pression trop forte.
- Nettoyez la tête d'aspiration avant chaque utilisation et maintenez-la propre.
- Les adultes doivent se conformer au manuel lorsqu'ils utilisent le produit et les enfants n'ont pas le droit d'utiliser le produit de manière autonome. Veillez à ce que le produit soit stocké dans un endroit inaccessible aux enfants..
- Il n'est pas possible de mettre sa propre musique sur le produit.
- Ne mettez pas le produit au lave-vaisselle et ne l'immergez pas dans l'eau ou dans un liquide.

Un peu de mucus faible peut refluer (si vous pouvez nettoyer l'embout du moteur de la tête avec un coton-tige).



Utilisez ce produit dans une position/méthode correcte afin d'éviter que du liquide ne soit aspiré dans l'unité principale.

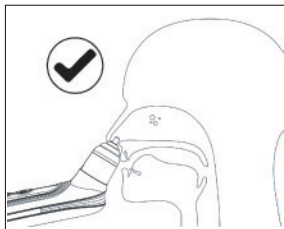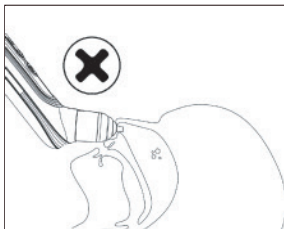

## PARAMÈTRES DU PRODUIT

Nom du produit :	Nettoyeur électrique PRO
Modèle :	VG-UB-007
Batterie :	450mAh
Tension d'entrée nominale :	5V
Puissance d'entrée nominale	5W-1A