



MOPEDIA®

BASSI DEAMBULATORI

HANDLEIDING

1. CODICI.....	Pagina 3
2. INLEIDING.....	Pagina 3
3. BEOOGD GEBRUIK	Pagina 3
4. EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING	Pagina 4
5. ALGEMENE WAARSCHUWINGEN.....	Pagina 4
6. GEBRUIKTE SYMBOLEN	4
7. ALGEMENE BESCHRIJVING.....	Pagina .5
7.1 Hoogteverstelling.....	Pagina 5
8. VÓÓR ELK GEBRUIK	Pagina 5
9. WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIK	Pagina 5
10. RP729X MONTAGE-INSTRUCTIES.....	Pagina 5
11. GEBRUIKSMODALITEIT.....	Bladzijde
12. ONDERHOUD.....	Pagina 7
13. REINIGING EN DESINFECTIE.....	Pagina 7
13.1 Politie	Pag. 7
13.2 Desinfectie.....	Pagina 7
14. VOORWAARDEN VOOR VERWIJDERING	Pagina 8
15. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.....	Pagina 8
15.1 Reserveonderdelen en accessoires.....	Pagina 10
16. GARANTIE.....	Pagina 10
17. REPARATIES.....	Pagina 11
17.1 Reparaties onder garantie	Pagina 11
17.2 Reparatie van een product dat niet onder de garantie valt	Pagina 11
17.3 Niet-defecte producten.....	Pagina 11
18. RICAMBI.....	Pag.11
19. VRIJSTELLINGSCLAUSULEN	Pagina 11

CE Klasse I medisch hulpmiddel

Wetsdecreet 24/02/97 n.46 implementatie van EEG-richtlijn 93/42 en daaropvolgende wijzigingen

1. CODES

Deambulators met vier punten

RP729S-ML Vast in hoogte verstelbare rollator **RP730S-ML** Inklapbare rollator met 1 knop - in hoogte verstelbaar **RP731** Verstelbare inklapbare rollator voor kinderen **RP747** Inklapbare rollator met dubbele steun in hoogte verstelbaar **RP749M-L** Inklapbare vaste/oscillerende rollator met dubbele functie - in hoogte verstelbaar

Walkers met twee wielen en twee tips

RP734 In hoogte verstelbare opvouwbare rollator met 2 zwenkwielen
RP735S-ML In hoogte verstelbare opvouwbare rollator met 2 vaste wielen
RP736 In hoogte verstelbare kinderrollator met wielen
RP737 In hoogte verstelbare opvouwbare rollator met 2 tips en zelfvergrendelend systeem
RP744 In hoogte verstelbare opvouwbare rollator met 2 zwenkwielen
RP745 In hoogte verstelbare opvouwbare rollator met 2 vaste wielen

Vierwielige wandelaars

RP733S-ML Inklapbare rollator met verstelbare hoogte en zwenkwielen
RP738 In hoogte verstelbare opvouwbare rollator met 2 wielen en zelfvergrendelend systeem
RP741 In hoogte verstelbare opvouwbare rollator, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem
RP748 Afneembare rollator met verstelbare hoogte, 2 zwenkwielen met rem en 2 zwenkwielen
RP742 In hoogte verstelbare opvouwbare rollator met handbediende rem
RP743 In hoogte verstelbare opvouwbare rollator met 2 dubbele wielen met wrijvingsrotatie

2. INLEIDING

Bedankt dat u voor een hulpmiddel uit de MOPEDIA by Moretti-lijn hebt gekozen. Moretti rollators zijn ontworpen en vervaardigd om aan al uw behoeften voor praktisch, correct en veilig gebruik te voldoen. Deze handleiding bevat kleine suggesties voor het juiste gebruik van het door u gekozen apparaat en waardevol advies voor uw veiligheid. Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig door te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Neem bij twijfel contact op met uw detailhandelaar, die u correct kan helpen en adviseren.

3. BEOOGD GEBRUIK

MOPEDIA by Moretti rollators zijn tweearmige hulpmiddelen die geschikt zijn voor het ondersteunen en/of bevorderen van de mobiliteit van mensen die slecht ter been zijn.

AANDACHT!



- Het gebruik van het volgende apparaat voor andere doeleinden dan hierin gedefinieerd, is verboden handmatig.
- Moretti SpA wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik van de apparaat of gebruik anders dan aangegeven in deze handleiding.
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het apparaat en de volgende zaken handleiding zonder voorafgaande kennisgeving om de kenmerken ervan te verbeteren.

4. CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Moretti SpA verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat het door Moretti SpA zelf vervaardigde en op de markt gebrachte product voldoet aan de toepasselijke bepalingen van Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen en daaropvolgende wijzigingen. Hiertoe garandeert en verklaart Moretti SpA onder eigen verantwoordelijkheid het volgende:

1. De apparaten in kwestie voldoen aan de essentiële eisen van bijlage I van Richtlijn 93/42/EEG, zoals voorgeschreven door bijlage VII van bovengenoemde richtlijn.
2. De betreffende apparaten **ZIJN GEEN MEETINSTRUMENTEN**.
3. De betreffende hulpmiddelen **ZIJN NIET BESTEMD VOOR KLINISCH ONDERZOEKEN**.
4. De betreffende hulpmiddelen worden in een **NIET-STERIELE verpakking op de markt gebracht**.
5. De betreffende apparaten moeten worden beschouwd als behorend tot klasse I.
6. **Het is NIET TOEGESTAAN** de betreffende apparaten buiten de bestemming te gebruiken en/of te installeren gebruik voorzien door Moretti SpA.
7. Moretti SpA onderhoudt de technische documentatie waaruit de naleving van Richtlijn 93/42/EEG en latere wijzigingen blijkt, en stelt deze ter beschikking aan de bevoegde autoriteiten.

5. ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

• Raadpleeg deze handleiding voor correct gebruik van het apparaat. • Raadpleeg voor correct gebruik van het apparaat altijd uw arts of therapeut. • Controleer of het product intact bij u wordt afgeleverd en bewaar het verpak

warme bronnen.

• De levensduur van het apparaat wordt bepaald door de slijtage van niet-repareerbare en/of vervangbare onderdelen. • Let altijd op de aanwezigheid van kinderen.

6. GEBRUIKTE SYMBOLEN



Productcode



Unieke identificatie van het apparaat



CE-markering



Fabrikant



Productiepartij



Lees de handleiding voor instructies



Medisch apparaat



Voorwaarden voor verwijdering



Beschikbaarheid

7. ALGEMENE BESCHRIJVING

MOPEDIA rollators zijn gemaakt van lichtgewicht geanodiseerd aluminium, zijn opvouwbaar of afneembaar (behalve RP729), hebben gevoerde handvatten en/of antislippunten en vaste of zwenkwielen. In hoogte verstelbaar iedere 2,5 cm. De bovengenoemde apparaten vergemakkelijken de beweging van mensen met een beperkt statisch en/of dynamisch evenwicht, waardoor de breedte van het draagvlak toeneemt.

Ze bieden ondersteuning in situaties van zwakte en/of parese van de onderste ledematen. Ze helpen een deel van het gewicht van de persoon op de armen te ontlasten, wanneer een beperking van de belasting op één of beide onderste ledematen vereist is.



7.1 Hoogteverstelling

Druk op de veerknop en verwijder de cilinder, waarbij u deze naar de gaten brengt op basis van de gewenste hoogte en de subjectieve manoeuvreerbaarheid van de patiënt. Plaats de grendel terug op het gat om de loop te vergrendelen en zorg ervoor dat de grendel goed is geplaatst voordat u het apparaat zelf gebruikt. Controleer of alle vier de poten zich op dezelfde hoogte bevinden.

8. VÓÓR ELK GEBRUIK

- Controleer altijd of de remmen werken voordat u de rollator gebruikt, indien aanwezig;

- Gebruik de rollator niet als deze beschadigd is of defecten vertoont; • Neem voor eventuele reparaties contact op met de dealer;
- Gebruikers moeten zich op voetpaden bewegen en niet op drukke wegen;
- Houd rekening met de mogelijkheid van letsel door beknelling; vermijd het plaatsen van uw vingers tussen de bewegende delen van de rollator. Let vooral op bij het sluiten en openen van de rollator.

9. WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIK


Dit apparaat zorgt voor meer stabiliteit, ondersteuning en veiligheid tijdens het rijden. Het kan in ieder geval niet gebruikt worden door mensen met een zichtbaar zwakke hand- en/of armfunctie en ook niet door mensen met evenwichtsproblemen. De rollator kan zowel buiten als binnen gebruikt worden. We raden aan om hem alleen te gebruiken op oppervlakken waar alle vier de poten de grond raken. Het mag niet worden gebruikt op rotsachtig terrein of op hellende oppervlakken, omdat de rollator onstabiel kan zijn. Het apparaat is niet ontworpen voor het vervoer van mensen of ander materiaal.

- Wees voorzichtig bij gebruik op natte en gladde oppervlakken;
- Overschrijd niet het maximale patiëntgewicht dat op het productlabel en in het hoofdstuk staat vermeld technische kenmerken van deze handleiding;
- Vermijd gebruik op hellingen hoger dan 10 (graden) en om de gehandicapte op een hellend vlak te draaien moet worden bijgestaan door een operator;
- Controleer periodiek de stabiliteit en robuustheid van het product, evenals de staat van de meetsnoeren steun en wielen. Vervang ze zodra ze versleten zijn;
- Indien u twijfels heeft over het gebruik, de afstelling of het onderhoud van het product, neem dan contact op de detailhandelaar;
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen om risico's te voorkomen.

10. RP729X MONTAGE-INSTRUCTIES

Onderdelen lijst

1. Draagframe (1 stuk)
2. Benen (2 stuks)
3. Gebogen buis (1 stuk)
4. Montageset (1 stuk)

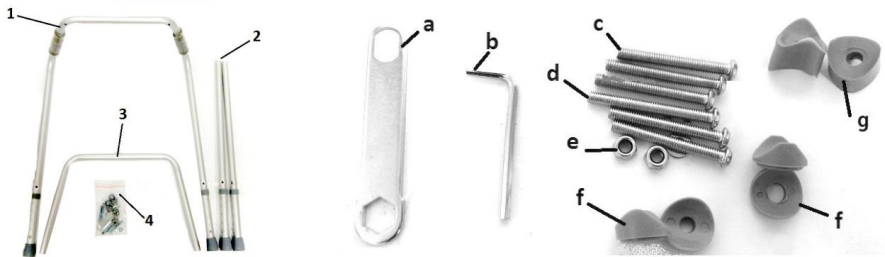

naar. Open de montageset en begin met de montage door het draagframe (1) te pakken.


B. Monteer de poten (2) op het draagframe (1) met de zadelringen (f) en de korte schroeven (c).

Draai de schroeven niet volledig vast.

C. Monteer de gebogen buis (3) met de zadelringen aan de voorzijde van het draagframe (1) (g), lange schroeven (d) en moer met ring (e). Draai de schroeven niet volledig vast.

D. Monteer de gebogen buis (3) met de zadelringen (f) en de schroeven op het draagframe (1). rechtbank (c). Draai de schroeven niet volledig vast.

En. Draai alle schroeven goed vast, de rollator is nu klaar voor gebruik. (Zie foto hieronder)

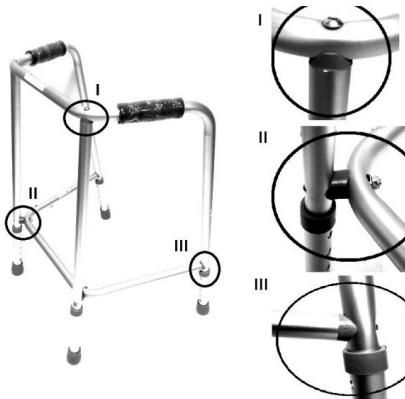

11. HOE TE GEBRUIKEN

Opmerking: Raadpleeg de veiligheidswaarschuwingen in deze handleiding. Gebruik de rollator als loophulpmiddel. Gebruik hiervoor de twee handvatten en duw het hulpmiddel naar voren, waardoor u een praktische en betrouwbare ondersteuning krijgt bij het lopen.




Met uw arm uitgestrekt moet het handvat van de rollator zich op polshoogte bevinden. Terwijl uw hand op de handgreep rust, moet uw elleboog gebogen zijn 20°-30°.



AANDACHT!

In de aanwezigheid van elektrische draden op de grond, natte vloeren, tapijten, speelgoed of andere obstakels, meubels, trappen en oneffen vloeren. Gebruik geen rollator om trappen op of af te gaan of op roltrappen.

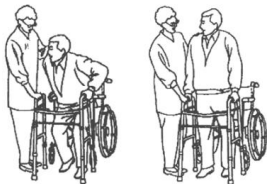

1. Om de patiënt van de rolstoel naar de rollator te verplaatsen, moet u ervoor zorgen dat de wielen van de rolstoel en de rollator (indien aanwezig) geblokkeerd zijn.



AANDACHT!

Vraag voor de overdracht en de eerste stappen de hulp van een telefoniste.



2. a) Walkers met tips: om met de rollator te lopen, tilt u hem op en plaatst u hem comfortabel voor u, waarbij u ervoor zorgt dat alle vier de benen op de grond rusten. Loop voorzichtig en doe stap voor stap.

b) Rollators met wielen: Om met de rollator te lopen, duwt u deze comfortabel voor u uit en zorgt u ervoor dat alle vier de poten, zelfs die met wielen, op de grond rusten. Loop voorzichtig en doe stap voor stap.

Let op: De rollator moet altijd aan de handvatten worden vastgehouden.



AANDACHT!

Duw de rollator niet te ver van uw lichaam af. Dit kan vallen en ongewenste belasting veroorzaken.

12. ONDERHOUD

Bij het op de markt brengen worden de apparaten uit de MOPEDIA by Moretti lijn zorgvuldig gecontroleerd en voorzien van de CE-markering. Voor de veiligheid van de patiënt en de arts wordt aanbevolen om de geschiktheid voor gebruik van uw product minimaal elke 2 jaar te laten controleren door de fabrikant of een bevoegd laboratorium. Onder periodieke inspectie wordt verstaan een onderzoek van de volgende onderdelen:

- De draagconstructie van de rollator en verbindingdelen;
 - Controleer montage en werking van de wielen met relatieve rem, indien aanwezig;
 - Controleer alle laspunten;
 - Controleer de slijtage van de tips, indien aanwezig.
- Bij reparaties mogen uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires worden gebruikt.

13. REINIGING EN DESINFECTIE

13.1 Reiniging

Gebruik alleen een vochtige doek om stof te verwijderen, gebruik een vochtige doek met neutrale zeep om hardnekkiger vuil te verwijderen. Goed drogen voor gebruik.

Gebruik water met een temperatuur van maximaal 30°C. Gebruik geen water- en/of stoomstraalwasmachines.

13.2 Desinfectie

Als het product moet worden gedesinfecteerd, gebruik dan een gangbaar desinfecterend reinigingsmiddel.

Let op: Vermijd absoluut het gebruik van zure, alkalische of oplosmiddelhoudende producten zoals aceton of verdunner.

14. VOORWAARDEN VOOR VERWIJDERING



Als u het apparaat weggooit, gebruik dan nooit de normale gemeentelijke afvalverwerkingssystemen. In plaats daarvan wordt aanbevolen om het apparaat af te voeren via de gemeentelijke recyclingcentra voor de geplande recycling van de gebruikte materialen.

15. TECHNISCHE KENMERKEN

Codes	Domein maximaal	H elke 2,5 cm verstelbaar	Tips/wielen	Baseren*	Baseren**
RP731 (kinderen)	60 kg	Om 53 uur 62,5 cm	4 tips		-
RP736 (kinderen)	60 kg	41 tot 60cm	2 wielen en 2 tips		-
RP729S	110kg	65 tot 75 cm	4 tips		
RP729M		76 tot 86 cm			
RP729L		86 tot 96 cm			
RP730S	130 kg	68 tot 78 cm	4 tips		
RP730M		77 tot 87 cm			
RP730L		83 tot 101 cm			
RP749M	130 kg	En 77,5a 87,5 cm	4 tips		
RP749L		En 83,5a 101,5 cm			

Codes	Domein maximaal	H elke 2,5 cm verstelbaar	Tips/wielen	Baseren*	Baseren**
RP747 130 kg		71 tot 89 cm	4 tips	 60 cm 58 cm 51 cm	 62 cm 59 cm 52 cm
RP735S 130 kg		68,5 tot 78,5 cm	2 wielen en 2 tips	 62 cm 59 cm 46 cm	 63 cm 60 cm 48 cm
RP735M 130 kg Da 76 a 86 cm			2 wielen en 2 tips	 63 cm 60 cm 48 cm	 65 cm 62 cm 50 cm
RP735L 130 kg Da 83 tot 101 cm			2 wielen en 2 tips	 63 cm 60 cm 49,5 cm	 65 cm 62 cm 53,5 cm
RP745 130 kg		In 84 een 102 cm	2 wielen en 2 tips	 60 cm 59 cm 49 cm	 62 cm 60 cm 53 cm
RP737 130kg		In 84 een 102 cm	2 wielen en 2 tips	 61 cm 62 cm 53 cm	 64 cm 65 cm 57 cm
RP734 130 kg		84 bij 102 cm	2 wielen en 2 tips	 61 cm 60 cm 50 cm	 63 cm 61,5 cm 54 cm
RP744 130 kg		In 84 een 102 cm	2 wielen en 2 tips	 60 cm 59 cm 50 cm	 62 cm 60 cm 55 cm
RP738 130 kg		In 84 een 102 cm	4 wielen	 66 cm 62 cm 55 cm	 69 cm 64 cm 59 cm
RP733S 130 kg Da 70 a 80 cm			4 wielen	 62 cm 58 cm 55 cm	 65 cm 60 cm 56 cm
RP733M 130 kg Da 78 a 88 cm			4 wielen	 63 cm 60 cm 56 cm	 65 cm 61 cm 58 cm
RP733L 130 kg		84 bij 102 cm	4 wielen	 65 cm 62 cm 58 cm	 68 cm 64 cm 62 cm

Codes	Domein maximaal	H elke 2,5 cm verstelbaar	Tips/wielen	Baseren*	Baseren**
RP741	100 kg Van	86 tot 96 cm	4 wielen waarvan 2 met rem		
RP743 120 kg		85 tot 103 cm	4 wielen waarvan 2 met wrijvingsrotatie		
RP742	130 kg	86 tot 103 cm	4 wielen met rem		
RP748	130 kg Van	77 tot 92 cm	4 wielen met rem		

*Afmetingen gemeten op de laagste hoogte-instelling.

** Afmetingen gemeten bij hoogste hoogteverstelling.

Afmetingen kunnen ± 1 cm afwijken

15.1 Reserveonderdelen en accessoires




RV7052
Benen met
systeem
zelfremmend
- paar



RV7053
Wielen
met
wrijving
rotatie
- paar



RV7053G
Wielen
verbroedert
met
rotatie
wrijving
 $\varnothing 10$ cm
- paar

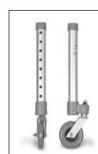

RV7054-5
RV7054-8
Wielen
piroetteren
met 5
of 8 gaten
- paar



RV7055-8
RV7055-8
Vaste
wielen
5 of 8 gaats
- paar



RV7056-5
RV7056-8
Volledige
benen
met 5
of 8 gaten
- paar



RV7051S
Wielen
piroetteren
5 gaten
- paar



RV7051F
Wielen
piroetteren
met rem
5 gaten
- paar



RV7121-8
Wielen
piroetteren
8 voor
 $\varnothing 10$ cm
- paar



RV7154-8
Zwenkwielen
8
gaten $\varnothing 12$
cm - paar



RV7155-8
Vaste wielen
8 fori
 $\varnothing 12$ cm
- paar



RV7015
Wielen
draaibare
lampen
 $\varnothing 8$ cm - paar



RV7016
Zwenkwielen
met rem $\varnothing$
8 cm



RV7035
Tips
- paar
voor RP729



RV7030
 $\varnothing 28$ mm
Grijze
kleurtips
paar



RV7031
 $\varnothing 28$ mm
Tips
zwarte kleur
- paar



RV7045
Prullenbak voor
ambulant
naar één knop



RV7046
Prullenbak voor
ambulant
met twee knoppen



RV7114
Steun
vertakt -
paar



RP758
Zitplaats
volgens RP748

16. GARANTIE

Alle Moretti-producten hebben een garantie tegen materiaal- en fabricagefouten voor een periode van 2 (twee) jaar vanaf de verkoopdatum van het product, behoudens eventuele hieronder gespecificeerde uitsluitingen en beperkingen. Deze garantie is niet geldig in geval van verkeerd gebruik, misbruik of wijziging van het product en het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzingen. Het juiste beoogde gebruik van het product wordt aangegeven in de gebruikershandleiding. Moretti is niet verantwoordelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade, persoonlijk letsel of iets anders veroorzaakt door of verband houdend met de installatie en/of het gebruik van de apparatuur dat niet nauwgezet voldoet aan de instructies gegeven in de installatie-, montage- en gebruikshandleidingen. Moretti garandeert Moretti-producten niet tegen schade of defecten in de volgende omstandigheden: natuurrampen, ongeoorloofde onderhouds- of reparatiewerkzaamheden, schade als gevolg van problemen met de stroomvoorziening (indien van toepassing), gebruik van onderdelen of componenten die niet door Moretti zijn geleverd, het niet naleven van de richtlijnen en instructies voor gebruik, ongeoorloofde wijzigingen, transportschade (anders dan de originele verzending van Moretti) of het niet uitvoeren van onderhoud zoals aangegeven in de handleiding. Slijtbare onderdelen vallen niet onder deze garantie als de schade is veroorzaakt door normaal gebruik van het product.

17. REPARATIES

17.1 Reparatie onder garantie

In het geval dat een Moretti-product tijdens de garantieperiode materiaal- of fabricagefouten vertoont, zal Moretti samen met de klant beoordelen of het productdefect onder de garantie valt. Moretti kan, naar eigen goeddunken, het artikel onder garantie vervangen of repareren bij een gespecificeerde Moretti-dealer of op zijn hoofdkantoor. Arbeidskosten in verband met de reparatie van het product kunnen door Moretti worden betaald als wordt vastgesteld dat de reparatie binnen de reikwijdte van de garantie valt. Een reparatie of vervanging betekent niet dat de garantie wordt verlengd of verlengd.

17.2 Reparatie van een product dat niet onder de garantie valt

Een product dat niet onder de garantie valt, kan alleen voor reparatie worden geretourneerd na voorafgaande toestemming van de klantenservice van Moretti. Arbeids- en verzendkosten in verband met een reparatie die niet onder de garantie valt, zijn volledig voor rekening van de klant of wederverkoper. Voor reparaties aan producten die niet onder de garantie vallen, geldt een garantie van 6 (zes) maanden, gerekend vanaf de dag dat het gerepareerde product is ontvangen.

17.3 Niet-defecte producten

Indien Moretti na onderzoek en testen van een geretourneerd product tot de conclusie komt dat het product niet defect is, wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld. Het product wordt teruggestuurd naar de klant en de verzendkosten als gevolg van het retourneren zijn voor zijn rekening.

18. RESERVEONDERDELEN

Originele Moretti-reserveonderdelen hebben een garantie van 6 (zes) maanden vanaf de dag van ontvangst de vervanging.

19. VRIJSTELLINGSCLAUSULEN

Behalve zoals uitdrukkelijk gespecificeerd in deze garantie en binnen de grenzen van de wet, geeft Moretti geen andere verklaringen, garanties of voorwaarden, expliciet of impliciet, inclusief enige verklaringen, garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk en niet-interferentie. Moretti garandeert niet dat het gebruik van het Moretti-product ononderbroken of foutloos zal zijn. De duur van eventuele impliciete garanties die door de wet kunnen worden opgelegd, is beperkt tot de garantieperiode, binnen de grenzen van de wet.

Sommige staten of landen staan geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie

de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade in verband met consumentenproducten. In dergelijke staten of landen zijn sommige uitsluitingen of beperkingen van deze garantie mogelijk niet op u van toepassing.

**GARANTIE CERTIFICAAT****Product** _____**Gekocht op datum** _____**Dealer** _____**Via** _____ **Plaats** _____**Verkocht aan** _____**Via** _____ **Plaats** _____**MORETTI SPA**

Via Brussel, 3 - Melegnano 20022 Cavriglia (Arezzo) Tel

www.morettispa.com e-mail: info@morettispa.com

GEMAAKT IN PRC



MOPEDIA®

ENGELS

WANDELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING

1. CODES	Pagina 15
2. INLEIDING.....	Pag.15
3. BEOOGD GEBRUIK.....	Pagina 15
4. EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING	Pag.15
5. ALGEMENE WAARSCHUWING.....	Pagina 16
6. SYMBOLEN.....	Pagina 16
7. ALGEMENE BESCHRIJVING	Pagina 16
7.1 Hoogte aanpassen	Pag.17
8. VÓÓR GEBRUIK	pag
9. WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIK	Pag.17
10. MONTAGE-INSTRUCTIES RP729X.....	Pag.17
11. HOE TE GEBRUIKEN	Pag.18
12. ONDERHOUD	Pagina 19
13. REINIGING EN DESINFECTIE.....	Pagina 19
13.1 Reiniging	Pagina 19
13.2 Desinfectie.....	Bladzijde 19
14. VOORWAARDEN VOOR VERWIJDERING	Pag.19
15. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	Pagina 19
15.1 Reserveonderdelen en accessoires	Pag.22
16. GARANTIE	Pagina 22
17. REPARATIE	Pag. 23
17.1 Reparatie onder garantie.....	Pagina 23
17.2 Reparatie die niet onder de garantie valt.....	Pag.23
17.3 Niet-defect apparaat.....	Pag.23
18. RESERVEONDERDELEN.....	Pagina 23
19. VRIJGESTELDE CLAUSULES.....	Pag.23



I-klasse medisch apparaat

volgens Richtlijn 93/42/EEG en verdere wijzigingen

1. CODES

Wandelaars met 4 tips

RP729S-ML Vaste rollator in hoogte verstelbaar **RP730S-ML**

Opvouwbare rollator in hoogte verstelbaar **RP731** Opvouwbare rollator

in hoogte verstelbaar kindermodel **RP747** Opvouwbare rollator in hoogte verstelbaar

dubbele handgreep **RP749M-L** Opvouwbare rollator in hoogte verstelbaar dubbele functie

Walkers met twee zwenkwielen en twee tips

RP734 Opvouwbare rollator in hoogte verstelbaar, 2 zwenkwielen en 2 tips

RP735S-ML Opvouwbare rollator in hoogte verstelbaar, 2 bokwielen en 2 tips

RP736 Opvouwbare rollator in hoogte verstelbaar 2 zwenkwielen, kindermodel

RP737 Opvouwbare rollator in hoogte verstelbaar, 2 bokwielen en 2 tips

RP744 Opvouwbare rollator in hoogte verstelbaar, 2 zwenkwielen en 2 tips

RP745 Opvouwbare rollator in hoogte verstelbaar, 2 bokwielen en 2 tips

Walkers met vier zwenkwielen

RP733S-ML Opvouwbare rollator in hoogte verstelbaar, 4 zwenkwielen

RP738 Opvouwbare rollator, in hoogte verstelbaar, 2 zelfremmende wielen en 2 zwenkwielen

RP741 Opvouwbare rollator in hoogte verstelbaar, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem

RP748 Demonteerbare rollator in hoogte verstelbaar, 2 zwenkwielen met rem en 2 zwenkwielen

RP742 Opvouwbare rollator met handrem

RP743 Opvouwbare rollator in hoogte verstelbaar, 2 zelfremmende dubbele zwenkwielen, 2 zwenkwielen wielen

2. INLEIDING

Hartelijk dank voor uw aankoop van een MOPEDIA rollator van Moretti SpA. Deze gebruikershandleiding biedt enkele suggesties voor het juiste gebruik van het door u gekozen product en geeft waardevol advies voor uw veiligheid. Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw verkoper voor advies en hulp.

3. BEOOGD GEBRUIK

De Mopedi by Moretti rollators zijn apparaten voor gebruik met twee armen en bedoeld voor mensen met bewegingsproblemen.

WAARSCHUWING!



- Gebruik het product niet voor een doel dat niet in deze handleiding wordt aangegeven;
- Moretti SpA wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele gevolgen die voortkomen uit een onjuist gebruik van dit product en tegen ongeoorloofde wijzigingen aan het frame van het product;
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om de informatie in deze handleiding te wijzigen documenteren zonder voorafgaande kennisgeving.

4. EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Moretti SpA verklaart hierbij, onder haar eigen exclusieve verantwoordelijkheid, dat de producten die door Moretti SpA worden vervaardigd en verkocht en die tot de categorie suikerriethulpmiddelen behoren, voldoen aan met de toepasselijke bepalingen uiteengezet in de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG en verder wijzigingen. Hiertoe garandeert en verklaart Moretti SpA op eigen kracht het volgende

verantwoordelijkheid:

1. De betreffende apparaten voldoen aan de essentiële eisen van bijlage I van richtlijn 93/42/EEG zoals voorgeschreven door bijlage VII van bovengenoemde richtlijn;
2. De betreffende apparaten **ZIJN GEEN MEETAPPARATEN**; 3. De betreffende hulpmiddelen **ZIJN NIET BESTEMD VOOR KLINISCH ONDERZOEK**. 4. De betreffende hulpmiddelen worden verkocht in **NIET-STERIELE** verpakking; 5. De apparaten in kwestie moeten worden beschouwd als behorend tot klasse I; 6. Gebruik/installeer de betreffende apparaten **NIET voor enig ander doel dan uitdrukkelijk aangegeven door Moretti SpA**; 7. Moretti SpA onderhoudt en overlegt de documentatie die de conformiteit met de richtlijn certificeert 93/42/EEC aan de bevoegde autoriteiten en verdere wijzigingen.

5. ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

- LEES zorgvuldig de gehele handleiding voordat u het apparaat gebruikt; • Overleg met arts of therapeut om de juiste afstelling en het juiste gebruik te bepalen van de wandelaar;
- Zorg ervoor dat het product compleet wordt afgeleverd en houd het verpakt uit de buurt van warmtebronnen; • LEVENSDUUR - de gebruikslimiet van het apparaat wordt bepaald door de slijtage van de onderdelen; • Laat kinderen NIET met het apparaat spelen of het bedienen.

6. SYMBOLEN



Productcode



Unieke apparaatidentificatie



CE-markering



Fabrikant



Batchpartij



Lees de handleiding



Medisch apparaat



Voorwaarden voor verwijdering



Beschikbaarheid

7. ALGEMENE BESCHRIJVING De

MOPEDIA rollators zijn uitgevoerd in lichtgewicht geanodiseerde aluminium buizen met gevoerde buizen, handgrepen, antislip rubberen punten en/of zwenk- en/of bokwielen. Ze zijn elke 2,5 cm in hoogte verstelbaar. Deze apparaten vergemakkelijken de beweging van mensen met een beperkt statisch evenwicht en/of dynamisch evenwicht, waardoor de amplitude naar de ondersteunende basis toeneemt. Ze bieden ondersteuning in situaties van zwakte en/of verlamming van de onderste ledematen. Helpt bij het downloaden van het gewicht op de armen

van de persoon, waarbij een beperking van de belasting op één of beide onderste ledematen vereist is.



7.1 Hoogte aanpassen

Om de hoogte aan te passen, drukt u op de drukknop en schuift u de wandelstok naar de gewenste hoogte. Zorg ervoor dat de drukknop volledig door het gewenste gat steekt als u klaar bent. Herhaal de beschreven procedure voor elke poot. Controleer aan het einde of alle vier de poten dezelfde hoogte hebben.

8. VOOR GEBRUIK

- Controleer altijd of de remmen werken voordat u de rollator gebruikt, indien aanwezig; • Gebruik de rollator niet als deze beschadigd is of niet goed functioneert; neem contact op met de verkoper voor reparatie;
- Controleer of het frame beschadigd is om een veilig gebruik voor mensen en dingen te garanderen;
- Gebruikers moeten over voetpaden reizen en niet over drukke wegen;
- Let op de mogelijkheid van letsel door beknelling; plaats uw vingers er niet tussen de bewegende delen van de rollator. Let op bij het sluiten en openen van de rollator.

9. WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIK


Dit apparaat zorgt voor meer stabiliteit, ondersteuning en veiligheid tijdens het bewegen. Het kan in ieder geval niet gebruikt worden door mensen met een zichtbaar zwakke functionaliteit van de hand en/of arm en zelfs niet door mensen met evenwichtsproblemen. De rollator kan zowel buiten als binnen gebruikt worden. Wij adviseren het gebruik uitsluitend op oppervlakken waarbij alle vier de poten de grond raken. Het mag niet worden gebruikt op rotsachtig terrein of op hellende oppervlakken, omdat de rollator onstabiel kan worden. Het apparaat is niet ontworpen voor het vervoer van personen of ander materiaal

- Wees extra voorzichtig op natte en gladde oppervlakken;
- NIET gebruiken bij patiënten die het gewicht overschrijden dat op het productetiket en in de verpakking staat aangegeven hoofdstuk technische kenmerken van deze handleiding;
- Vermijd gebruik op hellingen van meer dan 10 graden en draai om op hellingen of hellingen. Gehandicapten moeten worden bijgestaan door een bestuurder
- Zorg ervoor dat het apparaat niet gedurende langere tijd in contact komt met water; • Controleer regelmatig de stevigheid, de stabiliteit en de rubberen punten in goede staat.
Vervang ze zodra ze versleten zijn;
- Neem bij twijfel over gebruik, afstelling of onderhoud contact op met uw dealer;
- Houd het uit de buurt van kinderen om mogelijke risico's te vermijden;


10. MONTAGE-INSTRUCTIES RP729X

Onderdelen lijst

1. Hoofdframe (1 st)
2. Benen (2 stuks)
3. gebogen buis (1 st)
4. Montageset (1 st)

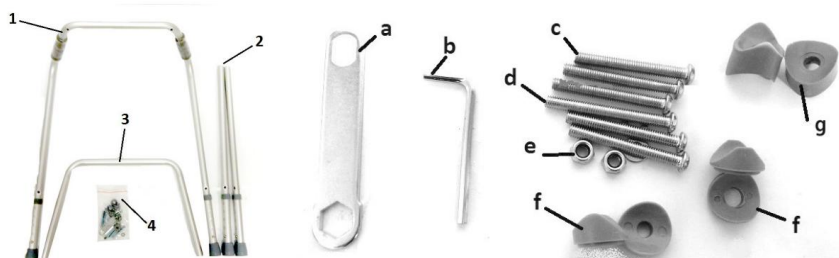

- A. Open de montagekit en start de montage met het hoofdframe (1)
- B. Monteer op het hoofdframe (1): de poten (2), de zadelringen (f) en de short schroeven (c). Draai de schroeven niet volledig vast.
- C. Monteer aan de voorzijde van het hoofdframe (1): de gebogen buis (2) met zadelringen (g), de lange schroeven (d), moeren en ringen (e). Draai de schroeven niet volledig vast.
- D. Monteer op het hoofdframe (1): de gebogen buis (2) met de zadelringen (f) en de korte schroeven (c). Draai de schroeven niet volledig vast.
- e. Draai alle schroeven vast, de rollator is nu klaar voor gebruik. (Kijk naar de foto hieronder)

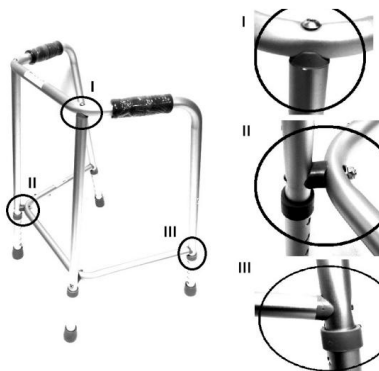

11. HOE TE GEBRUIKEN

Let op: Raadpleeg de veiligheidsinstructies in deze handleiding. Gebruik de rollator als hulpmiddel bij het lopen.

Gebruik hiervoor de twee handvatten en duw het hulpmiddel naar voren, waardoor u een gemakkelijke en betrouwbare steun krijgt bij het lopen.



Met uw arm naar beneden uitgestrekt, moeten de handgrepen zich op polshoogte bevinden. Wanneer u uw hand op de handgreep plaatst, moet uw elleboog 20° - 30° gebogen zijn.



WAARSCHUWING!

- Let op de aanwezigheid van elektriciteitsdraden, natte oppervlakken, vloerkleden, speelgoed of puin, meubels, trapjes en gaten in de vloer. Gebruik de rollator niet op trappen of roltrappen.



1. Om de patiënt van de rolstoel naar de rollator te verplaatsen, moet u ervoor zorgen dat de zwenkwielen van de rolstoel en de rollator, indien beschikbaar, vergrendeld zijn.



WAARSCHUWING!

- Schakel voor de overdracht en de eerste stappen hulp in van een telefoniste.



2. a) Walkers met tips: om te lopen tilt u hem op en plaatst u hem comfortabel voor u, waarbij u ervoor zorgt dat alle vier de benen op de grond staan. Loop voorzichtig, stap voor stap.

- b) Looprekken met zwenkwielen: om te lopen duwt u hem comfortabel voor u uit en zorgt u ervoor dat alle vier de poten, zelfs die met zwenkwielen, op de grond staan. Loop voorzichtig, stap voor stap.

Let op: De rollator moet altijd aan de handgrepen worden vastgepakt. _____



Duw de rollator niet te ver van het lichaam af. Dit kan vallen en onvoldoende belasting veroorzaken.

12. ONDERHOUD

De Mopedia-apparaten van MORETTI worden zorgvuldig gecontroleerd en voorzien van EG-keurmerk zodra ze op de markt zijn gebracht. Voor de veiligheid van patiënt en arts raden wij aan om het apparaat elke 2 jaar te laten controleren door de fabrikant of door een geautoriseerd laboratorium. Onder periodieke keuring verstaan wij een keuring van de volgende onderdelen:

- Het rollatorframe en de verbindingdelen;
 - Controleer de montage en werking van de zwenkwielen met rem;
 - Controleer alle laspunten;
 - Controleer de slijtage van de tips, indien aanwezig;
- Bij reparatie mogen alleen goedgekeurde onderdelen en accessoires worden gebruikt.

13. REINIGING EN DESINFECTIE

13.1 Reiniging

Gebruik alleen een vochtige doek om stof te verwijderen, gebruik een vochtige doek met milde zeep om moeilijker vuil te verwijderen. Droog grondig voor gebruik. Gebruik nooit water met een temperatuur boven de 30°C. Gebruik nooit een straalwater- of stoomwasmachine.

13.2 Desinfectie

Als u het apparaat moet desinfecteren, gebruik dan een gangbaar desinfecterend reinigingsmiddel.



Let op: Gebruik nooit zuren, logen of oplosmiddelen zoals aceton. _____

14. VOORWAARDE VOOR VERWIJDERING



Als u het apparaat weggooit, gebruik dan niet de gewone container voor gemeentelijk afval. Wij raden u aan het apparaat op de daarvoor bestemde afvalplaatsen af te voeren voor recycling.

15. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

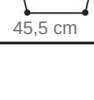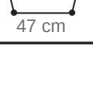Codes	Maximaal aantal gebruikers gewicht	In hoogte verstelbaar iedere 2,5 cm	Tips/wielen	Basen*	Basen**
RP731 (kinderen)	60 kg	Van 53 tot 62,5 cm	4 tips		-
RP736 (kinderen)	60 kg	Van 41 tot 60 cm	2 tips en 2 zwenkwielen		-
RP729S	110kg	Van 65 tot 75 cm	4 tips		
RP729M		Van 76 tot 86 cm			
RP729L		Van 86 tot 96 cm			

Codes	Maximaal gebruikersgewicht	In hoogte verstelbaar iedere 2,5 cm	Tips/wielen	Baseren*	Baseren**
RP730S	130 kg	Van 68 tot 78 cm	4 tips		
RP730M		Van 77 tot 87 cm			
RP730L		Van 83 tot 101 cm			
RP749M	130 kg	Van 77,5 tot 87,5 cm	4 tips		
RP749L		Van 83,5 tot 101,5 cm			
RP747	130 kg	Van 71 tot 89 cm	4 tips		
RP735S	130 kg	Van 68,5 tot 78,5 cm	2 tips en 2 wielen		
RP735M	130 kg	Van 76 tot 86 cm	2 tips en 2 zwenkwielen		
RP735L	130 kg	Van 83 tot 101 cm	2 tips en 2 zwenkwielen		
RP745	130 kg	Van 84 tot 102 cm	2 tips en 2 zwenkwielen		
RP737	130kg	Van 84 tot 102 cm	2 tips en 2 zwenkwielen		


Codes	Maximaal aantal gebruikers gewicht	In hoogte verstelbaar iedere 2,5 cm	Tips/wielen	Baseren*	Baseren**
RP734 130 kg		Van 84 tot 102 cm	2 tips en 2 zwenkwielen	 50 cm	 54 cm
RP744 130 kg		Van 84 tot 102 cm	2 tips en 2 zwenkwielen	 50 cm	 55 cm
RP738 130 kg		Van 84 tot 102 cm	4 zwenkwielen	 55 cm	 59 cm
RP733S 130 kg	Van 70 tot 80 cm	4 wielen		 55 cm	 56 cm
RP733M 130 kg	Van 78 tot 88 cm	4 wielen		 56 cm	 58 cm
RP733L 130 kg		Van 84 tot 102 cm	4 zwenkwielen	 58 cm	 62 cm
RP741	100 kg	Van 86 tot 96 cm	4 zwenkwielen waarvan 2 met rem	 54 cm	 56 cm
RP743 120 kg		Van 85 tot 103 cm	4 zwenkwielen waarvan 2 met glijrem	 57 cm	 59 cm
RP742 130 kg		Van 86 tot 103 cm	4 zwenkwielen met rem	 54 cm	 60 cm
RP748 130 kg	Van 77 tot 92 cm		4 zwenkwielen met rem	 54 cm	 54 cm

*Afmetingen gemeten bij de onderste hoogteverstelling.

**Afmetingen gemeten bij de hogere hoogteverstelling.

De afmetingen kunnen ± 1 cm veranderen

15.1 Reserveonderdelen en accessoires

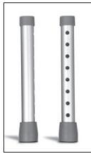 RV7052 Glijdende rem voet stuk met bijlagen - paar	 RV7053 Glijden rem wielen paar	 RV7053G Glijden rem tweeling wielen Ø 10cm - paar	 RV7054-5 RV7054-8 Zwenkwielen voor wandelaar paar 5 of 8 gaten - paar	 RV7055-8 Vaste wielen 5 of 8 gaten - paar
 RV7056-5 RV7056-8 Reserve benen 5 of 8 gaten - paar	 RV7051S Draaien wielen 8 cm - 5 gaten - paar	 RV7051F Draaien zwenkwielen met rem 8 cm - 5 gaten - paar	 RV7121-8 Draaien zwenkwielen 8 gaten Ø 10cm - paar	 RV7154-8 Draaien zwenkwielen 8 gaten Ø 12 cm - paar
 RV7155-8 Vaste wielen Ø 12 cm - 8 gaten - paar	 RV7015 Zwenkwielen Ø 8 cm - paar	 RV7016 Zwenkwielen met rubber tips Ø 8 cm - paar	 RV7035 Rubber tips voor RP729 paar	 RV7030 Ø28mm Grijs rubber tips paar
 RV7031 Ø28mm Zwart rubber tips paar	 RV7045 Mandje voor sleeppunt opvouwbaar wandelaars	 RV7046 Mandje voor een punt opvouwbaar wandelaars	 RV7114 Anti-arm ondersteuning - paar	
 RP758 Zadel voor RP748				

16. GARANTIE

Voor Moretti-producten geldt een garantie tegen materiaal- of fabricagefouten voor een periode van (twee) 2 jaar vanaf de aankoopdatum, met inachtneming van de hieronder gespecificeerde beperkingen en uitsluitingen. De garantie is niet van toepassing in geval van schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, misbruik of wijziging van het product, en de garantie is niet geldig als de gebruiksinstructies niet strikt worden gevolgd.

Het juiste beoogde gebruik van het apparaat wordt in deze handleiding gespecificeerd. Moretti is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van persoonlijk letsel of anderszins veroorzaakt door of in verband met verkeerde installatie of oneigenlijk gebruik. Moretti Moretti garandeert de producten niet tegen schade of defecten in de volgende omstandigheden: natuurrampen, niet-geautoriseerd onderhoud of reparatie, schade als gevolg van problemen met de stroomvoorziening (waar aanwezig) gebruik van reserveonderdelen die niet door Moretti zijn geleverd, oneigenlijk gebruik, niet-geautoriseerde wijzigingen transportschade (anders dan originele verzending door Moretti), of in geval van onvoldoende onderhoud zoals aangegeven in de handleiding.

De garantie dekt geen onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage tijdens het juiste gebruik van het apparaat.

17. REPARATIE

17.1 Reparatie onder garantie

In het geval dat een product van Moretti tijdens de garantieperiode materiaal- of fabricagefouten vertoont, zal Moretti met de klant bevestigen of het defect onder de garantie valt.

Moretti kan het artikel onder garantie naar eigen goeddunken repareren of vervangen bij een Moretti-dealer of op een Moretti-locatie. De arbeidskosten voor de reparatie kunnen aan Moretti in rekening worden gebracht als de reparatie onder de garantie valt. Reparatie of vervanging betekent niet dat de garantie wordt verlengd of verlengd

17.2 Reparatie valt niet onder de garantie

Een product dat niet onder de garantie valt, kan alleen worden geretourneerd voor reparatie na voorafgaande toestemming van de Moretti-klantenservice. De arbeids- en verzendkosten voor een reparatie die niet onder de garantie valt, zijn volledig voor rekening van de klant of dealer. Voor reparaties van producten die niet onder de garantie vallen, geldt een garantie van zes (6) maanden vanaf de datum waarop u het gerepareerde product ontvangt.

17.3 Niet-defect apparaat

De klant wordt op de hoogte gesteld indien Moretti, na het geretourneerde product te hebben onderzocht en getest, beweert dat het product niet defect is. In dit geval wordt het goed teruggestuurd naar de klant, alle verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

18. RESERVEONDERDELEN

De originele Moretti-reserveonderdelen hebben een garantie van 6 (zes) maanden vanaf de datum van ontvangst.

19. VRIJGESTELDE CLAUSULES

Tenzij uitdrukkelijk gespecificeerd in deze garantie en binnen de grenzen van de wet, biedt Moretti geen enkele verklaring, garantie of voorwaarde, expliciet of impliciet, inclusief enige verklaring, garantie of voorwaarde van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk en interferentie. Moretti garandeert niet dat het gebruik van het product Moretti ononderbroken of foutloos zal zijn. De duur van eventuele impliciete garanties die door de wet kunnen worden opgelegd, is beperkt tot de garantieperiode, binnen de grenzen van de wet. Sommige staten staan geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie, noch op de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade in verband met producten voor consumenten. In dergelijke staten of landen zijn bepaalde disclaimers en beperkingen van deze garantie mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**GARANTIE CERTIFICAAT**

Product _____

Gekocht op (datum) _____

Detailhandelaar _____

Adres _____ **Plaats** _____

Verkocht aan _____

Adres _____ **Plaats** _____

**MORETTI SPA**

Via Brussel, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel

www.morettispa.com e-mail: info@morettispa.com

GEMAAKT IN PRC

MORETTI S. PA

Via Brussel, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Faxen. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com