



User Manual

Y-201




Smart Ear Wax




MADE IN CHINA

1 Scan the QR code .QR




2 Select an available APP store to install the APP

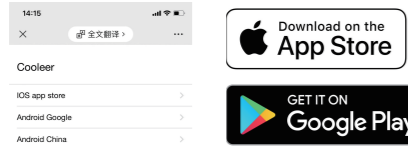


EN

3 Open the APP to add the device "Smart Ear Wax Removal Kit"

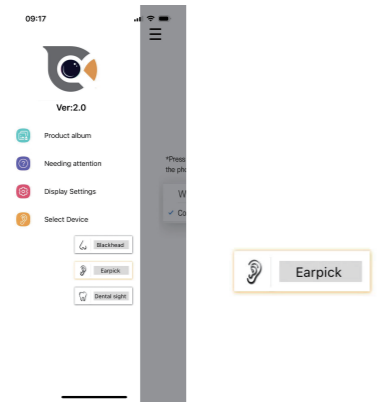


4 Turn on the smart ear wax removal to complete the connection

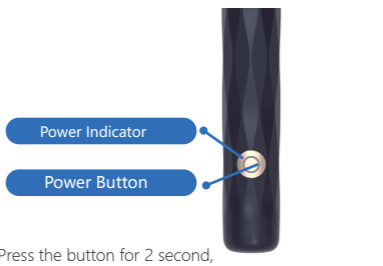


Power Indicator
Power Button

Press the button for 2 second, the indicator will flash and the lens light will light on.


5 Connect the smartphone to the product's WIFI

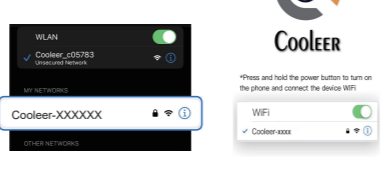

Enter the APP interface, and click the button to switch to working mode.



Functions of APP Buttons

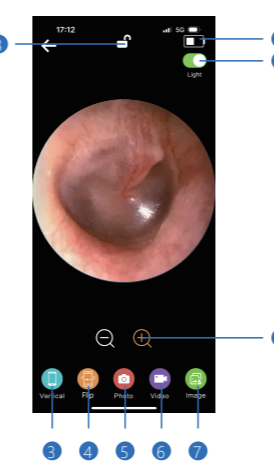

- 1 Lens light
- 2 Screen rotation
- 3 Take photo
- 4 Album
- 5 Remaining Battery
- 6 Zoom in and out
- 7 Mirror the image
- 8 Take video
- 9 Screen lock

Precautions

- The temperature of the product will rise slightly when used; the maximum will not exceed 40°C, it has no harm to the human body, please use it confidently.
- It is recommended to wipe the lens gently with an alcohol swab when clearing.
- Please observe the surrounding area before use to ensure the environment is safe.
- Please do NOT use this product for children under 3 years old.
- Minors should NOT use this product alone to avoid accidental injury.
- Do NOT expose the product body to liquids to avoid water damage.
- The product has a built-in lithium battery, so please charge it once a month to maintain the battery life when long time no use.

Product Parameters

Product Name:	Smart Ear Wax Removal Kit
Model Number:	Y-201
Web Standards:	802.11g/n protocol, 802.11b protocol
Antenna Type:	Internal antenna
Working Frequency:	2.4Ghz
Image Transfer Rate:	20-30fps
Image Sensor:	CMOS
Pixel:	3 megapixels
Battery Capacity:	300 mAh
Working Time:	90 min
Charging Time:	60 min
Input Current:	USB 5V 0.5A
Lens Diameter:	3.5 mm
Best Focal Length:	15-20 mm
Depth of Field:	10-50 mm
Gyro:	5 axis
Working Temperature:	-10-45°C


Common Problems and Solutions

Problems	Solutions
The camera is blurry/unclear.	Wipe the lens gently with an alcohol swab.
No response when booting.	Try again after fully charging.
The App crashes.	Clean up the running APPs of the phone, and then restart the APP.
The camera light does not light on.	Try restarting the product.
The product flashes a red light.	Low battery; try again after fully charged.
After the product is successfully connected, the real-time image cannot be displayed normally.	Disconnect the phone from the product's WIFI, restart the product, reopen the APP and reconnect to the product's WIFI.
The WIFI connection is unstable and disconnected after a few seconds.	Restart the product and reconnect to the product's WIFI.


Warm Tip: If the content above has not solved your problems, please contact the seller through order. We will help you out in 24 hours.

DE

1 Scannen Sie den QR-Code




2 Wählen Sie einen verfügbaren APP Store aus, um die APP zu installieren

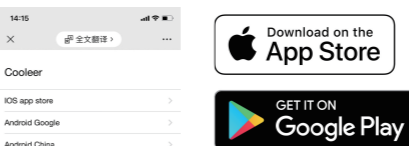


DE

3 Öffnen Sie die APP, um das Gerät "Ohrschmalz-Entferner-Kit" hinzuzufügen.

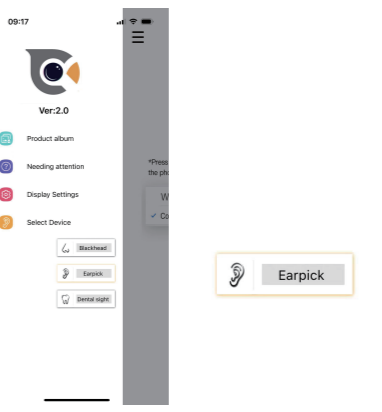


4 Schalten Sie die Ohrschmalz-Entferner-Kit ein, um die Verbindung herzustellen




Betriebsanzeige
Power-Taste

Drücken Sie die Taste für 2 Sekunden, die Anzeige blinkt blau und die Linse leuchtet auf.


5 Verbinden Sie das Smartphone mit dem WLAN des Produkts

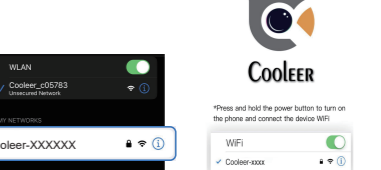


Rufen Sie die APP-Schnittstelle auf und klicken Sie auf die Schaltfläche, um in den Arbeitsmodus zu wechseln.



1 Scansiona il codice QR



2 Selezionare un APP store disponibile per installare l'APP

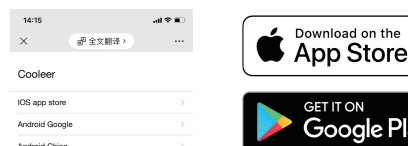


IT

3 Apri l'APP per aggiungere il dispositivo "Otoscopio Digitale"



4 Attivare il prodotto per completare la connessione



Indicatore di alimentazione
Pulsante di alimentazione

Premere il pulsante per 2 secondi, l'indicatore lampeggia in blu e l'obiettivo si accende.

5 Connettere lo smartphone al WiFi del prodotto



Accedere all'interfaccia APP e fare clic sul pulsante per passare alla modalità di lavoro.



1 Sescanez el código QR



2 Seleccione una tienda de aplicaciones apropiado para instalar la aplicación



ES

3 Abra la aplicación para agregar el dispositivo "Otoscopio WIFI"



4 Encienda el otoscopio del oído para completar la conexión



Indicador de potencia
Botón de encendido

Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes, l'indicateur clignote en bleu et l'objectif s'allume.


5 Conecte el teléfono inteligente al WiFi del producto



Introduzca la interfaz de APP y haga clic en el botón para cambiar al modo de trabajo.



1 Scannez le code QR



2 Sélectionnez un APP store approprié pour installer l'APP



FR

3 Ouvrez l'application pour ajouter l'appareil "Otoscope Oreille"



4 Allumez le otoscope oreille pour terminer la connexion



Indicateur de puissance
Bouton d'alimentation

Pulse le botón durante 2 segundos, el indicador parpadeará en azul y la lente se encenderá.

5 Connectez le smartphone au WiFi du produit




Entrez dans l'interface de l'application, puis cliquez sur le bouton pour passer en mode de travail.



1 コードをスキャンしてアプリをダウンロードします



2 対応するアプリストアを選択してアプリをインストールします

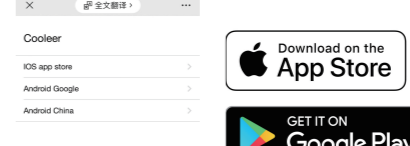

JP

3 アプリを開いて、デバイス「スマートイヤーピック」を追加します




4 電源ボタンを1秒間押し、スマートイヤーピックをオンにしてデバイスを追加します



パワーインジケータ
電源スイッチ

ボタンを2秒間押し、インジケータが青色で点滅し、レンズが点灯します。

5 製品のWi-Fiに接続します

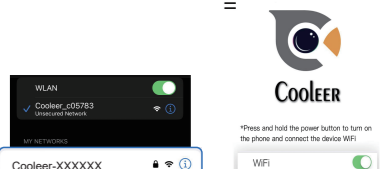

APPインターフェイスに入り、ボタンをクリックして作業モードに切り替えます。



耳垢除去キットの通常の使用に影響を与えないように、必ず以下の手順に従ってセットアップしてください。

<p>【Cooler】に位置情報の使用を許可しますか？</p> <p>位置情報に許可される この用途でのみ許可されます 拒絶</p>	<p>【Cooler XXXXX】はインターネットにアクセスできません。Wi-Fiアシスト機能をオフにしてインターネットに接続し直すことができますか？</p> <p>拒絶されている 許可する</p>
<p>【Cooler】に位置情報の使用を許可しますか？</p> <p>位置情報に許可される この用途でのみ許可されます 拒絶</p>	<p>【Cooler XXXXX】はインターネットにアクセスできません。Wi-Fiアシスト機能をオフにしてインターネットに接続し直すことができますか？</p> <p>拒絶されている 許可する</p>