

# KLINIÖN®

Traditionele Wondbedekkers en Fixatie

De huidvriendelijke  
aanpak







# Het verband tussen Klinion en de traditionele wondzorg

Iedere dag doen we bij Mediq Medeco ons uiterste best om zorgprofessionals te ondersteunen bij het bieden van de juiste zorg en zetten we ons in om de zorg betaalbaar te houden.

De producten van Klinion onderscheiden zich daarom door een combinatie van functionaliteit, comfort en een scherpe prijsstelling. In deze folder komen de kompressen (Klinipress), fixatie (Klinifix) en de pleisters (Kliniplast) aan bod.

## De productcategorieën van Klinion

- **Klinipress** Gaas- en nonwoven kompressen
- **Kliniderm** Speciale wondverbanden
- **Klinifix** Fixatiematerialen
- **Klinigrip** Steunproducten
- **Klinidur** Compressieproducten
- **Kliniplast** Pleisters
- **Klinisoft** Wattenproducten
- **Klinibond** Huidlijm
- **Klinisport** Sportverzorging

## De ondersteuning van Klinion

- **Klinion.nl** Meer kennis over wondzorg.
- **Wondprotocol.nl** Snel en eenvoudig online een protocol samenstellen.
- **Protocol op maat** Uw eigen wondprotocol opstellen en implementeren.
- **Educatie** Geaccrediteerde trainingen wondzorg op diverse niveaus.
- **E-learning** Geaccrediteerde e-learning wondzorg niveau 3 en niveau 4/5.
- **Informatielijn** Direct antwoord op uw vragen door verpleegkundig adviseurs.

Wilt u meer weten over onze merken of ondersteuning? Neem gerust contact met ons op via **Mediq Medeco, T (0186) 63 44 00, F (0186) 61 68 93, E [info@mediqmedeco.nl](mailto:info@mediqmedeco.nl)**

# Traditionele wondbedekkers

Bij de behandeling van wonden, met name chronische wonden, is vochtige wondbehandeling met speciale wondbedekkers meestal de eerste keus. Echter in sommige gevallen kiest de behandelaar voor droge wondbehandeling met traditionele wondbedekkers, zoals gaas- en nonwoven kompressen, absorberende verbanden, vetgazen of zalfverbanden.

## Indicaties

### Reinigen van wonden

Traditionele kompressen worden gebruikt bij het reinigen van wonden. Voor snelle reiniging wordt het kompres vochtig gemaakt met een wondspoelvloeistof (bijvoorbeeld NaCl of Prontosan) op kamertemperatuur en wordt de wond schoon gedept. Breng bij hardnekkig wondbeslag het vochtige kompres gedurende 15 minuten op de wond aan om het beslag te verweken.

### Primair gesloten chirurgische wonden

Deze wonden, onder ideale omstandigheden schoon gemaakt, kunnen prima afgedekt worden met een eenvoudig kompres of een eilandpleister (een kompres met rondom een plakrand). Voor een mooier litteken en het voorkomen van post-operatieve wondinfectie is het aan te raden om een antibacteriële wondzalf/gel\* op de wond aan te brengen.

### Droge necrose zonder ontstekingsverschijnselen

Om de necrosekorst verder te laten verharderen totdat deze eraf valt, worden traditionele kompressen als wondbedekker ingezet.

### Bij excisie na bijvoorbeeld een bijtwond of een abces

Na excisies worden natte gaaskompressen gedurende 1-2 dagen aangebracht om de wond tot rust te brengen. Hierna wordt een aanvullend wondbeleid opgesteld.

### Afdekken van alledaagse wondjes

Alledaagse kleine wondjes worden afgedekt met traditionele wondbedekkers. Kies bij voorkeur een product dat minder snel aan de wond verkleeft zoals een Novopad of Alupad. Of plaats een zalfkompres en dek deze af met een gaas- of nonwoven kompres

om verkleefing te voorkomen. Gebruik eerst een antibacteriële wondgel\* op de wond om de wondgenezing te stimuleren, verkleefing te voorkomen en bacteriën te doden.

### Bij medicinale zalven

Voor het op de plaats houden van medicinale zalven en het beschermen van de kleding wordt het traditionele Engels pluksel ingezet. Wanneer er huid op huid contact is, bijvoorbeeld onder de borsten of tussen huidplooien, wordt Engels pluksel tussen de huidlagen geplaatst om smetten (vochtletsel) te voorkomen. De handen beschermt men bij zalven met Kliniglove verbandhandschoenen. **Let op:** gebruik liever geen traditionele kompressen bij brandwonden, ontvellingen, transplantaten en chronische wonden. Zie voor geschikte producten de Klinion speciale wondbedekkers.

### Dagelijkse verbandwissel

Wanneer er wordt gekozen voor een traditioneel product voor het behandelen van de wond moet het verband dagelijks, soms zelfs vaker per dag, verwisseld worden. Dit om te voorkomen dat het kompres met de wond verkleeft, waardoor al het nieuw gevormde weefsel kapot getrokken wordt en de wondgenezing stagneert.

### Creëer toch een vochtig wondmilieu

Ook bij het gebruik van traditionele producten kan op eenvoudige wijze een vochtig wondmilieu gecreëerd worden. Dek hiervoor het traditionele kompres af met een semi-permeabele wondfolie. De folie houdt het wondvocht tegen en er ontstaat een vochtig wondmilieu. U kunt dan met het verband douchen. Wel dagelijks verwisselen.

\*Zie speciale wondbedekkers: Mesitran Soft

# Klinipress

## Nonwoven kompressen, niet steriel

- Vervaardigd van 67% viscose en 33% polyester.
- Zacht, plooibaar en snel absorberend.

	PRODUCT	WOND-VOCHT	TOEPASSING	REF NR.	MAAT	VERPAK-KING	OVER-DOOS	ZI MEMO-CODE	ZI NR.
	Nonwoven Compress 4 lagen	💧	Mechanische reiniging, niet steriel kompres niet als wondbedekker gebruiken.	175004	5x5 cm	100	50x100	NONWK5	13754890
				175024	7,5x7,5 cm	100	50x100	NONWK7	14309092
				175034	10x10 cm	100	50x100	NONWK1	13755021
				175035	10x10 cm	50	12x50	NONWK7	14715600
				175043	10x20 cm	100	50x100	NONWK1	13755099
Nonwoven Compress Extra 8 lagen	💧💧	Mechanische reiniging, niet steriel kompres niet als wondbedekker gebruiken. 8 lagen kompres voor meer absorptiecapaciteit.	175104	5x5 cm	100	50x100	NONWK5	14029766	
			175134	10x10 cm	100	50x100	NONWK1	14029804	

## Nonwoven kompressen, steriel

- Vervaardigd van 67% viscose en 33% polyester.
- Zacht, plooibaar en snel absorberend.

	PRODUCT	WOND-VOCHT	TOEPASSING	REF NR.	MAAT	VERPAK-KING	OVER-DOOS	ZI MEMO-CODE	ZI NR.			
	Nonwoven Compress 4 lagen	💧	Droge, weinig vochtige wonden, dagelijks verwisselen.	175001	5x5 cm	100x1	20x100x1	NONWK5	13755234			
				175002	5x5 cm	50x2	20x50x2	NONWK5	13755242			
				175003	5x5 cm	20x5	30x20x5	NONWK5	15504859			
				175009	7,5x7,5 cm	20x5	20x20x5	NONWK7	16042220			
				175010	8,5x5 cm*	16x1	24x16x1	NONWK1	13754920			
				175029	10x10 cm*	10x1	20x10x1	NONWK1	14694255			
				175030	10x10 cm	100x1	16x100x1	NONWK1	13755277			
				175031	10x10 cm	50x2	16x50x2	NONWK1	13755285			
				175033	10x10 cm	20x5	16x20x5	NONWK1	16042239			
				175040	10x20 cm	50x1	12x50x1	NONWK1	13755315			
				175041	10x20 cm	25x2	12x25x2	NONWK1	13755323			
				Nonwoven Compress Extra 8 lagen	💧💧	Droge, weinig vochtige wonden, dagelijks verwisselen. 8 lagen kompres voor meer absorptiecapaciteit.	175101	5x5 cm	100x1	20x100x1	NONWK5	13822705
				175130			10x10 cm	100x1	16x100x1	NONWK1	13822721	
				175131			10x10 cm	50x2	16x50x2	NONWK1	14015420	
175140	10x20 cm	50x1	12x50x1	NONWK1			13822748					

\*consumentenverpakking

## Gaaskompressen, niet steriel

- HG Gauze Compress 8 en 12 lagen zijn vervaardigd van 17 draads gewezen, 100% katoen.
- Rafelvrij gevouwen stevig kompres met hoge treksterkte, sterk absorberend.

	PRODUCT	WOND-VOCHT	TOEPASSING	REF NR.	MAAT	VERPAK-KING	OVER-DOOS	ZI MEMO-CODE	ZI NR.
	HG Gauze Compress 8 lagen	💧	Mechanische reiniging, niet steriel kompres niet als wondbedekker gebruiken.	111025	5x5 cm	100	60x100	HYDRK5	13801341
				111030	7,5x7,5 cm	100	20x100	GAASK7	15773647
				111098	10x10 cm	100	20x100	HYDRK1	13620177
				111027	5x5 cm	50	20x50	HYDRK5	13617222
				111028	5x5 cm	100	15x100	HYDRK5	13617230
				111029	7,5x7,5 cm	100	20x100	GAASK7	15773655
				111100	10x10 cm	50	20x50	HYDRK1	13739972
				111101	10x10 cm	100	10x100	HYDRK1	13616366
				111124	10x20 cm	50	10x50	HYDRK1	13634720





## Gaaskompressen, steriel

- **HG Gauze Compress** 8, 12 en 16 lagen zijn vervaardigd van 17 draads geweven, 100% katoen.
- Rafelvrij gevouwen stevig kompres met hoge treksterkte, sterk absorberend.
- **Gaastrook** is vervaardigd van 28 draads geweven, 100% katoen.

PRODUCT	WOND-VOCHT	TOEPASSING	REF NR.	MAAT	VERPAK-KING	OVER-DOOS	ZI MEMO-CODE	ZI NR.
HG Gauze Compress 8 lagen	👉	Afdекken van droge, weinig vochtige wonden, mechanische reiniging, dagelijks verwisselen.	111001	8,5x5 cm	16x1	24x16x1	HYDRK5	13586963
			111002	8,5x5 cm	100x1	16x100x1	HYDRK5	13587005
			111010	5x5 cm	50x2	30x50x2	KLINK5	15773698
			111015	5x5 cm	30x5	20x30x5	KOMP5	16096428
			111040	7,5x7,5 cm	100x1	20x100x1	KLINK7	15773728
			111041	7,5x7,5 cm	50x2	20x50x2	KLINK7	15773736
			111043	7,5x7,5 cm	30x5	15x30x5	KLINK7	15773752
			111078	10x10 cm	30x5	10x30x5	KLINK1	15773787
			111080	10x10 cm	50x2	20x50x2	KLINK1	15773760
			111082	10x10 cm	100x1	16x100x1	HYDRK1	13801309
			111235	20x20 cm	10x5	16x10x5	HYDRO2	14338475
			HG Gauze Compress 12 lagen	👉	Afdекken van droge, weinig vochtige wonden, mechanische reiniging, dagelijks verwisselen. 12 lagen kompres voor meer absorptiecapaciteit.	111016	5x5 cm	10x1
111017	5x5 cm	100x1				20x100x1	HYDRK5	13614312
111018	5x5 cm	50x2				20x50x2	HYDRK5	13739840
111020	5x5 cm	20x5				12x20x5	HYDRK5	13739867
111084	10x10 cm	25x1				16x25x1	HYDRK1	13598112
111085	10x10 cm	100x1				16x100x1	HYDRK1	13587161
111086	10x10 cm	50x2				16x50x2	HYDRK1	13801325
111088	10x10 cm	20x5				12x20x5	HYDRK1	13887351
111089	10x10 cm	10x10				8x10x10	HYDRK1	13800493
111112	10x20 cm	50x1				12x50x1	HYDRK1	13587218
111113	10x20 cm	40x2				16x40x2	HYDRK1	13739999
HG Gauze Compress 16 lagen	👉👉	Afdекken van droge, weinig vochtige wonden, mechanische reiniging, dagelijks verwisselen. 16 lagen kompres voor meer absorptiecapaciteit.	111223	20x20 cm	30x1	16x30x1	HYDRK2	13749323
			111255	20x25 cm	25x1	16x25x1	HYDRK2	14338475
			111256	20x30 cm	20x1	16x20x1	HYDRK2	13801333
Gaastrook	👉	Fistels, opvullen holtes en gedeeltelijk gesloten operatiewonden.	170925	1 m x 1,25 cm	35x1	9x35x1	HYDRG1	13617656
			170930	10 m x 1,25 cm	10x1	24x10x1	HYDRG1	13587234
			170932	10 m x 2,5 cm	10x1	16x10x1	HYDRG1	13587242

## Splitkompressen, steriel

- **Drain Gauze Compress** 16 lagen is vervaardigd van 17 draads geweven, 100% katoen.
- **Drain Nonwoven Compress** 4 lagen is vervaardigd van 67% viscose en 33% polyester.

PRODUCT	WOND-VOCHT	TOEPASSING	REF NR.	MAAT	VERPAK-KING	OVER-DOOS	ZI MEMO-CODE	ZI NR.
Drain Gauze Compress 16 lagen	👉👉	Afdекken insteekopening drain, split rondom drain plaatsen.	170115	10x10 cm	50x1	12x50x1	SPLIK1	13618008
			170116	10x10 cm	25x2	12x25x2	SPLIK1	13618016
Drain Nonwoven Compress 4 lagen	👉		175050	5x5 cm	50x2	20x50x2	NONWK5	13755331
			175051	10x10 cm	50x2	16x50x2	NONWK1	13755358

## Niet verklevend kompres, steriel

- **Novopad** is vervaardigd van 30% viscose en 70% katoen, aan beide zijden bedekt met polyethyleen laagje.
- **Alupad** is vervaardigd van 70% viscose en 30% polyester, aan één zijde bedekt met aluminium laagje.

PRODUCT	WOND-VOCHT	TOEPASSING	REF NR.	MAAT	VERPAK-KING	OVER-DOOS	ZI MEMO-CODE	ZI NR.
Novopad	👉	Matig vochtige wonden, dagelijks verwisselen, kleeft nauwelijks aan de wond. Let op: bij aanbrengen Alupad, aluminiumzijde op de wond.	175060	5x5 cm	100x1	16x100x1	NOVOK5	13755153
			175061	10x10 cm	100x1	16x100x1	NOVOK1	13755161
			175062	10x20 cm	50x1	12x50x1	NOVOK1	14015455
Alupad	👉		175064	10x10 cm	50x1	12x50x1	ALUPK1	15289737
			175065	10x15 cm	50x1	12x50x1	ALUPK1	15289745
			175066	8x10 cm*	50x1	12x50x1	ALUPK8	15289729

\*trachea

## Absorberend verband, niet steriel

- **Exsupad** bestaat uit nonwoven wondcontactlaag, 100% katoenen wattenvulling en blauwe hydrofobe buitenlaag, zacht, plooibaar. De wattenvulling zorgt voor goede verspreiding wondvocht over verband en heeft een groot absorptievermogen.
- **Absorbent Dressing** bestaat uit nonwoven wondcontactlaag, 100% pulpfilling. De witte nonwoven wondcontactlaag verkleint de kans op verkleefing aan de wond.

PRODUCT	WOND-VOCHT	TOEPASSING	REF NR.	MAAT	VERPAK-KING	OVER-DOOS	ZI MEMO-CODE	ZI NR.
Exsupad	👉👉	Secundair verband, niet direct op de wond plaatsen.	170075	9x12 cm (wondkussen 9x9 cm)	100	6x100	EXSUV1	14993473
			170070	10x20 cm (wondkussen 9x17 cm)	25	24x25	EXSUV1	14338467
			170072	10x20 cm (wondkussen 9x17 cm)	50	12x50	EXSUV1	13575090
			170073	20x20 cm (wondkussen 18x17 cm)	50	3x50	EXSUV2	13575112
			170067	20x30 cm (wondkussen 18x27 cm)	50	3x50	EXSUV2	14677083
			170069	20x40 cm (wondkussen 18x37 cm)	50	3x50	EXSUV2	15018156
			176000	10x10 cm	100	6x100		
Absorbent Dressing	👉👉		176001	10x20 cm	50	6x50		
			176002	20x20 cm	50	6x50		

## Absorberend verband, steriel

- **Exsupad** bestaat uit nonwoven wondcontactlaag, 100% katoenen wattenvulling en blauwe hydrofobe buitenlaag, zacht, plooibaar. Wattenvulling zorgt voor goede verspreiding wondvocht over verband en heeft een groot absorptievermogen.
- **Absorbent Dressing** bestaat uit nonwoven wondcontactlaag, 100% pulpfilling. De witte nonwoven wondcontactlaag verkleint de kans op verkleefing aan de wond.

PRODUCT	WOND-VOCHT	TOEPASSING	REF NR.	MAAT	VERPAK-KING	OVER-DOOS	ZI MEMO-CODE	ZI NR.
Exsupad	👉👉	Vochtige tot natte wonden, verwisselen als verband verzadigd is, minimaal dagelijks verwisselen.	170000	9x12 cm (wondkussen 9x9 cm)	50x1	8x50x1	EXSUV9	14990784
			170002	10x20 cm (wondkussen 9x17 cm)	35x1	8x35x1	EXSUV1	13574973
			170003	20x20 cm (wondkussen 18x17 cm)	15x1	16x15x1	EXSUV2	13574981
			170004	20x30 cm (wondkussen 18x27 cm)	10x1	8x10x1	EXSUV2	13575023
			170005	20x40 cm (wondkussen 18x37 cm)	6x1	8x6x1	EXSUV2	13575058
Absorbent Dressing	👉👉		170010	10x10 cm	50x1	8x50x1		
			170011	10x20 cm	35x1	8x35x1		
			170012	15x25 cm	15x1	8x15x1		
			170013	20x20 cm	15x1	8x15x1		
			170014	20x30 cm	10x1	8x10x1		
			170015	20x40 cm	6x1	8x6x1		

## Zalfkompressen, steriel

- Vervaardigd van zacht nonwoven materiaal geïmpregneerd met witte paraffine.

PRODUCT	WOND-VOCHT	TOEPASSING	REF NR.	MAAT	VERPAK-KING	OVER-DOOS	ZI MEMO-CODE	ZI NR.
Klinitulle	👉	Verkleeft niet aan de wond, afdekken met secundair kompres, minimaal dagelijks verwisselen.	170098	10x10 cm	10x1	24x10x1	ZALFK1	14264617
			170099	10x30 cm	20x1	10x20x1	ZALFK1	14990326

## Diversen

- **Engels pluksel** is vervaardigd van 100% katoen en aan één zijde geruwd.
- **Kliniglove verbandhandschoenen** is vervaardigd van 100% katoen, krimpvrij, naden aan de buitenzijde, zowel links als rechts te dragen, per paar verpakt, wasbaar op 30°C, meet voor de juiste maat de hand vanaf de onderkant van de handpalm t/m de bovenkant van de middelvinger.

PRODUCT	TOEPASSING	REF NR.	MAAT	VERPAK-KING	OVER-DOOS	ZI MEMO-CODE	ZI NR.
Engels pluksel	Preventie en behandeling van smetten. En afdekken van zalf bij bijvoorbeeld ontstekingsinfiltraten. De geruwde (pluizige) zijde op de huid aanbrengen.	170057	1 m x 45 cm	1	10x1	ENGEX4	13617370
		170058	5 m x 45 cm	1	10x1	ENGEX4	13619497
		170060	5 m x 10 cm	1 rol	10x1 rol	ENGEX1	13619462
Kliniglove verbandhandschoenen	Geeft bescherming aan de patiënt en zijn/haar omgeving bij zalftherapie.	170947	small = < 17 cm	12x2	8x12x2	VERBX6	13575139
		170948	medium = 18 cm	12x2	8x12x2	VERBX7	13575147
		170949	large = 19 cm	12x2	8x12x2	VERBX7	13575155
		170950	x-large = 20 cm	12x2	8x12x2	VERBX8	13575171

# Fixatiewijzer

Wondbedekkers kunnen worden vastgezet met diverse typen fixatiematerialen. Van verschillende windsels, netverbanden of buisverbanden tot pleisters. Klinion heeft een uitgebreide lijn van deze producten waarmee wondverbanden op elk deel van het lichaam gefixeerd kunnen worden. In dit hoofdstuk treft u de diverse windsels en buisverbanden in ons assortiment.

## Fixatie windsels

Deze windsels zijn in elastische en niet-elastische varianten aanwezig. De elastische fixatiewindsels zijn geschikt voor het fixeren van wondbedekkers op bewegende of ronde lichaamsdelen. De niet-elastische fixatiewindsels zijn speciaal geschikt voor de fixatie van spalken of gipshakken. Bovendien zijn deze hydrofiele windsels geschikt voor het fixeren van natte verbanden.

## Buisverband

De buisverbanden worden gebruikt om de huid en kleding te beschermen tegen zalven en crèmes of voor fixatie van diverse wondverbanden. Onder een zwachtel of gips beschermt het buisverband de huid.

## Net verbanden

Surgifix en Bandafix netverbanden zijn ideaal om wondbedekkers te fixeren op moeilijk te verbinden plaatsen zoals gewrichten, rug of het hoofd. Het blijft goed op zijn plaats zitten met behoud van bewegingsvrijheid. Bovendien kan Surgifix of Bandafix gebruikt worden als alternatief voor hechtpleisters, speciaal voor diegenen die hiervoor overgevoelig zijn. Surgifix is prijstechnisch het beste alternatief, terwijl de range van de Bandafix producten uitgebreider is. De keuze is dus aan u.



# Klinifix

## Elastisch fixatiewindsel

### Klinifix Hydrolast

- Rekbaar, klemt niet af.
- Vervaardigd van 40% polyamide en 60% katoen.
- 4 meter lang (gerekt), per stuk in cellofaan verpakt.
- Ook verkrijgbaar in 2 stuks consumentenverpakking in hangpresentatie.

### Klinifix Cohesive

- Kleeft aan zichzelf, niet aan de huid en snelle fixatie mogelijk.
- Vervaardigd van 30% viscose, 30% polyamide en 40% katoen.
- Per stuk in karton verpakt.

### Klinifix Crêpe

- Licht elastisch materiaal, vervaardigd van 10% viscose en 90% katoen.
- Lusvormige structuur, hierdoor minder kans op verschuiven.
- 4 meter lang (gerekt), per stuk in cellofaan verpakt.

	PRODUCT	TOEPASSING	AFMETING/INDICATIE/KLEURCODERING	REF NR.	VERPAK-KING	OVER-DOOS	ZI MEMO-CODE	ZI NR.
	<b>ELASTISCH FIXATIEWINDESEL</b>							
	Klinifix Hydrolast	Voor de fixatie van wondbedekkers.	4 m x 4 cm - wit	132227	20	5x20	HYDRW4	13574361
			4 m x 6 cm - wit	132228	20	5x20	HYDRW4	13574388
			4 m x 8 cm - wit	132229	20	6x20	HYDRW4	13574396
4 m x 10 cm - wit			132230	20	5x20	HYDRW4	13574418	
	<b>COHESIEF ELASTISCH FIXATIEWINDESEL</b>							
	Klinifix Cohesive	Voor de fixatie van wondbedekkers op beweeglijke of ronde lichaamsdelen. Blijft goed zitten omdat het op zichzelf kleeft.	4 m x 4 cm	132378	5	16x5	COHEW4	13981013
			4 m x 6 cm	132379	5	10x5	COHEW4	13574566
			4 m x 8 cm	132380	5	8x5	COHEW4	13574574
			4 m x 10 cm	132381	5	6x5	COHEW4	13574582
			4 m x 12 cm	132382	5	24x5	COHEW4	15033627
			20 m x 6 cm	132386	1	16x1	COHEW2	13574620
			20 m x 8 cm	132387	1	12x1	COHEW2	13574604
20 m x 10 cm			132388	1	10x1	COHEW2	13574612	
	<b>ZACHT ELASTISCH FIXATIEWINDESEL</b>							
	Klinifix Crêpe	Voor het aanleggen van hoofd- en stompverbanden. Ook te gebruiken als fixatiewindsel voor een met zelf geïmpregneerde wondbedekker.	4 m x 6 cm	132330	10	4x10	CREPW4	13574442
			4 m x 8 cm	132331	10	4x10	CREPW4	13574450
			4 m x 10 cm	132332	10	4x10	CREPW4	13574469
			4 m x 12 cm	132333	10	4x10	CREPW4	13574477
			4 m x 15 cm	132334	10	4x10	CREPW4	13574485

## Niet-elastisch fixatiewindsel



- **Klinifix Hydrofile** is vervaardigd van 60% viscose en 40% katoen.
- **Klinifix Cambric** is vervaardigd van 70% viscose en 30% katoen.
- Bestaat uit 21 draads geweven gaas, zelfkanten, waardoor het niet rafelt.
- 4 meter lang, per stuk in cellofaan verpakt.

	PRODUCT	TOEPASSING	AFMETING/INDICATIE/KLEURCODERING	REF NR.	VERPAK-KING	OVER-DOOS	ZI MEMO-CODE	ZI NR.
	<b>HYDROFIEL WINDSEL</b>							
	Klinifix Hydrofile	Voor het fixeren van wondbedekkers. Let op, niet te strak aanbrengen. Door de structuur zeer geschikt voor het fixeren van natte verbanden.	4 m x 6 cm	132282	20	4x20	HYDRW4	13600826
			4 m x 8 cm	132283	20	3x20	HYDRW4	13600834
4 m x 10 cm			132284	20	2x20	HYDRW4	13600842	
	<b>CAMBRIC WINDSEL</b>							
	Klinifix Cambric	Speciaal geschikt voor het fixeren van spalken en gipshakken. Ook te gebruiken voor het fixeren van natte verbanden of met zelf geïmpregneerde wondbedekkers.	4 m x 6 cm	132257	10	4x10	CAMBW4	13644440
			4 m x 8 cm	132258	10	4x10	CAMBW4	13644459
			4 m x 10 cm	132259	10	4x10	CAMBW4	13644467




## Netverband

- Huidvriendelijk wijdmazig netverband met hoge elasticiteit, daardoor voor meerdere lichaamsdelen te gebruiken.
- Behoudt lengte tijdens het uitrekken in de breedte.
- **Bandafix** is verkrijgbaar in katoen en helanca kwaliteit. **Surgifix** is alleen verkrijgbaar in helanca kwaliteit.

	PRODUCT	TOEPASSING	AFMETING/INDICATIE/KLEURCODERING	REF NR.	KWALITEIT	VERPAK-KING	OVER-DOOS	ZI MEMO-CODE	ZI NR.
	<b>ELASTISCH NETVERBAND</b>								
	Bandafix	Voor het fixeren van wondbedekkers; • Op moeilijk te verbinden plaatsen, zoals gewrichten, rug of het hoofd. • Bandafix is ook in neusverband verkrijgbaar.	25 m -0- vinger	100	katoen	1	60x25 m	BANDGO	12189898
			25 m -1- hand/onderarm/pols	101	katoen	1	60x25 m	BANDG1	12189928
			25 m -2- bovenarm/elleboog/onderbeen/voet	102	katoen	1	60x25 m	BANDG2	12189944
			25 m -3- knie/bovenbeen Small	103	katoen	1	33x25 m	BANDG2	12189960
			25 m -4- bovenbeen/schouder	104	katoen	1	33x25 m	BANDG2	12189987
			25 m -5- hoofd/gehele been	105	katoen	1	33x25 m	BANDG2	12190004
			25 m -6- borst/rug/oksel	106	katoen	1	24x25 m	BANDG2	12190020
			25 m -7- borst/rug/oksel Large	107	katoen	1	24x25 m	BANDG2	12190047
			25 m -8- borst/rug/oksel X-Large	108	katoen	1	24x25 m	BANDG2	14847809
			25 m -0- vinger	200	helanca	1	60x25 m	BANDGO	14921189
			25 m -1- hand/onderarm/pols	201	helanca	1	60x25 m	BANDG1	14726009
			25 m -2- bovenarm/elleboog/onderbeen/voet	202	helanca	1	60x25 m	BANDG2	14726017
			25 m -3- knie/bovenbeen Small	203	helanca	1	33x25 m	BANDG3	14726025
			25 m -4- bovenbeen/schouder	204	helanca	1	33x25 m	BANDG4	14726033
			25 m -5- hoofd/gehele been	205	helanca	1	33x25 m	BANDG5	14726041
			25 m -6- borst/rug/oksel	206	helanca	1	24x25 m	BANDG6	14726068
			25 m -7- borst/rug/oksel Large	207	helanca	1	24x25 m	BANDG7	14726076
			25 m -0- vinger	300	katoen	12x1 m	48x12x1 m	BANDGO	12189871
			1 m -1- hand/onderarm/pols	301	katoen	12x1 m	48x12x1 m	BANDG1	12189901
			1 m -2- bovenarm/elleboog/onderbeen/voet	302	katoen	12x1 m	48x12x1 m	BANDG1	12189936
			1 m -3- knie/bovenbeen Small	303	katoen	12x1 m	48x12x1 m	BANDG1	12189952
			1 m -4- bovenbeen/schouder	304	katoen	12x1 m	48x12x1 m	BANDG1	12189979
			1 m -5- hoofd/gehele been	305	katoen	12x1 m	48x12x1 m	BANDG1	12189995
			1 m -6- borst/rug/oksel	306	katoen	6x1 m	48x6x1 m	BANDG1	12190012
			1 m -7- borst/rug/oksel Large	307	katoen	6x1 m	48x6x1 m	BANDG1	12190039
			kant-en-klaar 10-0 vinger	910	helanca	10x1	24x10x1	BANDG	12190055
			kant-en-klaar 11-1 hand	911	helanca	10x1	24x10x1	BANDG	12190063
			kant-en-klaar 12-1 pols	912	helanca	10x1	24x10x1	BANDG	12190071
			kant-en-klaar 13-2 onderarm	913	helanca	10x1	24x10x1	BANDG	12190098
			kant-en-klaar 14-2 voet	914	helanca	10x1	24x10x1	BANDG	12190101
			kant-en-klaar 15-4 knie	915	helanca	10x1	24x10x1	BANDG	12190128
			kant-en-klaar 16-5 hoofd	916	helanca	10x1	24x10x1	BANDG	12190136
			kant-en-klaar 18-5 been	918	helanca	10x1	24x10x1	BANDG	12190152
kant-en-klaar 19-6 borst	919	helanca	10x1	24x10x1	BANDG	12190160			
kant-en-klaar 20-6 oksel	920	helanca	10x1	24x10x1	BANDG	12190179			
kant-en-klaar 21-6 broekje kort	921	helanca	10x1	24x10x1	BANDG	12190187			
kant-en-klaar 22-6 dijbeen broekje lang	922	helanca	10x1	24x10x1	BANDG	12190195			
kant-en-klaar neusverband	16306	helanca	25x1	24x25x1	BANDV	14221403			
	Surgifix		25 m -1- Vinger	190244	helanca	1	68x1	SURGX1	12206245
			25 m -2- Hand/pols	190245	helanca	1	68x1	SURGX2	14338564
			25 m -3- Hand/hiel/arm	190246	helanca	1	68x1	SURGX3	12206261
			25 m -4- Hiel/been/arm	190247	helanca	1	68x1	SURGX4	12206288
			25 m -5- Knie	190248	helanca	1	68x1	SURGX5	12206296
			25 m -5,5- Schouder/hofd/navelverband baby/been	190249	helanca	1	52x1	SURGX5	12206318
			25 m -6- Heup/hofd/schouder/thorax	190250	helanca	1	44x1	SURGX6	12206326
			25 m -7- Bovenbeen/schouder/thorax	190251	helanca	1	32x1	SURGX7	12206334
			25 m -8- Bovenbeen/schouder/thorax	190252	helanca	1	32x1	SURGX8	12206342
			25 m -9- Thorax	190253	helanca	1	24x1	SURGX9	12206350
			Singlefix Small, type C	570019	helanca	1	100x1	SINGVS	15189538
			Singlefix Medium, type B	570012	helanca	1	100x1	SINGVM	15189511
			Singlefix Large, type A	570004	helanca	1	100x1	SINGVL	15189503


## Hoofdverband

- Licht elastisch netverband, direct te gebruiken en blijft goed op zijn plaats door bevestiging onder de kin.
- Vervaardigd van 62% polyester, 20% elasthaan en 18% katoen.

	PRODUCT	TOEPASSING	AFMETING/INDICATIE/KLEURCODERING	REF NR.	VERPAK-KING	OVER-DOOS	ZI MEMO-CODE	ZI NR.
	<b>ELASTISCH BUISVERBAND</b>							
	Klinifix head	Kant-en-klaar hoofdverband voor het fixeren van verbanden na operaties of bij verwondingen aan het hoofd of de oren.	Small	25425KL	25	4x25	HOOFGS	14868172
			Large	25435KL	20	4x20	HOOFGL	14898764

## Maatverdeling Bandafix/Surgifix

Bandafix	Lichaamsdeel	Surgifix
0	Vinger	0/1
1	Hand/pols	2
1	Hand/hiel/onderarm	3
2	Hiel/onderbeen/bovenarm	4
3	Knie/bovenbeen klein	5
4	Schouder/hofd klein/bovenbeen	5.5
5	Heup/hofd/schouder/borst	6/7
6	Bovenbeen groot/rug/schouder/borst	7/8
7	Borst/rug groot	9

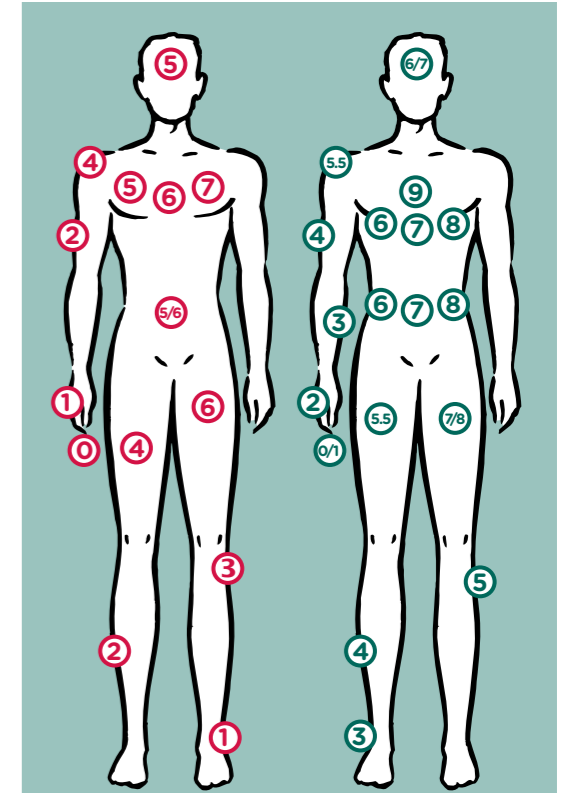



## Buisverband

### Tubifast 2-Way Stretch

- Licht elastisch materiaal, rond geweven.
- Vervaardigd van 92% viscose, 5% elasthaan en 3% polyamide.
- Rekbaar in 2 richtingen voor optimaal draagcomfort en stevige fixatie.
- Weinig rafelig, waardoor beperkte kans op vezels in de wond.
- Zeer geschikt voor Wet Wrap therapie bij atopisch eczeem.
- Kleurgecodeerde maatvoering (meet omvang breedste deel van te verbinden lichaamsdeel).

### Tubiton/Tubnette

- **Tubiton** is vervaardigd van 33% viscose en 67% katoen.
- **Tubnette** is vervaardigd van 100% viscose.
- Materiaalkeuze hangt af van de voorkeur van de gebruiker en de eventuele overgevoeligheid van de patiënt.

	PRODUCT	TOEPASSING	AFMETING/INDICATIE/KLEURCODERING	REF NR.	VERPAK-KING	OVER-DOOS	ZI MEMO-CODE	ZI NR.
	<b>ELASTISCH BUISVERBAND</b>							
	Tubifast 2-Way Stretch	Voor verbandfixatie, bescherming van de huid en kleding bij zelfverbanden. Ook te gebruiken als fixatie van urinebeenzakken en bij de behandeling van atopisch eczeem.	10 m - Rood - 3,5 cm ongerekt	2434-03	1	20x1	TUBIX1	15383393
			10 m - Groen - 5,0 cm ongerekt	2436-03	1	24x1	TUBIX1	15383407
			10 m - Blauw - 7,5 cm ongerekt	2438-03	1	30x1	TUBIX1	15383423
			10 m - Geel - 10,75 cm ongerekt	2440-03	1	12x1	TUBIX1	15383431
			10 m - Paars - 25 cm ongerekt	2444-03	1	15x1	TUBIX1	15383458
			1 m - Rood - 3,5 cm ongerekt	2480-03	12	3x12	TUBIX1	15414507
			1 m - Groen - 5,0 cm ongerekt	2481-03	12	3x12	TUBIX1	15414485
			1 m - Blauw - 7,5 cm ongerekt	2482-03	12	3x12	TUBIX1	15414469
			1 m - Geel - 10,75 cm ongerekt	2483-03	12	3x12	TUBIX1	15414477
			1 m - Paars - 25 cm ongerekt	2479-03	12	4x12	TUBIX1	15414493
	<b>BUISVERBAND</b>							
	Tubiton	Voor de bescherming van huid en kleding tegen zalven en crèmes. Ook te gebruiken ter bescherming van de huid onder gips.	20 m - 01 - vinger/teen	2404-02	1	144x1	TUBIX2	12208329
			20 m - 12 - vinger groot/teen	2405-02	1	104x1	TUBIX2	12208337
			20 m - 56 - ledematen groot	2407-02	1	48x1	TUBIX2	12208353
			20 m - 78 - ledematen extra groot	2408-02	1	40x1	TUBIX2	12208361
			20 m - T1 - romp klein/hofd	2409-02	1	24x1	TUBIX2	12208388
			20 m - T2 - romp groot	2410-02	1	22x1	TUBIX2	12208396
			20 m - 12 - vinger groot/teen	2416-02	1	104x1	TUBIX2	12208213
			20 m - 12 - vinger groot/teen	2417-02	1	104x1	TUBIX2	12208213
			20 m - 56 - ledematen groot	2419-02	1	48x1	TUBIX2	12208248
			20 m - 78 - ledematen extra groot	2420-02	1	40x1	TUBIX2	12208256
Tubnette			20 m - T1 - romp klein/hofd	2421-02	1	18x1	TUBIX2	14338688
			20 m - T2 - romp groot	2422-02	1	18x1	TUBIX2	12208272

# Pleisterwijzer

Mediq Medeco biedt een volledig programma hecht-, wond- en speciale fixatiepleisters die direct en langdurig voor een goede fixatie zorgen. Voor alle huidtypen en situaties is er een passende oplossing. Bovendien beschikt Mediq Medeco over pleisters met de nieuwste revolutionaire Stratagel® kleeftechnologie om huidirritatie bij een gevoelige huid of door frequent gebruik te voorkomen. De Klinion Pleisterwijzer helpt u bij de juiste keuze.

## Het Klinion pleisterassortiment is onderverdeeld in drie categorieën:

- Speciale fixatiepleisters.
- Fixatie- en hechtpleisters.
- Wondpleisters.

## Speciale fixatiepleisters

Drains, catheters, infusen of sondes inbrengen is pijnlijk en ingrijpend voor de patiënt en bovendien kostbaar en tijdrovend. Het is dan ook van groot belang dat deze drains goed gefixeerd worden en ook langdurig kunnen blijven zitten. Mediq Medeco heeft voor deze toepassing een aantal speciale fixatiepleisters in haar assortiment. Het voordeel van deze pleisters is dat ze stevige fixatie bieden, veelal de insteekopening zichtbaar houden voor inspectie en dat ze langdurig kunnen blijven zitten.

## Fixatie- en hechtpleisters

Naast het fixeren van verbanden met windsels, buisverbanden en zwachtels worden wondbedekkers, catheters, sondes en andere lijnen ook heel eenvoudig vastgezet met hechtpleisters. Het voordeel van fixeren met hechtpleisters is dat het sneller en gemakkelijker is dan met een windsel of zwachtel. Bovendien kan een pleister niet verschuiven of afzakken. Verbanden kunnen volledig worden afgedekt met een volvlak fixatiepleister. De Kliniplast Fix wordt vooraf geknipt, het schutvel verwijderd en de pleister wordt dan zonder tractie over het verband aangebracht. Waterdichte volvlakfixatie is mogelijk met de transparante fixatiefolie. Een pleister moet goed fixeren, maar uiteraard mag de kleeflaag de huid, bij verwijderen van de pleister, niet teveel beschadigen. Het is dan ook belangrijk om vooraf de gevoeligheid van de huid van de patiënt vast te stellen. Pas de keuze voor een type hechtpleister hierop aan. De keuze kan ook ingegeven worden door wat u fixeert, op welke plaats op het lichaam dit gebeurt en hoe stevig de fixatie moet zijn.

## Wondpleisters

Wondpleisters kunnen direct aangebracht worden op de wond. Ze bestaan uit een pleister met een wondkussen. Voor elke toepassing is er een specifiek product. Wanneer u bijvoorbeeld snel een klein injectiewondje moet afplakken is de Kliniplast Inject zeer geschikt. Een kleine wondpleister die snel en gemakkelijk van de dispenserrol af te scheuren is. Pijn bij kinderen kun je verzachten door een pleister met een leuke print te gebruiken zoals de Kliniplast Kids. Terwijl een operatiewond, die meer zorg vereist, eerder afgedekt wordt met een steriel product dat de wond rondom afsluit zoals de Kliniplast Border. Mediq Medeco onderscheidt wondpleisters voor de professe en een complete lijn wondpleisters voor in de handverkoop richting de consument. De verpakking van de handverkoop pleisters is opvallend, consumentvriendelijk en bevat duidelijke informatie voor de gebruiker.






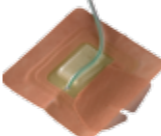

## Kliniplast Xtrata

Voor de zeer gevoelige huid heeft Mediq Medeco de Klinion Xtrata lijn in haar assortiment. Deze bestaat uit een nonwoven en een transparante hechtpleister en een steriele en een onsteriele wond-/fixatiefolie met een speciaal ontwikkelde kleeflaag op basis van Stratagel®. Uit diverse klinische studies blijkt dat er na gebruik van pleisters met een acrylaat kleeflaag 89% van de stratum corneum (bovenste huidlaag) wordt verwijderd en bij de Xtrata producten slechts 20%. De speciale Xtrata Stratagel® kleeflaag verspreidt zich uitstekend over het ruwe oppervlak van de huid. En hoewel de pleister een zeer stevige fixatie geeft, beschadigt deze de huid nauwelijks bij het verwijderen van de pleister. Bekend is dat oudere mensen, baby's, en patiënten met een bepaald ziektebeeld zoals nierproblemen een zeer gevoelige huid hebben. Ook herhaaldelijk aanbrengen van pleisters kan huidirritatie geven. Vooral voor deze patiënten zijn de Klinion Xtrata producten zeer geschikt.

**Kies aan de hand van de indicatie of het type huid welke pleister voor u of uw patiënt het meest geschikt is.**

# Kliniplast

## Speciale fixatiepleisters

	PRODUCT	EIGENSCHAPPEN	AFMETING/INDICATIE/ KLEURCODERING	REF NR.	VERPAK- KING	OVER- DOOS	ZI MEMO- CODE	ZI NR.	ZI NR. P.ST.	
	<b>INFUUS KORTDUREND - VERWISSELEN NA 1-3 DAGEN</b>									
	Niko-Fix infuuspleister	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Huidvriendelijke acrylaat kleeflaag, verstevigd bij de vleugels/canule.</li> <li>• Nonwoven dragermateriaal.</li> <li>• Met split voor fixatie rondom canule.</li> <li>• Extra wondkussen.</li> </ul>	7,2x8,2 cm, steriel	46-NF-92M	100	10x100	NIKOF8	13918311	-	
	<b>INFUUS LANGDUREND - EASI-V VERWISSELEN NA 5 DAGEN, KLINIDERM FILM IV NA 3-5 DAGEN</b>									
	Easi-V infuuspleister, transparant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kleeflaag op acrylbasis.</li> <li>• Stevige fixatie door foamrand.</li> <li>• Insteekopening zichtbaar.</li> <li>• Hoge waterdampdoorlaatbaarheid.</li> </ul>	6,5x7,5 cm, steriel	49-664M	5	80x5	EASIP	14702975	-	
	Easi-IV infuuspleister, transparant		6,5x7,5 cm, steriel	49-664M	50	16x50	EASIP	15321479	-	
	Kliniderm Film IV infuuspleister, transparant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insteekopening zichtbaar.</li> <li>• Hoge verdamping voorkomt vochtophoping onder folie.</li> <li>• Nonwoven fixatiestroken langs split.</li> <li>• Los wondkussen voor onder canule.</li> </ul>	8x5,5 cm, steriel	174420	50	48x50	KLINF8	15410927	-	
			6x7 cm, steriel	40514855	50	48x50	-	-	-	
	<b>NEUSSONDE - VERWISSELEN NA 3 DAGEN</b>									
	Naso-Fix fixatiepleister neussonde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kleeflaag op acrylbasis.</li> <li>• Stevige fixatie.</li> <li>• Risico op drukplek in neushoek beperkt.</li> <li>• Discreet en comfortabel.</li> <li>• Voorgevormd.</li> </ul>	- Infant	49-625M-I	100	16x100	NASOFI	13918257	-	
			S, met vleugel	49-625M-S	100	16x100	NASOFS	13918273	-	
L, met vleugel			49-625M-L	100	16x100	NASOFL	13918265	-		
	<b>URINECATHETER EC G-KABEL - VERWISSELEN NA 3 DAGEN</b>									
	Cath-Fix fixatiepleister catheter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kleeflaag op acrylbasis.</li> <li>• Stevige fixatie.</li> <li>• Huidvriendelijk, ademend.</li> <li>• Discreet en comfortabel.</li> <li>• Voorgevormd; catheter drukt niet in de huid.</li> </ul>	M	49-630M-M	100	16x100	NIKOPM	13924206	-	
L			49-630M-L	100	12x100	NIKOPL	13924192	-		
	<b>SUPRAPUBISCHE EN NEFROSTOMIE CATHETER - VERWISSELEN NA 7 DAGEN</b>									
	Drain-Fix drain fixatiepleister	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kleeflaag op acrylbasis.</li> <li>• Zeer stevige fixatie.</li> <li>• Voorkomt knikken catheter.</li> <li>• Absorbeert wondvocht.</li> <li>• Huidvriendelijke kleeflaag.</li> <li>• Douchen mogelijk.</li> <li>• Comfortabel onder kleding/bij liggen.</li> </ul>	S (5 - 14 CH/F), steriel	680	10	10x10	DRAINFS	14077396	-	
			S (5 - 14 CH/F), steriel	680	25	8x25	DRAINFS	14060221	-	
			L (12 - 22 CH/F), steriel	685	20	8x20	DRAINFL	14222221	-	
L (12 - 22 CH/F), steriel			685	2	5x2	DRAINFL	14618818	-		
	<b>EPIDURAAL EN SPINAAL CATHETER - VERWISSELEN NA 5 DAGEN</b>									
	Epi-Fix epiduraal pleister	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kleeflaag op acrylbasis.</li> <li>• Zeer stevige fixatie.</li> <li>• Voorkomt knikken catheter.</li> <li>• Insteekopening zichtbaar.</li> <li>• Comfortabel.</li> <li>• Hoge waterdampdoorlaatbaarheid.</li> <li>• Reduceert de kans op infectie.</li> </ul>	- steriel	49-670M	25	10x25	NIKOP	14205262	-	

**LATEX FREE**



## Fixatie- en hechtpleisters

	PRODUCT	EIGENSCHAPPEN	AFMETING/INDICATIE/ KLEURCODERING	REF NR.	VERPAK- KING	OVER- DOOS	ZI MEMO- CODE	ZI NR.	ZI NR. P.ST.
<b>ZEER GEVOELIGE HUID, DIALYSE</b>									
	Kliniplast NW Xtrata hechtpleister nonwoven, wit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kleeflaag op Stratagel® basis.</li> <li>Nonwoven dragermateriaal.</li> <li>Zeet huidvriendelijk.</li> <li>Constate kleefkracht.</li> <li>Dun en ademend.</li> </ul>	7 m x 2,5 cm zonder ring	293262	12	20x12	HECHP7	15102645	15102637
	Kliniplast Transparent Xtrata hechtpleister kunststof, transparant	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kleeflaag op Stratagel® basis.</li> <li>Kunststof dragermateriaal.</li> <li>Zeet huidvriendelijk.</li> <li>Constate kleefkracht.</li> <li>Waterafstotend.</li> </ul>	7 m x 2,5 cm zonder ring	293522	12	20x12	HECHP7	15102696	15102688
<b>GEVOELIGE HUID</b>									
	Kliniplast NW hechtpleister nonwoven, wit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kleeflaag op acrylbasis.</li> <li>Nonwoven dragermateriaal.</li> <li>Dun en ademend.</li> </ul>	5 m x 1,25 cm met ring	294175	18	20x18	HECHP5	14666871	14954680
			5 m x 2,5 cm met ring	294176	12	20x12	HECHP5	14954699	14666898
			5 m x 5 cm met ring	294179	12	8x12	HECHP5	15253643	15253635
			9,1 m x 1,25 cm zonder ring	294155	24	10x24	HECHP9	14954869	14960427
			9,1 m x 2,5 cm zonder ring	294156	12	10x12	HECHP9	14954877	14960435
			9,1 m x 2,5 cm dispenser deluxe	294150	6	8x6	HECHP9	15028976	14954796
			9,1 m x 2,5 cm dispenser	294152	20	10x20	HECHP9	14954834	14960451
<b>NORMALE HUID</b>									
	Kliniplast Silk hechtpleister kunstzijde, wit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kleeflaag op acrylbasis.</li> <li>Kunstzijde dragermateriaal.</li> <li>Met pen beschrijfbaar.</li> <li>Stevige fixatie.</li> <li>Ook voor bewegende lichaamsdelen.</li> </ul>	5 m x 1,25 cm met ring	294180	18	20x18	HECHP5	14254786	14072904
			5 m x 2,5 cm met ring	294181	12	20x12	HECHP5	14254794	14072920
			9,1 m x 2,5 cm zonder ring	294186	12	10x12	HECHP9	14954710	14960486
	Kliniplast Transparent hechtpleister kunststof, transparant	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kleeflaag op acrylbasis.</li> <li>Kunststof dragermateriaal.</li> <li>Waterbestendig.</li> <li>Licht rekbaar.</li> <li>Poreus.</li> <li>Ook voor bewegende lichaamsdelen.</li> </ul>	5 m x 1,25 cm met ring	294190	18	20x18	HECHP5	14954737	14954729
			5 m x 2,5 cm met ring	294191	12	20x12	HECHP5	14954753	14954745
	Kliniplast Fixation plaster volvlak fixatie nonwoven	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kleeflaag op acrylbasis.</li> <li>Nonwoven dragermateriaal.</li> <li>Volvlakfixatie.</li> <li>Licht elastisch.</li> <li>Ademend.</li> <li>Ook voor postoperatief volvlakfixatie.</li> </ul>	10 m x 5 cm	294340	8	24x8	FIXAP1	14292041	-
			10 m x 10 cm	294342	6	16x6	FIXAP1	14292068	-
			10 m x 15 cm	294344	4	15x4	FIXAP1	14292076	-
			10 m x 20 cm	294346	2	26x2	FIXAP2	14309459	-
<b>ZEER STEVIGE FIXATIE EINDFIXATIE ZWACHTELS</b>									
	Kliniplast Textile hechtpleister textiel, wit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kleeflaag op acrylbasis.</li> <li>Textiel dragermateriaal.</li> <li>Trekvast, sterk materiaal.</li> </ul>	5 m x 1,25 cm met ring	4294160	18	20x18	HECHP5	14254700	14073021
			5 m x 2,5 cm met ring	4294161	12	20x12	HECHP5	14254719	14073056
			9,1 m x 2,5 cm zonder ring	4294166	12	10x12	HECHP9	14954850	14960508
			9,1 m x 5 cm zonder ring	4294167	6	10x6	HECHP9	14998807	14998777
<b>WATERDICHT VERBANDFIXATIE</b>									
	Kliniderm Film wond/fixatiefolie, transparant	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kleeflaag op acrylbasis.</li> <li>Polyurethaan folie.</li> <li>M VTR 700-1000 g/m2/24h.</li> <li>Waterdicht.</li> </ul>	6x7 cm, steriel	174402	10	45x10	KLINF6	14632071	-
			10x12 cm, steriel	174403	10	28x10	KLINF1	14632098	-
			15x20 cm, steriel	174404	10	14x10	KLINF1	14632101	-
			15x30 cm, steriel	174405	10	7x10	KLINF3	14997568	-
			5 cm x 10 m, op rol	40514870	1	50x1	KLINF1	16066472	-
			10 cm x 10 m, op rol	40514871	1	20x1	KLINF1	16066480	-
			15 cm x 10 m, op rol	40514872	1	20x1	KLINF1	16066499	-
	Kliniderm Film Xtrata wond/fixatiefolie, transparant	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kleeflaag op Stratagel® basis.</li> <li>Polyurethaan folie.</li> <li>Zeet huidvriendelijk.</li> <li>Constate kleefkracht.</li> <li>Hoge waterdampdoorlaatbaarheid: 2000 g/m2/24h.</li> <li>Voor de zeer gevoelige huid.</li> </ul>	6x9 cm, steriel	291409	100	5x100	KLINF6	15102742	-
			10x13,5 cm, steriel	291413	50	6x50	KLINF1	15102750	-
			10 m x 5 cm, niet steriel	291405	1 rol	20x1	KLINF1	15102718	-
			10 m x 10 cm, niet steriel	291410	1 rol	20x1	KLINF1	15102726	-
			10 m x 15 cm, niet steriel	291415	1 rol	20x1	KLINF1	15102734	-

### LET OP:

Verwarm alle Kliniplast hechtpleisters na het aanbrengen even met uw hand voor een betere fixatie!

**Kliniplast NW  
in luxe dispenser**










## Wondpleisters professioneel

	PRODUCT	EIGENSCHAPPEN	AFMETING/INDICATIE/ KLEURCODERING	REF NR.	VERPAK- KING	OVER- DOOS	ZI MEMO- CODE	ZI NR.	ZI NR. P.ST.
<b>KLEINE WONDJES ZELF KNIPPEN</b>									
	Kliniplast wondpleisters	<ul style="list-style-type: none"> <li>Op rol in dispenserdoos.</li> <li>Zelf op maat te knippen.</li> <li>Dragermateriaal textiel, polyethyleen of nonwoven.</li> <li>Huidvriendelijke kleeflaag.</li> </ul>	5 m x 6 cm universal	294350	1	12x1	WONDP5	14747650	-
			5 m x 6 cm classic	294351	1	12x1	WONDP5	13588117	-
			5 m x 6 cm soft	294353	1	12x1	WONDP5	15144410	-
<b>KLEINE WONDJES STRIPS OP ROL</b>									
	Kliniplast Ready Soft wondpleisterstrip	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kleeflaag op acrylbasis.</li> <li>Kunstzijde dragermateriaal.</li> <li>Met pen beschrijfbaar.</li> <li>Stevige fixatie.</li> <li>Ook voor bewegende lichaamsdelen.</li> <li>Per rol à 250 strips.</li> </ul>	20x60 mm	294380	1	18x1 rol	WONDP2	15072991	-
<b>KLEINE WONDJES BIJ KINDEREN</b>									
	Kliniplast Kids wondpleister	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kleeflaag op acrylbasis.</li> <li>Polyethyleen.</li> <li>Waterbestendig.</li> <li>Leuke Garfield print.</li> </ul>	19x76 mm	294119	20 strips	20x20	WONDP	15073025	-
			19x76 mm	294120	100 strips	12x100	WONDP	15073033	-
<b>INJECTIE</b>									
	Kliniplast Injectiepleister	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kleeflaag op acrylbasis.</li> <li>Nonwoven.</li> <li>Voorgeperforeerd op rol in dispenserdoos.</li> <li>Per rol à 250 strips.</li> </ul>	20x40 mm	294375	1	28x1 rol	INJEP4	15072835	-
<b>IN KEUKENS BIJ VOEDSELBEREIDING</b>									
	Kliniplast Detectable blauwe wondpleister	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kleeflaag op acrylbasis.</li> <li>Blauw polyethyleen.</li> <li>Detecteerbaar door kleur en metaalstrips.</li> <li>Per stuk verpakt.</li> </ul>	25x76 mm	294121	50	20x50	WONDP	15073041	-
<b>POST OPERATIEF (LICHT VOCHTIG/DROOG)</b>									
	Kliniplast Border eilandpleister	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kleeflaag op acrylbasis.</li> <li>Nonwoven.</li> <li>Licht elastisch.</li> <li>Rondom gesloten.</li> <li>Afgeronde hoeken.</li> <li>Zacht en comfortabel.</li> </ul>	5x7 cm (3x4 cm*), steriel	294200	50	24x50	EILAP5	14073102	-
			8x10 cm (4x5 cm*), steriel	294201	50	6x50	EILAP8	14073110	-
			8x15 cm (4x10 cm*), steriel	294203	50	6x50	EILAP8	14073129	-
			10x20 cm (5x15 cm*), steriel	294204	10	12x10	EILAP1	14073153	-
			10x25 cm (5x25 cm*), steriel	294205	10	12x10	EILAP1	14073145	-
			10x30 cm (5x25 cm*), steriel	294206	25	6x25	EILAP1	14133253	-
<b>POST OPERATIEF WATERDICHT (LICHT VOCHTIG/DROOG)</b>									
	Kliniplast Island Dressing Waterproof eilandpleister	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kleeflaag op hypo-allergene acrylaat basis.</li> <li>Nonwoven.</li> <li>Waterdicht, douchen is mogelijk.</li> <li>Absorberende en niet-verkleurende wondcontactlaag.</li> </ul>	6x7 cm, steriel	40514200	60	8x60	EILAP6	16066367	-
			9x10 cm, steriel	40514201	40	8x40	EILAP9	16066375	-
			9x15 cm, steriel	40514202	40	8x40	EILAP9	16066383	-
			9x20 cm, steriel	40514203	30	6x30	EILAP9	16066391	-
			9x25 cm, steriel	40514204	30	6x30	EILAP9	16066405	-
			9x30 cm, steriel	40514205	30	9x30	EILAP9	16066413	-
<b>POST OPERATIEF WATERDICHT (LICHT VOCHTIG/DROOG)</b>									
	Kliniderm Film with pad waterdichte eilandpleister	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kleeflaag op acrylbasis.</li> <li>Nonwoven.</li> <li>Waterdicht, douchen is mogelijk.</li> <li>Afgeronde hoeken.</li> <li>Goed vochtmanagement.</li> <li>Niet verkleurende wondcontactlaag.</li> </ul>	5x7,2 cm (2,8x3,8 cm*), steriel	40514860	50	12x50	KLINF5	15982998	-
			10x10 cm (5x5 cm*), steriel	40514861	50	12x50	KLINF1	15986233	-
			10x15 cm (5x10 cm*), steriel	174414	20	8x20	KLINF1	15410889	-
			10x20 cm (5x15 cm*), steriel	40514864	50	6x50	KLINF1	15986276	-
			10x25 cm (5x20 cm*), steriel	40514865	50	6x50	KLINF1	15986284	-
			10x30 cm (5x25 cm*), steriel	40514866	50	6x50	KLINF1	15986292	-
<b>OOGPLEISTER OCCLUSIETHERAPIE</b>									
	Kliniplast Eye Patch oogpleister	<ul style="list-style-type: none"> <li>Huidvriendelijke kleeflaag.</li> <li>Nonwoven.</li> <li>Leuke pinguin print.</li> </ul>	M 5,3x7 cm (Pinguin)	294148	20	50x20	OOGPPM	16005449	-
			L 5,5x8 cm (Pinguin)	294149	20	50x20	OOGPPL	16005457	-
<b>OOGPLEISTER POSTOPERATIEF</b>									
	Eye-Fix oogpleister	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nonwoven.</li> <li>Huidkleur.</li> <li>Speciale pasvorm voor optimale fixatie.</li> <li>Met kijkglas b.v. bij operatie aan beide ogen.</li> </ul>	nonwoven	640	100	12x100	NIKOP	15010759	-
			met kijkglas	645	15	12x15	NIKOP	13918303	-

\*wondkussen



## Wondpleisters consument

	PRODUCT	EIGENSCHAPPEN	AFMETING/INDICATIE/ KLEURCODERING	REF NR.	VERPAK- KING	OVER- DOOS	ZI MEMO- CODE	ZI NR.	ZI NR. P.ST.	
	<b>ALLEDAAGSE WONDJES ZELF KNIPPEN</b>									
	Kliniplast Classic wondpleister, huidkleur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Huidvriendelijke kleeflaag.</li> <li>Dragermateriaal textiel, polyethyleen of nonwoven.</li> <li>Zelf op maat te knippen.</li> </ul>	1 m x 6 cm waterbestendig	294100	1	100x1	WONDPI	14742713	-	
			1 m x 6 cm textiel	294105	1	100x1	WONDPI	14742691	-	
1 m x 6 cm nonwoven			294115	1	100x1	WONDPI	15234444	-		
	<b>ALLEDAAGSE WONDJES STRIPS</b>									
	Kliniplast Finger plaster plaster strips	<ul style="list-style-type: none"> <li>Huidvriendelijke kleeflaag.</li> <li>Polyethyleen of nonwoven.</li> </ul>	assorti: 4 st. 19x72 mm, 8 st. 25x72 mm, 6 st. 9x38 mm en 2 st. rond ø22 mm.	294101	20	100x20	WONDP	14742748	-	
			vinger/teen waterbestendig: 6 st. T-vorm vinger en 6 st. 19x120 mm.	294106	12	100x12	WONDP	14742705	-	
soft nonwoven 25x72 mm			294117	20	100x20	WONDP	15033643	-		
	<b>KLEINE WONDJES ONDERWEG</b>									
	Kliniplast Plaster strips wondpleister strip	<ul style="list-style-type: none"> <li>Huidvriendelijke kleeflaag.</li> <li>Kleeflaag polyethyleen.</li> <li>Snel en eenvoudig aan te brengen.</li> <li>Waterbestendig.</li> </ul>	12 strips in dispenser	294103	480	10x480	WONDP	14742721	-	
	<b>WONDJES STERIEL</b>									
	Kliniplast Border eilandpleister	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dragermateriaal nonwoven.</li> <li>Rondom gesloten.</li> <li>Licht elastisch.</li> <li>Geschikt voor wondjes die iets meer zorg vereisen.</li> </ul>	5x7 cm (3x4 cm*), steriel	294111	10	100x10	WONDP5	14742675	-	
	<b>DOUCHEN EN ZWEMMEN MET KLEINE WONDJES</b>									
	Kliniplast Waterproof strips wondpleister waterdicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>Huidvriendelijke kleeflaag.</li> <li>Dragermateriaal polyurethaan film.</li> <li>Klevend deel transparant.</li> <li>Waterdicht.</li> <li>Niet verklevend wondkussen.</li> <li>Neutraal huidkleurig wondkussen.</li> <li>Geschikt om mee te douchen/zwemmen.</li> </ul>	assorti: 12 st. 38x72 mm en 8 st. 38x38 mm.	294116	20	20x100	NIKOP	15033635	-	
	<b>KLEINE WONDJES BIJ KINDEREN</b>									
	Kliniplast Kids kinderpleister	<ul style="list-style-type: none"> <li>Huidvriendelijke kleeflaag.</li> <li>Dragermateriaal polyethyleen.</li> <li>Waterbestendig.</li> <li>Leuke Garfield print.</li> </ul>	19x76 mm	294119	20 strips	20x20	WONDP	15073025	-	
			19x76 mm	294120	100 strips	12x100	WONDP	15073033	-	
	<b>LIKDOORNS - VERWISSELEN NA ELKE 2 DAGEN</b>									
	Kliniplast Corn plaster/ Likdoornpleister	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dragermateriaal polyethyleen.</li> <li>Werkend bestanddeel salicylzuur 40%.</li> <li>Ontlast druk op likdoorn door uitsparing.</li> <li>Waterbestendig.</li> </ul>	4x2,7 cm	294123	8	20x8	WRATP	15073076	-	

\*wondkussen

Wilt u meer weten over het gebruik van de Klinion producten of een deskundig advies? Kijk dan op [www.mediqmedeco.nl](http://www.mediqmedeco.nl) of [www.klinion.nl](http://www.klinion.nl) voor meer informatie. Of neem contact op met onze afdeling Customer Service (0186) 63 44 00, bereikbaar op werkdagen van 8.15 - 16.45 uur.  
**Wij zijn er voor u!**

**KLINION**  
voor elke wond een oplossing