
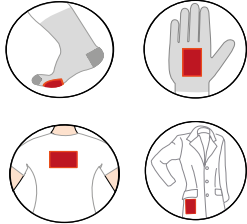
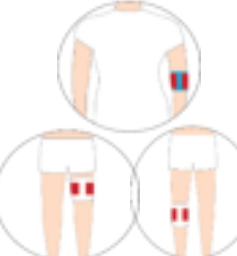




	Body Warmer	Mini Warmer	Been/Arm Warmer + Band	Rug-Buik Warmer + Band	Onderbuik Warmer
BIJSLUITER					
Maat	130mmx95mm	95mmx55mm	95mmx70mm	2 x 130mmx95mm	150mmx100mm
Werking	ca 12 uur	ca 6 uur	ca 6 uur	ca 8 uur	ca 8 uur
Temperatuur	53-63 °C	43-47 °C	52-63 °C	52-63 °C	53-63 °C
Gewicht	40 gr	2x20 gr	50 gr	40 gr	30 gr
Zelfklevend ja/ nee	Ja	Ja	nee	nee	Ja
Niet direct op de huid plakken!!!!					
Gebruiksaanwijzing:	Open het plastic zakje, en verwijder(als nodig) de bescherming van het zelfklevende gedeelte. De vulling reageert op zuurstof en zo wordt er warmte gecreëerd. Laat de warmer nooit direct contact met de huid hebben! Altijd op een kledingstuk plakken bv; ondergoed .				
	Na ca 15 minuten is een constante temperatuur bereikt.				
	Na gebruik bij het gewone huisvuil weggooien.				
Belangrijk:	<ul style="list-style-type: none"> ● Niet aanbevolen als u zwanger bent of lijdt aan diabetes, slechte bloedsomloop of zenuwaandoeningen ● Bij medicijngebruik raadpleeg voor gebruik uw dokter ● Niet gebruiken bij kinderen onder 6 jaar ● Niet aan te raden wanneer je slaapt of vlakbij een warmtebron ● Niet gebruiken bij baby's of mensen die het product zelf niet kunnen verwijderen ● De warmer niet openen, schudden of perforeren ● Wanneer u in contact komt met de inhoud van de warmer, in mond of oog, 15 minuten met water spoelen en een dokter raadplegen ● Bewaren op een donkere koele plaats, zonder direct zonlicht en buiten bereik van kinderen houden ● Wanneer de warmer gevouwen is of bekneld zit bv onder broeksriem, geeft hij extra warmte af en kan brandwonden veroorzaken 				
Natuur Product:	Volledig geproduceerd uit natuurlijke en milieuvriendelijke materialen: ijzerpoeder, vermiculite, water, actieve koolstof en sodium chloride				
	Extra verwarming bij extreme kou. Aangenaam tijdens alle buitensporten; wintersport, wandelsport, bergsport enz...Ontspannend en rustgevend na intensieve sport activiteiten				
Tenminste houdbaar tot: en Batch/Lot.Nr.:	zie product verpakking				
geïmporteerd:	HZ Products bv /www.warmtepleisterkopen.nl				
Producten Europese test normen:	Notified Body :TÜV Rheinland ISO 13485/2012 en ISO 13485/2012/AC/2012				