



MASSAGERR

MASSAGE KUSSEN

Ontdek de kracht van ontspanning en herstel met
je Massagerr® massagekussen.



GEbruikersHANDLEIDING

Lees alle veiligheidsinformatie voordat
je Massagerr gebruikt.



Kies je taal

Bedankt dat je voor Massagerr® hebt gekozen! We waarderen je vertrouwen in onze producten. Deze handleiding is in het Nederlands, maar we begrijpen dat je deze misschien liever in jouw eigen taal leest.

Om aan je behoeften te voldoen en tegelijkertijd onze impact op het milieu te verminderen, hebben we de handleiding digitaal beschikbaar gemaakt in verschillende talen. Wil je deze handleiding in een andere taal lezen, zoals Nederlands, Duits of Frans? Dat kan heel eenvoudig!

Scan de QR-code hieronder met je smartphone of tablet. Je wordt dan doorgestuurd naar onze online handleidingen, waar je de taal van je voorkeur kunt kiezen. Dit is een gemakkelijke en duurzame manier om toegang te krijgen tot de informatie die je nodig hebt.

Scan de QR-code en ontdek je Massagerr® product in de taal die jij het prettigst vindt, op een makkelijke en duurzame manier.



Index

Over Massagerr	05
Ons verhaal	06
Veiligheidsinformatie	08
Belangrijke opmerkingen	08
Garantie-informatie	10
Productgegevens	11
Aan de slag	12
Opladen en gebruiken	13
Support	14

Over Massagerr

In alle rust herstellen of ontspannen. Dat is waar wij je gaan helpen. Alle Massagerr producten zijn speciaal ontworpen om spanning, pijn en stress te verminderen en sneller te herstellen, zodat je je beter kunt voelen en bewegen!

Vanaf nu ben je je eigen professionele masseur, in het comfort van je eigen huis of onderweg. Je kunt nu overal en altijd professionele massages krijgen!



Gezond lichaam



Beweeg beter



Gebruiksvriendelijk



Herstel sneller

Voordelen van Massagerr producten

- ✓ Versmelt spierpijn en spanning
- ✓ Verbetert het bewegingsbereik en de flexibiliteit
- ✓ Helpt chronische en acute pijn op natuurlijke wijze te verzachten
- ✓ Bevordert de bloedsomloop
- ✓ Bevordert sneller spierherstel
- ✓ Ontspannt het lichaam voor een betere slaap

Ons verhaal

Massagerr is uit noodzaak geboren. De oprichter van Massagerr deelt hier zijn verhaal.



Na een snowboardongeluk en een voet die overreden werd door een auto, raakte mijn hele lichaam uit balans.

De enorme irritatie van constante spanning moest stoppen. Mijn lange zoektocht naar een oplossing werd eindelijk gevonden toen ik een nieuwe wereld van innovatieve massageproducten ontdekte. Ze gaven me een enorme opluchting, verminderden de constante spanning en hielpen me bij consequent gebruik enorm bij mijn herstel. Het idee dat je zo gemakkelijk, waar je ook bent, je lichaam naar

volledige ontspanning en sneller herstel kan leiden. Je lichaam naar volledige ontspanning en sneller herstel kan leiden, bracht me ertoe me in de wereld van massage te verdiepen. Geïnspireerd door deze transformerende ervaring creëerde ik Massagerr - een voortdurend innovatief assortiment massageproducten die ontworpen zijn om iedereen de voordelen van ontspanning, herstel en verlichting te bieden. Altijd en overal.

Jim

Oprichter van Massagerr.nl

Veiligheidsinformatie

Lees de volgende veiligheidsinstructies & disclaimer zorgvuldig door en volg alle instructies voordat u het apparaat gebruikt.

Lees alle veiligheidsinformatie voordat u Massagerr gebruikt. Om het risico op elektrische schokken, brand, letsel of andere schade te beperken, moet Massagerr worden gebruikt volgens de volgende veiligheidsinstructies: Dit product mag alleen door volwassenen worden gebruikt. Raadpleeg een fysiotherapeut of arts bij twijfel over het product. Gebruik de Massagerr alleen op droge lichaamsoppervlakken, nooit op natte oppervlakken. De Massagerr kan over kleding heen worden gebruikt. Gebruik de Massagerr alleen op zacht spierweefsel. Gebruik de Massagerr nooit op het hoofd, botten of gevoelige lichaamsdelen. Het gebruik van de Massagerr mag geen pijn doen of onprettig aanvoelen. Verkeerd gebruik van de Massagerr kan leiden tot blauwe plekken. Stop onmiddellijk als u een blauwe plek krijgt.

Belangrijke opmerkingen

Laad de Massagerr alleen op met de originele, meegeleverde adapter. Inspecteer en controleer de Massagerr voor gebruik op beschadigingen. Vervang de onderdelen in de Massagerr nooit zelf. Laat de Massagerr nooit ongebruikt tijdens het opladen. Gebruik dit Massagerr-apparaat alleen met toestemming van een arts of fysiotherapeut in de volgende gevallen:

+ Zwangerschap

+ Diabetes

+ Andere complicaties zoals:

Neuropathie, netvliesdegeneratie, pacemakerdragen, recente operatie, epi/episie, migraine, hernia, spondy/olisthesis, spondy/o-analyse, spondylosis.

+ Recent joint replacements, IUDs, metal pins or plates.

+ Concerns about physical health.

Deze contra-indicaties betekenen niet dat je geen vibratie- of bewegingsapparaat kunt gebruiken, maar we raden aan om eerst een arts te raadplegen. Er wordt voortdurend onderzoek gedaan naar de effecten van vibratieoefeningen bij specifieke medische aandoeningen. Dit zal waarschijnlijk resulteren in een verkorting van de bovenstaande lijst met contra-indicaties. Uit praktische ervaring is gebleken dat integratie van vibratieoefeningen in een behandelplan wordt geadviseerd. Dit dient te gebeuren op advies en onder begeleiding van een arts, specialist of fysiotherapeut.

Lees alle belangrijke opmerkingen voordat u de Massagerr gebruikt. De Massagerr mag niet in contact komen met vloeibare middelen of warmtebronnen. Beweeg vastzittende onderdelen zoals schroeven niet opnieuw. Gebruik de Massagerr niet langer dan 1 uur achter elkaar. Laat de Massagerr minstens 30 minuten afkoelen voordat u deze opnieuw gebruikt. Belangrijke opmerkingen Verwijder de oplader van de batterij nadat de Massagerr volledig is opgeladen en klaar is voor gebruik.

Het product is alleen geschikt voor volwassenen. Raadpleeg een arts of fysiotherapeut over het gebruik van het massagepistool om (erger) letsel te voorkomen. Vervoer het massagepistool alleen in de bijgeleverde opbergtas.

Garantie-informatie

Als dit product binnen een jaar na de aankoopdatum defect raakt als gevolg van een fabricagefout in het materiaal of als het apparaat niet naar behoren werkt, zal Massagerr het product kosteloos repareren, vervangen of een passende oplossing bieden.

Deze garantie is uitgesloten indien

- a. Schade is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik of onjuist transport.
- b. Apparaten zijn onderworpen aan niet-geautoriseerde reparatie.
- c. Apparaten die niet zijn gebruikt volgens de veiligheids- en bedieningsinstructies van Massagerr.
- d. Schade die de kostprijs van het product overschrijdt.
- e. Verslechtering van het geleverde product als gevolg van abnormale opslag- en/of beschermende omstandigheden bij de klant.
- f. Het niet kunnen voorleggen van een gedateerd aankoopbewijs.

Some states and countries do not allow limitation of damages, so the foregoing limitation may not apply to you. This warranty guarantees specific legal rights, but other rights may vary from country to country and state to state.




Specificaties

Overzicht	Gewicht	1.6kg
	Batterij	Oplaadbaar Lithium Batterij
	Batterijcapaciteit	2500 mAh
	Levensduur batterij	90-150 minuten
	Oplaadtijd	150 minuten
	Motor	Hoogste kwaliteit koperen motor
	Vermogen	24W
	Spanning	12V

Features	Draadloze	Ja
	Rotatie	Ja
	Infrarood	Ja
	Draagtas	Ja
	Snelheidsniveaus	3
	Tandwiel	4
	Roterende koppen	8

Aan de slag

We hebben het Massagerr® massagekussen ontworpen met gebruiksgemak in gedachten, zodat je snel en eenvoudig kunt beginnen met het verminderen van spierspanning en stress.

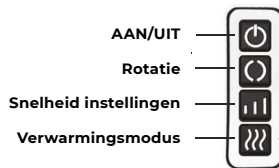

In- en uitschakelen

Zet het massagekussen aan en uit door op de AAN/UIT-knop te drukken.

Rotatie

Druk op de knop op het roterende pictogram om van richting te veranderen (dit gebeurt ook af en toe automatisch).

Snelheid aanpassen

Druk op de snelheidsknop om de snelheid aan te passen.

Er zijn 3 snelheidsniveaus.

Verwarmingsmodus

Druk op de infraroodknop om de verwarmers aan of uit te zetten. Als ze rood zijn, staan ze aan.

Automatisch uit

Om veiligheidsredenen schakelt het product na 15 minuten automatisch uit. Je kunt het product meerdere rondes gebruiken op een volledig opgeladen batterij.

TIP! Als je armen eenmaal in de lussen zitten, oefen dan wat meer druk uit door het massagekussen naar beneden te drukken, hierdoor wordt de massage steviger.

Opladen & gebruik

Dankzij het gemak van draadloos opladen kun je je Massagerr® massagekussen overal gebruiken - op de bank, voor de tv of zelfs tijdens een lange autorit.

Opladen

Massagekussen opladen

STAP 2

Sluit het massagekussen aan op de adapter.

STAP 3

Het groene lampje gaat branden.

STAP 4

Na 2 uur is het massagekussen volledig opgeladen en brandt het lampje rood.

Het gebruik

STAP 1 - HET MASSAGEKUSSEN GEBRUIKEN

Gebruik nu het massagekussen op je spieren. Tip: leg het eerst op je nek met je armen door de lussen. Dit is het meest gebruikelijke en fijnste gebruik van het massagekussen.

STAP 2 - WEERSTAND BIEDEN

Om dieper in de spier of het bindweefsel te komen, kun je iets meer kracht zetten door je armen in de lussen te drukken.

Nu kun je de Massagerr gebruiken!

Support

Massagerr werkt met een 100% tevredenheidsgarantie. Wij zijn pas tevreden als jij dat bent.

Heb je na het lezen van de handleiding nog vragen?

Bij Massagerr vinden we het belangrijk om al je vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Daarom staat ons team 7 dagen per week klaar om je vraag te beantwoorden. Je kunt ons supportteam gemakkelijk bereiken via e-mail of sociale media.



info@massagerr.nl



[@massagerr.nl](https://www.instagram.com/massagerr.nl)



MASSAGERR

www.massagerr.nl