

HARTMANN



# Product catalogus

 Risk  
Prevention

 Personal  
Healthcare

 Disinfection

 Incontinence  
Management



# Wound Management


































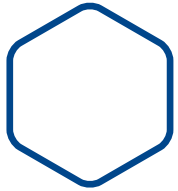

Eerste hulp

# Atrauman®

## Zalfkompres

Een wondverband gaat altijd gepaard met het risico dat het wondbed keer op keer wordt opengescheurd. Dat veroorzaakt pijn en kan leiden tot onwil bij de patiënt ten aanzien van het verwisselen van het verband. Het Atrauman® zalfkompres kan in combinatie met verschillende andere wondverbanden worden gebruikt om te voorkomen dat het verband hecht aan de wond. Atrauman bevat triglyceriden die voorkomen dat de wond uitdroogt en tevens de intacte huid aan de randen van de wond beschermen. De fijnmazige structuur van het kompres laat exsudaat door, zodat het kan worden opgenomen door het secundaire verband.

### Eigenschappen

Het dunne zachte weefsel van hydrofobe polyestervezels heeft een glad oppervlak dat voorkomt dat nieuw gevormd weefsel in het kompres groeit. Zo wordt voorkomen dat het kompres zich aan de wond hecht, wat geregeld voorkomt. Er blijven geen zalfresten achter in de wond, waardoor de wond gemakkelijk te reinigen en te beoordelen is.

Atrauman® houdt de wond en de wondranden soepel en beschermt de wond tegen uitdroging. De zalf is lucht- en exsudaatdoorlatend. Hierdoor kan exsudaat snel uit de wond worden afgevoerd. Om ervoor te zorgen dat overtollig exsudaat snel wordt opgenomen, moet Atrauman® worden gecombineerd met een absorberend verband. Omdat de zalf geen werkzame bestanddelen bevat, kan het kompres ook binnen de dermatologie en voor geneesmiddelgevoelige patiënten dan wel patiënten met een gevoelige huid worden gebruikt. Therapeutisch werkzame stoffen kunnen na beoordeling door de arts worden toegevoegd. Atrauman® moet bij elke verbandwissel worden vervangen, tenzij de behandelend arts iets anders voorschrijft.

### Materiaal

Geweve hydrofoob polyester dat is geïmpregneerd met een zalf zonder werkzame bestanddelen. Zalfbestanddelen: vetzuren (triglyceriden) en kokosolie (caprylzuur/caprinezuur/ stearinezuurtriglyceride; bis-diglyceryl polyacyladipate-2 (conform INCI)). De zalf is niet sensibiliserend en bevat geen toevoegingen van vaseline, lanoline of paraffine.

Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse IIb, steriel. Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG.

### Indicatie en aanbrenging

Voor atraumatische wondbehandeling in alle wondgenezingsfasen, bijvoorbeeld bij littekenweefsel, beenulcera, decubitus, brandwonden, stralingschade, abscessen, huidtransplantaties en nageextracties.

Contra-indicaties: niet bekend.

Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>Atrauman® zalfkompres</b>	5 x 5 cm	499 510	10 stuks	40 x 10 stuks	1121276
Steriel, afzonderlijk verpakt	5 x 5 cm	499 550	50 stuks	16 x 50 stuks	1121284
	7,5 x 10 cm	499 513	10 stuks	20 x 10 stuks	392357
	7,5 x 10 cm	499 553	50 stuks	8 x 50 stuks	1121292
	10 x 20 cm	499 536	30 stuks	5 x 30 stuks	392381



Omdat Atrauman® niet hecht aan de huid, kan het bevestigen op sommige plaatsen lastig zijn, bijvoorbeeld aan de onderkant van het been. De eenvoudigste methode is om eerst het zalfkompres op het secundaire verband te plaatsen en dan beide verbanden samen op de wond aan te brengen.

Als een secundair verband niet nodig is, kan het zalfkompres ook met een gaasverband worden gefixeerd.

### Voordelen:

- Verlicht de pijn
- Niet hechtend
- Zacht, comfortabel voor de patiënt
- Economisch
- Beschermt de wond
- Veelzijdig toepasbaar
- Verzorgt de wondranden

# Atrauman® Ag

## Zilverhoudend zalfkompres

Het doel van een zalfkompres is te voorkomen dat het verband aan de wond hecht, om zo het verwisselen van het verband voor de patiënt en het verplegend personeel gemakkelijker te maken. Atrauman® Ag geeft het zalfkompres nog een extra dimensie. Door de toevoeging van zilver heeft het kompres een antibacteriële functie. Het kompres biedt daardoor niet alleen bescherming tegen mechanische inwerkingen, maar ook tegen wondinfecties. Bij reeds geïnfecteerde wonden fungeert het als lokaal hulpmiddel.

### Eigenschappen

Het dunne en zachte materiaal is gemakkelijk aan te brengen en zorgt voor een goed contact met het wondgebied. De zalfmassa bevordert de genezing en houdt de wond zacht. Het zilver in het verband bestaat uit metallisch zilver dat ioniseert wanneer het in contact komt met het wondexsudaat. Atrauman® Ag werkt actief tegen gramnegatieve en grampositieve bacteriën, waaronder MRSA-stammen. Atrauman® Ag geeft verspreid over een langere periode (7 dagen) kleine hoeveelheden zilver af om te voorkomen dat gezonde cellen in het wondgebied worden gedood, wat het genezingsproces zou vertragen. De hoeveelheid zilver die wordt afgegeven doodt de schadelijke bacteriën die in de wond aanwezig zijn.

### Materiaal

Geweven polyamidevezels met een laagje elementair zilver en geïmpregneerd met een zalf op basis van triglyceriden. Samenstelling zalfmassa: caprylische/capriscische triglyceriden, stearinezuur-triglyceriden, bis-diglyceryl-polyacryladipate-2 en macrogol 2000 (conform INCI). Het zilveragehalte komt overeen met 30-50 mg/100 cm<sup>2</sup>. Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse IIb, steriel. Voorzien van een CE-markering volgen EU-richtlijn 93/42/EG.

### Speciale voorzorgsmaatregelen

Vóór de behandeling van met bacteriën gecontamineerde of geïnfecteerde wonden is altijd een medische beoordeling noodzakelijk. Een zilverhoudend verband kan in geen enkel geval de wondreiniging vervangen. De wond moet in ieder geval worden ontdaan van necrotisch weefsel, fibrineus beslag en pus, anders wordt de werking van het verband belemmerd. Een behandeling met zilververband kan nooit een behandeling met antibiotica vervangen. Atrauman® Ag mag niet worden gebruikt in combinatie met paraffinehoudende zalven, omdat deze het effect van het verband verminderen.

Omschrijving		Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>Atrauman® Ag</b> Steriel, per stuk verpakt	5 x 5 cm	499 571	10 stuks	12 x 10 stuks	2114924
	5 x 5 cm	499 570	3 stuks	12 x 3 stuks	2114916
	10 x 10 cm	499 573	10 stuks	12 x 10 stuks	2114940
	10 x 10 cm	499 572	3 stuks	12 x 3 stuks	2114932
	10 x 20 cm	499 574	3 stuks	6 x 3 stuks	2114957
	10 x 20 cm	499 575	10 stuks	6 x 10 stuks	2114965



### Indicatie en aanbrenging

Als aanvullende maatregel bij de behandeling van wonden met een hoge bacteriële lading of geïnfecteerde wonden. Ook als aanvullende infectieprofylaxe in combinatie met de wondbehandeling.

Contra-indicaties: niet bekend.

Omdat Atrauman® Ag niet aan de huid hecht, kan het fixeren op sommige plaatsen lastig zijn, bijvoorbeeld aan de onderkant van het been. De eenvoudigste methode is om eerst het zalfkompres op het secundaire verband te plaatsen en dan beideverbanden samen op de wond aan te brengen. Als een secundair verband niet nodig is, kan het zalfkompres ook met een gaasverband op zijn plaats worden gehouden.

### Voordelen:

- Doodt schadelijke bacteriën
- Niet schadelijk voor nieuwe cellen
- Zacht, comfortabel voor de patiënt
- Economisch
- Beschermt de wond
- Tast de huid niet aan

# Atrauman® Silicone

## Wondcontactlaag

Atrauman® Silicone is een zachte wondcontactlaag met siliconen. Atrauman® Silicone wordt gebruikt voor de behandeling van verschillende wonden en wordt naast het secundaire verband gebruikt om de wond te beschermen. Atrauman® Silicone voorkomt dat het verband aan de wond hecht en zorgt voor een zachte wondbedekking en dus een effectief genezingsproces.

### Eigenschappen

Dankzij het dunne materiaal is Atrauman® Silicone goed vormbaar en gemakkelijk op maat te knippen. Doordat het verband aan beide kanten is gecoat met siliconen, is het gemakkelijk te hanteren, ook bij het vastzetten van het secundaire verband. Afhankelijk van de conditie van de wond kan Atrauman® Silicone meerdere dagen achtereen op de wond blijven. Na drie dagen moet het verband echter wel regelmatig worden geïnspecteerd om te voorkomen dat nieuw gevormd weefsel in het verband groeit.

### Materiaal

Netwerk van polyethyleentereftalaat (PET) met een siliconencoating aan beide zijden. Door de open netwerkstructuur kan wondvocht afvloeien naar het secundaire verband.

Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse IIb, steriel. Voorzien van een CE-markering volgen EU-richtlijn 93/42/EG.

### Indicatie en aanbrenging

Licht tot matig exsuderende wonden.

Als beschermende laag op niet-exsuderende wonden. Geschikt voor de gevoelige huid. Te combineren met NPWT.

Maak de wond schoon voordat u Atrauman® Silicone aanbrengt. Het is belangrijk dat de omliggende huid droog is. Kies een bij de wond passend formaat en knip het verband indien nodig op maat.



Omschrijving		Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>Atrauman® Silicone</b> Steriel, per stuk verpakt	5 x 7 cm	499 567	5 stuks	10 x 5 stuks	3406352
	5 x 7 cm	499 568	10 stuks	10 x 10 stuks	3406360
	7,5 x 10 cm	499 561	5 stuks	4 x 5 stuks	3164332
	7,5 x 10 cm	499 562	10 stuks	4 x 10 stuks	3406378
	10 x 20 cm	499 563	5 stuks	8 x 5 stuks	3164340
	10 x 20 cm	499 564	10 stuks	8 x 10 stuks	3406386
	20 x 30 cm	499 565	5 stuks	4 x 5 stuks	3164357

### Voordelen:

- Maakt het verwisselen van het verband minder pijnlijk
- Voorkomt dat het secundaire verband aan de wond hecht
- Beschermt het wondbed en de wondranden
- Door de geringe dikte van slechts 0,4 mm vormt het verband zich goed naar de wond
- Kan op maat worden geknipt
- Geschikt voor uiteenlopende indicaties

# Cosmopor® E

## Zelfhechtend absorberend verband

Voor het verzorgen van postoperatieve wonden is een verband nodig dat strak op de wond ligt, maar tevens lucht en vocht doorlaat en de huid laat ademen, zoals Cosmopor® E. Het zelfhechtende verband absorbeert wondexsudaat en biedt tegelijkertijd bescherming tegen contaminatie van buitenaf. Het verband is ook leverbaar in een niet-steriele versie: de Cosmopor®-strip, een kant-en-klare pleister in dezelfde kwaliteit, geleverd in een doos met 10 stuks. Geschikt voor lichte verwondingen waarvoor geen steriel verband vereist is.

### Eigenschappen

Cosmopor® E biedt dankzij het zachte oppervlak optimaal draagcomfort. Het product is lucht- en vochtdoorlatend, zodat de huid normaal kan functioneren. De synthetische lijm houdt het verband veilig op zijn plaats. De afgeronde hoeken van het product voorkomen dat de randen opkrullen en loslaten. De kleefranden van Cosmopor® E sluiten stevig rond de wond.

### Materiaal

Non-woven polyester met een wondkussen van viscose. Het wondkussen heeft een omhulsel van polyethyleengas, zodat het niet vasthecht aan de wond. De kleefranden zijn geprepareerd met een kleefmassa op synthetische basis zonder colofonium. Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse I, steriel. Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG.

### Indicatie en aanbrenging

Voor het verzorgen van postoperatieve wonden of ter bescherming van lichte verwondingen. Contra-indicaties: niet bekend.

### Instructies voor het aanbrengen

De huid moet droog zijn voor het aanbrengen van het verband.



Omschrijving		Wondkussen	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>Cosmopor® E</b> Steriel afzonderlijk verpakt	7,2 x 5 cm	4 x 2,5 cm	900 870	50 stuks	20 x 50 stuks	1642594
	10 x 6 cm	6,5 x 2,5 cm	900 871	25 stuks	27 x 25 stuks	1642602
	15 x 6 cm		900 872	25 stuks	18 x 25 stuks	1642610
	10 x 8 cm	6,5 x 3,8 cm	900 873	25 stuks	22 x 25 stuks	1642628
	15 x 8 cm	11 x 3,8 cm	900 874	25 stuks	14 x 25 stuks	1642636
	20 x 8 cm	16 x 3,8 cm	900 875	25 stuks	12 x 25 stuks	1642644
	20 x 10 cm	16 x 5,5 cm	900 876	25 stuks	12 x 25 stuks	1642651
	25 x 10 cm	20,5 x 5,5 cm	900 877	25 stuks	8 x 25 stuks	1642669
	35 x 10 cm	30,5 x 5,5 cm	900 878	25 stuks	8 x 25 stuks	1642677
	10 x 8 cm		900 893	10 stuks	20 x 10 stuks	1754225
	15 x 9 cm		900 899	10 stuks	20 x 10 stuks	1754258
	20 x 10 cm		900 895	10 stuks	20 x 10 stuks	1754241
	7,2 x 5 cm		900 891	10 stuks	20 x 10 stuks	1754217

### Voordelen:

- Lucht- en vochtdoorlatend
- De afgeronde hoeken voorkomen omkrullen
- Hecht niet aan de wond
- Veilige fixatie
- Eenvoudig in gebruik
- Laat geen kleverige resten achter
- Absorberend
- Bevat geen colofonium
- Hoog draagcomfort

# Cosmopor® I.V.

## Zelfhechtende canulefixatie

Cosmopor® I.V. wordt gebruikt voor het fixeren van canules en slangen voor zowel kort -als langdurig gebruik. Het product kan, indien nodig, tot wel 30 dagen achtereen op zijn plaats blijven. Licht absorberend.

### Eigenschappen

Cosmopor® I.V. biedt dankzij het zachte oppervlak optimaal draagcomfort. Het product is lucht- en vochtdoorlatend en zorgt er zo voor dat de huid normaal kan functioneren. De synthetische lijm houdt het verband veilig op zijn plaats. Het verband is ook geschikt voor langdurige fixatie en kan afhankelijk van de specifieke situatie tot wel 30 dagen blijven zitten. De afgeronde hoeken van het product voorkomen dat de randen oprullen en loslaten.

### Materiaal

Polyester. Wondkussen van viscose dat is bedekt met een niet-klevend polyethyleengas. Elke verpakking bevat bovendien een losse pad die onder de canule of slang wordt geplaatst om druk te vermijden.

Hypoallergene kleeflaag op basis van synthetisch rubber (drukgevoelige kleefstof, PSA). Bevat geen latex.

Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse 1, steriel. Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG

### Indicatie en aanbrenging

Voor het fixeren van intraveneuze canules en slangen op de huid.

Contra-indicaties: niet bekend.

### Instructies voor het aanbrengen

De huid moet droog zijn voor het aanbrengen van het verband.

### Voordelen:

- Zelfhechtende canulefixatie van zacht en kwalitatief hoogwaardig non-woven materiaal
- Zachte wond- en reliëfpad voor optimaal comfort
- Zeer goed fixatievermogen Veilige fixatie gedurende lange tijd
- Gemakkelijk te hanteren
- Laat geen kleverige resten achter
- Absorberend
- Bevat geen latex
- Optimaal draagcomfort
- Absorberend



Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>Cosmopor® I.V.</b> Steriel, per stuk verpakt	8 x 6 cm	900 805	50 stuks	8 x 50 stuks	1768746



# Cosmopor® Strip

## Hechtingspleisters

Traditioneel snelverband op rol, af te knippen.

### Eigenschappen

Cosmopor® Strip is een zelfklevend wondverband bestaande uit een non-woven drager en bedekt met een hypoallergene kleeflaag uit synthetisch rubber. De in strepen aangebrachte kleeflaag garandeert een uitstekende doorlaatbaarheid voor waterdamp. Centraal op de kleeflaag bevindt zich een continu wondkompres met niet-inklevende folie (kleeft niet in de wond).

### Materiaal

Drager: spun-laced non-woven polyester

Kleeflaag: op basis van synthetisch rubber

Wondkompres: viscose (polypropyleen en polyethyleen) 75%/25%

Niet-inklevende film: 100% polyethyleen

Bedekking: gesiliconeerd papier

Kleefkracht: min 13 N/25 mm (gedroogd oppervlak, trekhoek 90°)

### Indicatie en aanbrenging

Voor de bedekking van kleine wonden in de eerstehulpverlening. Polstering en bescherming tegen mechanische irritatie en infectie. De huid moet droog zijn voor het aanbrengen van het verband.

### Voordelen:

- Veilige fixatie
- Eenvoudig in gebruik
- Laat geen kleverige resten achter
- Absorberend
- Hoog draagcomfort



Omschrijving	Formaat	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>Cosmopor® Strip</b> Op rol, per stuk verpakt	4 x 10 cm	900 9602	10 stuks	78 x 10 stuks	2111540
	6 x 10 cm	900 9612	10 stuks	78 x 10 stuks	2108512
	8 x 10 cm	900 9622	10 stuks	78 x 10 stuks	2111573
	4 cm x 5 m	900 9632	1 stuk	32 x 1 stuk	2111532
	6 cm x 5 m	900 9642	1 stuk	24 x 1 stuk	2111557
	8 cm x 5 m	900 9652	1 stuk	16 x 1 stuk	2111565





# Coverflex® grip

## Buisverband

Coverflex® grip is een sterk wit buisverband. Coverflex® grip zorgt voor een stevige fixatie zonder aanvullende hulpmiddelen. Het verband kan, nadat het is verwijderd, gewoon opnieuw worden gebruikt, omdat het zijn elasticiteit behoudt. Biedt dezelfde compressie als een verband met gemiddelde elasticiteit, maar dan met een uniform drukeffect.

### Eigenschappen

Coverflex® grip is een gemakkelijk te gebruiken buisverband dat geen verdere fixatie vereist. Het verband blijft goed zitten en zakt niet af. De druk die Coverflex® grip genereert komt overeen met een gemiddelde compressie. Voor het onderzoeken van eventuele verwondingen kan het verband gemakkelijk worden verwijderd en weer aangelegd worden. Het buisverband is bijzonder huidvriendelijk door het hoge katoengehalte.

Coverflex® grip is wasbaar tot 60 °C en steriliseerbaar (stoom 134 °C).

### Materiaal

9% Elastan (latexvrij) 9% polyamide en 82% katoen.

### Indicatie en aanbrenging

Voor het fixeren van onderliggende verbanden in gevallen waarin ook compressie is vereist, bijvoorbeeld na thoracale of abdominale chirurgie, na een borstoperatie en als beschermend verband. Compressie, bijvoorbeeld bij oedeem. Ter ondersteuning en verlichting bij spier- en skeletaandoeningen. Ondersteuning met warmte-effect bij artrose.



Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>Coverflex® grip</b>	A 4 cm x 10 m	931 065	1 rol	36 x 1 rol	3729068
	B 6,25 cm x 10 m	931 066	1 rol	24 x 1 rol	3729076
	C 6,75 cm x 10 m	931 067	1 rol	24 x 1 rol	3729084
	D 7,5 cm x 10 m	931 068	1 rol	20 x 1 rol	3729092
	E 8,75 cm x 10 m	931 069	1 rol	18 x 1 rol	3729100
	F 10 cm x 10 m	931 070	1 rol	14 x 1 rol	3729118
	G 12 cm x 10 m	931 071	1 rol	14 x 1 rol	3729126
	J 18 cm x 10 m	931 072	1 rol	8 x 1 rol	3729134
	K 22 cm x 10 m	931 073	1 rol	8 x 1 rol	3729142
	L 32,5 cm x 10 m	931 074	1 rol	6 x 1 rol	3729159
	M 36 cm x 10 m	931 075	1 rol	6 x 1 rol	3729167

### Toepassing

Voor sterke, comprimerende fixatieverbanden; bijvoorbeeld bij thorax- en abdominaalchirurgie, voor verbanden na een mamma-operatie, bij grote schaafwonden ter preventie van wondrandooedeem resp. ter ontlasting van de wond; als steun- en ontlastingsverband bij beschadigingen aan het houdings- en bewegingsapparaat; als steunvend warmteverband bij artrose etc.

### Voordelen:

- Rekbaar in twee richtingen voor optimaal draagcomfort
- Gelijmatige druk
- Voor de Wet Wrap therapie
- Behandeling van atopisch eczeem
- Kleurcodering voor juiste afmeting

# Eycopad®

## Oogkompres

Eycopad® is een zacht kompres van katoen met een omhulsel van gaas. Het biedt zachte bescherming bij letsel in en rondom het oog.

### Eigenschappen

Eycopad® is een zacht kompres van katoen met een omhulsel van gaas. Het kompres is daardoor uitermate zacht en beschikt over een hoog absorptievermogen. Het gaas voorkomt dat het kompres pluist. Eycopad® dient voornamelijk ter bescherming van vochtige wonden in en rondom het oog.

### Materiaal

Het kompres is gemaakt van 100% katoen.

Het bestaat uit een omhulsel van 24-draads gaas dat is gevuld met katoen. De niet-steriele versie is geassocieerd als medisch hulpmiddel klasse I, niet-steriel. Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG. De steriele versie is geassocieerd als medisch hulpmiddel klasse I, steriel. Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG. Kan zo nodig worden gesteriliseerd met stoom, ethyleenoxide of gammastraling.

### Indicatie en aanbrenging

Te gebruiken als oogverband. Kan ook als oorverband worden gebruikt.

Contra-indicaties: niet bekend.

Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>Eycopad®</b> Steriel, afzonderlijk verpakt	56 x 70 mm	415 540	25 stuks	12 x 25 stuks	391995
	70 x 85 mm	417 540	25 stuks	12 x 25 stuks	392001
<b>Eycopad®</b> Niet steriel, in doos	56 x 70 mm	415 650	50 stuks	15 x 50 stuks	284406
	70 x 85 mm	417 650	50 stuks	15 x 50 stuks	*

\*Model niet beschikbaar in apotheek

### Voordelen:

- Hoog absorptievermogen
- Eenvoudig in gebruik
- Zacht, comfortabel voor de patiënt
- Economisch
- Beschermt de wond
- Zowel in een steriele als in een niet-steriele uitvoering leverbaar



# Grassolind®

## Zalfkompres met neutrale impregnering

Grassolind® neutraal bestaat uit wijdmazig katoenen weefsel, geïmpregneerd met een neutrale zalfmassa zonder actieve bestanddelen. Zij is derhalve geschikt voor de wondverzorging in de dermatologie bij patiënten met een gevoelige huid of overgevoeligheid voor geneesmiddelen en voor langdurige behandeling van slecht genezende wonden.

### Eigenschappen

Grassolind® neutraal houdt in alle fasen van de wondgenezing het wondoppervlak en de wondranden soepel en beschermt de wond tegen uitdroging.

Granulatieweefsel en re-epithelialisatie worden gestimuleerd, hinderlijke littekencontracturen worden op effectieve wijze voorkomen.

Het zalfkompres verkleeft niet met de wond. De verbandwisseling verloopt pijnloos. Granulatieweefsel en jong epitheel worden bij de verbandwisseling niet geïrriteerd.

Het wijdmazig katoenen weefsel maakt voldoende zuurstoftoevoer mogelijk en waarborgt een goede ventilatie. Secret kan onbelemmerd afvloeien, opeenhoping van vocht wordt voorkomen.

Bovendien kan het katoenen weefsel zonder problemen in kleinere stukken worden geknipt, b.v. als een veilige matrix voor huidtransplantaten.

Grassolind® neutraal leidt ook bij langdurige behandeling niet tot sensibilisatie of overgevoeligheid. Desgewenst kunnen wondenspecifiek noodzakelijke medicamenten te allen tijde worden toegevoegd.

### Materiaal

Grassolind® neutraal bestaat uit wijdmazig katoenen weefsel.

### Indicatie en aanbrenging

Voor een atraumatische verzorging en het soepel houden van oppervlakkige wonden, b.v. schaaf-, kneus-, brand-, schroei-, ets- en stralingswonden etc.; in de plastische en cosmetische chirurgie; bij nageextracties, phimosis operaties etc.

Voor het afdekken van huidtransplantatiewonden en ter fixatie van huidtransplantaten.



Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijsseenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>Grassolind®</b> Per stuk verpakt in doos	5 x 5 cm	499 310	10 stuks	40 x 10 stuks	1385756
	5 x 5 cm	499 350	50 stuks	12 x 50 stuks	1385764
	7,5 x 10 cm	499 313	10 stuks	20 x 10 stuks	811992
	7,5 x 10 cm	499 353	50 stuks	6 x 50 stuks	1255462
	10 x 10 cm	499 354	50 stuks	6 x 50 stuks	1738897
	10 x 10 cm	499 314	10 stuks	20 x 10 stuks	895318
	10 x 20 cm	499 336	30 stuks	10 x 30 stuks	814996

Ideaal in de dermatologie bij patiënten met een overgevoeligheid voor geneesmiddelen alsmede voor langdurige behandeling van slecht genezende wonden, juist omdat in deze gevallen gevaar bestaat voor sensibilisatie. Fixatie van het verband in combinatie met een absorberend verband door middel van de volvlakpleister OmniFix® elastic of zwachtel Peha-haft®.

### Voordelen:

- Tal van toepassingsmogelijkheden
- Luchtdoorlatend
- Bevat geen latex

# HydroClean® advance

## Hydroactief wondverband

HydroClean® advance reinigt de wonde doeltreffend en activeert het genezingsproces.

De wondcontactlaag bestaat uit een polypropyleen tricot waarop silicone strips werden aangebracht. De wondcontactlaag en de silicone strips voorkomen verkleving met het wondbed. Aan de zijde die niet op de wond wordt gelegd voorkomt een waterdichte polypropyleenfolie, bedekt met een hydrofoob polypropyleen non-woven de vroegtijdige uitdroging van wondverband. Hierdoor kan er gedurende drie dagen vocht aan het wondbed worden afgegeven, terwijl de polypropyleen folie voorkomt dat de buitenzijde van het wondverband doornat wordt. Door de bijzondere eigenschappen en werking geeft HydroClean® advance drie dagen Ringer-oplossing aan de wonde af. Gedurende deze periode wordt hier een interactieve en continue wondspoeling geactiveerd terwijl het wondverband gelijktijdig het wondexsudaat absorbeert. Het SAP van HydroClean® advance inactieveert de matrixmetalloproteases (MMP) die het genezingsproces verstoren. Zo kan een stagnerend genezingsproces bij chronische wonden opnieuw worden geactiveerd.

### Eigenschappen

HydroClean® advance is een hydroactief wondverband met als centraal bestanddeel een super absorberend polyacrylaat (SAP) dat door cellulose- en celstofvezels omringd is en geactiveerd (vooraf bevochtigd) wordt met Ringer oplossing.

### Materiaal

Omhulsel: interlocktricot uit polypropyleen vezels (met groene strepen op de zijde die niet op de wond wordt gelegd).

Beschermfolie: waterdichte polypropyleen folie

Absorptiekern: Airlaid uit superabsorberend polyacrylaat, celstof en polypropyleen vezels, geactiveerd met Ringer-oplossing – United States Pharmacopoeia

### Indicatie en aanbrenging

Voor de natte/vochtige behandeling van alle wonden en in het bijzonder deze met een slechte genezigstendens. HydroClean® advance is vooral geïndiceerd bij de behandeling van chronische en slecht genezende wonden in de reinigings- en granulatiefase. Daarenboven kan HydroClean® advance voor het opnieuw activeren van een stagnerend genezingsproces worden toegepast, indien dit door een te hoge MMP activiteit wordt veroorzaakt.



Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijsseenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>HydroClean® advance</b> PHMB, Steriel	Diameter 4 cm	609 762	10 stuks	6 x 10 stuks	3700028
	Diameter 5,5 cm	609 766	10 stuks	6 x 10 stuks	3700036
	Ovaal 8 X 4 cm	609 764	10 stuks	6 x 10 stuks	3700044
	7,5 X 7,5 cm	609 768	10 stuks	6 x 10 stuks	3699899
	10 X 10 cm	609 772	10 stuks	6 x 10 stuks	3700051

### Voordelen:

- Actieve, snelle en efficiënte wondreiniging
- Bindt de bacteriën in het verband
- De-activering van factoren die de wondheling remmen (protease)
- Bevordert de granulatie
- Minder pijn bij de verbandwissel
- werkt tot 3 dagen
- Geen gekende tegenindicaties en dus bruikbaar voor alle wonden

# Hydrocoll®

## Hydrocolloïd verband

In de granulatiefase bevordert Hydrocoll® de vorming van nieuw weefsel door de activiteit van fibroblasten te stimuleren. Vanwege het hoge aandeel hydroactieve colloïden heeft Hydrocoll® een extra hoog absorptievermogen en is het ook geschikt voor exsuderende wonden. Exsudaat wordt snel opgenomen en vastgehouden in de structuur van het verband. Op deze manier kan de microcirculatie in het wondgebied worden verhoogd, wat weer helpt bij het activeren van de lichaamseigen reinigingsmechanismen, vooral in het geval van chronische aandoeningen en een langzamer verlopende genezing.


### Eigenschappen

Hydrocoll® is een zelfklevend, absorberend hydrocolloïdenverband dat is bedekt met een semipermeabele polyurethaanfilm die voorkomt dat bacteriën en vocht binnendringen. Door het absorberen van wondexsudaat zwellen de hydrocolloïdale deeltjes op en vormen een gel die de wondholte opvult en een vochtig wondmilieu in stand houdt. De gel blijft exsudaat absorberen totdat de hydrocolloïden verzadigd zijn. De bovenzijde zwelt op en het verband is verzadigd als de verhoging ongeveer 1 cm boven de rand uitkomt. De gelvormige laag aan de onderzijde van de pleister voorkomt dat Hydrocoll® aan de wond vastplakt. Het verband kan pijnloos worden verwijderd zonder de granulatie en het nieuw gevormde weefsel te beschadigen. De bovenste laag fungeert als een veilige barrière tegen bacteriën en beschermt de wond tegen infectie en binnendringend vocht. De patiënt kan met de pleister douchen en baden. Hydrocoll® laat geen uv-A- of uv-B-straling door. Hydrocoll® thin heeft een lichtere absorptiecapaciteit (ca. 50%) en is vooral geschikt voor de epithelisatiefase. In de epithelisatiefase bevordert Hydrocoll® thin door het vochtige wondmilieu de celdeling en celmigratie in het epitheel. De verbandwisselintervallen kunnen in deze fase worden verlengd tot maximaal zeven dagen. Het controleren van de wondomgeving wordt vergemakkelijkt door de transparante wondbedekker. Beide wondbedekkers en met name Hydrocoll® thin kunnen ook worden toegepast in het kader van een occlusietherapie bij verschillende huidaandoeningen, maar altijd onder toezicht van een arts.

### Materiaal

De pleisters bestaan uit synthetische elastomeren en natriumcarboxymethylcellulose (NaCMC) in matrixstructuur, bedekt met een semipermeabele polyurethaanfilm. De pleisters bevatten geen gelatine of colofonium. De standaard pleister is 0,67 mm dik en de thin-versie 0,37 mm. Het product is geïndiceerd als medisch hulpmiddel klasse IIb, steriel. Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG.

Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijs-eenheid	Verzend-eenheid	CNK
<b>Hydrocoll®</b> , hydrocolloïd verband	10 x 10 cm	900 744	10 stuks	20 x 10 stuks	1629542
	15 x 15 cm	900 748	5 stuks	16 x 5 stuks	1629559
	20 x 20 cm	900 749	5 stuks	16 x 5 stuks	1629567
<b>Hydrocoll® sacraal</b> , hydrocolloïd verband	12 x 18 cm	900 755	5 stuks	16 x 5 stuks	1629385
<b>Hydrocoll® thin</b> , hydrocolloïd verband	10 x 10 cm	900 758	20 stuks	20 x 20 stuks	1629328
	15 x 15 cm	900 760	5 stuks	16 x 5 stuks	1629344
<b>Hydrocoll® concave</b>	8 x 12 cm	900 756	10 stuks	20 x 10 stuks	1629013

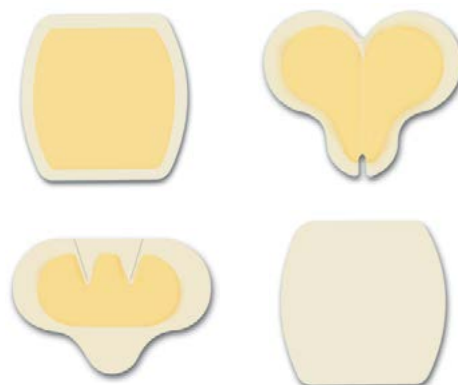

### Indicatie

Voor de behandeling van chronische, langzaam genezende wonden, bijvoorbeeld veneuze beenulcera of decubitus. Ook geschikt voor graftlocaties of de behandeling van brandwonden tot graad 2a. Contra-indicaties: Hydrocoll® mag niet worden gebruikt op blootliggend bot- en spierweefsel en pezen en ook niet bij klinisch geïnfecteerde wonden of diabetische ulcera.

### Voordelen:

- Hoog absorptievermogen
- Eenvoudig in gebruik
- Absorptie over het gehele wondoppervlak
- Kan op maat worden geknipt
- Transparant
- Zacht en goed te draperen
- Bevat geen colofonium of gelatine

# Hydrofilm®

## Zelfklevende, transparante wondfolie

Hydrofilm® is een zelfklevende transparante wondfolie die op de eerste plaats zorgt voor een veilige bescherming van de wond tegen secundaire infecties.

### Eigenschappen

Hydrofilm® laat geen bacteriën door, is waterdicht en gelijktijdig doorlaatbaar voor zuurstof en waterdamp. De wondfolie vormt aldus een effectieve barrière tegen infecties zonder dat de huidademhaling belemmerd wordt. Huidirritaties in de omgeving van de wond worden voorkomen.

Hydrofilm® is huidvriendelijk en bezit een hypoallergene kleeflaag die ook door patiënten met een extreem gevoelige huid goed verdragen wordt.

Ondanks de stevige hechting laat de wondfolie zich pijnloos verwijderen, zonder beschadiging van nieuw gevormd epitheel.

De vliedunne elastische wondfolie sluit goed aan op alle lichaamsdelen.

De klevende onderlaag is voorzien van stevige beschermfolie. Een eenvoudige applicatie, zelfs met handschoenen, is gewaarborgd.

De transparantie van Hydrofilm® maakt op ieder gewenst moment inspectie van de wond en de omringende huid en van katheter- en canulefixatie mogelijk.

Het waterdichte materiaal vereenvoudigt de dagelijkse lichaamsverzorging; douchen met het verband is goed mogelijk.

### Materiaal

Drager: semipermeabele, transparante polyurethaanfolie

Lijm: acryllijm, hypoallergeen, bevat geen colofonium

Applicatiehulp: tweedelige folie uit polyester

Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijs-eenheid	Verzend-eenheid	CNK
<b>Hydrofilm®</b> Steriel, afzonderlijk verpakt	6 x 7 cm	685 755	10 stuks	20 x 10 stuks	2413730
	6 x 7 cm	685 756	100 stuks	10 x 100 stuks	2413748
	10 x 12,5 cm	685 757	10 stuks	20 x 10 stuks	2413755
	10 x 12,5 cm	685 758	100 stuks	10 x 100 stuks	2413763
	10 x 15 cm	685 759	10 stuks	10 x 10 stuks	1141886
	10 x 15 cm	685 760	50 stuks	10 x 50 stuks	1141894
	15 x 20 cm	685 761	10 stuks	10 x 10 stuks	2413771
	15 x 20 cm	685 762	50 stuks	10 x 50 stuks	2413789
	10 x 25 cm	685 763	25 stuks	10 x 25 stuks	2413797
	12 x 25 cm	685 764	25 stuks	10 x 25 stuks	2413805
20 x 30 cm	685 765	10 stuks	10 x 10 stuks	2413813	

### Indicatie en aanbrenging

Ter bescherming van droge, primair genezende wonden en bijna geheele epitheelbeschadigingen, tegen secundaire infecties en mechanische irritaties;

bij katheter- en canulefixatie.

Ideaal ter afdekking van gelvormige calciumalginatkompressen, zoals Sorbalgon®, op oppervlakkige, sterk secernerende wonden.

Niet toepassen als directe wondbedekker bij klinisch geïnfecteerde, bloedende of sterk secernerende wonden.

Hydrofilm als bedekking op een wond om het risico van secundaire infectie te verminderen en om te beschermen tegen fysieke beschadiging op droge, primair genezende wonden en bijna genezen epitheelletsels; om katheters of canules te fixeren; ideaal als secundair verband, bv. om gelvormende calciumalginatverbanden te bedekken.

### Voordelen:

- Veilige bescherming van de wond
- Eenvoudig in gebruik
- Bevat geen colofonium
- Dermatologisch getest
- Transparant



# Hydrofilm® roll

## Transparante wondfolie op spoel

Hydrofilm® roll is een zelfklevend transparant folieverband voor eenvoudige verbandfixatie. Hydrofilm roll bevordert een effectieve wondgenezing en is daarnaast huidvriendelijk en uiterst eenvoudig in gebruik.

### Eigenschappen

Door de dunne, transparante folie kan de huid rond de wond worden geobserveerd zonder dat het verband verwisseld hoeft te worden. Dankzij deze eigenschap wordt het genezingsproces zo min mogelijk verstoord. Omdat Hydrofilm® roll geen vocht en bacteriën doorlaat, is het risico van een secundaire infectie minimaal. Hierdoor is het ook mogelijk om met het verband in bad te gaan of te douchen. De kleeflaag van het folieverband beschikt over een krachtig kleefvermogen waardoor het verband langdurig op zijn plaats blijft, maar het kan nog steeds worden verwijderd zonder dat lijmresten op de huid achterblijven.

### Materiaal

Semipermeabele polyurethaanfolie met een hypoallergene kleeflaag van acrylaat. Bevat geen colofonium. Het product is geïndiceerd als medisch hulpmiddel, klasse I, niet steriel. Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG.

### Indicatie

Te gebruiken als postoperatief en primair verband, ter bescherming van niet-vochtige wonden en voor fixatiedoelinden. Bijvoorbeeld voor het vastzetten van canules, dekverbanden voor gel en calciumalginaten en als bescherming tegen mechanische irritaties. Contra-indicaties: Hydrofilm® roll mag niet worden gebruikt op geïnfecteerde, bloedende of exsuderende wonden.

### Voordelen:

- Waterdicht en ondoordringbaar voor bacteriën
- Kan gemakkelijk op de benodigde lengte worden afgeknipt
- Transparant Veilige bescherming van de wond
- Eenvoudig in gebruik
- Bevat geen colofonium
- Dermatologisch getest
- Transparant

Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prij- seen- heid	Verzend- eenheid	CNK
<b>Hydrofilm® roll</b> Niet steriel, per stuk verpakt	5 cm x 10 m	685 790	1 stuk	24 x 1 stuk	2569002
	10 cm x 2 m	685 791	1 stuk	24 x 1 stuk	2569010
	10 cm x 10 m	685 792	1 stuk	32 x 1 stuk	2569028
	15 cm x 10 m	685 793	1 stuk	20 x 1 stuk	2569036



# Hydrofilm® Plus

## Transparante wondfolie met absorptiekussen

Hydrofilm® Plus is een zelfhechtend, transparant folieverband met een absorberend wondkussen dat niet aan de wond plakt. Exsudaat wordt snel en veilig geabsorbeerd, waardoor de wond vrij blijft van wondsecreet dat de wond kan contamineren. Dankzij deze eigenschappen maakt Hydrofilm® Plus een effectieve wondverzorging mogelijk, die huidvriendelijk is en veel gebruiksgemak biedt.

### Eigenschappen

Dankzij de dunne, transparante film kan de huid rond de wond worden geïnspecteerd zonder dat het verband verwisseld hoeft te worden. Het witte wondkussen laat zien hoe het exsudaat wordt geabsorbeerd en wanneer het tijd is om het verband te verschonen. Dankzij deze eigenschappen wordt het genezingsproces zo min mogelijk verstoord. Omdat Hydrofilm® Plus geen vocht en bacteriën doorlaat, is het risico van een secundaire infectie minimaal. Hierdoor is het ook mogelijk om met het verband in bad te gaan of te douchen. De folie heeft een mat oppervlak dat geen licht reflecteert en is daardoor nagenoeg onzichtbaar. De hoeken van Hydrofilm® Plus zijn afgerond, zodat het verband stevig op zijn plaats blijft. Het hechtvermogen en de kleeflaag zijn sterk genoeg om het verband langdurig op zijn plaats te houden. De gebruiksduur wordt bepaald door de staat en het type van de wond.

### Materiaal

Semipermeabele polyurethaanfolie met een hypoallergene kleefmassa van acrylaat. Absorptiekussen van viscosevezels met een omhulsel van polyethyleengaas. Bevat geen colofonium.

Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel uit klasse IIa, steriel. Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG.

### Indicatie

Te gebruiken als steriel postoperatief en primair verband, ter bescherming van wonden met geringe exsudatie.

Contra-indicaties: Hydrofilm® Plus mag niet worden gebruikt op geïnfecteerde wonden, hevig bloedende wonden en wonden die grote hoeveelheden exsudaat afscheiden.

Omschrijving	Afmeting	Wondkussen	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>Hydrofilm® Plus</b> Steriel, afzonderlijk verpakt	5 x 7,2 cm	2,5 x 4 cm	685 770	5 stuks	20 x 5 stuks	2413821
	5 x 7,2 cm	2,5 x 4 cm	685 771	50 stuks	10 x 50 stuks	2413839
	9 x 10 cm	4 x 6 cm	685 772	5 stuks	20 x 5 stuks	2413847
	9 x 10 cm	4 x 6 cm	685 773	50 stuks	10 x 50 stuks	2413854
	9 x 15 cm	4 x 11 cm	685 774	5 stuks	20 x 5 stuks	2413862
	9 x 15 cm	4 x 11 cm	685 775	25 stuks	10 x 25 stuks	2413870
	10 x 12 cm	5 x 8 cm	685 776	25 stuks	10 x 25 stuks	2413888
	10 x 20 cm	5 x 16 cm	685 777	5 stuks	10 x 5 stuks	2413896
	10 x 20 cm	5 x 16 cm	685 778	25 stuks	10 x 25 stuks	2413904
	10 x 25 cm	5 x 20 cm	685 779	25 stuks	10 x 25 stuks	2413912
	10 x 30 cm	5 x 25 cm	685 780	25 stuks	10 x 25 stuks	2413920



### Instructies voor het aanbrengen

De huid moet droog zijn voor het aanbrengen.

### Voordelen:

- Waterdicht en ondoordringbaar voor bacteriën
- Ademend
- Absorberend wondkussen Veilige bescherming van de wond
- Eenvoudig in gebruik
- In 7 maten verkrijgbaar
- Dermatologisch getest



# Hydrosorb® (comfort)

## Transparant gelverband

Bij het behandelen van droge chronische wonden werkt Hydrosorb als weekmaker, die eventueel aanwezig necrotisch weefsel oplost en absorbeert. Als exsudaat wordt opgesloten in het verband, ontstaat in de wond een beter genezingsmilieu. Door de vochtige omgeving die wordt gecreëerd, kunnen de nieuw gevormde cellen zich snel over de wond verspreiden en nieuw weefsel ontwikkelen. Het verband is zacht, gemakkelijk te draperen en biedt een hoge mate van draagcomfort.

### Eigenschappen

Hydrosorb® creëert een vochtige wondomgeving en is geschikt voor de behandeling van chronische wonden. In de granulatiefase bevordert Hydrosorb de vorming van nieuw weefsel. Met Hydrosorb® kan indien nodig langdurig een vochtig wondmilieu worden gehandhaafd. Het verband kan, afhankelijk van de staat van de wond, tot 7 dagen blijven zitten. In de epithelisatiefase bevordert Hydrosorb® door het vochtige wondmilieu de celdeling en celmigratie. Hydrosorb® lost necrotisch weefsel op en absorbeert het. Het verband kan worden verwisseld zonder het nieuw gevormde weefsel te irriteren en zonder pijn en ongemak voor de patiënt, omdat het verband niet aan de wond hecht. Omdat Hydrosorb® transparant is, kan de wond eenvoudig worden geïnspecteerd zonder dat het verband moet worden verwisseld. Door de zacht-elastische eigenschappen van gel beschermt Hydrosorb® de wond optimaal tegen invloeden van buitenaf.

### Materiaal



Hydrogelverband dat is bedekt met een semipermeabel polyurethaanlaagje. De hydrogel bestaat uit polyurethaan in een matrixstructuur die voor 60% uit water bestaat. Hydrosorb® comfort is voorzien van een kleefmassa op basis van acrylaat. Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse IIb, steriel. Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG.

### Indicatie en aanbrenging

Voor de behandeling van slecht genezende, chronische wonden met een geringe hoeveelheid exsudaat, bijvoorbeeld beenulcera of decubitus. Kan ook worden gebruikt voor brandwonden tot graad 2a en graftlocaties. Ideaal voor preventie en behandeling van radiodermieten.

Contra-indicaties: mag niet worden gebruikt bij een bestaande klinische infectie of brandwonden van de 3e graad. Bij gebruik van gel moet de wond worden bedekt met een laag gel en worden beschermd met een geschikt dekverband.

Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>Hydrosorb®</b> Steriel, afzonderlijk verpakt	5 x 7,5 cm	900 853	5 stuks	6 x 5 stuks	1308451
	10 x 10 cm	900 854	5 stuks	6 x 5 stuks	1308469
	20 x 20 cm	900 855	3 stuks	5 x 3 stuks	1308477
<b>Hydrosorb® Comfort</b> Steriel, afzonderlijk verpakt	4,5 x 6,5 cm	900 702	5 stuks	12 x 5 stuks	1522846
	7,5 x 10 cm	900 706	5 stuks	6 x 5 stuks	1427814
	12,5 x 12,5 cm	900 723	5 stuks	6 x 5 stuks	1427822

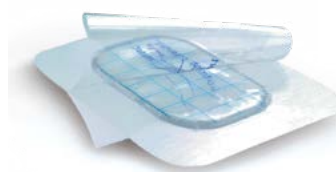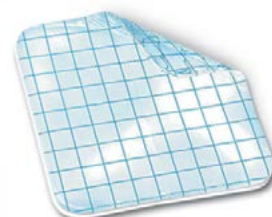

Voor het fixeren van Hydrosorb® kan ieder type fixatieverband worden gebruikt. Hydrosorb® comfort is voorzien van een kleefrand die het verband op zijn plaats houdt. Hydrosorb® is voorzien van een transparante documentatiefolie waardoor het genezingsproces gemakkelijk te volgen is. Op de folie kan de naam van de patiënt, de datum en de grootte van de wond worden aangegeven om deze gegevens later over te nemen in het patiëntendossier.

### Voordelen:

- Hydrosorb® comfort heeft een brede kleefrand om de fixatie te vergemakkelijken.
- Bestaat voor 60% uit water
- Koelend effect
- Transparant om observatie toe te laten
- Reinigend
- Eenvoudig in gebruik
- Zeer comfortabel voor de patiënt
- Beschermt de wond
- Vereenvoudigt de documentatie

# Hydrosorb® Gel

## Reinigende gel

Hydrosorb® Gel is een heldere, viskeuze gel op basis van Ringer-oplossing en glycerine. De gel ondersteunt een autolytische reiniging van de wond. Doorgaans wordt het zelfreinigende vermogen van de wond gestimuleerd als een vochtig wondmilieu wordt gehandhaafd. Samen met de gel wordt ook opgelost necrotisch materiaal verwijderd. Hydrosorb® Gel kan met alle verbandsoorten worden gecombineerd.

### Eigenschappen

Door de spuit is het product perfect te doseren, de gel wordt direct op de wond aangebracht, zonder te kleven en in de juiste hoeveelheid, en minimaliseert zo het risico dat er iets mis gaat.

Dankzij het hydroactieve effect kunnen wonden met Hydrosorb® Gel snel worden gereinigd. De gel kan met allerlei verbandsoorten worden gecombineerd en beperkt de pijn bij het verwisselen van het verband. Zowel de hoeveelheid gel die op de wond is aangebracht als de hoeveelheid die in de spuit is achtergebleven, is gemakkelijk af te lezen door de dubbele meetscala op de spuit. Door het gebruiksgemak van de spuit en de eenvoudige dosering is het gebruik van Hydrosorb® Gel tijdbesparend. In tegenstelling tot een tube, waarbij altijd gel in de vouwen en randen achterblijft, kan de Hydrosorb® Gelspuit volledig worden geleegd. De spuit is ook eenvoudig te hersluiten, als de behandeling om een of andere reden moet worden onderbroken.

### Materiaal

Gelsamenstelling: hydroxyethylcellulose (HEC), carboxymethylcellulose (CMC), Carbomeer (verdikkingsmiddel, synthetische polymeer). Vloeistof: Ringer-vloeistof. Weekmaker: glycerine.

Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse IIb, steriel. Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG.

Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>Hydrosorb® Gel</b> Steriel, afzonderlijk verpakt	8 g	900 843	5 stuks	10 x 5 stuks	2422392
	15 g	900 844	10 stuks	10 x 5 stuks	2155125



### Indicatie en aanbrenging

Voor autolytische reiniging van oppervlakkige en diepe wonden met geringe exsudatie, bijv. beenulcera, decubitus of brandwonden tot graad 2b. Contra-indicaties: voorzichtigheid is geboden bij diepe wonden met nauwe openingen, type fistel, omdat de gel in dat geval wellicht moeilijk te verwijderen is.

De wond bedekken met een 5 mm dikke laag gel en een geschikt dekverband aanbrengen.

### Voordelen:

- Veilige dosering
- Flexibel en pijnloos
- Vergemakkelijkt de documentatie
- Eenvoudig in gebruik, tijdbesparend
- Economisch

# HydroTac®

## Hydrofiel schuimverband

Schuimverband met aan de wondzijde een netvormige hydrogellaag en waterdampdoorlatende, vocht- en kiemdichte polyurethaan afdeklaag; het absorberende schuim neemt overvloedig wondexsudaat snel op zonder de wond uit te drogen; bij relatief droge wonden geeft het hydrogel vocht af en ondersteunt de opbouw en handhaving van het vochtige wondmilieu, waardoor granulatie en epithelisering versneld worden; het verband is zacht en plooibaar, beschikt over een goede polsterwerking en kan pijnloos verwijderd worden; ook met fixatiefolie verkrijgbaar.

### Eigenschappen

Hydro-responsief wondverband met AquaClear-geltechnologie voor een snellere sluiting van de wond. AquaClear-geltechnologie zorgt voor een optimaal wondmilieu en ondersteunt het natuurlijke genezingsproces van het lichaam.

Snel: 23.5% snellere epithelisatie dan bij een siliconen wondcontactlaag.

Actief: 3 keer hogere concentratie van groeifactoren

Effectief: houdt met behulp van de AquaClear-geltechnologie een vochtig wondmilieu in stand

### Materiaal

De netvormige hydrogel op de wondzijde van het verband zorgt ervoor dat relatief droge wonden vochtig blijven.

Het hydrofiel schuim van polyurethaan neemt overtollig exsudaat effectief op en houdt het vast.

De bovenlaag van polyurethaan vormt een betrouwbare bescherming tegen bacteriën en water. Dankzij de flexibele doorlating van waterdamp wordt de absorptie van exsudaat door het verband aangepast aan de conditie van de wond.


### Indicatie en aanbrenging

Het licht zelfhechtende effect vergemakkelijkt de behandeling door een voorfixatie op de huid, voor een langdurige fixatie moeten geschikte producten gebruikt worden zoals hypoallergene fixatiepleisters of -verbanden.

Voor de wondbehandeling van gering tot matig exsuderende wonden in de granulatie- en epitheliseringsfase, zoals bij ulcus cruris, diabetisch voetsyndroom en decubitus; voor het verzorgen van verbrandingen tot graad 2a.

Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijs-eenheid	Verzend-eenheid	CNK
HydroTac® wondverband Steriel, per stuk verpakt	diameter 6 cm	685 848	3 stuks	12 x 3 stuks	*

\*Model niet beschikbaar in apotheek

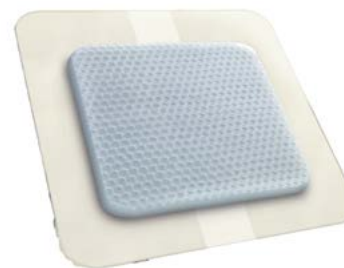

### Voordelen:

- Houdt een optimaal vochtig wondmilieu in stand
- Ondersteunt het natuurlijke genezingsproces van het lichaam
- Snellere sluiting van de wond
- Hogere concentratie van groeifactoren
- Gemakkelijk en hygiënisch aan te brengen dankzij "Initial Tack".
- Geschikt voor relatief droge en exsuderende wonden.
- Houdt de vochtige wondomgeving op peil dankzij de AquaClear-technologie.
- Absorbeert goed en voorkomt maceratie, dus zeer huidvriendelijk.
- Hoog draagcomfort dankzij het flexibele zachte schuim en de dunne hechtlaag.
- Vrijwel pijnloos te verwijderen, omdat de gel verkleving van het verband aan de wond tot een minimum beperkt.
- Het verband blijft lang genoeg op de wond om tijd en kosten te besparen.
- Tal van toepassingsmogelijkheden en veilig in gebruik.

# Idealast®

## Korte-rek-compressiezwachtel

Idealast® heeft dezelfde eigenschappen als een korte-rek-compressiezwachtel, met als enige verschil dat dit product zijn elasticiteit niet verliest tijdens het gebruik. Hierdoor kan Idealast voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt en heeft het product een hoge economische waarde, omdat de zwachtel meerdere keren kan worden gebruikt.

### Eigenschappen

De permanent elastische zwachtel verliest geen elasticiteit tijdens gebruik. De zwachtel geeft een hoge werkdruk en een lage rustdruk en is dus ook geschikt voor personen die voornamelijk zitten. Normaliter kan de zwachtel 's nachts worden verwijderd en 's ochtends opnieuw worden aangebracht. Om het beste resultaat te bereiken, verdient het aanbeveling dunne benen eerst in watten te wikkelen tot ze een normale dikte hebben.

### Materiaal

69% katoen, 31% polyamide. Wit.

Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse I, niet steriel. Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG.

Lengte uitgerekt: 5 m, lengte niet-uitgerekt: ca 2,8 m, elasticiteit: 80%.

### Indicatie

Voor matige compressie in het kader van een profylaxe of follow-up bij veneuze klachten of als ondersteuning/verlichting bij musculoskeletaal letsel of letsel van de gewrichtsbanden. Voor het fixeren van verbanden of gipsspalken. Als sportbandage. Contra-indicaties: arteriële occlusieve ziekte.



Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>Idealast®</b> Per stuk verpakt in doos, met haak	5 m x 6 cm	931 143	10 x 1 stuks	160 x 1 stuk	815704
	5 m x 8 cm	931 144	10 x 1 stuks	120 x 1 stuk	816421
	5 m x 10 cm	931 145	10 x 1 stuks	100 x 1 stuk	816314
	5 m x 12 cm	931 146	10 x 1 stuks	80 x 1 stuk	815993
	5 m x 15 cm	931 147	1 stuks	148 x 1 stuk	816470
	5 m x 20 cm	931 148	1 stuks	36 x 1 stuk	816736
<b>Idealast®</b> Per stuk verpakt in doos	5 m x 6 cm	931 153	1 stuks	120 x 1 stuk	3529062
	5 m x 8 cm	931 154	1 stuks	90 x 1 stuk	3529070
	5 m x 10 cm	931 155	1 stuks	72 x 1 stuk	3529088
	5 m x 12 cm	931 156	1 stuks	60 x 1 stuk	3529096
	5 m x 15 cm	931 157	1 stuks	48 x 1 stuk	*
	5 m x 20 cm	931 158	1 stuks	36 x 1 stuk	*

### Wasinstructies

Idealast® is autoclaveerbaar op 134 °C en kan een aantal keren worden gewassen op 60 °C.

### Voordelen:

- Verliest geen elasticiteit tijdens gebruik
- Het open geweven materiaal is luchtdoorlatend
- Optimaal draagcomfort
- Permanent elastisch
- Tal van toepassingsmogelijkheden
- Geschikt voor hergebruik
- Sterk
- Stevige randen

\*Model niet beschikbaar in apotheek

# Idealast®-haft

## Elastische zwachtel

Idealast® -haft is een cohesieve duurzaam elastische zwachtel met korte rek, ongeveer 90% rekbaar. Het cohesief effect aan weerszijden zorgt voor een perfecte aanleg van het verband. Goede arbeidsdruk en matige rustdruk, luchtdoorlaatbaar, steriliseerbaar (stoom op 134°C), radiotransparant, wit.

### Eigenschappen

Het permanent elastische windsel verliest zijn elasticiteit niet tijdens gebruik. Het verband geeft een hoge werkdruk en een lage rustdruk en is dus ook geschikt voor personen die voornamelijk zitten. Normaliter kan de zwachtel 's nachts worden verwijderd en 's ochtends opnieuw worden aangebracht. Om het beste resultaat te bereiken, verdient het aanbeveling dunne benen eerst in watten te wikkelen tot ze een normale dikte hebben.

### Materiaal

93 % katoen, 5 % polyamide, 2 % elastaan speciale impregnatie zonder latex  
Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse I, niet steriel. Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG.  
Lengte uitgerekt: 5 m, lengte niet-uitgerekt: ca 2,8 m, elasticiteit: 80%.

### Indicatie en aanbrenging

Voor lichte tot middelmatige compressie; ter profylaxe en nabehandeling van veneuze aandoeningen; als steunegend en ontlastend verband bij letsels van het houdings- en bewegingsapparaat; als sportverband; als wonddrukverband en voor het aanleggen van spalken.

Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>Idealast®-haft</b> Per stuk verpakt in doos	4 m x 6 cm	931 110	1 stuks	40 x 1 stuk	0476564
	4 m x 8 cm	931 111	1 stuks	40 x 1 stuk	0476572
	4 m x 10 cm	931 112	1 stuks	40 x 1 stuk	0481929
	4 m x 12 cm	931 113	1 stuks	40 x 1 stuk	0498741
	10 m x 6 cm	931 114	1 stuks	20 x 1 stuk	0393181
	10 m x 8 cm	931 115	1 stuks	20 x 1 stuk	0260141
	10 m x 10 cm	931 116	1 stuks	20 x 1 stuk	496133
	10 m x 12 cm	931 117	1 stuks	20 x 1 stuk	0393199



### Voordelen:

- Eenvoudig in gebruik
- Permanent elastisch
- Tal van toepassingsmogelijkheden
- Geschikt voor hergebruik
- Sterk
- Stevige randen

# Idealast®-haft colour

## Elastische zwachtel

Cohesief, permanent elastisch windsel van katoen. De elasticiteit bedraagt ongeveer 90% en gaat niet verloren tijdens het gebruik. Cohesief aan beide kanten - voor een eenvoudige en perfecte fixatie. Hoge werkdruk en lage rustdruk. Ook te gebruiken voor personen met een sedentaire levensstijl. Luchtdoorlatend. Steriliseerbaar (autoclaaf bij 134 °C). Verkrijgbaar in de kleuren blauw en rood.

### Eigenschappen

Het permanent elastische windsel verliest zijn elasticiteit niet tijdens gebruik. Het verband geeft een hoge werkdruk en een lage rustdruk en is dus ook geschikt voor personen die voornamelijk zitten. Normaliter kan de zwachtel 's nachts worden verwijderd en 's ochtends opnieuw worden aangebracht. Om het beste resultaat te bereiken, verdient het aanbeveling dunne benen eerst in watten te wikkelen tot ze een normale dikte hebben.

### Materiaal

93% katoen, 5% polyamide, 2% elastaan. Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel, klasse I, niet steriel. Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG.

Lengte uitgerekt: 4 m, lengte niet-uitgerekt: ca 2,45 m, elasticiteit: 90%.

Bevat geen latex.

### Indicatie en aanbrenging

Voor matige compressie in kader van een profylaxe of follow-up bij veneuze klachten of als ondersteuning/verlichting bij musculoskeletaal letsel of letsel van de gewrichtsbanden. Voor het fixeren van verbanden of gipsspalken. Als sportbandage.

Contra-indicaties: arteriële occlusieve ziekte.

Omschrijving	kleur	Afmeting	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>Idealast®-haft colour</b> Per stuk verpakt in cellofaan in doos	Blauw	4 m x 4 cm	931 090	1 stuks	70 x 1 stuk	3070703
	Blauw	4 m x 6 cm	931 091	1 stuks	48 x 1 stuk	3070711
	Blauw	4 m x 8 cm	931 092	1 stuks	27 x 1 stuk	3070729
	Blauw	4 m x 10 cm	931 093	1 stuks	30 x 1 stuk	3070737
<b>Idealast®-haft colour</b> Per stuk verpakt in cellofaan in doos	Rood	4 m x 4 cm	931 095	1 stuks	70 x 1 stuk	3070745
	Rood	4 m x 6 cm	931 096	1 stuks	48 x 1 stuk	3070752
	Rood	4 m x 8 cm	931 097	1 stuks	27 x 1 stuk	3070760
	Rood	4 m x 10 cm	931 098	1 stuks	30 x 1 stuk	3070778



### Voordelen:

- Eenvoudig in gebruik
- Permanent elastisch
- Tal van toepassingsmogelijkheden
- Geschikt voor hergebruik
- Sterk
- Stevige randen
- Het open geweven materiaal is ademend

# Idealbinde®

## Korte-rek-compressiezwachtel

Idealbinde® is een steunzwachtel voor korte-rekcompressie. Idealbinde® kan voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt en is bijzonder economisch, omdat de zwachtel meerdere keren kan worden gebruikt.

### Eigenschappen

De zwachtel is elastisch en heeft ter versteviging geweven randen die ervoor zorgen dat de zwachtel zijn vorm behoudt. De zwachtel geeft een hoge werkdruk en een lage rustdruk en is dus ook geschikt voor personen die voornamelijk zitten. Normaliter kan de zwachtel 's nachts worden verwijderd en 's ochtends opnieuw worden aangebracht. Om het beste resultaat te bereiken, verdient het aanbeveling dunne benen eerst in watten te wikkelen tot ze een normale dikte hebben.

### Materiaal

100% katoen. Wit.

Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel, klasse I, niet steriel. Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG. Lengte uitgerekt: 5 m, lengte niet-uitgerekt: ca 2,6 m, elasticiteit: 90%

### Indicatie

Ter ondersteuning na amputaties of bijletsel van gewrichtsbanden. In het kader van een compressiebehandeling bij oedeem of voor het fixeren van verbanden of gipspalen.

Contra-indicaties: arteriële occlusieve ziekte.

### Wasinstructies

Idealbinde® is autoclaveerbaar bij 134 °C en kan een aantal keer worden gewassen op 95 °C. Idealbinde® behoudt na het wassen de oorspronkelijke elasticiteit.

Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijs-eenheid	Verzend-eenheid	CNK
Idealbinde®	5 m x 6 cm	931 755	10 stuks	160 x 10 stuks	*
	5 m x 8 cm	931 756	10 stuks	120 x 10 stuks	*
	5 m x 10 cm	931 757	10 stuks	100 x 10 stuks	*

\*Model niet beschikbaar in apotheek



### Voordelen:

- Idealbinde® heeft een elasticiteit van 90%
- Kan worden gekookt en gesteriliseerd
- Geschikt voor alle soorten fixaties en als steunverband
- Optimaal draagcomfort
- Geschikt voor hergebruik
- Stevige randen

# Idealflex® (universal)

## Universele zwachtel met korte-rek-compressie

Idealflex® universal is een permanent elastisch windsel. Idealflex® universal kan voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt en is bijzonder economisch, omdat de zwachtel meerdere keren kan worden gebruikt.

### Eigenschappen

Het windsel is permanent elastisch en heeft ter versteviging geweven randen die ervoor zorgen dat de zwachtel zijn vorm behoudt.

### Materiaal

66% katoen, 33% polyamide 1% elastaan. Wit. Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse I, niet steriel. Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG.

Lengte uitgerekt: 5 m, lengte niet-uitgerekt: ca 2,2 m, elasticiteit: 85%.

### Indicatie

Ter ondersteuning na amputaties of bij letsel van gewrichtsbanden. In het kader van een compressiebehandeling bij oedeem of voor het fixeren van verbanden of gipsspalken.

Contra-indicaties: arteriële occlusieve ziekte.

### Wasinstructies

Idealflex® universal is autoclaveerbaar op 134 °C en kan een aantal keren worden gewassen op 40 °C.



Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
Idealflex®	5 m x 15 cm	931 294	1 stuk	30 x 1 stuk	*

\*Model niet beschikbaar in apotheek

### Voordelen:

- Idealflex® universal heeft een elasticiteit van 85%
- Kan worden gekookt en gesteriliseerd
- Geschikt voor alle soorten fixaties en als steunverband
- Optimaal draagcomfort
- Permanent elastisch
- Tal van toepassingsmogelijkheden
- Geschikt voor hergebruik
- Stevige randen



# Lastodur® strong

## Lange-rek-compressiezwachtel

Lastodur® strong is een permanent elastische lange-rek-zwachtel met een elasticiteit van 180%. De uitrekking kan worden gevarieerd om de mate van compressie te regelen. De zwachtel is luchtdoorlatend en huidvriendelijk. Lastodur strong heeft een stevige, geweven structuur.

### Eigenschappen

De zwachtel bestaat voor een groot deel uit natuurlijke vezels en is zeer huidvriendelijk. Luchtdoorlatend. Lastodur® strong is van stevige kwaliteit en daardoor bijzonder slijtvast. Normaliter kan de zwachtel 's nachts worden verwijderd en 's ochtends opnieuw worden aangebracht.

### Materiaal

85% katoen, 7% polyamide, 8% elastaan. Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse I, niet steriel. Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG.

Lengte uitgerekt: 7 m, lengte niet-uitgerekt: ca 2,5 m, elasticiteit: 180%.

### Indicatie

Voor profylactische doeleinden of voor de behandeling van oedeem, bijvoorbeeld bij veneuze insufficiëntie. In het kader van een trombosebehandeling. Ter ondersteuning en verlichting van spier- en skeletschade en als sportbandage. Contra-indicaties: arteriële occlusieve ziekte.

### Wasinstructies

Lastodur® strong kan worden gewassen op 60 °C en is autoclaveerbaar op 134°C.

Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>Lastodur® strong</b>	6 cm x 7 m	931 663	1 stuk	60 x 1 stuk	816827
	8 cm x 7 m	931 664	1 stuk	60 x 1 stuk	816835
	10 cm x 7 m	931 665	1 stuk	60 x 1 stuk	816843
	12 cm x 7 m	931 666	1 stuk	30 x 1 stuk	816850
	14 cm x 7 m	931 629	1 stuk	18 x 1 stuk	1677855
	20 cm x 7 m	931 668	1 stuk	20 x 1 stuk	81686



### Instructies voor het fixeren

Gebruik de verbandklemmen waarmee het product wordt geleverd niet om het product te bevestigen bij een patiënt. De verbandklemmen zijn alleen bedoeld om het product tijdens het transport te fixeren. Fixeer de zwachtel met een tape naar keuze, bijvoorbeeld Omniplast®.

### Voordelen:

- Elastische zwachtel met lange rek
- Goed aanpasbare druk
- Voor compressietherapie en resorptie van oedeem
- Optimaal draagcomfort
- Op maat te knippen
- Tal van toepassingsmogelijkheden
- Luchtdoorlatend
- Bevat geen latex

# Medicomp®

## Non-wovenkompres

Medicomp® ongeweven kompressen zijn een prima alternatief voor het klassieke verbandgaas bij veel toepassingen op ziekenhuisafdelingen en in poliklinieken. Ze bestaan voor 70 procent uit viscosevezels en voor 30 procent uit polyestervezels en hebben een open, gaasachtige structuur die ervoor zorgt dat Medicomp uitermate goed absorbeert en daarbij zacht en luchtdoorlatend is.

Het ongeweven materiaal bevat bovendien geen bindmiddelen of optische bleekmiddelen. Een uitgebreide gebruiksaanwijzing is voor Medicomp® helemaal niet nodig, want het wordt net zo toegepast als conventioneel verbandgaas: eenvoudig en ongecompliceerd, maar met alle voordelen van het sterk absorberende ongeweven materiaal.

De test toont aan: Medicomp® absorbeert 1,7 keer zoveel vloeistof als een 8 keer gevouwen 17-draads ES-gaasverband.

### Eigenschappen

Medicomp® heeft een open structuur en is luchtdoorlatend. Het kompres is zacht en absorberend. Medicomp® kan op maat worden geknipt zonder te pluizen of te rafelen. Medicomp® is leverbaar in verschillende maten en verpakkingen. Het assortiment omvat steriele, niet-steriele en zeer zuivere kompressen.

### Materiaal

70% viscose en 30% polyester. Non-woven materiaal zonder bindmiddelen of optische bleekmiddelen. Gewicht: 30 g/m<sup>2</sup>, 4-laags. Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel uit klasse IIa, steriel. Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG.

### Indicatie

Ideaal als gaasje of kompres voor de poliklinische behandeling van wonden of voor kleine chirurgische ingrepen in het ziekenhuis.

Perfect voor het desinfecteren van wonden en voor de snelle behandeling van wonden die hevig bloeden.

Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>Medicomp®</b> Steriel verpakt per 2 stuks, 4 lagen	5 x 5 cm	421 721	25 x 2 stuks	24 x (25 x 2 stuks)	0391870
	7,5 x 7,5 cm	421 723	25 x 2 stuks	12 x (25 x 2 stuks)	0391888
	10 x 10 cm	421 725	25 x 2 stuks	8 x (25 x 2 stuks)	0391896
	10 x 20 cm	421 727	25 x 2 stuks	8 x (25 x 2 stuks)	1336304
<b>Medicomp®</b> Steriel verpakt per 5 stuks, 4 lagen	5 x 5 cm	411 051	40 x 5 stuks	24 x (40 x 5 stuks)	3595816
	7,5 x 7,5 cm	411 052	40 x 5 stuks	24 x (40 x 5 stuks)	*
	10 x 10 cm	411 060	30 x 5 stuks	12 x (30 x 5 stuks)	3595824
<b>Medicomp®</b> Niet-steriel, los in verpakking, 4 lagen	5 x 5 cm	421 821	100 stuks	24 x 100 stuks	0391938
	7,5 x 7,5 cm	421 823	100 stuks	12 x 100 stuks	0289173
	10 x 10 cm	421 825	100 stuks	12 x 100 stuks	0391946
	10 x 20 cm	421 827	100 stuks	6 x 100 stuks	1336288
<b>Medicomp®</b> Niet-steriel, los in verpakking, 6 lagen	10 x 10 cm	4218352	100 stuks	12 x 100 stuks	391979
	7,5 x 7,5 cm	4218334	100 stuks	12 x 100 stuks	391961

\*Model niet beschikbaar in apotheek



### Praktische verpakking :

De dispenser zorgt voor een gemakkelijke toegang tot het product en beschermt de steriele verpakking van ieder afzonderlijk kompres optimaal.

De papieren/folieverpakking is gemakkelijk te openen en te verwijderen.

De foliezijde van de verpakking zorgt ervoor dat vloeistoffen zonder problemen kunnen worden aangebracht.

### Voordelen:

- Beter absorptievermogen dan gaas
- Erg comfortabel dankzij de zachte structuur
- Voldoet aan de technische specificaties voor klasse IIa van de MDD-richtlijn en is geschikt voor kleine chirurgische ingrepen
- Bevat geen bindmiddelen of optische bleekmiddelen en wordt daarom bijzonder goed verdragen door de huid
- Bij uitoefening van druk wordt het geabsorbeerde desinfectans gemakkelijk afgegeven aan de huid
- Dankzij de goede absorptie van vloeistoffen kunnen wonden op efficiënte en betrouwbare wijze worden behandeld

# Medicomp® drain

## Non-wovenkompres voor drainage

Medicomp® drain is een klassiek non-wovenkompres met een Y-vormige insnijding. Uitermate geschikt als beschermend en absorberend kompres voor allerlei injectieplaatsen.

### Eigenschappen

Medicomp® drain heeft een open structuur en is luchtdoorlatend. Het kompres is zacht en absorberend. Medicomp® drain kan op maat worden geknipt zonder te pluizen of te rafelen. Het kompres is voorzien van een Y-vormige insnijding voor drainage- of tracheotomiegerelateerde toepassingen.

### Materiaal


70% viscose en 30% polyester. Non-woven materiaal zonder bindmiddelen of optische bleekmiddelen. Gewicht 30 g/m<sup>2</sup>, 6-laags. Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse 1a, steriel. Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EEG.

### Indicatie en aanbrenging

Ter bescherming of absorptie bij drainage of tracheotomie.  
Contra-indicaties: niet bekend.

### Voordelen:

- Pluist niet
- Eenvoudig in gebruik
- Economisch
- Efficiënte opslag

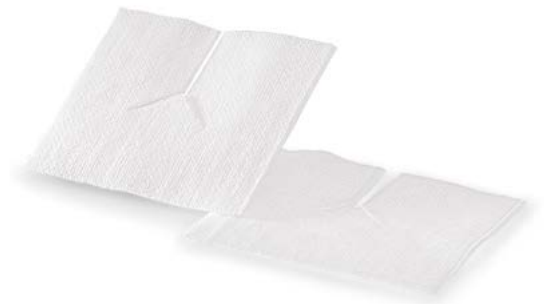

Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>Medicomp® drain</b>	7,5 x 7,5 cm	421 533	25 x 2 stuks	12 x (25 x 2 stuks)	1180470
Steriel verpakt per 2 stuks	10 x 10 cm	421 535	25 x 2 stuks	8 x (25 x 2 stuks)	435685



# Medicomp® extra

## Non-wovenkompres

Medicomp® extra is een non-wovenkompres dat als droog verband en als wondverband kan worden toegepast. Het kompres is absorberend, zacht en luchtdoorlatend. Twee extra lagen voor nog meer absorptie.

### Eigenschappen


Medicomp® extra heeft een open structuur en is luchtdoorlatend. Het kompres is zacht en absorberend. Medicomp® extra kan op maat worden geknipt zonder te pluizen of te rafelen. Medicomp® extra is leverbaar in verschillende maten en verpakkingen. Het assortiment omvat steriele, niet-steriele en zeer zuivere kompressen.

### Materiaal

70% viscose en 30% polyester. Non-woven materiaal zonder bindmiddelen of optische bleekmiddelen. Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel uit klasse IIa, steriel. Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG.

### Indicatie en aanbrenging

Voor de algemene verzorging, het verschonen en het reinigen van wonden. Contra-indicaties: niet bekend.

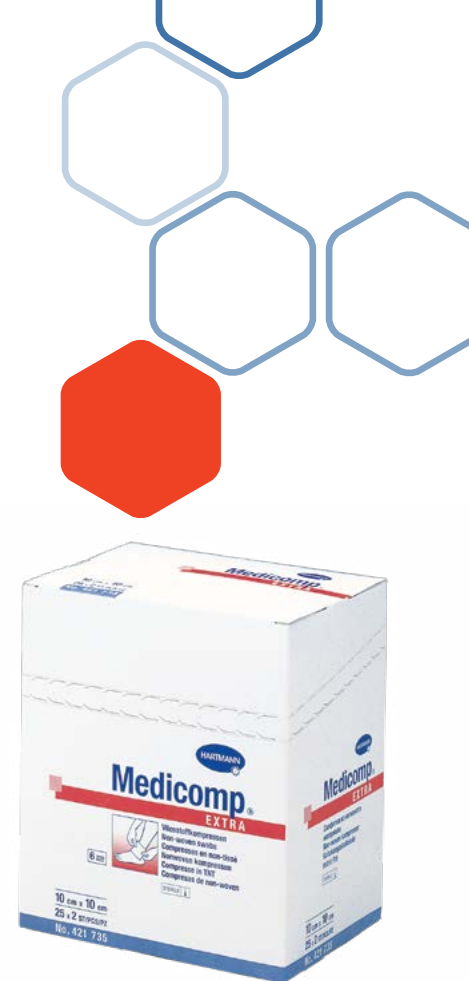

Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijsseenheid	Verzendenheid	CNK
<b>Medicomp® extra</b>	5 x 5 cm	421 831	100 stuks	24 x 100 stuks	0391953
	5 x 5 cm	421 731	25 x 2 stuks	24 x (25 x 2) stuks	0391904
	10 x 10 cm	421 835	100 stuks	8 x 100 stuks	0391979
	10 x 10 cm	421 735	25 x 2 stuks	12 x (25 x 2) stuks	0391920
	10 x 20 cm	421 837	100 stuks	6 x 100 stuks	1336296
	7,5 x 7,5 cm	421 833	100 stuks	12 x 100 stuks	0391961
	7,5 x 7,5 cm	411 076	25 x 2 stuks	30 x (25 x 2) stuks	0391912

### Voordelen:

- Pluist niet
- Eenvoudig in gebruik
- Leverbaar in verschillende maten en in een handige slidebox-verpakking
- Meerdere keren te gebruiken



# Omnifilm®

## Transparante fixatiepleister

Omnifilm® zorgt voor een betrouwbare fixatie en biedt de mogelijkheid om de vloeistofstroom in bijvoorbeeld sondes te zien. Gemakkelijk te scheuren, zowel in de lengte als in de breedte.

### Eigenschappen

De tape is lucht- en vochtdoorlatend en dat maakt Omnifilm® uitermate huidvriendelijk. De tape waarborgt een veilige fixatie, maar kan desondanks pijnloos worden verwijderd en laat geen kleefmassaresten achter op de huid. Omnifilm® absorbeert geen röntgenstralen en hoeft voor een röntgenonderzoek dan ook niet te worden verwijderd. Omnifilm® is vuilafstotend en hittebestendig. De tape is zowel in de lengte als in de breedte gemakkelijk te scheuren. Door het transparante materiaal is het mogelijk om de vloeistofstroom te controleren bij het vastzetten van canules of slangen.

### Materiaal

Polyvinylacetaatfolie met een hypoallergene kleeflaag op basis van acryl, zonder colofonium of latex. Spoel van polystyreen. Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse I, niet steriel. Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG.

### Indicatie

Voor fixatie zonder belemmering van het zicht op bijvoorbeeld canules, sondes of katheters. Geschikt voor patiënten met een gevoelige huid.

### Instructies voor het fixeren


De huid moet droog zijn voor het aanbrengen van de tape.

Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijzenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>Omnifilm®</b> Op plastic spoel in doos	1,25 cm x 9,2 m	900 421	20 stuks	15 x 20 stuks	1741867
	2,5 cm x 9,2 m	900 422	12 stuks	20 x 12 stuks	1741875
	5 cm x 9,2 m	900 423	12 stuks	10 x 12 stuks	*
	1,25 cm x 5 m	900 433	20 stuks	15 x 20 stuks	3510799
	2,5 cm x 5 m	900 434	12 stuks	20 x 12 stuks	3510807
	5 cm x 5 m	900 435	10 stuks	12 x 10 stuks	3292851

\*Model niet beschikbaar in apotheek

### Voordelen:

- Veilige fixatie
- Is zowel in de lengte als in de breedte gemakkelijk te scheuren
- Laat geen kleverige resten achter
- Omdat de tape transparant is, kan een vloeistofstroom gemakkelijk worden gecontroleerd
- Omnifilm® absorbeert geen röntgenstralen en hoeft voor een röntgenonderzoek dan ook niet te worden verwijderd
- Bevat geen colofonium of latex

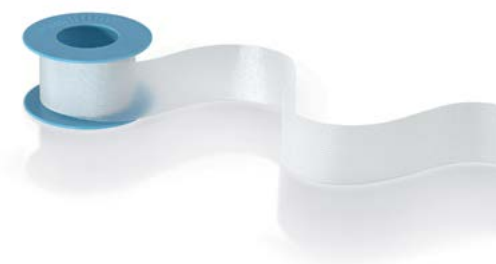

# Omnifix® Elastic

## Non-woven fixatievlies

Het fixatievlies Omnifix® Elastic is bedoeld voor het fixeren van grote verbandoppervlakken. De papieren drager van de tape is voorzien van een raster, zodat de benodigde hoeveelheid gemakkelijk kan worden afgemeten. Het vlies kan beweeglijkheid mogelijk maken of juist voorkomen. Dat komt, omdat het vlies slechts in één richting elastisch is.

### Eigenschappen

Omnifix® Elastic is doorlaatbaar voor lucht en vocht, wat betekent dat het zeer huidvriendelijk is en maceratie van de huid voorkomt. De tape waarborgt een stevige fixatie, maar kan desondanks pijnloos worden verwijderd en laat geen kleverige resten achter op de huid. Omnifix® Elastic absorbeert geen röntgenstralen en hoeft voor een röntgenonderzoek dan ook niet te worden verwijderd. Omnifix® Elastic is dwarselastisch en soepel en kan daardoor bijvoorbeeld ook op gewrichten rimpelloos worden bevestigd. Het weefsel geeft niet mee in de lengte, dus het is van belang dat het vlies in de juiste richting wordt bevestigd. Zo kan enerzijds een goede mobiliteit worden gewaarborgd, maar kan beweeglijkheid ook worden tegengegaan door het fixatievlies in de andere richting aan te brengen. Indien nodig kan zo voor stabiliteit worden gezorgd. Het dragerpapier aan achterkant is voorzien van golfvormige insnijdingen, zodat het gemakkelijk te verwijderen is.

### Materiaal

100% polyesterweefsel met een hypoallergene kleeflaag op basis van synthetisch rubber, zonder colofonium of latex. Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel, klasse I, niet steriel. Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG.

### Indicatie en aanbrenging

Ter bescherming van verbanden of voor het vastzetten van verbanden met een groot oppervlak op allerlei medische gebieden. Bevestiging op gewrichten, conische en ronde lichaamsdelen. Vastzetten van meetinstrumenten, sondes, katheters en dergelijke.



Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijsseenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>Omnifix® Elastic.</b> Per stuk, in doos	10 cm x 2 m	900 601	1 stuk	64 x 1 stuk	1462845
	5 cm x 10 m	900 602	1 stuk	63 x 1 stuk	1462852
	10 cm x 10 m	900 603	1 stuk	36 x 1 stuk	1462860
	15 cm x 10 m	900 604	1 stuk	24 x 1 stuk	1462878
	20 cm x 10 m	900 605	1 stuk	18 x 1 stuk	1462886

### Instructies voor het fixeren

De huid moet droog zijn voor het aanbrengen van het fixatievlies.

### Voordelen:

- Voor het fixeren van grote oppervlakken
- Op maat te knippen
- Betrouwbare fixatie
- Eenvoudig in gebruik
- Hoeft voor een röntgenonderzoek niet te worden verwijderd
- Bevat geen colofonium of latex

# Omniplast®

## Fixatiepleister van textielweefsel

In de zorg bestaat vaak behoefte aan een tape die goed blijft zitten, bijvoorbeeld om een verband vast te zetten of een sonde of canule te bevestigen. Omniplast® blijft goed zitten, maar laat de huid toch ademen, omdat de kleeflaag in banen is aangebracht.

### Eigenschappen

Omniplast® is lucht- en vochtdoorlatend omdat de kleeflaag in banen is aangebracht. De tape blijft goed op zijn plaats, maar kan desondanks pijnloos worden verwijderd zonder kleverige resten op de huid achter te laten. Omniplast is zowel in de lengte als overdwars gemakkelijk te scheuren, zonder dat de tape begint te rafelen. Omniplast® absorbeert geen röntgenstralen en hoeft voor een röntgenonderzoek dan ook niet te worden verwijderd. Omniplast® laat geen uv-A, uv-B en uv-C-zonnestrallen door.

### Materiaal

Drager: 100% viskose

Kleeflaag: huidkleur: hypoallergene, synthetisch rubberkleeflaag in banen aangebracht. wit: volledige hypoallergene synthetische kleeflaag. Kleefstof conform EN ISO 10993 over de biocompatibiliteit.

Spoel: polystyreen

### Indicatie en aanbrenging

Voor het fixeren van allerlei verbanden en het vastzetten van sondes, canules of katheters. Geschikt voor patiënten met een normale huid.

Voorzichtigheid is geboden bij een gevoelige huid.



Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>Omniplast®</b> Op plastic spoel in doos	1,25 cm x 5 m	900 440	1 stuk	300 x 1 stuk	3510823
	2,5 cm x 5 m	900 441	1 stuk	240 x 1 stuk	3510831
	5 cm x 5 m	900 442	1 stuk	120 x 1 stuk	3510849
	1,25 cm x 9,2 m	900 452	24 stuks	12 x 24 stuks	2503597
	2,5 cm x 9,2 m	900 453	12 stuks	16 x 12 stuks	2503605
	5 cm x 9,2 m	900 454	6 stuks	12 x 6 stuks	*

\*Model niet beschikbaar in apotheek

### Instructies voor het fixeren

De huid moet droog zijn voor het aanbrengen van de tape.

### Voordelen

- Veilige fixatie
- Laat geen kleverige resten achter
- Eenvoudig in gebruik
- Houdt uv-straling tegen
- Bevat geen colofonium of latex

# Omniplast® White

## Fixatiepleister van textielweefsel

Klassieke hypoallergene fixatiepleister van huidkleurig textielweefsel met een kleeflaag van synthetisch rubber voor patiënten met een normaal gevoelige huid.

### Eigenschappen

De in banen aangebrachte kleeflaag van synthetisch rubber ondersteunt de luchtdoorlaatbaarheid en de huidvriendelijkheid van Omniplast.

Het dragerweefsel van huidkleurige viscose is soepel, sterk en zeer trekvast.

Ter bescherming tegen nat worden van buitenaf is Omniplast waterafstotend geïmpregneerd.

De fixatiepleister hecht zeer goed en kan probleemloos worden verwijderd zonder dat er resten achterblijven.

Door de gekartelde rand kan Omniplast makkelijk afgescheurd worden zonder te rafelen.

Omniplast absorbeert geen röntgenstralen en hoeft daarom voor röntgenonderzoek niet verwijderd te worden.

### Materiaal

Drager: 100% viskose

Kleeflaag: wit: hypoallergene, synthetische rubberkleeflaag in banen aangebracht.  
wit: volledige hypoallergene synthetische kleeflaag. Kleefstof conform EN ISO 10993 over de biocompatibiliteit.

Spoel: polystyreen

### Indicatie en aanbrenging

Voor algemene verbandfixatie, voor bevestiging van bijvoorbeeld sondes en canules bij patiënten met een normaal gevoelige huid. Zorg bij applicatie voor een droge en schone huid.

Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
Omniplast® White plastic spoel in doos	2,5 cm x 5 m	900 445	20 stuks	12 x 20 stuks	*

\*Model niet beschikbaar in apotheek

### Voordelen:

- Veilige fixatie
- Laat geen kleverige resten achter
- Eenvoudig in gebruik
- Houdt uv-straling tegen
- Bevat geen colofonium of latex





# Omnipor®

## Hypoallergene non-woven fixatiepleister

Omnipor® is bedoeld voor langdurige fixatie of voor gevoelige lichaamsdelen.

### Eigenschappen

De tape is lucht- en vochtdoorlatend en dat maakt Omnipor® uitermate huidvriendelijk. De tape waarborgt een veilige fixatie, maar kan desondanks pijnloos worden verwijderd en laat geen kleefmassaresten achter op de huid. Omnipor® absorbeert geen röntgenstralen en hoeft voor een röntgenonderzoek dan ook niet te worden verwijderd. De tape is gemakkelijk af te scheuren.

### Materiaal

Non-woven van 80% cellulose en 20% polyester, gebonden met vinylacetaat. Kleeflaag op basis van synthetisch rubber, zonder colofonium of latex. Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse I, niet steriel. Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EEG.

### Indicatie en aanbrenging

Allerlei fixatietoepassingen, met name voor verbanden die langdurig op gevoelige lichaamsdelen moeten blijven, en voor het vastzetten van sondes of meetinstrumenten. Geschikt voor patiënten met een gevoelige huid.

### Instructies voor het fixeren

De huid moet droog zijn voor het aanbrengen van de tape.



Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>Omnipor®</b> Op spoel in doos	1,25 cm x 5 m	900 436	20 x 1 stuks	15 x 20 stuks	3510856
	2,5 cm x 5 m	900 437	20 x 1 stuks	12 x 20 stuks	3510864
	5 cm x 5 m	900 438	12 x 1 stuks	10 x 20 stuks	3292893
	1,25 cm x 9,2 m	900 424	15 x 1 stuks	20 x 15 stuks	1741834
	2,5 cm x 9,2 m	900 425	12 x 1 stuks	20 x 12 stuks	1741842
	5 cm x 9,2 m	900 426	12 x 1 stuks	10 x 12 stuks	*

\*Model niet beschikbaar in apotheek

### Voordelen:

- Lucht- en waterdampdoorlatend
- De tape is gemakkelijk te scheuren
- Betrouwbare en langdurige fixatie
- Laat geen kleverige resten achter
- Eenvoudig in gebruik
- Geschikt voor de gevoelige huid
- Bevat geen colofonium of latex

# Omnisilk®

## Hypoallergene fixatiepleister van witte kunstzijde

Omnisilk® is een tape van kunstzijde die kan worden gebruikt voor het fixeren van verbanden of het vastzetten van sondes, canules of katheters.

### Eigenschappen

Omnisilk® is lucht- en vochtdoorlatend. De tape waarborgt een veilige fixatie, maar kan desondanks pijnloos worden verwijderd en laat geen kleefmassaresten achter op de huid. Door de gekartelde randen is Omnisilk® gemakkelijk te scheuren. Omnisilk® absorbeert geen röntgenstralen en hoeft voor een röntgenonderzoek dan ook niet te worden verwijderd.

### Materiaal

100% acetaatzijde. Hypoallergene kleeflaag op basis van synthetisch rubber. Bevat geen colofonium of latex.

Spoel van polystyreen. Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse I, niet steriel. Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG.

### Indicatie en aanbrenging

Voor het fixeren van allerlei verbanden. Voor het fixeren van bijv. canules, sondes of katheters. Geschikt voor patiënten met een gevoelige huid.

### Instructies voor het fixeren

De huid moet droog zijn voor het aanbrengen van de tape.



Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijs-eenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>Omnisilk®</b> op kunststofspoel per stuk verpakt in doos	1,25 cm x 5 m	900 430	20 x 1 stuks	15 x 20 stuks	3510880
	2,5 cm x 5 m	900 431	20 x 1 stuks	12 x 20 stuks	3510898
	5 cm x 5 m	900 432	12 x 1 stuks	10 x 12 stuks	3510906
	1,25 cm x 9,2 m	900 418	20 x 1 stuks	15 x 20 stuks	1741800
	2,5 cm x 9,2 m	900 419	20 x 1 stuks	12 x 20 stuks	1741818
	5 cm x 9,2 m	900 420	10 x 1 stuks	12 x 10 stuks	*

\*Model niet beschikbaar in apotheek

### Voordelen:

- Betrouwbare fixatie
- Geschikt voor de gevoelige huid
- Laat geen kleverige resten achter
- Eenvoudig in gebruik
- Hoeft voor een röntgenonderzoek niet te worden verwijderd
- Bevat geen colofonium of latex

# Omnistrip®

## Wondhechtingsstrip

Omnistrip® is een wondhechtingsstrip, voor het atraumatisch sluiten van kleine wonden en chirurgische incisies (primaire wondgenezing), beschermt tegen trekkende wondranden en stabiliseert verse littekens.

### Eigenschappen

Omnistrip® is lucht- en vochtdoorlatend en beperkt het risico van maceratie van de huid. De tape is veilig te bevestigen, maar kan desondanks pijnloos worden verwijderd en laat geen kleefmassaresten achter op de huid. Omnistrip® absorbeert geen röntgenstralen en hoeft voor een röntgenonderzoek dan ook niet te worden verwijderd. Omnistrip® laat maar 7% uv-straling door.

### Materiaal

Beige non-woven polyester/polyamide. Hypoallergene kleeflaag op basis van acryl (drukgevoelige kleefstof, PSA). Eenzijdig siliconenpapier. Bevat geen colofonium of latex.

Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse I, niet steriel. Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG.

### Indicatie en aanbrenging

Atraumatische wondsluiting voor lichte verwondingen en na kleine chirurgische ingrepen. Stabiliseert de incisie na het verwijderen van de hechtingen.

Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>Omnistrip®</b> Steriel in envelop	3 x 76 mm (5 stuks/envelop)	540 681	250 stuks	6 x 250 stuks	*
	6 x 38 mm (6 stuks/envelop)	540 682	300 stuks	6 x 300 stuks	*
	6 x 76 mm (3 stuks/envelop)	540 683	150 stuks	6 x 150 stuks	*
	6 x 101 mm (10 stuks/envelop)	540 684	500 stuks	6 x 500 stuks	*
<b>Omnistrip® Flex</b> Steriel in envelop	12 x 101 mm (6 stuks/envelop)	540 681	250 stuks	6 x 250 stuks	*
	6 x 38 mm (6 stuks/envelop)	540 682	300 stuks	6 x 300 stuks	*
	6 x 76 mm (3 stuks/envelop)	540 683	150 stuks	6 x 150 stuks	*
	6 x 101 mm (10 stuks/envelop)	540 684	500 stuks	6 x 500 stuks	*
	12 x 101 mm (6 stuks/envelop)	540 685	300 stuks	6 x 300 stuks	*
	25 x 127mm (4 stuks/envelop)	540 686	200 stuks	6 x 200 stuks	*

\*Model niet beschikbaar in apotheek



### Instructies voor het fixeren

De huid moet droog zijn voor het aanbrengen van de tape.

### Voordelen:

- Laat de huid ademen
- Dankzij de afgeronde hoeken krult de tape niet om
- Eenvoudig in gebruik
- Veilige fixatie
- Hoeft voor een röntgenonderzoek niet te worden verwijderd
- Bevat geen colofonium of latex

# Omnitape®

## Tapeverband

Pleisterverband voor een preciese en langdurige, veilige fixatie van gewrichten en pezen.

### Eigenschappen

Sterk klevende bijzonder trekvast en niet-elastisch.  
Sterke hechting ook op textiele onderlagen en compressieverbanden.

### Materiaal

100% viscose met zinkoxyde rubberen kleeflaag

### Indicatie en aanbrenging

Voor functionele verbanden, bijv. stabilisatie van gewrichten, speciaal bij bandletsel; ter ondersteuning en ontlasting van beschadigde spieren; voor conservatieve behandeling van luxaties etc.; profylactisch en bij trainingsopbouw in de sport.

Door getande randen moeiteloos met de hand scheurbaar ook in lengterichting.

### Voordelen:

- Makkelijk scheurbaar
- Zeer goede hechting
- Verschillende breedtes



Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
Omnitape®, afzonderlijk verpakt	2 cm x 10 m	500 058	1 stuk	96 x 1 stuk	1038439
	3,75 cm x 10 m	500 059	1 stuk	96 x 1 stuk	1038447
	5 cm x 10 m	500 060	1 stuk	48 x 1 stuk	1038454



# Pagasling®

## Gaasdeppers uit 100% gebleekt katoen

Depper van verbandgaas volgens EN14079; deze gaasdepper wordt vervaardigd uit één stuk gaas, zodanig ineengestrongeld, dat alle snijkanten zich veilig aan de binnenkant van de depper bevinden; met hoog absorptievermogen.

### Eigenschappen

Zacht, soepel en snel absorberend materiaal.  
Behoudt in natte toestand goed zijn vorm en valt niet uiteen.  
Zonder elastiekjes.

### Materiaal

100% katoen, conform EU richtlijn 93/42/EEC  
Bleekproces zonder chloor.

### Indicatie en aanbrenging

Pagasling® gaasdeppers om bloed te stelpen en voor de wondverzorging alsook om grote gedeelten van de huid te desinfecteren.



Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijs eenheid	Verzende eenheid	CNK
<b>Pagasling®</b> niet steriel verpakt	nr. 3, formaat pruim	481 294	2 x 500 stuks	1 x (2x 500 stuks)	0392076
	nr. 3, formaat pruim	481 414	18 x 20 stuks	3 x (18 x 20 stuks)	*
	nr. 5, formaat extra	400 131	4 x 250 stuks	1 x (4 x 250 stuks)	0392092
	nr. 6 formaat vuist	481 295	4 x 125 stuks	1 x (4 x 125 stuks)	0392100
<b>Pagasling®</b> steriel verpakt		400 863			
	nr. 3, formaat pruim	481 284	20 x 5 stuks	8 x (20 x 5 stuks)	3345790
		915 112			
		481 414			

\*Model niet beschikbaar in apotheek

### Voordelen:

- Hoog absorptievermogen
- Breed assortiment van maat
- Beschikbaar in steriele of niet-steriele versie
- Deppers leveren een tijds winst op tegenover het gebruik van standaardcompressen, zeker bij uitgebreide wondzorg.
- Door hun compacte structuur kan je de wondomgeving stevig reinigen.

# Peha-fix®

## Hoogelastische fixatiewindel

Super elastische fixatiewindel uit zacht huidvriendelijk materiaal dankzij het hoge gehalte aan natuurlijke vezels.

### Eigenschappen

Luchtdoorlaatbaar dankzij de open structuur, betrouwbaar, verschuift niet dankzij de structuur van het crêpeweefsel.

### Materiaal

30 % Polyamide, 70 % Viscose

Rekbaarheid ca. 125%, steriliseerbaar

### Indicatie en aanbrenging

Voor fixatie van alle soorten verbanden, special voor gewrichten, conische en ronde lichaamsdelen.

### Voordelen:

- Bestaat uit een zacht speciaal weefsel
- Rekbaarheid ca. 125%
- Zonder omslagwindingen snel en eenvoudig aan te leggen
- Betrouwbaar en verschuift niet snel en makkelijk om aan te leggen zonder omslagwindingen



Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>Peha-fix®</b> per stuk gecellofaneerd	4 cm x 4 m	303 070	20 stuks	8 x 20 stuks	3641321
	6 cm x 4 m	303 071	20 stuks	10 x 20 stuks	3641339
	8 cm x 4 m	303 072	20 stuks	10 x 20 stuks	3641412
	10 cm x 4 m	303 073	20 stuks	6 x 20 stuks	3641347
	12 cm x 4 m	303 074	20 stuks	4 x 20 stuks	3641354
<b>Peha-fix®</b> los in doosje	4 cm x 4 m	303 075	20 stuks	8 x 20 stuks	3641362
	6 cm x 4 m	303 076	20 stuks	10 x 20 stuks	3641370
	8 cm x 4 m	303 077	20 stuks	10 x 20 stuks	3641388
	10 cm x 4 m	303 078	20 stuks	6 x 20 stuks	3641396
	12 cm x 4 m	303 079	20 stuks	4 x 20 stuks	3641404



# Peha-haft®

## Zelfhechtend, elastisch fixatieverband zonder latex

Elastisch, zelfhechtend fixatieverband zonder latex dat gemakkelijk af te knippen is zodra het verband goed zit. Zorgt voor fixatie met een lichte druk zonder enig ander bevestigingsmiddel.

### Eigenschappen

Peha-haft® heeft een crêpe-structuur en een speciale coating die ervoor zorgt dat het verband goed blijft zitten, ook op lichaamsdelen die doorgaans moeilijk te verbinden zijn. Beide zijden van de zwachtel zijn zelfhechtend en een paar slagen met de zwachtel en licht vastdrukken van het uiteinde is meestal voldoende om het verband te fixeren. Aanvullende fixatie is niet nodig.

Het verband hecht alleen aan zichzelf, niet aan de huid of aan kleding. Omdat slechts enkele slagen nodig zijn, is het materiaalverbruik laag. Door de open structuur van het materiaal is het verband ademend. Bovendien beschikt het verband over een uitstekend absorptievermogen, omdat het veel natuurlijke vezels bevat. Peha-haft® is vriendelijk voor de huid en biedt een hoge mate van draagcomfort.

### Materiaal

43% katoen, 37% viscose, 20% polyamide met een speciale coating zonder latex. Wit.

Het product bevat ook geen chloor of acrylaat. Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse I, niet steriel. Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG.

Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>Peha-haft® latexvrij</b> Per stuk verpakt in doos	4 cm x 4 m	932 441	1 stuk	140 x 1 stuk	2569259
	6 cm x 4 m	932 442	1 stuk	140 x 1 stuk	2569283
	8 cm x 4 m	932 443	1 stuk	140 x 1 stuk	2569309
	10 cm x 4 m	932 444	1 stuk	140 x 1 stuk	2569317
	12 cm x 4 m	932 445	1 stuk	140 x 1 stuk	2569325
	4 cm x 20 m	932 446	1 stuk	24 x 1 stuk	2569341
	6 cm x 20 m	932 447	1 stuk	24 x 1 stuk	2569358
	8 cm x 20 m	932 448	1 stuk	24 x 1 stuk	2569366
	10 cm x 20 m	932 449	1 stuk	24 x 1 stuk	2569382
	12 cm x 20 m	932 450	1 stuk	24 x 1 stuk	2569408



### Indicatie

Voor het fixeren van allerlei verbanden. Geschikt voor actieve gewrichten en voor het fixeren van hoofd- of vingerverbanden. Ook geschikt voor het fixeren van watten of canules. Kan worden gebruikt als eenvoudige ondersteuning. Geschikt voor patiënten met een allergie voor latex. Contra-indicaties: niet bekend.

### Voordelen:

- Peha-haft® heeft een elasticiteit van meer dan 85 %
- Geen aanvullende fixatie nodig
- Geschikt voor alle soorten fixaties
- Optimaal draagcomfort
- Economisch
- Tal van toepassingsmogelijkheden
- Zelfhechtend
- Zorgt dat de huid kan ademen
- Bevat geen latex, chloor of acrylaat

# Peha-haft® Color

## Zelfhechtend, elastisch, gekleurd fixatieverband zonder latex

Elastisch, zelfhechtend fixatieverband zonder latex dat gemakkelijk af te knippen is zodra het verband goed zit. Zorgt voor fixatie met een lichte druk zonder enig ander bevestigingsmiddel. Dankzij de kleurige uitvoering heeft Peha-haft® Color over een wit verband een frisse uitstraling.

### Eigenschappen

Peha-haft® Color heeft een crêpe-structuur en een speciale coating die ervoor zorgt dat het verband goed blijft zitten, ook op lichaamsdelen die doorgaans moeilijk te verbinden zijn. Beide zijden van de zwachtel zijn zelfhechtend en een paar slagen met de zwachtel en licht vastdrukken van het uiteinde is meestal voldoende om het verband te fixeren. Aanvullende fixatie is niet nodig.

Het verband hecht alleen aan zichzelf, niet aan de huid of aan kleding. Omdat slechts enkele slagen nodig zijn, is het materiaalverbruik laag. Door de open structuur van het materiaal is het verband ademend. Bovendien beschikt het verband over een uitstekend absorptievermogen, omdat het veel natuurlijke vezels bevat. Peha-haft® Color is vriendelijk voor de huid en biedt een hoge mate van draagcomfort.

### Materiaal

40% katoen, 31% viscose, 29% polyamide met een speciale coating zonder latex. Het verband is verkrijgbaar in rood en blauw. Peha-haft® Color kan in een autoclaaf gesteriliseerd worden. Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse I, niet steriel. Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EEG. Lengte uitgerekt: 20 m, lengte niet-uitgerekt: ca 10 m, elasticiteit: 100%.

### Indicatie

Voor het fixeren van allerlei verbanden. Geschikt voor actieve gewrichten en voor het fixeren van hoofd- of vingerverbanden. Ook geschikt voor het fixeren van watten of canules. Kan worden gebruikt als eenvoudige ondersteuning. Geschikt voor patiënten met een allergie voor latex. Contra-indicaties: niet bekend.

Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>Peha-haft® rood</b> Per stuk verpakt in doos	6 cm x 20 m	932 460	1 stuks	24 x 1 stuks	2814002
	8 cm x 20 m	932 461	1 stuks	24 x 1 stuks	2814010
	10 cm x 20 m	932 462	1 stuks	24 x 1 stuks	2814051
<b>Peha-haft® blauw</b> Per stuk verpakt in doos	6 cm x 20 m	932 473	1 stuks	24 x 1 stuks	2814028
	8 cm x 20 m	932 474	1 stuks	24 x 1 stuks	2814036
	10 cm x 20 m	932 475	1 stuks	24 x 1 stuks	2814044



### Voordelen:

- Peha-haft® Color heeft een elasticiteit van 100 %
- Geen aanvullende fixatie nodig
- Geschikt voor alle soorten fixaties
- Optimaal draagcomfort
- Economisch
- Tal van toepassingsmogelijkheden
- Zelfhechtend
- Bevat geen latex



# Peha-last®

## Elastische gaaszwachtel

Peha-last® is een licht elastische gaaszwachtel met zelfkanten, die geïndiceerd is voor alle verbanden die met niet-elastische gaaszwachtels moeilijk aan te leggen zijn of slecht blijven zitten.

### Eigenschappen

Peha-last® verkrijgt haar rekbaarheid van 65% door de sterk getwiste kettendraden, die de zwachtel gelijktijdig een crêpeachtige structuur verlenen. De afzonderlijke zwachtelwindingen hechten daardoor onverschuifbaar op elkaar en sluiten goed aan op de lichaamscontouren zonder de noodzaak van omslagwindingen.

Verbanden van Peha-last® vormen geen insnoeringen en belemmeren noch de bloedcirculatie noch de bewegingsvrijheid van de gewrichten.

Door het gebruik van uitsluitend zuivere natuurvezels is Peha-last sterk absorberend en huidvriendelijk.

Gesteriliseerd kan Peha-last® ook direct op de wond toegepast worden, bijv. bij handchirurgie. Hier waarborgt de directe applicatie van de zwachtel zonder wondbedekker de voor het herstel van de handfunctie noodzakelijke precisie. Peha-last® is steriliseerbaar.

### Materiaal

100% katoen gaas 20-draads. Individueel verpakt onder cellofaan.

### Indicatie en aanbrenging

Voor alle soorten fixatieverbanden, in het bijzonder ter plaatse van gewrichten en conische lichaamsdelen; steriel ook als directe wondbedekker.



Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendenheid	CNK
<b>Peha-last®</b> Per stuk verpakt in doos	6 cm x 4 m	931 523	1 stuk	200 x 1 stuk	*
	8 cm x 4 m	931 524	1 stuk	200 x 1 stuk	*
	10 cm x 4 m	931 525	1 stuk	120 x 1 stuk	*

\*Model niet beschikbaar in apotheek

### Voordelen:

- Zeer dun, discreet gebruik.
- Zeer huidvriendelijk (100% katoen)
- Is van zuiver katoen, van nature niet rekbaar maar laat zich desondanks vlot aanleggen zonder valse plooiën te vormen.

# Peha-Lastotel®

## Zeer elastische fixatiezwachtel

Elastische fixatiezwachtel, van huidvriendelijke hydrofiële vezels.

### Eigenschappen

Crêpeachtige oppervlaktestructuur. Rek van ca. 140%. Verschuift niet.

### Materiaal

58% polyamide

42% viscose

### Indicatie en aanbrenging

Voor alle soorten fixatieverbanden, speciaal voor gewrichten, conische en ronde lichaamsdelen. Niet aanbrengen in volledig uitgerokken toestand.

### Voordelen:

- Gemakkelijk en snel aan te brengen zonder plooivorming
- Steriliseerbaar (stoom bij 134 °C)
- Zeer elastisch
- Huidvriendelijk



Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>Peha-Lastotel®</b> Per stuk verpakt in doos	4 cm x 4 m	310 100	1 stuk	8 x 20 stuks	3059797
	6 cm x 4 m	310 101	1 stuk	10 x 20 stuks	3059805
	8 cm x 4 m	310 102	1 stuk	10 x 20 stuks	3059813
	10 cm x 4 m	310 103	1 stuk	6 x 20 stuks	3059821
	12 cm x 4 m	310 104	1 stuk	4 x 20 stuks	3059839
<b>Peha-Lastotel®</b> Los in doos	4 cm x 4 m	310 110	20 stuks	8 x 20 stuks	3059854
	6 cm x 4 m	310 111	20 stuks	10 x 20 stuks	3059847
	10 cm x 4 m	310 113	20 stuks	6 x 20 stuks	3061959



# Peha® Mullbinden

## Klassieke fixatiezwachtels

Peha® Mullbinden is een niet rekbare fixatiezwachtel die voorzien is van een gewezen zelfkant. Kan gesteriliseerd worden.

### Eigenschappen

Lichte luchtdoorlatende structuur.  
Individueel verpakt onder cellofaan.

### Materiaal

60% viscose, 40% katoen. Indeling volgens EEG- richtlijn voor niet-steriele medische hulpmiddelen klasse 1.

### Indicatie en aanbrenging

Gebruikt voor fixatie van bijv. kompressen.  
Als zwachtel voor het afwerken en omwikkelen van een gipsgoot.  
Wordt ook gebruikt voor het fixeren van intubatiecanules bij anesthesie.

### Voordelen:

- Zijn open structuur laat een goede versmelting toe bij het gebruik als afwerking voor gipsgoten
- De niet-elastische structuur laat fixatie toe waarbij geen beweging meer mag plaatsvinden
- Geschikt voor alle soorten fixatieverbanden

Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>Peha® Mullbinden,</b> afzonderlijk verpakt	4 cm x 4 m	304 040	1 stuk	640 x 1 stuk	*
	6 cm x 4 m	304 041	1 stuk	360 x 1 stuk	*
	8 cm x 4 m	304 042	1 stuk	320 x 1 stuk	*
	10 cm x 4 m	304 043	1 stuk	200 x 1 stuk	*
	12 cm x 4 m	304 044	1 stuk	240 x 1 stuk	*

\*Model niet beschikbaar in apotheek



# PermaFoam®

## Polyurethaanschuimverband

PermaFoam® is ontwikkeld voor gebruik in de reinigingsfase en de vroege granulatiefase van de wondgenezing. Het is een probleem als deze fasen te lang duren en de exsudatie, die in eerste instantie de wondgenezing versnelt, een averechts effect heeft, schade veroorzaakt aan de huid rond de wond en het genezingsproces belemmert. Adequaat exsudaatbeheer moet ervoor zorgen dat overtollig exsudaat van de wond weg wordt geleid. Het is ook belangrijk dat het verband de wond niet afsluit en daardoor de wondgenezing verstoort, want dit kan een nieuwe bacteriële besmetting in de hand werken.

### Eigenschappen

Het verband is in twee uitvoeringen verkrijgbaar: met en zonder plakrand. De uitvoering met plakrand wordt aangeduid met de extensie "comfort". Grote open poriën (400-1000 µm) aan de naar de wond toe gekeerde zijde zorgen voor een goede opname van grotere deeltjes, zoals bacteriën, celresten en viskeus wondvocht. Bacteriën hebben een diameter van 1-5 µm. Het semi-permeabele oppervlak bestaat uit kleine, gesloten polyurethaanporiën. De geleidelijke afname van de grootte van de poriën minimaliseert dankzij de goede absorptie het risico van maceratie. Het exsudaat wordt in de bovenste laag van het verband vastgehouden. Door het zachte materiaal hecht het verband zich minder snel aan het wondbed en is het verwisselen van het verband minder pijnlijk. De verticale absorptie voorkomt dat het exsudaat zich naar de zijkanten verspreidt en daardoor is het verband uitermate geschikt voor compressietherapie (getest tot 42 mmHg). Het verband kan meerdere dagen achtereen op de wond blijven, afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat die vrijkomt. Het verband moet vervangen worden als dit vanuit klinisch oogpunt aan te raden is en als aan de randen van het verband wondsecreet zichtbaar is. Om het verband gemakkelijk te kunnen verwijderen, kan het best vooraf met zoutoplossing worden bevochtigd.

### Materiaal

Het verband bestaat uit polyurethaan. PermaFoam® comfort is voorzien van een kleefmassa op basis van acryl. Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse IIb, steriel. Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG.

### Indicatie en aanbrenging

Voor het reinigen van wonden en voor het stimuleren van een tijdige granulatie. Voor de behandeling van vochtige tot zeer vochtige wonden, bijvoorbeeld beenulcera of drukulcera. Bij veneuze beenulcera in combinatie met compressie. Brandwonden. Contra-indicaties: PermaFoam® of PermaFoam® comfort mag niet worden gebruikt op blootliggend bot- of spierweefsel en pezen, voor klinisch geïnfecteerde wonden, schimmelinfecties en 2e- of 3e-graads brandwonden.

Omschrijving	Afmeting	Wondkussen	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendenheid	CNK
<b>PermaFoam®</b> Steriel, afzonderlijk verpakt	10 x 10 cm	10 x 10 cm	409 401	10 stuks	6 x 10 stuks	1759752
	15 x 15 cm	15 x 15 cm	409 405	5 stuks	5 x 6 stuks	1759968
	20 x 20 cm	20 x 20 cm	409 406	3 stuks	6 x 3 stuks	1759992
	6 cm Ø	6 cm Ø	409 427	10 stuks	6 x 10 stuks	2140986
<b>PermaFoam® Comfort</b> Steriel, afzonderlijk verpakt	11 x 11 cm	6 x 6 cm	409 407	3 stuks	12x 3 stuks	1760065
	11 x 11 cm	6 x 6 cm	409 408	10 stuks	6 x 10 stuks	1760081
	8 x 8 cm	3,5 x 3,5 cm	409 428	10 stuks	6 x 10 stuks	2140994
	15 x 15 cm	10 x 10 cm	409 412	5 stuks	6 x 5 stuks	1760164
<b>PermaFoam® Cavity</b> Steriel, afzonderlijk verpakt	10 x 10 cm	10 x 10 cm	409 425	3 stuks	12 x 3 stuks	2140960
<b>PermaFoam® Tracheostomy</b> Steriel, afzonderlijk verpakt	8 x 8 cm	8 x 8 cm	409 426	10 stuks	6 x 10 stuks	2140978
<b>PermaFoam® Sacral</b> Steriel, afzonderlijk verpakt	22 x 22 cm	14,5 x 12,5 cm	409 423	3 stuks	6 x 3 stuks	2140945
	22 x 22 cm	14,5 x 12,5 cm	409 430	10 stuks	6 x 10 stuks	2167674
<b>PermaFoam® Concave</b> Steriel, afzonderlijk verpakt	16,5 x 18 cm	10,5 x 12 cm	409 424	3 stuks	6 x 3 stuks	2140952
	16,5 x 18 cm	10,5 x 12 cm	409 429	10 stuks	6 x 10 stuks	2167682



Het verband moet zo worden aangebracht dat het 1 à 2 cm over de randen van de wond heen steekt. Hoe groter de wond, hoe meer overlapping nodig is. Indien nodig kan het verband op maat worden geknipt met een steriele schaar.

De witte kant moet naar de wond toe wijzen en de beige, gladde bovenkant moet van de wond afgekeerd zijn. PermaFoam® kan worden gefixeerd met fixatietape of een kousverband, afhankelijk van de locatie van de wond. PermaFoam® comfort wordt met behulp van de zelfklevende randen gefixeerd.

### Speciale informatie

PermaFoam® en PermaFoam® comfort mogen niet worden gebruikt in combinatie met oxidatiemiddelen zoals hypochloride-oplossingen of waterstofperoxide, omdat deze het schuim kunnen beschadigen. Als er oxidatiemiddelen moeten worden gebruikt, kan de wond na behandeling worden doorgespoeld met Ringer-oplossing of zoutoplossing. Daarna kan PermaFoam® worden aangebracht.

### Voordelen:

- Hoog absorptievermogen
- Eenvoudig in gebruik
- Zacht, comfortabel voor de patiënt
- Economisch
- Beschermt de wond
- In vele maten leverbaar

# Pur-Zellin®

## Celstofdepper op rol

Celstofdeppers op rol, voorgesneden 4 x 5 cm gebruiksklaar. Voor praktisch en hygiënisch gebruik is de Pur-Zellin-Box beschikbaar.

### Eigenschappen

Sterk absorberend cellulose. Door het aantal samengevoegde lagen heeft elke depper een goede trekvastheid.

### Materiaal

100% elementair chloorvrije, respectievelijk totaal chloorvrije, sulfaat - en sulfietcellulose.

Sterk gebleekte cellulose, steriel en onsteriel verkrijgbaar.

Pur-Zellin® is voorzien van het CE-merkteken volgens de EG-richtlijn 93/42/EEG over medische hulpmiddelen. Het product is als medisch hulpmiddel klasse I ingedeeld.

### Indicatie en aanbrenging

Onsteriel: Als absorberend polster bij klein letsel en voor vele werkzaamheden in het laboratorium.

### Voordelen:

- Rollen van 500 stuks die passen in de dispenser
- Gebruiksklaar
- Praktisch
- Hygiënisch

Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijsseenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>Pur-Zellin®</b> onsteriel, in zak	4 x 5 cm	143 213	1 rol van 1 x 500 stuks	doos van 16 rollen	2764959
<b>Pur-Zellin®-Box</b> leeg		996 857	1 omdoos van 1 stuk		0391219



# Pütterbinde®

## Korte-rek-compressiezwachtel

Pütterbinde® is een windsel met korte rek, bedoeld voor de behandeling van aandoeningen waarbij een hoge werkdruk vereist is, bijvoorbeeld veneuze beenulcera, lymfoedeem en chronische veneuze stase.

### Eigenschappen

Zeer sterke, korte-rekzwachtel met een rek van +/-90%. Hoge arbeidsdruk met lage rustdruk. Ook bij langdurig aangebrachte zwachtels aanhoudende compressie. Pütterbinde® is een verband van 100% katoen daardoor is dit verband huidvriendelijk en luchtdoorlatend. Het verband is wasbaar bij 95 °C en steriliseerbaar (autoclaaf bij 134 °C).

### Materiaal

Pütterbinde® is gemaakt van 100% katoen en is luchtdoorlatend. Het windsel kan tot wel 25 keer worden gewassen bij 95 °C.

De Pütterbinde® is voorzien van het CE-merkteken volgens de Europese richtlijn 93/42/EEG over medische hulpmiddelen. Het product is als medisch hulpmiddel klasse 1 ingedeeld.

### Indicatie en aanbrenging

Voor zeer sterke compressie; bij gescleroseerde varices, bij alle acute en chronische veneuze stuwingsoedemen, ulcera cruris en tromboflebitis.

### Voordelen:

- Zeer sterk met een rek van +/-90%

Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>Pütterbinde®</b> afzonderlijk verpakt	6 cm x 5m	931 807	1 stuk	40 x 1 stuk	1595370
	8 cm x 5m	931 808	1 stuk	40 x 1 stuk	1532951
	10 cm x 5m	931 810	1 stuk	40 x 1 stuk	1532969



# Pütter-haft®

## Cohesieve korte-rek-compressiezwachtel

Cohesieve korte-rekzwachtel met een elasticiteit van ongeveer 60%. Cohesief aan beide zijden voor een perfecte pasvorm. Zeer hoge werkdruk en een lage rustdruk. Ook te gebruiken voor personen met een sedentaire levensstijl. Luchtdoorlatend. Autoclaveerbaar bij 134 °C. Huidkleurig.

### Eigenschappen

De zwachtel hecht aan zichzelf, maar niet aan huid, haar of kleding. Door de structuur van het materiaal zakt de zwachtel niet af. Het open geweven materiaal is luchtdoorlatend, wat het risico van maceratie vermindert.

Pütter-haft is gemakkelijk aan te brengen, omdat het zacht en goed te draperen is. Als de zwachtel te lang is, kan hij gewoon worden afgeknipt zonder dat de randen beginnen te rafelen.

Pütter-haft kan tijdens een röntgenonderzoek gewoon blijven zitten, omdat het de straling niet tegenhoudt. Normaliter kan de zwachtel 's nachts worden verwijderd en 's ochtends opnieuw worden aangebracht.

Om het beste resultaat te bereiken, verdient het aanbeveling dunne benen eerst in watten te wikkelen tot ze een normale dikte hebben.

### Materiaal

100% katoen. Bevat geen latex. Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel, klasse I, niet steriel. Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG. Lengte, uitgerekt: 5 m. Lengte, niet uitgerekt: ca 3,1 m.

Elasticiteit: 60%. Pütter-haft kan in een autoclaaf bij 134 °C worden gesteriliseerd.

### Indicatie en aanbrenging

Voor sterke compressie bij chronisch veneus oedeem, genezen beenulcera, tromboflebitis of ter ondersteuning bij amputaties en spier- en gewrichtsletsel. Voor het fixeren van verbanden en gipsspalken. Als sportbandage. Contra-indicaties: arteriële occlusieve ziekte.

Bewaar de rol van een nieuwe zwachtel en wikkel de zwachtel er na gebruik weer omheen, zodat hij opnieuw gemakkelijk kan worden aangebracht.

Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>Pütter-haft®</b> Per stuk verpakt in doos	6 cm x 5 m	931 840	1 stuk	96 x 1 stuk	3070653
	8 cm x 5 m	931 841	1 stuk	72 x 1 stuk	3070661
	10 cm x 5 m	931 842	1 stuk	64 x 1 stuk	3070679

### Voordelen:

- Hecht aan zichzelf, maar niet aan huid of haar
- Het open geweven materiaal is ademend
- Optimaal draagcomfort
- Geen aanvullende fixatie nodig
- Tal van toepassingsmogelijkheden
- Luchtdoorlatend
- Sterk
- Geschikt voor hergebruik



# RespoSorb® Super

## Superabsorberend kompres

RespoSorb® Super neemt exsudaat en wondsecret snel op, ook onder compressie, houdt het in de absorberende kern vast, voorkomt maceratie en zorgt voor een vochtig wondmilieu. RespoSorb® Super heeft niet alleen een sterk absorberende werking, maar zorgt ook voor een goede polstering van de wond.

Doordat RespoSorb® Super extra vocht kan opnemen, hoeft het verband minder frequent te worden vervangen; dat bevordert de rust van de wond en biedt extra bescherming tegen contaminatie.

RespoSorb® Super is een samengesteld absorberend verband dat uit vier verschillende materiaalagen bestaat, is rondom gesloten en heeft afgeronde hoeken. De wondzijde van het verband bestaat uit een zeer zacht hydrofoob vlies dat verkleving met de wond voorkomt. De kern van het kompres wordt gevormd door zachte celstofvlokken, die vermengd zijn met polyacrylaat polymeren die vloeistof vasthouden. Deze absorberende kern wordt omgeven door een dun vlies, dat de vloeistof gelijkmatig verdeelt. De buitenzijde van het verband bestaat uit een groen polypropyleenvlies dat waterafstotend en tegelijkertijd luchtdoorlatend is en gasuitwisseling toelaat.

### Eigenschappen

RespoSorb® Super neemt exsudaat en wondsecret snel op, ook onder compressie, houdt het in de absorberende kern vast, voorkomt maceratie en zorgt voor een vochtig wondmilieu. RespoSorb® Super heeft niet alleen een sterk absorberende werking, maar zorgt ook voor een goede polstering van de wond.

### Materiaal

- Wondzijde: hydrofiel non-woven PA/Viscose (55/45%)
- Absorberende kern: hydrofiel cellulose vezels + superabsorberende polymeren (SAP)
- Tissue: hydrofiel cellulose
- Buitenzijde: hydrofoob non-woven 100% PP

Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>RespoSorb® Super</b> steriel, per stuk verpakt	10 x 10 cm	685 020	10 stuks	6 x 10 stuks	3674058
	10 x 20 cm	685 021	10 stuks	6 x 10 stuks	3674066
	15 x 20 cm	685 022	10 stuks	6 x 10 stuks	3674074
	20 x 25 cm	685 023	10 stuks	6 x 10 stuks	3674082
	20 x 40 cm	685 024	10 stuks	5 x 10 stuks	3674090

### Indicatie en aanbrenging

RespoSorb® Super is speciaal geschikt voor de behandeling van oppervlakkige, sterk exsudatieve acute of chronische wonden.

Plaats RespoSorb® Super met de witte zijde op de wond zodat de groene non-woven laag zich niet langs de zijde naar de wond toe bevindt.

Het product kan niet op maat worden geknipt.

### Voordelen:

- Zeer sterk absorberend
- Houdt exsudaat vast
- Geen maceratie
- Hoog draagcomfort





# Rolta soft®

## Synthetische wattenrollen

Rolta® soft is een zachte synthetische wattenrol.

### Eigenschappen

Bijzonder zacht en huidvriendelijk, weinig volumineus, lucht- en exsudaatdoorlatend, temperatuurregulerend.

### Materiaal


Niet-absorberende, gekrulde 100% polyestervezels.

### Indicatie en aanbrenging

Als polstermateriaal onder gips-, steun- en drukverbanden, als polstermateriaal onder spalken of tubulaire verbanden; bijzonder geschikt voor patiënten met een gevoelige huid.

Contra-indicaties en voorzorgsmaatregelen:

- mag niet gebruikt worden bij intolerantie voor het materiaal
- voorzichtig bij patiënten met huidziekten

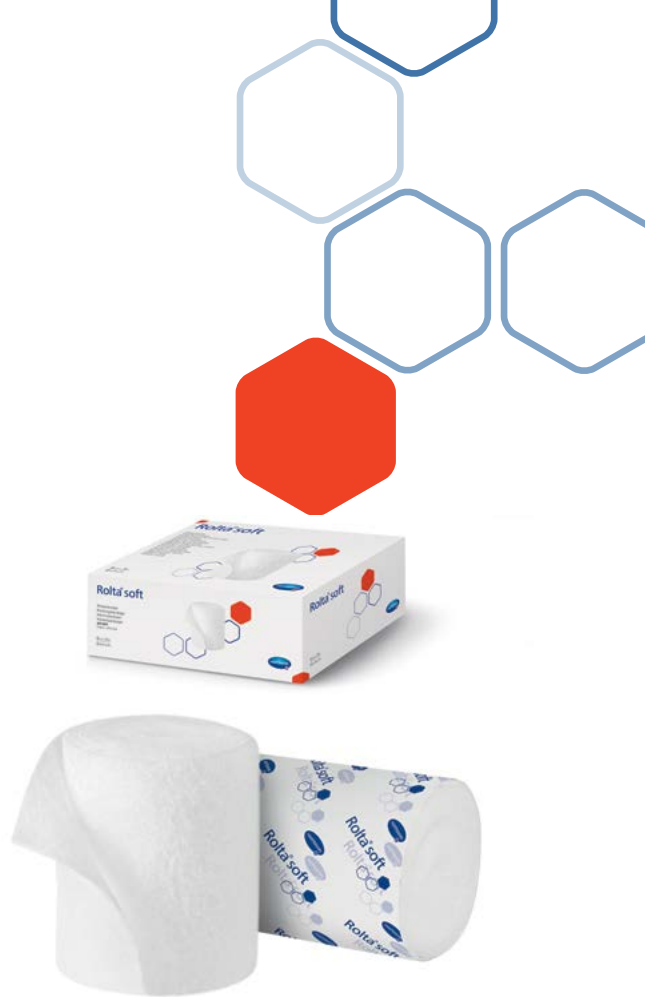

Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>Rolta® soft</b> per stuk met banderol verpakt	6 cm x 3 m	932 048	50 stuks	1 x 50 stuks	1099654
	10 cm x 3 m	932 049	30 stuks	1 x 30 stuks	1099662
	15 cm x 3 m	932 050	20 stuks	1 x 20 stuks	1099670
	25 cm x 3 m	932 051	10 stuks	1 x 10 stuks	1099688

### Voordelen:

- Zacht en huidvriendelijk
- Kan zonder plooiën aangelegd worden door rekbaarheid in lengte en breedte,
- Gemakkelijk aan te leggen
- Met de hand afscheurbaar
- Steriliseerbaar met damp, ethyleenoxide en door straling.
- Lucht- en exsudaatdoorlatend

# Soft-Zellin®

## Alcoholdepper

Voor een injectie moet de huid altijd grondig worden gereinigd. Daarvoor zijn per stuk verpakte, gebruiksklare deppers erg handig.

### Eigenschappen

Soft-Zellin®-alcoholdeppers bestaan uit een gaasje van 30 x 60 mm dat eenmaal gevouwen is, zodat de verpakking 30 x 30 mm meet. Een eenheid bestaat uit twee afzonderlijk verpakte doekjes die door een perforatie gemakkelijk van elkaar te scheiden zijn.

### Materiaal

Non-woven van 30% PET (polyethyleentereftalaat), 70% viscose, doordrenkt met 0,4 g isopropylalcohol (70%). Per stuk verpakt in aluminiumfolie. Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse I, niet steriel. Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EEG.

### Indicatie en aanbrenging

Voor het reinigen van de huid voor een subcutane injectie. Contra-indicaties: intramusculaire of intraveneuze injecties.

### Subcutane injectie

Bij een subcutane injectie wordt het medicijn in het onderhuidse vetweefsel gespoten. Van daaruit wordt de werkzame stof opgenomen in het bloed en vervolgens via het bloed in het lichaam verspreid. Subcutane injecties werken doorgaans langzaam en met een constante snelheid. Insuline, dat door diabetici wordt gebruikt, is een voorbeeld voor een subcutaan toegediend medicijn.



Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>Soft-Zellin®</b> steriel, per stuk verpakt	30 x 60 mm	999 979	100 stuks	20 x 100 stuks	2491553

### Voordelen:

- Veilige reiniging
- Zacht
- Eenvoudig in gebruik
- Economisch

# Sorbalgon® (T)

## Wondbedekker met calciumalgiinaatvezels

Sorbalgon® is een calciumalgiinaatverband met een hoog absorberend vermogen. Zodra Sorbalgon® in contact komt met de zouten in exsudaat en bloed, vormt zich een gel die helpt de wond te beschermen en het overtollige exsudaat en bacteriën opsluit.

De gel heeft een hydraterende werking en creëert zo een milieu dat bevorderend is voor de genezing. Effectief exsudaatbeheer is van groot belang, omdat exsudaat niet alleen de huid rondom de wond kan beschadigen, maar ook het genezingsproces belemmert als deze fase te lang duurt.

### Eigenschappen

Sorbalgon® heeft een zeer hoge absorptiecapaciteit en kan ongeveer 20 keer het eigen gewicht opnemen. Wanneer Sorbalgon® in contact komt met de zouten in wondexsudaat en bloed, vormt het een gel. De gel sluit bacteriën op en voorkomt zo dat ze de wond aanvallen, waardoor een beter genezingsmilieu wordt gecreëerd. De gel voorkomt ook dat het product zich vasthecht aan de wond. Indien bij het verwijderen een restant van de wondbedekker achterblijft, wordt dit door het lichaam geresorbeerd.

De gelachtige consistentie van Sorbalgon® heeft hetzelfde effect als een vochtig verband en voorkomt dat de wond uitdroogt. Het vochtig houden van de wond bevordert het genezingsproces. Sorbalgon® is verkrijgbaar als rechthoekig kompres in verschillende formaten. Voor diepe wonden is Sorbalgon® ook verkrijgbaar als tamponadestrook, herkenbaar aan de T achter de naam.

### Materiaal

99% calciumalgiinaat en 1% polysorbaat. Sorbalgon® bevat geen werkzame bestanddelen. Het product is als medisch hulpmiddel klasse IIb ingedeeld

### Indicatie en aanbrenging

Voor alle wonden met secreetvorming, zowel acute als chronische. Bijvoorbeeld graftlocaties, neusbloedingen, nageextracties, abscessen, beenulcera of decubitus, maar ook wonden na een (tumor)chirurgische ingreep. Contra-indicaties: niet bekend.

Wanneer Sorbalgon® wordt gebruikt voor diepe wonden, moet de wondholte losjes worden opgevuld, omdat de algiinaatvezels uitzetten als ze wondexsudaat opnemen. Een te stevig opgevulde wondholte kan leiden tot pijn en schade, omdat het vulmateriaal tegen de wondranden drukt. Sorbalgon® kan worden gefixeerd met een folieverband, een hydrocolloïd verband of een absorberend verband.

Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>Sorbalgon®</b> steriel, per stuk verpakt	5 x 5 cm	999 598	10 stuks	20 x 10 stuks	1232958
	10 x 10 cm	999 584	3 stuks	15 x 3 stuks	1527514
	10 x 10 cm	999 595	10 stuks	10 x 10 stuks	1232966
	10 x 20 cm	999 589	5 stuks	8 x 5 stuks	1527522
<b>Sorbalgon® T</b> steriel, per stuk verpakt	2 g / 30 cm	999 592	5 stuks	10 x 5 stuks	1300144

### Voordelen:

- Hoog absorptievermogen
- Hemostatisch
- Behoudt een nat milieu
- Heel zacht en conformeerbaar
- Veilige reiniging
- Eenvoudig in gebruik
- Economisch



# Sterilux® ES

## Gaaskompres

Sterilux® ES is een zacht gaaskompres met een goed absorptievermogen. Sterilux® ES is geschikt voor het reinigen en verschoneren van wonden.

### Eigenschappen

De gaaskompressen zijn zacht en luchtdoorlatend. De kompressen zijn in 8 lagen gevouwen en kunnen dus worden uitgevouwen om een groter, dunner formaat te krijgen. ES betekent dat de kompressen gesneden zijn en ingevouwen randen hebben. Dit voorkomt dat de kompressen rafelen.

Omschrijving	draads/lagen	Afmeting	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>Sterilux® ES</b> Steriel verpakt per stuk	17 draads, 8 lagen	5 x 5 cm	401 121	40 x 1 stuk	28 x (40 x 1 stuk)	0192294
	17 draads, 8 lagen	7,5 x 7,5 cm	401 123	20 x 1 stuk	20 x (20 x 1 stuk)	0192385
	17 draads, 8 lagen	10 x 10 cm	401 125	12 x 1 stuk	20 x (12 x 1 stuk)	0192450
	17 draads, 12 lagen	10 x 20 cm	400 402	5 x 1 stuk	20 x (5 x 1 stuk)	0099580
<b>Sterilux® ES</b> Steriel verpakt per 2 stuks	17 draads, 8 lagen	5 x 5 cm	418 551	25 x 2 stuks	60 x (25x 2 stuks)	2994739
	17 draads, 8 lagen	7,5 x 7,5 cm	418 554	25 x 2 stuks	36 x (25 x 2 stuks)	2994747
	17 draads, 8 lagen	10 x 10 cm	418 557	25 x 2 stuks	24 x (25 x 2 stuks)	2994754
<b>Sterilux® ES</b> Steriel verpakt per 3 stuks	17 draads, 8 lagen	10 x 10 cm	916 015	40 x 3 stuks	10 x (40 x 3 stuks)	0391391
	17 draads, 8 lagen	7,5 x 7,5 cm	915 418	40 x 3 stuks	15 x (40 x 3 stuks)	0391375
	17 draads, 12 lagen	10 x 10 cm	418 035	15 x 10 stuks	10 x (15 x 10 stuks)	*
	17 draads, 16 lagen	10 x 10 cm	418 545	20 x 5 stuks	10 x (20 x 5 stuks)	*
	17 draads, 8 lagen	10 x 20 cm	418 559	25 x 5 stuks	15 x (25 x 5 stuks)	*
	17 draads, 12 lagen	7,5 x 7,5 cm	418 533	25 x 5 stuks	15 x (25 x 5 stuks)	2593796
	17 draads, 8 lagen	5 x 5 cm	915 252	50 x 3 stuks	30 x (50 x 3 stuks)	0288985
<b>Sterilux® ES</b> Steriel verpakt per 5 stuks	17 draads, 8 lagen	5 x 5 cm	400 845	40 x 5 stuks	30 x (40 x 5 stuks)	0227439
	17 draads, 8 lagen	7,5 x 7,5 cm	400 908	30 x 5 stuks	15 x (30 x 5 stuks)	0391383
	17 draads, 12 lagen	7,5 x 7,5 cm	418 535	25 x 5 stuks	15 x (25 x 5 stuks)	2593796
	17 draads, 12 lagen	10 x 10 cm	400 860	30 x 5 stuks	10 x (30 x 5 stuks)	0498444
<b>Sterilux® ES</b> onsteriel, in steriliseerbare papieren zakken	17 draads, 8 lagen	5 x 5 cm	418 800	100 stuks	30 x 100 stuks	1180280
	17 draads, 8 lagen	7,5 x 7,5 cm	418 802	100 stuks	10 x 100 stuks	1181163
	17 draads, 8 lagen	10 x 10 cm	418 804	100 stuks	10 x 100 stuks	1180454
	17 draads, 12 lagen	5 x 5 cm	418 806	100 stuks	30 x 100 stuks	1180306
	17 draads, 12 lagen	7,5 x 7,5 cm	418 807	100 stuks	10 x 100 stuks	1180314
	17 draads, 12 lagen	10 x 10 cm	418 809	100 stuks	10 x 100 stuks	1180330
	17 draads, 12 lagen	10 x 20 cm	418 810	100 stuks	10 x 100 stuks	1180348
	17 draads, 16 lagen	10 x 10 cm	418 813	100 stuks	10 x 100 stuks	*
<b>Sterilux® oog-kompres</b> Steriel verpakt per 2 stuks		56 x 70 mm	241 222	10 stuks	20 x 10 stuks	1609510

\*Model niet beschikbaar in apotheek



### Material

17-draads gaasweefsel van 100 % katoen, chloorvrij gebleekt. (ECF) De kompressen bevatten geen latex. Gefabriceerd in overeenstemming met EN 14079. Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel uit klasse IIa, steriel. Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EEG.

### Indicatie en aanbrenging

Voor de algemene verzorging, het verschoneren en het reinigen van wonden. Contra-indicaties: niet bekend.

### Voordelen:

- Pluist niet
- Eenvoudig in gebruik
- Economisch

# Stülpa-fix®

## Zeer elastisch kousverband

Stülpa-fix® is een uitermate elastisch kousverband voor snelle en eenvoudige fixatie van verbanden ter bescherming van de huid tegen kleefmassa of stevige druk. Door de gasvormige structuur is het verband gemakkelijk aan te brengen, ook op lastige lichaamsdelen zoals de oksel.

### Eigenschappen

Stülpa-fix® is een zeer elastisch kousverband met een hoog katoengehalte. Het product is zeer geschikt voor duurzame en veilige fixatie van verbanden zonder de beweeglijkheid te beperken. Het verband kan heel gemakkelijk worden verwisseld zonder dat het kousverband moet worden verwijderd. De huid komt niet in aanraking met lijm en wordt niet blootgesteld aan hoge druk. Door de uitstekende rekbaarheid is Stülpa-fix® snel en gemakkelijk aan te brengen. Stülpa-fix® kan in alle richtingen worden geknipt zonder dat het gaat ladderen.

### Materiaal

68% katoen, 24% polyamide, 8% polyurethaan. Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse I, niet steriel. Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG. Elasticiteit in de lengte: 95%  
Elasticiteit in de breedte: 800%. Lengte in uitgerekte toestand: ca. 25 meter. Indien nodig kan het verband in een autoclaaf worden gesteriliseerd bij 134 °C.

### Indicatie en aanbrenging

Te gebruiken als huidvriendelijk fixatieverband op alle lichaamsdelen. Contra-indicaties: niet bekend.



Omschrijving	Aanduiding	Afmeting (ongerekt)	Functionele maat	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
Stülpa-fix® per stuk verpakt in doos	Maat 1	1 cm x 25 m	Vinger	932 541	1 x 25 m	24 X 25 m	0817247
	Maat 2	2 cm x 25 m	Hand/arm/ kindervoet/ kinderbeen	932 542	1 x 25 m	16 x 25 m	0198200
	Maat 3	3 cm x 25 m	Voet/been/ kinderhoofd	932 543	1 x 25 m	12 x 25 m	0809996
	Maat 4	5 cm x 25 m	Hoofd, kinderromp	932 544	1 x 25 m	8 x 25 m	0817254
	Maat 5	6,5 cm x 25 m	Romp	932 545	1 x 25 m	6 x 25 m	0817262
	Maat 6	8,5 cm x 25 m	Grote romp	932 546	1 x 25 m	4 x 25 m	0392902

### Voordelen:

- Kan in alle richtingen worden geknipt zonder dat het product gaat ladderen
- Eenvoudig en snel aan te brengen
- Elasticiteit in de breedte: 800%
- Optimaal draagcomfort
- Tal van toepassingsmogelijkheden
- Luchtdoorlatend
- Bevat geen latex

# Tamponadebinde

## Gaaswiek

Voor het tamponneren van kleine wonden en lichaamsopeningen.

### Eigenschappen

De zelfkant met doorlopende inslagdraad garandeert de beveiliging tegen uitrafelen.

Kan gebruikt worden in combinatie met vloeistoffen, vetstoffen, gels enz. indien deze voorgeschreven zijn voor de zorg.

Steriel verpakt in doosje van polystyreen/polyethyleen met dubbel deksel.

### Materiaal

24-draads verbandgaas uit 100% katoen, met zelfkanten.

### Indicatie en aanbrenging

Tamponeren van kleine wonden, lichaamsopeningen en fistels.

Indien de wielengte niet vooraf gekend is kan rechtstreeks aanbrengen vanuit de verpakking.

De volledig opgerolde wiek kan dankzij de speciale verpakking voor het gebruik worden geïmpregneerd op steriele wijze.



### Voordelen:

- Vloeistof kan worden toegevoegd zonder desterilisatie
- Handige veilige verpakking

Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>Tamponadebinde</b> Steriel, afzonderlijk verpakt	1 cm x 5 m	370 800	1 stuk	36 x 1 stuk	0067017
	2 cm x 5 m	370 801	1 stuk	36 x 1 stuk	0067207

# Tensocrepe®

## Elastische crêpezwachtel

Crêpezwachtel, ecru, met rode bias

### Eigenschappen

Waarborgt een veilige verbandfixatie, kleeft op zichzelf en niet op haren, huid of kleding. Luchtdoorlatend en huidvriendelijk, mag gesteriliseerd worden.

Tensocrepe is voorzien van het CE-merkteken volgens de Europese richtlijn 93/42/EG en als medische hulpmiddel uit klasse 1 geclassificeerd.

### Materiaal

100% katoen  
85 gr/m<sup>2</sup>

### Indicatie en aanbrenging

Fixatiezwachtel voor de fixatie van alle verbanden.

### Voordelen

- Veilige verbandfixatie
- Luchtdoorlatend en huidvriendelijk
- Mag gesteriliseerd worden

Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijs-eenheid	Verzend-eenheid	CNK
<b>Tensocrepe®</b> verpakt per stuk	5 cm x 4 m	935110	1 stuk	150 x 1 stuk	0111054
	7 cm x 4 m	935111	1 stuk	105 x 1 stuk	0111591
	10 cm x 4 m	935112	1 stuk	75 x 1 stuk	0111963
	15 cm x 4 m	929 067	1 stuk	48 x 1 stuk	0067306
	20 cm x 4 m	929068	1 stuk	36 x 1 stuk	0067330



# Urgentieverband

## Hoogelastische fixatiezwachtel met wondkompres

Het steriele verbandpakje omvat een fixatiezwachtel met wondkompres.

### Eigenschappen

Zeer elastische fixatiezwachtel met een licht absorberend non-woven kompres van 10 cm lang en even breed als de zwachtel. (8 of 10 cm).  
Het kompres situeert zich op de zwachtel na circa 30 cm afrollen.

### Materiaal

- Zwachtel: scheringweefsel met inslagdraden, zelfkant 30% polyamide, 70% viscose
  - Kompres non-woven: 57% viscose, 17% PES, 26% PES/PP
- De sterilisatie met stoom gebeurt op 134°.

### Indicatie en aanbrenging

Verbandpakje voor de wondverzorging in de eerste hulp, bijvoorbeeld als steriel wondverband, als drukkussen voor de bloedstelping.



Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijs-eenheid	Verzend-eenheid	CNK
<b>Urgentieverband</b> verpakt per stuk	medium	780 822	1 stuk	doos à 400 stuks	0068627
	large	780 823	1 stuk	doos à 360 stuks	0068643

### Voordelen:

- Combinatie van afdekking en fixatie zonder kleven.
- Snel toepasbaar
- Kan overal op het lichaam worden gebruikt



# Varolast® Plus

## Zinklijmzwachtel

Extra vochtige gebruiksklare zinklijmzwachtel, rekbaar in de lengte, nauwkeurig, zonder plooivorming en insnoeren aan te leggen. Huidvriendelijk, droogt snel.

### Eigenschappen

Elasticiteit: In de lengte ca. 65%

De fijne structuur van het weefsel samen met de unieke buigzaamheid van de zinkpasta zorgen ervoor dat elke omzwachteling met een constante druk gebeurt voor een geschikte compressie en een comfortabel verband dat minimale vernauwing veroorzaakt. Nadat Varolast® Plus is aangelegd is het een gefixeerd, semi-star en permanent verband dat aan alle behoeften van een succesvolle compressietherapie beantwoordt.

### Materiaal

Drager: 69% viscose, 31% polyamide (glad materiaal)

Massa: zinkoxide, glycerine, extra vochtig

### Indicatie en aanbrenging

Voor snelle ontlasting en afname van volhardend oedeem, behoudt vlakke en gelijkmatige druk tijdens lange periode bij flebitis van de diepe en oppervlakkige aders, vervolgbehandeling na trombose, eveneens geïndiceerd voor behandeling van droge ulcera cruris; als ondersteunend verband bij algemene orthopedie en na orthopedische chirurgie.

Geschikt voor de nazorg van fracturen en als ondersteuning van het houdings- en bewegingsapparaat.

Nauwkeurig, zonder plooivorming en insnoeren aan te leggen.



Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>Varolast® Plus</b> per stuk gecellofaneerd in doosje	10 cm x 10 m	931 585	1 stuk	20 x 1 stuk	1702158
	10 cm x 7 m	931 583	1 stuk	20 x 1 stuk	1702141
	8 cm x 5 m	931 582	1 stuk	16 x 1 stuk	1702133

### Voordelen:

- Gebruiksklaar
- Zonder plooivorming en insnoeren aan te leggen
- Droogt snel
- Huidvriendelijk

# Verba® / Verba® E

## Elastisch steunverband

Bij buikoperaties en andere zware ingrepen in het rompgebied is van belang dat de patiënt vroegtijdig weer wordt gemobiliseerd. Dat kan moeilijk zijn, omdat dit doorgaans spanning geeft op de wond met een weefselbreuk als gevolg. Verba® kan dit voorkomen. Doordat het verband gelijkmatige druk uitoefent op de romp en de wond, kan de patiënt binnen de kortste keren weer opstaan.

### Eigenschappen

Het verband is rekbaar in de lengte en stabiel in dwarsrichting, waardoor een uniforme drukverdeling over het gehele oppervlak wordt verkregen. Ook bij sterke compressie wordt de ademhaling niet belemmerd. Door de hoge kruisstabiliteit blijft het verband stevig en ontstaan er geen vervelende kreukels of onregelmatigheden. Verba® is heel eenvoudig in gebruik. De patiënt hoeft niet te worden opgetild, wat bij het aanleggen van een zwachtel wel nodig is, en dat is minder belastend voor zowel de patiënt als het personeel. Dankzij de klittenbandsluiting is het verband gemakkelijk te vervangen. De klittenbandriem biedt een extra instellingsmarge van maximaal 10 cm bij alle verbandmaten. Zo kan Verba® altijd exact en met een individueel afgestemde compressie worden aangelegd. Als een langer verband nodig is, kunnen meerdere Verba®-verbanden worden gecombineerd. De gekleurde streep op het verband geeft duidelijk de maat aan en vergemakkelijkt het sorteren na het wassen. Het is mogelijk om een uitsparing voor een stoma in het Verba-verband te knippen om de stoma te kunnen verzorgen of om het verband aan te passen aan de lichaamsvorm.

### Materiaal

Verba®: 41% polyamide, 33% katoen, 18% viscose en 8% polyurethaan.

Verba® E: 60% polyamide, 20% viscose en 20% elastaan.

De producten zijn geclassificeerd als medisch hulpmiddel, klasse I, niet steriel. Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EEG.

### Indicatie

Voor postoperatieve wonden na een thorax- of buikoperatie, om de wond te ontzien. Voorkomt littekenbreuk bij vroegtijdige mobilisatie. Gewone hernia, stomabreuk, spit.

Contra-indicaties: niet bekend.

### Wasinstructies

Verba® kan 10 tot 20 keer worden gewassen bij 95 °C, Verba® E maximaal 10 keer. De klittenbandsluiting moet tijdens het wassen gesloten zijn.

Omschrijving	Formaat	Func-tiematen	Hoogte	Art.-nr.	Prij-seen-heid	Verzend-eenheid	CNK
Verba® per stuk verpakt in doos	Maat 1	65 - 75 cm	25 cm	932 531	1 stuk	15 x 1 stuk	800805
	Maat 2	75 - 85 cm	25 cm	932 532	1 stuk	15 x 1 stuk	800813
	Maat 3	85 - 95 cm	25 cm	932 533	1 stuk	15 x 1 stuk	800821
	Maat 4	95 - 105 cm	25 cm	932 534	1 stuk	15 x 1 stuk	816363
	Maat 5	105 - 115 cm	25 cm	932 535	1 stuk	15 x 1 stuk	815753



### Voordelen:

- Stevig
- Gemakkelijk aan te passen
- Aangenaam op de huid
- Eenvoudig in gebruik
- Meerdere keren te gebruiken
- Optimaal draagcomfort
- Economisch, tijdbesparend

# Zetuvit® E

## Absorberend verband

Zetuvit® E is een absorberend verband voor matig tot sterk exsuderende wonden. Het verband bestaat uit vier verschillende materiaallagen die elkaar optimaal aanvullen en waaraan het verband zijn positieve eigenschappen ontleent.

### Eigenschappen


Het verband heeft een uitstekend absorptievermogen en neemt exsudaat snel op. Het verband is goed te combineren met andere soortenverbanden zoals zelfkompresen of calciumalginaten.

### Materiaal

Zetuvit® E bestaat uit vier lagen. De absorberende kern bestaat uit watten van cellulose en wordt omhuld door een dunne non-woven laag van cellulose die de vloeistof gelijkmatig verdeelt over het verband. De achterzijde met de blauwe kleurmarkering bestaat uit non-woven polypropyleen dat bestand is tegen vocht, maar toch luchtdoorlatend en niet occlusief is. Dit voorkomt dat door het exsudaat klonten in het verband ontstaan. De voorkant bestaat uit hydrofiel, niet-geweven polypropyleen dat voorkomt dat het verband vastplakt aan de wond. Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse I. Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EEG.

### Indicatie

Alle oppervlakkige, matig tot sterk exsuderende wonden, zoals chirurgische wonden of veneuze beenulcera. Kan bij diepe wonden worden gecombineerd met bijvoorbeeld Sorbalgon®. Bij geïnfecteerde wonden dan wel wonden met een hoog infectierisico kan het verband met Atrauman® Ag worden gecombineerd. Zetuvit® E mag niet worden gebruikt voor droge wonden, op blootliggend bot- en spierweefsel en pezen.

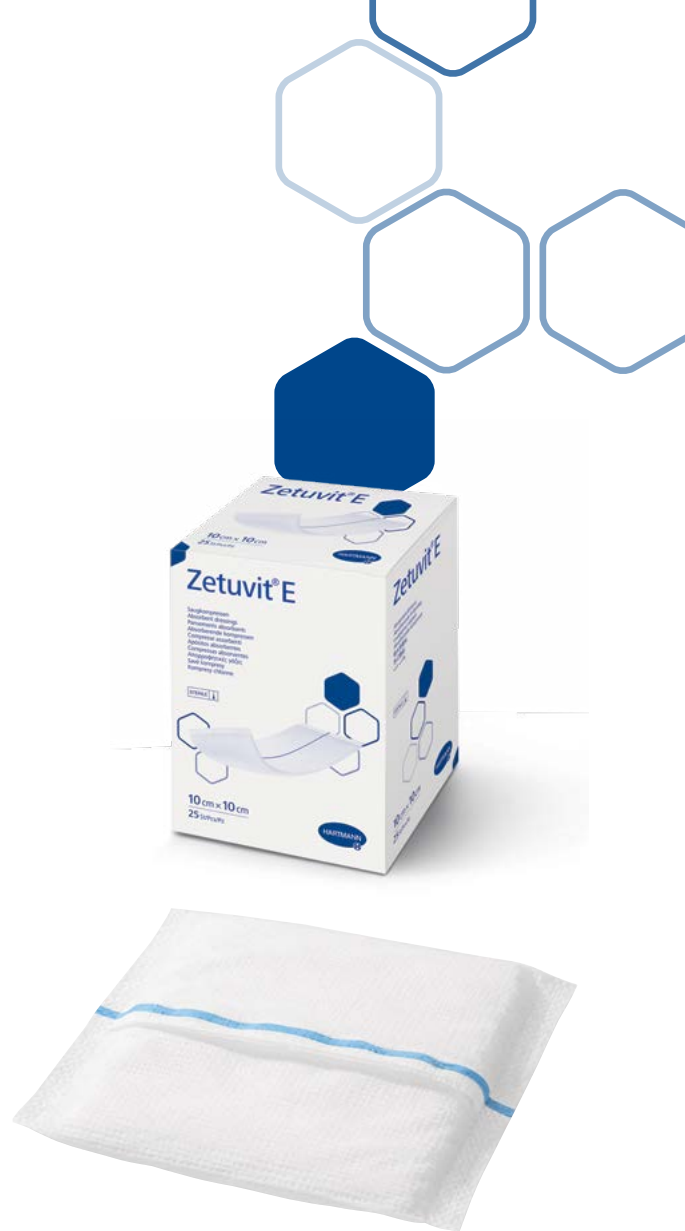

Omschrijving	Afmeting	Art.-nr.	Prijseenheid	Verzendeenheid	CNK
<b>Zetuvit® E</b> Steriel, afzonderlijk verpakt	10 x 10 cm	413 770	25 stuks	9 x 25 stuks	2113785
	10 x 20 cm	413 771	25 stuks	9 x 25 stuks	2113793
	15 x 20 cm	413 772	25 stuks	6 x 25 stuks	2113801
	15 x 25 cm	413 773	10 stuks	10 x 10 stuks	2113819
	20 x 20 cm	413 774	15 stuks	7 x 15 stuks	2113827
	20 x 25 cm	413 775	15 stuks	6 x 15 stuks	2113835
	20 x 40 cm	413 776	10 stuks	6 x 10 stuks	2113843
	10 x 20 cm	413 779	5 stuks	12 x 5 stuks	2164911
	10 x 10 cm	413 784	10 stuks	6 x 10 stuks	2164903
<b>Zetuvit® E</b> Onsteriel, afzonderlijk verpakt	10 x 10 cm	413 860	50 stuks	12 x 50 stuks	2113710
	10 x 20 cm	413 861	50 stuks	4 x 50 stuks	2113728
	15 x 20 cm	413 862	50 stuks	4 x 50 stuks	2113736
	15 x 25 cm	413 863	50 stuks	3 x 50 stuks	2113744
	20 x 20 cm	413 864	50 stuks	4 x 50 stuks	2113751
	20 x 25 cm	413 865	50 stuks	4 x 50 stuks	2113769
	20 x 40 cm	413 866	30 stuks	4 x 30 stuks	2113777

### Instructies voor het fixeren

Zetuvit® E kan al naargelang de plaats van de wond worden vastgezet met een zwachtel, tape, een kousverband of een fixeernet.

### Voordelen:

- Het verband heeft een uitstekend absorptievermogen en neemt exsudaat snel op
- Watten van cellulose maken het verband zacht en zorgen voor een goede dempende werking
- Dankzij de blauwe markeringen is het risico dat het verband verkeerd wordt aangebracht gering
- Economisch
- De hydrofiële voorkant zorgt ervoor dat het verband niet aan de wond vastplakt
- De hydrofobe achterzijde beschermt de wond tegen contaminatie.
- In vele maten leverbaar